

Kom godt i gang med Tobii C-Series



Kom godt i gang med C-Series

Denne vejledning vil hjælpe dig med at konfigurere og komme i gang med at bruge C-Series-enheden.

C-Series-enheden har et indbygget bordstativ. Bordstativet kan foldes ud, så C-Series-enheden kan stå selv eller foldes ind, så det er muligt at bruge enheden, når den ligger fladt på et bord. Bordstativet skal foldes ind, når C-Series-enheden bæres i skulderremmen.

C-Series-enheden er endvidere kompatibel med flere forskellige monteringsystemer. Bordstativet skal afmonteres inden montering af et andet beslag. Der findes yderligere oplysninger i brugervejledningen til monteringsystemet.

Isætning af batterier

Tryk på knappen "push" på batteriets bagside for at kontrollere batteriniveauet. (Se A) De grønne lys angiver i procent, hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet.

Bemærk: Batterierne er "hot swap"-batterier og kan udskiftes og/eller erstattes med et ekstra sæt C-Series-batterier. Bemærk endvidere, at batterierne leveres halvt opladede.

Læg C-Series-enheden med bagsiden opad på en plan flade, så skærmen ikke ridses. Sæt batteriet i på bagsiden af enheden. Gummifødderne på batteriet sættes i til sidst og skal vende, så de sidder på enhedens underkant. Der lyder et klik, når batterierne glider på plads. (Se B, C, D)

Ved udtagning af batterierne lægges C-Series-enheden med bagsiden opad på en plan overflade. Skub gummifødderne på batteriet fra hinanden med begge hænder. Der lyder et klik, når de løsnes. Løft batteriet op og ud af enheden.






C-Series-enheden leveres med bordstativet påmonteret.

⚠ Bordstativet er ikke beregnet til brug sammen med CI5-enheden eller med CEye-modulet monteret.



Isætning af batterier og kontrol af batteriniveauet.

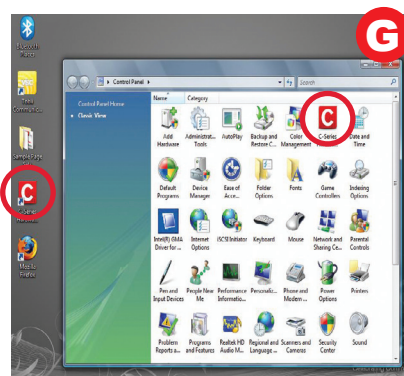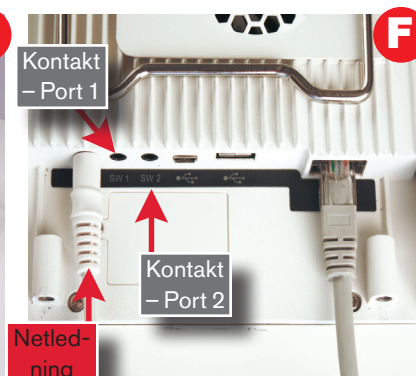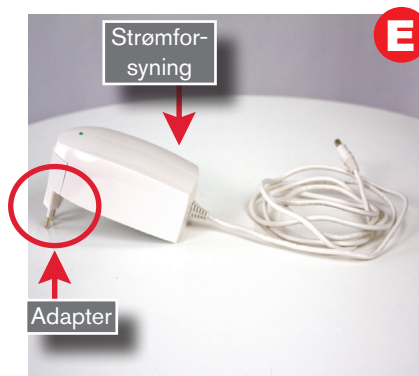

Sådan tændes C-Series-enheden

1. Slut enheden til strømmen ved at sætte adapteren i stikkontakten. (Se E)
2. Sæt den anden ende af netledningen i bunden af C-Series-enheden. (Se F)

Bemærk: Nye batterier leveres halvt opladede.

3. Tryk på knappen på højre side af C-Series-enheden for at tænde den. To grønne lys blinker kort i hver side af skærmen. Det angiver, at enheden er ved at starte.

4. Første gang enheden startes, vises der nogle sikkerhedsoplysninger. Læs oplysningerne, og følg anvisningerne.

F.eks.: Når enheden startes første gang, er højttalerne deaktiverede, da de er yderst effektive og kan spille meget højt. Det er nødvendigt at læse og acceptere en ansvarsfraskrivelse, inden højttalerne aktiveres.

Konfiguration af adgangs-metode

Det er muligt at få adgang til C-Series-enheden på flere forskellige måder: via berøringsskærm, via berøring med en fingerguide, med en kontakt eller via øjenstyring. Brugen af fingerguides og øjenstyring forudsætter køb heraf forinden. Oplysninger om, hvordan disse

elementer installeres findes i brugervejledningen.

Konfiguration af adgang via berøringsskærm

Berøringsskærmen på C-Series-enheden skal kalibreres for at sikre optimal adgang. Sådan kalibreres berøringsskærmen: Åbn menuen C-Series hardwareindstillinger via genvejen på skrivebordet. (Se G) Vælg Berøringsskærm. Klik på Kalibrer. Følg dernæst anvisningerne på skærmen.

Konfiguration af øjenstyring

Hvis C-Series-enheden skal bruges sammen med øjenstyring, er det nødvendigt at købe et CEye-modul. Der følger en Kom godt i gang-vejledning med CEye-modulet, der forklarer, hvordan CEye bruges sammen med C-Series.

Konfiguration af kontaktstyret scanning

C-Series har to kontaktporte til kontaktstyret scanning. Sæt kontakten i den korrekte kontaktport. Enkeltkontaktbrugere skal slutte kontakten til port 1. (Se F)

Hvis du vil aktivere kontakten til at tænde og slukke C-Series-enheden, skal du åbne **C-Series hardwareindstillinger > Kontakter** og markere de passende afkrydsningsfelter. (Se H på næste side)

Hvis du vil programmere kontakten til at simulere et tastetryk, skal du åbne **C-Series hardwareindstillinger > Kontakter** og vælge Angiv handling i højre side af skærmen.

Bemærk: Hvis kontakten er indstillet til at simulere et tastetryk, skal indstillingerne for tasteinput være de samme som i scanningsindstillingerne for kommunikationssoftwaren, hvis scanning er den aktuelle inputmetode.

Tilpasning af indstillinger

Indstillinger af lydstyrke, baggrundslys, licenser, trådløse enheder og andre hardwarefunktioner foretages via menuen **Start i Windows > Kontrolpanel (Klassisk visning) > C-Series hardwareindstillinger** eller ved at dobbeltklikke på genvejen C-Series hardwareindstillinger på skrivebordet. (Se G)

Vælg menupunktet i venstre side af C-Series hardwareindstillinger for at foretage ændringer af hardwaren på din enhed. Dialogboksen indeholder en beskrivelse af de pågældende funktioner. (Se H på næste side)

Indstillinger af genvejsknapper

De tre knapper på siden af C-Series-enheden kan tilpasses til at udføre en lang række handlinger. Vælg Angiv handling til højre for knap A i menuen **C-Series hardwareindstillinger > Knapper**.

Bemærk: I denne menu kan du også deaktivere knappen, så den ikke udfører nogen handling ved at vælge "Der er ikke valgt nogen handling". Du kan også vælge andre handlinger for at se de forskellige funktioner for den enkelte handling. Der findes detaljerede beskrivelser af alle handlinger i brugervejledningen til C-Series.

Kommunikationssoftware

C-Series-enheden leveres med forudinstalleret kommunikationssoftware.

Gør følgende, hvis kommunikationssoftwaren ikke starter med det samme: Dobbeltklik på genvejen til softwaren på skrivebordet i Windows. Du kan også åbne programmet via menuen Start/Programmer.

Sådan indstilles kommunikationssoftwaren til at starte automatisk, når C-Series startes:


1. Åbn menuen Start i Windows.
2. Vælg Alle programmer
3. Højreklik på Start
4. Vælg Åbn
5. Træk genvejen til kommunikationssoftwaren fra skrivebordet til mappen Start.

(Se I)



Sådan lukkes C-Series-enheden

Luk alle programmer for at lukke C-Series-enheden. Åbn menuen Start i Windows, og rør ved pilen i nederste højre hjørne. Vælg Luk computeren. (Se J)

Bemærk: Det er også muligt at programmere en af knapperne i siden eller kontakten til at foretage lukningen.

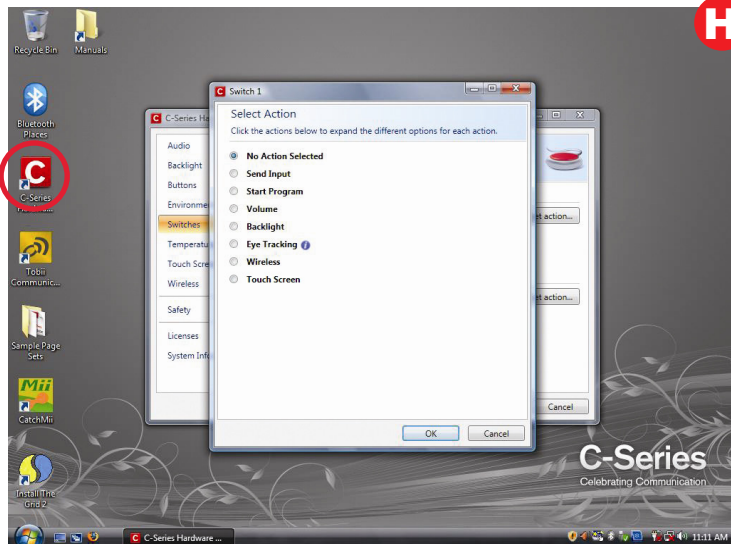

Tilpasning af kontaktindstillinger under C-Series hardwareindstillinger.

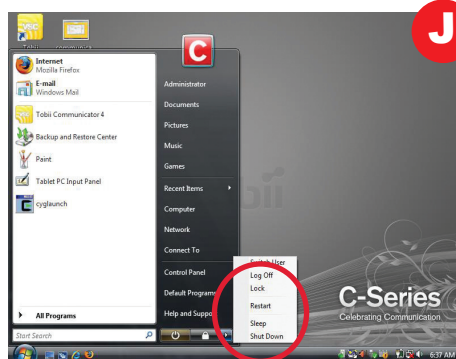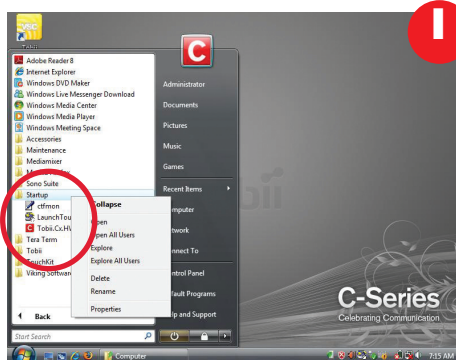

EMEA

Tobii Technology AB
Karlsrovägen 2D
S-182 53 Danderyd
Sverige
Tlf.: +46 8 663 69 90
Fax: +46 8 30 14 00
sales@tobii.com

CENTRALEUROPA

Tobii Technology GmbH
Niedenau 45
D-60325 Frankfurt am Main
Tyskland
Tlf.: +49 69 24 75 03 40
Fax: +49 69 24 75 03 429
sales.de@tobii.com

NORGE

Tobii Norge
Thormøhlens gate 55
N-5008 Bergen
Norge
Tlf.: +47 55 55 10 60
Fax: +47 55 55 10 61
sales.no@tobii.com

ASIEN

Tobii Technology, Ltd.
3-4-13 Takanawa, Minato-ku
Tokyo 108-0074
Japan
Tlf.: +81-3-5793-3316
Fax: +81-3-5793-3317
sales.jp@tobii.com

NORDAMERIKA

Tobii ATI
333 Elm Street
Dedham, MA 02026
Gratisnummer: 800-793-9227
Tlf.: 781-461-8200
Fax: 781-461-8213
Web: www.tobiiati.com
sales.us@tobii.com