

基本操作

- Tobii C-Series



C-Series の基本操作

本ガイドは、C-Series デバイスのセットアップおよび起動方法の説明を目的としています。

C-Series には、スタンドが同梱されています。スタンドは C-Series が直立できるように開いて使ったり、または折りたたんでデバイスをデスク上に平らに置いたりすることもできます。C-Series をショルダーストラップを使って身体に付けているときは、スタンドは折りたたんでください。

また、C-Series は様々な装着システムとの互換性があります。選択した装着ブラケットを取り付けるためには、スタンドを取り外す必要があります。詳細情報については、お使いの装着システムのユーザーズマニュアルを参照してください。

バッテリーの取り付け

バッテリーの電力レベルを確認するには、バッテリー背面の「プッシュ」ボタンを押します。(A を参照) 緑の光はバッテリー残量をパーセンテージで示します。

注記: バッテリーは「ホットスワップ可能」であり、C-Series バッテリーセットとの交換ができます。また、出荷時はバッテリーは半分のみ充電されていることに留意してください。

C-Series を傷などのない面に、画面を下にして置きます。バッテリーをデバイスの背面にスライドさせて取り付けます。バッテリーのゴム「足」は最後にスライドさせて入れます。これらはデバイスの下部になります。バッテリーが正しく取り付けられると、カチッという音がします。(B、C、D を参照)

バッテリーを取り外すには、C-Series を、画面を下にして安定した面に置きます。両手を使ってゴム足をスライドさせてバッテリーを外します。外れるとカチッという音がします。バッテリーを持ち上げてデバイスから取り出します。





C-Series デバイスには、折りたたみ式スタンドが同梱されています。

⚠ 折り畳み式スタンドは、C15 または CEye を装着して使用しないでください。



バッテリーの取り付けと電力レベルの確認

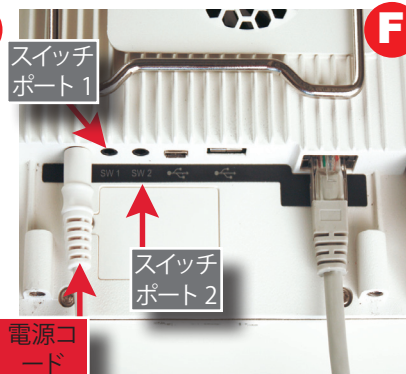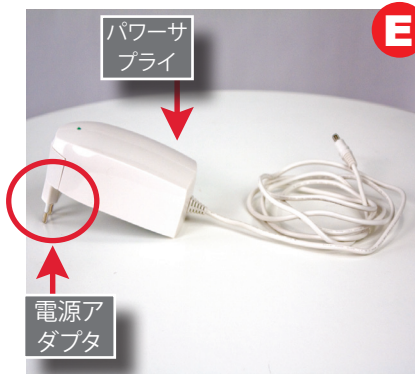

C-Seriesの電源を入れる

1. 電源アダプターをサブライに差し、パワーサプライを組立します。(Eを参照)

2. 電源コードを C-Series の下部に差し込みます。(Fを参照)

注記: 新しいバッテリーは半分のみチャージされています。

3. C-Series の上部右側のボタンを押してユニットの電源を入れます。緑色の2つのライトが画面の片側で短く点滅します。これはデバイスが起動中であることを示しています。

4. デバイスが初めて起動すると、安全に関する情報が表示されます。その情報を読み、指示に従います。

例: デバイスを初めて起動した際は、スピーカーはアクティブになっていません。これはスピーカーは極めてパワフルであり、高音で動作し得るためです。スピーカーをアクティブにするには、免責条項を読み、それに同意する必要があります。

アクセス方法のセットアップ

C-Series には、次のような様々な方法でアクセスできます: タッチアクセス、キーガード付きタッチアクセス、スイッチアクセス、または視線制御。キーガードや視線制御を利用するには、これらのアイテムを追加アイテムとして購入する

必要があります。これらのアイテムのインストール方法の詳細については、ユーザーズマニュアルを参照してください。

タッチアクセスのセットアップ

タッチスクリーンから C-Series にアクセスするには、タッチスクリーンのキャリブレーションを行います。タッチスクリーンのキャリブレーション方法: デスクトップのショートカットから [C-Series Hardware Options] メニューを開きます。(Gを参照) タッチスクリーンを選びます。[キャリブレーション] をクリックします。次に画面上の説明に従います。

Eye Control のセットアップ

C-Series デバイスを視線制御と共に使用する場合、CEye を購入する必要があります。CEye には、C-Series と CEye の併用に関する『基本操作ガイド』が同梱されています。

スイッチスキャンのセットアップ

C-Series にはスイッチスキャン用の2つのポートが装備されています。スイッチを適切なスイッチポートに差し込みます。シングルスイッチのユーザーの場合、スイッチをポート 1 に差し込みます。(Fを参照)

スイッチで C-Series デバイスの電源をオン/オフできるようにするには、C-Series Hardware Options > スイッチを開き、適切なボックスにチェックします。(次ページの H を参照)

スイッチをプログラムしてキーのプレスをエミュレートするには、C-Series Hardware Options > スイッチを開き、画面右側の [アクションの設定] を選びます。

注記: スイッチがキーのプレスをエミュレートするように設定されており、スキャンが入力方法の場合は、キーの入力設定は通信ソフトウェアのスキャン設定と同じにする必要があります。

設定の調整

音量、バックライト、ライセンス、ワイヤレスおよびその他のハードウェア機能の設定は、ウィンドウズスタートメニュー > コントロールパネル(クラシック表示) > C-Series Hardware Options、またはデスクトップの C-Series Hardware Options のショートカットから調整します。(Gを参照)

C-Series Hardware Options の左側のメニューアイテムを選択して、デバイスのハードウェアを調整します。機能の説明がダイアログボックスに表示されます。(次ページの H を参照)

クイックアクセスボタンの設定

C-Series デバイスの脇の3つのボタンは、様々なアクションを実行するようにカスタマイズすることができます。C-Series Hardware Options > ボタンメニューで、ボタン A の右方の [アクションの設定] を選択します。

注記: このメニューで「アクションを選択しない」を選択すると、ボタンのアクション実行を無効にすることができます。その代わりに、他のアクションを選択し、各アクションに対して可能な機能を表示させることができます。全てのアクションの詳細な説明については、『C-Series ユーザーズマニュアル』を参照してください。

通信ソフトウェア

C-Series デバイスには通信ソフトウェアがプリインストールされています(そのソフトウェアを購入した場合)。

通信ソフトウェアがすぐに起動しない場合。ウィンドウズ デスクトップ上のソフトウェアのショートカットをダブルクリックします。または、スタートメニュー/プログラムからソフトウェアを開きます。

C-Series 起動時に自動的に通信ソフトウェアが起動するように設定するには:


1. ウィンドウズ デスクトップで、[スタートメニュー]を開きます。
2. [すべてのプログラム]を選択します。
3. [スタートアップ]を右クリックします
4. [開く]を選択します
5. 通信ソフトウェアのショートカットをデスクトップから [スタートアップ] フォルダにドラッグします。

(I を参照)



終了

C-Series を終了するには、すべてのプログラムを閉じます。ウィンドウズ デスクトップで、[スタートメニュー]を開き、下部、右方にある矢印に触れます。[終了]を選択します。(J を参照)

注記: あるいは、サイドボタンの1つまたはスイッチを終了用にプログラムすることができます。

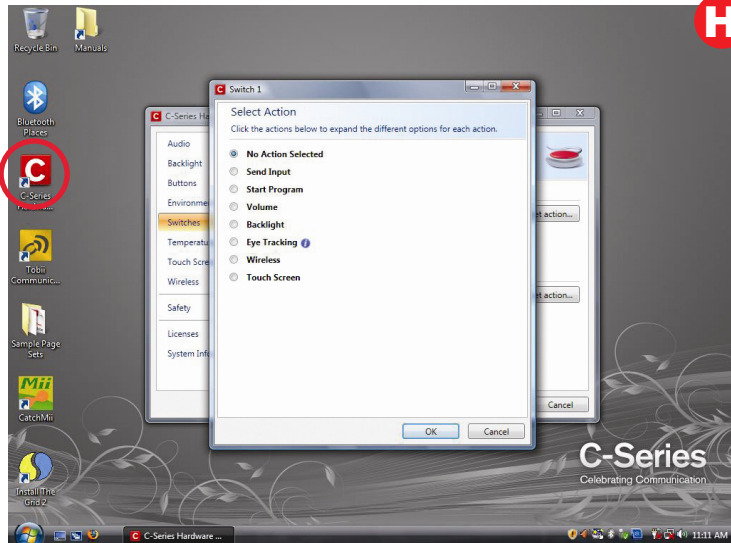

C-Series Hardware Options でのスイッチ設定の調整。

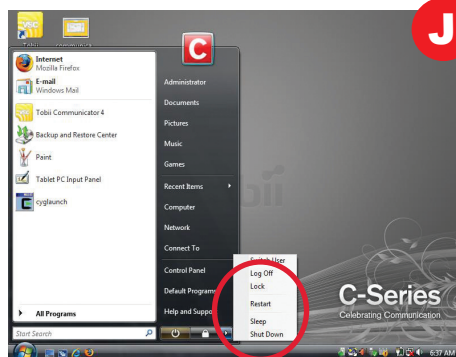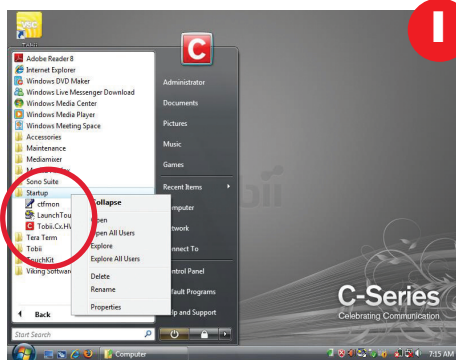

© Tobii. 図や仕様は、各地域の市場で提供される製品およびサービスに必ずしも当てはまる訳ではありません。技術仕様は予告なしに変更されることがあります。その他の全ての商標は各所有者に属します。

EMEA
Tobii Technology AB
Karlsrovägen 2D
S-182 53 Danderyd
スウェーデン
電話: +46 8 663 69 90
ファックス: +46 8 30 14 00
sales@tobii.com

中央ヨーロッパ
Tobii Technology GmbH
Niedenau 45
D-60325 Frankfurt am Main
ドイツ
電話: +49 69 24 75 03 40
ファックス: +49 69 24 75 03 429
sales.de@tobii.com

ノルウェー
Tobii Norge
Thormøhlens gate 55
5008 Bergen
ノルウェー
電話: +47 55 55 10 60
ファックス: +47 55 55 10 61
sales.no@tobii.com

アジア
Tobii Technology, Ltd.
東京都港区高輪3-4-13 アソル
ティ高輪4F
〒108-0074
日本
電話: +81-3-5793-3316
ファックス: +81-3-5793-3317
sales.jp@tobii.com

北米
Tobii ATI
333 Elm Street
Dedham, MA 02026
フリーダイヤル: 800-793-9227
電話: 781-461-8200
ファックス: 781-461-8213
ウェブサイト: www.tobiati.com
sales.us@tobii.com

tobii
www.tobii.com