

Kom godt i gang-vejledning

Kom godt i gang med Tobii CEye



tobii

Celebrating Communication

Kom godt i gang-vejledning til Tobii CEye

Ret til ændring af indholdet uden forudgående varsel forbeholdes.
Besøg Tobii's websted www.tobii.com for at se, om der findes en opdateret udgave af denne vejledning.

Vejledningsversion 1.4

09/2011

Alle rettigheder forbeholdes.

© Tobii Technology AB

Oplysningerne i dette dokument tilhører Tobii Technology.
Gengivelse af hele eller dele af indholdet er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse fra Tobii Technology.

Patentnummer 7,572,008 i USA

Tobii_GettingStartedGuide_CEye_V1_4_01092011_DA

Epilepsiadvarsel:

Visse personer med fotosensitiv epilepsi kan få epileptiske anfald eller miste bevidstheden, når de udsættes for visse former for almindeligt forekommende blinkende lys eller lysmønstre. Dette kan ske, selvom personen ikke lider af epilepsi eller aldrig har haft epileptiske anfald. Et menneske med fotosensitiv epilepsi har sandsynligvis også problemer med tv-skærme, visse arkadespil og blinkende fluorescerende pærer. Disse personer kan få et anfald, når de ser visse billeder eller mønstre på en skærm, eller når de udsættes for lyskilderne fra en øjenstyringsenhed. Det anslås, at ca. 3-5 % af de mennesker, der har epilepsi, lider af den form for fotosensitiv epilepsi. Mange, der lider af fotosensitiv epilepsi, oplever en "aura" eller underlig fornemmelse, lige før anfaldet opstår. Hvis du føler dig underligt tilpas under brug, skal du se væk fra skærmen.

Kom godt i gang med CEye

Denne vejledning er beregnet som en hjælp til at konfigurere og komme i gang med at bruge CEye-enheden.

CEye er et modulært øjenstyringssystem, der kan fastgøres på din C-Series-enhed.

Montering af CEye-modulet

Sørg for, at C-Series-enheden er slukket, og at batterierne er taget ud. Læg C-Series-enheden med bagsiden opad på en plan flade, så skærmen ikke ridses. Skru CEye-modulet fast på C-Series-enhedens underkant med den Torx T10-skruetrækker, der fulgte med CEye-modulet. (se billederne til højre)

Når CEye-modulet er fastmonteret på C-Series-enheden, sættes batterierne i, og enheden tændes.





Indledende konfiguration af Eye Control-softwaren

Den software, der skal bruges til CEye-modulet, er Tobii Eye Control-pakken. Den nyeste version af softwaren findes på den USB-stick, der fulgte med CEye-modulet. Der findes detaljerede anvisninger i, hvordan den påkrævede software installeres fra USB-sticken i **Brugervejledning til Tobii C-Series > Tobii CEye-modul > Installation af Eye Control-softwaren fra en USB-stick**. Når installationen er fuldført, skal du åbne Tobii Eye Control-pakken for at få adgang til styringsstatus- og kalibreringsfunktionerne i Windows-miljøet. Vælg menuen **Start > Alle programmer > Tobii > Tobii Eye Control-pakke > Tobii Eye Control-indstillinger**. (se A)


Hvis Communicator er installeret på C-Series-enheden, skal du følge trinnene nedenfor:

1. Start Tobii Communicator.
2. Vælg "Indstillinger > Indstillinger for øjenstyring" på Velkomstsiden. (se B)

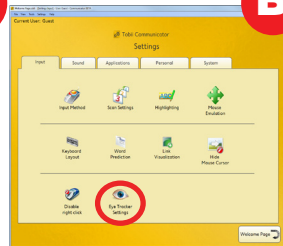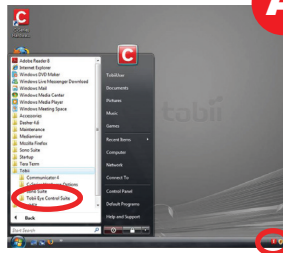

3. Vælg Styringsstatus i menuen Grundlæggende indstillinger. (se C)

Tip: Brug afstandsmåleren i højre side til at fastsætte den optimale afstand mellem brugeren og enheden. Det grønne område i midten er det ideelle afstandsområde.

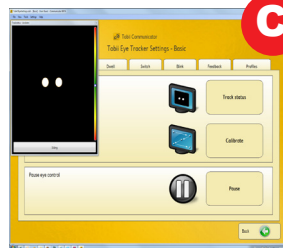

4. Vælg Kalibrer.

Kalibreringen gør det muligt for øjenstyringssystemet at tilpasse sig til personens individuelle øjenbevægelser. Der vises en sort skærm med et sigtekorn, som bevæger sig hen over skærmen. Brugeren skal følge sigtekornet med øjnene.

Tip: Vises der et felt med resultaterne fra øjenstyringskalibreringen, er det tegn på, at kalibreringen blev gennemført.


Der findes avancerede kalibreringsfunktioner under Tobii Eye Control-indstillinger.

Tilpasning af indstillinger

Brugeren kan få adgang til alle nedenstående Eye Control-indstillinger i Communicator under "Indstillinger for Tobii øjenstyring".

Indstillingerne kan også tilpasses under Tobii Eye Control-indstillinger. Der findes tre adgangsmetoder for øjenstyring: dvæle, blinke eller kontakt. (se D)

I. Dvæle. Her vælger brugeren en knap ved at lade blikket fokusere på knappen i et bestemt stykke tid. Dvæletiden kan indstilles under dvæleindstillinger.

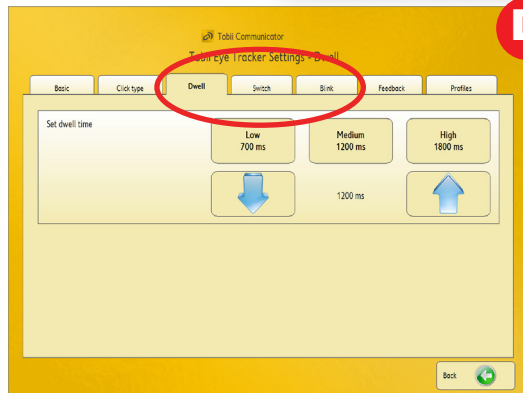

Tip: Nye brugere starter normalt med en dvæletid på ca. 1000 ms (= 1 sekund) eller en anelse højere. Efterhånden som brugere bliver mere fortrolige med dvæle-funktionen, kan dvæletiden reduceres, så de hurtigere kan få adgang til velkendt indhold.

2. Kontakt. Her vælger brugeren først en knap ved at fokusere på den med øjnene og trykker dernæst på en ekstern kontakt for at bekræfte valget af knappen. Parametrene for hvor lang tid, der skal trykkes på kontakten, indstilles under kontaktindstillinger.

3. Blink. Her skal brugeren fokusere på den ønskede knap og blinke for at bekræfte sit valg. Under blinkindstillinger er det muligt at indstille minimum- eller maksimumtiden, som øjet skal være lukket for at tælle som et blink.

Feedback

Feedbackindstillingerne tilpasser indstillingerne for den prik, brugeren ser, når han eller hun foretager et valg. Vælg prikens farve, størrelse og udseende i menuen Feedback. De forskellige typer feedback står ud for de tilsvarende øjenstyringsmetoder: kontakt, blinke, dvæle.

Disse indstillinger findes under Tobii Eye Control-indstillinger, og brugeren kan få adgang til dem via Tobii Communicator. (Se E)



Bemærk!: Mange synes, at det i begyndelsen er nemmest at starte med store og ikke alt for mange knapper, eller med et sidesætlayout, de kender i forvejen. Vi anbefaler endvidere, at man holder mange pauser, når man først går i gang med at bruge øjenstyring.

Tobii Support:

SVERIGE/HELE VERDEN

Tlf.: +46 8 522 950 10

support@tobii.com

www.tobii.com

Supports åbningstider: 8.00-18.00

Fra juli til august: 9.00 – 17.00

(centraleuropæisk tid, GMT+1)

TYSKLAND

+49 69 24 75 03 4-28

support@tobii.com

www.tobii.com

Supports åbningstider: 8.00-18.00

Fra juli til august: 9.00 – 17.00

(centraleuropæisk tid, GMT+1)

NORDAMERIKA

Gratisnummer: +1-800-793-9227

Tlf.: +1-781-461-8200

techsupport@tobiiATI.com

www.tobiiati.com

Supports åbningstider: 9.00-21.00

(USA (Øst), normalt tid)

JAPAN

+81-3-5793-3316

support.jp@tobii.com

www.tobii.co.jp

Supports åbningstider: 9.00-17.30

(GMT +9)

© Tobii®. Illustrationer og specifikationer svarer ikke nødvendigvis til de produkter og serviceydelser, der er tilgængelige på de enkelte lokale markeder. Ret til ændring af tekniske specifikationer uden forudgående varsel forbeholdes.
Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.

EMEA

Tobii Technology AB

Karlsrovägen 2D

S-182 53 Danderyd

Sverige

Tlf.: +46 8 663 69 90

Fax: +46 8 30 14 00

sales@tobii.com

CENTRALEUROPA

Tobii Technology GmbH

Niedenau 45

D-60325 Frankfurt am Main

Tyskland

Tlf.: +49 69 24 75 03 40

Fax: +49 69 24 75 03 429

sales.de@tobii.com

NORGE

Tobii Norge

Thormøhlens gate 55

N-5008 Bergen

Norge

Tlf.: +47 55 55 10 60

Fax: +47 55 55 10 61

sales.no@tobii.com

ASIEN

Tobii Technology, Ltd.

3-4-13 Takanawa, Minato-ku

Tokyo 108-0074

Japan

Tlf.: +81-3-5793-3316

Fax: +81-3-5793-3317

sales.jp@tobii.com

NORTH AMERICA

Tobii ATI

333 Elm Street

Dedham, MA 02026

Gratisnummer: 800-793-9227

Tlf.: 781-461-8200

Fax: 781-461-8213

Web: www.tobiiati.com

sales.us@tobii.com