

Kom i gang-guide

Komme i gang med Tobii CEye



tobii

Celebrating Communication

Kom i gang-guide for Tobii CEye

Innholdet kan endres uten varsel.

Gå til nettstedet til Tobii på www.tobii.com for å få oppdaterte versjoner av denne håndboken.

Håndbokversjon 1.4

09/2011

Med enerett.

© Tobii Technology AB

Tobii Teknologi er eier av informasjonen som dette dokumentet inneholder. Det er forbudt å gjengi deler av eller hele innholdet uten skriftlig forhåndstillatelse fra Tobii Technology.

US Patent 7, 572,008

Tobii_GettingStartedGuide_CEye_V1_4_01092011_NO

Epilepsiadvarel:

Noen personer med fotosensitiv epilepsi er mottakelige for epileptiske anfall eller tap av bevissthet hvis de blir utsatt for visse blinkende lys eller lysmønstre i dagliglivet. Dette kan skje selv om personen ikke har en epileptisk sykehistorie eller aldri har hatt epileptiske anfall. En person med fotosensitiv epilepsi har sannsynligvis også problemer med TV-skjermer, noen dataspill og blinkende fluorescerende lyspærer. Slike personer kan få anfall mens de ser spesielle bilder eller mønstre på en skjerm, eller når de blir utsatt for lyset fra øyestyringen. Det estimeres at rundt 3-5 % av mennesker med epilepsi har denne typen av fotosensitiv epilepsi. Mange personer med fotosensitiv epilepsi opplever en "aura" eller får merkelige fornemmelser før anfallet inntreffer. Hvis du ikke føler deg bra under bruk, flytt øynene bort fra øyestyringen.

Komme i gang med CEye

Denne håndboken er ment som en hjelp til å sette opp og begynne å bruke CEye.

CEye er et modulbasert øyestyringssystem som kan koples sammen med C-serieenheten din.

Kople til CEye

Påse at C-serieenheten er slått av og at batteriene er fjernet. Plasser C-serieenheten med fremsiden pekende ned på en jevn overflate. Bruk Torx I0-verktøyet som ble levert sammen med CEye for å skru CEye-modulen fast på nedre del av C-serieenheten. (se bildene til høyre)

Når CEye er godt festet til C-serieenheten, setter du inn batteriene og slår på enheten.





Første gangs oppsett av øyestyring

Nødvendig programvare for Tobii CEye-modulen er Tobii øyekontrollpanelet. Siste versjon av denne programvaren er lagret på en USB-minnepenn som leveres sammen med CEye. For detaljerte instruksjoner om hvordan du installerer påkrevd programvare fra USB-minnepennen, se **Bruerveiledning for Tobii C-serien > Tobii CEye-module> Installasjon av øyestyringsprogramvare fra USB-minnepenn**. Når installasjonen er ferdig åpner du Tobii Øyekontrollpanel for å få tilgang til styringsstatusvinduet og kalibreringsfunksjonene i Windows. Velg **Start > Alle programmer > Tobii > Tobii øyekontrollpanel > Alternativer for Tobii øyestyring**. (se A)


Dersom du har installert Communicator på C-serieenheten din, følg trinnene nedenfor:

1. Start Tobii Communicator.
2. På velkomstsiden velger du "Innstillinger > Innstillinger for øyestyring." (se B)
3. I menyen for grunnleggende innstillinger velger du styringsstatus. (se C)

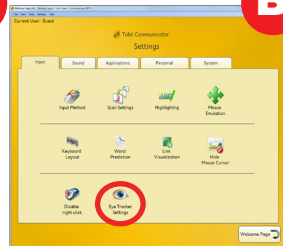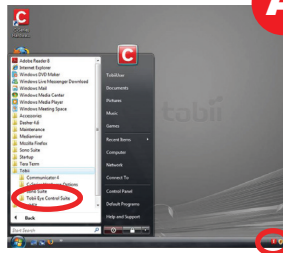

Tips: Bruk avstandsmåleren til høyre for å måle passende brukeravstand til enheten. Det grønne området i midten representerer den ideelle avstanden.

4. Velg kalibrer. Kalibrering lar øyestyrings-systemet tilpasse seg en

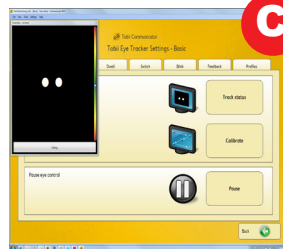

persons øyebevegelser. En tom skjerm vises, og et mål beveger seg over skjermen. Brukeren må følge målet med øynene.


Tips: Når du får en resultatboks med kalibreringsresultatene for styringsstatusen har du gjennomført en vellykket kalibrering.

Avanserte kalibreringsfunksjoner finnes i alternativer for Tobii øyestyring.

Justere innstillinger

Alle innstillingene for øyestyring som vises nedenfor er tilgjengelige i Communicator fra "Tobii øyestyringsinnstillinger". Disse innstillingene kan også justeres fra alternativer for Tobii øyestyring. Det er tre måter å få tilgang til øyestyringen på: fokusering, blinking, eller bryter. (se D)

1. Fokusering lar brukeren fokusere en bestemt tid på en knapp for å velge aktuell knapp. I fokuseringsinnstillingene velger du denne tiden.

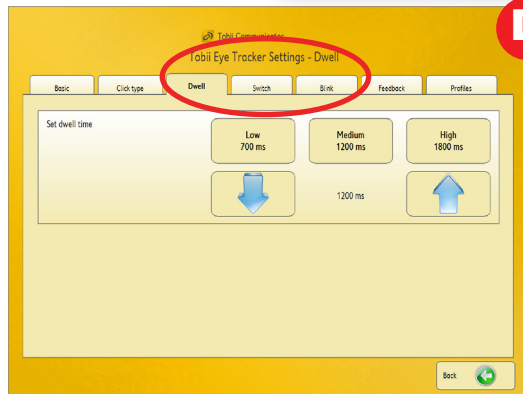

Tips: Nye brukere begynner som regel på 1000ms (=1 sekund) eller litt mer. Med trening og erfaring i bruk av fokusering, reduserer de fleste personer fokuseringstiden slik at de får tilgang til kjent innhold raskere.

2. Bryter lar brukeren se på en knapp for å velge denne og trykke på en ekstern bryter for å bekrefte valget av aktuell knapp. I bryterinnstillingene kan du velge hastighetsparametre for knappen som det skal trykkes på.

3. Blinking krever at personen ser på aktuell knapp og blunker for å bekrefte valget av denne. I blunkeinnstillingene kan du velge min.- og maks.verdier for blunket som gjelder for utførelsen.

Tilbakemelding

Innstillingene for tilbakemelding justerer prikken brukeren bruker når valg foretas. I denne menyen velger du prikkfarge, størrelse og type. Tilgjengelige tilbakemeldingstyper vises ved siden av øyestyringstypene de henger sammen med: fokusering, blinking, bryter.

Disse innstillingene finnes i alternativer for Tobii øyestyring, og er tilgjengelige via øyestyring fra Tobii Communicator.

(se E)



Merk: For mange mennesker som ikke er kjent med øyestyring er det enklest å starte med store og få knapper, eller med et kjent sideoppsett. Vi anbefaler også at det tas hyppige pauser første gang øyestyring brukes.

Tobii Support:

SVERIGE/INTERNASJONALT

Telefon: +46 8 522 950 10
support@tobii.com
www.tobii.com
Åpningstider: 8.00 - 18.00
Juli og august: 9.00 - 17.00
(CET, GMT +1)

TYSKLAND

+49 69 24 75 03 4-28
support@tobii.com
www.tobii.com
Åpningstider: 8.00 - 18.00
Juli og august: 9.00 - 17.00
(CET, GMT +1)

NORD-AMERIKA

Grønt nr.: +1-800-793-9227
Telefon: +1-781-461-8200
techsupport@tobiiATI.com
www.tobiiati.com
Åpningstider: 9.00 - 21.00
(Amerikansk østkysttid)

JAPAN

+81-3-5793-3316
support.jp@tobii.com
www.tobii.co.jp
Åpningstider: 9.00 - 17.30
(GMT+9)

© Tobii®. Illustrasjoner og spesifikasjoner gjelder ikke nødvendigvis produkter og tjenester som tilbys på alle lokale markeder. Tekniske spesifikasjoner kan endres uten varsel. Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne.

EMEA

Tobii Technology AB
Karlsrovägen 2D
S-182 53 Danderyd
Sverige
Telefon: +46 8 663 69 90
Faks: +46 8 30 14 00
sales@tobii.com

CENTRAL EUROPE

Tobii Technology GmbH
Niedenau 45
D-60325 Frankfurt am Main
Tyskland
Telefon: +49 69 24 75 03 40
Faks: +49 69 24 75 03 429
sales.de@tobii.com

NORGE

Tobii Norge
Thormøhlens gate 55
5008 Bergen
Norge
Telefon: +47 55 55 10 60
Faks: +47 55 55 10 61
sales.no@tobii.com

ASIA

Tobii Technology, Ltd.
3-4-13 Takanawa, Minato-ku
Tokyo 108-0074
Japan
Telefon: +81-3-5793-3316
Faks: +81-3-5793-3317
sales.jp@tobii.com

NORD-AMERIKA

Tobii ATI
333 Elm Street
Dedham, MA 02026
Grønt nr.: 800-793-9227
Telefon: 781-461-8200
Faks: 781-461-8213
Nett: www.tobiiati.com
sales.us@tobii.com