

Tobii Dynavox Gaze Viewer

Gebruikershandleiding



Gebruikershandleiding Tobii Dynavox Gaze Viewer

Versie 2.0.1

08/2017

Alle rechten voorbehouden.

Copyright © Tobii AB (publ)

Geen enkel deel van dit document mag worden gereproduceerd, opgeslagen in een opslagsysteem of doorgegeven in welke vorm of op welke wijze dan ook (elektronisch, met gebruik van fotokopieën en opnamen of anderszins) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

De geclaimde copyright-bescherming omvat alle vormen van auteursrechtelijk beschermd materiaal en auteursrechtelijk beschermde informatie volgens de wet of hierin toegestaan, inclusief en niet beperkt tot materialen gegenereerd door de software-programma's die op het scherm worden weergegeven, zoals schermweergaven en menu's.

De informatie in dit document is eigendom van Tobii Dynavox. Elke gedeeltelijke of gehele reproductie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tobii Dynavox is verboden.

Producten waarnaar in dit document wordt verwezen kunnen handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaren. De uitgever en de auteur maken geen aanspraak op deze handelsmerken.

Hoewel alle voorzorgsmaatregelen zijn genomen in de voorbereiding van dit document, zijn de uitgever en de auteur niet aansprakelijk voor fouten of weglatingen, noch voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie in dit document of uit het gebruik van programma's en eventuele bijbehorende broncode. De uitgever en de auteur kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies van winst of enige andere commerciële schade die direct of indirect is veroorzaakt of wordt vermeend te zijn veroorzaakt door dit document.

De inhoud kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Raadpleeg de website van Tobii Dynavox, www.TobiiDynavox.com, voor bijgewerkte versies van dit document.

Inhoudsopgave

1	Info Tobii Dynavox Gaze Viewer	4
1.1	Bedoeld gebruik.....	4
1.2	Systeemvereisten	4
2	Installeren, starten en licentiebeheer.....	6
2.1	Installeren van Tobii Dynavox Gaze Viewer	6
2.2	Licentiebeheer	6
2.2.1	Licentie activeren	6
2.2.2	Licentie deactiveren.....	7
2.3	Eerste keer opstarten.....	7
2.4	Het updaten van de Gaze Viewer software	7
3	De iconen in Tobii Dynavox Gaze Viewer	8
3.1	De iconen in de Tobii Dynavox Gaze Viewer Controller.....	8
3.2	De iconen in de Tobii Dynavox Gaze Viewer Editor & Afspelen	9
4	De Tobii Dynavox Gaze Viewer gebruiken	11
4.1	Tobii Dynavox Gaze Viewer Controller.....	11
4.1.1	Gaze en Geluid opnemen.....	11
4.1.2	Alleen Gaze Opnemen.....	11
4.1.3	Schakel Live Gaze Aan / Uit.....	11
4.2	Tobii Dynavox Gaze Viewer Editor & Afspelen	12
4.2.1	Tijdslijn Selectie.....	13
4.2.2	Opslaan van Afbeelding of Video.....	13
4.3	Instellingen	13
5	Instellingen Gaze Viewer	14
5.1	Gegevens Verzamelen	14
5.2	License Manager.....	14
5.3	Eye Tracker	15
5.3.1	Het tabblad Kalibratie	15
5.3.2	Het tabblad Geavanceerd	18

1 Info Tobii Dynavox Gaze Viewer

1.1 Bedoeld gebruik

De Tobii Dynavox Gaze Viewer is een krachtige, gemakkelijk te gebruiken applicatie die de professional in staat stelt om video's, afbeeldingen en geluid van een sessie op te slaan op een apparaat dat Eye Control en Gaze Interactie gebruikt. Het biedt aanpasbare terugspeelmogelijkheden met Warmtekaarten en Gaze-gegevensdiagrammen, bewaarde video's & afbeeldingen en zelfs "live gaze" gegevens over willekeurig welke applicatie heen om de benodigde informatie te geven voor het maken van simpele rapporten in verband met Eye Gaze beoordelingen, klinisch onderwijs, schoolwerk, begrijpend lezen, medisch inzicht en nog veel meer.

Een Gaze Diagram is een weergave van de beweging van het oog over het scherm, fixatie per fixatie. Elke "punt" van het Gaze Diagram wordt getekend wanneer er een "fixatie" van de gaze van de gebruiker op een bepaald punt van het scherm wordt geregistreerd. Elke fixatie wordt vertegenwoordigd door een stip van verschillende maten en door een getal, afhankelijk van de volgorde van de fixaties. De grootte van het Gaze Diagram-punt heeft betrekking op hoe lang een gebruiker op die specifieke plek heeft gefixeerd. Hoe groter de punt, hoe langer de fixatie, en daarmee aandacht, op die plek van het scherm.

Een warmtekaart is een weergave van de verschillende gebieden van het scherm waar de gebruiker de meeste tijd naar heeft gekeken. Zodra er een warmtekaart is gegenereerd worden er groen, geel, oranje en rood gekleurde gebieden op het scherm weergegeven die de focus van de gebruiker op bepaalde gebieden over de tijd representeren. De kleuren lopen geleidelijk over van groen naar geel naar oranje naar rood (in die volgorde) waarbij groen de minste aandacht voor een gebied betekent en rood het meeste. Dit betekent dat de Rode gebieden de "Hot spots" in de warmtekaart zijn en dus de gebieden zijn die de meeste aandacht hebben gekregen van de gebruiker en daarmee de meeste belangstelling.

1.2 Systeemvereisten

Component	Vereisten
Computer en processor	2,0 Gigahertz (GHz) of sneller, dual-core processor (aanbevolen minimum).
Geheugen (RAM)	4 gigabyte (GB) RAM (aanbevolen minimum).
Vaste schijf	450 megabyte (MB) beschikbaar
USB	USB 2.0
Software Compatibiliteit voor Eye Tracking	• Tobii Dynavox Gaze Interaction Software • Tobii Dynavox Gaze Point • Tobii Dynavox Windows Control
Besturingssysteem	Tobii Dynavox Gaze Viewer draait op zowel 32-bits en 64-bit versies van Microsoft Windows besturingssystemen. Wanneer u Tobii Dynavox Gaze Viewer van 32 bits uitvoert op een 64-bits versie van een Windows-besturingssysteem, wordt het programma uitgevoerd in de 32-bits laag van het Windows-besturingssysteem. • Windows 7 (32-bit¹ of 64-bit²) • Windows 8,1 (32-bits of 64-bits) • Windows 10 (32-bits of 64-bits)
.NET-versie	4,5
Eye Tracker	Elke eye tracker van Tobii Dynavox of Tobii Tech die Tobii Eye Tracking Core Software ondersteunt.
Aanvullende vereisten en overwegingen	Om de licentie te kunnen activeren is een internetverbinding nodig
Tobii kernsoftware voor oogbesturing	Versie 2.8 of later
1. wanneer gebruikt met Gaze Interactie Software 2. wanneer gebruikt met Gaze Interactie Software of Windows Control	

Opnemen vereist 500 MB vrije schijfruimte en wat extra ruimte voor het opslaan van uw videobestand. De gebruikte schijfruimte voor uw opnameprojecten is erg afhankelijk van uw systeem, de schermresolutie, de opnamelengte en of u alleen gaze en geluid of gaze opneemt. Een minuut opname vereist ongeveer 140 MB voor alleen Gaze en 165 MB voor Gaze en Geluid met een schermresolutie van 1920 × 1200.

2 Installeren, starten en licentiebeheer

2.1 Installeren van Tobii Dynavox Gaze Viewer

1. Ga naar www.tobiidynavox.com/dl/gaze-viewer en download de Tobii Dynavox Gaze Viewer software.
2. Installeer de Tobii Dynavox Gaze Viewer.
3. Volg de aanwijzingen op het scherm.

2.2 Licentiebeheer


2.2.1 Licentie activeren



De Tobii Dynavox Gaze Viewer kan op één (1) computer / apparaat tegelijk functioneren met dezelfde licentie.

Wanneer u Tobii Dynavox Gaze Viewer aanschaft ontvangt u een License Activation Key voor de software in de bestellingbevestiging e-mail.


Wanneer de Tobii Dynavox Gaze Viewer voor het eerst wordt uitgevoerd zal de **License Manager** starten.

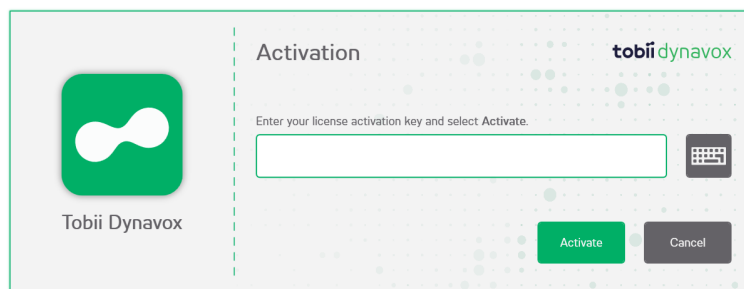

In het Licentie dialoogvenster wordt de actuele softwarepictogram weergegeven voor de licentie die wordt beheerd.

Uw **License Activation Key** kan worden gevonden in de bestellingbevestigingse-mail.

1. Controleer of de computer / het apparaat is verbonden met internet.
2. Voer de **License activation key**.
3. Selecteer de knop **Activeren**.

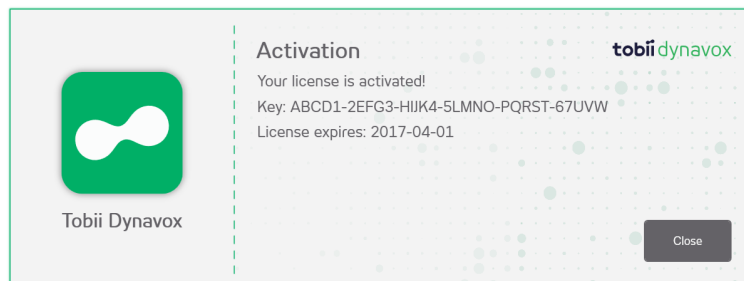

In het Licentie dialoogvenster wordt de actuele softwarepictogram weergegeven voor de licentie die wordt beheerd.

4. Selecteer de knop **Sluiten**.

2.2.2 Licentie deactiveren

Volg deze stappen om Tobii Dynavox Gaze Viewer te deactiveren.

1. Controleer of de computer/het apparaat is verbonden met internet.
2. Start Tobii Dynavox Gaze Viewer.
3. Selecteer de  (INSTELLINGEN) knop.
4. Selecteer de knop **Licentiebeheer openen**.
5. Selecteer de knop **Deactiveren**.



In het Licentie dialoogvenster wordt de actuele softwarepictogram weergegeven voor de licentie die wordt beheerd.

6. Selecteren:
 - **Ja** — om de licentie op dit apparaat te deactiveren.
 - **Nee** — om te annuleren.

2.3 Eerste keer opstarten

Wanneer Tobii Dynavox Gaze Viewer voor het eerst wordt gelanceerd wordt zal een configuratiegids de gebruiker begeleiden via de opstartconfiguratie van Tobii Dynavox Gaze Viewer. De stappen in de configuratiegids zijn:

- Stel het beeldscherm in. Voor meer informatie raadpleegt u [5.3.2.1 Instellingen Beeldscherm, pagina 18](#).
- Maak een nieuw profiel aan. Voor meer informatie raadpleegt u [5.3.1.1 Nieuw Profiel Aanmaken](#).
- Test kalibratie, Voor meer informatie, zie [5.3.1.3 Kalibratie testen](#)

2.4 Het updaten van de Gaze Viewer software

Tobii Dynavox brengt regelmatig bijgewerkte versies van de Gaze Viewer-software uit.

Tijdens de installatie van de Gaze Viewer-software, wordt de Update Notifier-software op het apparaat geïnstalleerd. De Update Notifier zal, als het apparaat is verbonden met internet, automatisch controleren op nieuwe versies van de Gaze Viewer-software en overige Tobii Dynavox-software die op het apparaat is geïnstalleerd.

U kunt handmatig controleren op nieuwe updates van de -software door de Update Notifier applicatie op het apparaat te lokaliseren en het pictogram  (Update Notifier) te selecteren om de applicatie te starten.

3 De iconen in Tobii Dynavox Gaze Viewer


3.1 De iconen in de Tobii Dynavox Gaze Viewer Controller





Afbeelding 3.1 Tobii Dynavox Gaze Viewer Controller


Symbool	Beschrijving	Symbool	Beschrijving
GAZE EN GELUID OPNEMEN (F7) 	Start een opname met zowel Gaze- als Geluidsgegevens.	STOP DE OPNAME (F7, F8) 	Stop de opname.
ALLEEN GAZE OPNEMEN (F8) 	Start een opname met alleen Gaze-gegevens.	ZET LIVE GAZE UIT (F9) 	Live Gaze is aan, schakel de knop om om de visuele live Gaze uit te zetten.
ZET LIVE GAZE AAN (F9) 	Live Gaze is uit, schakel de knop om om de visuele live Gaze uit te zetten.	INSTELLINGEN 	Tips en instellingen voor Tobii Dynavox Gaze Viewer. Voor meer informatie raadpleegt u <i>5 Instellingen Gaze Viewer, pagina 14</i> .

3.2 De iconen in de Tobii Dynavox Gaze Viewer Editor & Afspelen

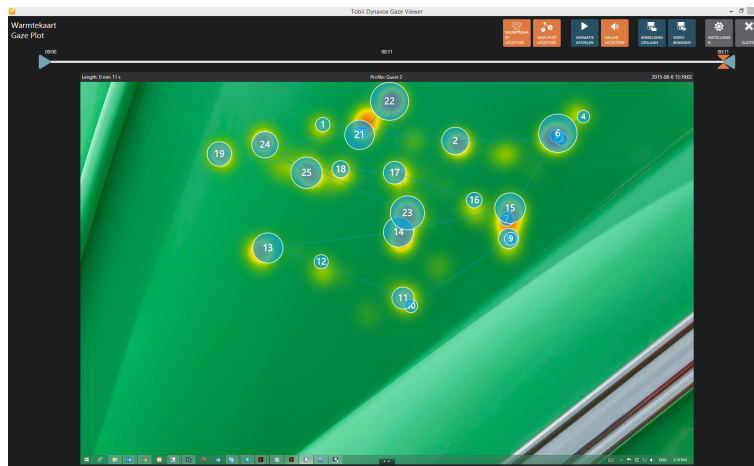


Afbeelding 3.2 Tobii Dynavox Gaze Viewer Editor & Afspele

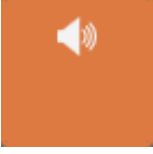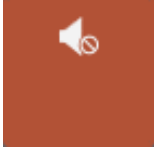Symbool	Beschrijving	Symbool	Beschrijving
WARMTEKAART UITZETTEN 	De warmtekaart is zichtbaar (standaard). Schakel de knop om om de warmtekaart uit te schakelen.	WARMTEKAART AANZETTEN 	De warmtekaart is niet zichtbaar. Schakel de knop om om de warmtekaart aan te schakelen.
GAZE PLOT UITZETTEN 	Het Gazediagram is zichtbaar (standaard). Schakel de knop om om het Gazediagram uit te schakelen.	GAZE PLOT AANZETTEN 	Het Gazediagram is niet zichtbaar. Schakel de knop om om het Gazediagram aan te zetten.
ANIMATIE AFspeLEN 	Selecteer de knop om de animatie te starten.	ANIMATIE STOPPEN 	Selecteer de knop om de animatie te stoppen.
GELUID UITZETTEN 	De opname is gemaakt met geluid en het geluid staat aan en wordt afgespeeld tijdens het afspelen van de animatie.	GELUID AANZETTEN 	De opname is gemaakt met geluid en het geluid staat uit en wordt niet afgespeeld tijdens het afspelen van de animatie.

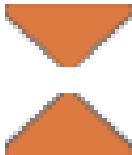Symbool	Beschrijving	Symbool	Beschrijving
GELUID AANZETTEN 	De opname is gemaakt zonder geluid.	AFBEELDING OPSLAAN 	Sla de opname op als een afbeelding zoals getoond wordt op het scherm.
VIDEO BEWAREN 	Sla de opname op als een video met de huidige tijdsinterval-instelling voor de opname.	INSTELLINGEN 	Hiermee opent u Instellingen-pagina. Voor meer informatie raadpleegt u <i>5 Instellingen Gaze Viewer, pagina 14</i> .
SLUITEN 	Sluit de Gaze Viewer Editor & Playback.	HANDVAT TIJDLIJN (Beginpunt) 	Beginpunt van de opname. Versleep het om het beginpunt van de opname te veranderen.
HANDVAT TIJDLIJN (Eindpunt) 	Eindpunt van de opname. Versleep het om het eindpunt van de opname te veranderen.	HANDVAT TIJDLIJN (Specifiek tijdstip) 	Actuele tijdstip in de opname. Versleep het om het actuele tijdstip te wijzigen.

4 De Tobii Dynavox Gaze Viewer gebruiken

4.1 Tobii Dynavox Gaze Viewer Controller

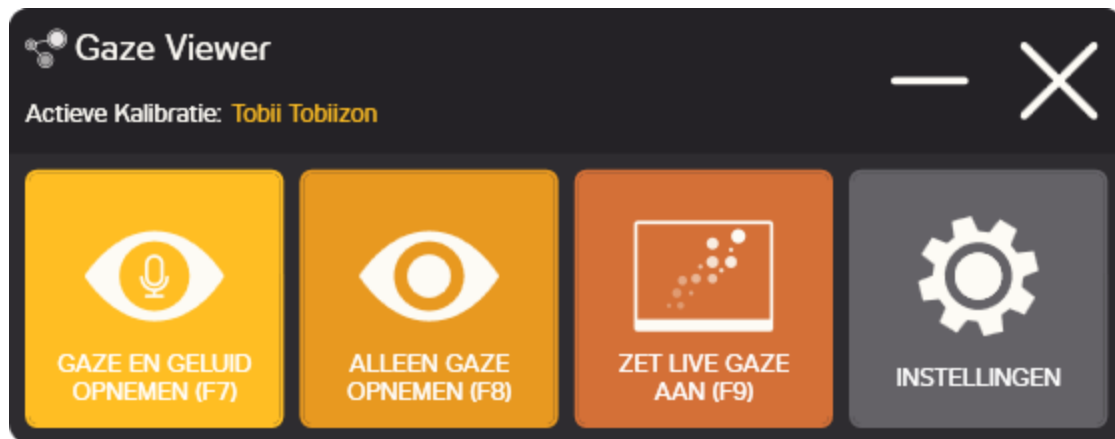

4.1.1 Gaze en Geluid opnemen

Start een opname door het selecteren van de  (GAZE & GELUID OPNEMEN (F7))  toets op het toetsenbord.

 Om de tool tijdens de opname te verbergen, gebruikt u de toetsenbordcommando's tussen de haakjes om de opname te starten en te stoppen.

Stop de Opname door het selecteren van de  (STOP OPNAME (F7, F8)) knop of de toetsenbordtoetsen  of .

4.1.2 Alleen Gaze Opnemen

Start een opname door het selecteren van de  (ALLEEN GAZE OPNEMEN (F8)) knop of de  toets op het toetsenbord.

 Om de tool tijdens de opname te verbergen, gebruikt u de toetsenbordcommando's tussen de haakjes om de opname te starten en te stoppen.


Stop de Opname door het selecteren van de  (STOP OPNAME (F7, F8)) knop of de toetsenbordtoetsen  of .

4.1.3 Schakel Live Gaze Aan / Uit

Selecteer de  (ZET DE LIVE GAZE (F9)) knop of de  Toets op het toetsenbord om Live Gaze uit te schakelen.

Selecteer de  (ZET DE LIVE GAZE (F9)) knop aan of de  toets op het toetsenbord om Live Gaze aan te zetten.


4.2 Tobii Dynavox Gaze Viewer Editor & Afspelen

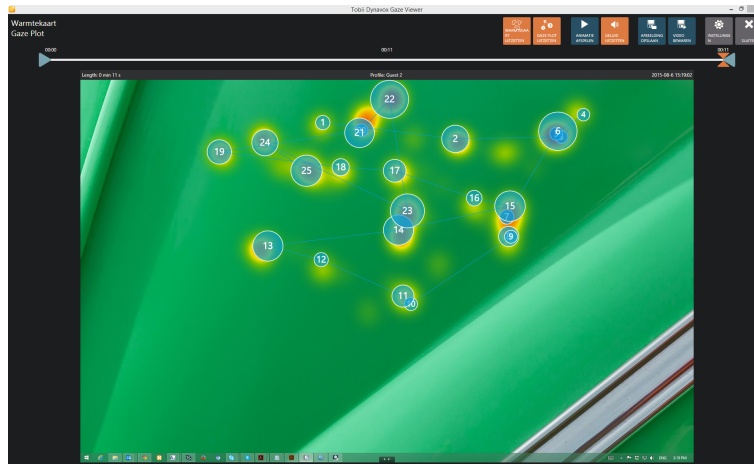

Wanneer de opname is gestopt, gaat het Editor & Playback beeld automatisch open.

- Selecteer de  (INSTELLINGEN) knop in de Editor & Afspelen weergave voor tips, toegang tot de handleiding en de Licentiebeheerder.
- Schakel de  (ZET DE WARMTEKAART UIT) (standaard) om /  (ZET DE WARMTEKAART AAN) om de warmtekaart te verbergen of te tonen.
- Schakel de  (ZET HET GAZEDIAGRAM UIT) (standaard) om /  (ZET GAZEDIAGRAM AAN) om het Gaze-diagram te verbergen of te tonen.
- Schakel de  (ZET GELUID UIT) (standaard) om /  (ZET GELUID AAN) om de opname te kunnen afspelen met het geluid aan of uit. Als de opname zonder geluid is gemaakt, wordt de knop grijs (uit) gezet  (ZET GELUID AAN).
- Selecteer de  (ANIMATIE AFSPELEN) knop om het afspelen van de opname te starten en selecteer de  (ANIMATIE STOPPEN) knop om het afspelen te stoppen.
- Selecteer de  (AFLSUITEN) knop om Tobii Dynavox Gaze Viewer te sluiten. Editor & Playback en terug te gaan naar de Tobii Dynavox Gaze Viewer Controller en om een nieuwe opname te kunnen starten. Voor meer informatie raadpleegt u 4.1 Tobii Dynavox Gaze Viewer Controller, pagina 11.

4.2.1 Tijdlijn Selectie

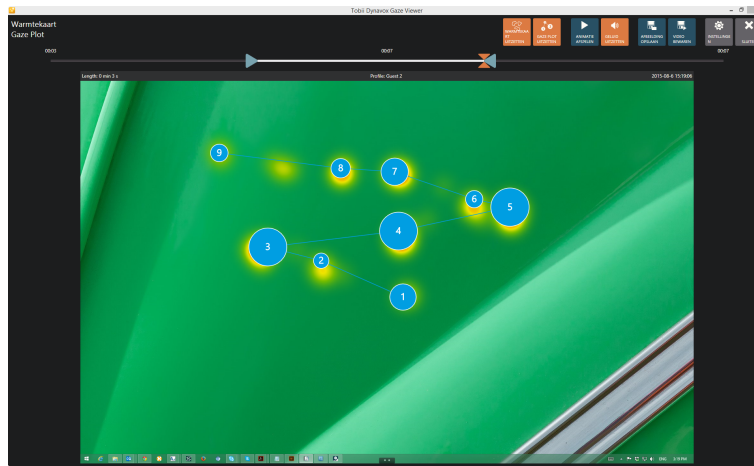

Als u over verschillende achtergronden of pagina's (schermen) heeft opgenomen, moet u de tijdlijnhandgrepen één voor één verslepen om alleen de gegevens voor het tijdvak van uw interesse te tonen. Wanneer u een tijdlijnhandvat verplaatst, wordt de Editor & Playback verschijnt het achtergrondbeeld voor dat tijdstip om u te helpen het juiste scherm te selecteren. Sla de huidige selectie op als een afbeelding of video en maak een nieuwe tijdselectie voor het volgende scherm. Voor meer informatie raadpleegt u 4.2.2 Opslaan van Afbeelding of Video, pagina 13.



Herhaal dit totdat alle verschillende schermen van de opname die uw interesse hebben zijn opgeslagen.

- Sleep het  (Startpunt) icoon naar een nieuwe locatie om het beginpunt van de opname te wijzigen.
- Sleep het  (Eindpunt) icoon naar een nieuwe locatie om het eindpunt van de opname te wijzigen.
- Sleep het  (Actuele tijdstip) icoon naar een nieuwe locatie om precies dat punt in de tijd van de opname op het scherm te zien.

4.2.2 Opslaan van Afbeelding of Video

- Selecteer de  (OPSLAAN AFBEELDING) knop om het huidige actuele tijdstip als afbeelding op te slaan.
- Selecteer de  (OPSLAAN VIDEO) knop om video op te slaan van het geselecteerde tijdvenster van de opname.



Het actieve Gaze Interaction Gebruikersprofiel wordt midden-boven weergegeven van het opgenomen scherm. De lengte van de opname wordt in de linkerbovenhoek van het opgenomen scherm weergegeven en het datum- en tijdstempel van de opname rechtsboven.




Het kost wat tijd om een lange opname op te slaan, dus wees geduldig.

4.3 Instellingen

Voor meer informatie raadpleegt u 5 Instellingen Gaze Viewer, pagina 14.

5 Instellingen Gaze Viewer

Selecteer de  (INSTELLINGEN) knop om naar de Instellingen te gaan voor Tobii Dynavox Gaze Viewer.

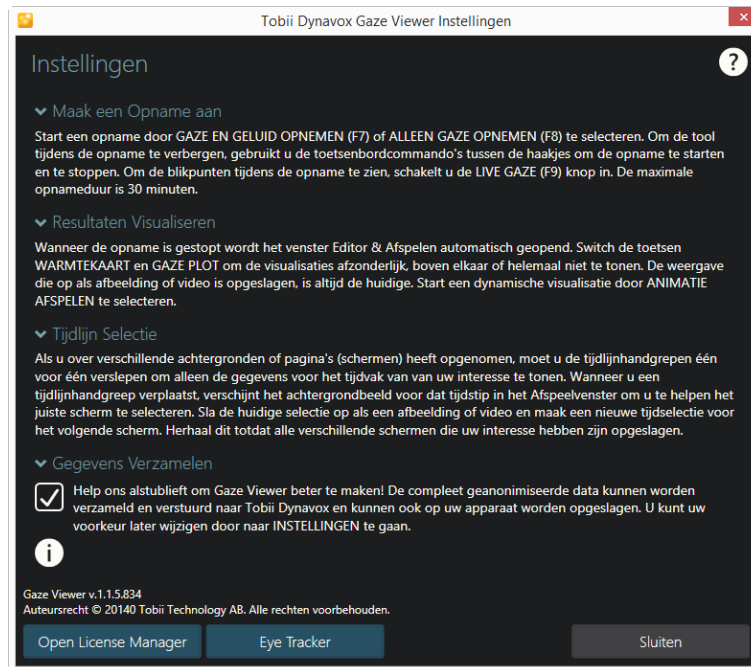

In Instellingen krijgt de gebruiker korte tips over het gebruik van de Tobii Dynavox Gaze Viewer Software.

Selecteer het  icoon om de handleiding te openen. De handleiding wordt geopend in uw standaard internet browser.

5.1 Gegevens Verzamelen

Help ons alstublieft Tobii Dynavox Gaze Viewer beter te maken door volledig anoniem uw gebruiksdata te verzamelen en te delen. Er worden geen persoonlijke gegevens gedeeld.

 Er worden geen gegevens van een opname verzameld, het gaat alleen om gegevens over hoe de software wordt gebruikt.

Vink het selectievakje **Dataverzameling** aan om anoniem de gebruiksgegevens te delen voor Tobii Dynavox Gaze Viewer .

Vink het selectievakje **Dataverzameling** uit als u niet de gebruiksgegevens wil delen voor Tobii Dynavox Gaze Viewer .

5.2 License Manager

De Tobii Dynavox Gaze Viewer kan op maximaal één computer / apparaat tegelijk functioneren met dezelfde licentie. Om de Tobii Dynavox Gaze Viewer op een andere computer / apparaat te kunnen gebruiken moet de Tobii Dynavox Gaze Viewer eerst gedeactiveerd worden.


Selecteer de **Open Licentiebeheer** knop om toegang te krijgen tot het licentiebeheer.

Om de licentie te activeren zie [2.2.1 Licentie activeren, pagina 6](#) .

Om de licentie te deactiveren zie [2.2.2 Licentie deactiveren, pagina 7](#) .

5.3 Eye Tracker

5.3.1 Het tabblad Kalibratie

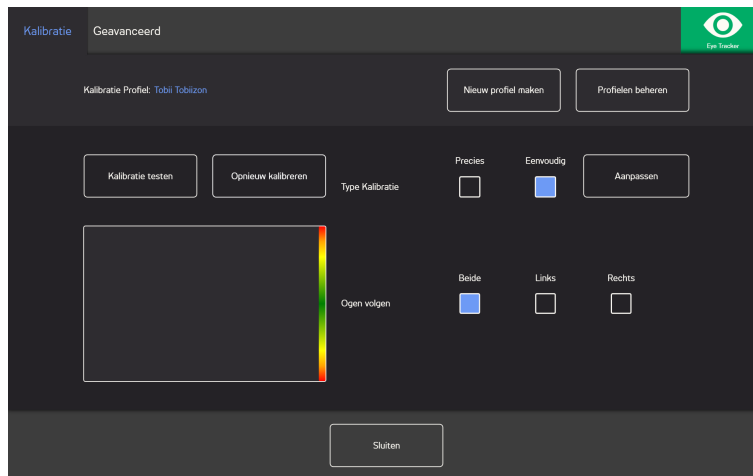

Kalibratie Profiel: Zal de naam van het actieve profiel tonen.

Maak een nieuw profiel aan. U staat op het punt om een nieuw profiel aan te maken. Voor meer informatie raadpleegt u [5.3.1.1 Nieuw Profiel Aanmaken](#), pagina 15.

Profielen beheren Selecteer deze knop om te veranderen naar een reeds bestaand profiel. Voor meer informatie raadpleegt u [5.3.1.2 Profielen Beheren](#), pagina 16.

Kalibratie testen: Selecteer deze knop om de kalibratietestpagina te openen. Voor meer informatie raadpleegt u [5.3.1.3 Kalibratie testen](#), pagina 16.

Type Kalibratie: Er zijn twee (2) verschillende soorten kalibratie: **Nauwkeurig** of **Eenvoudig**. Voor meer informatie raadpleegt u [5.3.1.5 Type Kalibratie](#), pagina 17.

Ogen volgen: Selecteer hoe het apparaat de ogen van de gebruikers moet volgen tussen: **Beide**, **Links** of **Rechts**.

5.3.1.1 Nieuw Profiel Aanmaken

1. Selecteer het **Kalibratietype** dat u wilt gebruiken.
Voor meer informatie raadpleegt u [5.3.1.5 Type Kalibratie](#), pagina 17.
2. Selecteer de knop **Nieuw profiel aanmaken**.
3. Selecteer **Ja** om door te gaan of **Nee** om te annuleren.
4. Geef het nieuwe profiel een naam.



Toetsenbord en muis moeten worden gebruikt.

Er mogen alleen alfanumerieke tekens worden gebruikt.

5. Selecteer de **Volgende** knop.
6. Plaats de gebruiker zodanig dat de twee punten, die de ogen van de gebruikers vertegenwoordigen, in het midden van het vak op het scherm staan.
Het kalibratieproces begint wanneer de rechter punt naar de gebruiker knippert.
7. Volg de instructies op het scherm voor het uitvoeren van een kalibratie.
8. Test de kalibratie.
Voor meer informatie raadpleegt u [5.3.1.3 Kalibratie testen](#), pagina 16.
9. Selecteer **Sluiten** om de kalibratie te accepteren of **Opnieuw Kalibreren** om een nieuw kalibratieproces uit te voeren.

5.3.1.2 Profielen Beheren

Op de pagina Profielen beheren kunt u een bestaand profiel Activeren of Verwijderen.

In het midden van het scherm, onder Actief Profiel, kunt u de naam van het actieve profiel zien.

Alle beschikbare profielen worden weergegeven als knop op de pagina, gebruik de  en  knop om door de beschikbare profielen te bladeren.


5.3.1.2.1 Een profiel activeren

1. Selecteer de knop met de naam van het profiel om het te activeren.
2. Selecteer de knop **Activeren** rechtsboven in het scherm.
3. Selecteer **Ja** om het geselecteerde profiel te activeren of **Nee** om te annuleren.
4. Selecteer **Afsluiten** om de pagina te verlaten.

5.3.1.2.2 Een profiel verwijderen

1. Selecteer de knop met de naam van het profiel om te verwijderen.
2. Selecteer de knop **Verwijderen** linksboven in het scherm.
3. Selecteer **Ja** om het geselecteerde profiel te verwijderen of **Nee** om te annuleren.
4. Selecteer **Afsluiten** om de pagina te verlaten.

5.3.1.3 Kalibratie testen

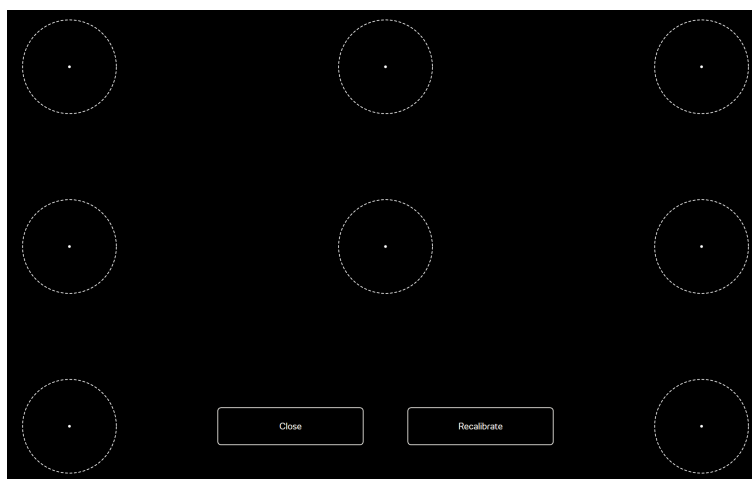

Op de kalibreringstestpagina kan de kalibratie worden getest, met behulp van vooraf gedefinieerde doelen op het scherm, om te zien of de gebruiker de oogtracker opnieuw moet kalibreren.

1. Kijk naar elke punt in elke cirkel op het scherm om te zien hoe nauwkeurig het oogvolgen gaat dat gebied.
2. Selecteer **Sluiten** om de kalibratie te accepteren of **Opnieuw Kalibreren** om een nieuw kalibratieproces uit te voeren.

5.3.1.4 Opnieuw Kalibreren

1. Selecteer het **Kalibratietype** dat u wilt gebruiken.
Voor meer informatie raadpleegt u *5.3.1.5 Type Kalibratie, pagina 17*.
2. Selecteer de **Opnieuw Kalibreren**knop om een nieuw kalibratieproces te starten voor het actieve profiel.
3. Volg de instructies op het scherm voor het uitvoeren van een kalibratie.
4. Test de kalibratie. Voor meer informatie raadpleegt u *5.3.1.3 Kalibratie testen, pagina 16*.
5. Selecteer **Sluiten** om de kalibratie te accepteren of **Opnieuw Kalibreren** om een nieuw kalibratieproces uit te voeren.

5.3.1.5 Type Kalibratie

Er zijn twee (2) verschillende soorten kalibratie beschikbaar: **Nauwkeurig** en **Eenvoudig**.

5.3.1.5.1 Precies

Selecteer het Nauwkeurige vakje om het meest nauwkeurige kalibratietype te activeren.


Met het nauwkeurige kalibratietype geactiveerd wordt de kalibratieprocedure een zeven (7) punten, 'pop de punten'-kalibratie. Het Nauwkeurige kalibratietype is het standaard kalibratietype.

5.3.1.5.2 Eenvoudig

Selecteer het **Eenvoudig** vakje om het eenvoudige kalibratietype te activeren, wanneer het van belang is dat de kalibratie snel en gemakkelijk is, in plaats van zeer nauwkeurig.

Als het eenvoudige kalibratietype is geselecteerd, kan het kalibratieproces worden aangepast.

Selecteer de knop **Aanpassen** om het kalibratieproces aan te passen.

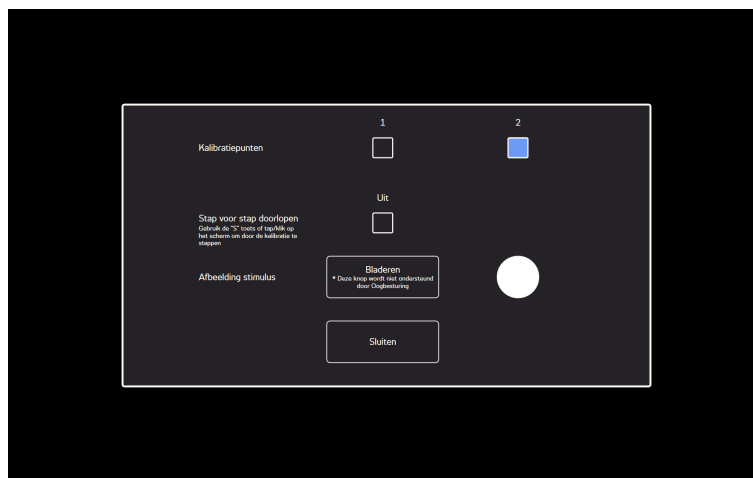

Kalibratiepunten: Selecteer of er **1** of **2** kalibratiepunten gebruikt moeten worden.




1-punts kalibratie is niet beschikbaar op PCEye Go.

Door heen lopen: Schakel het Door heen lopen Aan/Uit selectievakje op "Aan" om de functie te activeren waarin u de "S" toets op een toetsenbord gebruikt of tikken/klikken op het scherm om door de kalibratie te lopen.

Afbeelding stimulus" Selecteer de **Bladeren** knop om de **Afbeelding Stimulus** te veranderen van de standaard witte punt in één van de meegeleverde stimuli of in een afbeelding van het favoriete speelgoed van de gebruiker of iets anders.

Sluiten Selecteer de **Afsluiten** knop om de pagina te verlaten.

5.3.2 Het tabblad Geavanceerd

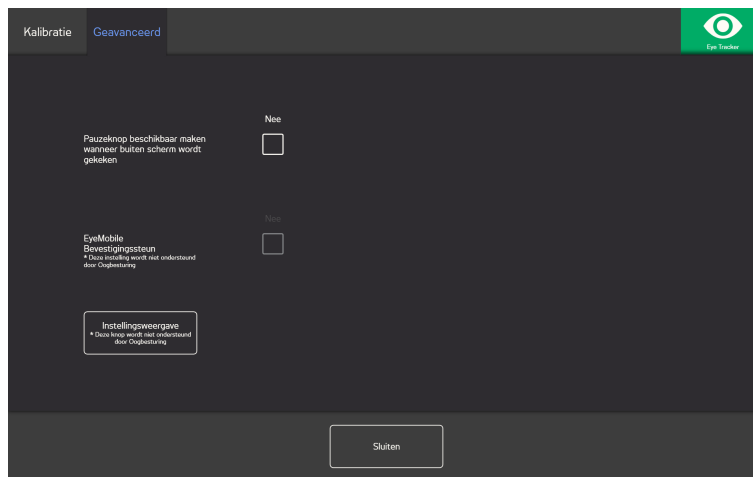


Pauzeknop beschikbaar maken wanneer buiten scherm wordt gekeken: Schakel het Aan/Uit selectievakje om op **Aan** als de pauzetoets op het scherm moet verschijnen wanneer de gebruiker buiten het scherm kijkt, zodat de gebruiker gemakkelijk kan pauzeren en opnieuw beginnen met eye tracking.


EyeMobile Bevestigingssteun: Schakel het Aan / Uit-selectievakje van de EyeMobile-bevestigingssteun op **Aan** als u een EyeMobile of EyeMobile Mini gebruikt. De EyeMobile-instelling voor de bevestigingssteun is niet relevant voor EyeMobile Plus en dus uitgeschakeld.

5.3.2.1 Instellingen Beeldscherm

Als er meer dan één (1) beeldscherm gebruikt wordt, moet u opgeven op welk beeldscherm de eye tracker is aangesloten. Het systeem zal ook moeten weten hoe groot het beeldscherm is dat wordt gebruikt.

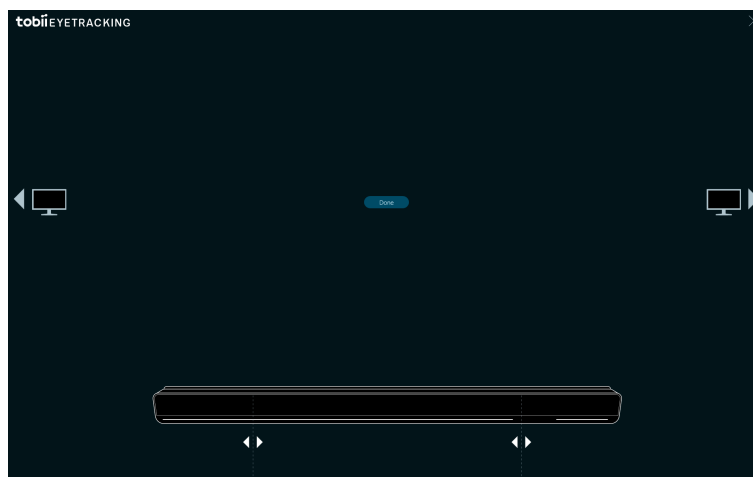

1. Gebruik de  of  om te selecteren op welk beeldscherm de oogtracker is aangesloten.
2. Lijn de linker- en rechter verticale lijn uit, die onder de visualisatie van de oogtracker op het scherm staan, met de markeringen die bovenop de oogtracker in gebruik zijn.

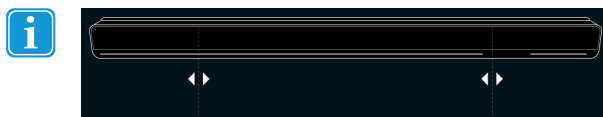

Dit zal de grootte van het beeldscherm instellen dat wordt gebruikt voor de Tobii Dynavox Gaze Viewer.

3. Selecteer **Gereed** om af te ronden.

Copyright ©Tobii AB (publ). Afbeeldingen en specificaties van producten en diensten gelden niet noodzakelijkerwijs voor elke lokale markt. Technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van de desbetreffende eigenaren.

Ondersteuning voor uw Tobii Dynavox apparaat

Online help

Raadpleeg de productspecifieke ondersteuningspagina voor uw Tobii Dynavox apparaat. Hier vindt u actuele informatie over problemen en tips en trucs voor het product. Onze ondersteuningspagina's vindt u online op: www.TobiiDynavox.com of www.myTobiiDynavox.com.

Neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger of wederverkoper

Neem bij vragen of problemen met betrekking tot uw product contact op met uw Tobii Dynavox verkoopvertegenwoordiger of erkende wederverkoper voor hulp. Wederverkopers zijn het meest bekend met uw persoonlijke configuratie en kunnen u het beste helpen met tips en producttraining. Ga voor contactinformatie naar www.TobiiDynavox.com/contact