


Snap™ Core First®

Manuale dell'utente

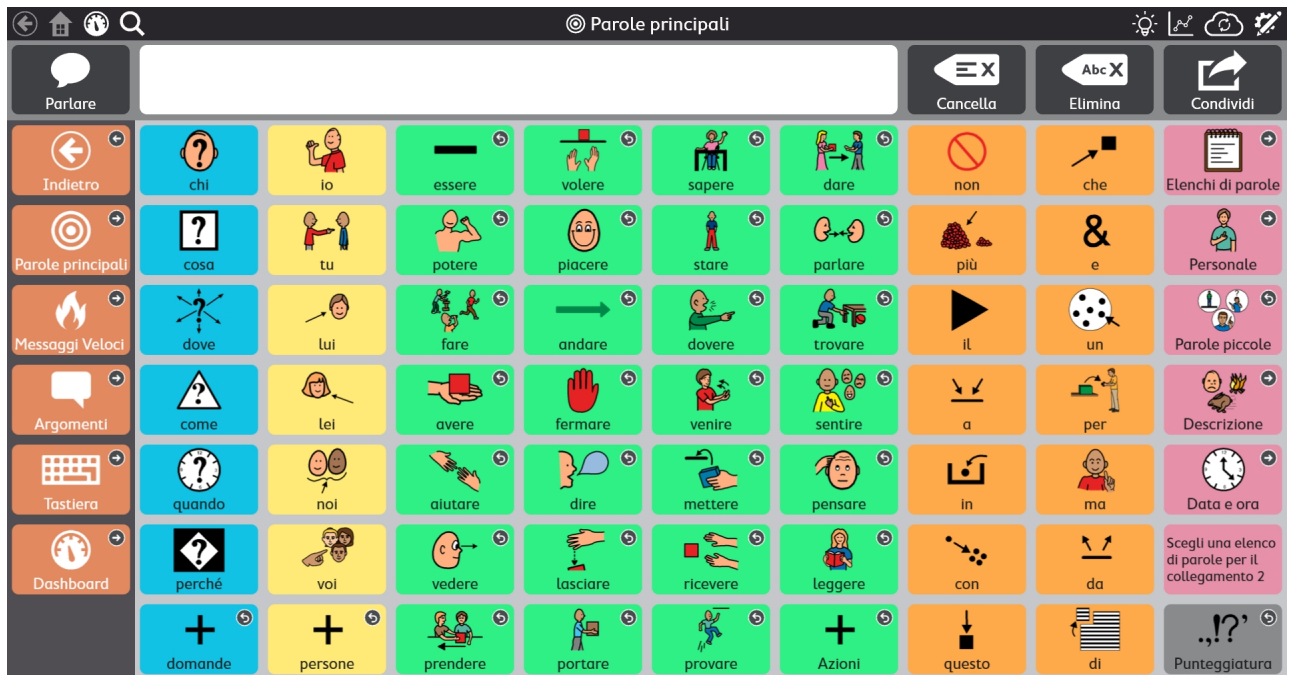

Manuale dell'utente Snap™ Core First®

Version 1.10

01/2020

Tutti i diritti riservati

Copyright © Tobii AB (publ)

Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta, archiviata in un sistema di recupero o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo (elettronico, tramite fotocopia, registrazione o altro tipo) senza la preventiva autorizzazione scritta dell'autore.

La protezione del copyright rivendicata comprende tutti i materiali e le informazioni tutelabili dalle leggi sul copyright ora permessi per legge scritta o giudiziale o concessi più avanti, incluso, senza limitazione, il materiale generato dai programmi software visualizzati sullo schermo quali schermate, menu e così via.

Le informazioni contenute in questo manuale sono di proprietà di Tobii Dynavox. La riproduzione, parziale o totale, senza la preventiva autorizzazione scritta di Tobii Dynavox è vietata.

I prodotti a cui viene fatto riferimento in questo documento possono essere marchi e/o marchi registrati dei rispettivi proprietari. L'editore e l'autore non riconoscono alcuna garanzia in merito a questi marchi.

Sebbene siano state prese tutte le possibili precauzioni nella preparazione di questo documento, l'editore e l'autore non si assumono alcuna responsabilità per eventuali errori o omissioni oppure per danni derivanti dall'uso delle informazioni contenute in questo documento o dei programmi e del codice sorgente forniti a corredo. In nessun caso l'editore e l'autore saranno responsabili per eventuali perdite di profitto o qualsiasi altro danno commerciale causato o presumibilmente causato direttamente o indirettamente dalle informazioni incluse in questo documento.

Il contenuto è soggetto a modifica senza preavviso.

Visitare il sito Tobii Dynavox

www.TobiiDynavox.com per versioni aggiornate di questo documento.

Recapiti:

Tobii Dynavox AB
Karlsrovägen 2D
182 53 Danderyd
Svezia

+46 8 663 69 90

Tobii Dynavox LLC
2100 Wharton Street, Suite 400
Pittsburgh, PA 15203
USA

+1-800-344-1778



Indice

1	Benvenuto.....	7
1.1	Requisiti di sistema	7
1.2	Come ottenere Snap Core First.....	8
1.2.1	Acquisto delle funzioni vocali	8
2	Risorse e supporto.....	9
2.1	Tobii Dynavox Pathways for Core First.....	9
2.2	Risorse Web e supporto	9
3	Guida introduttiva	10
3.1	Impostazione di un nuovo utente	10
3.2	Ripristino di un utente esistente.....	10
3.3	Selezione di un gruppo di pagine.....	10
3.3.1	Core First	10
3.4	Scelta della dimensione della griglia	13
4	Esplorazione	14
5	Barra superiore	15
5.1	Indietro.....	15
5.2	Pagina iniziale	15
5.3	Pannello di Controllo	15
5.4	Cerca	15
5.5	Indicatore Finestra Partner.....	17
5.6	Monitoraggio dati	17
5.7	Sincronizza.....	17
5.8	Modifica	18
6	Barra Messaggio.....	19
6.1	Pronuncia.....	19
6.2	Finestra Messaggio.....	19
6.3	Cancella.....	19
6.4	Eliminare	19
6.5	Chat.....	19
6.6	Copia su pulsante	20
6.7	Condividi	20
7	Barra degli strumenti Core First.....	21
7.1	Indietro.....	21
7.2	Parole principali	21
7.3	Messaggi Veloci.....	22
7.4	Argomenti.....	22
7.4.1	Parole Argomento	22
7.4.2	Supporti	22
7.5	Tastiera	24
7.6	Pannello di Controllo	24
7.7	Flessione di parola	25
7.8	Navigazione facilitata	25
7.9	abc (solo tedesco).....	25
8	Modifica	26
8.1	Pannello Modifica.....	26
8.2	Aggiunta di un pulsante	26

8.3	Spostamento di un pulsante	27
8.4	Ridimensionamento di un pulsante	27
8.5	Strumenti di modifica pulsante	29
8.5.1	Annulla e Ripeti	29
8.5.2	Pulsanti Copia e Incolla	29
8.5.3	Seleziona tutti i pulsanti	30
8.5.4	Selezione multipla dei pulsanti	30
8.5.5	Selezione Area	31
8.5.6	Nascondi/Mostra pulsanti	31
8.5.7	Eliminazione di un pulsante	32
8.5.8	Ingrandisci/Riduci nomi degli strumenti di modifica	32
8.6	Contenuto del pulsante	32
8.6.1	Etichetta pulsante	32
8.6.2	Contenuto attivo	33
8.6.3	Messaggio pulsante	35
8.6.4	Suono del pulsante	36
8.6.5	Immagine del pulsante	36
8.6.6	Tipo di pulsante	37
8.7	Azioni pulsante	38
8.7.1	Eliminazione di un'azione	41
8.7.2	Riordina azioni pulsante	41
8.7.3	Lavagna	42
8.7.4	AccessIT	43
8.8	Stile pulsante	45
8.8.1	Sfondo pulsante	45
8.8.2	Bordo pulsante	45
8.8.3	Etichetta pulsante	45
8.9	Collegamento a Pagina/Crea nuova pagina	47
8.9.1	Crea un pulsante di collegamento in una cella vuota	47
8.9.2	Crea un collegamento da un pulsante esistente	47
8.9.3	Collegamento a una Nuova pagina/Crea nuova pagina	48
8.9.4	Collegamento a una pagina esistente	48
8.9.5	Collegamento a Nuova copia di una Pagina esistente	48
8.9.6	Importa e collega alla pagina	48
8.9.7	Pagina visita	49
8.10	Regole lingua del pulsante	51
8.11	Telecomandi	51
8.12	Modifica pagina	52
8.12.1	Nome pagina	52
8.12.2	Simbolo pagina	53
8.12.3	Regole lingua della pagina	53
8.12.4	Dimensioni griglia della pagina	54
8.12.5	Colore sfondo pagina	55
8.12.6	Mostra/Nascondi barra messaggio	55
8.12.7	Elimina pagina	55
8.12.8	Importa/Esporta pagine	56
8.13	Gruppi di scansione	56
8.13.1	Opzioni dei gruppi di scansione	57
8.14	Modifica la Barra messaggio	57
8.15	Modifica la Barra degli strumenti	59

9	Impostazioni gruppo di pagine.....	60
9.1	Gruppo di pagine	60
9.1.1	Seleziona Gruppo di pagine.....	60
9.1.2	Crea nuovo gruppo di pagine	60
9.1.3	Rinomina Gruppo di pagine e modifica descrizione.....	61
9.1.4	Elimina gruppo di pagine	61
9.1.5	Imposta Pagina iniziale.....	61
9.1.6	Imposta Pagina tastiera.....	61
9.2	Dimensioni griglia.....	62
9.3	Stile gruppo di pagine	62
9.3.1	Carattere etichette pulsanti gruppo di pagine.....	62
9.3.2	Dimensioni carattere etichette pulsanti gruppo di pagine	62
9.3.3	Grassetto etichette pulsanti gruppo di pagine	63
9.3.4	Layout pulsante gruppo di pagine.....	63
9.3.5	Visualizza collegamento gruppo di pagine.....	63
9.3.6	Margine griglia gruppo di pagine	64
9.3.7	Colori sfondo predefiniti gruppo di pagine	64
9.3.8	Carattere Finestra Messaggio Gruppo di pagine.....	64
9.3.9	Dimensione carattere Finestra Messaggio Gruppo di pagine	64
9.3.10	Colore del testo Finestra Messaggio Gruppo di pagine	64
9.4	Preferenze Gruppo di pagine	65
9.5	Pulsanti adattivi.....	65
9.6	Informazioni Gruppo di pagine	66
9.6.1	Impostazioni Sviluppatore di contenuto gruppo di pagine	66
10	Condivisione e salvataggio.....	68
10.1	Utenti	68
10.1.1	Backup di un Utente	68
10.1.2	Ripristina un Utente.....	68
10.2	Gruppi di pagine.....	68
10.2.1	Importa un gruppo di pagine	68
10.2.2	Salva una copia di un Gruppo di pagine	69
10.2.3	Condividi una copia di un Gruppo di pagine (attraverso myTobiiDynavox).....	70
10.2.4	Sincronizza Gruppo di pagine	70
10.3	Bundle di pagine	73
10.3.1	Esporta bundle di pagine	73
10.3.2	Importa bundle di pagine	74
11	Impostazioni utente	76
11.1	Cambia utente	76
11.2	Creare un nuovo utente	76
11.3	Backup di un Utente	76
11.4	Ripristina un Utente.....	77
11.5	Modifica/rinomina un utente	78
11.6	Elimina un utente	78
11.7	Accesso all'account myTobiiDynavox.....	79
11.8	Voce	79
11.8.1	Sintesi vocale	79
11.8.2	Velocità voce	80
11.8.3	Eccezioni di pronuncia	80
11.9	Dispositivo di emissione voce.....	82

11.10	Voci specifiche per la lingua	82
11.11	Preferenze utente	82
11.11.1	Impostazioni discorso	82
11.11.2	Impostazioni finestra di messaggio	82
11.11.3	Impostazioni Predizione	83
11.11.4	Impostazioni Sincronizzazione	83
11.12	Metodo di accesso	83
11.12.1	Imposta il metodo di accesso	84
11.12.2	Touch - Opzioni	84
11.12.3	Attivazione al tocco - Opzioni	85
11.12.4	Tocca per uscire - Opzioni	86
11.12.5	Selezione con clic automatico del mouse - Opzioni	87
11.12.6	Interazione oculare - Opzioni	88
11.12.7	Scansione - Opzioni	89
11.13	Monitoraggio dati	92
11.13.1	Monitora utilizzo pulsante	92
11.13.2	Mostra il pulsante barra superiore	93
11.13.3	Mostra conteggi sull'uso del pulsante	94
11.13.4	Mostra conteggi sulla modellazione	94
11.13.5	Gestisci dati	95
12	Impostazioni del sistema	96
12.1	Preferenze	96
12.1.1	Password	96
12.1.2	Impostazione schermo (solo in caso di sistemi operativi Windows)	96
12.1.3	Lingua Modalità Modifica	96
12.2	Dispositivo	97
12.2.1	Impostazioni Finestra Partner	97
12.3	Store	97
12.4	Set di simboli	97
12.4.1	Impostazioni di ricerca	97
12.4.2	Simboli installati e scaricabili	97
12.4.3	Riordina Set di simboli	98
12.5	Guida e tutorial	98
12.5.1	Video	98
12.5.2	Pathways per Core First	98
12.5.3	Tour rapido	98
12.5.4	Guida esterna	98
12.6	Informazioni	99
12.6.1	Aggiornamenti software	99

1 Benvenuto

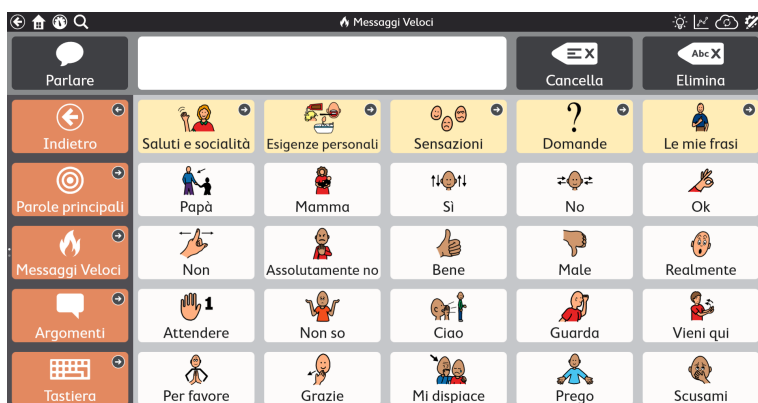


Figura 1.1 Snap Core First — Messaggi Veloci

Tobii Dynavox Snap Core First è il migliore tra i software per la comunicazione basata sui simboli. È la soluzione più facile da usare, intuitiva e coerente disponibile sul mercato, sia per l'utente sia per il partner di comunicazione. Snap Core First è pensato per persone affette da autismo, paralisi cerebrale, sindrome di Down e disabilità intellettive e unisce la comunicazione simbolica agli strumenti necessari ai genitori, insegnanti o terapisti, in modo che questi possano aiutare gli utenti a diventare bravi comunicatori, a imparare la lingua e a raggiungere l'alfabetizzazione. L'approccio usato da questo software comprende tre pilastri fondamentali per il successo della comunicazione: Crescita, Coinvolgimento e Alfabetizzazione.

Snap Core First non è solamente un software di CAA ma è piuttosto un programma completo per avvicinare le persone all'alfabetizzazione e all'autodeterminazione, indipendentemente dal loro punto di partenza. Al centro di Snap c'è Core First, un insieme di griglie che offre: il vocabolario di parole principali, gli argomenti, i messaggi veloci, i supporti comportamentali, svariati elenchi di parole e le tastiere di Tobii Dynavox. Basato sulla ricerca della University of North Carolina Chapel Hill, Core First si sviluppa partendo da un vocabolario di base e introduce, con un metodo preciso, un nuovo vocabolario implementabile dagli utenti e facilmente individuabile. Queste caratteristiche consentono agli utenti di iniziare il loro percorso di comunicazione e continuare a crescere e a raggiungere l'alfabetizzazione e l'indipendenza.

1.1 Requisiti di sistema

Tabella 1.1 Sistema operativo Windows

	Sistema operativo	Architettura	Memoria	Tocco	Telecamera
Minimo	Windows 10 versione 1607	x86	2 GB	Non richiesto	Non richiesto
Consigliato	Windows 10 versione 1607	x86	4 GB	Touch integrato	Telecamera integrata

Tabella 1.2 iOS

	Sistema operativo	Dispositivo	Memoria	Tocco	Telecamera
Minimo	iOS 10	iPad Air 2 iPad Mini 4	2 GB	Touch integrato	Non richiesto
Consigliato	iOS 11	iPad 5a generazione	4 GB	Touch integrato	Telecamera integrata

1.2 Come ottenere Snap Core First

Snap Core First è disponibile su Microsoft Store per i dispositivi Windows e su Apple App Store per quelli iOS. Per acquistare tutte le funzionalità di Snap Core First è necessario scegliere Snap + Core First Full. Nella versione Free tutte le funzioni non vocali sono disponibili gratuitamente, inclusi i contenuti di Core First, le funzioni di creazione e modifica delle pagine, creazione utente, backup, ripristino e sincronizzazione; tuttavia, le funzionalità vocali sono limitate. Le funzionalità vocali complete sono disponibili solo nella versione Full, tramite acquisto in-app.

Funzionalità vocali disabilitate nella versione gratuita:

- Pronuncia della frase contenuta nella Finestra dei messaggi
- Qualsiasi emissione vocale o registrazione generata dall'azionamento di un pulsante
- Qualsiasi emissione vocale o registrazione generata da un supporto comportamentale
- Segnali audio

Funzionalità vocali disponibili nella versione gratuita:

- Registrazione audio (in Modalità modifica)
- Anteprima della registrazione audio (in Modalità modifica)
- Anteprima della voce
- Anteprima delle eccezioni di pronuncia (in Modalità Modifica)

1.2.1 Acquisto delle funzioni vocali

Per sbloccare le funzionalità vocali di Snap Core First tramite acquisto in-app:

1. Avviare Snap Core First.
2. Selezionare il pulsante vocale disabilitato nella barra superiore.
3. Confermare l'acquisto nella finestra a comparsa.



2 Risorse e supporto

Tobii Dynavox offre diverse risorse gratuite per il supporto e l'assistenza durante l'uso di Snap Core First. Non perdetevi questi strumenti che vi aiuteranno a trarre il massimo dal vostro software Tobii Dynavox!

2.1 Tobii Dynavox Pathways for Core First



Pathways for Core First è una risorsa gratuita che vi aiuterà a utilizzare e implementare i software Tobii Dynavox in maniera efficace ed efficiente. Imparerete le tecniche guidate da ricerca che ottimizzano il coinvolgimento, l'intuitività e molto altro ancora!

Pathways for Core First vi accompagnerà sin dall'inizio con Snap Core First e favorirà la crescita di chi lo utilizzerà in termini di coinvolgimento, linguaggio e alfabetizzazione. Pathways for Core First:

- fornirà una via chiara e personalizzata per iniziare a utilizzare il programma;
- favorirà lo sviluppo della comunicazione in individui di qualsiasi fascia di età e livello di apprendimento della comunicazione;
- vi insegnerà a creare abilità comunicative in una vasta gamma di aree, incluso l'uso delle parole principali, l'espansione del vocabolario, l'uso di Snap Core First nelle attività quotidiane etc;
- vi mostrerà come Snap Core First aiuta lo sviluppo di competenze anche nelle situazioni sociali, come ad esempio nella gestione delle fasi di comunicazione, nelle abilità esplorative e operative, nonché nell'incoraggiamento del comportamento positivo;
- consentirà ai partner di comunicazione di accrescere la loro competenza attraverso l'uso di suggerimenti mirati;
- fornirà supporto costante nella personalizzazione.

La versione completa di Pathways for Core First è disponibile come app gratuita per Windows e iOS. Pathways for Core First Lite è disponibile online tramite browser Web. Visitare www.tobiidynavox.com/learn/pathways per ulteriori informazioni.

2.2 Risorse Web e supporto

myTobiiDynavox è il vostro sito Web di archiviazione online personale nonché il vostro portale di condivisione. Caricate i vostri file di backup su myTobiiDynavox per conservarli e condividerli con l'intero team di assistenza alla comunicazione.

Andate su myTobiiDynavox.com per registrare un account gratuito.

Visitate tobiidynavox.com/support-training/ per assistenza, guida e altre risorse, tra cui:

- risposte alle domande più frequenti
- video di formazione
- download
- webinar registrati
- assistenza dal vivo

3 Guida introduttiva

Quando si avvierà Snap Core First per la prima volta, verranno poste alcune domande per contribuire alla personalizzazione del software in modo da adattarlo alle proprie esigenze. Se desiderato, sarà possibile modificare qualsiasi impostazione in un secondo momento.

3.1 Impostazione di un nuovo utente

Selezionare **Guida introduttiva** per una configurazione assistita che durerà meno di un minuto.



3.2 Ripristino di un utente esistente

Utilizzare questa opzione se si dispone già di un file di backup utente che si desidera ripristinare.

Ripristinare un backup utente da myTobiiDynavox

1. Selezionare **Ripristina utente esistente**.
2. Se non è stato effettuato l'accesso a myTobiiDynavox, inserire la propria email e la password, quindi selezionare



Avanti.

3. Scegliere un file di backup utente dall'elenco, quindi selezionare



Avanti.


Ripristino di un backup utente da un file locale

1. Selezionare **Ripristina utente esistente**.
2. Selezionare **Ripristina da un file locale**.
3. Cercare e selezionare il file di backup utente, quindi selezionare **Apri**.

3.3 Selezione di un gruppo di pagine

3.3.1 Core First

Core First è il Gruppo di pagine principale disponibile sul software Snap. È studiato per massimizzare il coinvolgimento,

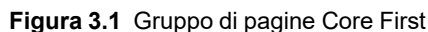


- Altri strumenti di Core First sono:

- Il Gruppo di pagine Core First offre agli utenti un'esperienza accessibile nella ricerca rapida di contenuti e fornisce la massima libertà di composizione di messaggi personali e specifici. Core First consente agli utenti di essere coinvolti in conversazioni rapide e di rispondere in tempo reale sugli argomenti che ritengono più importanti. Offre inoltre la libertà di creare velocemente nuovi messaggi difficilmente prevedibili in anticipo. Muovendosi tra gli strumenti forniti, gli utenti possono prendere parte attivamente alla situazione cui partecipano e sentirsi coinvolti con i partner di comunicazione.

Anche lo sviluppo dell'alfabetizzazione deve essere parte di una soluzione che aiuti la comunicazione. Tramite l'uso delle tastiere, i collegamenti ad altri programmi presenti sul dispositivo e il contenuto studiato per supportare le esperienze di lettura, Core First aiuta lo sviluppo dell'alfabetizzazione.

Core First non è progettato per essere un sistema unico per tutti o stazionario. La continuità tra le dimensioni griglia è un principio guida fondamentale. Man mano che gli utenti crescono e richiedono opzioni aggiuntive per rispettare la crescita della complessità linguistica, queste nuove opzioni vengono aggiunte a Core First in modo lineare, mantenendo il contenuto in posizioni prevedibili.

Questo gruppo di pagine è studiato per gli utenti non dipendenti dai simboli per la comunicazione. Il Gruppo di pagine Testo è consigliato agli utenti con spiccate abilità di lettura e composizione.

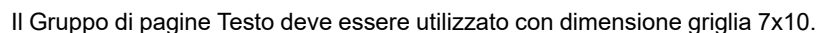

La configurazione guidata visualizza automaticamente i Gruppi di pagine corrispondenti all'impostazione linguistica del dispositivo, se disponibile in Snap. Selezionare **Cambia lingua** per visualizzare i Gruppi di pagine disponibili in altre lingue.

- Cinese (semplificato)
- Ceco (CZ)
- Danese (DK)
- Olandese (NL)
- Inglese (CA)
- Inglese (UK)
- Inglese (US)
- Francese (FR)
- Francese (CA)
- Tedesco (DE)
- Germania (Svizzera)

- Islandese (IS)
- Italiano (IT)
- Norvegese (NO)
- Portoghese (BR)
- Portoghese (PT)
- Spagnolo (ES)
- Spagnolo (America Latina)
- Spagnolo (US)
- Svedese (SE)
- Altre lingue in arrivo!

3.4 Scelta della dimensione della griglia

La scelta della dimensione griglia dipende da diversi fattori: la precisione della selezione è quello più importante; seguono i limiti eventualmente presenti nella vista o nell'attenzione. In caso di problemi con la velocità o la precisione di selezione, si consiglia di iniziare con una dimensione più piccola, in modo che l'utente abbia a disposizione pulsanti più grandi con cui lavorare. È facile cambiare la dimensione della griglia nelle impostazioni del Gruppo di pagine. È possibile aumentare o ridurre la dimensione griglia in base alle diverse abilità fisiche e linguistiche degli individui. È possibile aumentare o ridurre la dimensione griglia in base alle mutevoli abilità fisiche e linguistiche dell'individuo.



Se si desidera visualizzare la Barra messaggio e/o la Barra degli strumenti, è necessario scegliere una dimensione griglia con almeno 3 righe e 3 colonne.

Tabella 3.1 Esempi di dimensioni griglia (non completi)



2x3




3x4



6x6

4 Esplorazione

Ci sono tantissimi strumenti in Snap + Core First! Leggete come imparare a esplorare i contenuti e come trovare tutto ciò di cui avete bisogno per aiutare lo sviluppo della comunicazione.

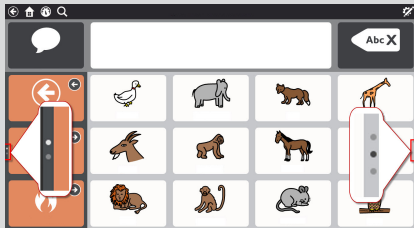Scorrimen- to	È possibile scorrere in alto e in basso sia dalla barra degli strumenti sia dalla pagina. Gli indicatori di posizione (puntini a sinistra per la barra degli strumenti e a destra per la pagina) segnalano quando sono presenti altri contenuti in alto o in basso.  A seconda delle impostazioni e del metodo di accesso, lo scorrimento avverrà scorrendo il dito sullo schermo touchscreen o selezionando i pulsanti di navigazione. Vedere la sezione 11.12.2 <i>Touch - Opzioni</i>.	
Pulsante di collega- mento	I pulsanti di collegamento consentono di passare a un'altra pagina. Vedere la sezione 8.9 <i>Collegamento a Pagina/Crea nuova pagina</i> .	
Pulsante di visita	I pulsanti di visita consentono di visualizzare un'altra pagina, di eseguire una selezione su tale pagina e quindi di tornare automaticamente alla pagina precedente. Vedere la sezione 8.9.7 <i>Pagina visita</i> .	
Pulsante Indietro	Il pulsante Indietro funziona come il pulsante Indietro su un browser Web. Selezionare il pulsante Indietro una volta per tornare alla pagina precedente oppure diverse volte per spostarsi indietro seguendo la cronologia delle pagine visitate.	
Barra superiore	I pulsanti sul lato sinistro della barra superiore includono un pulsante Indietro, un pulsante Pagina iniziale, un pulsante Pannello di Controllo e un pulsante Ricerca. Vedere la sezione 5 <i>Barra superiore</i> .	

5 Barra superiore

5.1 Indietro

Il pulsante Indietro  consente di tornare alla pagina visitata in precedenza.

5.2 Pagina iniziale

Il pulsante Pagina iniziale  consente di tornare alla pagina iniziale (la prima pagina visualizzata all'avvio di Snap Core First). Questo pulsante Pagina iniziale è una scorciatoia che è possibile utilizzare per tornare alla pagina iniziale da qualsiasi punto all'interno del software. Per modificare la Pagina iniziale, vedere la sezione 9.1.5 *Imposta Pagina iniziale*.

5.3 Pannello di Controllo


Utilizzare il pulsante Pannello di Controllo  per accedere rapidamente alla pagina Pannello di Controllo. Il Pannello di Controllo è una pagina per accedere in modo semplice ai pulsanti utilizzati più frequentemente, specialmente i pulsanti non relativi al vocabolario come ad esempio il controllo del volume o i comandi a distanza.

5.4 Cerca


 La ricerca è accessibile solo tramite il Metodo di accesso touch.

Lo strumento Cerca  mostra dove trovare una parola in Snap Core First. Basta inserire un termine da cercare e successivamente seguire le indicazioni visive. Le indicazioni visive portano alla parola cercata e aiutano la memorizzazione del percorso in modo da poterla trovare in autonomia durante gli utilizzi successivi di Snap.

1. Selezionare lo strumento **Cerca**  nella barra superiore.
2. Inserire il termine da cercare.

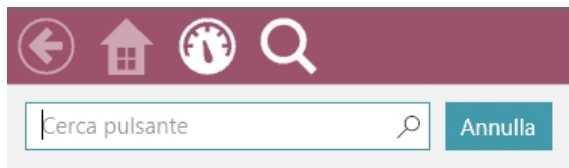


3. Selezionare ciò che si sta cercando tra i risultati proposti.

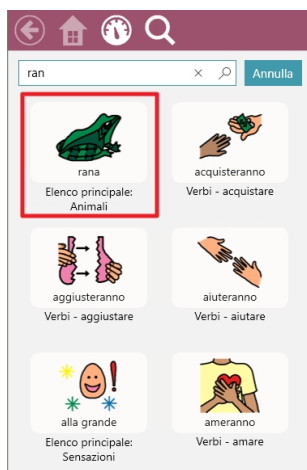


4. Selezionare il pulsante evidenziato su ciascuna pagina fino ad arrivare al pulsante interessato.



Potrebbe essere necessario scorrere per vedere il pulsante successivo, pertanto guardare le frecce che indicano dove andare!

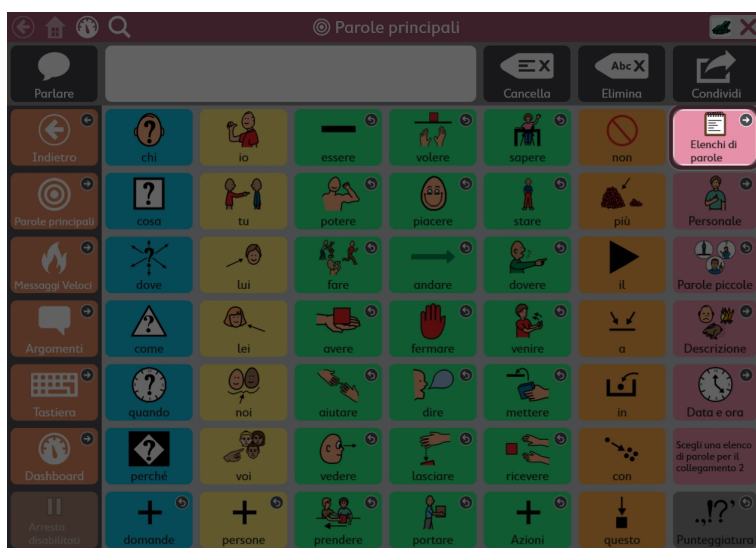

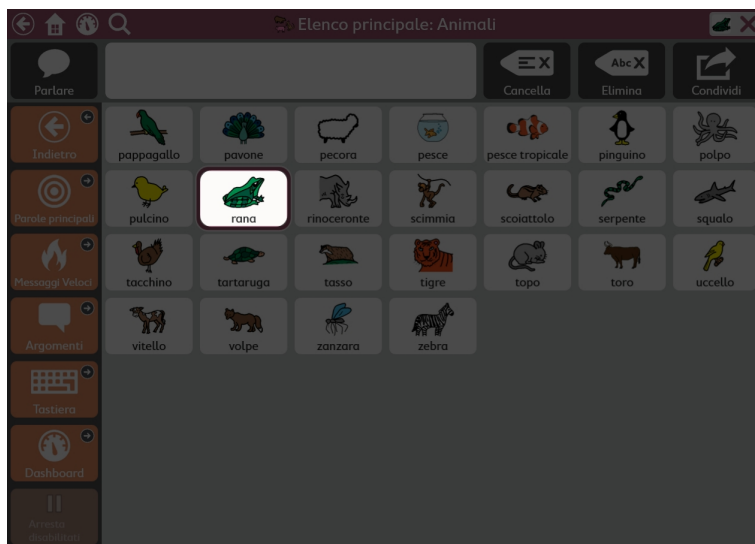

-  Prestare attenzione a ciascun pulsante evidenziato in modo da poter ricordare il percorso autonomamente la volta successiva.
- È possibile annullare la ricerca in qualsiasi momento selezionando un punto fuori dal percorso evidenziato.

5.5 Indicatore Finestra Partner

-  L'Indicatore Finestra Partner è disponibile solo sui dispositivi Tobii Dynavox I-13 e I-16.

L'Indicatore Finestra Partner fornisce informazioni sullo stato della Finestra Partner sul retro del dispositivo.

Stile Specchio — visualizza il testo al momento presente nella Finestra Partner.



Stile Icona — l'icona indica che la Finestra Partner è attivata. Quando la Finestra Partner è disattivata, l'icona non è presente.



Per modificare lo Stile Indicatore Finestra Partner, vedere la sezione *12.2.1 Impostazioni Finestra Partner*.

5.6 Monitoraggio dati

-  Monitoraggio dati è accessibile solo tramite tocco o clic diretto del mouse.



Quando abilitato, il pulsante Monitoraggio dati fornisce un rapido accesso alle impostazioni seguenti: Modalità Modellazione, Mostra conteggi utilizzo pulsante, Mostra conteggi modellazioni e Gestisci dati. Per ulteriori informazioni sul monitoraggio dati, vedere la sezione *11.13 Monitoraggio dati*.

5.7 Sincronizza

-  Sincronizza è accessibile solo tramite tocco o clic diretto del mouse.



Il pulsante Sincronizza  viene utilizzato per avviare la condivisione di un Gruppo di pagine o per aggiornare un Gruppo di pagine già condiviso per la sincronizzazione. Per ulteriori informazioni sulla sincronizzazione, vedere la sezione *10.2.4 Sincronizza Gruppo di pagine*.

Per nascondere il pulsante Sincronizza in Modalità uso, vedere la sezione *11.11.4 Impostazioni Sincronizzazione*.

5.8 Modifica



Modifica è accessibile solo tramite tocco o clic diretto del mouse.



Selezionare il pulsante Modifica  per apportare modifiche al Gruppo di pagine e alle impostazioni di accesso.

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione *8 Modifica*.

6 Barra Messaggio

La Barra Messaggio visualizza il testo del messaggio composto e i pulsanti per la relativa condivisione con il mondo!



Se si desidera visualizzare la Barra Messaggio, è necessario scegliere una dimensione griglia con almeno 3 righe e 3 colonne.



Per modificare la Barra Messaggio, vedere [8.14 Modifica la Barra messaggio](#).

6.1 Pronuncia



Selezionare questo pulsante per pronunciare i contenuti correnti della Finestra Messaggio.

6.2 Finestra Messaggio



La Finestra Messaggio visualizza il testo scritto da pronunciare o inviare come messaggio. Può anche visualizzare dei simboli. È possibile digitare nella Finestra Messaggio utilizzando le tastiere e i pulsanti con simboli e/o testi.

Per le impostazioni della Finestra Messaggio si veda la sezione [11.11.2 Impostazioni finestra di messaggio](#), pagina 82.

6.3 Cancella



Consente di cancellare il contenuto della Finestra Messaggio.

6.4 Eliminare



Consente di eliminare l'ultima parola dalla Finestra Messaggio.

6.5 Chat



Consente di attivare e disattivare la chat. Quando si abilita la Chat, il contenuto corrente della Finestra Messaggio viene salvato in memoria e, successivamente, la Finestra Messaggio viene cancellata. In Chat, è possibile inserire un nuovo contenuto nella Finestra Messaggio e pronunciarlo. Quando la Chat viene disattivata, il contenuto della Finestra Messaggio, salvato nella cache, viene ripristinato in modo da poter proseguire dal punto dell'interruzione.

6.6 Copia su pulsante



Consente di copiare il testo nella Finestra Messaggio, quindi di aggiungerlo a un pulsante. Ciò offre all'utente di accedere rapidamente ai pulsanti di modifica!

6.7 Condividi




Utilizzare questa funzione pratica e accessibile all'utente per inviare i contenuti della Finestra Messaggio a un dispositivo AccessIT 3 (8.7.4 *AccessIT*), a un pulsante sulla pagina corrente (6.6 *Copia su pulsante*), a Copia o agli appunti del sistema.

Selezionare Altro per inviare il testo della Finestra Messaggio a un'app a scelta (ad es. Twitter, Facebook, ecc).




Il menu del pulsante Altro è accessibile solo tramite Tocco.

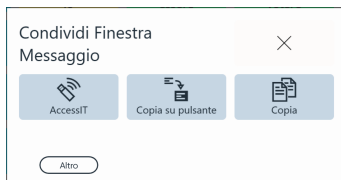

7 Barra degli strumenti Core First

Per modificare la Barra degli strumenti, vedere 8.15 *Modifica la Barra degli strumenti*.

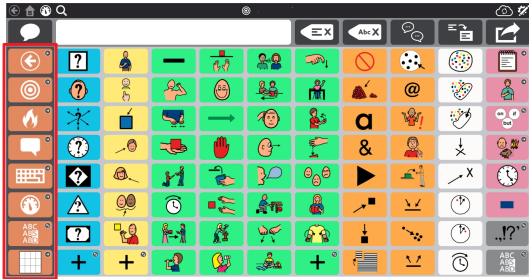

7.1 Indietro

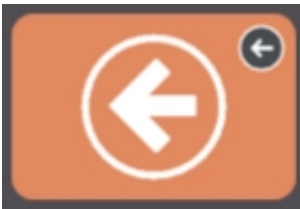


Figura 7.1 Pulsante Indietro — Barra degli strumenti Core First

Il pulsante Indietro funziona come il pulsante Indietro di un browser. Utilizzarlo per tornare alla pagina precedente.

7.2 Parole principali

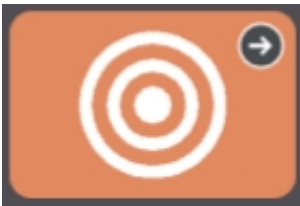


Figura 7.2 Pulsante Parole principali — Barra degli strumenti Core First

Questo pulsante apre la pagina Parole principali. Sviluppata con la ricerca, l'esperienza clinica e i test sugli utenti, la parte delle Parole principali permette:

- La selezione delle parole per un utilizzo ottimale in tutti gli ambienti;
- Il posizionamento delle parole nell'interfaccia utente;
- La costruzione veloce e logica delle sequenze di parole;
- Il posizionamento stabile e sistematico delle parole man mano che le successive vengono aggiunte;
- L'efficienza di navigazione nell'interfaccia;
- I supporti per insegnare agli utenti il significato delle parole e come combinarle per creare le frasi desiderate.

7.3 Messaggi Veloci



Figura 7.3 Pulsante Messaggi Veloci — Barra degli strumenti Core First

I Messaggi Veloci sono messaggi rapidi e prevedibili che possono essere utilizzati da soli e in combinazione. Si tratta di piccole parole che mantengono viva la conversazione, attirano l'attenzione o favoriscono i commenti. Sono inclusi nella pagina dei messaggi veloci anche messaggi d'uso comune focalizzati sulle esigenze personali, i saluti, le interazioni sociali, i sentimenti, le domande e i rimedi. I Messaggi Veloci pronunciano immediatamente il testo legato ai pulsanti selezionati e non inseriscono testo nella Finestra Messaggio.


7.4 Argomenti



Figura 7.4 Pulsante Argomenti — Barra degli strumenti Core First


Gli Argomenti forniscono supporto nelle interazioni in ambienti specifici o su temi particolari. Selezionare un argomento dalla Pagina Argomenti per vedere le parole e le frasi corrispondenti. Personalizzare il Gruppo di pagine aggiungendo i propri argomenti!

7.4.1 Parole Argomento

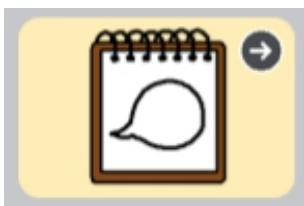

Queste pagine contengono parole d'uso comune nell'argomento selezionato.

7.4.2 Supporti

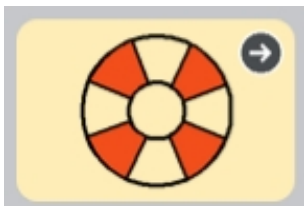

I supporti aiutano gli utenti tramite le routine comportamentali e la comunicazione sociale.

7.4.2.1 Prima, Dopo

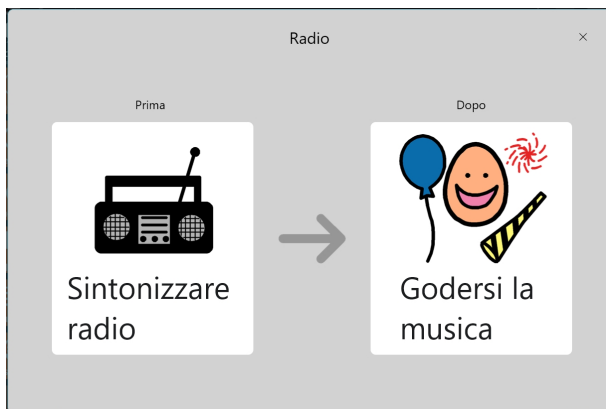


Figura 7.5 Supporto Prima, Dopo

Questo supporto mostra una sequenza di eventi a due fasi, rafforzando il concetto di causa ed effetti i passi logici.

7.4.2.2 Mini programma



Figura 7.6 Supporto Mini programma

Un Mini programma mostra una sequenza di eventi e rafforza il concetti di causa-effetto e percorso logico.

7.4.2.3 Script

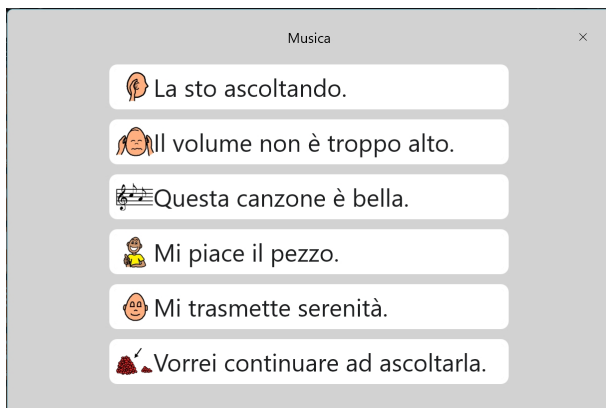


Figura 7.7 Supporto Script

Uno script fornisce frasi preimpostate comunemente utilizzate nell'argomento in questione. Gli script vengono utilizzati per creare schemi di interazione sociale e per aiutare a modellare una conversazione appropriata.

7.4.2.4 Timer visivo



Figura 7.8 Barra superiore con timer visivo

Il timer visivo visualizza un conto alla rovescia e una barra animata a colori nella barra superiore. Il display numerico esegue il conto alla rovescia di un periodo di tempo specificato e la barra colorata si riduce man mano che il tempo passa. Quando è attivata l'opzione Allarme, allo scadere del tempo viene emesso un segnale acustico.

Per annullare il timer visivo, selezionare **X** sul lato destro della barra superiore.



Per modificare il tempo del conto alla rovescia, entrare in modalità di modifica del pulsante e cambiare l'azione del Timer visivo.

7.5 Tastiera



Figura 7.9 Pulsante Tastiera — Barra degli strumenti Core First

La Tastiera è composta da pulsanti di tipo testo che si comportano come i pulsanti di una normale tastiera. Utilizzare questa pagina per comporre parole non disponibili nel Gruppo di pagine o per aggiungere la punteggiatura. Per impostare la tastiera desiderata, vedere [9.1.6 Imposta Pagina tastiera](#).

7.6 Pannello di Controllo



Figura 7.10 Pulsante Pannello di Controllo — Barra degli strumenti Core First

Il Pannello di Controllo è una pagina per accedere in modo semplice ai pulsanti utilizzati più frequentemente, specialmente i pulsanti non relativi al vocabolario come ad esempio il controllo del volume o i comandi a distanza.

7.7 Flessione di parola



Figura 7.11 Pulsante Flessione di parola — Barra degli strumenti Core First

La pagina Flessione di parola mostra le diverse forme (tempi verbali, numero, genere, ecc.) che può avere l'ultima parola scritta nella Finestra Messaggio. Selezionare la forma della parola desiderata per aggiornare la parola nella Finestra Messaggio.

7.8 Navigazione facilitata



Figura 7.12 Navigazione facilitata — Barra degli strumenti Core First

La Navigazione facilitata rappresenta la pagina iniziale per utenti che sono nella fase della comunicazione emergente e utilizzano griglie di dimensione <3x3. Il pulsante Navigazione facilitata rende disponibile tale pagina indifferentemente dalla scelta della grandezza della griglia.

7.9 abc (solo tedesco)



Questo pulsante apre l'area nota del vocabolario ABC da "LiterAACy". Si troveranno più di 3.600 parole del vocabolario di base e complesso, ordinate per la prima e la seconda lettera.

- L'area ABC supporta l'apprendimento e l'uso delle abilità di alfabetizzazione.
- Quando si seleziona una lettera, viene riprodotto un feedback fonetico.
- Ci sono due versioni di questa funzione, una che utilizza le maiuscole e una che utilizza le minuscole. Il pulsante abc minuscolo è quello predefinito. Per utilizzare le lettere maiuscole, rendere visibile il pulsante ABC (maiuscole) nella barra degli strumenti e nascondere il pulsante abc (minuscole). Vedere la sezione 8.5.6 *Nascondi/Mostra pulsanti*.

8 Modifica

Per apportare modifiche a un pulsante, una pagina, alle impostazioni o agli utenti, il software deve essere in Modalità Modifica. È possibile accedere alla Modalità Modifica in qualsiasi momento, selezionando il pulsante  **Modifica**.



Il pulsante Modifica e la Modalità Modifica sono accessibili solo tramite tocco o mouse.

In Modalità Modifica è possibile fare doppio clic sulla maggior parte dei pulsanti della pagina per vedere come si comportano in Modalità Uso.

8.1 Pannello Modifica

Il Pannello Modifica contiene tutti gli strumenti e le schede per apportare modifiche al Gruppo di pagine e al software.



Figura 8.1 Pannello Modifica (visualizzazione espansa)

Selezionare  per espandere il Pannello Modifica.

Ridimensionare il Pannello Modifica a piacimento trascinando  su o giù mentre il pannello è espanso.

8.2 Aggiunta di un pulsante

1. Selezionare il pulsante  **Modifica**.

2. Selezionare  in una cella vuota della pagina per creare un nuovo pulsante.




Figura 8.2 Cella vuota

8.3 Spostamento di un pulsante

1. Selezionare il pulsante  **Modifica**.
2. Tenere selezionato il pulsante che si desidera spostare, quindi trascinarlo nella posizione desiderata. Ci sono due modi per posizionare il pulsante nella pagina:
 - Scambio — Quando si trascina il pulsante direttamente su un altro pulsante, i due pulsanti si scambiano di posizione nella pagina. Il riquadro nero intorno alla posizione scelta sulla griglia indica uno scambio.



- Inserimento — Quando si trascina il pulsante selezionato nello spazio vuoto tra due pulsanti, i pulsanti a destra e sotto si sposteranno per creare spazio per il pulsante desiderato. Il pulsante manterranno la sequenza da sinistra a destra e dall'alto in basso nella pagina. La posizione di inserimento pulsante è indicata da una barra verticale.

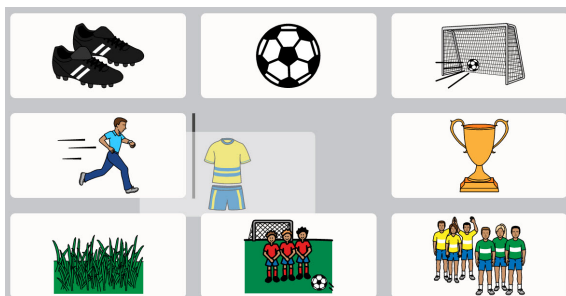

È possibile inserire un pulsante in orizzontale (come mostrato sopra) o in verticale.



Quando si sposta un pulsante, questo si applica solo alla dimensione griglia corrente.

8.4 Ridimensionamento di un pulsante

È possibile ridimensionare, secondo necessità, un pulsante affinché occupi più celle possibili della griglia all'interno di una sezione Pagina o di una sezione Barra gli strumenti.





1. Selezionare il pulsante **Modifica**.
2. Selezionare un pulsante sulla Pagina o nella Barra degli strumenti.



Il ridimensionamento di un pulsante è disponibile solo quando viene selezionato un singolo pulsante.

3. Tenere selezionato uno dei puntini blu negli angoli del pulsante selezionato, quindi trascinare per ridimensionare il pulsante.

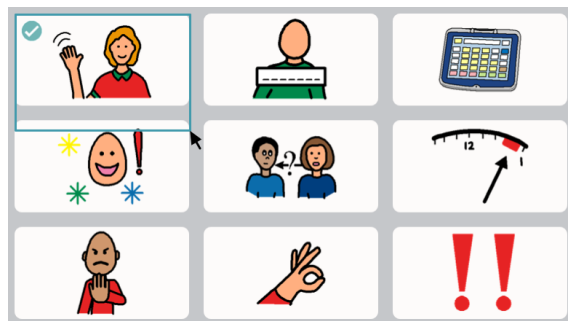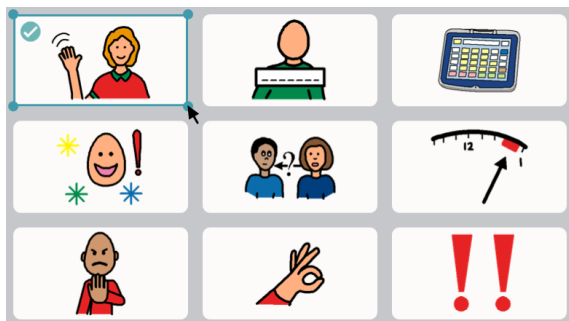

I pulsanti ridimensionati non possono attraversare le sezioni Pagina o le sezioni Barra degli strumenti.

4. Attendere che il pulsante riempi completamente le celle fino a raggiungere la dimensione desiderata, quindi rilasciare la selezione.



Non è possibile ridimensionare o spostare un pulsante in una cella occupata da un pulsante di navigazione (scorrimento).

Quando si ingrandisce un pulsante, i pulsanti fuori posizione si sposteranno verso le celle vuote più vicine.



Quando si ridimensiona un pulsante, questo si applica solo alla dimensione griglia corrente.

8.5 Strumenti di modifica pulsante

Gli strumenti a destra della finestra dell'app consentono di modificare i pulsanti al momento selezionati.



Figura 8.3 Strumenti di modifica pulsante — (dall'alto in basso) Annulla, Ripeti, Copia, Incolla, Seleziona tutto, Selezione multipla, Nascondi/Mostra, Elimina, Espandi/Riduci nomi strumenti

8.5.1 Annulla e Ripeti

Lo strumento Annulla  consente di annullare fino alle ultime 100 modifiche apportate all'utente/Gruppo di pagine corrente. Lo strumento Ripeti  ripristina l'ultima modifica annullata con lo strumento Annulla.



Il Gruppo di annullamenti viene azzerato quando si carica un utente differente, un Gruppo di pagine diverso e quando il software Snap viene chiuso.

8.5.2 Pulsanti Copia e Incolla

1. Selezionare il pulsante  **Modifica**.
2. Selezionare un pulsante.
3. Selezionare lo strumento  **Copia**.
Tenere conto che lo strumento Incolla visualizza il numero di pulsanti copiati.

4. Selezionare lo strumento  **Incolla**.
Il pulsante sarà copiato nella prima cella vuota disponibile nella pagina.

8.5.3 Seleziona tutti i pulsanti

Lo strumento Seleziona tutto seleziona automaticamente tutti i pulsanti della pagina corrente, in modo da poter eseguire operazioni di modifica massive.

1. Selezionare il pulsante  **Modifica**.
2. Individuare la barra laterale di modifica del **Pulsante**.
3. Selezionare lo strumento  **Seleziona tutto**.

 Dopo aver utilizzato Seleziona tutto, è possibile fare clic su ciascun pulsante per deselectionarlo; gli altri pulsanti rimarranno selezionati.

4. Apportare le modifiche desiderate ai pulsanti.
5. Per deselectionare tutti i pulsanti, selezionare lo strumento  **Selezione multipla**.

8.5.4 Selezione multipla dei pulsanti

Lo strumento Selezione multipla  consente di selezionare (manualmente) più pulsanti simultaneamente, in modo da poter eseguire operazioni di modifica massive.

1. Selezionare il pulsante  **Modifica**.
2. Individuare la barra laterale di modifica del **Pulsante**.
3. Selezionare lo strumento  **Selezione multipla**.

 Lo strumento Selezione multipla è nero quando è disabilitato e diventa blu quando viene abilitato.

4. Selezionare i pulsanti che si desidera modificare simultaneamente.

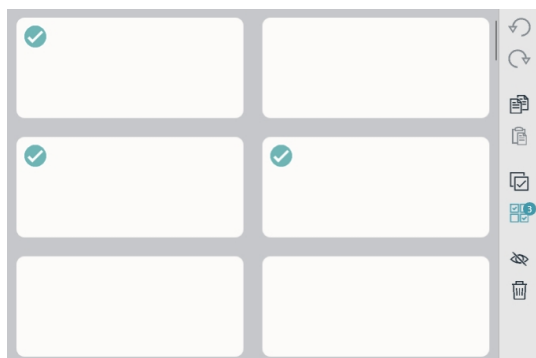


Figura 8.4 Pulsanti multipli selezionati — Tenere conto che lo strumento Selezione multipla mostra il numero di pulsanti al momento selezionati.

5. Apportare le modifiche desiderate ai pulsanti.
6. Per deselectionare tutti i pulsanti, selezionare lo strumento  **Selezione multipla**.

8.5.5 Selezione Area

Lo strumento  Selezione Area è un modo semplice per selezionare più pulsanti. Basta cliccare e trascinare per disegnare un rettangolo intorno a uno o più pulsanti che si desidera selezionare,

1. Selezionare il pulsante  **Modifica**.
2. Individuare la barra laterale di modifica del **Pulsante**.
3. Selezionare lo strumento  **Selezione Area**.
4. Fare clic (o toccare), quindi trascinare diagonalmente per tracciare un rettangolo su tutti i pulsanti che si desidera selezionare.

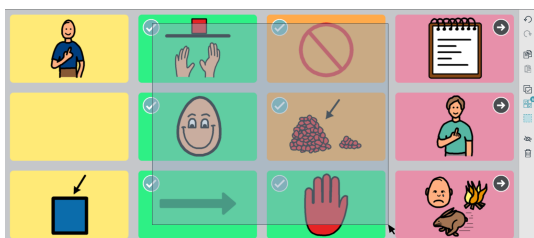


Figura 8.5 Uso di Selezione Area — Per essere selezionati, i pulsanti non devono essere completamente contenuti all'interno del rettangolo.



Fare clic sui singoli pulsanti per selezionarli/deselezionarli.

La selezione dei pulsanti può essere effettuata nella Barra degli strumenti o nella Pagina, ma non su entrambe contemporaneamente.

5. Apportare le modifiche desiderate ai pulsanti selezionati.
6. Per deselegionare tutti i pulsanti, selezionare lo strumento  **Selezione multipla**.

8.5.6 Nascondi/Mostra pulsanti

I pulsanti nascosti non sono visibili in Modalità Uso. I pulsanti che, ad esempio, non sono al momento utili o che sono fonte di distrazione, possono essere nascosti e quindi mostrati (resi visibili) in un secondo momento.

In Modalità modifica, i pulsanti nascosti sono indicati tramite sovrapposizione di colore grigio.

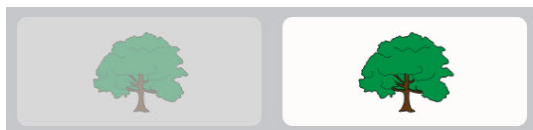


Figura 8.6 Un pulsante nascosto accanto a un pulsante visibile, come visualizzato in Modalità Modifica.

8.5.6.1 Nascondi

1. Selezionare il pulsante  **Modifica**.
2. Selezionare un pulsante che si desidera nascondere.
3. Selezionare lo strumento  **Nascondi**.



L'azione predefinita per lo strumento Nascondi/Mostra è quella di impostare la visibilità su tale pulsante ovunque appaia nel Gruppo di pagine. Per impostare la visibilità solo per la pagina in cui si trova in quel momento il pulsante selezionato, tenere cliccato (tocco prolungato) lo strumento Mostra/Nascondi e scegliere **Modifica visibilità qui**.

8.5.6.2 Mostra

1. Selezionare il pulsante  **Modifica**.
2. Selezionare un pulsante nascosto.
3. Selezionare lo strumento  **Mostra**.



L'azione predefinita per lo strumento Nascondi/Mostra è quella di impostare la visibilità su tale pulsante ovunque appaia nel Gruppo di pagine. Per impostare la visibilità solo per la pagina in cui si trova in quel momento il pulsante selezionato, tenere cliccato (tocco prolungato) lo strumento Mostra/Nascondi e scegliere **Modifica visibilità qui**.

8.5.7 Eliminazione di un pulsante

1. Selezionare il pulsante  **Modifica**.
2. Selezionare un pulsante.
3. Selezionare lo strumento  **Elimina**.

8.5.8 Ingrandisci/Riduci nomi degli strumenti di modifica

Selezionare le doppie frecce  per visualizzare i nomi degli strumenti di modifica. Selezionare nuovamente le doppie frecce  per nascondere i nomi degli strumenti.

8.6 Contenuto del pulsante



Figura 8.7 Pulsante con etichetta, simbolo, colore di sfondo e bordo.

8.6.1 Etichetta pulsante

L'Etichetta pulsante è il testo visualizzato su un pulsante.

8.6.1.1 Modifica etichetta del pulsante

1. Selezionare il pulsante  **Modifica**.
2. Selezionare un pulsante.

3. Digitare nel campo di testo **Etichetta**.

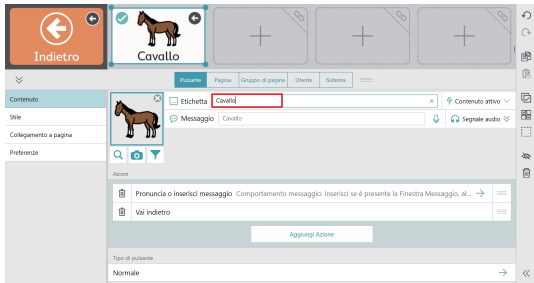


Figura 8.8 Campo di testo Etichetta pulsante

Se si desidera modificare le altre caratteristiche dell'etichetta (carattere, colore, posizione, dimensione, ecc.), vedere la sezione 8.8.3 *Etichetta pulsante*.

8.6.2 Contenuto attivo

Contenuto attivo consente di visualizzare le informazioni dinamiche su un pulsante. L'etichetta pulsante e il simbolo variano per riflettere lo stato delle informazioni correnti.

8.6.2.1 Aggiunta di un Contenuto attivo a un pulsante

1. Selezionare il pulsante  **Modifica**.
2. Selezionare un pulsante.
3. Selezionare **Contenuto attivo**. (Disponibile solo se **Tipo di pulsante** è impostato su **Normale**)

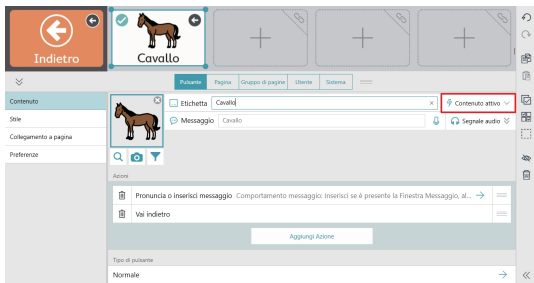


Figura 8.9 Contenuto attivo

4. Selezionare un tipo di Contenuto attivo.

Tipo di Contenuto attivo	Descrizione
Nessuno	Selezionare Nessuno per rimuovere il Contenuto attivo sul pulsante.
Stato di interruzione metodo di accesso	Nota: Interrompi metodo di accesso è applicabile esclusivamente ai seguenti metodi di accesso: Interazione oculare, Clic automatico del mouse. Quando vengono utilizzati altri Metodi di accesso, i pulsanti che usano il Contenuto attivo dello stato di interruzione metodo di accesso sono disabilitati. Se l'azione Interrompi metodo di accesso è presente sul pulsante (impostazione predefinita), l'etichetta visualizza l'azione del pulsante: Avvia accesso o Interrompi accesso. Se l'azione Interrompi metodo di accesso non è presente sul pulsante, l'etichetta visualizza lo stato di interruzione metodo di accesso. Accesso in esecuzione o Accesso interrotto.

Tipo di Contenuto attivo	Descrizione
Tempo di accesso	Nota: Il Tempo di accesso non si applica al Metodo di accesso tramite tocco. Visualizza il valore di impostazione del tempo per il Metodo di accesso corrente. L'impostazione del tempo effettivo varia in base al Metodo di accesso, ad es. il tempo di mantenimento, la velocità di scansione, il tempo di pausa, ecc. Per ulteriori informazioni, vedere <i>Tabella 8.1 Tabella del tempo di accesso, pagina 41</i>
Stato di collegamento AccessIT	Visualizza lo stato di collegamento del dispositivo AccessIT 3: Scollegato, In scollegamento, In collegamento o Collegato. Può essere abbinato all'azione Collega a AccessIT per creare un pulsante che mostri lo stato e, quando selezionato, che si colleghi a un dispositivo AccessIT.
Livello batteria	Mostra la percentuale del livello corrente della batteria: 0–100%. Il simbolo cambia per riflettere il livello della batteria e indica quando il dispositivo è collegato e in carica.
Modalità chat	Se l'azione Commuta Modalità chat è presente sul pulsante (impostazione predefinita), l'etichetta visualizza l'azione del pulsante: Chat o Interrompi chat. Se l'azione Commuta Modalità chat non è presente sul pulsante, l'etichetta del pulsante visualizza lo stato corrente della Modalità chat: Modalità chat On o Modalità chat Off.
Data	Mostra il giorno, il mese e l'anno correnti. Il formato della data dipende dall'area geografica.
Giorno della settimana	Visualizza il giorno corrente della settimana.
Stato di silenziamento feedback	Se l'azione Commuta silenziamento feedback audio è presente sul pulsante (impostazione predefinita), l'etichetta visualizza l'azione del pulsante: Silenzia feedback audio o Annulla silenziamento feedback audio. Se l'azione Commuta silenziamento feedback audio non è presente sul pulsante, l'etichetta visualizza lo stato corrente del silenziamento del feedback audio: Feedback audio silenziato o Feedback audio non silenziato.
Volume feedback	Visualizza il volume del feedback audio: 0–100%. Può essere abbinato all'azione Feedback audio Su e Feedback audio Giù per creare un pulsante che controlli il volume e visualizza anche il livello di volume del feedback.
Luminosità Finestra Partner	Solo dispositivi Tobii Dynavox I-13 e I-16. Visualizza la percentuale di luminosità della Finestra Partner: 0–100%. Può essere abbinata all'azione di aumento o riduzione della luminosità della Finestra Partner per creare un pulsante che regoli la luminosità della Finestra Partner e visualizzi anche la luminosità corrente della Finestra Partner.
Stato di alimentazione della Finestra Partner	Solo dispositivi Tobii Dynavox I-13 e I-16. Se l'azione Commuta alimentazione Finestra Partner è presente sul pulsante (impostazione predefinita), l'etichetta visualizza l'azione del pulsante: Attivare o disattivare la Finestra Partner. Se l'azione Commuta alimentazione Finestra Partner non è presente sul pulsante, l'etichetta del pulsante visualizza lo stato corrente di alimentazione della Finestra Partner: Finestra Partner attivata o disattivata.
Stato pronuncia	Se l'azione Pronuncia Finestra Messaggio è presente sul pulsante (impostazione predefinita), l'etichetta visualizza l'azione del pulsante: Pronuncia o Stop. Se l'azione Pronuncia Finestra Messaggio non è presente sul pulsante, l'etichetta del pulsante visualizza lo stato corrente di pronuncia: Pronuncia attivata o Pronuncia disattivata.
Stato di silenziamento vocale	Se l'azione Commuta silenziamento vocale è presente sul pulsante (impostazione predefinita), l'etichetta visualizza l'azione del pulsante: Silenzia o Annulla silenziamento. Se l'azione Commuta silenziamento vocale non è presente sul pulsante, l'etichetta visualizza lo stato corrente del silenziamento vocale: Silenziato o Non silenziato.

Tipo di Contenuto attivo	Descrizione
Volume voce	Visualizza il volume della voce: 0–100%. Può essere abbinato all'azione Volume voce Su e Volume voce Giù per creare un pulsante che controlli il volume e visualizza anche il livello di volume della voce.
Ora	Visualizza l'ora corrente del sistema in ore e minuti. Il formato dell'ora è determinato dall'impostazione geografica del sistema operativo. Nota: Il simbolo è un orologio generico che non cambia con il tempo.

8.6.3 Messaggio pulsante

Il Messaggio è il testo inserito nella Finestra Messaggio quando il pulsante viene selezionato. Se la Finestra Messaggio non è presente, il Messaggio pulsante viene pronunciato.

8.6.3.1 Modifica del messaggio di un pulsante

1. Selezionare il pulsante  **Modifica**.
2. Selezionare un pulsante.
3. Digitare nel campo di testo **Messaggio**.

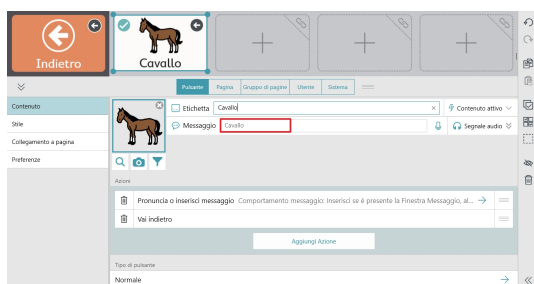


Figura 8.10 Campo di testo Messaggio pulsante

Se si desidera registrare una traccia audio personalizzata per il Messaggio, vedere la sezione 8.6.3.2 *Eseguire una registrazione*.

8.6.3.2 Eseguire una registrazione



Se si dispone di una registrazione e di un testo inserito per un singolo messaggio o segnale audio, è necessario specificare quale riprodurre in Modalità Uso. Selezionare la freccia per impostare il testo o la registrazione con opzione attiva.

1. Tenere selezionato  **Registra** per avviare la registrazione.
2. Una volta terminata la registrazione, rilasciare  **Registra**.



3. Per ascoltare la registrazione, selezionare **Riproduci**.



4. Per eliminare la registrazione, selezionare **X**.



8.6.4 Suono del pulsante

È possibile azionare Suono tramite tocco, clic del mouse, controllo oculare e scansione. Suono è un'anteprima del pulsante che viene pronunciata quando il pulsante è evidenziato ma non ancora selezionato.

8.6.4.1 Modifica suono del pulsante

1. Selezionare il pulsante  **Modifica**.
2. Selezionare un pulsante.
3. Selezionare **Suono** per espandere la riga.

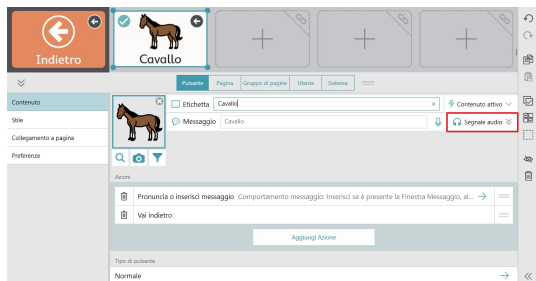


Figura 8.11 Campo di testo del suono del pulsante

4. Digitare nel campo di testo **Suono**.

Se si desidera registrare un Suono personalizzato, vedere la sezione 8.6.3.2 *Eseguire una registrazione*.

8.6.5 Immagine del pulsante

Un pulsante può visualizzare un simbolo o un'immagine.

8.6.5.1 Modifica immagine del pulsante

1. Selezionare il pulsante  **Modifica**.
2. Selezionare un pulsante.
3. Aggiungere un'immagine al pulsante:
 - Per cercare un simbolo:
 - a. Selezionare il pulsante  **Ricerca simboli**.
Si aprirà la finestra di dialogo Ricerca simboli.




- b. Digitare nel campo di testo per affinare i termini della ricerca.
 - c. Scegliere il simbolo desiderato.
 - d. Selezionare **Fatto**.
- Per utilizzare la fotocamera per scattare una foto per l'immagine del pulsante:
 - a. Selezionare il pulsante  **Fotocamera**.
 - b. Scegliere **Da fotocamera**.
 - c. Utilizzare la fotocamera sul dispositivo per acquisire una foto.

- Per utilizzare un'immagine archiviata sul dispositivo locale:

- Selezionare il pulsante  **Fotocamera**.
- Scegliere **Dalla galleria immagini**.
- Utilizzare il browser per individuare il file dell'immagine desiderata.

Se non si desidera alcun simbolo sul pulsante, selezionare **X** nell'angolo del simbolo corrente o impostare l'Etichetta pulsante su Solo etichetta. Vedere la sezione 8.8.3.5 *Layout Pulsante*.

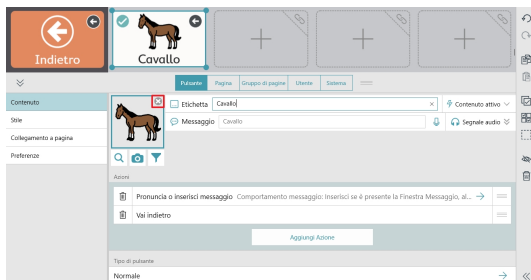

8.6.5.2 Filtrare i risultati della ricerca simboli

- Selezionare il pulsante  **Modifica**.
- Selezionare un pulsante.
- Selezionare il pulsante  **Filtro simboli**.
- Selezionare le funzioni che si desidera vedere nei risultati della ricerca simboli (Adulto, Bambino, Femmina, Maschio).



Le impostazioni del filtro rimarranno abilitate fino a nuova modifica.

8.6.6 Tipo di pulsante

L'impostazione Tipo di pulsante determina il modo in cui un pulsante si comporta.

- Selezionare il pulsante  **Modifica**.
- Selezionare un pulsante.
- Selezionare **Tipo di pulsante**.
- Selezionare un Tipo di pulsante dall'elenco:
 - **Normale** — Contiene un simbolo, un'etichetta e delle azioni. L'azione predefinita è Pronuncia/Inserisci messaggio.
 - **Predittore** — anticipa la parola successiva in base alla composizione corrente nella Finestra Messaggio. Selezionare il pulsante per inserire l'etichetta al momento visualizzata nella Finestra Messaggio.
 - **Tastiera** — progettato per inserire un carattere singolo nella Finestra Messaggio o per rispondere in modo appropriato ai modificatori come ad esempio il tasto Maiusc o Bloc Maiusc.

- **Flessione** — consente di modificare la parola interessata nella forma specificata (plurale, passato, ecc.). Il target è impostato su una di due opzioni: l'ultima parola nella Finestra Messaggio o tutti i pulsanti Grammatica.

The screenshot shows the 'Pulsante' configuration window with tabs for 'Pulsante', 'Pagina', 'Gruppo di pagine', 'Utente', and 'Sistema'. The 'Contenuto' section includes 'Tipo di flessione' (set to 'Reset: Forma di parola originale'), 'Sito' (with a right arrow), and 'Collegamento a pagina' (highlighted with a red box, containing 'target Finestra flessione messaggio' with a right arrow). The 'Preferenze' section includes 'Opzione attivata' (On), 'Mostra parola con flessione' (On), 'Immagine' (with a placeholder 'Nessun simbolo' and a search bar), 'Visita Opzioni' (Off), 'Prolunga visita' (Off), 'Tipo di pulsante' (set to 'Flessione'), and a 'Flessione' field with a right arrow.



L'impostazione Regole lingua del pulsante deve essere esattamente la stessa del pulsante Flessione e del pulsante Grammatica affinché la flessione funzioni correttamente.

- **Grammatica** —aggiorna la relativa etichetta per prevedere la forma grammaticale desiderata della parola in base al contenuto corrente della Finestra Messaggio, a un pulsante Flessione selezionato o a un pulsante Soggetto sottinteso selezionato.
- **Soggetto sottinteso** — è possibile utilizzare un pulsante Soggetto sottinteso per la flessione dei pulsanti Grammatica nonché per inserire la relativa etichetta nella Finestra Messaggio. Quando selezionato una volta, il pulsante Soggetto sottinteso eseguirà la flessione dei pulsanti Grammatica per accordarsi con il pronome sul pulsante Soggetto sottinteso. Se selezionato una seconda volta, l'etichetta (pronome) del pulsante Soggetto sottinteso viene inserita nella Finestra Messaggio.

Se le Regole lingua del pulsante Soggetto sottinteso sono impostate su Spagnolo (Messico, Spagna o Stati Uniti), è possibile utilizzare uno dei seguenti pronomi sul pulsante:

- yo
- tú
- usted
- él
- ella
- nosotros
- nosotras
- vosotros
- vosotras
- ustedes
- ellos
- ellas



L'impostazione Regole lingua del pulsante deve essere esattamente la stessa del pulsante Soggetto sottinteso e del pulsante Grammatica affinché la flessione funzioni correttamente.

8.7 Azioni pulsante

Le Azioni consentono di creare pulsanti che eseguono operazioni!

Aggiunta o modifica delle azioni pulsante



1. Selezionare il pulsante **Modifica**.
2. Selezionare un pulsante.
3. Selezionare **Aggiungi azione** per scegliere un'azione da aggiungere al pulsante. (Disponibile solo se **Tipo di pulsante** è impostato su **Normale**)

Azioni per i messaggi	Descrizione
Cancella Finestra Messaggio	Consente di cancellare il contenuto della Finestra Messaggio.
Cancella parola	Consente di cancellare l'ultima parola dalla Finestra Messaggio.
Copia la finestra di messaggio sul pulsante	Consente di copiare il testo della Finestra Messaggio, quindi di aggiungerlo all'etichetta del pulsante selezionato dall'utente.
Copia Finestra Messaggio negli appunti	Consente di copiare il testo della Finestra Messaggio negli appunti del sistema.
Incolla Appunti nella Finestra Messaggio	Consente di incollare il contenuto degli appunti del sistema nella Finestra Messaggio.
Condividi Finestra Messaggio	
Pronuncia Finestra Messaggio	Consente di pronunciare il contenuto della Finestra Messaggio
Pronuncia o inserisci messaggio	Consente di pronunciare o inserire un messaggio di pulsante.
Pronuncia frase	Consente di pronunciare l'ultima frase dalla Finestra Messaggio.
Cambia Modalità Chat	Consente di attivare e disattivare la chat. Quando la Chat è attivata, il contenuto corrente della Finestra Messaggio viene salvato nella cache e, successivamente, la Finestra Messaggio viene cancellata. In Chat, è possibile inserire un nuovo contenuto nella Finestra Messaggio e pronunciarlo. Quando la Chat viene disattivata, il contenuto della Finestra Messaggio, salvato nella cache, viene ripristinato in modo da poter proseguire dal punto dell'interruzione.
Azione per la navigazione	Descrizione
Annulla visita	Consente di annullare la visita, pertanto l'utente rimane nella pagina corrente.
Prolunga visita	Un pulsante contenente questa azione non attiverà il ritorno alla pagina precedente mentre la verifica è in corso.
Vai indietro	Consente di tornare alla pagina precedente.
Vai alla Home	Consente di andare alla pagina iniziale.
Collega	Consente di effettuare il collegamento a un'altra pagina.
Apri Pannello di Controllo	Consente di aprire il Pannello di Controllo.
Apri tastiera	Consente di aprire la pagina Tastiera
Apri lavagna***	Consente di aprire la lavagna.
Torna dalla visita	Consente di tornare alla pagina precedente, annullando la Visita.
Cambia Gruppo di pagine	Consente di passare a un Gruppo di pagine differente.
Azioni per il supporto comportamento	Descrizione
Prima - Dopo	Consente di visualizzare una sequenza Prima, Dopo in una finestra a comparsa.
Mini programma	Consente di visualizzare una mini pianificazione in una finestra a comparsa.
Script	Consente di visualizzare uno Script in una finestra a comparsa.
Timer visivo	Visualizza un timer nella Barra superiore per il conteggio alla rovescia del tempo specificato.

Azioni per il Metodo di accesso	Descrizione
Calibra eye tracker	Consente di avviare la calibrazione dell'eye tracker
Arresta metodo di accesso	Mette in pausa o ripristina il metodo di accesso. Il testo sull'etichetta pulsante visualizza se il metodo di accesso è al momento interrotto o attivo. Metodi di accesso applicabili: Clic automatico del mouse, Interazione oculare.
Imposta tempo di accesso	Imposta la variabile del tempo del metodo di accesso sul valore specificato. La variabile del tempo interessata è determinata dal metodo di accesso attivo quando l'azione <i>Imposta tempo di accesso</i> è attivata Ad esempio, è possibile aggiungere l'azione quando il metodo di accesso è impostato su Tocco ma, successivamente, l'utente la attiva con il metodo di accesso Interazione oculare per modificare il tempo di permanenza
Mostra stato eye tracker	Consente di visualizzare la finestra di stato del tracking per l'eye tracker.
Azioni per il Controllo volume	Descrizione
Cambia Feedback Audio - Muto on/off	Consente di silenziare o di annullare il silenziamento del volume del feedback audio.
Feedback audio -Volume Giù	Consente di ridurre il volume del feedback audio.
Feedback audio -Volume Su	Consente di aumentare il volume del feedback audio.
Imposta volume	Regolare il volume del sistema su un livello specifico.
Muto	Consente di silenziare o annullare il silenziamento del sistema.
Volume Voce Giù	Consente di ridurre il volume del sistema.
Volume Voce su	Consente di aumentare il volume del sistema.
Azioni per il Controllo ambientale	Descrizione
Invia segnale a infrarossi	Consente di inviare il segnale a infrarossi specificato.
Azioni per AccessIT	Descrizione
Collega a AccessIT*	Consente di scollegare il dispositivo AccessIT al momento collegato, quindi visualizza il selettore del dispositivo AccessIT.
Resetta AccessIT*	Interrompe le azioni AccessIT specificate: trasmissioni testo, mantenimento tasti premuti, clic e/o movimenti continui del mouse.
Invia testo pulsante	Consente di inviare un'etichetta pulsante o un messaggio al dispositivo AccessIT.
Invia tasto tastiera*	Consente di inviare un tasto della tastiera al dispositivo AccessIT.
Invia testo della Finestra Messaggio*	Consente di inviare il testo al momento visualizzato nella Finestra Messaggio al dispositivo AccessIT.
Invia Clic del mouse*	Consente di inviare i clic del mouse al dispositivo AccessIT.
Invia Movimento del mouse*	Consente di inviare il movimento al dispositivo AccessIT.
Invia testo*	Consente di inviare il testo al dispositivo AccessIT.
Azioni per l'avvio di altre applicazioni	Descrizione
Avvia applicazione	Consente di avviare l'applicazione specificata.

Azioni per dispositivo	Descrizione
Riavvia dispositivo	Consente di riavviare il dispositivo.
Spegni dispositivo	Consente di spegnere il dispositivo.
Attiva/Disattiva schermo intero	Consente di attivare o disattivare la Modalità a schermo intero per il dispositivo.

Azione per la Finestra Partner	Descrizione
Riduzione luminosità Finestra Partner**	Consente di ridurre la luminosità della Finestra Partner.
Aumento luminosità Finestra Partner**	Consente di aumentare la luminosità della Finestra Partner.
Attiva/Disattiva Finestra Partner**	Consente di attivare o disattivare la Finestra Partner.

* Questa azione richiede un dispositivo Tobii Dynavox AccessIT 3. Vedere la sezione 8.7.4 AccessIT

** Questa azione richiede un dispositivo Tobii Dynavox I-13 o I-16.

*** Vedere la sezione 8.7.3 Lavagna

† Elenco delle variabili di tempo influenzate dall'azione Imposta tempo di accesso.

Tabella 8.1 Tabella del tempo di accesso


Metodo di accesso	Variabile di tempo interessata
Interazione oculare con pausa	Tempo Pausa
Interazione oculare con sensore	Tempo di attivazione sensore
Interazione oculare con occholino	Durata minima dell'occholino
Attivazione al tocco/Attivazione al rilascio	Tempo di attivazione pulsante
Scansione automatica sensore 1	Velocità di scansione
Scansione sensore 1	Tempo di Pausa
Dwell Scansione sensore 1	Tempo di Pausa
Scansione inversa	Velocità
Clic automatico del mouse	Tempo pausa
Tocco	nessuno


8.7.1 Eliminazione di un'azione

1. Selezionare il pulsante  **Modifica**.
2. Selezionare un pulsante.
3. Selezionare il pulsante  **Elimina** accanto a un pulsante.
4. Selezionare un pulsante **Elimina** per confermare l'eliminazione.

8.7.2 Riordina azioni pulsante

1. Selezionare il pulsante  **Modifica**.
2. Selezionare un pulsante.

3. Tenere selezionato l'handle  di un'Azione, quindi trascinarlo in una nuova posizione nell'elenco delle Azioni.

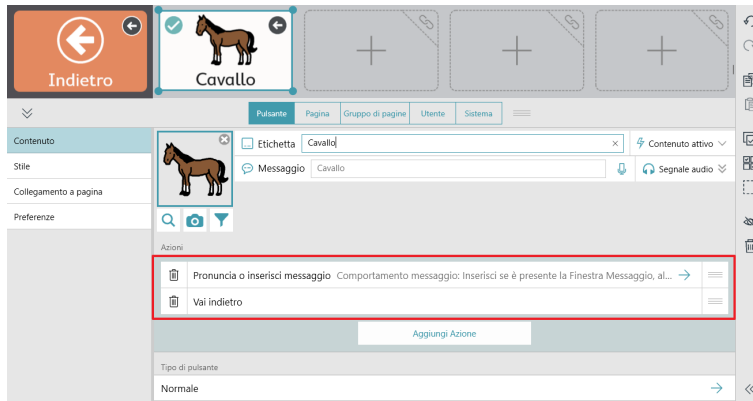


8.7.3 Lavagna

 La Lavagna è accessibile solo tramite il Metodo di accesso con tocco.

La Lavagna è un'area in cui è possibile visualizzare foto e creare disegni a mano libera. Consente di creare tutti i pannelli desiderati. Questi rimarranno fino alla relativa eliminazione.

Per aprire la Lavagna, utilizzare l'azione Apri lavagna sul pulsante.

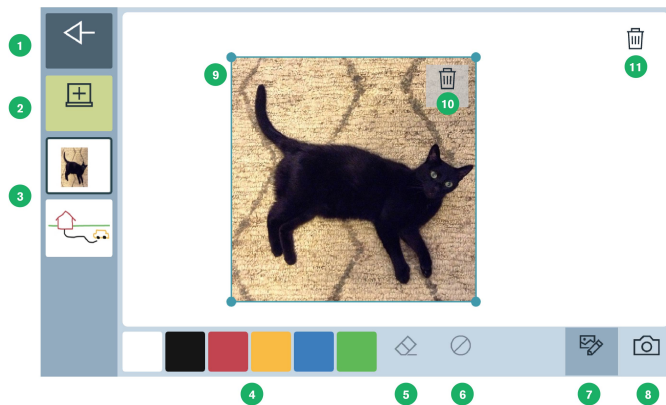

1. **Indietro** — Consente di tornare al Gruppo di pagine.
2. **Nuova lavagna** — Consente di creare una nuova lavagna.
3. **Elenco delle lavagne esistenti** — Consente di selezionare una lavagna per visualizzazione e modifica.
4. **Tavolozza di disegno** — Consente di selezionare un colore e quindi di effettuare un disegno a mano libera sulla lavagna.
5. **Strumento di cancellazione** — Consente di cancellare i disegni in aree specifiche.
6. **Cancella** — Consente di cancellare tutti i disegni della lavagna corrente.
7. **Modifica immagini** — Consente di riposizionare, ridimensionare o eliminare le immagini sulla lavagna.
8. **Aggiungi immagine** — Consente di aggiungere un'immagine alla lavagna. Usa la tua fotocamera integrata per scattare una foto o per cercare un'immagine archiviata sul dispositivo.

Azioni per Aggiungi immagine

- Scatta una foto
- Scegli una foto



È possibile accedere alla finestra di dialogo per questa azione solo tramite Tocco.

- Annulla
9. **Immagine selezionata** — Fare clic e trascinare dal centro dell'immagine per riposizionare. Fare clic e trascinare su un angolo per ridimensionare.
 10. **Elimina immagine** — Consente di eliminare l'immagine selezionata.
 11. **Elimina lavagna** — Consente di eliminare la lavagna corrente.

8.7.4 AccessIT

Snap supporta Tobii Dynavox AccessIT 3, un dispositivo USB Bluetooth utilizzato per inviare la pressione dei tasti, i movimenti del mouse e i clic del mouse a un computer Windows 10 standard da un dispositivo su cui è in esecuzione l'app Tobii Dynavox Snap Core First. Per ulteriori informazioni Tobii Dynavox AccessIT 3 visitare <http://www.tobiidynavox.com/AccessIT>



Le pagine di AccessIT sono incluse nei Gruppi di pagine Core First create con Snap versione 1.7 e le versioni successive. I bundle di pagine di AccessIT possono essere importati nei Gruppi di pagine esistenti su <https://www.mytobiidynavox.com/PagesetCentral>



Pertanto, questo documento indicherà il computer che riceve i comandi come "il PC" e il dispositivo dal quale verranno inviati i comandi come "il dispositivo vocale".



AccessIT 3 utilizza la tecnologia Bluetooth® wireless. Il PC (con AccessIT 3 collegato) e il dispositivo vocale devono trovarsi entro circa 10 metri (32 piedi) per stabilire e mantenere l'abbinamento Bluetooth mentre AccessIT 3 è in uso.

Il dispositivo vocale e il PC devono essere accesi e sbloccati prima di iniziare con le fasi elencate di seguito.

8.7.4.1 Configurazione AccessIT

Collegare AccessIT

1. (Sul PC) Inserire AccessIT 3 in una porta USB.



AccessIT 3 richiede la versione USB 2.0 o successive.

Abilita Bluetooth — Dispositivi vocali Windows

1. (Sul dispositivo vocale) Selezionare il menu **Start**, quindi scegliere **Impostazioni**.
2. Selezionare **Dispositivi**.
3. Selezionare **Bluetooth**.
4. Portare il comando **Bluetooth** in posizione ON.

Abilita Bluetooth — Dispositivi vocali iOS (iPad)

1. (Sul dispositivo vocale) Andare su **Impostazioni > Bluetooth** e abilitare il Bluetooth.

8.7.4.2 Azioni AccessIT

Le azioni AccessIT sono progettate per essere utilizzate in combinazione. Operazioni comuni del PC come fare clic o trascinare un elemento richiederanno più di un'azione. Le azioni singole sono descritte di seguito.



Se un dispositivo AccessIT non è collegato quando viene selezionato un pulsante che contiene un'azione AccessIT, il selettore del dispositivo AccessIT (accessibile) si aprirà automaticamente.

- Collega a AccessIT — Consente di scollegare il dispositivo AccessIT (se presente) e visualizzare il selettore del dispositivo AccessIT. Questa azione è utile per passare da un dispositivo AccessIT a un altro dispositivo AccessIT. Non è necessario utilizzare questa azione per avviare tutte le sessioni di AccessIT, dal momento che tutte le azioni

AccessIT aprono automaticamente il selettore del dispositivo AccessIT se al momento non è collegato un dispositivo AccessIT.

- **Resetta AccessIT** — Consente di arrestare i tipi di comandi specificati in esecuzione: tasti della tastiera, clic del mouse, movimenti del mouse e/o testo.
- **Invia testo pulsante** — Consente di inviare il Messaggio del pulsante al dispositivo AccessIT. Se il pulsante non contiene un Messaggio, invia l'Etichetta del pulsante.
- **Invia tasto tastiera** — Consente di inviare il tasto della tastiera specificato. Opzioni: tenere premuto il tasto e/o attendere per un periodo di tempo specificato dopo aver inviato il tasto della tastiera (prima di eseguire l'azione successiva).
- **Invia testo della Finestra Messaggio** — Consente di inviare il testo della Finestra Messaggio corrente al dispositivo AccessIT. Se la Finestra Messaggio contiene dei simboli, questi ultimi non vengono inviati.
- **Invia testo** — Consente di inviare il testo specificato al dispositivo AccessIT.
- **Invia Clic del mouse** — Consente di inviare il tipo di clic specificato (clic sinistro, clic destro, clic centrale, doppio clic sinistro). Opzioni: attendere per un intervallo di tempo specificato dopo aver inviato il clic (prima di eseguire l'azione successiva) e/o tenere premuto il clic.
- **Invia Movimento del mouse** — Consente di inviare un movimento del mouse al dispositivo AccessIT. I movimenti del mouse vengono effettuati dalla posizione corrente del mouse. Portare la sfera di colore blu alla posizione sul cerchio che corrisponde alla direzione del movimento del mouse desiderata, quindi inserire un numero nel campo relativo alla distanza. L'unità della distanza è il movimento più leggero del mouse rilevabile, compreso tra 1/300 e 1/200 pollici, a seconda dell'impostazione della velocità del mouse e dell'attrezzatura sul PC. Opzioni: muovere ininterrottamente (il mouse continuerà a muoversi nella direzione specificata fino a quando un'altra azione non lo arresterà e/o reindirizzerà o si muove sul bordo della schermata) e/o attendere per un intervallo di tempo specificato dopo aver inviato il movimento del mouse (prima di eseguire l'azione successiva).



Figura 8.12 Direzione del movimento del mouse — Consente di posizionare la sfera di colore blu presente sul cerchio per impostare la direzione del movimento del mouse.



Alcuni utenti di AccessIT potrebbero trovare utile abilitare l'impostazione Windows "Mostra la posizione del puntatore quando premo il pulsante CTRL" sul PC. Utilizzare l'azione **Invia tasto tastiera** per inviare il tasto CTRL da Snap e appariranno momentaneamente dei cerchi animati attorno al puntatore del mouse sul PC per renderlo più visibile. Per accedere alle impostazioni del mouse di Windows, andare alla voce *Impostazioni > Dispositivi > Mouse > Opzioni aggiuntive del mouse > scheda Opzioni del puntatore*.

8.7.4.3 Impostazioni di accensione PC e AccessIT


Il PC può ricevere i comandi di AccessIT soltanto quando è acceso e attivo. Per garantire un accesso continuo al PC, regolare le impostazioni energetiche del PC in modo che il computer (hard disk) non entri mai in modalità di riposo quando è collegato.

Il PC può comunque ricevere i comandi di AccessIT se lo schermo (display) è in modalità di risparmio energetico. I comandi di AccessIT (tasto della tastiera, movimento del mouse o clic del mouse) inviati da Snap attivano lo schermo del PC.

Le impostazioni di accensione di Windows sono reperibili alla voce *Impostazioni > Sistema > Alimentazione e sospensione*.

8.8 Stile pulsante

Consente di modificare l'aspetto di un pulsante nella categoria Stile pulsante.

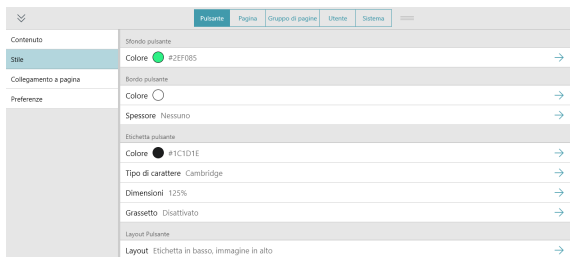

8.8.1 Sfondo pulsante

1. Selezionare il pulsante  **Modifica**.
2. Selezionare un pulsante.
3. Selezionare la categoria **Stile**.
4. Selezionare **Colore** sotto Sfondo pulsante.
5. Selezionare un colore.

8.8.2 Bordo pulsante

8.8.2.1 Colore bordo

1. Selezionare il pulsante  **Modifica**.
2. Selezionare un pulsante.
3. Selezionare la categoria **Stile**.
4. Selezionare **Colore** sotto Bordo pulsante.
5. Selezionare un colore.

8.8.2.2 Spessore bordo

1. Selezionare il pulsante  **Modifica**.
2. Selezionare un pulsante.
3. Selezionare la categoria **Stile**.
4. Selezionare **Spessore** sotto Bordo pulsante.
5. Seleziona spessore bordo — Nessuno, sottile, medio o spesso.



Figura 8.13 Bordi pulsante: Nessuno, sottile, medio e spesso.

8.8.3 Etichetta pulsante

8.8.3.1 Colore

1. Selezionare il pulsante  **Modifica**.
2. Selezionare un pulsante.
3. Selezionare la categoria **Stile**.

4. Selezionare **Colore** sotto Etichetta pulsante.
5. Selezionare un colore.

8.8.3.2 Tipo di carattere



Questa impostazione predefinita viene configurata nella scheda Gruppo di pagine. Se in questo caso si desidera escludere l'impostazione predefinita Gruppo di pagine, configurare l'impostazione Adatta gruppo di pagine su **Off**. Per allineare questa impostazione con il resto del Gruppo di pagine, portare l'impostazione Adatta gruppo di pagine su **On**.



1. Selezionare il pulsante **Modifica**.
2. Selezionare un pulsante.
3. Selezionare la categoria **Stile**.
4. Selezionare **Carattere** sotto Etichetta pulsante.
5. Selezionare un carattere.

8.8.3.3 Dimensioni



Questa impostazione predefinita viene configurata nella scheda Gruppo di pagine. Se in questo caso si desidera escludere l'impostazione predefinita Gruppo di pagine, configurare l'impostazione Adatta gruppo di pagine su **Off**. Per allineare questa impostazione con il resto del Gruppo di pagine, portare l'impostazione Adatta gruppo di pagine su **On**.



1. Selezionare il pulsante **Modifica**.
2. Selezionare un pulsante.
3. Selezionare la categoria **Stile**.
4. Selezionare **Dimensioni** sotto Etichetta pulsante.
5. Selezionare le dimensioni.

8.8.3.4 Grassetto



Questa impostazione predefinita viene configurata nella scheda Gruppo di pagine. Se in questo caso si desidera escludere l'impostazione predefinita Gruppo di pagine, configurare l'impostazione Adatta gruppo di pagine su **Off**. Per allineare questa impostazione con il resto del Gruppo di pagine, portare l'impostazione Adatta gruppo di pagine su **On**.



1. Selezionare il pulsante **Modifica**.
2. Selezionare un pulsante.
3. Selezionare la categoria **Stile**.
4. Selezionare **Grassetto** sotto Etichetta pulsante.
5. Portare la voce grassetto su **On** o **Off**.

8.8.3.5 Layout Pulsante



Questa impostazione predefinita viene configurata nella scheda Gruppo di pagine. Se in questo caso si desidera escludere l'impostazione predefinita Gruppo di pagine, configurare l'impostazione Adatta gruppo di pagine su **Off**. Per allineare questa impostazione con il resto del Gruppo di pagine, portare l'impostazione Adatta gruppo di pagine su **On**.



1. Selezionare il pulsante **Modifica**.
2. Selezionare un pulsante.
3. Selezionare la categoria **Stile**.
4. Selezionare **Layout pulsante** sotto Etichetta pulsante.
5. Selezionare un layout dall'elenco.




Etichetta in alto, immagine in basso




Etichetta in basso, immagine in alto




Etichetta a sinistra, immagine a destra

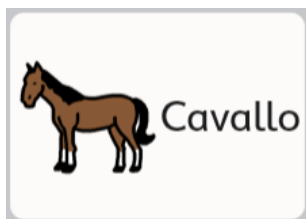

Etichetta a destra, immagine a sinistra

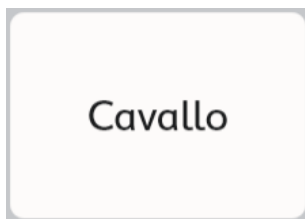

Solo etichetta

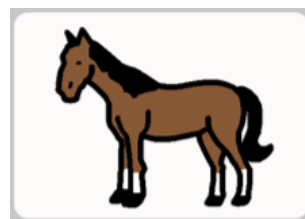

Solo immagine

8.9 Collegamento a Pagina/Crea nuova pagina

I pulsanti di collegamento aprono una pagina diversa quando vengono selezionati. Per impostazione predefinita, i pulsanti

di collegamento vengono identificati con questa icona  o l'icona di visita . Per cambiare l'aspetto dei pulsanti di collegamento e di visita, vedere la sezione 9.3.5 *Visualizza collegamento gruppo di pagine*.

8.9.1 Crea un pulsante di collegamento in una cella vuota

1. Selezionare il pulsante  **Modifica**.
2. Selezionare l'icona di collegamento in una cella vuota.



- Per il collegamento a una pagina completamente nuova, vedere la sezione 8.9.3 *Collegamento a una Nuova pagina/Crea nuova pagina*.
- Per il collegamento a una pagina esistente, vedere la sezione 8.9.4 *Collegamento a una pagina esistente*.
- Per il collegamento a una copia (nuova) di una pagina esistente, vedere la sezione 8.9.5 *Collegamento a Nuova copia di una Pagina esistente*.
- Per importare e collegarsi a una pagina, vedere la sezione 8.9.6 *Importa e collega alla pagina*.

8.9.2 Crea un collegamento da un pulsante esistente

1. Selezionare il pulsante  **Modifica**.

2. Selezionare il pulsante dal quale si desidera creare un collegamento.
3. Individuare la barra laterale di modifica del **Pulsante**.
4. Selezionare la categoria **Azione**.
5. Selezionare **Aggiungi azione**.
6. Selezionare **Collegamento**.
 - Per il collegamento a una pagina completamente nuova, vedere la sezione 8.9.3 *Collegamento a una Nuova pagina/Crea nuova pagina*.
 - Per il collegamento a una pagina esistente, vedere la sezione 8.9.4 *Collegamento a una pagina esistente*.
 - Per il collegamento a una copia (nuova) di una pagina esistente, vedere la sezione 8.9.5 *Collegamento a Nuova copia di una Pagina esistente*.
 - Per importare e collegarsi a una pagina, vedere la sezione 8.9.6 *Importa e collega alla pagina*.

8.9.3 Collegamento a una Nuova pagina/Crea nuova pagina

1. Selezionare **Collegamento a una nuova pagina**. Si aprirà la finestra di dialogo Nuova pagina.
2. Inserire il nome della pagina nel campo **Nome**. Selezionare un simbolo o selezionare **X** se non si desidera impostare un simbolo per la pagina.
3. Selezionare **Crea** per creare il collegamento e la nuova pagina. Selezionare **Annulla** per tornare indietro senza salvare.



8.9.4 Collegamento a una pagina esistente

1. Selezionare **Collegamento a una pagina esistente**. Si aprirà la finestra di dialogo Collegamento a una pagina esistente.
2. Selezionare una pagina dall'elenco.



Scrivere nel campo Cerca per trovare una pagina specifica, o selezionare Aperte di recente per trovare una pagina visitata di recente.

3. Selezionare **Salva** per creare il collegamento. Selezionare **Annulla** per tornare indietro senza salvare.

Per ulteriori informazioni su Pagina visita vedere la sezione 8.9.7 *Pagina visita*.

8.9.5 Collegamento a Nuova copia di una Pagina esistente

Questo metodo di collegamento consente di utilizzare una pagina come modello per la nuova pagina che si sta creando.

1. Selezionare **Collegamento alla Copia della pagina**. Si aprirà la finestra di dialogo Copia della pagina.
2. Selezionare una pagina dall'elenco.



Scrivere nel campo Cerca per trovare una pagina specifica, o selezionare Aperte di recente per trovare una pagina visitata di recente.

3. Inserire il nome della nuova pagina nel campo Nome.
4. Selezionare **Salva** per crea una copia della pagina selezionata e del collegamento. Selezionare **Annulla** per tornare indietro senza salvare.

Per ulteriori informazioni su Pagina visita vedere 8.9.7 *Pagina visita*.

8.9.6 Importa e collega alla pagina

Se si possiede un file di bundle di pagine che contiene una pagina alla quale si desidera collegarsi, è possibile importare la pagina e collegarsi ad essa in un unico passaggio utilizzando Importa e collega alla pagina.

1. Selezionare **Importa e collega alla pagina**. È possibile scegliere se importare da myTobiiDynavox o da un file locale:

Da myTobiiDynavox

- Selezionare **Da myTobiiDynavox**. Potrebbe essere richiesto di accedere a myTobiiDynavox. Si apre la finestra di dialogo Seleziona bundle di pagine da myTobiiDynavox.
- Selezionare il Bundle di pagine che si desidera importare, quindi selezionare **Avanti**.
- Selezionare la pagina alla quale si desidera collegarsi, quindi selezionare **Importa**.



Si verificano dei conflitti tra le pagine quando il bundle di pagine contiene una o più pagine già esi-

stenti sul dispositivo, ma che non sono identiche. Selezionare ogni icona di conflitto pagine , quindi scegliere se mantenere la pagina esistente o sovrascriverla con la pagina importata dal bundle di pagine. È necessario risolvere tutti i conflitti delle pagine in questo modo prima di procedere all'importazione del Bundle di pagine.

Da un file locale

- Selezionare **Da un file locale**. Si apre la finestra di dialogo Importa bundle di pagine da un file locale.
- Selezionare **Cerca**. Navigare fino al Bundle di pagine desiderato (.spb) e selezionare **Apri**.
- Selezionare **Avanti**.
- Selezionare la pagina alla quale si desidera collegarsi, quindi selezionare **Importa**.



Si verificano dei conflitti tra le pagine quando il bundle di pagine contiene una o più pagine già esi-

stenti sul dispositivo, ma che non sono identiche. Selezionare ogni icona di conflitto pagine , quindi scegliere se mantenere la pagina esistente o sovrascriverla con la pagina importata dal bundle di pagine. È necessario risolvere tutti i conflitti delle pagine in questo modo prima di procedere all'importazione del Bundle di pagine.

8.9.7 Pagina visita

Quando è abilitata, l'impostazione Pagina visita stabilisce un collegamento per riportare l'utente alla pagina precedente dopo aver effettuato una selezione che genera il ritorno sulla pagina collegata. I pulsanti di collegamento con l'impostazione



Pagina visita abilitata mostrano questa icona:

Come funziona Pagina visita

- Selezionare il pulsante di collegamento Pagina visita. Si apre la pagina collegata.
- Effettuare una selezione sulla pagina collegata.*
Si apre la pagina precedente (che contiene il pulsante di collegamento Pagina visita).



* Per poter generare il ritorno alla pagina precedente, il pulsante selezionato deve contenere *una* delle seguenti azioni:

- Pronuncia o inserisci messaggio
- Pronuncia frase
- Torna dalla visita

O, essere uno dei seguenti tipi di pulsante, che genera anche il ritorno alla pagina precedente:

- Pulsante Grammatica
- Pulsante Flessione
- Pulsante Predittore
- Pulsante della tastiera su schermo programmato con Tipo di tasto = spazio

Le azioni e i tipi di pulsanti seguenti prolungano la modalità Visita e *non* generano il ritorno alla pagina precedente.

- Prolunga visita
- Vai indietro
- Collega
- Soggetto sottinteso
- Arresta metodo di accesso
- Chat

Se un pulsante contiene più azioni (alcune che generano il ritorno alla pagina precedente e alcune che prolungano la modalità Visita) il ritorno alla pagina precedente non viene attivato se il pulsante non contiene anche Torna dalla visita.

Le seguenti azioni annullano una visita:

- Annulla visita
- Vai alla Home
- Apri Pannello di Controllo
- Apri tastiera

8.9.7.1 Abilita Pagina visita su un pulsante di collegamento

1. Selezionare il pulsante  **Modifica**.
2. Selezionare il pulsante Collegamento.

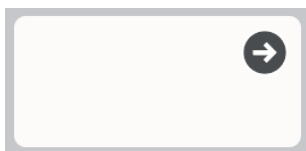


Figura 8.14 Esempio di pulsante di collegamento

3. Selezionare la categoria **Azione**.
4. Selezionare l'azione **Collegamento**.
5. Imposta **Pagina visita** su On.

8.9.7.2 Prolunga, annulla o torna dalla visita

È possibile utilizzare le azioni per interrompere o prolungare la visita di una pagina che avviene dopo aver selezionato il Pulsante di visita. Se un pulsante selezionato sulla pagina visitata contiene una delle seguenti azioni, cambierà il comportamento normale di Visita nel modo specificato:

- Prolunga visita — consente di rimanere in modalità di Visita nonostante le azioni su questo pulsante.
- Annulla visita — consente di uscire dalla modalità di Visita, ma di rimanere alla pagina corrente.
- Torna dalla visita — consente di uscire immediatamente dalla modalità di Visita (prima di eseguire azioni conseguenti su questo pulsante) e di tornare alla pagina di origine. Vengono eseguite tutte le azioni sul pulsante.

8.10 Regole lingua del pulsante

L'impostazione Regole lingua consente di specificare la lingua che verrà utilizzata per ricerca dei simboli, assegnazione dei simboli, predizione parole, flessione, auto-morphing e pronuncia vocale (se è stata impostata una pronuncia della lingua specifica per quella lingua) per il pulsante in questione.

I pulsanti ereditano un'impostazione predefinita delle regole della lingua dalle impostazioni a livello dei Gruppi di pagine o della Pagina. È possibile impostare manualmente le regole delle lingue per un pulsante seguendo i passaggi riportati di seguito:

1. Selezionare il pulsante  **Modifica**.
2. Selezionare un pulsante.
3. Selezionare la categoria **Preferenze**.
4. Selezionare **Regole lingua**.
5. Selezionare una lingua dall'elenco:
 - a. **Lingue completamente supportate** — incide su ricerca dei simboli, assegnazione dei simboli, predizione parole, flessione, auto-morphing e pronuncia vocale (se è stata impostata una pronuncia della lingua specifica per quella lingua).
La lingua **Neutra** viene utilizzata principalmente con nomi propri (ad es. Anna Rossi o Amsterdam). Quando le parole catalogate come Neutre vengono inviate alla Finestra Messaggio, verranno pronunciate in base alle regole della lingua di altre parole presenti al momento nella Finestra Messaggio. Se invece la finestra di messaggio è vuota, le parole Neutre verranno pronunciate in base all'impostazione delle regole della lingua della pagina non neutra corrente o più recente.
 - b. **Altre lingue** — le lingue presenti in questa categoria presentano diversi livelli di supporto nell'app Snap Core First.

8.11 Telecomandi

Alcuni dispositivi Tobii Dynavox, come Indi e I-110, sono dotati di un trasmettitore a infrarossi che può essere comandato tramite il software Snap, per consentire a questi dispositivi di essere utilizzati come telecomandi per attrezzature come televisioni e stereo. Il Gruppo di pagine Core First appare con delle pagine remote realizzate in precedenza nel Pannello di Controllo. Queste pagine remote contengono pulsanti già pronti per essere programmati con i comandi a distanza.



I comandi a distanza di Snap non funzionano sui dispositivi Tobii Dynavox I-12(+) o I-15(+).

8.11.1 Programma un pulsante del telecomando



Il processo di programmazione del telecomando deve essere svolto una sola volta per pulsante.

Tenere il telecomando in mano. È necessario insegnare il comando a infrarossi al dispositivo.

1. Selezionare il pulsante  **Modifica**.
2. Selezionare il pulsante sullo schermo che si desidera programmare per inviare il comando a infrarossi.
3. Individuare la barra laterale di modifica del **Pulsante**.
4. Selezionare la categoria **Azione**.
5. Selezionare **Aggiungi azione**.
6. Selezionare **Invia segnale a infrarossi**.
7. Selezionare **Registra**, quindi rivolgere il telecomando verso il pannello a infrarossi sul dispositivo Tobii Dynavox e premere il pulsante sul telecomando.
8. Se appare il messaggio "Registrazione riuscita!" selezionare **Fatto**.
Se appare il messaggio "Nessun segnale rilevato. Riprovare." torna alla fase 7.

8.11.2 Uso dei telecomandi



I telecomandi sono disponibili unicamente per dispositivi Tobii Dynavox compatibili.

È necessario configurare in anticipo il telecomando programmando ogni pulsante con il comando a infrarossi corretto. Vedere 8.11.1 *Programma un pulsante del telecomando*.



Figura 8.15 Pannello di Controllo — Pulsante comandi a distanza

1. Navigare fino alla pagina del telecomando che corrisponde all'attrezzatura (televisione, stereo, ecc.) che si desidera comandare.
2. Rivolgere la finestra a infrarossi del dispositivo Tobii Dynavox verso l'attrezzatura che si desidera comandare.
3. Selezionare il pulsante per il comando desiderato.

8.12 Modifica pagina

Le modifiche effettuate nella scheda Pagina avranno ripercussioni *solo sulla pagina corrente*. È possibile utilizzare le impostazioni sulla scheda Pagina per escludere alcune impostazioni del Gruppo di pagine. Ad esempio, se si desidera che la Barra messaggio sia visibile per la maggior parte delle pagine ma non la pagina Pannello di Controllo: 1. Abilitare la Barra messaggio nelle impostazioni Gruppo di pagine. 2. Andare alla pagina Pannello di Controllo. 3. Selezionare la scheda Pagina. 4. Selezionare Preferenze. 5. In Visibilità della barra messaggio della pagina, disabilitare l'impostazione Adatta gruppo di pagine: On. 6. Impostare la Visibilità della barra messaggio su Off.

8.12.1 Nome pagina

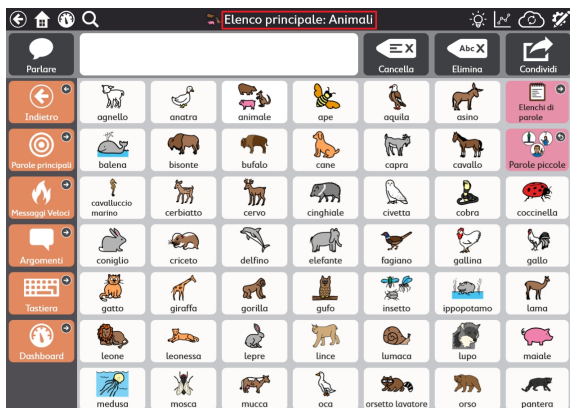


Figura 8.16 Nome pagina



1. Selezionare il pulsante **Modifica**.
2. Selezionare la scheda **Pagina**.
3. Scrivere nel campo **Etichetta** per modificare il Nome pagina.



8.12.2 Simbolo pagina

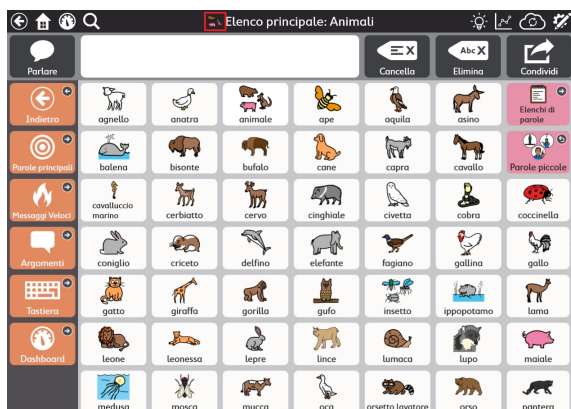


Figura 8.17 Simbolo pagina

1. Selezionare il pulsante  **Modifica**.
2. Selezionare la scheda **Pagina**.
3. Aggiungi o modifica il Simbolo pagina:
 - Per cercare un simbolo:
 - a. Selezionare il pulsante  **Ricerca simboli**.
Si aprirà la finestra di dialogo Ricerca simboli.



- b. Digitare nel campo di testo per affinare i termini della ricerca.
 - c. Scegliere il simbolo desiderato.
 - d. Selezionare **Fatto**.
- Per utilizzare la fotocamera per scattare una foto per il Simbolo pagina:
 - a. Selezionare il pulsante  **Fotocamera**.
 - b. Scegliere **Da fotocamera**.
 - c. Utilizzare la fotocamera sul dispositivo per acquisire una foto.
 - Per utilizzare un'immagine archiviata sul dispositivo locale:
 - a. Selezionare il pulsante  **Fotocamera**.
 - b. Scegliere **Dalla galleria immagini**.
 - c. Utilizzare il browser per individuare il file dell'immagine desiderata.



Se non si desidera utilizzare un simbolo pagina, selezionare **X** sul Simbolo pagina.

8.12.3 Regole lingua della pagina

L'impostazione Regole lingua della pagina stabilisce le regole della lingua predefinita per i pulsanti presenti sulla pagina. L'impostazione Regole lingua controlla la lingua che verrà utilizzata per ricerca dei simboli, assegnazione dei simboli,

predizione parole, flessione, auto-morphing e pronuncia vocale (se è stata impostata una pronuncia della lingua specifica per quella lingua).

I pulsanti ereditano un'impostazione predefinita delle regole della lingua dalle impostazioni a livello dei Gruppi di pagine o della Pagina. Quando si impostano le Regole lingua della pagina, tutti i pulsanti esistenti sulla pagina risponderanno a tale impostazione e i nuovi pulsanti creati sulla pagina assumeranno la stessa impostazione in maniera predefinita. Per modificare le regole della lingua per pulsanti specifici, vedere la sezione *8.10 Regole lingua del pulsante*.



1. Selezionare il pulsante **Modifica**.
2. Selezionare la scheda **Pagina**.
3. Selezionare **Regole lingua**.
4. Selezionare una lingua dall'elenco:

- a. **Lingue completamente supportate** — incide su ricerca dei simboli, assegnazione dei simboli, predizione parole, flessione, auto-morphing e pronuncia vocale (se è stata impostata una pronuncia della lingua specifica per quella lingua).

La lingua **Neutra** viene utilizzata principalmente con nomi propri (ad es. Albert Einstein o Coca-Cola). Quando le parole catalogate come Neutre vengono inviate alla Finestra Messaggio, verranno pronunciate in base alle regole della lingua di altre parole presenti al momento nella Finestra Messaggio. Se invece la Finestra Messaggio è vuota, le parole Neutre verranno pronunciate in base all'impostazione delle regole della lingua del Gruppo di pagine.

- b. **Altre lingue** — le lingue presenti in questa categoria presentano diversi livelli di supporto nell'app Snap Core First.

8.12.4 Dimensioni griglia della pagina



Questa impostazione predefinita viene configurata nella scheda Gruppo di pagine. Se in questo caso si desidera escludere l'impostazione predefinita Gruppo di pagine, configurare l'impostazione Adatta gruppo di pagine su **Off**. Per allineare questa impostazione con il resto del Gruppo di pagine, portare l'impostazione Adatta gruppo di pagine su **On**.

8.12.4.1 Modifica dimensioni griglia della pagina



1. Selezionare il pulsante **Modifica**.
2. Selezionare la scheda **Pagina**.
3. Selezionare la categoria **Dimensioni griglia**.
4. Portare **Impostazione Adatta gruppo di pagine** su **Off**.
5. Selezionare **Dimensioni griglia**.
6. Selezionare le dimensioni della griglia da Dimensioni griglia ottimizzate o impostare il numero di righe e colonne per creare delle dimensioni griglia personalizzate.



Salvo che si stia creando una pagina completamente personalizzata, si raccomanda di utilizzare le Dimensioni griglia ottimizzate del gruppo di pagine. Le dimensioni griglia ottimizzate mostreranno il contenuto della pagina pre-popolata come progettato dal nostro team di medici, mentre altre dimensioni griglia potrebbero non farlo.



Se si desidera visualizzare la Barra messaggio e/o la Barra degli strumenti, è necessario scegliere una dimensione griglia 3x3 o maggiore.

Per modificare le dimensioni degli spazi tra i pulsanti, vedere la sezione *9.3.6 Margine griglia gruppo di pagine*.

Tabella 8.2 Esempi di dimensioni griglia (non completi)



2x3



3x4



6x6

8.12.5 Colore sfondo pagina



Questa impostazione predefinita viene configurata nella scheda Gruppo di pagine. Se in questo caso si desidera escludere l'impostazione predefinita Gruppo di pagine, configurare l'impostazione Adatta gruppo di pagine su **Off**. Per allineare questa impostazione con il resto del Gruppo di pagine, portare l'impostazione Adatta gruppo di pagine su **On**.

1. Navigare fino alla pagina alla quale si desidera modificare il colore dello sfondo.
2. Selezionare il pulsante  **Modifica**.
3. Selezionare la scheda **Pagina**.
4. Selezionare la sezione **Stile**.
5. Configurare l'impostazione Adatta gruppo di pagine colore sfondo pagina su **Off**.
6. Selezionare **Colore**. Si aprirà l'elenco Colore sfondo pagina.
7. Selezionare un colore.

8.12.6 Mostra/Nascondi barra messaggio



Questa impostazione predefinita viene configurata nella scheda Gruppo di pagine. Se in questo caso si desidera escludere l'impostazione predefinita Gruppo di pagine, configurare l'impostazione Adatta gruppo di pagine su **Off**. Per allineare questa impostazione con il resto del Gruppo di pagine, portare l'impostazione Adatta gruppo di pagine su **On**.

8.12.6.1 Modifica visibilità della barra messaggio

1. Selezionare il pulsante  **Modifica**.
2. Selezionare la scheda **Pagina**.
3. Selezionare la categoria **Preferenze**.
4. Configurare **Impostazione Adatta gruppo di pagine** su **On** per abbinare l'impostazione indicata o su **Off** per rendere diversa la visibilità della Barra messaggio su questa pagina dal resto del Gruppo di pagine.

8.12.7 Elimina pagina



L'eliminazione è un'operazione permanente. Si consiglia di eliminare una pagina solo se si è certi di non doverla utilizzare nuovamente in futuro.

1. Navigare fino alla pagina che si desidera eliminare.
2. Selezionare il pulsante  **Modifica**.
3. Selezionare la scheda **Pagina**.
4. Selezionare  **Elimina**. Si aprirà la finestra di dialogo Elimina pagina.
5. Selezionare il pulsante **Elimina** per eliminare definitivamente la pagina, o selezionare **Annulla** per tornare alle impostazioni della Pagina senza eliminare la pagina.

8.12.8 Importa/Esporta pagine

Vedere la sezione 10.3 *Bundle di pagine*.

8.13 Gruppi di scansione

Un gruppo di scansione è un'area contenente i pulsanti che eseguono la scansione come unità singola. Quando viene selezionato il gruppo di scansione, vengono quindi scansionati i pulsanti all'interno di tale area. L'uso dei gruppi di scansione può velocizzare di molto l'utilizzo del metodo di accesso.

Per utilizzare i gruppi di scansione, il metodo di accesso Scansione deve essere attivo con l'impostazione Scansione gruppo abilitata. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione 11.12.7 *Scansione - Opzioni*.

Creazione e modifica dei gruppi di scansione

1. Selezionare il pulsante  **Modifica**.
2. Selezionare la scheda **Pagina**.

3. Selezionare lo strumento  **Scansiona gruppo**.
Il primo gruppo di scansione viene creato automaticamente.

4. Per aggiungere aree al gruppo di scansione, selezionare lo strumento  **Disegna**, quindi fare clic (o fare clic e trascinare) sulle aree della pagina per aggiungerle al gruppo di scansione. Le aree possono trovarsi ovunque sulla pagina, non è necessario che si tocchino tra di loro.



Figura 8.18 Aggiunta di un gruppo di scansione tramite lo strumento Disegna.



Non è possibile aggiungere la Barra Messaggio o la Barra degli strumenti a un gruppo di scansione. Questo perché la Barra Messaggio e la Barra degli strumenti sono sempre i propri gruppi di scansione.

5. Per rimuovere le aree dal gruppo di scansione, selezionare lo strumento  **Cancella**, quindi fare clic su ciascuna area che si desidera rimuovere dal gruppo.



Utilizzare le frecce **Scorri su** e **Scorri giù** per scorrere la pagina.




I gruppi di scansione sono definiti come aree della pagina, non come pulsanti specifici. Se si sposta un pulsante, questo potrebbe essere in un gruppo di scansione differente nella nuova posizione.

La sequenza di scansione va da sinistra a destra, dall'alto in basso. I numeri dei gruppi di scansione non sono relativi alla sequenza di scansione.

I pulsanti sulla pagina che non sono in un gruppo di scansione saranno scansionati automaticamente.

I gruppi di scansione sono legati alla dimensione griglia.

6. Per creare un nuovo gruppo di scansione, selezionare il pulsante  nell'angolo inferiore sinistro.
7. Per passare da un gruppo di scansione all'altro, selezionare il cerchietto colorato corrispondente al colore del gruppo di scansione che si desidera modificare.

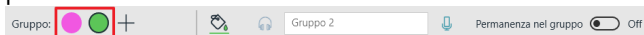

8. Per eliminare un gruppo di scansione, selezionare prima il gruppo di scansione come descritto nel passo precedente, quindi selezionare  **Elimina gruppo di scansione**.

8.13.1 Opzioni dei gruppi di scansione

Colore dei gruppi di scansione



- Selezionare lo strumento del colore  per scegliere un colore per il gruppo di scansione corrente. I colori dei gruppi di scansione sono visualizzati solo in modalità Modifica e non in modalità Uso.

Segnale audio dei gruppi di scansione

- Il testo inserito nel campo Segnale audio viene letto quando viene eseguita la scansione del gruppo (se l'impostazione Pronuncia segnale audio è abilitata).



- Se si desidera registrare una traccia di Segnale audio personalizzato, vedere la sezione 8.6.3.2 *Eseguire una registrazione*.

Permanenza nel gruppo

- Quando abilitata, la scansione si riavvia all'interno del gruppo di scansione dopo aver eseguito una scansione. Ciò consente agli utenti di eseguire facilmente più selezioni all'interno dello stesso gruppo. Quando Permanenza nel gruppo è disabilitata, la sequenza di scansione si riavvia nella parte superiore della pagina dopo aver eseguito una scansione.

8.14 Modifica la Barra messaggio



1. Selezionare il pulsante **Modifica**.

2. Selezionare il pulsante **Modifica barra messaggio**. Si aprirà il menu Modifica barra messaggio.



3. I pulsanti selezionati sono mostrati nella Barra messaggio. I pulsanti deselezionati sono nascosti nella Barra messaggio.

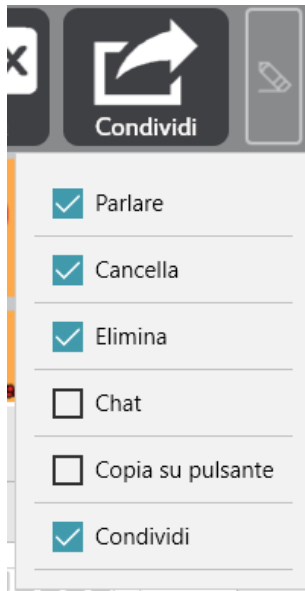


Figura 8.19 Menu Modifica barra messaggio



I pulsanti nell'elenco potrebbero apparire in grigio a indicare che non è presente spazio a sufficienza nella Barra messaggio per visualizzarli. Aumentare il numero delle colonne della griglia per ottenere più spazio a disposizione nella Barra messaggio.

8.15 Modifica la Barra degli strumenti

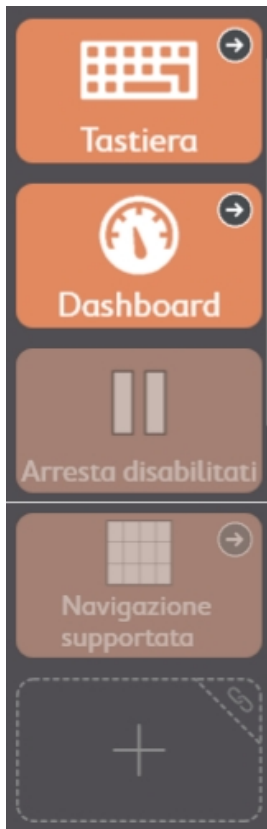


Figura 8.20 La barra degli strumenti Core First, visualizzata in Modalità modifica, contiene pulsanti, pulsanti nascosti e una cella vuota.

1. Selezionare il pulsante  **Modifica**.
2. Selezionare qualsiasi pulsante nella barra degli strumenti per modificarlo.
Potrebbe essere necessario scorrere per visualizzare tutti i contenuti della barra degli strumenti o per accedere alle celle vuote.
3. Tenere cliccato, quindi trascinare i pulsanti per riordinarli nella barra degli strumenti.



Non è possibile trascinare i pulsanti tra la pagina e la barra degli strumenti.

9 Impostazioni gruppo di pagine

9.1 Gruppo di pagine

9.1.1 Seleziona Gruppo di pagine



1. Selezionare il pulsante **Modifica**.
2. Selezionare la scheda **Gruppo di pagine**.
3. Selezionare la riga sotto **Gruppo di pagine nome utente**.
4. Selezionare un Gruppo di pagine dall'elenco.

9.1.2 Crea nuovo gruppo di pagine

Crea un Gruppo di pagine da Gruppo di pagine utente pre-installato, una copia o esistente, o da un file locale



1. Selezionare il pulsante **Modifica**.
2. Selezionare la scheda **Gruppo di pagine**.
3. Selezionare la riga sotto **Gruppo di pagine nome utente**.
4. Selezionare **Crea Gruppo di pagine**.
Si aprirà la finestra di dialogo Seleziona gruppo di pagine.

5. Selezione di un gruppo di pagine:

Gruppi di pagine pre-installati

- Il Gruppo di pagine **Core First** ha il contenuto di Core First.
- Selezionare il Gruppo di pagine **Vuoto** per iniziare da zero con un modello vuoto.

Gruppi di pagine utente

- Selezionare uno dei Gruppi di pagine esistenti da utilizzare come modello (creare una copia).

File locali

- Importare un file Gruppo di pagine (.sps) memorizzato sul dispositivo locale o su un drive collegato.

6. Selezionare **Avanti** per creare il nuovo Gruppo di pagine.
7. Inserire un nome per il nuovo Gruppo di pagine.
8. Selezionare **Crea** per creare il Gruppo di pagine. Selezionare **Annulla** per tornare alle impostazioni del Gruppo di pagine senza creare il nuovo Gruppo di pagine.

Scarica Gruppo di pagine da myTobiiDynavox



1. Selezionare il pulsante **Modifica**.
2. Selezionare la scheda **Gruppo di pagine**.
3. Selezionare il Gruppo di pagine corrente.
4. Selezionare **Scarica Gruppo di pagine**.



Potrebbe essere richiesto di accedere a myTobiiDynavox.

5. Selezionare un Gruppo di pagine dall'elenco, quindi selezionare **Scarica**.
6. Al termine del download, immettere un nome per il Gruppo di pagine, quindi selezionare **Salva**.

9.1.3 Rinomina Gruppo di pagine e modifica descrizione

1. Selezionare il pulsante  **Modifica**.
2. Selezionare la scheda **Gruppo di pagine**.
3. Nell'elenco dei Gruppi di pagine utente, selezionare il pulsante  **Modifica** accanto al nome del Gruppo di pagine che si desidera rinominare. Si aprirà la finestra di dialogo Informazioni modifica gruppo di pagine.
4. Modificare il testo nel campo **Nome** e/o nel campo **Descrizione**.
5. Selezionare **Salva** per salvare le modifiche. Selezionare **Annulla** per tornare all'elenco di Gruppi di pagine senza salvare.

9.1.4 Elimina gruppo di pagine

1. Selezionare il pulsante  **Modifica**.
2. Selezionare la scheda **Gruppo di pagine**.
3. Nell'elenco dei Gruppi di pagine utente, selezionare il pulsante  **Elimina** accanto al nome del Gruppo di pagine che si desidera eliminare.



Non è possibile eliminare il Gruppo di pagine attivo al momento.

4. Selezionare il pulsante rosso **Elimina**.
5. Selezionare **Elimina** per rimuovere definitivamente il Gruppo di pagine. Selezionare **Annulla** per tornare all'elenco di Gruppi di pagine senza eliminare.

9.1.5 Imposta Pagina iniziale

1. Selezionare il pulsante  **Modifica**.
2. Selezionare la scheda **Gruppo di pagine**.
3. Selezionare la **pagina iniziale**.
4. Selezionare una pagina dall'elenco.



Scrivere nel campo Cerca per trovare una pagina specifica, o selezionare Aperte di recente per trovare una pagina visitata di recente.

La Pagina iniziale raccomandata per dimensioni griglia da 1x1 a 2x3 è Navigazione supportata. Per dimensioni della griglia 3x3 e maggiori, Parole principali è la pagina iniziale consigliata.

9.1.6 Imposta Pagina tastiera

1. Selezionare il pulsante  **Modifica**.
2. Selezionare la scheda **Gruppo di pagine**.
3. Selezionare **Pagina tastiera**.
4. Selezionare una pagina dall'elenco.



Scrivere nel campo Cerca per trovare una pagina specifica, o selezionare Aperte di recente per trovare una pagina visitata di recente.

Usa il termine da cercare "tastiera" per limitare i risultati di ricerca alle pagine Tastiera.

9.2 Dimensioni griglia

Le dimensioni della griglia selezionate in Impostazioni gruppo di pagine sono le dimensioni predefinite per l'utente. Tutte le pagine per impostazione predefinita avranno le dimensioni della griglia selezionate in Impostazioni gruppo di pagine, salvo specificato diversamente nelle impostazioni della Pagina.

1. Selezionare il pulsante  **Modifica**.
2. Selezionare la scheda **Gruppo di pagine**.
3. Selezionare la categoria **Dimensioni griglia**.
4. Selezionare le dimensioni della griglia dall'elenco di Dimensioni griglia ottimizzate o selezionare il numero di righe e colonne per creare delle dimensioni griglia personalizzate.




Salvo che si stia creando una pagina completamente personalizzata, si raccomanda di utilizzare le Dimensioni griglia ottimizzate del gruppo di pagine. Le dimensioni griglia ottimizzate mostreranno il contenuto della pagina pre-popolata come progettato dal nostro team di medici, mentre altre dimensioni griglia potrebbero non farlo.



Se si desidera visualizzare la Barra messaggio e/o la Barra degli strumenti, è necessario scegliere una dimensione griglia 3x3 o maggiore.

Per modificare le dimensioni degli spazi tra i pulsanti, vedere la sezione [9.3.6 Margine griglia gruppo di pagine](#).

Tabella 9.1 Esempi di dimensioni griglia (non completi)

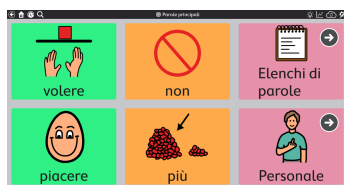

2x3



3x4



6x6

9.3 Stile gruppo di pagine

Le impostazioni scelte in Stile gruppo di pagine definiscono l'aspetto del Gruppo di pagine. Tutte le pagine nel Gruppo di pagine, tra cui le pagine nuove, utilizzeranno queste impostazioni di stile salvo che vengano escluse manualmente a livello della pagina o del pulsante.

9.3.1 Carattere etichette pulsanti gruppo di pagine

1. Selezionare il pulsante  **Modifica**.
2. Selezionare la scheda **Gruppo di pagine**.
3. Selezionare la categoria **Stile**.
4. Selezionare **Carattere** sotto Stile.
5. Selezionare un carattere.

9.3.2 Dimensioni carattere etichette pulsanti gruppo di pagine

1. Selezionare il pulsante  **Modifica**.
2. Selezionare la scheda **Gruppo di pagine**.
3. Selezionare la categoria **Stile**.
4. Selezionare **Carattere** sotto Stile.
5. Selezionare le dimensioni del carattere.

9.3.3 Grassetto etichette pulsanti gruppo di pagine

1. Selezionare il pulsante  **Modifica**.
2. Selezionare la scheda **Gruppo di pagine**.
3. Selezionare la categoria **Stile**.
4. Selezionare **Grassetto** sotto Stile.
5. Portare la voce grassetto su On o Off.

9.3.4 Layout pulsante gruppo di pagine


1. Selezionare il pulsante  **Modifica**.
2. Selezionare la scheda **Gruppo di pagine**.
3. Selezionare la categoria **Stile**.
4. Selezionare **Layout pulsante** sotto Stile.
5. Selezionare un layout dall'elenco.




Etichetta in alto, immagine in basso




Etichetta in basso, immagine in alto

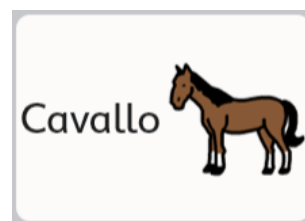


Etichetta a sinistra, immagine a destra

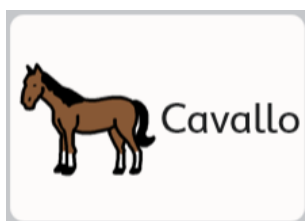

Etichetta a destra, immagine a sinistra

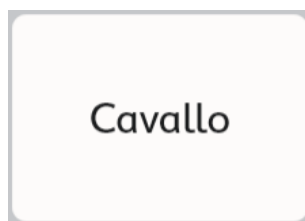

Solo etichetta

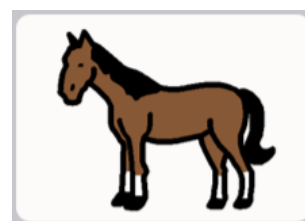

Solo immagine

9.3.5 Visualizza collegamento gruppo di pagine

Impostare l'aspetto dei pulsanti che consentono di passare ad altre pagine.



Stile visualizzazione collegamento —
Nessuno



Stile visualizzazione collegamento —
Icone di navigazione



Stile visualizzazione collegamento —
Cartelle

- **Nessuno** — abbinare lo stile del pulsante predefinito del Gruppo di pagine.
- **Icone di navigazione** — appare un'icona di piccole dimensioni nell'angolo dei pulsanti che indica la loro funzione (collegamento a un'altra pagina, pagina visita o torna indietro)

- **Cartelle per collegamenti** — i pulsanti di collegamento hanno l'aspetto di cartelle. (Lo Stile è valido solo per i pulsanti di collegamento, non per i pulsanti Torna indietro o Visita).

9.3.6 Margine griglia gruppo di pagine

Serve a impostare le dimensioni delle distanze tra i pulsanti.



1. Selezionare il pulsante **Modifica**.
2. Selezionare la scheda **Gruppo di pagine**.
3. Selezionare la categoria **Stile**.
4. Selezionare **Fattore margine griglia** sotto Margine griglia.
5. Scegliere le dimensioni del Fattore margine griglia.

9.3.7 Colori sfondo predefiniti gruppo di pagine



1. Selezionare il pulsante **Modifica**.
2. Selezionare la scheda **Gruppo di pagine**.
3. Selezionare la categoria **Stile**.
4. Selezionare una delle seguenti righe per modificare il colore sfondo specificato:
 - **Sfondo pagina** — Colore predefinito per lo sfondo pagina.
 - **Sfondo barra degli strumenti** — Colore predefinito per lo sfondo Barra degli strumenti.
 - **Sfondo Barra messaggio** — Colore predefinito per lo sfondo Barra messaggio (non la Finestra Messaggio).

9.3.8 Carattere Finestra Messaggio Gruppo di pagine



1. Selezionare il pulsante **Modifica**.
2. Selezionare la scheda **Gruppo di pagine**.
3. Selezionare la categoria **Stile**.
4. Selezionare **Carattere** sotto Finestra Messaggio.
5. Scegliere un carattere.

9.3.9 Dimensione carattere Finestra Messaggio Gruppo di pagine



1. Selezionare il pulsante **Modifica**.
2. Selezionare la scheda **Gruppo di pagine**.
3. Selezionare la categoria **Stile**.
4. Selezionare **Dimensioni carattere** sotto Finestra Messaggio.
5. Scegliere le dimensioni del carattere.

9.3.10 Colore del testo Finestra Messaggio Gruppo di pagine



1. Selezionare il pulsante **Modifica**.
2. Selezionare la scheda **Gruppo di pagine**.
3. Selezionare la categoria **Stile**.
4. Selezionare **Colore testo** sotto Finestra Messaggio.
5. Scegliere un colore testo.

9.4 Preferenze Gruppo di pagine

1. Selezionare il pulsante  **Modifica**.
2. Selezionare la scheda **Gruppo di pagine**.
3. Selezionare **Preferenze**.
4. Selezionare una delle seguenti opzioni per modificare l'impostazione specificata:

Interfaccia

- **Barra messaggio On** — Quando è abilitata, la Barra messaggio viene visualizzata su ogni pagina come impostazione predefinita.
- **Posizione barra degli strumenti** — Consente di scegliere se visualizzare la Barra degli strumenti sul lato destro o sinistro di ogni pagina o se disattivare la Barra degli strumenti.

Righe della barra degli strumenti

- **Impostazione Gruppo pagine corrispondente:** — Quando abilitato, il numero di righe disponibili sulla barra degli strumenti corrisponderà al numero di righe presenti nei gruppi di pagine selezionato. Per modificare il numero di righe nella barra degli strumenti separatamente dalla dimensione griglia del gruppo di pagine, disabilitare questa impostazione e impostare il numero di righe desiderato.

Gruppi di scansione del gruppo di pagine

- **1. xxx, 2. yyy, 3. zzz** — Consente di impostare l'ordine della modalità di scansione di Gruppi di scansione del gruppo di pagine, Pagina, Barra degli strumenti e Barra Messaggio. Impostare l'ordine di scansione, i segnali audio e la Permanenza nel gruppo per i gruppi di scansione del gruppo di pagine, la Pagina, la Barra degli strumenti e la Barra Messaggio.

9.5 Pulsanti adattivi



Questa sezione si applica esclusivamente ai dispositivi Tobii Dynavox I-13 e I-16.

I pulsanti adattivi presenti sul lato anteriore dei dispositivi Tobii Dynavox I-13 e I-16 sono selezionabili tramite Touch o Gaze Interaction.

Due di questi pulsanti, i pulsanti  e , possono essere programmati con le azioni di Snap Core First che verranno eseguite se selezionate tramite Gaze Interaction durante l'uso di Snap Core First.

Impostazione delle azioni Gaze Interaction sui pulsanti adattivi

1. Selezionare il pulsante  **Modifica**.
2. Selezionare la scheda **Gruppo di pagine**.
3. Selezionare **Pulsanti adattivi**.
4. Selezionare  o  dall'elenco.
5. Selezionare **Aggiungi azione**.
6. Selezionare un'azione.



Per aggiungere azioni extra, ripetere i punti 5 e 6.

Impostazione delle azioni per il tocco sui pulsanti adattivi



Il comportamento delle azioni per il tocco sui pulsanti adattivi viene impostato nell'app Tobii Dynavox Hardware Settings. È possibile avviare direttamente questa app utilizzando la scorciatoia presente sul desktop o tramite Snap Core First come descritto di seguito.



1. Selezionare il pulsante **Modifica**.
2. Selezionare la scheda **Gruppo di pagine**.
3. Selezionare **Pulsanti adattivi**.
4. Selezionare **Imposta azioni per il tocco**. Verrà avviata l'app Tobii Dynavox Hardware Settings.
5. Utilizzare i menu a discesa dell'app Hardware Settings per scegliere le azioni per i pulsanti adattivi quando vengono selezionati tramite tocco.

9.6 Informazioni Gruppo di pagine

Questa selezione mostra il numero di versione del Gruppo di pagine e le impostazioni Sviluppatore di contenuto.

9.6.1 Impostazioni Sviluppatore di contenuto gruppo di pagine

Impostazioni speciali per creatori di Gruppi di pagine avanzati.

9.6.1.1 Imposta dimensioni griglia ottimizzate

Imposta quali dimensioni griglia devono apparire nell'elenco delle Dimensioni griglia ottimizzate per questo Gruppo di pagine.



1. Selezionare il pulsante **Modifica**.
2. Selezionare la scheda **Gruppo di pagine**.
3. Selezionare **Informazioni**.
4. Selezionare **Impostazioni sviluppatore di contenuto**.
5. Selezionare **Dimensioni griglia**.
6. Per aggiungere una dimensione della griglia all'elenco, scorrere verso destra e selezionare **Aggiungi nuova dimensione**. Si aprirà la finestra di dialogo Aggiungi dimensione griglia ottimizzata.
7. Scegliere il numero di **Righe** e **Colonne** per le nuove Dimensioni griglia ottimizzate (fino a 15x15), quindi selezionare **Salva**.
8. Per rimuovere le Dimensioni griglia ottimizzate, selezionare l'icona **Elimina** sulle dimensioni della griglia nell'elenco. Apparirà l'avvertenza Elimina dimensioni griglia. Se si è certi di voler eliminare le dimensioni della griglia, selezionare **Elimina**. Altrimenti, selezionare **Annulla** per chiudere l'avvertenza senza eliminare.

9.6.1.2 Regole lingua del Gruppo di pagine

L'impostazione Regole lingua del gruppo di pagine stabilisce le regole della lingua predefinita per i pulsanti e le pagine nel Gruppo di pagine. L'impostazione Regole lingua controlla la lingua che verrà utilizzata per ricerca dei simboli, assegnazione dei simboli, predizione parole, flessione, auto-morphing e pronuncia vocale (se è stata impostata una pronuncia della lingua specifica per quella lingua).

I pulsanti ereditano un'impostazione predefinita delle regole della lingua dalle impostazioni a livello dei Gruppi di pagine o della Pagina. Quando si impostano le Regole lingua del Gruppo di pagine, tutti i pulsanti esistenti nel Gruppo di pagine risponderanno a tale impostazione e i nuovi pulsanti creati nel Gruppo di pagine assumeranno la stessa impostazione in maniera predefinita. Per modificare le regole della lingua per pagine specifiche nel Gruppo di pagine, vedere la sezione **8.12.3 Regole lingua della pagina**. Per modificare le regole della lingua per pulsanti specifici, vedere la sezione **8.10 Regole lingua del pulsante**.



1. Selezionare il pulsante **Modifica**.
2. Selezionare la scheda **Gruppo di pagine**.
3. Selezionare **Informazioni**.
4. Selezionare **Impostazioni sviluppatore di contenuto**.
5. Selezionare **Regole lingua**.
6. Selezionare una lingua dall'elenco:
 - a. **Lingue completamente supportate** — incide su ricerca dei simboli, assegnazione dei simboli, predizione parole, flessione, auto-morphing e pronuncia vocale (se è stata impostata una pronuncia della lingua specifica per quella lingua).

- b. **Altre lingue** — le lingue presenti in questa categoria presentano diversi livelli di supporto nell'app Snap Core First.

10 Condivisione e salvataggio

Tobii Dynavox Snap Core First offre diverse valide modalità per condividere e salvare utenti, Gruppi di pagine e pagine. È un ottimo alleato sia per mantenere la coerenza del Gruppo di pagine tra tutti i dispositivi sia per inviare alcune nuove pagine a un amico!

- **Esporta/Importa localmente** (Utente, Gruppo di pagine, Bundle di pagine) — Da utilizzare quando si memorizza il file sul computer locale, nella condivisione su un drive USB o con persone che non hanno un account myTobiiDynavox.
- **Esporta/Importa attraverso myTobiiDynavox*** (Gruppo di pagine, Bundle di pagine) — Per condividere Gruppi di pagine e Bundle di pagine con altri utenti myTobiiDynavox. Consente di conservare e accedere ai file privatamente sul proprio account myTobiiDynavox.
- **Sincronizza*** (Gruppo di pagine) — Consente di condividere modifiche in corso su un Gruppo di pagine sui propri dispositivi e con utenti myTobiiDynavox specificati. Un Gruppo di pagine condiviso attraverso Sincronizza mantiene una versione aggiornata del Gruppo di pagine nel cloud, in modo tale che le modifiche apportate al Gruppo di pagine sui dispositivi/account approvati vengano condivise su tutti i dispositivi/account sincronizzati per il Gruppo di pagine in questione.

*Questi metodi di condivisione richiedono una connessione Internet attiva.

Tabella 10.1 Tipi di file per condivisione e salvataggio — Contenuto

Tipo di file	Pagine	Preferenze pagina	Preferenze Gruppo di pagine	Preferenze utente	Preferenze sistema
Utente	Sì	Sì	Sì	Sì	No
Gruppo di pagine	Sì	Sì	Sì	No	No
Bundle di pagine	Sì (pagine specificate)	Sì	No	No	No

10.1 Utenti

I file di backup utente contengono i Gruppi di pagine e le impostazioni associate con l'utente in questione. I file di backup utente non contengono voci. Tuttavia, le impostazioni voce vengono conservate e la voce selezionata verrà scaricata automaticamente se non è disponibile sul dispositivo (è richiesta la connessione Internet).

10.1.1 Backup di un Utente

Vedere la sezione 11.3 *Backup di un Utente*.

10.1.2 Ripristina un Utente

Vedere la sezione 11.4 *Ripristina un Utente*.

10.2 Gruppi di pagine

Un file Gruppo di pagine contiene tutte le pagine associate al Gruppo di pagine in questione. Non contiene informazioni dell'utente o impostazioni a livello dell'utente.

10.2.1 Importa un gruppo di pagine

Da myTobiiDynavox

1. Selezionare il pulsante  **Modifica**.

2. Selezionare la scheda **Gruppo di pagine**.
3. Selezionare il Gruppo di pagine corrente.
4. Selezionare **Scarica Gruppo di pagine**.



Potrebbe essere richiesto di accedere a myTobiiDynavox.

5. Selezionare un Gruppo di pagine dall'elenco, quindi selezionare **Scarica**.
6. Al termine del download, immettere un nome per il Gruppo di pagine, quindi selezionare **Salva**.

Da un file locale



1. Selezionare il pulsante **Modifica**.
2. Selezionare la scheda **Gruppo di pagine**.
3. Selezionare il Gruppo di pagine corrente.
4. Selezionare **Crea Gruppo di pagine**.
5. Selezionare la scheda **File locali**.
6. Selezionare **Cerca**.
7. Navigare fino al file .sps desiderato, selezionarlo, quindi selezionare **Apri**.
8. Selezionare **Avanti**.
9. Immettere un nome unico per il Gruppo di pagine, quindi selezionare **Crea**.

10.2.2 Salva una copia di un Gruppo di pagine

10.2.2.1 Salva Gruppo di pagine su myTobiiDynavox

I file Gruppo di pagine salvati su myTobiiDynavox sono reperibili su myTobiiDynavox.com in Personali > Snap > Gruppi di pagine



1. Selezionare il pulsante **Modifica**.
2. Selezionare la scheda **Gruppo di pagine**.
3. Selezionare il Gruppo di pagine corrente.
4. Selezionare l'icona  **Salva** accanto al Gruppo di pagine che si desidera salvare.
5. Selezionare **Salva una copia in myTobiiDynavox**.



Potrebbe essere richiesto di accedere a myTobiiDynavox.

6. Immettere un nome unico per il Gruppo di pagine e (facoltativamente) una descrizione, quindi selezionare **Salva**.
7. Una barra di stato mostra il processo di salvataggio. Al termine, selezionare **Fatto**.

10.2.2.2 Salva Gruppo di pagine localmente



1. Selezionare il pulsante **Modifica**.
2. Selezionare la scheda **Gruppo di pagine**.
3. Selezionare il Gruppo di pagine corrente.
4. Selezionare l'icona  **Salva** accanto al Gruppo di pagine che si desidera salvare.
5. Selezionare **Salva una copia in un file locale**.
6. Immettere un nome unico per il Gruppo di pagine e (facoltativamente) una descrizione, quindi selezionare **Avanti**.
7. Selezionare **Cerca**. Navigare fino alla cartella dove si desidera salvare il file Gruppo di pagine, quindi selezionare **Salva**.
8. Selezionare **Salva**.
9. Una barra di stato mostra il processo di salvataggio. Al termine, selezionare **Fatto**.

10.2.3 Condividi una copia di un Gruppo di pagine (attraverso myTobiiDynavox)

1. Selezionare il pulsante  **Modifica**.
2. Selezionare la scheda **Gruppo di pagine**.
3. Selezionare l'icona  **Condividi Gruppo di pagine** accanto al Gruppo di pagine che si desidera condividere.
4. Selezionare **Condividi una copia**.
5. Immettere un nome unico per il Gruppo di pagine e (facoltativamente) una descrizione, quindi selezionare **Avanti**.
6. Immettere il nome utente o account e-mail myTobiiDynavox della persona alla quale si sta inviando il Gruppo di pagine, quindi selezionare **+** per aggiungerla all'elenco dei destinatari. Ripetere questa procedura per aggiungere altri destinatari. Dopo aver aggiunto tutti i destinatari, selezionare **Condividi**.
7. Una barra di stato mostra il processo di condivisione. Al termine, selezionare **Fatto**.

 Se si desidera salvare una copia del Gruppo di pagine localmente (per la condivisione attraverso drive USB, e-mail ecc.), vedere la sezione 10.2.2.2 *Salva Gruppo di pagine localmente*.

10.2.4 Sincronizza Gruppo di pagine

La sincronizzazione è un modo semplice di mantenere la stessa versione di un Gruppo di pagine su più dispositivi. La sincronizzazione consente di memorizzare una versione aggiornata del Gruppo di pagine nel cloud. Quando si preme il pulsante Sincronizza, vengono inviate le modifiche apportate al Gruppo di pagine sul dispositivo locale e si ricevono le eventuali modifiche effettuate su altri dispositivi (sincronizzati).* Quando tutti i dispositivi sono sincronizzati, tutti hanno la stessa versione del Gruppo di pagine.

Il pulsante Sincronizza nella barra superiore consente di conoscere quando è disponibile una versione aggiornata del Gruppo di pagine o quando è necessario salvare le modifiche locali sul cloud.

*Sincronizza non supporta modifiche di merging da più dispositivi alla stessa pagina nella stessa sincronizzazione. Se vengono effettuate modifiche simultanee alla stessa pagina da più dispositivi, l'ultimo dispositivo da sincronizzare sovrascrive la relativa versione della pagina. Le persone coinvolte nella modifica di un Gruppo di pagine sincronizzate deve comunicare quali pagine stanno modificando e sincronizzare frequentemente per evitare variazioni di sincronizzazione alla stessa pagina nello stesso momento.

 Quando si effettua la sincronizzazione tra più dispositivi o utenti, l'impostazione del tipo di navigazione deve corrispondere per tutti i dispositivi/utenti coinvolti. Vedere la sezione 11.12 *Metodo di accesso*.

10.2.4.1 Sincronizza Gruppo di pagine in myTobiiDynavox

Quando si sincronizza un Gruppo di pagine su myTobiiDynavox, si avrà una copia del Gruppo di pagine memorizzata sul server myTobiiDynavox. È possibile utilizzare questa funzione come sistema di backup Gruppo di pagine semplice e veloce e, se ci sono altri dispositivi che utilizzano Snap Core First, è possibile sincronizzare il Gruppo di pagine anche su questi dispositivi.

Configura Gruppo di pagine per la sincronizzazione

1. Selezionare il pulsante  **Sincronizza** nella Barra superiore. Potrebbe essere richiesto di inserire nome utente e password myTobiiDynavox.
2. Selezionare **Sincronizza**.
3. Processo terminato! Ora il Gruppo di pagine è sincronizzato sull'account myTobiiDynavox.

 Ogni volta che si modifica il Gruppo di pagine, è necessario selezionare il pulsante Sincronizza nella Barra superiore per inviare tali modifiche al cloud.

Sincronizza il Gruppo di pagine su dispositivi aggiuntivi

Se un Gruppo di pagine è già configurato per la sincronizzazione su uno dei dispositivi, è possibile sincronizzare altri dispositivi seguendo i passaggi seguenti su ogni dispositivo.

1. Selezionare il pulsante  **Sincronizza** nella Barra superiore. Potrebbe essere richiesto di inserire nome utente e password myTobiiDynavox.
2. Selezionare l'icona  **Scarica Gruppo di pagine**.
3. Selezionare il Gruppo di pagine che si desidera scaricare e sincronizzare, quindi selezionare **Scarica**.
4. Al termine del download, selezionare **Fatto**.

Il Gruppo di pagine sincronizzato scaricato viene impostato automaticamente come Gruppo di pagine attivo.



Ogni volta che si modifica il Gruppo di pagine, è necessario selezionare il pulsante Sincronizza nella Barra superiore per inviare tali modifiche al cloud e rendere disponibile il Gruppo di pagine aggiornato per altri dispositivi per la sincronizzazione. È buona prassi effettuare la sincronizzazione prima di apportare modifiche al Gruppo di pagine, quindi effettuare nuovamente la sincronizzazione subito al termine della modifica.

10.2.4.2 Invita una persona a sincronizzarsi con il proprio Gruppo di pagine

Quando altri utenti myTobiiDynavox si sincronizzano con il proprio Gruppo di pagine, possono apportare modifiche al Gruppo di pagine sui loro dispositivi e sincronizzare tali variazioni sul cloud. La volta successiva che verrà effettuata la sincronizzazione sul dispositivo, si riceveranno le loro modifiche. Analogamente, quando si apportano modifiche al Gruppo di pagine e si effettua la sincronizzazione, tali modifiche saranno disponibili per altri utenti a cui è stato consentito sincronizzarsi con il proprio Gruppo di pagine.

La sincronizzazione non può effettuare il merging delle modifiche da più utenti che hanno modificato la stessa pagina nello stesso momento. In questo caso, l'ultimo utente che effettua la sincronizzazione sovrascriverà la pagina con la sua versione. È necessario effettuare la sincronizzazione prima e dopo aver apportato modifiche al Gruppo di pagine e comunicarlo ad altri utenti che si sincronizzano con il Gruppo di pagine in questione per evitare di modificare la stessa pagina nello stesso momento.

È necessario effettuare la sincronizzazione unicamente con persone di fiducia che apportano modifiche adeguate al Gruppo di pagine.



Ogni volta che si modifica il Gruppo di pagine, è necessario selezionare il pulsante Sincronizza nella Barra superiore per inviare tali modifiche al cloud e rendere disponibile il Gruppo di pagine aggiornato per altri dispositivi o utenti per la sincronizzazione.



È buona prassi effettuare la sincronizzazione prima di apportare modifiche al Gruppo di pagine, quindi effettuare nuovamente la sincronizzazione subito al termine della modifica.

1. Selezionare il pulsante  **Sincronizza** nella Barra superiore. Potrebbe essere richiesto di inserire nome utente e password myTobiiDynavox.
2. Selezionare l'icona  **Condividi Gruppo di pagine**.
3. Immettere il nome utente o indirizzo e-mail myTobiiDynavox della persona con la quale si sta condividendo il Gruppo di pagine, quindi selezionare **+** per aggiungerla all'elenco dei destinatari. Ripetere questa procedura per aggiungere altri destinatari. Dopo aver aggiunto tutti i destinatari, selezionare **Condividi**.
4. Al termine del processo di condivisione, selezionare **Fatto**. I destinatari riceveranno avvisi di condivisione tramite e-mail e nell'app Snap Core First.



Gli avvisi di sincronizzazione potrebbero apparire entro un'ora dopo aver inviato l'invito. È possibile controllare la presenza di avvisi in qualsiasi momento selezionando l'icona di sincronizzazione.

10.2.4.2.1 Revoca dei permessi di sincronizzazione

È possibile eliminare gli utenti dai Gruppi di pagine sincronizzati (in proprio possesso) in qualsiasi momento.

1. Selezionare il pulsante  **Sincronizza** nella Barra superiore.

2. Selezionare l'icona  **Condividi Gruppo di pagine**.

3. Gli utenti autorizzati alla sincronizzazione per il Gruppo di pagine corrente sono elencati nella casella blu. Per rimuovere un utente, selezionare **X** accanto al suo nome/indirizzo e-mail, quindi selezionare **Aggiorna**.

4. Selezionare **Fatto**.

10.2.4.3 Effettua la sincronizzazione con Gruppi di pagine di proprietà di altre persone

Quando una persona condivide un Gruppo di pagine per sincronizzarsi con te, l'icona di sincronizzazione presente nella

Barra superiore mostrerà un'icona di avvertenza . Seguire i passaggi riportati di seguito per accettare o rifiutare l'invito.

Gli avvisi di sincronizzazione potrebbero apparire entro un'ora dopo aver inviato l'invito.

Accetta l'invito alla sincronizzazione

1. Selezionare il pulsante  **Sincronizza** nella Barra superiore.

2. Selezionare l'icona  **Scarica Gruppo di pagine**.

3. Selezionare **Cerca Gruppi di pagine disponibili sull'account myTobiiDynavox account**.

4. Selezionare il Gruppo di pagine che si desidera scaricare e sincronizzare, quindi selezionare **Scarica**.

5. Al termine del download, selezionare **Fatto**.

Rifiuta l'invito alla sincronizzazione

1. Selezionare il pulsante  **Sincronizza** nella Barra superiore.

2. Selezionare l'icona  **Scarica Gruppo di pagine**.

3. Selezionare **Cerca Gruppi di pagine disponibili sull'account myTobiiDynavox account**.

4. Selezionare il Gruppo di pagine che si desidera rifiutare, quindi selezionare l'icona  **Elimina**.

5. Selezionare **Rifiuta**.

10.2.4.4 Ripristina il Gruppo di pagine sincronizzato a una versione salvata in precedenza

È possibile tornare a una versione precedente di un Gruppo di pagine sincronizzato. Questa funzione è utile se sono state apportate modifiche al Gruppo di pagine che si desidera eliminare.

1. Selezionare il pulsante  **Sincronizza** nella Barra superiore.

2. Selezionare **Versioni salvate**.

3. Cercare la data di sincronizzazione nell'elenco che si desidera ripristinare, quindi selezionare **Ripristina**.

10.2.4.5 Sovrascrivi un Gruppo di pagine sincronizzato

Utilizzare la sovrascrizione per accertarsi che la versione corrente del Gruppo di pagine sia la stessa versione memorizzata nel cloud (indipendentemente dalle modifiche che possono essere state sincronizzate da altri utenti).

1. Selezionare il pulsante  **Sincronizza** nella Barra superiore.

2. Selezionare **Avanzate**.

3. Selezionare **Sovrascrivi**.

10.2.4.6 Sincronizzazione Pull-only

Quando si effettua la sincronizzazione in Modalità Pull-only, si riceveranno le modifiche del Gruppo di pagine (apportate su altri dispositivi) ma non verranno inviate le modifiche al Gruppo di pagine apportate sul dispositivo corrente. Per utilizzare la Modalità Pull-only, l'accesso alla Modalità modifica deve essere limitato con una password. Per impostare una password e la Modalità Pull-only, vedere la sezione *12.1.1 Password*.

10.3 Bundle di pagine

È possibile condividere un sottoinsieme del Gruppo di pagine (una o più pagine a scelta) come Bundle di pagine. I Bundle di pagine contengono solo le pagine specificate. Se le pagine contengono pulsanti che si collegano a pagine che non esistono sul dispositivo destinatario, i collegamenti non funzioneranno.

10.3.1 Esporta bundle di pagine

10.3.1.1 Esporta bundle di pagine in myTobiiDynavox

1. Selezionare il pulsante  **Modifica**.
2. Selezionare la scheda **Pagina**.
3. Selezionare **Importa/Esporta pagine**.
4. Selezionare **Esporta bundle di pagine**.
5. Selezionare **A myTobiiDynavox**.
6. Selezionare le pagine che si vogliono includere nel Bundle di pagine. Le pagine selezionate mostrano un segno di spunta nell'elenco e appaiono nella casella blu.



La pagina corrente viene inclusa automaticamente nel Bundle di pagine. Per rimuovere questa o altre pagine dal Bundle di pagine, selezionare X accanto al nome della pagina nella casella blu.

7. Dopo aver aggiunto le pagine desiderate al Bundle di pagine, selezionare **Avanti**. Si aprirà la finestra di dialogo Assegna un nome al bundle di pagine.
8. Immettere un nome per il Bundle di pagine nel campo Nome e (facoltativamente) descrivere le pagine nel campo Descrizione.
9. Selezionare **Esporta** per salvare il Bundle di pagine in myTobiiDynavox.
10. Al termine dell'esportazione, selezionare **Fatto**.

10.3.1.2 Esporta bundle di pagine in un file locale

1. Selezionare il pulsante  **Modifica**.
2. Selezionare la scheda **Pagina**.
3. Selezionare **Importa/Esporta pagine**.
4. Selezionare **Esporta bundle di pagine**.
5. Selezionare **A un file locale**.
6. Selezionare le pagine che si vogliono includere nel Bundle di pagine. Le pagine selezionate mostrano un segno di spunta nell'elenco e appaiono nella casella blu.



La pagina corrente viene inclusa automaticamente nel Bundle di pagine. Per rimuovere questa o altre pagine dal Bundle di pagine, selezionare X accanto al nome della pagina nella casella blu.

7. Dopo aver aggiunto le pagine desiderate al Bundle di pagine, selezionare **Avanti**. Si aprirà la finestra di dialogo Assegna un nome al bundle di pagine.
8. Immettere un nome per il Bundle di pagine nel campo Nome e (facoltativamente) descrivere le pagine nel campo Descrizione.
9. (Solo Windows) Selezionare **Avanti**.
10. (Solo Windows) Selezionare **Cerca**. Navigare fino alla cartella dove si desidera salvare il file Gruppo di pagine, quindi selezionare **Salva**.

11. Selezionare **Esporta**.
12. Al termine dell'esportazione, selezionare **Fatto**.

10.3.1.3 Esporta bundle di pagine per la condivisione (attraverso myTobiiDynavox)

1. Selezionare il pulsante  **Modifica**.
2. Selezionare la scheda **Pagina**.
3. Selezionare **Importa/Esporta pagine**.
4. Selezionare **Esporta bundle di pagine**.
5. Selezionare **Per la condivisione**.
6. Selezionare le pagine che si vogliono includere nel Bundle di pagine. Le pagine selezionate mostrano un segno di spunta nell'elenco e appaiono nella casella blu.



La pagina corrente viene inclusa automaticamente nel Bundle di pagine. Per rimuovere questa o altre pagine dal Bundle di pagine, selezionare X accanto al nome della pagina nella casella blu.

7. Dopo aver aggiunto le pagine desiderate al Bundle di pagine, selezionare **Avanti**. Si aprirà la finestra di dialogo Assegna un nome al bundle di pagine.
8. Immettere un nome per il Bundle di pagine nel campo Nome e (facoltativamente) descrivere le pagine nel campo Descrizione.
9. Selezionare **Avanti**. Si aprirà la finestra di dialogo Condividi bundle di pagine.
10. Immettere il nome utente o account e-mail myTobiiDynavox della persona alla quale si sta inviando il Gruppo di pagine, quindi selezionare **+** per aggiungerla all'elenco dei destinatari. Ripetere questa procedura per aggiungere altri destinatari. Dopo aver aggiunto tutti i destinatari, selezionare **Condividi**.
11. Al termine dell'esportazione, selezionare **Fatto**.



Se si desidera salvare un Bundle di pagine localmente (da condividere tramite e-mail, drive USB, ecc.), vedere la sezione 10.3.1.2 *Esporta bundle di pagine in un file locale*.

10.3.2 Importa bundle di pagine

10.3.2.1 Importa bundle di pagine da myTobiiDynavox

Utilizzare questa opzione per importare un Bundle di pagine salvato sul proprio account myTobiiDynavox o un Bundle di pagine che un altro utente myTobiiDynavox ha condiviso con voi.

1. Selezionare il pulsante  **Modifica**.
2. Selezionare la scheda **Pagina**.
3. Selezionare **Importa/Esporta pagine**.
4. Selezionare **Importa bundle di pagine**.
5. Selezionare **da myTobiiDynavox**. Si aprirà la finestra di dialogo Seleziona bundle di pagine da myTobiiDynavox.
6. Selezionare un Bundle di pagine dall'elenco.
7. Per scaricare il Bundle di pagine selezionato, selezionare **Avanti**.
8. Rivedere l'elenco di pagine contenute nel Bundle di pagine. Per passare all'importazione del Bundle di pagine, selezionare **Importa**. Per interrompere l'importazione del Bundle di pagine, selezionare **Annulla**.



Si verificano dei conflitti tra le pagine quando il bundle di pagine contiene una o più pagine già esistenti

sul dispositivo, ma che non sono identiche. Selezionare ogni icona di conflitto pagine , quindi scegliere se mantenere la pagina esistente o sovrascriverla con la pagina importata dal bundle di pagine. È necessario risolvere tutti i conflitti delle pagine in questo modo prima di procedere all'importazione del Bundle di pagine.

10.3.2.2 Importa bundle di pagine da un file locale



1. Selezionare il pulsante **Modifica**.
2. Selezionare la scheda **Pagina**.
3. Selezionare **Importa/Esporta pagine**.
4. Selezionare **Importa bundle di pagine**.
5. Selezionare **da un file locale**.
6. Selezionare **Cerca**. Navigare fino al file Bundle di pagine (.spb) che si desidera importare e selezionarlo, quindi selezionare **Apri**.
7. Selezionare **Avanti**. Si aprirà la finestra di dialogo Rivedi bundle di pagine.
8. Rivedere l'elenco di pagine contenute nel Bundle di pagine. Per passare all'importazione del Bundle di pagine, selezionare **Importa**. Per interrompere l'importazione del Bundle di pagine, selezionare **Annulla**.



Si verificano dei conflitti tra le pagine quando il bundle di pagine contiene una o più pagine già esistenti

sul dispositivo, ma che non sono identiche. Selezionare ogni icona di conflitto pagine , quindi scegliere se mantenere la pagina esistente o sovrascriverla con la pagina importata dal bundle di pagine. È necessario risolvere tutti i conflitti delle pagine in questo modo prima di procedere all'importazione del Bundle di pagine.

10.3.2.3 Importa Bundle di pagine e collega

È possibile importare un Bundle di pagine e creare un collegamento in una sola mossa utilizzando Importa e collega!

Vedere la sezione 8.9.6 *Importa e collega alla pagina*.

11 Impostazioni utente

Le Impostazioni utente aiutano a personalizzare l'esperienza dell'utente nel software Snap. Ogni utente può avere le proprie impostazioni personalizzate che vengono applicate quando viene caricato l'utente nel software.

11.1 Cambia utente

1. Selezionare il pulsante  **Modifica**.
2. Selezionare la scheda **Utente**.
3. Selezionare l'utente corrente.
4. Selezionare un utente dall'elenco Scegli utente.



L'utente con il segno di spunta è l'utente attivo al momento.

11.2 Creare un nuovo utente

1. Selezionare il pulsante  **Modifica**.
2. Selezionare la scheda **Utente**.
3. Selezionare **Nuovo utente**.
4. Seguire i passaggi presenti nella Procedura guidata di impostazione utente per creare un nuovo utente. Selezionare **X** per annullare la creazione di un nuovo utente.

11.3 Backup di un Utente

Esegui backup su myTobiiDynavox

1. Selezionare il pulsante  **Modifica**.
2. Selezionare la scheda **Utente**.
3. Selezionare la freccia a destra dell'utente corrente.
4. Selezionare il pulsante  **Backup** accanto al nome dell'utente del quale si desidera effettuare il backup.
5. Selezionare **Backup su myTobiiDynavox**.



Se al momento non è stato effettuato l'accesso all'account myTobiiDynavox verrà richiesto di farlo.

6. Immettere un nome per il file di backup, quindi selezionare **Avanti**.




Potrebbe essere utile includere la data del backup nel nome del file.

7. Selezionare **Fatto**.



I file di backup dell'utente locali possono essere spostati su myTobiiDynavox manualmente. Utilizzare il browser di navigazione su Internet per visitare il sito myTobiiDynavox.com ed effettuare l'accesso, quindi andare su *Snap > Backup* e selezionare **Carica Backup**.

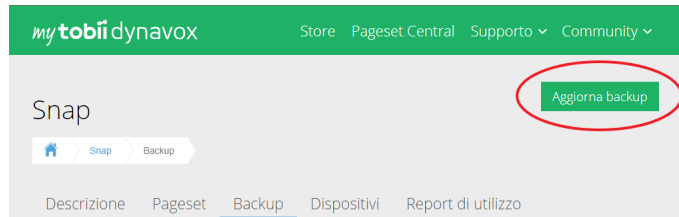

Backup su un file locale

1. Selezionare il pulsante  **Modifica**.
2. Selezionare la scheda **Utente**.
3. Selezionare la freccia a destra dell'utente corrente.
4. Selezionare il pulsante  **Backup** accanto al nome dell'utente del quale si desidera effettuare il backup.
5. Selezionare **Backup su un file locale**.
6. (Windows) **Cerca** la cartella dove verrà salvato il file di backup, quindi selezionare **Salva**.
(iOS) Immettere un nome per il file di backup.
7. Selezionare **Backup**.

11.4 Ripristina un Utente

Ripristina un utente da myTobiiDynavox


1. Selezionare il pulsante  **Modifica**.
2. Selezionare la scheda **Utente**.
3. Selezionare la freccia a destra dell'utente corrente.
4. Selezionare **Nuovo utente**.
5. Selezionare **Ripristina utente esistente**.
6. Se non è stato effettuato l'accesso a myTobiiDynavox, inserire la propria email e la password, quindi selezionare **Avanti**.
7. Scegliere un file di backup utente dall'elenco, quindi selezionare **Avanti**.

Ripristino di un utente da un file locale




Su iOS, i file di backup dell'utente locali creati su un dispositivo differente devono essere prima spostati nell'app Snap Core First attraverso iTunes:

- Aprire iTunes sul Mac o sul PC.
- Collegare l'iPad al computer utilizzando il cavo USB in dotazione con il dispositivo.
- Selezionare il dispositivo in iTunes.

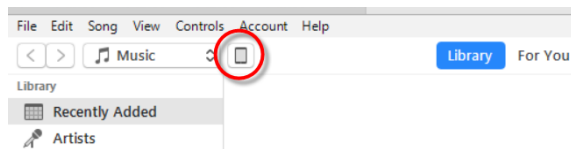

- Nella barra laterale sinistra, selezionare **App**. Quindi, scorrere fino alla sezione Condivisione file in fondo alla pagina.
- Selezionare **Snap Core First**.

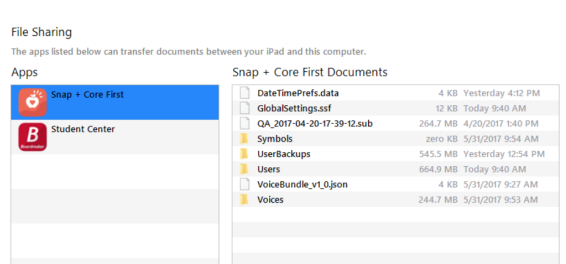

- Trascinare i file di backup utente nell'area Documenti Snap Core First.
- Seguire i passaggi seguenti per ripristinare l'utente sull'iPad.

- Selezionare il pulsante  **Modifica**.
- Selezionare la scheda **Utente**.
- Selezionare la freccia a destra dell'utente corrente.
- Selezionare **Nuovo utente**.
- Selezionare **Ripristina utente esistente**.
- Selezionare **Ripristina da un file locale**.
- (Windows) Cercare il file di backup utente e selezionarlo, quindi selezionare **Apri**.
(iOS) Selezionare un file di backup utente dall'elenco, quindi selezionare **Ripristina utente**.

11.5 Modifica/rinomina un utente

- Selezionare il pulsante  **Modifica**.
- Selezionare la scheda **Utente**.
- Selezionare il pulsante  **Modifica** accanto al nome dell'utente che si desidera modificare.
- Scrivere nel campo **Nome**.
- Selezionare **Salva** per salvare le modifiche o **Annulla** per eliminare le modifiche.

11.6 Elimina un utente



L'eliminazione di un utente dal dispositivo è un'operazione definitiva. Se si ritiene che l'utente potrà essere utile in futuro, creare un backup utente *11.3 Backup di un Utente* prima di programmare l'operazione di eliminazione.

- Selezionare il pulsante  **Modifica**.
- Selezionare la scheda **Utente**.

3. Selezionare il pulsante  **Elimina** accanto al nome dell'utente che si desidera eliminare.



Non è possibile eliminare l'utente attivo al momento.

4. Selezionare il pulsante rosso **Elimina**.
5. Selezionare **Elimina** per eliminare definitivamente l'utente. Selezionare **Annulla** per tornare al menu delle impostazioni senza eliminare l'utente.

11.7 Accesso all'account myTobiiDynavox



L'accesso all'account myTobiiDynavox richiede una connessione Internet attiva.

Alcuni servizi di Snap Core First, come ad esempio la sincronizzazione, richiedono l'accesso all'account myTobiiDynavox. Selezionare **Accedi** per inserire le credenziali myTobiiDynavox o creare un nuovo account myTobiiDynavox. Se al momento è stato effettuato l'accesso, il nome utente o l'e-mail myTobiiDynavox appariranno nella sezione Account di myTobiiDynavox.

11.8 Voce

11.8.1 Sintesi vocale

La Sintesi vocale è la voce che legge i contenuti della finestra messaggio e i messaggi dei pulsanti.

La Sintesi vocale è la voce predefinita; non è legata a una lingua specifica. Se sono state assegnate voci specifiche per la lingua, verranno utilizzate queste ultime per tali lingue. Per assegnare voci specifiche per la lingua, vedere *11.10 Voci specifiche per la lingua*.

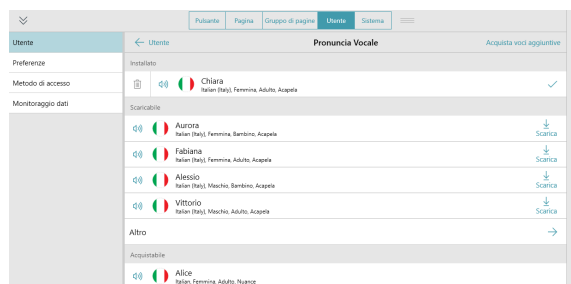


Figura 11.1 Scheda utente — Sintesi vocale



1. Selezionare il pulsante **Modifica**.
2. Selezionare la scheda **Utente**.
3. Selezionare **Sintesi vocale**.

11.8.1.1 Voci installate

Si tratta delle voci disponibili al momento per l'uso immediato sul dispositivo. Includono voci pre-installate e voci installate sul dispositivo.



È possibile eliminare le voci nell'elenco Installate, ma non è possibile eliminare la voce attiva al momento.

11.8.1.2 Voci scaricabili

Scarica nuove voci.



È necessario avere una connessione Internet attiva per scaricare le voci.



1. Selezionare il pulsante **Modifica**.
2. Selezionare la scheda **Utente**.
3. Selezionare **Sintesi vocale**.
4. Nell'elenco delle Voci scaricabili, selezionare **Scarica** accanto alla voce desiderata.



Su iOS, il download delle voci entra in pausa quando viene l'app Snap Core First viene ridotta a icona.

11.8.1.3 Voci da acquistare

Snap Core First (completo) include un motore di voci e l'accesso a tutte le voci per tale motore. È possibile acquistare i motori di voci aggiuntivi. Quando si acquista un motore di voci, è possibile accedere a tutte le oltre 100 voci associate.

Anteprima e acquisto delle voci



1. Selezionare il pulsante **Modifica**.
2. Selezionare la scheda **Utente**.
3. Selezionare **Sintesi vocale**.
4. Scorrere in basso fino alla sezione **Acquistabile**.
5. Selezionare  per l'anteprima di una voce.
Selezionare **Acquista voci aggiuntive** per eseguire l'acquisto.

11.8.1.4 Voci della piattaforma

Sono le voci fornite dal sistema operativo e le voci SAPI5.



Alcune voci possono apparire due volte se sono dotate sia di una versione piattaforma nativa sia di una versione SAPI5.

SAPI5 è solo Windows

11.8.2 Velocità voce

È la velocità con cui vengono pronunciate le parole.



1. Selezionare il pulsante **Modifica**.
2. Selezionare la scheda **Utente**.
3. Spostare la **Barra di scorrimento di velocità voce** verso sinistra per una velocità minore o verso destra per una velocità maggiore della sintesi vocale.

11.8.3 Eccezioni di pronuncia

Sono parole o acronimi delle quali si insegna la pronuncia specifica alla voce. Le Eccezioni di pronuncia sono allegate alla voce attiva quando vengono create le Eccezioni di pronuncia. Se si passa a una voce diversa e si desidera utilizzare le stesse eccezioni di pronuncia, è necessario importare le Eccezioni di pronuncia dalla voce precedente.

Le Eccezioni di pronuncia sono disponibili anche per voci specifiche per la lingua. Vedere la sezione **11.10 Voci specifiche per la lingua**.



Le Eccezioni di pronuncia non possono essere importate tra piattaforme (Windows ⇔ iOS).

Crea una Nuova eccezione di pronuncia



1. Selezionare il pulsante **Modifica**.
2. Selezionare la scheda **Utente**.
3. Selezionare **Eccezioni di pronuncia**.
4. Selezionare **Aggiungi eccezione di pronuncia**.
Si aprirà la finestra di dialogo Aggiungi eccezioni di pronuncia.

5. Nel campo **Parole**, scrivere la parola così come si scrive.
6. Nel campo **Pronuncia**, scrivere la parola foneticamente come si desidera che venga pronunciata.
Per verificare la pronuncia, selezionare il pulsante Anteprima.
7. Selezionare **Fatto** per salvare l'Eccezione di pronuncia. Selezionare **Annulla** per eliminare le modifiche e tornare a Impostazioni utente.

Importa un'eccezione di pronuncia



1. Selezionare il pulsante **Modifica**.
2. Selezionare la scheda **Utente**.
3. Selezionare **Eccezioni di pronuncia**.
4. Selezionare **Importa da un'altra voce**.

5. Selezionare la voce con le Eccezioni di pronuncia che si desiderano importare.



Nell'elenco appariranno soltanto le voci con Eccezioni di pronuncia associate.

6. Selezionare **Importa** per importare tutte le Eccezioni di pronuncia associate alla voce selezionata. Selezionare **Annulla** per tornare alle Impostazioni utente senza importare.



Dopo aver importato le Eccezioni di pronuncia da un'altra voce, si raccomanda di testarle con la voce corrente. Selezionare il  pulsante di Anteprima su un'Eccezione di pronuncia per ascoltarne la pronuncia con la voce corrente.

11.9 Dispositivo di emissione voce

1. Selezionare il pulsante  **Modifica**.
2. Selezionare la scheda **Utente**.
3. Selezionare **Dispositivo di emissione voce**.
4. Impostare Usa dispositivo predefinito su **on** per utilizzare il dispositivo di emissione predefinito Windows. Impostare Usa dispositivo predefinito su **off** per visualizzare l'elenco dei dispositivi di emissione disponibili.
 - a. Selezionare un dispositivo di emissione dall'elenco per utilizzare tale dispositivo per l'emissione della sintesi vocale. Per visualizzare l'anteprima di un dispositivo, selezionare il pulsante di riproduzione corrispondente.

11.10 Voci specifiche per la lingua

È possibile assegnare una voce a una lingua, in modo tale che il contenuto in questa lingua venga pronunciato correttamente.

1. Selezionare il pulsante  **Modifica**.
2. Selezionare la scheda **Utente**.
3. Selezionare **Voci specifiche per la lingua**.
4. Selezionare **Aggiungi una voce per un'altra lingua**.
5. Selezionare **Lingua**, quindi selezionare una lingua dall'elenco Lingua voce. Selezionare **Nuova voce** dopo aver selezionato la lingua.
6. Selezionare **Voce**, quindi scegliere una voce dalla sezione Installate dell'elenco Voce. Selezionare **Nuova voce** dopo aver selezionato la voce.



È possibile scaricare gratuitamente alcune voci (è richiesta la connessione Internet). Selezionare **Scarica** accanto alla voce desiderata. Al termine del download, cercare e selezionare la voce nella sezione Installate dell'elenco Voce.

7. (Facoltativo) Regolare la Velocità voce per la lingua/voce selezionata.
8. (Facoltativo) Aggiungere eccezioni di pronuncia per la voce. Vedere la sezione 11.8.3 *Eccezioni di pronuncia*.

11.11 Preferenze utente

11.11.1 Impostazioni discorso

1. Selezionare il pulsante  **Modifica**.
2. Selezionare la scheda **Utente**.
3. Selezionare la categoria **Preferenze**.
4. Impostare Interrompi sempre il discorso per un nuovo discorso su **On** (il discorso in corso verrà arrestato per pronunciare il nuovo) o su **Off** (i comandi del discorso verranno messi in coda: al termine del discorso corrente verrà pronunciato quello nuovo).

11.11.2 Impostazioni finestra di messaggio



Figura 11.2 Usa simboli nella Finestra Messaggio abilitata

1. Selezionare il pulsante  **Modifica**.
2. Selezionare la scheda **Utente**.

3. Selezionare la categoria **Preferenze**.
4. Impostare le preferenze seguenti su **On** (abilitate) o su **Off** (disabilitate):
 - Usa simboli nella Finestra Messaggio — Quando questa funzione è abilitata, alle parole e alle frasi presenti nella Finestra Messaggio verranno assegnati dei simboli.
 - Pronuncia durante l'inserimento nella Finestra Messaggio — Quando questa funzione è abilitata, ogni parola o frase verrà pronunciata così come viene immessa nella Finestra Messaggio.
 - Pronuncia caratteri — Quando questa funzione è abilitata, ogni carattere verrà pronunciato così come viene immesso nella Finestra Messaggio.



Per abilitare "Pronuncia caratteri", l'impostazione "Pronuncia durante l'inserimento nella Finestra Messaggio" deve essere abilitata.

- Cancella dopo messaggio vocale — Una volta pronunciato il testo della Finestra Messaggio, il testo viene cancellato appena viene inserito un nuovo testo.
- Flessione automatica pulsanti Grammatica — Quando questa funzione è abilitata, i pulsanti grammatica si aggiorneranno in maniera dinamica in base al contesto grammaticale dei contenuti della Finestra Messaggio.
- Formazione automatica contrazioni — Quando questa funzione è abilitata, si formeranno contrazioni comuni da due parole (ad es. "questa azione" diventerà "quest'azione").

11.11.3 Impostazioni Predizione



1. Selezionare il pulsante **Modifica**.
2. Selezionare la scheda **Utente**.
3. Selezionare la categoria **Preferenze**.
4. Imposta Mostra simboli sui pulsanti Predittore su **On** (i pulsanti Predittore mostrano un simbolo per la parola prevista al momento) o su **Off** (i pulsanti Predittore mostrano solo il testo).

11.11.4 Impostazioni Sincronizzazione



1. Selezionare il pulsante **Modifica**.
2. Selezionare la scheda **Utente**.
3. Selezionare la categoria **Preferenze**.
4. Impostare Abilita sincronizzazione in Modalità uso su **On** (il pulsante di Sincronizzazione è visibile nella Barra superiore sia in Modalità uso sia in Modalità modifica) o su **Off** (il pulsante di sincronizzazione è nascosto nella Barra superiore in Modalità uso ma è visibile in Modalità modifica).

11.12 Metodo di accesso

Tocco

Gli oggetti vengono attivati toccando l'oggetto sullo schermo con un dito o, se viene utilizzato un mouse, facendo clic sull'oggetto con il cursore del mouse. Questo metodo di accesso è ideale per utenti che sono in grado di toccare lo schermo velocemente e con precisione o di controllare e fare clic sinistro con un comune mouse per computer. Gli oggetti si attivano non appena vengono toccati o cliccati.

Attivazione al tocco

Gli oggetti si attivano toccando fisicamente l'oggetto sullo schermo per un intervallo minimo o, quando si utilizza un mouse, facendo clic sull'oggetto per un intervallo minimo. Il tempo di mantenimento viene impostato dall'utente. Questo metodo di accesso è ideale per utenti che potrebbero toccare o fare clic su oggetti indesiderati accidentalmente.

Attivazione al rilascio

Questo metodo è simile all'attivazione al tocco, ma un oggetto selezionato si attiva quando viene rilasciata la selezione. Questo metodo consente all'utente di mantenere il contatto con il touch screen senza effettuare una selezione accidentalmente. Significa che l'utente può far scorrere un dito o un puntatore sul touch screen o tenere premuto un pulsante del mouse mentre il cursore si sposta. Non verrà effettuata alcuna selezione fino a quando il dito o il puntatore non vengono

allontanati dal touch screen o quando viene rilasciato il pulsante del mouse. Pertanto il metodo di selezione Tocca per uscire è ideale per una persona che può ritenere più semplice trascinare un dito o un puntatore sul touch screen mentre passa da una selezione all'altra.

Clic automatico del mouse

(Solo Windows) Il metodo di accesso Clic automatico del mouse richiede che un mouse, una trackball o un head mouse controllino il cursore sullo schermo. Un oggetto viene selezionato quando il cursore si sofferma per un intervallo specificato o quando l'utente attiva un interruttore. Questo metodo di accesso è un'opzione ideale per una persona in grado di manovrare un mouse ma che non è molto abile nel tenere premuto il pulsante del mouse per effettuare delle selezioni.

Interazione oculare

(Solo Windows) Questo metodo consente all'utente di controllare Snap Core First utilizzando soltanto gli occhi. Le selezioni vengono effettuate fissando lo sguardo su un oggetto per certo periodo di tempo (clic automatico), attivando un interruttore o battendo le palpebre. L'interazione oculare richiede un dispositivo apposito Tobii Dynavox.

Scansione

Quando la Scansione è il metodo di selezione attivo, gli oggetti sullo schermo vengono messi in evidenza con uno schema specifico. La scansione richiede un interruttore o un tasto per effettuare una selezione quando viene messo in evidenza l'elemento desiderato. Questo metodo di accesso è rivolto a utenti con abilità motorie che non gli consentono di utilizzare efficacemente i metodi di selezione diretti.



Per ulteriori informazioni sui metodi di accesso, guardare il video Metodi di accesso in *Sistema — Guida e tutorial*.

11.12.1 Imposta il metodo di accesso




1. Selezionare il pulsante **Modifica**.
2. Selezionare la scheda **Utente**.
3. Selezionare la categoria **Metodo di accesso**.
4. Selezionare il Metodo di accesso corrente.
5. Selezionare un Metodo di accesso dall'elenco.

11.12.2 Touch - Opzioni



Touch è il Metodo di accesso predefinito.

Quando viene utilizzato il Metodo di accesso Touch, gli oggetti vengono attivati toccando l'oggetto sullo schermo con un dito o, se viene utilizzato un mouse, facendo clic sull'oggetto con il cursore del mouse. Questo metodo di accesso è ideale per utenti che sono in grado di toccare lo schermo velocemente e con precisione o di controllare e fare clic sinistro con un comune mouse per computer. Gli oggetti si attivano non appena vengono toccati o cliccati.

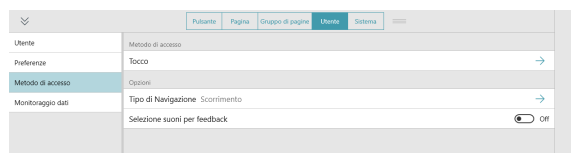

Tipo di Navigazione

Il Tipo di navigazione è il modo in cui l'utente può scorrere lungo la pagina e la barra degli strumenti. Si può scegliere di scorrere trascinando il dito sullo schermo, selezionando i pulsanti di navigazione o entrambe le modalità.

Scorrimiento

- Scorrere lungo la pagina e la barra degli strumenti verso l'alto e verso il basso strisciando il dito sul touch screen. (Solo Metodo di accesso Touch.)


- I pulsanti freccia appaiono sulla pagina e sulla barra degli strumenti quando è presente altro contenuto in alto o in basso. I pulsanti di navigazione freccia sono accessibili per tutti i Metodi di accesso.



- I pulsanti di scorrimento e navigazione sono abilitati, pertanto il tipo di navigazione può essere utilizzato per spostarsi verso l'alto o verso il basso nel contenuto. (Solo Metodo di accesso Touch.)

Viene riprodotto un suono quando viene selezionato un pulsante non parlante.

Quando questo metodo è quello selezionato per l'accesso, gli oggetti si attivano toccando fisicamente l'oggetto sullo schermo per pochi secondi o, quando si utilizza un mouse, facendo clic sull'oggetto per pochi secondi. Il tempo di mantenimento viene impostato dall'utente. Questo metodo di accesso è ideale per utenti che potrebbero toccare o fare clic su oggetti indesiderati accidentalmente.

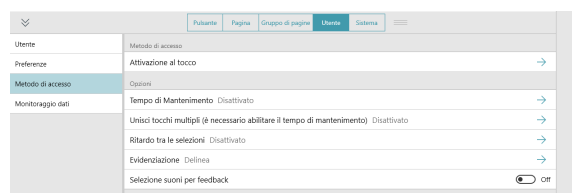

Il Tempo di mantenimento è il tempo minimo necessario per tenere selezionato un oggetto per poterlo attivare.

Questa impostazione rileva i tocchi multipli che si verificano in un arco di tempo e li unisce in modo da essere registrati come un unico tocco prolungato. È utile se l'utente ha difficoltà a mantenere la selezione correttamente.


Quando è abilitata la funzione Unisci tocchi multipli, è possibile scegliere l'arco di tempo in cui unire i tocchi. Ad esempio, quando è impostata su Medio, tutti i tocchi effettuati nell'intervallo di 0,3 secondi (a partire dal primo tocco) verranno registrati come un unico tocco prolungato.

Questa impostazione consente di stabilire un periodo di tempo laddove Snap ignorasse i tentativi di selezione dopo averne effettuata una. L'abilitazione del Ritardo tra le selezioni può servire a impedire selezioni ripetute involontarie nel software.

Quando il Ritardo tra le selezioni è abilitato, è possibile scegliere l'arco di tempo in cui i tentativi di selezione vengono ignorati dopo aver effettuato una selezione. Ad esempio, quando è impostata su Medio, Snap ignorerà tutti i tentativi di selezione che verranno effettuati nei 2 secondi successivi alla selezione.

#12005874 Snap™ Core First® Manuale dell'utente v.1.10 - it-IT

Scegliere il tipo e il colore di evidenziazione preferiti. L'evidenziazione è un'indicazione visiva che mostra quando un oggetto è selezionato. Si arresta quando l'oggetto viene attivato.

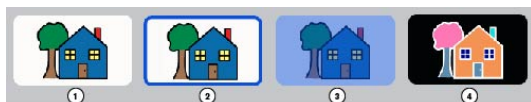


1. Nessuna evidenziazione
2. Delinea
Opzioni: Colore, spessore evidenziazione
3. Sovrapponi
Opzione: Colore
4. Inverti

Selezione suoni per feedback

Viene riprodotto un suono quando viene selezionato un pulsante non parlante.

11.12.4 Tocca per uscire - Opzioni

Quando si utilizza Tocca per uscire, un oggetto selezionato si attiva quando viene rilasciata la selezione. Questo metodo consente all'utente di mantenere il contatto con il touch screen senza effettuare una selezione accidentalmente. Significa che l'utente può far scorrere un dito o un puntatore sul touch screen o tenere premuto un pulsante del mouse mentre il cursore si sposta. Quando il cursore si sposta sui pulsanti, si evidenzierà il pulsante selezionato al momento. Un pulsante non viene attivato fino a quando il dito o il puntatore non vengono allontanati dal touch screen o quando viene rilasciato il pulsante del mouse. Pertanto il metodo di selezione Tocca per uscire è ideale per una persona che può ritenere più semplice trascinare un dito o un puntatore sul touch screen mentre passa da una selezione all'altra. È utile anche per persone che beneficiano del feedback visivo per effettuare selezioni accurate.

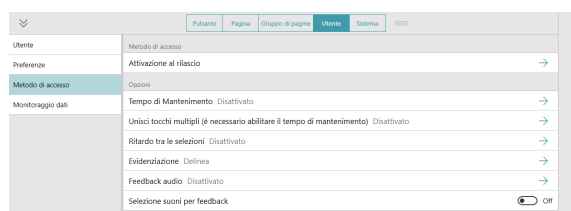

Tempo di mantenimento

Il Tempo di mantenimento è il tempo minimo necessario per tenere selezionato un oggetto per poterlo attivare al rilascio.

Unisci tocchi multipli

Questa impostazione rileva i tocchi multipli che si verificano in un arco di tempo e li unisce in modo da essere registrati come un unico tocco prolungato. È utile se l'utente ha difficoltà a mantenere la selezione correttamente.

Quando è abilitata la funzione Unisci tocchi multipli, è possibile scegliere l'arco di tempo in cui unire i tocchi. Ad esempio, quando è impostata su Medio, alcuni e tutti i tocchi effettuati nell'intervallo di 0,3 secondi (a partire dal primo tocco) verranno registrati come un unico tocco prolungato.

Ritardo tra le selezioni

Questa impostazione consente di stabilire un periodo di tempo laddove Snap ignorasse i tentativi di selezione dopo averne effettuata una. L'abilitazione del Ritardo tra le selezioni può servire a impedire selezioni ripetute involontarie nel software.

Quando il Ritardo tra le selezioni è abilitato, è possibile scegliere l'arco di tempo in cui i tentativi di selezione vengono ignorati dopo aver effettuato una selezione. Ad esempio, quando è impostata su Medio, Snap ignorerà tutti i tentativi di selezione che verranno effettuati nei 2 secondi successivi alla selezione.

Evidenziazione

1. Which of the four images is different from the others?

1.  2.  3.  4. 

- Feedback audio

Selezione suoni per feedback

11.12.5 Selezione con clic automatico del mouse - Opzioni

Metodo di accesso

- Metodo di accesso: Clic automatico del mouse →
- Opzioni: Tipo di Selezione Pausa - 1.0s →
- Evidenziazione Definita →
- Feedback audio Disattivo →
- Mostra, in modalità uso, la pausa del metodo di accesso ☒ On
- Selezione suoni per feedback ☐ Off

Dwell


- ## Sensore

- ## Evidenziazione

#12005874 Snap™ Core First® Manuale dell'utente v.1.10 - it-IT



Per questo metodo di accesso, "Nessuna evidenziazione" non è un'opzione.

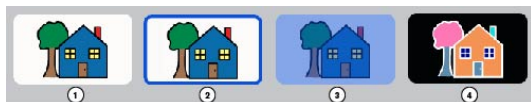

1. Nessuna evidenziazione
2. Delinea
Opzioni: Colore, spessore evidenziazione
3. Sovrapponi
Opzione: Colore
4. Inverti

Feedback audio

Quando la funzione Feedback audio è abilitata, l'utente ascolterà un segnale audio dell'oggetto quando viene evidenziato. Un segnale audio è una parola o un breve messaggio che aiuta a identificare un oggetto. È possibile selezionare una voce diversa per il Feedback audio, voci di feedback specifiche per la lingua, nonché una velocità voce ed eccezioni di pronuncia personalizzati.

Mostra il pulsante Sospendi metodo di accesso in Modalità Uso

Quando questa funzione è abilitata, il pulsante Sospendi/Riprendi metodo di accesso appare nella Barra superiore in Modalità uso. Quando è disabilitata il pulsante è nascosto.

Selezione suoni per feedback

Viene riprodotto un suono quando viene selezionato un pulsante non parlante.

11.12.6 Interazione oculare - Opzioni

(Solo Windows) Questo metodo consente all'utente di controllare Snap Core First utilizzando soltanto gli occhi. Le selezioni vengono effettuate fissando lo sguardo su un oggetto per certo periodo di tempo (clic automatico), attivando un interruttore o battendo le palpebre. La selezione oculare richiede un dispositivo apposito di Tobii Dynavox.

Tipo di Selezione

Dwell

- Consente all'utente di effettuare la selezione fissando lo sguardo su un oggetto per un intervallo stabilito (intervallo di selezione).
 - Intervallo di selezione — consente di impostare l'intervallo durante il quale lo sguardo deve rimanere su un oggetto per selezionarlo.

Sensore

- L'utente indirizza l'evidenziazione sullo schermo utilizzando lo sguardo, quindi effettua le selezioni con un sensore.
 - Input sensore — consente di impostare il tasto della tastiera che funge da input per il sensore.



La selezione con un tasto o un sensore Bluetooth potrebbe non funzionare al di fuori del software Snap.

- Durata pressione sensore — consiste nell'intervallo in cui il sensore deve essere attivato per selezionare l'oggetto evidenziato al momento.
- Durata ripetizione sensore — consiste nell'intervallo di tempo che l'utente deve attendere tra le attivazioni del sensore. Prima di questo intervallo vengono ignorate tutte le altre attivazioni del sensore.

Battito di palpebre

- Consente all'utente di effettuare la selezione battendo le palpebre per un intervallo stabilito.
 - Durata minima battito di palpebre — consente di impostare l'intervallo di tempo minimo in cui gli occhi dell'utente devono essere chiusi per effettuare la selezione.

- Durata massima battito di palpebre — consente di impostare l'intervallo di tempo massimo in cui gli occhi dell'utente possono essere chiusi per effettuare la selezione. Se gli occhi dell'utente sono chiusi più a lungo dell'intervallo massimo del battito di palpebre, non viene effettuata alcuna selezione.

Feedback puntamento oculare

Il Feedback puntamento oculare è un'indicazione visiva che mostra all'utente in quale punto dello schermo si sta concentrando lo sguardo, in che maniera e per quanto tempo.

Impostare lo stile, il colore e le dimensioni del Feedback puntamento oculare.

Ritardo dopo la modifica della pagina

Dopo essere passati a una nuova pagina, la selezione non avviene per un intervallo di tempo stabilito. Questa impostazione serve a impedire selezioni accidentali quando una pagina si apre per prima.

Tipo di Windows Control

Serve a impostare la modalità di accesso al desktop per la navigazione al di fuori del software Snap.

- Gaze Selection — si tratta di un metodo di selezione in due fasi che riduce il rischio di clic indesiderati.
- Mouse Emulation — emula e controlla un puntatore standard del mouse per PC sullo schermo.

Feedback audio

Quando la funzione Feedback audio è abilitata, l'utente ascolterà un segnale audio dell'oggetto quando viene evidenziato. Un segnale audio è una parola o un breve messaggio che aiuta a identificare un oggetto. È possibile selezionare una voce diversa per il Feedback audio, nonché una velocità voce ed eccezioni di pronuncia personalizzati.

Mostra il pulsante Sospendi metodo di accesso in Modalità Uso


Quando questa funzione è abilitata, il pulsante Sospendi/Riprendi metodo di accesso appare nella Barra superiore in Modalità uso. Quando è disabilitata il pulsante è nascosto.

Selezione suoni per feedback

Viene riprodotto un suono quando viene selezionato un pulsante non parlante.

11.12.7 Scansione - Opzioni

Quando la Scansione è il metodo di selezione attivo, gli oggetti sullo schermo vengono messi in evidenza con uno schema specifico. L'utente attiverà un interruttore o un tasto per effettuare una selezione quando viene messo in evidenza l'elemento desiderato. Questo metodo di accesso è rivolto a utenti con abilità motorie che non gli consentono di utilizzare efficacemente i metodi di selezione diretti.

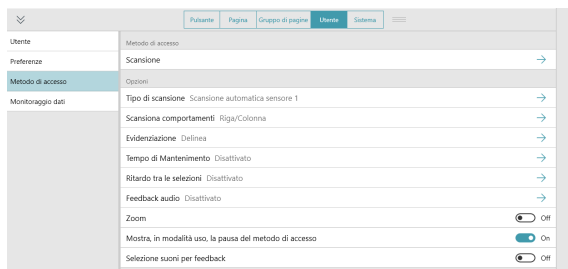

Tipo di scansione

L'impostazione Tipo di scansione stabilisce come avanza l'evidenziazione di scansione (automaticamente o attraverso input dell'interruttore) e come vengono effettuate le selezioni.

Scansione automatica sensore 1

- Quando si utilizza Scansione automatica interruttore 1, il software scansionerà gli elementi sulla pagina utilizzando lo schema di scansione stabilito. L'utente effettua le selezioni con un interruttore.
 - Input sensore — consente di scegliere tra un tocco sullo schermo e un tasto della tastiera.
 - Velocità — consente di impostare la velocità di avanzamento della scansione automatica.
 - Tempo di transizione — consente di impostare l'intervallo di tempo tra effettuare una selezione e continuare la scansione automatica.

- Esegui scansione dopo — consente di selezionare quando deve ricominciare la scansione automatica: Selezione, Modifica pagina, Pronuncia.
- Pronuncia segnale audio completo prima di continuare — quando è abilitata, i segnali audio lunghi ritardano l'avanzamento dell'evidenziazione di scansione fino a quando non viene pronunciato completamente il segnale audio.

Scansione passo-passo sensore 2

- Quando viene utilizzata la funzione Scansione passo-passo a 2 sensori, l'utente consentirà a un interruttore di continuare la scansione e a un secondo sensore di effettuare le selezioni.
 - Input Sensore 1 — consente di scegliere tra un tocco sullo schermo e un tasto della tastiera per continuare l'evidenziazione della scansione.
 - Input sensore 2 — consente di scegliere tra un tocco sullo schermo e un tasto della tastiera per effettuare selezioni.



Input Sensore 1 e Input Sensore 2 devono essere diversi.

Scansione sensore 1

- Quando l'opzione di Scansione a 1 interruttore è attiva, l'utente consentirà a un interruttore di continuare l'evidenziazione (ogni selezione fa avanzare l'evidenziazione di un intervallo). Per selezionare l'oggetto evidenziato, l'utente selezionerà l'interruttore e manterrà la selezione per il Tempo di sospensione specificato.
 - Input Sensore 1 — consente di scegliere tra un tocco sullo schermo e un tasto della tastiera per continuare l'evidenziazione della scansione.
 - Tempo di sospensione — è il tempo minimo necessario per tenere selezionato un oggetto per poterlo attivare.

Dwell Scansione sensore 1

- Quando l'opzione di Scansione clic automatico a 1 sensore è attiva, l'utente consentirà a un sensore di continuare l'evidenziazione (ogni selezione fa avanzare l'evidenziazione di un intervallo). Per selezionare l'oggetto evidenziato, l'utente sospenderà le operazioni nel Tempo di sospensione specificato.
 - Input Sensore 1 — consente di scegliere tra un tocco sullo schermo e un tasto della tastiera per continuare l'evidenziazione della scansione.
 - Tempo di sospensione — è il tempo minimo necessario per selezionare con un clic automatico un oggetto per poterlo attivare.

Scansione inversa

- Un utente che utilizza la Scansione inversa terrà premuto il sensore per far procedere l'evidenziazione della scansione (l'evidenziazione continua ad avanzare fin quando l'interruttore è premuto). Quando l'utente rilascia l'interruttore, verrà selezionato l'oggetto evidenziato.
 - Input Sensore 1 — consente di scegliere tra un tocco sullo schermo e un tasto della tastiera per continuare l'evidenziazione della scansione.
 - Velocità — è la velocità alla quale procede l'evidenziazione di scansione (mentre il sensore è premuto).
 - Pronuncia segnale audio completo prima di continuare — quando è abilitata, i segnali audio lunghi ritardano l'avanzamento dell'evidenziazione di scansione fino a quando non viene pronunciato completamente il segnale audio.

Comportamenti di scansione

Il comportamento di scansione è la sequenza nella quale gli oggetti dello schermo vengono evidenziati per la selezione. Questa selezione contiene anche selezioni correlate a quali tipi di oggetti vengono selezionati.

Schema

- Riga/Colonna — Esegue la scansione delle righe dall'alto verso il basso. Quando viene selezionata una riga, gli elementi presenti al suo interno vengono scansionati da sinistra a destra.
- Colonna/Riga — Esegue la scansione delle colonne da sinistra a destra. Quando viene selezionata una colonna, gli elementi presenti al suo interno vengono scansionati dall'alto verso il basso.
- Lineare — Gli oggetti vengono scansionati singolarmente da sinistra a destra e dall'alto verso il basso.

Numero di passaggi

- Passaggi — Consente di impostare quante volte verrà scansionata una riga o una colonna senza che venga effettuata una selezione.
- Dopo il passaggio finale — Consente di scegliere quali operazioni effettuare quando la scansione automatica completa il numero di passaggi (non disponibile per i passaggi infiniti).

Raggruppa scansione

- Quando abilitato, i pulsanti delle pagine vengono scansionati in gruppi.



I gruppi di scansione devono essere predefiniti. Vedere la sezione 8.13 *Gruppi di scansione*.

Esegui scansione da Ultima selezione

- Quando è abilitata, la scansione ricomincerà alla pagina dove è stata effettuata l'ultima selezione. Quando è disabilitata, dopo aver effettuato una selezione, la scansione ricomincia dalla parte superiore della pagina.

Esegui scansione Finestra Messaggio

- Quando è abilitata, vengono scansionati gli elementi accessibili presenti nella Barra superiore (Indietro, Pagina iniziale e Pannello di Controllo). Quando è disabilitata, gli elementi della barra superiore non vengono scansionati.



I pulsanti Cerca, Sincronizza, Sospendi metodo di accesso e Modifica presenti nella Barra superiore non vengono scansionati. Sono accessibili tramite tocco in qualsiasi momento.

Esegui scansione pulsanti vuoti


- Quando è abilitata, vengono scansionati i pulsanti privi di contenuto. Quando è disabilitata, i pulsanti vuoti non eseguono la scansione.

Evidenziazione

Scegliere il tipo e il colore di evidenziazione preferiti. L'evidenziazione è un'indicazione visiva che mostra quando un oggetto viene scansionato. Si arresta quando l'oggetto viene attivato.



Per questo metodo di accesso, "Nessuna evidenziazione" non è un'opzione.

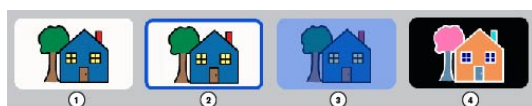

1. Nessuna evidenziazione
2. Delinea
Opzioni: Colore, spessore evidenziazione
3. Sovrapponi
Opzione: Colore
4. Inverti

Tempo di mantenimento

Il Tempo di mantenimento è il tempo minimo necessario per tenere selezionato un oggetto per poterlo attivare.

Ritardo tra le selezioni

Ritardo tra le selezioni serve a impedire selezioni involontarie. Quando viene effettuata la selezione di un sensore, la selezione del sensore successiva non può avvenire fino a quando non trascorre l'intervallo stabilito in Ritardo tra le selezioni. Se l'interruttore viene attivato durante l'intervallo stabilito, il conto alla rovescia viene azzerato.

Feedback audio

Quando la funzione Feedback audio è abilitata, l'utente ascolterà un segnale audio dell'oggetto quando viene evidenziato. Un segnale audio è una parola o un breve messaggio che aiuta a identificare un oggetto. È possibile selezionare una voce diversa per il Feedback audio, voci di feedback specifiche per la lingua, nonché una velocità voce ed eccezioni di pronuncia personalizzati.

Zoom

Quando questa funzione è abilitata, gli oggetti dello schermo vengono zoomati mentre vengono scansionati. Quando viene eseguita la scansione di più oggetti (righe o colonne), l'oggetto nel primo schema viene zoomato e gli altri oggetti vengono evidenziati come specificato dall'impostazione Stile di evidenziazione.

Mostra il pulsante Sospendi metodo di accesso in Modalità Uso

Quando questa funzione è abilitata, il pulsante Sospendi/Riprendi metodo di accesso appare nella Barra superiore in Modalità uso. Quando è disabilitata il pulsante è nascosto.

Selezione suoni per feedback

Viene riprodotto un suono quando viene selezionato un pulsante non parlante.


11.13 Monitoraggio dati

11.13.1 Monitora utilizzo pulsante

Quando la funzione Monitora utilizzo pulsante è abilitata, vengono registrate le informazioni relative all'uso del pulsante in Snap Core First. Queste informazioni includono il tempo di utilizzo del pulsante per eventi, messaggi, lingua, Gruppo di pagine, pagina, posizione griglia, Metodo di accesso (ad es. interazione oculare), modalità di modellazione, e se il pulsante ha emesso un suono o è stato inserito nella Finestra Messaggio.



Le informazioni sull'uso del pulsante non vengono registrate in Modalità modifica.

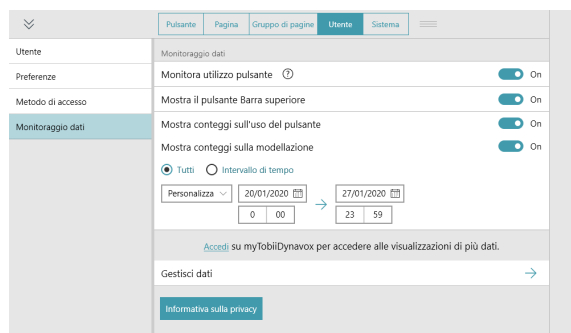

Abilita Monitora utilizzo pulsante



1. Selezionare il pulsante **Modifica**.
2. Selezionare la scheda **Utente**.
3. Selezionare la categoria **Monitoraggio dati**.
4. Impostare **Monitora utilizzo pulsante** su On.
5. Leggere l'avviso sulla privacy dei dati e selezionare **Sì** per abilitare Monitora utilizzo pulsante. Se non si desidera abilitare Monitora utilizzo pulsante, selezionare No.



È possibile visualizzare i conteggi relativi all'uso del pulsante nel software Snap Core First abilitando Mostra conteggi utilizzo pulsante e/o Mostra conteggi modellazioni. Per ulteriori informazioni vedere le sezioni 11.13.3 Mostra conteggi sull'uso del pulsante e 11.13.4 Mostra conteggi sulla modellazione. Ulteriori visualizzazioni dei dati sono disponibili nella sezione **Report di utilizzo** dell'account myTobiiDynavox.com.

Il monitoraggio utilizzo pulsante, quando è abilitato, avviene quando viene utilizzato il software Snap Core First. Per dati di utilizzo accurati, è importante fare una distinzione tra le selezioni del pulsante effettuate dall'utente e le selezioni di modellazione effettuate da un assistente o da un partner di comunicazione. Se l'utente interagisce con Snap Core First

attraverso un metodo di accesso non tattile (Clic automatico del mouse, Interazione oculare o Scansione), le selezioni del pulsante effettuate col tatto vengono registrate automaticamente come modellazione. Se l'utente interagisce con Snap Core First attraverso un Metodo di accesso basato sul tatto, l'assistente deve abilitare la modalità Modellazione prima di effettuare selezioni di modellazione, quindi disabilitarla nuovamente prima che l'utente effettui le selezioni successive.



Se Monitora utilizzo pulsante è abilitato e l'utente ha un Metodo di accesso basato sul tatto, accertarsi che sia abilitato anche il pulsante Mostra barra superiore. Vedere la sezione *11.13.2 Mostra il pulsante barra superiore*.



Quando si condivide un Gruppo di pagine dotato di dati di utilizzo, esiste la possibilità di includere o meno le informazioni sull'uso.

Abilita modalità modellazione (necessaria solo se il Metodo di accesso è impostato su Touch, Attivazione al tocco, Attivazione al rilascio quando viene utilizzato lo Schermo come interruttore)



Se il Metodo di accesso corrente include il pulsante Sospendi metodo di accesso nella barra superiore, sos-

pendere il Metodo di accesso  prima di iniziare i passaggi riportati di seguito. Ripristinare il Metodo di

accesso  quando si esce dalla modalità di Modellazione.

1. Selezionare il pulsante  **Monitoraggio dati** nella Barra superiore.
Per abilitare il pulsante di Monitoraggio dati nella Barra superiore, vedere la sezione *11.13.2 Mostra il pulsante barra superiore*.
2. Abilitare **Modalità modellazione**.
Al termine della modellazione disabilitare la modalità corrispondente.



È possibile anche attivare e disattivare la modalità di Modellazione con un tocco prolungato sul pulsante Monitoraggio dati nella barra superiore. Quando la Modalità modellazione è abilitata, il pulsante Monito-

raggio dati ha questo aspetto . Quando la Modalità modellazione è disabilitata, il pulsante Monito-

raggio dati ha questo aspetto .

11.13.2 Mostra il pulsante barra superiore



Quando è abilitato, il pulsante  Monitoraggio dati appare nella Barra superiore. Il pulsante Monitoraggio dati Barra superiore consente di accedere velocemente alle seguenti impostazioni: Modalità Modellazione, Mostra conteggi utilizzo pulsante, Mostra conteggi modellazioni e Gestisci dati.



11.13.3 Mostra conteggi sull'uso del pulsante

Quando è abilitata, i pulsanti mostrano un badge bianco con il numero di volte che è stato selezionato dall'utente (mentre Monitora utilizzo pulsante era abilitato) nell'intervallo di tempo specificato. L'intervallo di tempo predefinito è Completo.

Abilita Mostra conteggi sull'uso del pulsante (tramite Impostazioni utente)

1. Selezionare il pulsante  **Modifica**.
2. Selezionare la scheda **Utente**.
3. Selezionare la categoria **Monitoraggio dati**.
4. Impostare **Mostra conteggi sull'uso del pulsante** su On.



Per modificare l'intervallo di tempo dei conteggi sull'uso, selezionare **Intervallo di tempo**, quindi utilizzare il menu a tendina o i campi data/ora di inizio e fine.

Abilita Mostra conteggi sull'uso del pulsante (tramite il Pulsante monitoraggio dati barra superiore)



Per abilitare il pulsante di Monitoraggio dati nella Barra superiore, vedere la sezione 11.13.2 *Mostra il pulsante barra superiore*.

1. Selezionare il pulsante  **Monitoraggio dati** nella Barra superiore.
2. Abilitare **Mostra conteggi sull'uso del pulsante**.



Per modificare l'intervallo di tempo dei conteggi sull'uso, selezionare **Intervallo di tempo**, quindi utilizzare il menu a tendina o i campi data/ora di inizio e fine.

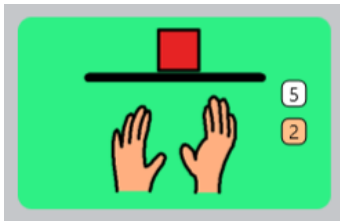


Figura 11.3 Il pulsante mostra i conteggi relativi all'uso (colore bianco) e relativi alla modellazione (colore arancione).

11.13.4 Mostra conteggi sulla modellazione

Quando è abilitata, i pulsanti mostrano un badge arancione con il numero di volte che è stato selezionato in modalità modellazione (mentre Monitora utilizzo pulsante era abilitato) nell'intervallo di tempo specificato. L'intervallo di tempo predefinito è Completo.

Abilita Mostra conteggi sulla modellazione (tramite Impostazioni utente)

1. Selezionare il pulsante  **Modifica**.
2. Selezionare la scheda **Utente**.
3. Selezionare la categoria **Monitoraggio dati**.
4. Impostare **Mostra conteggi sulla modellazione** su On.



Per modificare l'intervallo di tempo dei conteggi sulla modellazione, selezionare **Intervallo di tempo**, quindi utilizzare il menu a tendina o i campi data/ora di inizio e fine.

Abilita Mostra conteggi sulla modellazione (tramite il Pulsante monitoraggio dati barra superiore)



Per abilitare il pulsante di Monitoraggio dati nella Barra superiore, vedere la sezione *11.13.2 Mostra il pulsante barra superiore*.



1. Selezionare il pulsante **Monitoraggio dati** nella Barra superiore.
2. Abilitare **Mostra conteggi sulla modellazione**.



Per modificare l'intervallo di tempo dei conteggi sulla modellazione, selezionare **Intervallo di tempo**, quindi utilizzare il menu a tendina o i campi data/ora di inizio e fine.

11.13.5 Gestisci dati

Azzerare i conteggi sull'uso del pulsante e i conteggi sulla modellazione per la pagina corrente, i pulsanti della Barra messaggio, i pulsanti della Barra degli strumenti o l'intero Gruppo di pagine.



L'azzeramento dei conteggi sull'uso del pulsante non elimina i vecchi dati di utilizzo. Se si desidera eliminare definitivamente tutti i dati di utilizzo memorizzati sull'account myTobiiDynavox, utilizzare un browser per andare a mytobiidynavox.com > *Snap* > *Dati di utilizzo*.

Azzerare conteggi sull'uso (tramite Impostazioni utente)



1. Selezionare il pulsante **Modifica**.
2. Selezionare la scheda **Utente**.
3. Selezionare la categoria **Monitoraggio dati**.
4. Selezionare **Gestisci dati**.
5. Selezionare l'area nella quale si desidera azzerare i conteggi sull'uso del pulsante e i conteggi sulla modellazione.
6. Selezionare **Azzerare** per azzerare i conteggi su uso e modellazione per l'area selezionata. Per annullare l'operazione di azzeramento, selezionare **Annulla**.

Azzerare conteggi sull'uso (tramite il Pulsante monitoraggio dati barra superiore)



Per abilitare il pulsante di Monitoraggio dati nella Barra superiore, vedere la sezione *11.13.2 Mostra il pulsante barra superiore*.



1. Selezionare il pulsante **Monitoraggio dati** nella Barra superiore.
2. Selezionare **Gestisci dati**.
3. Selezionare l'area nella quale si desidera azzerare i conteggi sull'uso del pulsante e i conteggi sulla modellazione.
4. Selezionare **Azzerare** per azzerare i conteggi su uso e modellazione per l'area selezionata. Per annullare l'operazione di azzeramento, selezionare **Annulla**.

12 Impostazioni del sistema


12.1 Preferenze

12.1.1 Password

Quando è abilitata, è richiesta una password di quattro caratteri per accedere a Modalità Modifica, Modalità Cerca e Sincronizza. Abilitare la Password può servire a impedire modifiche non autorizzate al Gruppo di pagine e alle impostazioni.

Abilita password

1. Selezionare il pulsante  **Modifica**.
2. Selezionare la scheda **Sistema**.
3. Portare l'interruttore Usa password su **On**.
4. Inserire una password di quattro caratteri segreta e difficile da indovinare.

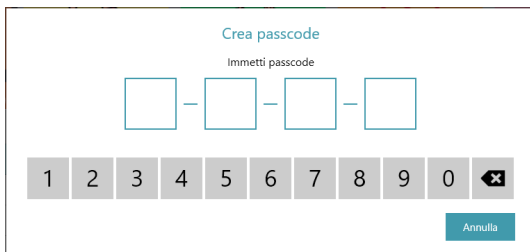

5. Inserire nuovamente la password per verificarla.
6. Quando si abilita Usa password, la password viene abilitata per Modalità Modifica, Sincronizza e Modalità Cerca come impostazione predefinita. Portare l'impostazione su Off per qualsiasi di queste funzioni se si desidera che siano accessibili senza una password.



Se Password è abilitata e la password della funzione Sincronizza è disabilitata, Sincronizza funzionerà in modalità Pull-only. Quando si effettua la sincronizzazione in Modalità Pull-only, si riceveranno le modifiche del Gruppo di pagine (apportate su altri dispositivi) ma non verranno inviate le modifiche al Gruppo di pagine apportate sul dispositivo corrente.

7. Quando si esce dalla Modalità Modifica, verrà richiesta la password per accedere all'acquisto in-app, alla Modalità Modifica, a Sincronizza e alla Modalità Cerca.



Se la password è già abilitata, è possibile eseguire un reset della stessa selezionando il pulsante  **Modifica**.

Se la password viene dimenticata, utilizzare la password principale (0520) per accedere a Modalità modifica e ripristinare immediatamente la password.

12.1.2 Impostazione schermo (solo in caso di sistemi operativi Windows)

Quando la Modalità a schermo intero è abilitata, il software Snap riempirà l'intero schermo sul dispositivo. Quando la Modalità a schermo intero è disabilitata, il software Snap funzionerà in una finestra ridimensionabile.

12.1.3 Lingua Modalità Modifica

Selezionare una lingua per l'interfaccia Modalità Modifica.

12.2 Dispositivo



La sezione Dispositivo è presente solo sui dispositivi Tobii Dynavox I-13 e I-16.

12.2.1 Impostazioni Finestra Partner

La Finestra Partner è uno schermo sul retro dei dispositivi Tobii Dynavox I-13 e I-16. La Finestra Partner informa il partner della conversazione che l'utente si sta preparando a parlare e visualizza il testo per consentire al partner di leggere.



1. Selezionare il pulsante **Modifica**.
2. Selezionare la scheda **Sistema**.
3. Selezionare **Dispositivo**.
4. Eseguire una selezione nelle Opzioni della Finestra Partner:
 - **Mostra testo della Finestra Messaggio** — consente di visualizzare in tempo reale il testo della Finestra Messaggio nella Finestra Partner.
 - **Mostra testo durante la pronuncia** — consente di visualizzare il testo nella Finestra Partner solo quando viene pronunciato. Durante la composizione nella Finestra Messaggio, la Finestra Partner visualizza una serie di puntini per indicare che l'utente sta preparando il relativo messaggio. Quando viene pronunciato il testo della Finestra Messaggio, la Finestra Partner scorre il testo ma mano che viene pronunciato.



La Finestra Partner visualizza solo testo. Non visualizza simboli.

5. Eseguire una selezione in Stile indicatore Finestra Partner:
 - **Specchio** — consente di visualizzare una versione miniaturizzata della Finestra Partner nella Barra superiore.
 - **Icona** — consente di visualizzare un'icona quando la Finestra Partner è accesa. Nascondere l'icona quando la Finestra Partner è spenta.
6. Impostare la commutazione dell'alimentazione Finestra Partner su **On** o **Off**. Quando l'alimentazione Finestra Partner è impostata su Off, non viene visualizzato alcun testo.



È anche possibile utilizzare il pulsante Azioni per regolare la luminosità dello schermo Finestra Partner e per attivare e disattivare tale finestra. Vedere le azioni [8.6.2 Contenuto attivo](#) e [8.7 Azioni pulsante](#).

12.3 Store

Gli elementi aggiuntivi Snap Core First disponibili per l'acquisto in-app vengono mostrati qui. Gli elementi già acquistati non sono elencati.

12.4 Set di simboli

12.4.1 Impostazioni di ricerca

Quando è abilitata Ricerca simboli sicuri, non appariranno "simboli espliciti" nelle ricerche dei simboli, nella finestra messaggio (con simboli), o nella Modalità di ricerca. Quando Ricerca simboli sicuri è disabilitata, le ricerche simboli, i simboli della finestra di messaggio e la Modalità Cerca utilizzeranno tutti i simboli disponibili.

12.4.2 Simboli installati e scaricabili

I Set di simboli installati nella sezione Simboli installati sono set al momento installati e disponibili sul dispositivo.



Per eliminare il Set di simboli installato, selezionare il pulsante **Elimina**, quindi selezionare **Elimina** per confermare.

 I Simboli Snap Core non possono essere eliminati.


I Set di simboli elencati nella sezione Simboli scaricabili sono set gratuiti che al momento non sono installati sul dispositivo. Per scaricare e installare un Set di simboli gratuiti, selezionare **Scarica** accanto al Set di simboli desiderato.


 È necessario avere una connessione Internet attiva per scaricare i Set di simboli.

 Alcuni Set di simboli di terze parti sono disponibili per l'acquisto solo nello Store. Vedere la sezione **12.3 Store**.

12.4.3 Riordina Set di simboli

L'ordine dei risultati di ricerca dei simboli è stabilito dall'ordine dei set di simboli nell'elenco dei Simboli installati. Se, ad esempio, si utilizzano molti simboli con contrasto elevato nel Gruppo di pagine, è possibile spostare il Set di simboli con contrasto elevato nella parte superiore dell'elenco di Simboli installati per dare la priorità ai simboli con contrasto elevato (quando disponibili) nelle ricerche dei simboli.

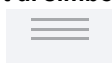1. Selezionare il pulsante  **Modifica**.
2. Selezionare la scheda **Sistema**.
3. Selezionare la categoria **Set di simboli**.
4. Tenere selezionato l'handle  di un set di simboli nell'elenco dei Simboli installati.
5. Trascinare il set di simboli in una nuova posizione nell'elenco.

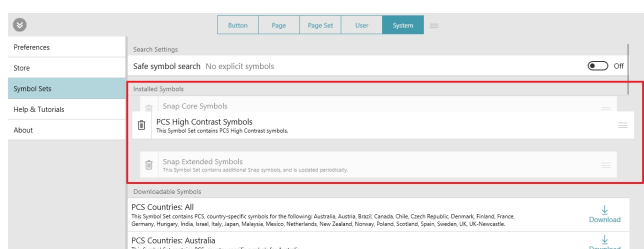

12.5 Guida e tutorial

12.5.1 Video

Guardare i video per avere ulteriori informazioni sull'uso di Snap Core First.

12.5.2 Pathways per Core First



Pathways per Core First è l'app gratuita che insegna i metodi più efficaci per utilizzare Snap Core First per la comunicazione, l'alfabetizzazione, i supporti comportamentali e tanto altro! Seguire i link presenti in questa sezione per saperne di più.

12.5.3 Tour rapido

Riavviare il tour rapido per imparare come utilizzare il software Snap.

12.5.4 Guida esterna

Accesso a Guida rapida, Manuale dell'utente, guide Gruppo di pagine, video aggiuntivi, Guida operazioni base online e Contratto di licenza con l'utente finale.

12.6 Informazioni

Informazioni sulla versione di Snap Core First.

12.6.1 Aggiornamenti software



Solo valido per Windows

L'app Snap Core First si aggiorna automaticamente a intervalli regolari.

Per controllare manualmente la presenza di una nuova versione e scaricare l'aggiornamento:

1. Selezionare il pulsante  **Modifica**.
2. Selezionare la scheda **Sistema**.
3. Selezionare la categoria **Informazioni**.
4. Se è disponibile un aggiornamento, questo sarà visualizzato sotto il numero EAN. Per ottenere la versione aggiornata, selezionare **Installa aggiornamento**.

Copyright ©Tobii AB (publ). Non tutti i prodotti e i servizi sono offerti in tutti i mercati locali. Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. Tutti i marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Supporto per il dispositivo Tobii Dynavox

Informazioni disponibili online

Visitare la pagina del supporto specifica del prodotto per il dispositivo Tobii Dynavox in uso. Tale pagina include informazioni aggiornate sui problemi riscontrati, oltre a suggerimenti utili correlati al prodotto. Le pagine del supporto sono disponibili all'indirizzo: www.TobiiDynavox.com/support-training

Contatta il Consulente per la tua soluzione o il Rivenditore

Per domande o problemi relativi al prodotto, rivolgersi al consulente per la soluzione o al rivenditore autorizzato Tobii Dynavox. Gli operatori conoscono la configurazione personale dei clienti e possono offrire suggerimenti e informazioni mirate. Per i recapiti, visitare la pagina all'indirizzo www.TobiiDynavox.com/contact