


# Snap™ Core First®

## Manual del usuario

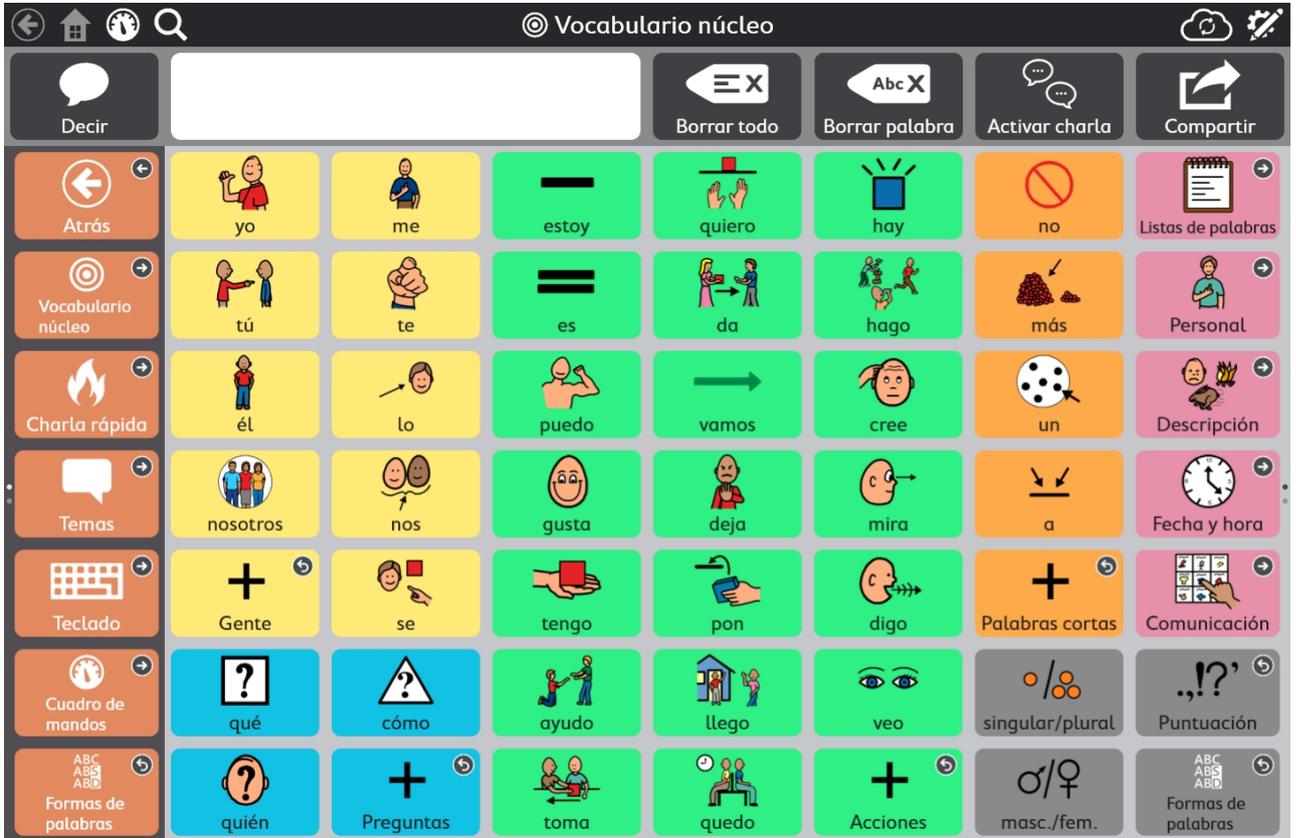

## Manual del usuario Snap™ Core First®

Versión 1.9

09/2019

Todos los derechos reservados.

Copyright © Tobii AB (publ)

Queda prohibido reproducir, almacenar en un sistema de recuperación o transmitir cualquier parte de este documento, de ninguna manera y mediante ningún medio (electrónico, fotocopiado, grabación o cualquier otro método), sin el consentimiento previo por escrito de la editorial.

La protección de los derechos de autor alegada incluye todas las formas y se refiere a todo el material y la información con derechos de autor permitidos por la ley estatutaria o judicial u otorgados por el presente documento, incluidos, pero sin limitarse a, material generado mediante programas de software y mostrado en la pantalla, como visualizaciones de pantalla, menús, etc.

La información contenida en este documento es propiedad de Tobii DynaVox. Queda prohibida cualquier reproducción total o parcial sin previa autorización por escrito de Tobii DynaVox.

Los productos a los que se hace referencia en este documento pueden ser marcas comerciales y/o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios. Ni la editorial ni el autor asumen ninguna responsabilidad sobre estas marcas comerciales.

Aunque se han tomado todas las precauciones necesarias en la redacción de este documento, la editorial y el autor no se responsabilizan de posibles errores u omisiones, o daños derivados del uso de la información contenida en este documento o del uso de programas y códigos fuente que puedan acompañarlo. Bajo ninguna circunstancia se responsabilizará a la editorial ni al autor de posibles pérdidas de ganancias ni de ningún otro tipo de daño comercial causado o que se alegue que haya sido causado directa o indirectamente por este documento.

Contenido sujeto a cambio sin aviso previo.

Visite el sitio web de Tobii DynaVox, [www.TobiiDynaVox.com](http://www.TobiiDynaVox.com) para consultar las versiones actualizadas de este documento.

### Información de contacto:

Tobii Dynavox AB  
Karlsrovägen 2D  
182 53 Danderyd  
Suecia  
+46 8 663 69 90

Tobii Dynavox LLC  
2100 Wharton Street, Suite  
400  
Pittsburgh, PA 15203  
USA  
+1-800-344-1778

# Tabla de contenidos

<b>1</b>	<b>Bienvenido</b>	<b>7</b>
1.1	Requisitos del sistema	7
1.2	Obtener Snap Core First	8
1.2.1	Cómo comprar las funciones de voz	8
<b>2</b>	<b>Recursos y soporte</b>	<b>9</b>
2.1	Tobii Dynavox Pathways para Core First	9
2.2	Recursos y soporte en línea	9
<b>3</b>	<b>Para comenzar</b>	<b>10</b>
3.1	Configurar un nuevo usuario	10
3.2	Cómo restaurar un usuario existente	10
3.3	Cómo elegir un conjunto de páginas	11
3.3.1	Core First	11
3.4	Cómo elegir un tamaño de cuadrícula	13
<b>4</b>	<b>Navegación</b>	<b>14</b>
<b>5</b>	<b>Barra superior</b>	<b>15</b>
5.1	Atrás	15
5.2	Inicio	15
5.3	Cuadro de mandos	15
5.4	Buscar	15
5.5	Indicador de ventana del interlocutor	17
5.6	Datos de seguimiento	17
5.7	Sincronización	17
5.8	Editar	17
<b>6</b>	<b>Barra de mensajes</b>	<b>18</b>
<b>7</b>	<b>Barra de herramientas de Core First</b>	<b>19</b>
7.1	Atrás	19
7.2	Vocabulario núcleo	19
7.3	Charla rápida	19
7.4	Temas	20
7.4.1	Palabras del tema	20
7.4.2	Soportes	20
7.5	Teclado	22
7.6	Cuadro de mandos	22
7.7	Formas de palabras	22
7.8	Navegación facilitada	22
7.9	abc (solo en alemán)	23
<b>8</b>	<b>Edición</b>	<b>24</b>
8.1	Panel de edición	24
8.2	Agregar un botón	24
8.3	Mover un botón	24
8.4	Cambiar el tamaño de un botón	25
8.5	Herramientas de edición de botones	27
8.5.1	Deshacer y rehacer	27
8.5.2	Copiar y pegar un botón	27
8.5.3	Seleccionar todos los botones	28
8.5.4	Seleccionar varios botones	28

8.5.5	Ocultar/Mostrar un botón .....	29
8.5.6	Eliminar un botón .....	29
8.5.7	Expandir/Contraer nombres de herramientas de edición .....	29
8.6	Contenido del botón .....	30
8.6.1	Etiqueta del botón .....	30
8.6.2	Contenido activo .....	30
8.6.3	Mensaje del botón.....	32
8.6.4	Señal acústica del botón.....	33
8.6.5	Imagen del botón .....	33
8.6.6	Tipo de botón.....	34
8.7	Acciones de botón.....	35
8.7.1	Eliminar una acción.....	37
8.7.2	Reordenar las acciones del botón .....	37
8.7.3	AccessIT .....	38
8.8	Estilo del botón .....	39
8.8.1	Fondo del botón.....	40
8.8.2	Borde del botón .....	40
8.8.3	Etiqueta del botón .....	40
8.9	Enlace a la Página/Crear página nueva .....	42
8.9.1	Crear un botón de enlace en un espacio vacío .....	42
8.9.2	Crear un enlace desde un botón existente .....	42
8.9.3	Enlace a una Nueva página/Crear página nueva .....	43
8.9.4	Enlace a una página existente .....	43
8.9.5	Enlace a una nueva copia de una página existente.....	43
8.9.6	Importar y vincular a una página.....	43
8.9.7	Visitar página.....	44
8.10	Reglas de idioma del botón .....	46
8.11	Controles remotos.....	46
8.12	Editar página .....	47
8.12.1	Nombre de la página .....	47
8.12.2	Símbolo de la página.....	48
8.12.3	Reglas de idioma de la página .....	48
8.12.4	Tamaño de la cuadrícula de la página.....	49
8.12.5	Color de fondo de la página .....	50
8.12.6	Mostrar/ocultar barra de mensajes .....	50
8.12.7	Eliminar página.....	50
8.12.8	Importar/Exportar páginas .....	51
8.13	Editar la barra de mensajes .....	51
8.14	Editar la barra de herramientas .....	52
9	Configuración del conjunto de páginas .....	53
9.1	Conjunto de páginas .....	53
9.1.1	Seleccionar conjunto de páginas.....	53
9.1.2	Crear nuevo conjunto de páginas .....	53
9.1.3	Cambiar el nombre del conjunto de páginas y editar la descripción .....	54
9.1.4	Eliminar conjunto de páginas .....	54
9.1.5	Configurar página de inicio .....	54
9.1.6	Configurar página de Teclado .....	54
9.2	Tamaño de la cuadrícula.....	55
9.3	Estilo del conjunto de páginas .....	55
9.3.1	Tipo de letra de etiquetas de botones del conjunto de páginas.....	55

9.3.2	Tamaño de letra de etiquetas de botones del conjunto de páginas .....	55
9.3.3	Etiquetas de botones del conjunto de páginas en negrita .....	56
9.3.4	Diseño de botones del conjunto de páginas .....	56
9.3.5	Visualización de enlaces del conjunto de páginas.....	56
9.3.6	Margen de la cuadrícula del conjunto de páginas .....	57
9.3.7	Colores de fondo predeterminados del conjunto de páginas.....	57
9.3.8	Tamaño de letra de la ventana de mensajes del conjunto de páginas.....	57
9.3.9	Color del texto de la ventana de mensajes del conjunto de páginas .....	57
9.4	Preferencias del conjunto de páginas .....	57
9.5	Botones adaptables .....	58
9.6	Acerca del conjunto de páginas.....	58
9.6.1	Configuración del desarrollador de contenido del conjunto de páginas .....	58
<b>10</b>	<b>Compartir y guardar.....</b>	<b>60</b>
10.1	Usuarios.....	60
10.1.1	Realizar una copia de seguridad de un usuario .....	60
10.1.2	Restaurar un usuario.....	60
10.2	Conjuntos de páginas.....	60
10.2.1	Cómo importar un conjunto de páginas.....	61
10.2.2	Guardar una copia de un conjunto de páginas.....	61
10.2.3	Compartir una copia de un conjunto de páginas (a través de myTobiiDynavox) .....	62
10.2.4	Sincronizar un conjunto de páginas .....	62
10.3	Paquetes de páginas.....	65
10.3.1	Exportar paquete de páginas .....	65
10.3.2	Importar paquete de páginas .....	66
<b>11</b>	<b>Configuración de usuario.....</b>	<b>68</b>
11.1	Cambiar usuario .....	68
11.2	Cambiar tamaños de cuadrícula en todas las páginas.....	68
11.3	Realizar una copia de seguridad de un usuario.....	68
11.4	Restaurar un usuario.....	69
11.5	Editar/cambiar el nombre de un usuario .....	70
11.6	Eliminar un usuario .....	70
11.7	Inicio de sesión en la cuenta myTobiiDynavox .....	71
11.8	Voz .....	71
11.8.1	Voz hablante .....	71
11.8.2	Velocidad de voz.....	72
11.8.3	Excepciones de pronunciación.....	72
11.9	Dispositivo de salida de voz .....	73
11.10	Voces específicas de diferentes idiomas .....	73
11.11	Preferencias del usuario .....	74
11.11.1	Configuración de voz.....	74
11.11.2	Configuración de la ventana de mensajes.....	74
11.11.3	Configuración de la predicción .....	75
11.11.4	Configuración de sincronización.....	75
11.12	Método de acceso.....	75
11.12.1	Configurar el método de acceso.....	76
11.12.2	Opciones táctiles .....	76
11.12.3	Opciones del método Pulsar para seleccionar .....	77
11.12.4	Opciones del método Soltar para seleccionar.....	78
11.12.5	Opciones del método Tiempo de permanencia del mouse.....	79

11.12.6	Opciones del método Gaze Interaction .....	80
11.12.7	Opciones de escaneo.....	81
11.13	Datos de seguimiento.....	84
11.13.1	Seguimiento del uso del botón .....	84
11.13.2	Mostrar botón en la barra superior.....	85
11.13.3	Mostrar contador de usos del botón.....	85
11.13.4	Mostrar contador de modelado.....	86
11.13.5	Administración de datos .....	87
<b>12</b>	<b>Configuración del sistema .....</b>	<b>88</b>
12.1	Preferencias .....	88
12.1.1	Código de acceso .....	88
12.1.2	Configuración de pantalla (solo Windows).....	88
12.1.3	Idioma del Modo de edición .....	88
12.2	Dispositivo.....	89
12.2.1	Configuración de la ventana del interlocutor .....	89
12.3	Tienda.....	89
12.4	Conjuntos de símbolos .....	89
12.4.1	Configuración de búsqueda .....	89
12.4.2	Símbolos instalados y descargables.....	89
12.4.3	Cambiar el orden de los conjuntos de símbolos.....	90
12.5	Ayuda y tutoriales.....	90
12.5.1	Videos.....	90
12.5.2	Pathways para Core First .....	90
12.5.3	Recorrido rápido .....	91
12.5.4	Ayuda externa .....	91
12.6	Acerca de.....	91
12.6.1	Actualizaciones de software.....	91

# 1 Bienvenido

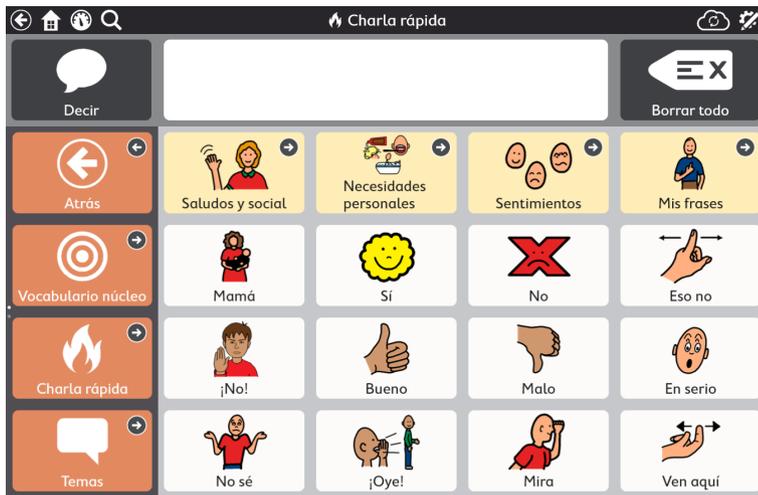


Figura 1.1 Snap + Core First — Charla rápida

Snap + Core First de Tobii Dynavox es lo último en software de comunicación basado en símbolos (pictogramas) para los comunicadores basados en símbolos. Está diseñado para ser la solución más fácil de usar, más intuitiva y sistemáticamente organizada del mercado, tanto para el usuario como para el interlocutor. Snap + Core First es la solución ideal para personas con autismo, parálisis cerebral, síndrome de Down y discapacidades intelectuales. Con Snap, proporcionamos la mejor experiencia de comunicación basada en símbolos combinada con los componentes necesarios para que un padre, maestro o terapeuta trabaje junto con los usuarios para ayudarlos a convertirse en comunicadores exitosos, aprender el lenguaje y alfabetizarse. Nuestro enfoque abarca 3 pilares clave para el éxito de la comunicación: crecimiento, participación y alfabetización.

Snap + Core First no es solo otro software de CAA, sino más bien un programa integral para que las personas logren alfabetizarse y adquieran una independencia transformadora, independientemente de su punto de partida. En el corazón de Snap se encuentra Core First, un conjunto de páginas centrado en la provisión sistemática de Vocabulario núcleo, Temas, Charla rápida, Apoyos de comportamiento, Listas de palabras y Teclados de Tobii Dynavox Core First, que tiene sus raíces en las investigaciones de la Universidad de Carolina del Norte, en Chapel Hill, aprovecha el aprendizaje motor al introducir, de forma metódica y útil, vocabulario nuevo, lo que permite a los usuarios desplazarse hacia arriba o hacia abajo y siempre saber dónde encontrar el vocabulario. Estas características permiten a los usuarios iniciarse en el camino de la comunicación, mientras crecen y avanzan hacia la alfabetización y la independencia.

## 1.1 Requisitos del sistema

Tabla 1.1 Windows OS

	Sistema operativo	Arquitectura	Memoria	Táctil	Cámara
<b>Mínimo</b>	Windows 10 versión 1607	x86	2 GB	No se requiere	No se requiere
<b>Recomendado</b>	Windows 10 versión 1607	x86	4 GB	Táctil integrado	Cámara integrada

Tabla 1.2 iOS

	Sistema operativo	Dispositivo	Memoria	Táctil	Cámara
<b>Mínimo</b>	iOS 10	iPad Air 2 iPad Mini 4	2 GB	Táctil integrado	No se requiere
<b>Recomendado</b>	iOS 11	iPad 5. <sup>a</sup> generación	4 GB	Táctil integrado	Cámara integrada

## 1.2 Obtener Snap Core First

Snap + Core First está disponible a través de Microsoft Store para dispositivos con Windows y a través de Apple App Store para iOS. Elija Snap + Core First Full para comprar todas las funciones de Snap + Core First por anticipado. Con Snap + Core First Free, todas las funciones menos las de voz están disponibles de forma gratuita, incluido el contenido de Core First, la creación y edición de páginas, la creación de usuarios y copias de seguridad, las restauraciones y sincronizaciones; sin embargo, las funciones de voz son limitadas. Se puede acceder a todas las funciones de voz a través de una compra en la aplicación.

### Funciones de voz desactivadas en las versiones gratuitas de la aplicación

- Voz de la ventana de mensajes
- Cualquier salida de voz o grabación generada por la acción de un botón
- Cualquier salida de voz o grabación generada por un apoyo de comportamiento
- Señales acústicas

### Funciones de voz disponibles en las versiones gratuitas de la aplicación

- Grabación de audio (en Modo de edición)
- Vista previa de grabación de audio (en Modo de edición)
- Vista previa de voz
- Vista previa de excepción de pronunciación (en Modo de edición)

### 1.2.1 Cómo comprar las funciones de voz

Desbloquee las funciones de voz de Snap + Core First de forma rápida y segura mediante una única compra en la aplicación.

1. Inicie Snap + Core First.
2. Seleccione el botón Voz desactivada en la barra superior.
3. Confirme la compra en la ventana emergente.



## 2 Recursos y soporte

Tobii Dynavox ofrece diversos recursos gratuitos para apoyar y complementar su experiencia con Snap + Core First. ¡No se pierda estas herramientas que le ayudarán a aprovechar al máximo su software Tobii Dynavox!

### 2.1 Tobii Dynavox Pathways para Core First



Pathways para Core First es un recurso gratuito que le ayuda a implementar los productos Tobii Dynavox de la manera más efectiva y eficiente. ¡Aprenderá las técnicas basadas en investigaciones que maximizan la participación, la facilidad de uso y mucho más!

Pathways para Core First lo acompaña cuando comienza a usar Snap + Core First y estimula el crecimiento en la participación, el lenguaje y la alfabetización. Pathways para Core First:

- Proporciona una ruta clara y personalizada para dar los primeros pasos.
- Fomenta el crecimiento en personas de cualquier edad o con diferentes niveles de habilidades.
- Le enseña a desarrollar habilidades en diferentes áreas, que incluyen el uso de vocabulario núcleo, la ampliación del vocabulario, el uso de Snap + Core First en actividades cotidianas, y mucho más.
- Le muestra cómo Snap + Core First puede ayudarlo con las habilidades y situaciones sociales, ya sea para manejar las interrupciones en la comunicación, desarrollar habilidades operativas y de navegación, o estimular un comportamiento positivo.
- Desarrolla las habilidades de comunicación con los mejores consejos.
- Apoya la personalización continua de Core First.

La versión completa de Pathways para Core First está disponible como una aplicación gratuita para Windows y iOS. Pathways para Core First Lite está disponible en línea a través de su navegador web. Visite [www.tobiidynavox.com/learn/pathways](http://www.tobiidynavox.com/learn/pathways) para obtener más información.

### 2.2 Recursos y soporte en línea

myTobiiDynavox es su sitio web de almacenamiento personal en línea y un portal de intercambio. Cargue los archivos de copia de seguridad de su usuario en myTobiiDynavox para almacenarlos e intercambiarlos con todo su equipo de apoyo a la comunicación.

Vaya a [myTobiiDynavox.com](http://myTobiiDynavox.com) para registrarse y crear una cuenta gratuita.



mytobiidynavox

Visite [tobiidynavox.com/support-training/](http://tobiidynavox.com/support-training/) para obtener ayuda, entrenamiento y otros recursos, incluidos:

- Respuestas a preguntas frecuentes
- Videos de entrenamiento
- Descargas
- Seminarios web grabados
- Soporte en vivo

## 3 Para comenzar

Cuando ejecute Snap + Core First por primera vez, se le harán algunas preguntas que le ayudarán a personalizar el software según sus necesidades. Puede cambiar cualquiera de estas opciones de configuración más adelante si lo desea.

### 3.1 Configurar un nuevo usuario

¡Selecciona **Comenzar** y haremos la configuración en menos de un minuto!



### 3.2 Cómo restaurar un usuario existente

Utilice esta opción si ya tiene un archivo de copia de seguridad del usuario que desea restaurar.

#### Restaurar una copia de seguridad de usuario de myTobiiDynavox

1. Seleccione **Restaurar usuario existente**.
2. Si actualmente no ha iniciado sesión en myTobiiDynavox, ingrese su correo electrónico y contraseña, luego seleccione **Siguiente** .

3. Seleccione un archivo de copia de seguridad de usuario de la lista y, a continuación, seleccione **Siguiente** .

#### Restaurar una copia de seguridad de usuario de un archivo local

1. Seleccione **Restaurar usuario existente**.
2. Seleccione **Restaurar desde un archivo local**.
3. Busque y seleccione el archivo de copia de seguridad del usuario, luego seleccione **Abrir**.

## 3.3 Cómo elegir un conjunto de páginas

### 3.3.1 Core First

Core First es el principal conjunto de páginas disponible en el software Snap. Está diseñado para maximizar la participación, la alfabetización y el crecimiento a través de una variedad de herramientas de comunicación que se utilizan conjuntamente de una manera fluida y predecible.



Figura 3.1 Conjunto de páginas de Core First

La característica distintiva de Core First es nuestra estrategia de vocabulario núcleo. Las investigaciones, la experiencia clínica y las pruebas de los usuarios revelan las siguientes características:

- Selección de palabras para un uso máximo en todos los ambientes.
- Ubicación de palabras e interfaz de usuario.
- Orden en la introducción de palabras.
- Ubicación estable de las palabras a medida que se añaden otras sistémicamente.
- Eficiencia de navegación.
- Apoyos que enseñan a los usuarios el significado de las palabras y cómo combinarlas para crear mensajes únicos.

Las herramientas de comunicación adicionales de Core First son las siguientes:

- Charla rápida: mensajes rápidos y predecibles que se pueden usar solos o en combinación.
- Teclado: introduzca letras en la ventana de mensajes para crear o modificar palabras.
- Listas de palabras: organizadas por categoría para una fácil referencia.
- Temas: apoyan las interacciones en ambientes específicos o en torno a determinados temas.
- Apoyos: los apoyos de comportamiento ayudan en la comunicación social.
- Cuadro de mandos: controles remotos, controles de volumen y mucho más al alcance de la mano.

El conjunto de páginas de Core First se diseñó para ser el estándar de excelencia en contenido de comunicación aumentativa y alternativa (CAA), ya que brinda a los usuarios la experiencia más accesible para encontrar contenido de forma rápida y la posibilidad de tener la máxima capacidad para crear mensajes únicos y específicos. Core First permite a sus usuarios interactuar en conversaciones rápidas y en tiempo real acerca de los temas que son más importantes para ellos. También les da la libertad de crear mensajes novedosos que serían difíciles de predecir de antemano. Al desplazarse por las herramientas provistas, los comunicadores pueden permanecer activos en la situación en la que están participando y mantener una interacción con los interlocutores.

El desarrollo de la lectoescritura es una habilidad esencial que debe ser parte de una solución de comunicación. Mediante el uso de teclados, enlaces sencillos en el dispositivo a programas probados en investigaciones y contenido diseñado para apoyar las interacciones de comunicación en torno a experiencias de lectura, Core First apoya el desarrollo de la lectoescritura de todos sus usuarios.

Por último, Core First no fue diseñado como un sistema único o universal. La continuidad entre los tamaños de cuadrícula es un principio rector principal. A medida que los comunicadores desarrollan habilidades y requieren opciones adicionales para acompañar la complejidad del lenguaje, estas nuevas opciones se agregan a Core First sin problemas y mantienen el contenido en ubicaciones predecibles.

### 3.3.1.1 Conjunto de páginas de texto

Este conjunto de páginas está diseñado para usuarios que no dependen de símbolos para comunicarse. El conjunto de páginas de texto se recomienda para comunicadores con fuertes habilidades de lectura y composición.



El conjunto de páginas de texto está diseñado para usarse con un tamaño de cuadrícula de 7x10.

### 3.3.1.2 Versión del conjunto de páginas

El asistente de configuración muestra automáticamente los Conjuntos de páginas que coincidan con la configuración de idioma de su dispositivo, si está disponible en Snap. Seleccione **Cambiar idioma** para ver los Conjuntos de páginas disponibles en otros idiomas.

- Chino (simplificado)
- Danés (Dinamarca)
- Holandés (Holanda)
- Inglés (Canadá)
- Inglés (Reino Unido)
- Inglés (EE. UU.)
- Francés (Francia)
- Francés (Canadá)
- Alemán (Alemania)
- Noruego (Noruega)
- Portugués (Brasil)
- Español (ES)
- Español (América Latina)
- Español (EE. UU.)
- Sueco (Suecia)
- ¡Pronto habrá más idiomas!

### 3.4 Cómo elegir un tamaño de cuadrícula

La elección del tamaño de la cuadrícula dependerá de varios factores: la precisión de la selección es primordial, seguida de las limitaciones visuales o de atención. Si hay problemas con la velocidad o la precisión de la selección, comience con una cuadrícula más pequeña, de modo que el usuario tenga botones más grandes para trabajar. Es fácil cambiar el tamaño de la cuadrícula en la configuración del conjunto de páginas, por lo que no debe preocuparse por encontrar el tamaño de cuadrícula ideal en su primer intento. Puede aumentar o disminuir el tamaño de la cuadrícula en función de los cambios de idioma o las capacidades físicas de la persona.

 Si desea mostrar la barra de mensajes o la barra de herramientas, debe elegir un tamaño de cuadrícula con al menos 3 filas y 3 columnas.

Tabla 3.1 Ejemplos de tamaños de cuadrícula (no se incluyen todos los tamaños)



2x3




3x4



6x6

# 4 Navegación

¡Hay mucho por descubrir en el conjunto de páginas de Core First! Siga leyendo para aprender a desplazarse por el contenido en Snap y encontrar todo lo que necesita para comunicarse.
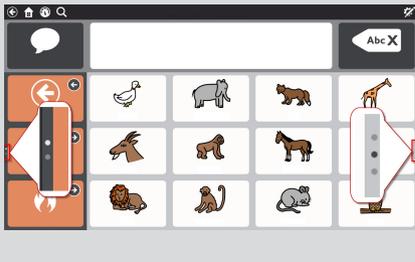
<p><b>Desplazamiento</b></p>	<p>Puede desplazarse hacia arriba y hacia abajo tanto en la barra de herramientas como en la página. Los indicadores de página (puntos a la izquierda de la barra de herramientas y a la derecha de la página) le muestran cuándo hay más contenido disponible arriba o abajo.</p> <p> Dependiendo de la configuración y el método de acceso, se desplazará al deslizar el dedo por la pantalla táctil o al seleccionar un botón de navegación. Consulte la sección 11.12.2 <i>Opciones táctiles</i>.</p>	
<p><b>Botón de enlace</b></p>	<p>Los botones de enlace lo llevan a otra página. Consulte la sección 8.9 <i>Enlace a la Página/Crear página nueva</i>.</p>	
<p><b>Botón de visita</b></p>	<p>Los botones de visita lo llevan a otra página, le permiten hacer una selección en esa página y luego volver a la página anterior automáticamente. Consulte la sección 8.9.7 <i>Visitar página</i>.</p>	
<p><b>Botón de retroceso</b></p>	<p>El botón de retroceso funciona como el botón de retroceso en un navegador de Internet. Seleccione el botón de retroceso una vez para volver a la página anterior o varias veces para continuar retrocediendo por el historial de la página.</p>	
<p><b>Barra superior</b></p>	<p>Los botones en el lado izquierdo de la barra superior incluyen un botón de retroceso, un botón de inicio, un botón del cuadro de mandos y un botón de búsqueda. Consulte la sección 5 <i>Barra superior</i>.</p>	

# 5 Barra superior

## 5.1 Atrás

El botón de retroceso  le permite volver a la página visitada anteriormente.

## 5.2 Inicio

El botón de inicio  lo lleva a su página de inicio (la primera página que ve cuando inicia Snap Core First). Este botón de inicio es un acceso directo que puede usar para volver a la página de inicio desde cualquier parte del software. Para cambiar su página de inicio, consulte la sección 9.1.5 *Configurar página de inicio*.

## 5.3 Cuadro de mandos


Use el botón del Cuadro de mandos  para acceder rápidamente a su página del cuadro de mandos. Cuadro de mandos es una página de fácil acceso a los botones que se usan con frecuencia, especialmente a los que no son de vocabulario, como el control de volumen o los controles remotos.

## 5.4 Buscar

 Solo se puede acceder a la búsqueda con el método de acceso táctil.

La herramienta de búsqueda  le muestra dónde encontrar cualquier palabra en Snap Core First. Simplemente, introduzca un término de búsqueda y siga las pistas visuales. Las pistas visuales lo llevan a la palabra clave para que pueda volver a encontrar la palabra más tarde por su cuenta.

1. Seleccione la herramienta de **Búsqueda**  en la barra superior.
2. Introduzca un término de búsqueda.

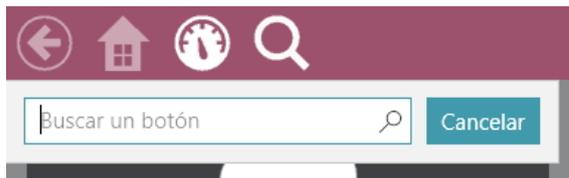

3. Seleccione el botón que está buscando en los resultados de búsqueda.



4. Seleccione el botón resaltado en cada página hasta que llegue al botón de destino.



Es posible que tenga que desplazarse para ver el siguiente botón, así que esté atento a las flechas que le indican a dónde ir.



Preste atención a cada botón resaltado para poder recordar la ruta por sí mismo la próxima vez.

Puede cancelar la búsqueda en cualquier momento al seleccionar cualquier punto fuera de la ruta resaltada.


## 5.5 Indicador de ventana del interlocutor



El indicador de ventana del interlocutor solo está disponible en los dispositivos I-13 e I-16 de Tobii Dynavox.

El indicador de ventana del interlocutor le brinda información sobre el estado de la ventana del interlocutor en la parte posterior de su dispositivo.

**Estilo espejo:** muestra el texto actualmente en la ventana del interlocutor.

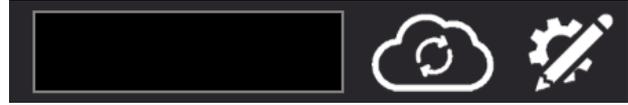

**Estilo de ícono:** el ícono indica que la ventana del interlocutor está activada. Cuando la ventana del interlocutor está desactivada, el ícono no está presente.



Para cambiar el estilo del indicador de ventana del interlocutor, consulte la sección [12.2.1 Configuración de la ventana del interlocutor](#).

## 5.6 Datos de seguimiento



Solo se puede acceder a datos de seguimiento al tocar o al hacer clic con el mouse.



Si se habilita, el botón Datos de seguimiento  da acceso rápido a las siguientes configuraciones: Modo de modelado, muestra el contador de usos del botón, muestra el contado de modelados y administra datos. Para obtener más información sobre datos de seguimiento, consulte la sección [11.13 Datos de seguimiento](#).

## 5.7 Sincronización



Solo se puede acceder a la sincronización al tocar o al hacer clic con el mouse.



El botón de sincronización  se usa para comenzar a compartir un conjunto de páginas para sincronización o para actualizar un conjunto de páginas que ya está compartido para su sincronización. Para obtener más información sobre la sincronización, consulte la sección [10.2.4 Sincronizar un conjunto de páginas](#).

Para ocultar el botón de sincronización en el Modo de uso, consulte la sección [11.11.4 Configuración de sincronización](#).

## 5.8 Editar



Solo se puede acceder a la edición al tocar o al hacer clic con el mouse.



Seleccione el botón Editar  para realizar cambios en su conjunto de páginas y acceder a Configuración.

Para obtener más información, consulte la sección [8 Edición](#).

## 6 Barra de mensajes

La barra de mensajes muestra el texto del mensaje compuesto y los botones para compartirlo con todo el mundo.



Si desea mostrar la barra de mensajes, debe elegir un tamaño de cuadrícula con, al menos, 3 filas y 3 columnas.



- **Decir:** seleccione este botón para reproducir el contenido actual de la ventana de mensajes.
- **Ventana de mensajes:** muestra el texto que desea reproducir o enviar como mensaje. También puede mostrar símbolos. Puede escribir directamente en la ventana de mensajes desde una página de Teclado o enviar texto desde un botón.  
Para configurar la ventana de mensajes, consulte la sección *11.11.2 Configuración de la ventana de mensajes, página 74*.
- **Borrar todo:** borre el contenido de la ventana de mensajes.
- **Borrar palabra:** elimine la última palabra en la ventana de mensajes.
- **Charla:** active y desactive la charla. Al habilitar Charla, el contenido actual de la ventana de mensajes se almacena en la memoria caché y luego se borra la ventana de mensajes. Mientras está en la charla, puede insertar contenido nuevo en la ventana de mensajes y hablar. Cuando la charla está desactivada, el contenido de la ventana de mensajes en la memoria caché se restaura para que pueda continuar donde lo dejó.
- **Copiar en botón:** copie el texto en la ventana de mensajes y luego agréguelo a un botón. ¡Esta es una forma accesible para el usuario de editar botones sobre la marcha!
- **Compartir:** comparta los contenidos actuales de la ventana de mensajes por correo electrónico, mensajes de texto u otra aplicación externa. (Solamente disponible en dispositivos compatibles. Solo con el método de acceso táctil).

Para editar la barra de mensajes, consulte *8.13 Editar la barra de mensajes*.

# 7 Barra de herramientas de Core First

Para aprender a editar la barra de herramientas, consulte [8.14 Editar la barra de herramientas](#).

## 7.1 Atrás



**Figura 7.1** Botón de retroceso — Barra de herramientas de Core First

El botón de retroceso funciona como el botón de retroceso en un navegador de Internet. Se usa para volver a la página anterior.

## 7.2 Vocabulario núcleo



**Figura 7.2** Botón de Vocabulario núcleo — Barra de herramientas de Core First

Este botón abre la página Vocabulario núcleo. La característica distintiva de Core First es nuestra estrategia de vocabulario núcleo, que se desarrolló a partir de investigaciones, experiencia clínica y pruebas de usuarios. Las características clave de la página Vocabulario núcleo incluyen:

- Selección de palabras para un uso máximo en todos los ambientes.
- Colocación de palabras.
- Orden en la introducción de palabras.
- Ubicación estable de las palabras a medida que se añaden otras sistémicamente.
- Eficiencia de navegación.
- Apoyos que enseñan a los usuarios el significado de las palabras y cómo combinarlas para crear mensajes únicos.

## 7.3 Charla rápida



**Figura 7.3** Botón de Charla rápida — Barra de herramientas de Core First

Charla rápida son mensajes rápidos y predecibles que se pueden usar solos o en combinación. Son unas pocas palabras que usan para mantener el curso de la conversación, llamar la atención o hacer comentarios. También se incluyen mensajes de uso común que se enfocan en necesidades personales, saludos, interacciones sociales, sentimientos, preguntas y aclaraciones. Charla rápida comunica de inmediato y no inserta texto en la ventana de mensajes.

## 7.4 Temas




**Figura 7.4** Botón de temas — Barra de herramientas de Core First

Los temas apoyan las interacciones en ambientes específicos o en torno a determinados asuntos. Seleccione un tema en la página Temas para ver palabras y frases relevantes. ¡Personalice su conjunto de páginas añadiendo sus propios temas!

### 7.4.1 Palabras del tema

Estas páginas contienen palabras de uso común sobre el tema seleccionado.

### 7.4.2 Soportes

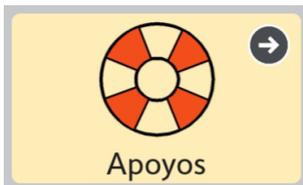

Los apoyos ayudan a los usuarios con el comportamiento y la comunicación social.

#### 7.4.2.1 Primero-Luego



**Figura 7.5** Apoyo de secuencia "Primero-Luego"

Este apoyo muestra una secuencia de eventos de dos pasos que refuerza la relación de causa y efecto o los pasos lógicos.

### 7.4.2.2 Minihorario



Figura 7.6 Apoyo de minihorario

El minihorario muestra una secuencia de eventos de varios pasos que refuerza el concepto de causa y efecto o una serie de pasos lógicos.

### 7.4.2.3 Guion



Figura 7.7 Apoyo de guion

Un guion proporciona frases hechas que se usan habitualmente en torno al tema en cuestión. Los guiones se usan para crear narrativas sociales y ayudar a modelar una conversación apropiada.

### 7.4.2.4 Temporizador visual



Figura 7.8 Barra superior con temporizador visual

El temporizador visual muestra un reloj de cuenta regresiva y una barra animada de color en la barra superior. El reloj muestra la cuenta regresiva de la cantidad de tiempo especificada y la barra de color retrocede a medida que disminuye el tiempo restante. Cuando la opción Alarma está activada, se escucha un sonido cuando se acaba el tiempo.

Para cancelar el temporizador visual, seleccione la **X** en el lado derecho de la barra superior.



Para cambiar la preferencia de tiempo de la cuenta regresiva o la alarma, edite el botón y seleccione la acción Temporizador visual.

## 7.5 Teclado



**Figura 7.9** Botón de teclado — Barra de herramientas de Core First

La página de Teclado proporciona botones de un solo carácter que se comportan como las teclas de un teclado. Utilice esta página para escribir palabras que actualmente no están disponibles en su conjunto de páginas o para agregar signos de puntuación. Para configurar la página de Teclado que desee, consulte [9.1.6 Configurar página de Teclado](#).

## 7.6 Cuadro de mandos



**Figura 7.10** Botón del Cuadro de mandos — Barra de herramientas de Core First

Cuadro de mandos es una página de fácil acceso a los botones que se usan con frecuencia, especialmente a los que no son de vocabulario, como el control de volumen o los controles remotos.

## 7.7 Formas de palabras



**Figura 7.11** Botón de formas de palabras — Barra de herramientas de Core First

La página de formas de palabras muestra diferentes formas (tiempo, número, etc.) de la última palabra en la ventana de mensajes. Seleccione la forma de palabra que desee para actualizar la palabra en la ventana de mensajes.


## 7.8 Navegación facilitada



**Figura 7.12** Navegación facilitada — Barra de herramientas de Core First

La página de Navegación facilitada es la página principal para los primeros tamaños de cuadrícula emergentes (<3x3). El botón de Navegación facilitada de la barra de herramientas hace que la página esté disponible para todos los tamaños de cuadrícula.

## 7.9 abc (solo en alemán)

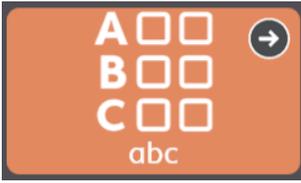

Este botón abre el área de vocabulario ABC conocida como “LiterAACy”. Encontrará más de 3600 palabras de vocabulario núcleo y marginal, ordenadas por la primera y la segunda letra.

- El área ABC refuerza el aprendizaje y el uso de las habilidades de lectoescritura.
- La retroalimentación fonética se reproduce cuando se selecciona una letra.
- Hay dos versiones de esta función, una con letras mayúsculas y otra con letras minúsculas. El botón abc en minúsculas es el predeterminado. Para usar letras mayúsculas, muestre el botón ABC (mayúsculas) en la barra de herramientas y oculte el botón abc (minúsculas). Consulte la sección 8.5.5 *Ocultar/Mostrar un botón*.

# 8 Edición

Para realizar cambios en un botón, una página, o en los ajustes o usuarios, el software debe estar en Modo de edición.

Puede ingresar al Modo de edición en cualquier momento al seleccionar el botón **Editar** .

-  Solo se puede acceder al botón Editar y al Modo de edición con el método de acceso táctil.
- Mientras está en el Modo de edición, puede hacer doble clic en la mayoría de los botones de la página para ver cómo se comportan en el Modo de uso.

## 8.1 Panel de edición

El panel de edición contiene todas las herramientas y pestañas para realizar cambios en el conjunto de páginas y el software.



Figura 8.1 Panel de edición (se muestra ampliado)

Seleccione  para ampliar el panel de edición.

Cambie el tamaño del panel de edición a un tamaño personalizado arrastrando  hacia arriba o hacia abajo mientras se amplía el panel.

## 8.2 Agregar un botón

1. Seleccione el botón **Editar** .
2. Seleccione  en cualquier espacio vacío de la página para crear un nuevo botón.




Figura 8.2 Espacio vacío

## 8.3 Mover un botón


1. Seleccione el botón **Editar** .

2. Seleccione y mantenga presionado el botón que desea mover y arrástrelo a la ubicación deseada. Hay dos formas de colocar el botón en la página:

- Intercambiar: cuando arrastre el botón directamente encima de otro botón, los dos botones intercambiarán posiciones en la página. El contorno negro alrededor de la ubicación elegida en la cuadrícula indica un intercambio.

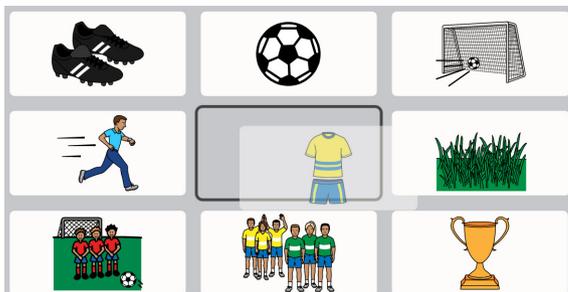

- Insertar: cuando arrastre el botón seleccionado entre dos botones, los botones ubicados a la derecha y abajo se moverán para crear un espacio para que coloque el botón. Los botones mantendrán la secuencia de izquierda a derecha, de arriba abajo en la página. La ubicación del botón Insertar se indica mediante una barra vertical.

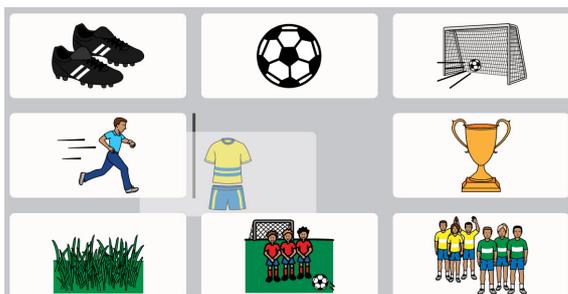

Puede insertar un botón horizontalmente (como se muestra arriba) o verticalmente.



Cuando mueve un botón, solo se aplica al tamaño de cuadrícula actual.

## 8.4 Cambiar el tamaño de un botón

Puede cambiar el tamaño de un botón para que ocupe tantas celdas de cuadrícula en una sección de página o de barra de herramientas como desee.




1. Seleccione el botón **Editar**.
2. Seleccione un botón en la página o en la barra de herramientas.




El cambio de tamaño de los botones solo está disponible cuando se selecciona un solo botón.

3. Seleccione y mantenga presionado uno de los puntos azules en las esquinas del botón seleccionado, y luego arrastre para cambiar el tamaño del botón.

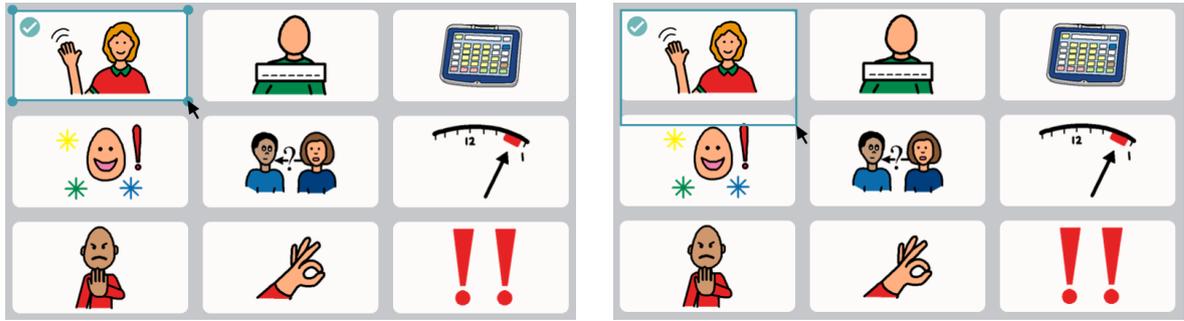

**i** Los botones redimensionados no pueden abarcar las secciones de la página o de la barra de herramientas.

- Espera a que el botón llene completamente las celdas hasta que tenga el tamaño deseado y luego suelte la selección.

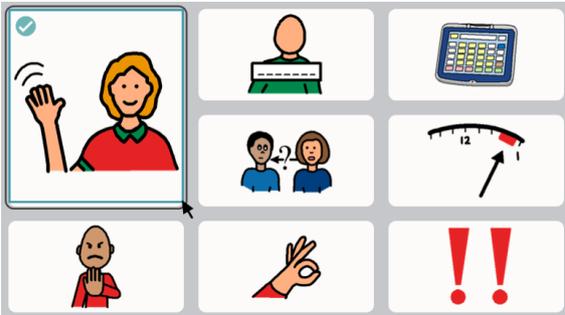

**i** No puede cambiar el tamaño de un botón ni moverlo a una celda ocupada por un botón de navegación (desplazamiento).

Cuando se agranda un botón, los botones que se están desplazando se moverán a las celdas vacías más cercanas.



Quando cambia el tamaño de un botón, solo se aplica al tamaño de cuadrícula actual.

## 8.5 Herramientas de edición de botones

Las herramientas que se encuentran en el lado derecho de la ventana de la aplicación le ayudan a editar los botones actualmente seleccionados.



**Figura 8.3** Herramientas de edición de botones: (de arriba a abajo) Deshacer, Rehacer, Copiar, Pegar, Seleccionar todo, Selección múltiple, Ocultar/Mostrar, Eliminar, Expandir/Contraer nombres de herramientas

### 8.5.1 Deshacer y rehacer

La herramienta Deshacer  le permite revertir hasta las últimas 100 ediciones realizadas en el usuario o conjunto de páginas actuales. La herramienta Rehacer  restablecerá el último cambio revertido con la herramienta Deshacer.

 La pila Deshacer se restablece al cargar un usuario diferente, un conjunto de páginas diferente y al cerrar el software Snap.

### 8.5.2 Copiar y pegar un botón

1. Seleccione el botón **Editar** .
2. Seleccione un botón.
3. Seleccione la herramienta **Copiar** . Observe que la herramienta Pegar muestra la cantidad de botones que ha copiado.

4. Seleccione la herramienta  **Pegar**.  
El botón se pegará en el primer espacio vacío disponible en la página.

### 8.5.3 Seleccionar todos los botones

La herramienta Seleccionar todo selecciona automáticamente todos los botones en la página actual, para que se puedan realizar operaciones de edición en masa.

1. Seleccione el botón  **Editar**.
2. Seleccione la pestaña **Botón**.
3. Seleccione la herramienta  **Seleccionar todo**.

 Después de usar Seleccionar todo, puede hacer clic en los botones individuales para deseleccionarlos; los otros botones permanecerán seleccionados.

4. Realice los cambios que desee en los botones.
5. Para anular la selección de todos los botones, seleccione la herramienta  **Selección múltiple**.


### 8.5.4 Seleccionar varios botones

La herramienta Selección múltiple  le permite seleccionar (manualmente) varios botones a la vez, de modo que se puedan realizar operaciones de edición masiva.

1. Seleccione el botón  **Editar**.
2. Seleccione la pestaña **Botón**.
3. Seleccione la herramienta **Selección múltiple** .

 La herramienta Selección múltiple está de color negro cuando está deshabilitada y azul cuando está habilitada.

4. Seleccione los botones que desea editar simultáneamente.

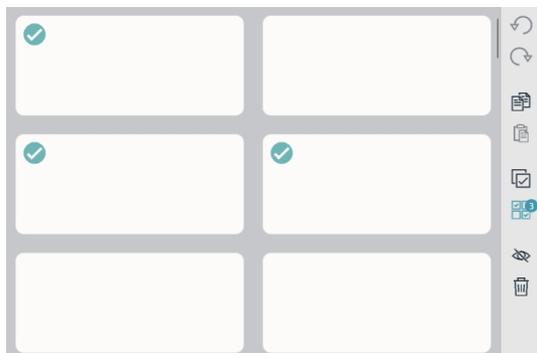

**Figura 8.4** Varios botones seleccionados: observe que la herramienta Selección múltiple muestra cuántos botones están seleccionados actualmente.

5. Realice los cambios que desee en los botones.
6. Para anular la selección de todos los botones, seleccione la herramienta  **Selección múltiple**.

## 8.5.5 Ocultar/Mostrar un botón

Los botones que están ocultos no son visibles en el Modo de uso. Los botones que eventualmente sean demasiado avanzados o molestos pueden ocultarse y mostrarse (dejar de ocultarse) más tarde.

En el Modo de edición, los botones ocultos se indican mediante una superposición gris.



**Figura 8.5** Un botón oculto junto a un botón visible, tal como se ve en el Modo de edición.

### 8.5.5.1 Ocultar

1. Seleccione el botón **Editar** .
2. Seleccione el botón que desea ocultar.
3. Seleccione la herramienta  **Ocultar**.

 La acción predeterminada para la herramienta Ocultar/Mostrar es configurar la visibilidad de ese botón en donde sea que aparezca en el Conjunto de páginas. Para configurar la visibilidad solo para la instancia seleccionada del botón, haga clic y mantenga presionado (toque prolongado) en la herramienta Ocultar/Mostrar y elija **Cambiar visibilidad aquí**.

### 8.5.5.2 Mostrar

1. Seleccione el botón **Editar** .
2. Seleccione un botón oculto.
3. Seleccione la herramienta  **Mostrar**.

 La acción predeterminada para la herramienta Ocultar/Mostrar es configurar la visibilidad de ese botón en donde sea que aparezca en el Conjunto de páginas. Para configurar la visibilidad solo para la instancia seleccionada del botón, haga clic y mantenga presionado (toque prolongado) en la herramienta Ocultar/Mostrar y elija **Cambiar visibilidad aquí**.

## 8.5.6 Eliminar un botón

1. Seleccione el botón **Editar** .
2. Seleccione un botón.
3. Seleccione la herramienta  **Eliminar**.

## 8.5.7 Expandir/Contraer nombres de herramientas de edición

Seleccione las  flechas dobles para mostrar los nombres de las herramientas de edición. Seleccione las  flechas dobles otra vez para ocultar los nombres de las herramientas.

## 8.6 Contenido del botón



Figura 8.6 Botón con etiqueta, símbolo, color de fondo y borde medio.

### 8.6.1 Etiqueta del botón

La etiqueta del botón es el texto que aparece en un botón.

#### 8.6.1.1 Cambiar etiqueta del botón

1. Seleccione el botón **Editar** .
2. Seleccione un botón.
3. Escriba en el campo de texto **Etiqueta**.



Figura 8.7 Campo de texto de la etiqueta del botón

Si desea cambiar otras características de la etiqueta (tipo de letra, color, ubicación, tamaño, etc.), consulte la sección [8.8.3 Etiqueta del botón](#).

### 8.6.2 Contenido activo

El contenido activo le permite mostrar información dinámica en un botón. La etiqueta del botón y el símbolo cambian para reflejar el estado actual de la información.

#### 8.6.2.1 Añadir contenido activo a un botón

1. Seleccione el botón **Editar** .
2. Seleccione un botón.
3. Seleccione **Contenido activo**.

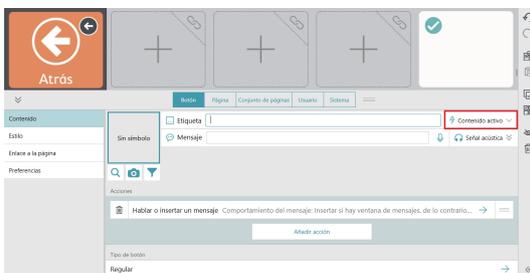


Figura 8.8 Contenido activo

4. Seleccione un tipo de Contenido activo.

<b>Tipo de Contenido activo</b>	<b>Descripción</b>
Estado de pausa del método de acceso	<p>Nota: Pausar método de acceso solamente se aplica a los siguientes métodos de acceso: Gaze Interaction y Tiempo de permanencia del mouse. Cuando están en uso otros métodos de acceso, los botones que usan el método de acceso Estado de pausa del contenido activo se desactivan.</p> <p>Si la acción Pausar método de acceso está presente en un botón (predeterminado), la etiqueta muestra la acción del botón: Iniciar acceso o pausar acceso.</p> <p>Si la acción Pausar método de acceso está presente en un botón, la etiqueta muestra el Estado de pausa del método de acceso: Acceso en ejecución o acceso en pausa.</p>
Estado de conexión de AccessIT	<p>Muestra el estado de la conexión del dispositivo AccessIT 3: Desconectado, Desconectando, Conectando o Conectado.</p> <p>Se puede utilizar con la acción Conectar a AccessIT para crear un botón que muestre el estado y que, cuando se seleccione, se conecte a un dispositivo AccessIT.</p>
Nivel de la batería	Muestra el porcentaje de nivel de batería actual: 0–100 %. El símbolo cambia para reflejar el nivel de la batería e indica cuándo el dispositivo está enchufado y se está cargando.
Modo de charla	<p>Si la acción Cambiar modo de charla está presente en un botón (predeterminado), la etiqueta muestra la acción del botón: Charlar o dejar de charlar.</p> <p>Si la acción Cambiar modo de charla no está presente en un botón, la etiqueta del botón muestra el estado actual del Modo de charla: Modo de charla activado o Modo de charla desactivado.</p>
Fecha	Muestra el día, mes y año actual. El formato de fecha es dictado por la configuración regional.
Día de la semana	Muestra el día actual de la semana.
Estado de silencio de retroalimentación	<p>Si la acción Activar el modo Silencio de retroalimentación de audio está presente en un botón (predeterminado), la etiqueta muestra la acción del botón: Silenciar la retroalimentación de audio o Activar la retroalimentación de audio.</p> <p>Si la acción Activar el modo Silencio de retroalimentación no está presente en un botón, la etiqueta del botón muestra el estado actual del silencio de retroalimentación de audio: Retroalimentación de audio silenciada o Retroalimentación de audio no silenciada.</p>
Volumen de retroalimentación	<p>Muestra el volumen de retroalimentación de audio: 0–100 %.</p> <p>Se puede utilizar con la acción Subir volumen de retroalimentación de audio o con la acción Bajar volumen de retroalimentación de audio para crear un botón que controle el volumen y también muestre el nivel del volumen de retroalimentación.</p>
Brillo de la ventana del interlocutor	<p>Solo dispositivos Tobii Dynavox I-13 e I-16.</p> <p>Muestra el porcentaje de brillo de la ventana del interlocutor: 0–100 %.</p> <p>Puede combinarse con la acción Aumentar el brillo de la ventana del interlocutor o con Disminuir el brillo de ventana del interlocutor para crear un botón que controle el brillo de la ventana del interlocutor y también muestre el brillo actual de dicha ventana.</p>
Estado de energía de la ventana del interlocutor	<p>Solo dispositivos Tobii Dynavox I-13 e I-16.</p> <p>Si la acción Activar/desactivar la ventana del interlocutor está presente en el botón (predeterminado), la etiqueta muestra la acción del botón: Activar la ventana del interlocutor o desactivar la ventana del interlocutor.</p> <p>Si la acción Activar/desactivar la ventana del interlocutor no está presente en el botón, la etiqueta del botón muestra el estado de energía de la ventana del interlocutor actual: Ventana del interlocutor activada o Ventana del interlocutor desactivada.</p>
Estado de habla	<p>Si la acción ventana de mensaje de habla está presente en un botón (predeterminado), la etiqueta muestra la acción del botón: Hablar o parar.</p> <p>Si la acción ventana de mensaje de habla no está presente en el botón, la etiqueta del botón muestra el estado actual de habla: Hablando o no hablando.</p>

Tipo de Contenido activo	Descripción
Estado de silencio de habla	Si Activar el modo silencio del habla está presente en un botón (predeterminado), la etiqueta muestra la acción del botón: Silenciar o No silenciar. Si la acción Activar el modo silencio del habla no está presente en un botón, la etiqueta del botón muestra el estado actual del estado de silencio de voz: Silenciar o No silenciar.
Volumen de habla	Muestra el volumen de habla: 0–100 %. Se puede utilizar con la acción Subir volumen de habla o Bajar volumen de habla para crear un botón que controle el volumen y también muestre el nivel del volumen de habla.
Hora	Muestra la hora actual del sistema en horas y minutos. El formato de tiempo está determinado por la configuración regional del sistema operativo. Nota: El símbolo es un reloj genérico que no cambia con el tiempo.

### 8.6.3 Mensaje del botón

El mensaje es el texto que se inserta en la ventana de mensajes cuando se selecciona el botón. Si no se muestra la ventana de mensajes, se reproduce el mensaje del botón.

#### 8.6.3.1 Cambiar mensaje del botón

1. Seleccione el botón **Editar** .
2. Seleccione un botón.
3. Escriba en el campo de texto **Mensaje**.



Figura 8.9 Campo de texto del mensaje del botón

Si desea grabar una pista de audio con un mensaje personalizado, consulte la sección 8.6.3.2 *Realizar una grabación*.

#### 8.6.3.2 Realizar una grabación



Si introdujo una grabación y un texto para un solo mensaje o señal acústica, debe especificar cuál se reproducirá en el Modo de uso. Seleccione la flecha para configurar el texto o la grabación como la opción activa.

1. Seleccione y mantenga presionado **Grabar**  para comenzar a grabar.
2. Cuando haya terminado de grabar, suelte **Grabar** .
3. Para escuchar su grabación, seleccione **Reproducir**.
4. Para eliminar su grabación, seleccione la **X**.



## 8.6.4 Señal acústica del botón

La señal acústica se puede utilizar con los métodos de acceso Soltar para seleccionar, Tiempo de permanencia del mouse, Gaze Interaction y Escaneo. La señal acústica es una vista previa del botón que se reproduce cuando el botón está resaltado pero aún no está seleccionado.

### 8.6.4.1 Cambiar la señal acústica del botón



1. Seleccione el botón **Editar**.
2. Seleccione un botón.
3. Seleccione **Señal acústica** para ampliar la fila.



Figura 8.10 Campo de texto de la señal acústica del botón

4. Escriba en el campo **Señal acústica**.

Si desea grabar una señal acústica personalizada, consulte la sección 8.6.3.2 *Realizar una grabación*.

## 8.6.5 Imagen del botón

Un botón puede mostrar un símbolo o una imagen.

### 8.6.5.1 Cambiar imagen del botón



1. Seleccione el botón **Editar**.
2. Seleccione un botón.
3. Agregue una imagen al botón:
  - Para buscar un símbolo:

- a. Seleccione el botón **Búsqueda de símbolo**.  
Se abrirá el cuadro de diálogo Búsqueda de símbolo.



- b. Escriba en el campo de texto para refinar los términos de búsqueda.
  - c. Seleccione el símbolo deseado.
  - d. Seleccione **Listo**.
- Para usar la cámara para tomar una foto para la imagen del botón, haga lo siguiente:

- a. Seleccione el botón **Cámara**.
- b. Elija **Desde la cámara**.
- c. Use la cámara del dispositivo para capturar una foto.

- Para usar una imagen almacenada en el dispositivo local:

- Seleccione el botón **Cámara** .
- Seleccione **Desde la biblioteca de fotos**.
- Use el buscador de archivos para navegar hasta el archivo de imagen deseado.

Si no desea tener un símbolo en el botón, seleccione la **X** en la esquina del símbolo actual o configure el diseño del botón en Solo etiqueta. Consulte la sección 8.8.3.5 *Diseño de botones*.



### 8.6.5.2 Filtrar resultados de búsqueda de símbolo


1. Seleccione el botón **Editar** .
2. Seleccione un botón.
3. Seleccione el botón **Filtrar símbolos** .
4. Seleccione las características que desea ver en los resultados de la búsqueda de símbolo (Adulto, Niño, Femenino, Masculino).

 La configuración de los filtros permanecerá activada hasta que vuelva a editarla.

### 8.6.6 Tipo de botón

La configuración del tipo de botón determina el funcionamiento de un botón.

1. Seleccione el botón **Editar** .
2. Seleccione un botón.
3. Seleccione **Tipo de botón**.
4. Seleccione un tipo de botón de la lista:
  - **Regular**: puede contener un símbolo, una etiqueta y acciones. La acción predeterminada es Decir/Insertar mensaje.
  - **Predictor**: anticipa la siguiente palabra basándose en la composición actual en la ventana de mensajes. Seleccione el botón para insertar la palabra visualizada actualmente en la ventana de mensajes.
  - **Teclado**: diseñado para insertar un solo carácter en la ventana de mensajes y responder adecuadamente a modificadores como la tecla Mayús o Bloq Mayús.
  - **Flexión**: cambia la palabra objetivo a una forma específica, es decir, plural, pretérito, etc. El objetivo se configura en una de dos opciones: la última palabra en la ventana de mensajes o todos los botones gramaticales.

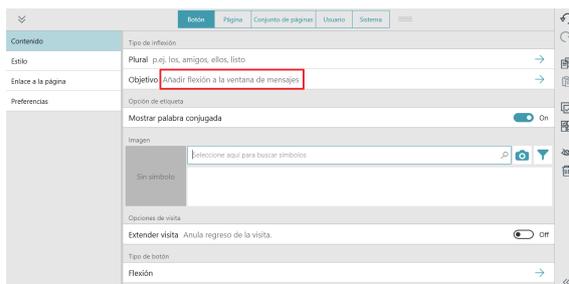



La configuración de las reglas de idioma del botón debe ser exactamente igual para el botón Flexión y para el botón Gramatical, de modo que la flexión funcione correctamente.

- **Gramatical:** actualiza su propia etiqueta para predecir la forma gramatical deseada de la palabra en función del contenido actual de la ventana de mensajes, de un botón Flexión seleccionado o de un botón Sujeto implícito seleccionado.
- **Sujeto implícito:** (solo en español) cuando se usa con un pronombre apropiado, se puede utilizar un botón Sujeto implícito para flexionar los botones gramaticales y también insertar su etiqueta en la ventana de mensajes. Cuando se selecciona una vez, el botón Sujeto implícito flexiona los botones gramaticales para que coincidan con el pronombre en el botón Sujeto implícito. Si se selecciona por segunda vez, la etiqueta (pronombre) del botón Sujeto implícito se inserta en la ventana de mensajes.

Si las reglas de idioma del botón Sujeto implícito están configuradas en español (México, España o Estados Unidos), se puede utilizar uno de los siguientes pronombres en el botón:

- yo
- tú
- usted
- él
- ella
- nosotros
- nosotras
- vosotros
- vosotras
- ustedes
- ellos
- ellas



La configuración de las reglas de idioma del botón debe ser exactamente igual en el botón Sujeto implícito y en el botón Gramatical para que la flexión funcione correctamente.

## 8.7 Acciones de botón

Las acciones le permiten crear botones que hacen cosas.

### Añadir o editar acciones de un botón



1. Seleccione el botón **Editar**.
2. Seleccione un botón.
3. Seleccione **Agregar acción** para elegir una acción para agregar al botón.

Acción	Descripción
Borrar ventana de mensajes	Borra el contenido de la ventana de mensajes.
Borrar palabra	Borra la última palabra en la ventana de mensajes.
Copiar ventana de mensajes en botón	Copie el texto de la ventana de mensajes y luego agréguelo a la etiqueta del botón seleccionado por el usuario.
Decir el contenido de la ventana de mensajes	Dice el contenido de la ventana de mensajes.
Decir o insertar un mensaje	Dice o inserta un mensaje de un botón.
Decir la oración	Dice la última oración de la ventana de mensajes.

<b>Acción</b>	<b>Descripción</b>
Modo alternar charla	Alternar charla encendido o apagado. Cuando Charla está habilitada, el contenido actual de la ventana de mensajes se almacena en la memoria caché y luego se borra la ventana de mensajes. Mientras está en la charla, puede insertar contenido nuevo en la ventana de mensajes y hablar. Cuando la charla está desactivada, el contenido de la ventana de mensajes en la memoria caché se restaura para que pueda continuar donde lo dejó.
Cancelar visita	Cancela la visita para permanecer en la página actual.
Extender visita	Un botón que contenga esta acción no activará el regreso a la página anterior mientras la visita esté activa.
Regresar	Regresa a la página anterior.
Ir a Inicio	Va a la página de inicio.
Enlace	Enlace a otra página.
Abrir Cuadro de mandos	Abrir la página del Cuadro de mandos.
Abrir Teclado	Abre la página de Teclado.
Regresar de la visita	Regresa a la página anterior y cancela la visita.
Cambiar conjunto de páginas	Cambia a un conjunto de páginas distinto.
Primero-Luego	Muestra una secuencia Primero-Luego en una ventana emergente.
Minihorario	Muestra un minihorario en una ventana emergente.
Guion	Muestra un guion en una ventana emergente.
Temporizador visual	Muestra un temporizador en la barra superior que hace la cuenta regresiva del tiempo especificado.
Calibrar Rastreador ocular	Inicia la calibración del rastreador ocular.
Pausar método de acceso	Pausa y reanuda el método de acceso. El texto de la etiqueta del botón muestra si el método de acceso está actualmente en pausa o activo. Métodos de acceso aplicables: Permanencia del mouse, Gaze Interaction.
Mostrar estado del Rastreador ocular	Muestra la ventana de estado de seguimiento del rastreador ocular.
Activar el modo Silencio de retroalimentación de audio	Silencia o reactiva el volumen de la retroalimentación de audio.
Bajar volumen de retroalimentación de audio	Baja el volumen de retroalimentación de audio.
Subir el volumen de retroalimentación de audio	Sube el volumen de retroalimentación de audio.
Alternar el modo Silencio de voz	Silencia o reactiva el volumen del sistema.
Bajar el volumen de voz	Baja el volumen del sistema.
Subir el volumen de voz	Sube el volumen del sistema.
Enviar señal IR	Envía la señal infrarroja especificada.
Conectarse a AccessIT*	Desconecta el dispositivo AccessIT conectado actualmente, luego, muestra el selector de dispositivos AccessIT.
Restablecer AccessIT*	Detiene las acciones de AccessIT especificadas: transmisiones de texto, teclas de teclado retenidas, clics y movimientos continuos del mouse.
Enviar texto del botón*	Envía la etiqueta o el mensaje de un botón al dispositivo AccessIT.
Enviar tecla del teclado*	Envía una tecla del teclado al dispositivo AccessIT.

Acción	Descripción
Enviar texto de la ventana de mensajes*	Envía el texto que se encuentra actualmente en la ventana de mensajes al dispositivo AccessIT.
Enviar clic del mouse*	Envía clics del mouse al dispositivo AccessIT.
Enviar movimiento del mouse*	Envía el movimiento del mouse al dispositivo AccessIT.
Enviar texto*	Envíe el texto al dispositivo AccessIT.
Iniciar aplicación	Inicia la aplicación especificada.
Reiniciar dispositivo	Reinicia el dispositivo.
Apagar dispositivo	Apaga el dispositivo.
Disminuir el brillo de la ventana del interlocutor**	Disminuye el brillo de la ventana del interlocutor.
Aumentar el brillo de la ventana del interlocutor**	Aumenta el brillo de la ventana del interlocutor.
Activar/desactivar la ventana del interlocutor**	Activa o desactiva la ventana del interlocutor.

\* Esta acción requiere un dispositivo Tobii DynavoxAccessIT 3. Consultar la sección 8.7.3 AccessIT

\*\*Esta acción requiere un dispositivo Tobii Dynavox I-13 o I-16.

### 8.7.1 Eliminar una acción

1. Seleccione el botón **Editar** .
2. Seleccione un botón.
3. Seleccione el botón  **Eliminar** junto a una acción.
4. Seleccione el botón rojo **Eliminar** para confirmar la eliminación.

### 8.7.2 Reordenar las acciones del botón

1. Seleccione el botón **Editar** .
2. Seleccione un botón.
3. Seleccione y mantenga presionado el control  de una acción y arrástrelo a una nueva posición en la lista de acciones.



### 8.7.3 AccessIT

Snap es compatible con AccessIT 3 de Tobii Dynavox, un dispositivo Bluetooth USB que se utiliza para enviar pulsaciones de teclas, movimientos del mouse y clics del mouse a un ordenador con Windows 10 estándar desde un dispositivo que ejecuta la aplicación Snap + Core First de Tobii Dynavox. Para obtener más información sobre AccessIT 3 de Tobii Dynavox, visite <http://www.tobiidynavox.com/AccessIT>



Las páginas AccessIT se incluyen en los conjuntos de páginas de Core First creados con la versión 1.7 y posteriores de Snap. Los paquetes de páginas AccessIT están disponibles para importarlos a sus conjuntos de páginas existentes en <https://www.mytobiidynavox.com/PagesetCentral>



De aquí en adelante, en este documento se hará referencia al ordenador que recibe los comandos como "la PC" y al dispositivo desde el cual se enviarán los comandos como "el dispositivo de voz".



AccessIT 3 utiliza la tecnología inalámbrica Bluetooth®. La PC (con AccessIT 3 conectado) y el dispositivo de voz deben estar a aproximadamente 10 metros (32 pies) para establecer y mantener la conexión de Bluetooth mientras AccessIT 3 está en uso.

Tanto el dispositivo de voz como la PC deben estar encendidos y desbloqueados antes de comenzar los pasos indicados a continuación.

#### 8.7.3.1 Configurar AccessIT

##### Conectar AccessIT

1. (En la PC) Inserte AccessIT 3 en un puerto USB.



AccessIT 3 requiere USB 2.0 o superior.

##### Habilitar Bluetooth en dispositivos de voz de Windows

1. (En el dispositivo de voz) Seleccione el menú **Inicio**, luego, elija **Configuración**.
2. Seleccione **Dispositivos**.
3. Seleccione **Bluetooth**.
4. Mueva el interruptor de **Bluetooth** a la posición ON (activado).

##### Habilitar Bluetooth en dispositivos de voz iOS (iPad)

1. (En el dispositivo de voz) vaya a **Configuración > Bluetooth** y active Bluetooth.

#### 8.7.3.2 Acciones de AccessIT


Las acciones de AccessIT están diseñadas para ser utilizadas en combinación. Las operaciones comunes de PC, como hacer clic y arrastrar, requerirán más de una acción. A continuación, se describen las acciones individuales.



Si un dispositivo AccessIT no está conectado cuando se selecciona un botón que contiene una acción AccessIT, el selector de dispositivos AccessIT (accesible) se abrirá automáticamente.

- Conectarse a AccessIT - Desconecta el dispositivo AccessIT actual (si corresponde) y muestra el selector de dispositivos AccessIT. Esta acción es útil para cambiar de un dispositivo AccessIT a otro dispositivo AccessIT. No es necesario utilizar esta acción para iniciar todas las sesiones de AccessIT, ya que todas las acciones de AccessIT abren automáticamente el selector de dispositivos de AccessIT si no hay ningún dispositivo de AccessIT conectado actualmente.
- Restablecer AccessIT - Detiene los tipos de comando especificados que se están ejecutando actualmente: teclas del teclado, clics del mouse, movimientos del mouse y texto.
- Enviar texto del botón - Envía el mensaje del botón al dispositivo AccessIT. Si el botón no tiene un mensaje, envía la etiqueta del botón.
- Enviar tecla de teclado - Envía la tecla de teclado especificada. Opciones - Mantenga presionada la tecla o espere durante un período de tiempo específico después de enviar la tecla de teclado (antes de realizar la siguiente acción).

- Enviar texto de la ventana de mensajes - Envía el texto de la ventana de mensajes actual al dispositivo AccessIT. Si la ventana de mensajes contiene símbolos, estos no se envían.
- Enviar texto: envía el texto especificado al dispositivo AccessIT.
- Enviar clic del mouse - Envía el tipo de clic especificado (clic izquierdo, clic derecho, clic del medio, doble clic izquierdo). Opciones: Espere un tiempo específico después de enviar el clic (antes de realizar la siguiente acción) o mantenga presionado el clic.
- Enviar movimiento del mouse - Envía un movimiento del mouse al dispositivo AccessIT. Los movimientos del mouse se realizan desde la posición actual del mouse. Mueva la bola azul a la posición en el círculo que coincida con la dirección del movimiento del mouse deseado, luego, ingrese un número en el campo de distancia. La unidad de distancia es el movimiento de mouse detectable más pequeño, que está entre 1/300 y 1/200 pulgadas, según la configuración del equipo y la velocidad del mouse en la PC. Opciones: movimiento continuo (el mouse continuará moviéndose en la dirección especificada hasta que otra acción lo detenga o redireccione, o hasta que se tope con el borde de la pantalla); o espere un tiempo específico después de enviar el movimiento del mouse (antes de realizar la siguiente acción).

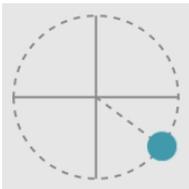

**Figura 8.11** Dirección del movimiento del mouse - Coloque la bola azul en el círculo para establecer la dirección del movimiento del mouse.



A algunos usuarios de AccessIT les puede resultar útil habilitar la configuración de Windows "Mostrar ubicación del puntero cuando presiono la tecla CTRL" en la PC. Use la acción Enviar tecla del teclado para enviar la tecla CTRL desde Snap y aparecerán momentáneamente círculos animados alrededor del puntero del mouse en la PC para que sea más visible. Para acceder a esta configuración del mouse de Windows, vaya a *Configuración > Dispositivos > Mouse > Opciones de mouse adicionales > pestaña Opciones de puntero*.

### 8.7.3.3 Configuración de energía de la PC y AccessIT


Su PC solo puede recibir comandos de AccessIT cuando está encendida y activada. Para garantizar un acceso ininterrumpido a la PC, ajuste la configuración de energía de su PC, para que el ordenador (disco duro) no se ponga nunca en modo de suspensión cuando esté conectado.

Su PC aún puede recibir comandos de AccessIT si la pantalla (monitor) ha entrado en un modo de ahorro de energía. Cuando se envía un comando AccessIT (tecla del teclado, movimiento del mouse o clic del mouse) desde Snap, esto "activará" la pantalla de la PC.

La configuración de energía de Windows se encuentra en *Configuración > Sistema > Energía y suspensión*.

## 8.8 Estilo del botón

Cambie el aspecto de un botón en la categoría Estilo del botón.

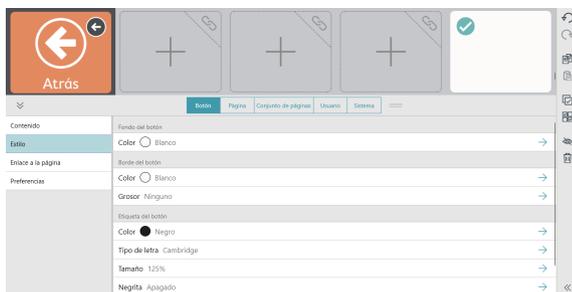

## 8.8.1 Fondo del botón



1. Seleccione el botón **Editar**.
2. Seleccione un botón.
3. Seleccione la categoría **Estilo**.
4. Seleccione **Color** en Fondo del botón.
5. Seleccione un color.

## 8.8.2 Borde del botón

### 8.8.2.1 Color del borde



1. Seleccione el botón **Editar**.
2. Seleccione un botón.
3. Seleccione la categoría **Estilo**.
4. Seleccione **Color** en Borde del botón.
5. Seleccione un color.

### 8.8.2.2 Grosor del borde



1. Seleccione el botón **Editar**.
2. Seleccione un botón.
3. Seleccione la categoría **Estilo**.
4. Seleccione **Grosor** en Borde del botón.
5. Seleccione un grosor de borde: Ninguno, Delgado, Medio o Grueso.



Figura 8.12 Bordes de los botones: Ninguno, Delgado, Medio y Grueso.

## 8.8.3 Etiqueta del botón

### 8.8.3.1 Color



1. Seleccione el botón **Editar**.
2. Seleccione un botón.
3. Seleccione la categoría **Estilo**.
4. Seleccione **Color** en Etiqueta del botón.
5. Seleccione un color.

### 8.8.3.2 Tipo de letra



La configuración predeterminada de este parámetro se establece en la pestaña Conjunto de páginas. Si desea anular la configuración predeterminada del conjunto de páginas en esta instancia, configure la opción Coincidir ajuste del conjunto de páginas en **Desactivado**. Para alinear esta configuración con el resto del conjunto de páginas, configure la opción Coincidir ajuste del conjunto de páginas en **Activado**.



1. Seleccione el botón **Editar**.
2. Seleccione un botón.
3. Seleccione la categoría **Estilo**.

4. Seleccione **Tipo de letra** en Etiqueta del botón.
5. Seleccione un tipo de letra.

### 8.8.3.3 Tamaño de letra



La configuración predeterminada de este parámetro se establece en la pestaña Conjunto de páginas. Si desea anular la configuración predeterminada del conjunto de páginas en esta instancia, configure la opción Coincidir ajuste del conjunto de páginas en **Desactivado**. Para alinear esta configuración con el resto del conjunto de páginas, configure la opción Coincidir ajuste del conjunto de páginas en **Activado**.



1. Seleccione el botón **Editar**.
2. Seleccione un botón.
3. Seleccione la categoría **Estilo**.
4. Seleccione **Tamaño de letra** en Etiqueta del botón.
5. Seleccione un tamaño.

### 8.8.3.4 Negrita



La configuración predeterminada de este parámetro se establece en la pestaña Conjunto de páginas. Si desea anular la configuración predeterminada del conjunto de páginas en esta instancia, configure la opción Coincidir ajuste del conjunto de páginas en **Desactivado**. Para alinear esta configuración con el resto del conjunto de páginas, configure la opción Coincidir ajuste del conjunto de páginas en **Activado**.



1. Seleccione el botón **Editar**.
2. Seleccione un botón.
3. Seleccione la categoría **Estilo**.
4. Seleccione **Negrita** en Etiqueta del botón.
5. **Active** o **Desactive** la opción Negrita.

### 8.8.3.5 Diseño de botones



La configuración predeterminada de este parámetro se establece en la pestaña Conjunto de páginas. Si desea anular la configuración predeterminada del conjunto de páginas en esta instancia, configure la opción Coincidir ajuste del conjunto de páginas en **Desactivado**. Para alinear esta configuración con el resto del conjunto de páginas, configure la opción Coincidir ajuste del conjunto de páginas en **Activado**.



1. Seleccione el botón **Editar**.
2. Seleccione un botón.
3. Seleccione la categoría **Estilo**.
4. Seleccione **Diseño** en Etiqueta del botón.
5. Seleccione un diseño de la lista.




Etiqueta superior, imagen inferior



Etiqueta inferior, imagen superior




Etiqueta izquierda, imagen derecha

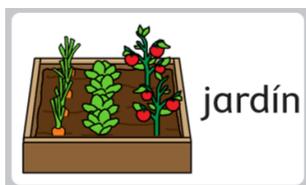

Etiqueta derecha, imagen izquierda



Solo etiqueta

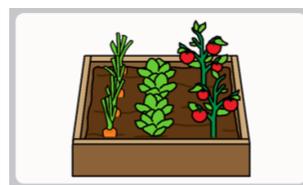

Solo imagen


## 8.9 Enlace a la Página/Crear página nueva

Los botones de enlace abren una página diferente cuando se seleccionan. Por defecto, los botones de enlace se identi-

can con este ícono  o con el ícono de visita . Para cambiar la apariencia de los botones de enlace y visita, consulte la sección 9.3.5 *Visualización de enlaces del conjunto de páginas*.

### 8.9.1 Crear un botón de enlace en un espacio vacío

1. Seleccione el botón **Editar** .
2. Seleccione el ícono de enlace en un espacio vacío.

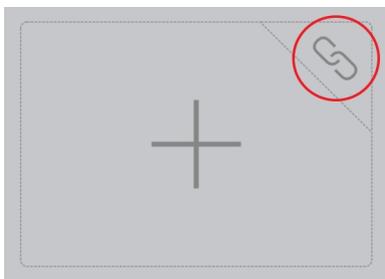

- Para crear un enlace a una página completamente nueva, consulte la sección 8.9.3 *Enlace a una Nueva página/Crear página nueva*.
- Para crear un enlace a una página existente, consulte la sección 8.9.4 *Enlace a una página existente*.
- Para crear un enlace a la copia (nueva) de una página existente, consulte la sección 8.9.5 *Enlace a una nueva copia de una página existente*.
- Para importar y vincular a una página, consulte la sección 8.9.6 *Importar y vincular a una página*.

### 8.9.2 Crear un enlace desde un botón existente

1. Seleccione el botón **Editar** .
2. Seleccione el botón desde el que desea crear un enlace.
3. Seleccione la pestaña **Botón**.
4. Seleccione la categoría **Acción**.

5. Seleccione **Agregar acción**.
6. Seleccione **Enlace**.
  - Para crear un enlace a una página completamente nueva, consulte la sección *8.9.3 Enlace a una Nueva página/Crear página nueva*.
  - Para crear un enlace a una página existente, consulte la sección *8.9.4 Enlace a una página existente*.
  - Para crear un enlace a la copia (nueva) de una página existente, consulte la sección *8.9.5 Enlace a una nueva copia de una página existente*.
  - Para importar y vincular a una página, consulte la sección *8.9.6 Importar y vincular a una página*.

### 8.9.3 Enlace a una Nueva página/Crear página nueva

1. Seleccione **Enlace a nueva página**. Se abrirá el cuadro de diálogo Nueva página.
2. Escriba el nombre de la página en el campo **Nombre**. Seleccione un símbolo o seleccione la **X** si no desea establecer un símbolo para la página.
3. Seleccione **Crear** para crear el enlace y la página nueva. Seleccione **Cancelar** para volver sin guardar.



### 8.9.4 Enlace a una página existente

1. Seleccione **Enlace a una página existente**. Se abrirá el cuadro de diálogo Enlace a una página existente.
2. Seleccione una página de la lista.



Escriba en el campo Buscar para buscar una página específica o seleccione Recientemente abierta para buscar una página que ha visitado recientemente.

3. Seleccione **Crear** para crear el enlace. Seleccione **Cancelar** para volver sin guardar.

Para obtener más información acerca de la opción Visita de página, consulte la sección *8.9.7 Visitar página*.

### 8.9.5 Enlace a una nueva copia de una página existente

Este método de vinculación le permite usar una página como plantilla para la nueva página que cree.

1. Seleccione **Enlace a copia de la página**. Se abrirá el cuadro de diálogo Enlace a copia de la página.
2. Seleccione una página de la lista.



Escriba en el campo Buscar para buscar una página específica o seleccione Recientemente abierta para buscar una página que ha visitado recientemente.

3. Introduzca un nombre para la página nueva en el campo Nombre.
4. Seleccione **Crear** para crear una copia de la página seleccionada y el enlace. Seleccione **Cancelar** para volver sin guardar.

Para obtener más información acerca de la opción Visita de página, consulte *8.9.7 Visitar página*.

### 8.9.6 Importar y vincular a una página

Si tiene un archivo de paquete de páginas que contiene una página a la que desea vincular, puede importar la página y vincularla en un solo paso mediante la función Importar y vincular a una página.

1. Seleccione **Importar y vincular a una página**. Puede optar por importar desde myTobiiDynavox o un archivo local:

#### Desde myTobiiDynavox

- a. Seleccione **Desde myTobiiDynavox**.

Puede que se le pida que inicie sesión en myTobiiDynavox. Se abre el cuadro de diálogo Seleccionar paquete de páginas desde myTobiiDynavox.

- b. Seleccione el paquete de páginas que desea importar y, a continuación, seleccione **Siguiente**.
- c. Seleccione la página a la que desea crear el enlace y, a continuación, seleccione **Importar**.



Los conflictos de página se producen cuando el paquete de páginas contiene una o más páginas que ya existen en el dispositivo, pero que no son idénticas. Seleccione cada ícono de conflicto de pá-



gina y, a continuación, elija si desea conservar la página existente o sobrescribirla con la página importada del paquete de páginas. Debe resolver todos los conflictos de página de esta manera antes de continuar con la importación del Paquete de páginas.

### Desde un archivo local

- a. Seleccione **Desde un archivo local**. Se abre el cuadro de diálogo Importar paquete de páginas desde un archivo local.
- b. Seleccione **Explorar**. Navegue hasta el paquete de páginas deseado (.spb) y seleccione **Abrir**.
- c. Seleccione **Siguiente**.
- d. Seleccione la página a la que desea crear el enlace y, a continuación, seleccione **Importar**.



Los conflictos de página se producen cuando el paquete de páginas contiene una o más páginas que ya existen en el dispositivo, pero que no son idénticas. Seleccione cada ícono de conflicto de pá-



gina y, a continuación, elija si desea conservar la página existente o sobrescribirla con la página importada del paquete de páginas. Debe resolver todos los conflictos de página de esta manera antes de continuar con la importación del Paquete de páginas.

## 8.9.7 Visitar página

Cuando está habilitada, la opción Visita de página establece un enlace para que el usuario vuelva a la página anterior después de que se haya realizado una selección que active el regreso a la página vinculada. Los botones de enlace que tie-

nen habilitada la opción Visita de página muestran este ícono:

¿Cómo funciona la opción Visita de página?

1. Seleccione el botón de enlace Visita de página. Se abre la página vinculada.
2. Haga una selección en la página vinculada.\*  
Se abre la página anterior (que contiene el botón de enlace Visita de página).



\* Para activar el regreso a la página anterior, el botón seleccionado debe contener *una* de las siguientes acciones:

- Decir o insertar un mensaje
- Decir la oración
- Regresar de la visita

O *bien*, ser uno de los siguientes tipos de botones, que también activan el regreso a la página anterior:

- Botón Gramatical
- Botón Flexión
- Botón Predictor
- Botón de teclado en pantalla programado con Tipo de tecla = espacio

Las siguientes acciones y tipos de botones extienden el Modo de visita y *no* activan el regreso a la página anterior:

- Extender visita
- Regresar
- Enlace
- Sujeto implícito
- Pausar método de acceso
- Charla


Si un botón contiene varias acciones (algunas que activan el regreso a la página anterior y otras que extienden el Modo de visita), el regreso a la página anterior no se activa a menos que el botón también contenga la opción Regresar de la visita.

Las siguientes acciones cancelan una visita:

- Cancelar visita
- Ir a Inicio
- Abrir Cuadro de mandos
- Abrir Teclado

### 8.9.7.1 Habilitar la opción Visita de página en un botón de enlace

1. Seleccione el botón **Editar** .
2. Seleccione el botón de enlace.

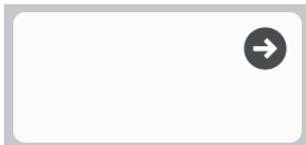

**Figura 8.13** Ejemplo de botón de enlace

3. Seleccione la categoría **Acción**.
4. Seleccione la acción **Vincular**.
5. Active la opción **Visita de página**.

### 8.9.7.2 Extender, cancelar o regresar de la visita

Puede usar acciones para interrumpir o prolongar una visita a la página que se produce después de seleccionar un botón de visita. Si un botón seleccionado en la página visitada contiene una de las siguientes acciones, se cambiará el comportamiento normal de la visita a la manera especificada:

- Extender visita: permanecer en Modo de visita, a pesar de las acciones en este botón.
- Cancelar visita: salir del Modo de visita, pero permanecer en la página actual.
- Regresar de la visita: salir del Modo de visita inmediatamente (antes de ejecutar acciones posteriores en este botón) y volver a la página original. Todas las acciones se ejecutan con el botón.

## 8.10 Reglas de idioma del botón

La configuración de las reglas de idioma le permite especificar el idioma que se usará para la búsqueda de símbolo, la simbolización, la predicción de palabras, la flexión, la transformación automática y la voz hablante (si se ha configurado una voz específica del idioma) para ese botón.

Los botones heredan una configuración predeterminada de reglas de idioma de la configuración del conjunto de páginas o de la configuración de la página. Puede configurar manualmente las reglas de idioma para un botón si sigue los pasos que se indican a continuación:

1. Seleccione el botón **Editar** .
2. Seleccione un botón.
3. Seleccione la categoría **Preferencias**.
4. Seleccione **Reglas de idioma**.
5. Seleccione un idioma de la lista:
  - a. **Idiomas con soporte completo:** afectan la búsqueda de símbolo, la simbolización, la predicción de palabras, la flexión, la transformación automática y la voz hablante (si se ha configurado una voz específica del idioma). El idioma **Neutral** se utiliza principalmente con nombres propios (por ejemplo, Harriet Tubman o Amsterdam). Cuando las palabras etiquetadas como neutrales se envían a la ventana de mensajes, se pronuncian de acuerdo con las reglas de idioma de las otras palabras que se encuentran actualmente en la ventana de mensajes. Si la ventana de mensajes está vacía, las palabras neutras se pronuncian de acuerdo con la configuración de las reglas de idioma de la página no neutral actual o la más reciente.
  - b. **Otros idiomas:** los idiomas de esta categoría tienen distintos niveles de compatibilidad dentro de la aplicación Snap + Core First.

## 8.11 Controles remotos

Algunos dispositivos Tobii Dynavox, como Indi y I-110, están equipados con un transmisor infrarrojo (IR) que se puede controlar a través del software Snap, lo que permite que estos dispositivos se utilicen como controles remotos para equipos como televisores y equipos de música. El conjunto de páginas de Core First viene con páginas de controles remotos precreadas en el Cuadro de mandos. Estas páginas de controles remotos contienen botones que están listos para que los programe con sus controles remotos.



Los controles remotos Snap no funcionan en los dispositivos Tobii Dynavox I-12(+) e I-15(+).

### 8.11.1 Programar un botón de control remoto



El proceso de programación remota debe realizarse una vez por cada botón.

Tenga el control remoto a mano. Lo necesitará para enseñarle el comando IR a su dispositivo.

1. Seleccione el botón **Editar** .
2. Seleccione el botón en pantalla que desea programar para enviar el comando IR.
3. Seleccione la pestaña **Botón**.
4. Seleccione la categoría **Acción**.
5. Seleccione **Agregar acción**.
6. Seleccione **Enviar señal IR**.
7. Seleccione **Grabar**, luego apunte con el control remoto al panel infrarrojo del dispositivo Tobii Dynavox y presione el botón del control remoto.
8. Si ve el mensaje "¡Grabación exitosa!", Seleccione **Listo**.  
Si ve el mensaje "La grabación falló. Vuelva a intentarlo", regrese al paso 7.

## 8.11.2 Uso de los controles remotos



Los controles remotos solo están disponibles para aquellos dispositivos Tobii Dynavox que los admiten.

Debe configurar el control remoto de antemano programando cada botón del control remoto con el comando IR correcto. Consulte [8.11.1 Programar un botón de control remoto](#).



**Figura 8.14** Cuadro de mandos: botones del control remoto

1. Navegue hasta la página de control remoto correspondiente al equipo (televisor, equipo de música, etc.) que desea controlar.
2. Apunte el puerto de infrarrojos del dispositivo Tobii Dynavox en dirección al equipo que desea controlar.
3. Seleccione el botón del comando deseado.

## 8.12 Editar página

Los cambios realizados en la pestaña **Página** afectarán *solo a la página actual*. Puede usar la configuración de la pestaña **Página** para anular algunas opciones de configuración del conjunto de páginas. Por ejemplo, si desea que la barra de mensajes esté visible para la mayoría de las páginas, pero no para la página del Cuadro de mandos, debe hacer lo siguiente: 1. Habilite la barra de mensajes en la configuración del conjunto de páginas. 2. Vaya a la página Cuadro de mandos. 3. Seleccione la pestaña **Página**. 4. Seleccione **Preferencias**. 5. En **Visibilidad de la barra de mensajes** en la página, desactive la opción **Coincidir ajuste del conjunto de páginas: Encendido**. 6. Configure la opción **Visibilidad de la barra de mensajes** en **Desactivado**.

### 8.12.1 Nombre de la página



**Figura 8.15** Nombre de la página

1. Seleccione el botón **Editar**
2. Seleccione la pestaña **Página**.
3. Escriba en el campo **Etiqueta** para editar el nombre de la página.



## 8.12.2 Símbolo de la página



Figura 8.16 Símbolo de la página

1. Seleccione el botón **Editar** .
2. Seleccione la pestaña **Página**.
3. Agregue o cambie el símbolo de la Página:
  - Para buscar un símbolo:
    - a. Seleccione el botón **Búsqueda de símbolo** .



- b. Escriba en el campo de texto para refinar los términos de búsqueda.
  - c. Seleccione el símbolo deseado.
  - d. Seleccione **Listo**.
- Para usar la cámara para tomar una foto para el Símbolo de la página:
    - a. Seleccione el botón **Cámara** .
    - b. Elija **Desde la cámara**.
    - c. Use la cámara del dispositivo para capturar una foto.
  - Para usar una imagen almacenada en el dispositivo local:
    - a. Seleccione el botón **Cámara** .
    - b. Seleccione **Desde la biblioteca de fotos**.
    - c. Use el buscador de archivos para navegar hasta el archivo de imagen deseado.



Si no desea utilizar un símbolo de página, seleccione la **X** en el símbolo de la página.

## 8.12.3 Reglas de idioma de la página

La configuración de las reglas de idioma de la página establece las reglas de idioma predeterminadas para los botones de la página. La configuración de las reglas de idioma controla el idioma que se usará para la búsqueda de símbolo, la

simbolización, la predicción de palabras, la flexión, la transformación automática y la voz hablante (si se ha configurado una voz específica del idioma).

Los botones heredan una configuración predeterminada de reglas de idioma de la configuración del conjunto de páginas o de la configuración de la página. Al configurar las reglas de idioma de la página, todos los botones existentes en la página adoptarán esa configuración y los nuevos botones creados en la página también se ajustarán a esa configuración de manera predeterminada. Para cambiar las reglas de idioma de botones específicos, consulte la sección *8.10 Reglas de idioma del botón*.

1. Seleccione el botón **Editar** .
2. Seleccione la pestaña **Página**.
3. Seleccione **Reglas de idioma**.
4. Seleccione un idioma de la lista:
  - a. **Idiomas con soporte completo:** afectan la búsqueda de símbolo, la simbolización, la predicción de palabras, la flexión, la transformación automática y la voz hablante (si se ha configurado una voz específica del idioma). El idioma **Neutral** se utiliza principalmente con nombres propios (por ejemplo, Albert Einstein o Coca-Cola). Cuando las palabras etiquetadas como neutrales se envían a la ventana de mensajes, se pronuncian de acuerdo con las reglas de idioma de las otras palabras que se encuentran actualmente en la ventana de mensajes. Si la ventana de mensajes está vacía, las palabras neutrales se pronuncian de acuerdo con la configuración de las reglas de idioma del conjunto de páginas.
  - b. **Otros idiomas:** los idiomas de esta categoría tienen distintos niveles de compatibilidad dentro de la aplicación Snap + Core First.

## 8.12.4 Tamaño de la cuadrícula de la página



La configuración predeterminada de este parámetro se establece en la pestaña Conjunto de páginas. Si desea anular la configuración predeterminada del conjunto de páginas en esta instancia, configure la opción Coincidir ajuste del conjunto de páginas en **Desactivado**. Para alinear esta configuración con el resto del conjunto de páginas, configure la opción Coincidir ajuste del conjunto de páginas en **Activado**.

### 8.12.4.1 Cambiar tamaño de la cuadrícula de la página

1. Seleccione el botón **Editar** .
2. Seleccione la pestaña **Página**.
3. Seleccione la categoría **Tamaño de la cuadrícula**.
4. Configure la opción **Coincidir ajuste del conjunto de páginas** en **Desactivado**.
5. Seleccione **Tamaño de cuadrícula**.
6. Seleccione un tamaño de cuadrícula en **Tamaños de cuadrícula optimizados** o establezca la cantidad de filas y columnas para crear un tamaño de cuadrícula personalizado.



A menos que esté creando una página completamente personalizada, se recomienda usar los tamaños de cuadrícula optimizados del conjunto de páginas. Los tamaños de cuadrícula optimizados muestran la página con contenido previamente introducido según lo diseñado por nuestro equipo clínico, mientras que otros tamaños de cuadrícula no lo hacen.



Si desea mostrar la barra de mensajes o la barra de herramientas, debe elegir un tamaño de cuadrícula de 3x3 o superior.

Para cambiar el tamaño de los espacios entre botones, consulte la sección *9.3.6 Margen de la cuadrícula del conjunto de páginas*.

Tabla 8.1 Ejemplos de tamaños de cuadrícula (no se incluyen todos los tamaños)



2x3



3x4



6x6

### 8.12.5 Color de fondo de la página



La configuración predeterminada de este parámetro se establece en la pestaña Conjunto de páginas. Si desea anular la configuración predeterminada del conjunto de páginas en esta instancia, configure la opción Coincidir ajuste del conjunto de páginas en **Desactivado**. Para alinear esta configuración con el resto del conjunto de páginas, configure la opción Coincidir ajuste del conjunto de páginas en **Activado**.

1. Navegue hasta la página en la que desea tener un color de fondo diferente.



2. Seleccione el botón **Editar**.
3. Seleccione la pestaña **Página**.
4. Seleccione la sección **Estilo**.
5. Configure la opción Ajustar el color de fondo de la página al conjunto de páginas en **Desactivado**.
6. Seleccione **Color**. Se abrirá la lista Color de fondo de la página.
7. Seleccione un color.

### 8.12.6 Mostrar/ocultar barra de mensajes



La configuración predeterminada de este parámetro se establece en la pestaña Conjunto de páginas. Si desea anular la configuración predeterminada del conjunto de páginas en esta instancia, configure la opción Coincidir ajuste del conjunto de páginas en **Desactivado**. Para alinear esta configuración con el resto del conjunto de páginas, configure la opción Coincidir ajuste del conjunto de páginas en **Activado**.

#### 8.12.6.1 Cambiar la visibilidad de la barra de mensajes



1. Seleccione el botón **Editar**.
2. Seleccione la pestaña **Página**.
3. Seleccione la categoría **Preferencias**.
4. Configure la opción **Coincidir ajuste del conjunto de páginas** en **Activado** para que coincida con la configuración indicada o en **Desactivado** para que la visibilidad de la barra de mensajes difiera en esta página del resto del conjunto de páginas.

### 8.12.7 Eliminar página



La eliminación es una operación permanente. Solo elimine una página si está seguro de que no la volverá a utilizar posteriormente.

1. Navegue hasta la página que desea eliminar.



2. Seleccione el botón **Editar**.
3. Seleccione la pestaña **Página**.



4. Seleccione **Eliminar**. Se abrirá el cuadro de diálogo Eliminar página.
5. Seleccione el botón **Eliminar** para eliminar la página de forma permanente o seleccione **Cancelar** para volver a la configuración de la página sin eliminar la página.

## 8.12.8 Importar/Exportar páginas

Consulte la sección 10.3 Paquetes de páginas.

## 8.13 Editar la barra de mensajes

1. Seleccione el botón **Editar** .
2. Seleccione el botón **Editar barra de mensajes**. Se abrirá el menú Editar barra de mensajes.



3. Los botones seleccionados se muestran en la barra de mensajes. Los botones no seleccionados están ocultos en la barra de mensajes.



**Figura 8.17** Menú Editar barra de mensajes



Los botones de la lista pueden aparecer desactivados, lo que indica que no hay suficiente espacio en la barra de mensajes para mostrarlos. Aumente la cantidad de columnas de la cuadrícula para que haya más espacio disponible en la barra de mensajes.

## 8.14 Editar la barra de herramientas



**Figura 8.18** La barra de herramientas de Core First, que se muestra en el Modo de edición, contiene botones, botones ocultos y un espacio vacío.

1. Seleccione el botón **Editar** .
2. Seleccione cualquier botón de la barra de herramientas para editarlo.  
Es posible que deba desplazarse para ver todo el contenido de la barra de herramientas o para acceder a los espacios vacíos en la barra de herramientas.
3. Haga clic y mantenga presionados los botones y, a continuación, arrástrelos para cambiar el orden de los botones dentro de la barra de herramientas.



No puede arrastrar botones entre la página y la barra de herramientas.

# 9 Configuración del conjunto de páginas

## 9.1 Conjunto de páginas

### 9.1.1 Seleccionar conjunto de páginas



1. Seleccione el botón **Editar**.
2. Seleccione la pestaña **Conjunto de páginas**.
3. Seleccione la fila en la sección **Conjunto de páginas del nombre de usuario**.
4. Seleccione un Conjunto de páginas de la lista.

### 9.1.2 Crear nuevo conjunto de páginas

**Crear un conjunto de páginas desde conjuntos de páginas preinstalados, copias de conjuntos de páginas de usuario existentes o desde un archivo local**



1. Seleccione el botón **Editar**.
2. Seleccione la pestaña **Conjunto de páginas**.
3. Seleccione la fila en la sección **Conjunto de páginas del nombre de usuario**.
4. Seleccione **Crear conjunto de páginas**.

Se abrirá el cuadro de diálogo Seleccionar conjunto de páginas.

5. Cómo elegir un conjunto de páginas:

#### Conjuntos de páginas preinstalados

- El conjunto de páginas de **Core First** incluye el contenido de Core First.
- Seleccione el conjunto de páginas **en blanco** para comenzar desde cero con una plantilla en blanco.

#### Conjuntos de páginas del usuario

- Seleccione un conjunto de páginas existente para usar como plantilla (crear una copia).

#### Archivos locales

- Importe un archivo de un conjunto de páginas (.sps) almacenado en su dispositivo local o en una unidad conectada.

6. Seleccione **Siguiente** para crear el nuevo conjunto de páginas.
7. Escriba un nombre para el nuevo conjunto de páginas.
8. Seleccione **Crear** para crear el conjunto de páginas. Seleccione **Cancelar** para volver a la configuración del conjunto de páginas sin crear el nuevo conjunto de páginas.

#### Descargar conjunto de páginas desde myTobiiDynavox



1. Seleccione el botón **Editar**.
2. Seleccione la pestaña **Conjunto de páginas**.
3. Seleccione el conjunto de páginas actual.
4. Seleccione **Descargar conjunto de páginas**.



Puede que se le pida que inicie sesión en myTobiiDynavox.

5. Seleccione un conjunto de páginas de la lista y, a continuación, seleccione **Descargar**.
6. Cuando la descarga haya finalizado, introduzca un nombre para el conjunto de páginas y seleccione **Guardar**.

### 9.1.3 Cambiar el nombre del conjunto de páginas y editar la descripción

1. Seleccione el botón **Editar** .
2. Seleccione la pestaña **Conjunto de páginas**.
3. En la lista de conjuntos de páginas del usuario, seleccione el botón **Editar**  que se encuentra junto al nombre del conjunto de páginas que desea cambiar. Se abrirá el cuadro de diálogo Editar información del conjunto de páginas.
4. Edite el texto en el campo **Nombre** o en el campo **Descripción**.
5. Seleccione **Guardar** para guardar sus cambios. Seleccione **Cancelar** para volver a la lista de conjuntos de páginas sin guardar.

### 9.1.4 Eliminar conjunto de páginas

1. Seleccione el botón **Editar** .
2. Seleccione la pestaña **Conjunto de páginas**.
3. En la lista de conjuntos de páginas del usuario, seleccione el botón **Eliminar**  que se encuentra junto al nombre del conjunto de páginas que desea eliminar.

 No puede eliminar el conjunto de páginas actualmente activo.

4. Seleccione el botón rojo **Eliminar**.
5. Seleccione **Eliminar** para eliminar el conjunto de páginas de forma permanente. Seleccione **Cancelar** para volver a la lista de conjuntos de páginas sin eliminar.

### 9.1.5 Configurar página de inicio

1. Seleccione el botón **Editar** .
2. Seleccione la pestaña **Conjunto de páginas**.
3. Seleccione **Página de inicio**.
4. Seleccione una página de la lista.

 Escriba en el campo Buscar para buscar una página específica o seleccione Recientemente abierta para buscar una página que ha visitado recientemente.

La página de inicio recomendada para los tamaños de cuadrícula de 1x1 a 2x3 es Navegación facilitada. Para tamaños de cuadrícula de 3x3 y superiores, la página de inicio sugerida es Vocabulario núcleo.

### 9.1.6 Configurar página de Teclado

1. Seleccione el botón **Editar** .
2. Seleccione la pestaña **Conjunto de páginas**.
3. Seleccione **página de Teclado**.
4. Seleccione una página de la lista.

 Escriba en el campo Buscar para buscar una página específica o seleccione Recientemente abierta para buscar una página que ha visitado recientemente.

Use el término de búsqueda "teclado" para ayudar a restringir los resultados de búsqueda a las páginas de Teclado.

## 9.2 Tamaño de la cuadrícula

El tamaño de cuadrícula seleccionado en Configuración del conjunto de páginas es el tamaño de cuadrícula predeterminado para el usuario. Todas las páginas se ajustarán de forma predeterminada al tamaño de cuadrícula seleccionado en Configuración del conjunto de páginas, a menos que se especifique lo contrario en Configuración de la página.

1. Seleccione el botón **Editar** .
2. Seleccione la pestaña **Conjunto de páginas**.
3. Seleccione la categoría **Tamaño de la cuadrícula**.
4. Seleccione un tamaño de cuadrícula en la lista de Tamaños de cuadrícula optimizados o seleccione la cantidad de filas y columnas para crear un tamaño de cuadrícula personalizado.

 A menos que esté creando una página completamente personalizada, se recomienda usar los tamaños de cuadrícula optimizados del conjunto de páginas. Los tamaños de cuadrícula optimizados muestran la página con contenido previamente introducido según lo diseñado por nuestro equipo clínico, mientras que otros tamaños de cuadrícula no lo hacen.

 Si desea mostrar la barra de mensajes o la barra de herramientas, debe elegir un tamaño de cuadrícula de 3x3 o superior.

Para cambiar el tamaño de los espacios entre botones, consulte la sección 9.3.6 *Margen de la cuadrícula del conjunto de páginas*.

Tabla 9.1 Ejemplos de tamaños de cuadrícula (no se incluyen todos los tamaños)



2x3

3x4

6x6

## 9.3 Estilo del conjunto de páginas

La configuración establecida en Estilo del conjunto de páginas define el aspecto del conjunto de páginas. Todas las páginas del conjunto de páginas, incluidas las páginas nuevas, utilizarán esta configuración de estilo a menos que se anulen manualmente a nivel de la página o del botón.

### 9.3.1 Tipo de letra de etiquetas de botones del conjunto de páginas

1. Seleccione el botón **Editar** .
2. Seleccione la pestaña **Conjunto de páginas**.
3. Seleccione la categoría **Estilo**.
4. Seleccione **Tamaño de letra** en Estilo.
5. Seleccione un tipo de letra.

### 9.3.2 Tamaño de letra de etiquetas de botones del conjunto de páginas

1. Seleccione el botón **Editar** .
2. Seleccione la pestaña **Conjunto de páginas**.
3. Seleccione la categoría **Estilo**.
4. Seleccione **Tamaño de letra** en Estilo.
5. Seleccione un tamaño de letra.

### 9.3.3 Etiquetas de botones del conjunto de páginas en negrita

1. Seleccione el botón **Editar** .
2. Seleccione la pestaña **Conjunto de páginas**.
3. Seleccione la categoría **Estilo**.
4. Seleccione **Negrita** en Estilo.
5. Active o Desactive la opción Negrita.

### 9.3.4 Diseño de botones del conjunto de páginas

1. Seleccione el botón **Editar** .
2. Seleccione la pestaña **Conjunto de páginas**.
3. Seleccione la categoría **Estilo**.
4. Seleccione **Diseño** en Estilo.
5. Seleccione un diseño de la lista.




Etiqueta superior, imagen inferior



Etiqueta inferior, imagen superior




Etiqueta izquierda, imagen derecha

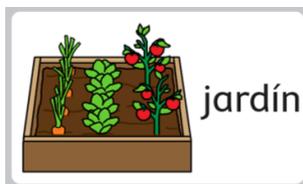

Etiqueta derecha, imagen izquierda




Solo etiqueta

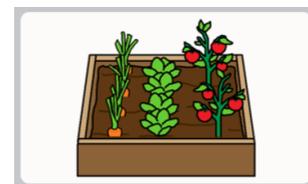


Solo imagen

### 9.3.5 Visualización de enlaces del conjunto de páginas

Configure la apariencia de los botones que conducen a otras páginas.

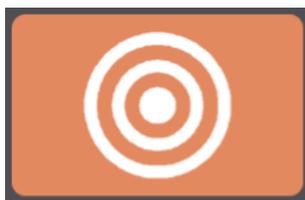

Estilo de visualización de enlaces:  
Ninguno

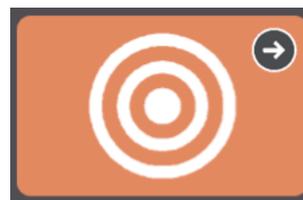

Estilo de visualización de enlaces:  
Íconos de navegación



Estilo de visualización de enlaces:  
Carpetas de enlaces

- **Ninguno:** coincide con el estilo del botón predeterminado del conjunto de páginas.
- **Íconos de navegación:** aparece un pequeño ícono en la esquina de los botones que indica una función (vincular a otra página, visitar la página o volver)
- **Carpetas de enlaces:** los botones de vínculo tienen forma de carpetas. (El estilo se aplica solo a los botones de enlace, no a los botones Volver o Visitar).

### 9.3.6 Margen de la cuadrícula del conjunto de páginas

Establezca el tamaño de los espacios entre los botones.

1. Seleccione el botón **Editar** .
2. Seleccione la pestaña **Conjunto de páginas**.
3. Seleccione la categoría **Estilo**.
4. Seleccione el **Factor de margen de cuadrícula** en Margen de cuadrícula.
5. Elija un tamaño de factor de margen de cuadrícula.

### 9.3.7 Colores de fondo predeterminados del conjunto de páginas

1. Seleccione el botón **Editar** .
2. Seleccione la pestaña **Conjunto de páginas**.
3. Seleccione la categoría **Estilo**.
4. Seleccione cualquiera de las siguientes filas para cambiar el color de fondo especificado:
  - **Fondo de la página:** color predeterminado para el fondo de la página.
  - **Fondo de la barra de herramientas:** color predeterminado para el fondo de la barra de herramientas.
  - **Fondo de la barra de mensajes:** color predeterminado para el fondo de la barra de mensajes (no la ventana de mensajes).

### 9.3.8 Tamaño de letra de la ventana de mensajes del conjunto de páginas

1. Seleccione el botón **Editar** .
2. Seleccione la pestaña **Conjunto de páginas**.
3. Seleccione la categoría **Estilo**.
4. Seleccione **Tamaño de letra** en Ventana de mensajes.
5. Elija un tamaño de letra.

### 9.3.9 Color del texto de la ventana de mensajes del conjunto de páginas

1. Seleccione el botón **Editar** .
2. Seleccione la pestaña **Conjunto de páginas**.
3. Seleccione la categoría **Estilo**.
4. Seleccione **Color de texto** en Ventana de mensajes.
5. Elija un color de texto.

## 9.4 Preferencias del conjunto de páginas

1. Seleccione el botón **Editar** .
2. Seleccione la pestaña **Conjunto de páginas**.
3. Seleccione **Preferencias**.
4. Seleccione cualquiera de las siguientes opciones para cambiar la configuración especificada:
  - **Barra de mensajes activada:** cuando está activada, la barra de mensajes se muestra en cada página de forma predeterminada.
  - **Ubicación de la barra de herramientas** - Elija mostrar la barra de herramientas en el lado izquierdo o derecho de cada página o desactivar la barra de herramientas.

## 9.5 Botones adaptables

 Esta sección se aplica solo a los dispositivos Tobii Dynavox I-13 e I-16.

Los botones adaptables que se encuentran en la parte frontal de los dispositivos Tobii Dynavox I-13 e I-16 pueden seleccionarse a través de Toque o Gaze Interaction. Dos de estos botones, el  y , pueden programarse con acciones de Snap Core First que se ejecutarán si se seleccionan con Gaze Interaction mientras se usa Snap Core First.

### Establecer acciones Gaze Interaction para los botones adaptables

1. Seleccione el botón **Editar** .
2. Seleccione la pestaña **Conjunto de páginas**.
3. Seleccione **Botones adaptables**.
4. Seleccione  o  de la lista.
5. Seleccione **Agregar acción**.
6. Seleccione una acción.

 Para agregar acciones adicionales, repita los pasos 5 y 6.

### Establecer acciones táctiles para los botones adaptables

 El comportamiento táctil del botón adaptable se establece en la aplicación de configuración de hardware de Tobii Dynavox. Puede iniciar esta aplicación directamente utilizando el acceso directo que se encuentra en su escritorio o mediante Snap Core First como se describe abajo.

1. Seleccione el botón **Editar** .
2. Seleccione la pestaña **Conjunto de páginas**.
3. Seleccione **Botones adaptables**.
4. Seleccione **Establecer acciones para tacto**. La aplicación de configuración de hardware de Tobii Dynavox se iniciará.
5. Use los menús desplegables en la aplicación de configuración de hardware para elegir las acciones para los botones adaptables cuando se seleccionan con Toque.

## 9.6 Acerca del conjunto de páginas

Esta sección muestra el número de versión del conjunto de páginas y la configuración del desarrollador de contenido.

### 9.6.1 Configuración del desarrollador de contenido del conjunto de páginas

Configuración especial para desarrolladores avanzados de conjuntos de páginas.

#### 9.6.1.1 Establecer tamaños de cuadrícula optimizados

Establezca qué tamaños de cuadrícula aparecen en la lista Tamaños de cuadrícula optimizados para este conjunto de páginas.

1. Seleccione el botón **Editar** .
2. Seleccione la pestaña **Conjunto de páginas**.
3. Seleccione **Acerca de**.
4. Seleccione **Configuración del desarrollador de contenido**.
5. Seleccione **Tamaños de cuadrícula**.

6. Para añadir un tamaño de cuadrícula a la lista, desplácese hacia la derecha y seleccione **Añadir nuevo tamaño**. Se abrirá el cuadro de diálogo Añadir tamaño de cuadrícula optimizado.
7. Elija la cantidad de **Filas** y **Columnas** para su nuevo tamaño de cuadrícula optimizado (hasta 15 x 15), luego seleccione **Guardar**.
8. Para eliminar un tamaño de cuadrícula optimizado, seleccione el ícono **Eliminar** en el tamaño de cuadrícula de la lista. Aparecerá la advertencia Eliminar tamaño de cuadrícula. Si está seguro de que desea eliminar el tamaño de la cuadrícula, seleccione **Eliminar**. De lo contrario, seleccione **Cancelar** para cerrar la advertencia sin eliminar.

### 9.6.1.2 Reglas de idioma del conjunto de páginas

La configuración de las reglas de idioma del conjunto de páginas establece las reglas de idioma predeterminadas para los botones y las páginas del conjunto de páginas. La configuración de las reglas de idioma controla el idioma que se usará para la búsqueda de símbolo, la simbolización, la predicción de palabras, la flexión, la transformación automática y la voz hablante (si se ha configurado una voz específica del idioma).

Los botones heredan una configuración predeterminada de reglas de idioma de la configuración del conjunto de páginas o de la configuración de la página. Al configurar las reglas de idioma del conjunto de páginas, todos los botones existentes en el conjunto de páginas adoptarán esa configuración y los nuevos botones creados en el conjunto de páginas también se ajustarán a esa configuración de manera predeterminada. Para cambiar las reglas de idioma de páginas específicas en el conjunto de páginas, consulte la sección 8.12.3 *Reglas de idioma de la página*. Para cambiar las reglas de idioma de botones específicos, consulte la sección 8.10 *Reglas de idioma del botón*.



1. Seleccione el botón **Editar**.
2. Seleccione la pestaña **Conjunto de páginas**.
3. Seleccione **Acerca de**.
4. Seleccione **Configuración del desarrollador de contenido**.
5. Seleccione **Reglas de idioma**.
6. Seleccione un idioma de la lista:
  - a. **Idiomas con soporte completo**: afectan la búsqueda de símbolo, la simbolización, la predicción de palabras, la flexión, la transformación automática y la voz hablante (si se ha configurado una voz específica del idioma).
  - b. **Otros idiomas**: los idiomas de esta categoría tienen distintos niveles de compatibilidad dentro de la aplicación Snap + Core First.

# 10 Compartir y guardar

Snap + Core First de Tobii Dynavox ofrece varias maneras prácticas de compartir y guardar usuarios, conjuntos de páginas y páginas. Ya sea que desee conservar el mismo conjunto de páginas en todos sus dispositivos o enviar algunas páginas nuevas a un amigo, ¡tenemos lo que necesita!

- **Exportar/Importar localmente** (usuario, conjunto de páginas, paquete de páginas): utilice esta función cuando almacene el archivo en el equipo local, cuando lo comparta en una unidad USB o con personas que no tengan una cuenta myTobiiDynavox.
- **Exportar/Importar a través de myTobiiDynavox\*** (conjunto de páginas, paquete de páginas): comparta conjuntos de páginas y paquetes de páginas con otros usuarios de myTobiiDynavox. Almacene y acceda a los archivos de forma privada en su propia cuenta myTobiiDynavox.
- **Sincronizar\*** (conjuntos de páginas): comparta los cambios realizados en un conjunto de páginas en sus dispositivos y con los usuarios de myTobiiDynavox específicos. Un conjunto de páginas compartido a través de la sincronización guarda una versión actualizada del conjunto de páginas en la nube, de modo que los cambios realizados en el conjunto de páginas en cualquier dispositivo o cuenta aprobados se comparten en todos los dispositivos o cuentas sincronizados para ese conjunto de páginas.

\*Estos métodos de intercambio requieren una conexión activa a Internet.

Tabla 10.1 Tipos de archivos para compartir y guardar: contenido

Tipo de archivo	Páginas	Preferencias de página	Preferencias del conjunto de páginas	Preferencias del usuario	Preferencias del sistema
Usuario	Sí	Sí	Sí	Sí	No
Conjunto de páginas	Sí	Sí	Sí	No	No
Paquete de páginas	Sí (páginas específicas)	Sí	No	No	No

## 10.1 Usuarios

Los archivos de copia de seguridad del usuario contienen los conjuntos de páginas y la configuración asociados con ese usuario. Los archivos de copia de seguridad del usuario no contienen voces. Sin embargo, la configuración de voz se conserva y la voz seleccionada se descarga automáticamente si no está disponible en el dispositivo (se requiere conexión a Internet).

### 10.1.1 Realizar una copia de seguridad de un usuario

Consulte la sección 11.3 *Realizar una copia de seguridad de un usuario*.

### 10.1.2 Restaurar un usuario

Consulte la sección 11.4 *Restaurar un usuario*.

## 10.2 Conjuntos de páginas

Un archivo de un conjunto de páginas contiene todas las páginas asociadas con ese conjunto de páginas. No contiene ninguna información del usuario ni la configuración del nivel de usuario.

## 10.2.1 Cómo importar un conjunto de páginas

### Desde myTobiiDynavox

1. Seleccione el botón **Editar** .
2. Seleccione la pestaña **Conjunto de páginas**.
3. Seleccione el conjunto de páginas actual.
4. Seleccione **Descargar conjunto de páginas**.



Puede que se le pida que inicie sesión en myTobiiDynavox.

5. Seleccione un conjunto de páginas de la lista y, a continuación, seleccione **Descargar**.
6. Cuando la descarga haya finalizado, introduzca un nombre para el conjunto de páginas y seleccione **Guardar**.

### Desde un archivo local

1. Seleccione el botón **Editar** .
2. Seleccione la pestaña **Conjunto de páginas**.
3. Seleccione el conjunto de páginas actual.
4. Seleccione **Crear conjunto de páginas**.
5. Seleccione la pestaña **Archivos locales**.
6. Seleccione **Explorar**.
7. Navegue hasta el archivo `.sps` deseado, selecciónelo y, a continuación, seleccione **Abrir**.
8. Seleccione **Siguiente**.
9. Introduzca un nombre único para el conjunto de páginas y seleccione **Crear**.

## 10.2.2 Guardar una copia de un conjunto de páginas

### 10.2.2.1 Guardar un conjunto de páginas en myTobiiDynavox

Los archivos de conjuntos de páginas guardados en myTobiiDynavox están disponibles en myTobiiDynavox.com en Mis cosas > Snap > Conjuntos de páginas.

1. Seleccione el botón **Editar** .
2. Seleccione la pestaña **Conjunto de páginas**.
3. Seleccione el conjunto de páginas actual.
4. Seleccione el ícono **Guardar**  que se encuentra junto al conjunto de páginas que desea guardar.
5. Seleccione **Guardar una copia en myTobiiDynavox**.



Puede que se le pida que inicie sesión en myTobiiDynavox.

6. Introduzca un nombre único para el conjunto de páginas y (opcionalmente) una descripción, luego seleccione **Guardar**.
7. Una barra de estado muestra el progreso de guardado. Cuando termine, seleccione **Listo**.

### 10.2.2.2 Guardar conjunto de páginas localmente

1. Seleccione el botón **Editar** .
2. Seleccione la pestaña **Conjunto de páginas**.
3. Seleccione el conjunto de páginas actual.
4. Seleccione el ícono **Guardar**  que se encuentra junto al conjunto de páginas que desea guardar.

5. Seleccione **Guardar una copia en un archivo local**.
6. Introduzca un nombre único para el conjunto de páginas y (opcionalmente) una descripción, luego seleccione **Siguiente**.
7. Seleccione **Explorar**. Navegue hasta el directorio donde desea guardar el archivo del conjunto de páginas y seleccione **Guardar**.
8. Seleccione **Guardar**.
9. Una barra de estado muestra el progreso de guardado. Cuando termine, seleccione **Listo**.

### 10.2.3 Compartir una copia de un conjunto de páginas (a través de myTobiiDynavox)

1. Seleccione el botón **Editar** .
2. Seleccione la pestaña **Conjunto de páginas**.
3. Seleccione el ícono **Compartir conjunto de páginas**  que se encuentra junto al conjunto de páginas que desea compartir.
4. Seleccione **Compartir una copia**.
5. Introduzca un nombre único para el conjunto de páginas y (opcionalmente) una descripción, luego seleccione **Siguiente**.
6. Introduzca el nombre de usuario de myTobiiDynavox o la cuenta de correo electrónico de la persona a la que le va a enviar el conjunto de páginas y, a continuación, seleccione el signo **+** para agregar la persona a la lista de destinatarios. Repita este proceso para agregar destinatarios adicionales. Cuando haya agregado todos los destinatarios, seleccione **Compartir**.
7. Una barra de estado muestra el progreso del intercambio. Cuando termine, seleccione **Listo**.

 Si desea guardar una copia de un conjunto de páginas localmente (para compartir a través de una unidad USB, correo electrónico, etc.), consulte la sección *10.2.2.2 Guardar conjunto de páginas localmente*.

### 10.2.4 Sincronizar un conjunto de páginas

La sincronización es una forma fácil de mantener la misma versión de un conjunto de páginas configurada en varios dispositivos. La sincronización almacena una versión actualizada de su conjunto de páginas en la nube. Cuando presiona el botón Sincronización, envía los cambios que realizó al conjunto de páginas en su dispositivo local y también recibe los cambios que se realizaron en otros dispositivos (sincronizados).\* Cuando todos los dispositivos se han sincronizado, todos tienen la misma versión del conjunto de páginas.

El botón Sincronización en la barra superior le permite saber si hay una versión actualizada del conjunto de páginas disponible o si tiene cambios locales para enviar a la nube.

\*La sincronización no admite la combinación de cambios realizados en varios dispositivos para la misma página en la misma sincronización. Si se realizan cambios en la misma página al mismo tiempo desde varios dispositivos, el último dispositivo en sincronizar se sobrescribirá con su versión de la página. Las personas involucradas en la edición de un conjunto de páginas sincronizado deben comunicar qué páginas están editando y sincronizar con frecuencia para evitar sincronizar los cambios en la misma página al mismo tiempo.

 Al sincronizar en varios dispositivos o usuarios, la configuración del tipo de navegación debe coincidir con todos los dispositivos o usuarios que realizan la sincronización. Consulte la sección *11.12 Método de acceso*.

#### 10.2.4.1 Sincronizar un conjunto de páginas en myTobiiDynavox

Cuando sincronice un conjunto de páginas en myTobiiDynavox, se almacenará una copia de su conjunto de páginas en el servidor myTobiiDynavox. Puede utilizar esto como un sistema de copia de seguridad del conjunto de páginas rápido y sencillo y, si tiene otros dispositivos que ejecutan Snap + Core First, también puede sincronizar el conjunto de páginas en esos dispositivos.

## Configurar el conjunto de páginas para sincronizar

1. Seleccione el botón **Sincronización**  en la barra superior. Puede que se le pida que introduzca su nombre de usuario y contraseña de myTobiiDynavox.
2. Seleccione **Sincronización**
3. ¡Eso es todo! El conjunto de páginas ahora está sincronizado con su cuenta myTobiiDynavox.



Cada vez que edite su conjunto de páginas, debe seleccionar el botón Sincronización en la barra superior para enviar esos cambios a la nube.

## Sincronizar el conjunto de páginas en dispositivos adicionales

Si un conjunto de páginas ya está configurado para sincronizarse en uno de sus dispositivos, puede sincronizar dispositivos adicionales mediante los siguientes pasos en cada dispositivo.

1. Seleccione el botón **Sincronización**  en la barra superior. Puede que se le pida que introduzca su nombre de usuario y contraseña de myTobiiDynavox.
2. Seleccione el ícono **Descargar conjunto de páginas** .
3. Seleccione el conjunto de páginas que desea descargar y sincronizar, luego seleccione **Descargar**.
4. Cuando finalice la descarga, seleccione **Listo**.

El conjunto de páginas sincronizado descargado se configura automáticamente para ser el conjunto de páginas activo.



Cada vez que edite su conjunto de páginas, debe seleccionar el botón Sincronización en la barra superior para enviar esos cambios a la nube y permitir que otros dispositivos puedan acceder a ese conjunto de páginas actualizado para su sincronización. Es una buena práctica sincronizar antes de realizar cambios en el conjunto de páginas y volver a sincronizar tan pronto como termine de editar.

### 10.2.4.2 Invitar a alguien a sincronizar con su conjunto de páginas

Cuando otros usuarios de myTobiiDynavox sincronizan con su conjunto de páginas, pueden realizar cambios en el conjunto de páginas de sus dispositivos y sincronizar esos cambios en la nube. La próxima vez que sincronice en su dispositivo, recibirá esos cambios. Del mismo modo, cuando realice cambios en el conjunto de páginas y luego sincronice, esos cambios estarán disponibles para los demás usuarios con quienes haya permitido la sincronización de su conjunto de páginas.

La sincronización no puede combinar los cambios de varios usuarios que hayan editado la misma página al mismo tiempo. En este caso, el último usuario en sincronizar sobrescribirá la página con su versión. Debe sincronizar inmediatamente antes y después de realizar cambios en el conjunto de páginas y comunicarse con otros usuarios que sincronizan con su conjunto de páginas para evitar editar la misma página al mismo tiempo.

Solo debe sincronizar con personas de su confianza para realizar los cambios apropiados en su conjunto de páginas.



Cada vez que edite su conjunto de páginas, debe seleccionar el botón Sincronización en la barra superior para enviar esos cambios a la nube y permitir que otros dispositivos o usuarios puedan acceder a ese conjunto de páginas actualizado para su sincronización.



Es una buena práctica sincronizar antes de realizar cambios en el conjunto de páginas y volver a sincronizar tan pronto como termine de editar.

1. Seleccione el botón **Sincronización**  en la barra superior. Puede que se le pida que introduzca su nombre de usuario y contraseña de myTobiiDynavox.
2. Seleccione el ícono **Compartir conjunto de páginas** .
3. Introduzca el nombre de usuario de myTobiiDynavox o la dirección de correo electrónico de la persona con quien va a compartir el conjunto de páginas y, a continuación, seleccione el signo + para agregar la persona a la lista de

destinatarios. Repita este proceso para agregar destinatarios adicionales. Cuando haya agregado todos los destinatarios, seleccione **Compartir**.

4. Cuando el proceso de intercambio haya finalizado, seleccione **Listo**. Los destinatarios recibirán alertas de sincronización por correo electrónico y en la aplicación Snap + Core First.



Las alertas de sincronización pueden tardar hasta una hora en aparecer después de que se haya enviado la invitación. Puede verificar las alertas en cualquier momento al seleccionar el ícono Sincronización.

#### 10.2.4.2.1 Revocar permisos de sincronización

Puede eliminar usuarios de los conjuntos de páginas sincronizados (que sean suyos) en cualquier momento.

1. Seleccione el botón **Sincronización**  en la barra superior.
2. Seleccione el ícono **Compartir conjunto de páginas** .
3. Los usuarios con permiso de sincronización del conjunto de páginas actual aparecen en el cuadro azul. Para eliminar un usuario, seleccione la **X** junto a su nombre o dirección de correo electrónico y, a continuación, seleccione **Actualizar**.
4. Seleccione **Listo**.

#### 10.2.4.3 Sincronización con conjuntos de páginas de terceros

Cuando alguien comparte un conjunto de páginas para sincronizar con usted, el ícono de sincronización en la barra superior mostrará un ícono de alerta . Siga los pasos que se indican a continuación para aceptar o rechazar la invitación.

Las alertas de sincronización pueden tardar hasta una hora en aparecer después de que se haya enviado la invitación.

##### Aceptar la invitación de sincronización

1. Seleccione el botón **Sincronización**  en la barra superior.
2. Seleccione el ícono **Descargar conjunto de páginas** .
3. Seleccione **Buscar conjuntos de páginas disponibles en su cuenta myTobiiDynavox**.
4. Seleccione el conjunto de páginas que desea descargar y sincronizar, luego seleccione **Descargar**.
5. Cuando finalice la descarga, seleccione **Listo**.

##### Rechazar invitación de sincronización

1. Seleccione el botón **Sincronización**  en la barra superior.
2. Seleccione el ícono **Descargar conjunto de páginas** .
3. Seleccione **Buscar conjuntos de páginas disponibles en su cuenta myTobiiDynavox**.
4. Seleccione el conjunto de páginas que desea rechazar y, a continuación, seleccione el ícono **Eliminar** .
5. Seleccione **Rechazar**.

#### 10.2.4.4 Revertir el conjunto de páginas sincronizado a una versión guardada anteriormente

Puede volver a una versión anterior de un conjunto de páginas sincronizado. Esta función es útil si ha realizado cambios en el conjunto de páginas que desea descartar o deshacer.

1. Seleccione el botón **Sincronización**  en la barra superior.
2. Seleccione **Versiones guardadas**.
3. Busque la fecha de sincronización en la lista que desea restaurar, luego seleccione **Restaurar**.

### 10.2.4.5 Sobrescribir un conjunto de páginas sincronizado

Use la función Sobrescribir para garantizar que su versión actual del conjunto de páginas sea la versión del conjunto de páginas que también está almacenada en la nube (independientemente de los cambios que otros usuarios hayan sincronizado).

1. Seleccione el botón **Sincronización**  en la barra superior.
2. Seleccione **Avanzado**.
3. Seleccione **Sobrescribir**.

### 10.2.4.6 Sincronización en Modo de solo extracción

Cuando sincronice en Modo de solo extracción, recibirá cambios en el conjunto de páginas (realizados en otros dispositivos) pero no enviará ningún cambio en el conjunto de páginas realizado en el dispositivo actual. Para usar el Modo de solo extracción, el acceso al Modo de edición debe restringirse con un código de acceso. Para configurar un código de acceso y el Modo de solo extracción, consulte la sección *12.1.1 Código de acceso*.

## 10.3 Paquetes de páginas

Puede compartir un subconjunto de su conjunto de páginas (una o más páginas de su elección) como un paquete de páginas. Los paquetes de páginas contienen solo las páginas especificadas. Si las páginas contienen botones con enlaces a páginas que no existen en el dispositivo del destinatario, los enlaces no harán nada.

### 10.3.1 Exportar paquete de páginas

#### 10.3.1.1 Exportar paquete de páginas a myTobiiDynavox

1. Seleccione el botón **Editar** .
2. Seleccione la pestaña **Página**.
3. Seleccione **Importar/Exportar páginas**.
4. Seleccione **Exportar paquete de páginas**.
5. Seleccione **A myTobiiDynavox**.
6. Seleccione las páginas que desea incluir en el paquete de páginas. Las páginas seleccionadas muestran una marca de verificación en la lista y aparecen en el cuadro azul.



La página actual se incluye automáticamente en el paquete de páginas. Para eliminar esta o cualquier otra página del paquete de páginas, seleccione la X que se encuentra junto al nombre de la página en el cuadro azul.

7. Cuando haya agregado las páginas deseadas al paquete de páginas, seleccione **Siguiente**. Se abrirá el cuadro de diálogo Nombre del paquete de páginas.
8. Introduzca un nombre para el paquete de páginas en el campo Nombre y (opcionalmente) describa las páginas en el campo Descripción.
9. Seleccione **Exportar** para guardar el paquete de páginas en myTobiiDynavox.
10. Cuando finalice la exportación, seleccione **Listo**.

#### 10.3.1.2 Exportar paquete de páginas a un archivo local

1. Seleccione el botón **Editar** .
2. Seleccione la pestaña **Página**.
3. Seleccione **Importar/Exportar páginas**.
4. Seleccione **Exportar paquete de páginas**.
5. Seleccione **A un archivo local**.
6. Seleccione las páginas que desea incluir en el paquete de páginas. Las páginas seleccionadas muestran una marca de verificación en la lista y aparecen en el cuadro azul.



La página actual se incluye automáticamente en el paquete de páginas. Para eliminar esta o cualquier otra página del paquete de páginas, seleccione la X que se encuentra junto al nombre de la página en el cuadro azul.

7. Cuando haya agregado las páginas deseadas al paquete de páginas, seleccione **Siguiente**. Se abrirá el cuadro de diálogo Nombre del paquete de páginas.
8. Introduzca un nombre para el paquete de páginas en el campo Nombre y (opcionalmente) describa las páginas en el campo Descripción.
9. (Solo Windows) Seleccione **Siguiente**.
10. (Solo Windows) Seleccione **Explorar**. Navegue hasta el directorio donde desea guardar el archivo del conjunto de páginas y seleccione **Guardar**.
11. Seleccione **Exportar**.
12. Cuando finalice la exportación, seleccione **Listo**.

### 10.3.1.3 Exportar paquete de páginas para compartir (a través de myTobiiDynavox)



1. Seleccione el botón **Editar**.
2. Seleccione la pestaña **Página**.
3. Seleccione **Importar/Exportar páginas**.
4. Seleccione **Exportar paquete de páginas**.
5. Seleccione **Para compartir**.
6. Seleccione las páginas que desea incluir en el paquete de páginas. Las páginas seleccionadas muestran una marca de verificación en la lista y aparecen en el cuadro azul.



La página actual se incluye automáticamente en el paquete de páginas. Para eliminar esta o cualquier otra página del paquete de páginas, seleccione la X que se encuentra junto al nombre de la página en el cuadro azul.

7. Cuando haya agregado las páginas deseadas al paquete de páginas, seleccione **Siguiente**. Se abrirá el cuadro de diálogo Nombre del paquete de páginas.
8. Introduzca un nombre para el paquete de páginas en el campo Nombre y (opcionalmente) describa las páginas en el campo Descripción.
9. Seleccione **Siguiente**. Se abrirá el diálogo Compartir paquete de páginas.
10. Introduzca el nombre de usuario de myTobiiDynavox o la cuenta de correo electrónico de la persona a la que le va a enviar el conjunto de páginas y, a continuación, seleccione el signo **+** para agregar la persona a la lista de destinatarios. Repita este proceso para agregar destinatarios adicionales. Cuando haya agregado todos los destinatarios, seleccione **Compartir**.
11. Cuando finalice la exportación, seleccione **Listo**.



Si desea guardar un paquete de páginas localmente (para compartir por correo electrónico, unidad USB, etc.), consulte la sección *10.3.1.2 Exportar paquete de páginas a un archivo local*.

## 10.3.2 Importar paquete de páginas

### 10.3.2.1 Importar paquete de páginas desde myTobiiDynavox

Use esta opción para importar un paquete de páginas que haya guardado en su propia cuenta myTobiiDynavox o un paquete de páginas que otro usuario de myTobiiDynavox haya compartido con usted.



1. Seleccione el botón **Editar**.
2. Seleccione la pestaña **Página**.
3. Seleccione **Importar/Exportar páginas**.
4. Seleccione **Importar paquete de páginas**.
5. Seleccione **Desde myTobiiDynavox**. Se abrirá el cuadro de diálogo Seleccionar paquete de páginas desde myTobiiDynavox.
6. Seleccione un paquete de páginas de la lista.
7. Para descargar el paquete de páginas seleccionado, seleccione **Siguiente**.

8. Revise la lista de páginas incluidas en el paquete de páginas. Para continuar con la importación del paquete de páginas, seleccione **Importar**. Para cancelar la importación del paquete de páginas, seleccione **Cancelar**.



Los conflictos de página se producen cuando el paquete de páginas contiene una o más páginas que ya existen en el dispositivo, pero que no son idénticas. Seleccione cada ícono de conflicto de página  y, a continuación, elija si desea conservar la página existente o sobrescribirla con la página importada del paquete de páginas. Debe resolver todos los conflictos de página de esta manera antes de continuar con la importación del Paquete de páginas.

### 10.3.2.2 Importar paquete de páginas desde un archivo local



1. Seleccione el botón **Editar**.
2. Seleccione la pestaña **Página**.
3. Seleccione **Importar/Exportar páginas**.
4. Seleccione **Importar paquete de páginas**.
5. Seleccione **Desde un archivo local**.
6. Seleccione **Explorar**. Navegue hasta el archivo del paquete de páginas (.spb) que desea importar y selecciónelo, luego seleccione **Abrir**.
7. Seleccione **Siguiente**. Se abrirá el cuadro de diálogo Revisar paquete de páginas.
8. Revise la lista de páginas incluidas en el paquete de páginas. Para continuar con la importación del paquete de páginas, seleccione **Importar**. Para cancelar la importación del paquete de páginas, seleccione **Cancelar**.



Los conflictos de página se producen cuando el paquete de páginas contiene una o más páginas que ya existen en el dispositivo, pero que no son idénticas. Seleccione cada ícono de conflicto de página  y, a continuación, elija si desea conservar la página existente o sobrescribirla con la página importada del paquete de páginas. Debe resolver todos los conflictos de página de esta manera antes de continuar con la importación del Paquete de páginas.

### 10.3.2.3 Importar paquete de páginas y crear un enlace

Puede importar un paquete de páginas y crear un enlace de una sola vez con la función Importar y vincular.

Consulte la sección 8.9.6 *Importar y vincular a una página*.

# 11 Configuración de usuario

La configuración de usuario ayuda a personalizar la experiencia del usuario en el software Snap. Cada usuario puede tener su propia configuración personalizada que se aplica al cargar el usuario en el software.

## 11.1 Cambiar usuario

1. Seleccione el botón **Editar** .
2. Seleccione la pestaña **Usuario**.
3. Seleccione el usuario actual.
4. Seleccione un usuario de la lista Seleccionar un usuario.



El usuario con la marca de verificación es el usuario actualmente activo.

## 11.2 Cambiar tamaños de cuadrícula en todas las páginas

1. Seleccione el botón **Editar** .
2. Seleccione la pestaña **Usuario**.
3. Seleccione **Nuevo usuario**.
4. Siga los pasos que se indican en el Asistente de configuración de usuario para crear un usuario nuevo. Seleccione la **X** para cancelar la creación de un usuario nuevo.

## 11.3 Realizar una copia de seguridad de un usuario

### Hacer una copia de seguridad en myTobiiDynavox

1. Seleccione el botón **Editar** .
2. Seleccione la pestaña **Usuario**.
3. Seleccione la flecha a la derecha del usuario actual.
4. Seleccione el botón **Copia de seguridad**  que se encuentra junto al nombre del usuario del que desea realizar la copia de seguridad.
5. Seleccione **Hacer una copia de seguridad en myTobiiDynavox**.



Si no ha iniciado sesión en su cuenta myTobiiDynavox, se le pedirá que lo haga en este momento.

6. Introduzca un nombre para el archivo de copia de seguridad de su usuario y luego seleccione **Siguiente**.



Es útil incluir la fecha de la copia de seguridad en el nombre del archivo.

7. Seleccione **Listo**.



Los archivos de copia de seguridad del usuario local también pueden moverse manualmente a myTobiiDynavox. Utilice su navegador de Internet para ir a myTobiiDynavox.com e inicie sesión, luego vaya a *Snap > Copias de seguridad* y seleccione **Cargar copia de seguridad**.



### Hacer una copia de seguridad de un archivo local

1. Seleccione el botón **Editar** .
2. Seleccione la pestaña **Usuario**.
3. Seleccione la flecha a la derecha del usuario actual.
4. Seleccione el botón **Copia de seguridad**  que se encuentra junto al nombre del usuario del que desea realizar la copia de seguridad.
5. Seleccione **Hacer una copia de seguridad en un archivo local**.
6. (Windows) **Navegue** hasta el directorio donde desea guardar el archivo de copia de seguridad y, a continuación, seleccione **Guardar**.  
(iOS) Escriba un nombre para el archivo de copia de seguridad.
7. Seleccione **Realizar copia de seguridad**.

## 11.4 Restaurar un usuario

### Restaurar un usuario desde myTobiiDynavox


1. Seleccione el botón **Editar** .
2. Seleccione la pestaña **Usuario**.
3. Seleccione la flecha a la derecha del usuario actual.
4. Seleccione **Nuevo usuario**.
5. Seleccione **Restaurar usuario existente**.
6. Si actualmente no ha iniciado sesión en myTobiiDynavox, ingrese su correo electrónico y contraseña, luego seleccione **Siguiente**.
7. Seleccione un archivo de copia de seguridad de usuario de la lista y, a continuación, seleccione **Siguiente**.

## Restaurar un usuario desde un archivo local




En iOS, los archivos de copia de seguridad de usuario local que se crearon en un dispositivo diferente primero se deben mover a la aplicación Snap + Core First a través de iTunes:

- Abra iTunes en su Mac o PC.
- Conecte el iPad al ordenador con el cable USB que viene con el dispositivo.
- Seleccione su dispositivo en iTunes.

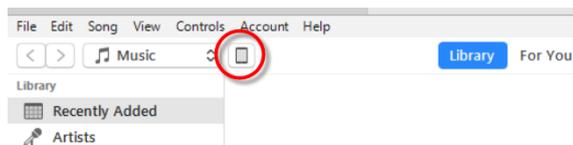

- En la barra lateral izquierda, seleccione **Aplicaciones**. A continuación, desplácese a la sección Comparar archivos ubicada en la parte inferior de la página.
- Seleccione **Snap + Core First**.

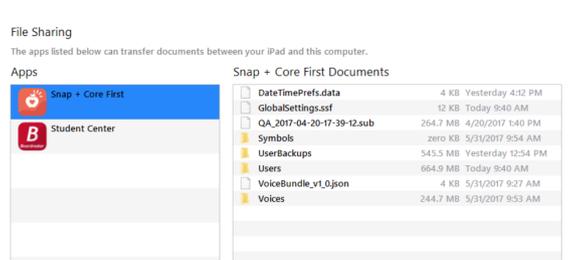

- Arrastre los archivos de copia de seguridad de usuario al área Documentos Snap + Core First.
- Siga los pasos que se indican a continuación para restaurar el usuario en su iPad.



- Seleccione el botón **Editar**.
- Seleccione la pestaña **Usuario**.
- Seleccione la flecha a la derecha del usuario actual.
- Seleccione **Nuevo usuario**.
- Seleccione **Restaurar usuario existente**.
- Seleccione **Restaurar desde un archivo local**.
- (Windows) Navegue hasta el archivo de copia de seguridad de usuario, selecciónelo y, a continuación, seleccione **Abrir**.  
(iOS) Seleccione un archivo de copia de seguridad de usuario de la lista y, a continuación, seleccione **Restaurar usuario**.

## 11.5 Editar/cambiar el nombre de un usuario



- Seleccione el botón **Editar**.
- Seleccione la pestaña **Usuario**.
- Seleccione el botón **Editar**  que se encuentra junto al nombre del usuario que desea editar.
- Escriba en el campo **Nombre**.
- Seleccione **Guardar** para guardar los cambios o **Cancelar** para descartarlos.

## 11.6 Eliminar un usuario



La eliminación de un usuario es una operación permanente. Si cree que puede necesitar el usuario más tarde, cree una copia de seguridad del usuario *11.3 Realizar una copia de seguridad de un usuario* antes de realizar la operación de eliminación.

1. Seleccione el botón **Editar** .
2. Seleccione la pestaña **Usuario**.
3. Seleccione el botón **Eliminar**  que se encuentra junto al nombre del usuario que desea eliminar.

 No puede eliminar el usuario actualmente activo.

4. Seleccione el botón rojo **Eliminar**.
5. Seleccione **Eliminar** para eliminar el usuario de forma permanente. Seleccione **Cancelar** para volver al menú de configuración sin eliminar el usuario.

## 11.7 Inicio de sesión en la cuenta myTobiiDynavox

 Para iniciar sesión en la cuenta myTobiiDynavox es necesario tener una conexión a Internet activa.

Algunos servicios en Snap + Core First, como la sincronización, requieren que inicie sesión con su cuenta myTobiiDynavox. Seleccione **Iniciar sesión** para ingresar sus credenciales de myTobiiDynavox o para crear una nueva cuenta myTobiiDynavox. Si ya ha iniciado sesión, su nombre de usuario o correo electrónico de myTobiiDynavox aparecerán en la sección Cuenta myTobiiDynavox.

## 11.8 Voz

### 11.8.1 Voz hablante

La voz hablante es la voz que lee el contenido de la ventana de mensajes y los mensajes del botón.

La voz hablante es la voz predeterminada; no está vinculada a un idioma específico. Si se asignaron voces específicas de diferentes idiomas, se usará la voz específica de cada idioma. Para asignar voces específicas de diferentes idiomas, consulte [11.10 Voces específicas de diferentes idiomas](#).



**Figura 11.1** Pestaña Usuario: Voz hablante

1. Seleccione el botón **Editar** .
2. Seleccione la pestaña **Usuario**.
3. Seleccione **Voz hablante**.

#### 11.8.1.1 Voces instaladas

Son las voces disponibles actualmente para su uso inmediato en el dispositivo. Incluyen tanto voces previamente instaladas como voces descargadas en el dispositivo.

 Puede eliminar voces de la lista de voces instaladas, pero no puede eliminar la voz actualmente activa.

### 11.8.1.2 Descargar voces

Descarga voces nuevas.

 Debe tener una conexión a Internet activa para descargar voces.

1. Seleccione el botón **Editar** .
2. Seleccione la pestaña **Usuario**.
3. Seleccione **Voz hablante**.
4. En la lista de voces descargables, seleccione la opción **Descargar** que se encuentra junto a la voz que desea descargar.

 En iOS, la descarga de voz se detiene cuando se minimiza la aplicación Snap + Core First.

### 11.8.1.3 Voces del sistema

Son las voces provistas por su sistema operativo.

## 11.8.2 Velocidad de voz

La velocidad de voz es la velocidad a la que se reproducen las palabras.

1. Seleccione el botón **Editar** .
2. Seleccione la pestaña **Usuario**.
3. Mueva el **control deslizante de Velocidad de voz** hacia la izquierda para disminuir la velocidad de la voz o hacia la derecha para aumentar la velocidad de la voz.

## 11.8.3 Excepciones de pronunciación


Las excepciones de pronunciación son palabras o siglas que usted le enseña a la voz a pronunciar de una manera específica. Las excepciones de pronunciación se agregan a la voz que está activa cuando se crean las excepciones de pronunciación. Si cambia a una voz diferente y desea usar las mismas excepciones de pronunciación, debe importar las excepciones de pronunciación de la voz anterior.

Las excepciones de pronunciación también están disponibles para voces específicas de diferentes idiomas. Consulte la sección *11.10 Voces específicas de diferentes idiomas*.

 Las excepciones de pronunciación no se pueden importar entre plataformas (Windows ↔ iOS).

### Crear una nueva excepción de pronunciación

1. Seleccione el botón **Editar** .
2. Seleccione la pestaña **Usuario**.
3. Seleccione **Excepciones de pronunciación**.
4. Seleccione **Añadir excepción de pronunciación**.  
Se abrirá el cuadro de diálogo Añadir excepción de pronunciación.

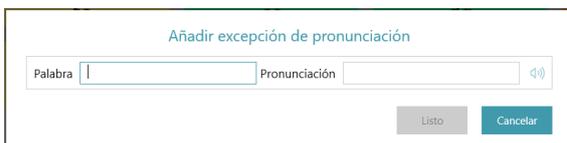

5. En el campo **Palabra**, escriba la palabra tal como está escrita.
6. En el campo **Pronunciación**, escriba fonéticamente la palabra como desea que se pronuncie.

Para verificar la pronunciación, seleccione el botón Vista previa.

7. Seleccione **Listo** para guardar la excepción de pronunciación. Seleccione **Cancelar** para descartar sus cambios y volver a la configuración de usuario.

### Importar una excepción de pronunciación

1. Seleccione el botón **Editar** .
2. Seleccione la pestaña **Usuario**.
3. Seleccione **Excepciones de pronunciación**.
4. Seleccione **Importar desde otra voz**.



5. Seleccione la voz con las excepciones de pronunciación que desea importar.



Solo aparecerán en la lista las voces que tengan excepciones de pronunciación asociadas.

6. Seleccione **Importar** para importar todas las excepciones de pronunciación asociadas con la voz seleccionada. Seleccione **Cancelar** para volver a la configuración de usuario sin importar.



Quando haya importado excepciones de pronunciación de otra voz, se recomienda que las verifique con la voz actual. Seleccione el botón Vista previa  en una excepción de pronunciación para escuchar cómo la pronuncia la voz actual.

## 11.9 Dispositivo de salida de voz

1. Seleccione el botón **Editar** .
2. Seleccione la pestaña **Usuario**.
3. Seleccione **Dispositivo de salida de voz**.
4. Configure la opción Usar dispositivo predeterminado en **Activado** para usar el dispositivo de salida predeterminado de Windows. Configure la opción Usar dispositivo predeterminado en **Desactivado** para ver la lista de dispositivos de salida disponibles.
  - a. Seleccione un dispositivo de salida de la lista para usar ese dispositivo para la salida de voz. Para obtener una vista previa de un dispositivo, seleccione el botón de reproducción del dispositivo.

## 11.10 Voces específicas de diferentes idiomas

Puede asignar una voz a un idioma, para que el contenido que está en ese idioma se pronuncie correctamente.

1. Seleccione el botón **Editar** .
2. Seleccione la pestaña **Usuario**.
3. Seleccione **Voces específicas del idioma**.
4. Seleccione **Agregar una voz para otro idioma**.
5. Seleccione **Idioma** y, a continuación, seleccione un idioma de la lista de voces de diferentes idiomas. Seleccione **Nueva voz** después de haber elegido su idioma.

6. Seleccione **Voz** y, a continuación, elija una voz en la sección de voces instaladas de la lista de voces. Seleccione **Nueva voz** después de haber elegido su voz.



Algunas voces están disponibles como descarga gratuita (se requiere conexión a Internet). Seleccione la opción **Descargar** que se encuentra junto a la voz que desea descargar. Cuando la descarga haya finalizado, busque y seleccione la voz en la sección de voces instaladas de la lista de voces.

7. (Opcional) Ajuste la velocidad de la voz para el idioma o la voz seleccionados.
8. (Opcional) Agregue excepciones de pronunciación para la voz. Consulte la sección *11.8.3 Excepciones de pronunciación*.

## 11.11 Preferencias del usuario

### 11.11.1 Configuración de voz

1. Seleccione el botón **Editar**
2. Seleccione la pestaña **Usuario**.
3. Seleccione la categoría **Preferencias**.
4. Configure la opción Un sonido de voz nuevo siempre interrumpe al anterior en **Activado** (la voz en curso se detendrá para que se reproduzca un nuevo comando) o en **Desactivado** (los comandos de voz se pondrán en cola para que la voz actual termine y luego se reproduzca el nuevo comando de voz).

### 11.11.2 Configuración de la ventana de mensajes



Figura 11.2 Opción Usar símbolos en la ventana de mensajes activada

1. Seleccione el botón **Editar**
2. Seleccione la pestaña **Usuario**.
3. Seleccione la categoría **Preferencias**.
4. Configure las siguientes preferencias en **Activado** o **Desactivado**:
  - Usar símbolos en la ventana de mensajes: cuando está activada, las palabras y frases en la ventana de mensajes se simbolizan.
  - Hablar al escribir en la ventana de mensajes: cuando está activada, cada palabra o frase se reproduce tal como se escribe en la ventana de mensajes.
  - Decir los caracteres: cuando está activada, cada carácter se dice a medida que se escribe en la ventana de mensajes.



Para activar la opción "Decir los caracteres", la configuración "Hablar al escribir en la ventana de mensajes" debe estar activada.

- Borrar después de hablar: después de que se ha reproducido el texto de la ventana de mensajes, el texto se borra en la siguiente inserción de texto.
- Flexionar automáticamente los botones gramaticales: cuando están activados, los botones gramaticales se actualizan dinámicamente para que coincidan con el contexto gramatical del contenido de la ventana de mensajes.
- Formar contracciones automáticamente: cuando está activada, las contracciones frecuentes se forman a partir de dos palabras (solo válido para idiomas como el inglés, donde, por ejemplo, "is not" se convierte en "isn't").

### 11.11.3 Configuración de la predicción



1. Seleccione el botón **Editar**.
2. Seleccione la pestaña **Usuario**.
3. Seleccione la categoría **Preferencias**.
4. Configure la opción Mostrar símbolos en los botones Predictor en **Activado** (los botones Predictor muestran un símbolo para la palabra sugerida actualmente) o **Desactivado** (los botones Predictor muestran solo texto).

### 11.11.4 Configuración de sincronización



1. Seleccione el botón **Editar**.
2. Seleccione la pestaña **Usuario**.
3. Seleccione la categoría **Preferencias**.
4. Configure la opción Activar sincronización en Modo de uso en **Activado** (el botón Sincronización está visible en la barra superior tanto en el Modo de uso como en el Modo de edición) o en **Desactivado** (el botón Sincronización está oculto en la barra superior en el Modo de uso, pero visible en el Modo de edición).

## 11.12 Método de acceso

### Táctil

Los objetos se activan tocando el objeto de la pantalla con un dedo o, cuando se utiliza un mouse, haciendo clic en el objeto con el cursor del mouse. Este método de acceso es adecuado para usuarios que pueden tocar la pantalla con rapidez y de manera precisa o controlar y hacer clic con el botón izquierdo de un mouse de ordenador tradicional. Los objetos se activan en cuanto se tocan o se hace clic sobre ellos.

### Pulsar para seleccionar

Los objetos se activan al tocarlos y mantenerlos seleccionados en la pantalla durante un periodo de tiempo mínimo determinado o, cuando se utiliza un mouse, al hacer clic y mantener seleccionado el objeto durante un periodo de tiempo mínimo determinado. El usuario configura el tiempo que el objeto debe mantenerse seleccionado. Este método de acceso es práctico para aquellos usuarios que pueden tocar o hacer clic sobre objetos no deseados de manera accidental.

### Soltar para seleccionar

Este método es similar a Pulsar para seleccionar, pero se activa un objeto seleccionado cuando se suelta una selección. Este método permite al usuario mantener contacto con la pantalla táctil sin realizar una selección de manera accidental. Esto significa que el usuario puede deslizar un dedo o un puntero por la pantalla táctil o apretar un botón de un mouse mientras mueve el cursor. No se realizará ninguna selección hasta que el dedo o el puntero se levanten de la pantalla táctil o hasta que se suelte el botón del mouse. Esto convierte al método de selección Soltar para seleccionar en el ideal para una persona a la que le puede resultar más sencillo arrastrar un dedo o un puntero por la pantalla táctil mientras se mueve de una selección a otra.

### Tiempo de permanencia del mouse

(Solo Windows) El método de acceso Tiempo de permanencia del mouse requiere que un mouse de ordenador, una bola de seguimiento o un mouse de cabeza controlen el cursor en pantalla. Se selecciona un objeto cuando el cursor se detiene en un objeto durante un período determinado o cuando el usuario activa un pulsador. Este método de acceso es una buena opción para una persona que tiene la capacidad física de maniobrar un mouse, pero que no puede pulsar el botón del mouse para realizar selecciones.

### Gaze Interaction

(Solo Windows) Este método permite al usuario controlar Snap + Core First solo con los ojos. Las selecciones se realizan fijando la mirada en un objeto durante un periodo determinado (permanencia), activando un pulsador o parpadeando. Gaze Interaction requiere un dispositivo Tobii Dynavox que se controla con la mirada.

### Escaneo

Cuando el método de selección activo es Escaneo, los objetos de la pantalla se resaltan en un patrón específico. El método de escaneo requiere el uso de un pulsador o una tecla del teclado para realizar una selección cuando se resalta el

elemento deseado. Este método de acceso está pensado para aquellas personas cuyas habilidades motrices pueden impedir que utilicen de manera efectiva los métodos de selección directos.

 Para obtener más información acerca de los métodos de acceso, vea el video *Métodos de acceso* que se encuentra en la sección *Sistema: Ayuda y tutoriales*.

## 11.12.1 Configurar el método de acceso



1. Seleccione el botón **Editar**.
2. Seleccione la pestaña **Usuario**.
3. Seleccione la categoría **Método de acceso**.
4. Seleccione el método de acceso actual.
5. Seleccione un método de acceso de la lista.

## 11.12.2 Opciones táctiles

 El método táctil es el método de acceso predeterminado.

Cuando se usa el método de acceso táctil, los objetos de la pantalla se activan al tocarlos con un dedo o al hacer clic con el mouse. Este método de acceso es adecuado para usuarios que pueden tocar la pantalla con rapidez y de manera precisa o controlar y hacer clic con el botón izquierdo de un mouse de ordenador tradicional. Los objetos se activan en cuanto se tocan o se hace clic sobre ellos.



### Tipo de navegación

El Tipo de navegación es la manera en que el usuario puede desplazarse por la página y la barra de herramientas. Puede elegir desplazarse al deslizar el dedo por la pantalla, al seleccionar los botones de navegación o ambos.

#### Deslizamiento

- Desplácese por la página y la barra de herramientas de arriba abajo deslizando el dedo sobre la pantalla táctil. (Solo con el método de acceso táctil).

#### Botones de navegación

- Los botones de flecha aparecen en la página y en la barra de herramientas cuando hay contenido adicional arriba o abajo. Los botones de navegación con flechas pueden usarse con todos los métodos de acceso.



## Botones de navegación y deslizamiento

- Tanto el botón de deslizamiento como el de navegación están activados, de modo que cualquiera de los dos tipos de navegación puede utilizarse para desplazarse hacia arriba y hacia abajo por el contenido. (Solo con el método de acceso táctil).

## Selección de sonido de retroalimentación

Reproduce un sonido cuando se selecciona un botón de no habla.

## 11.12.3 Opciones del método Pulsar para seleccionar

Cuando Pulsar para seleccionar es el método de acceso elegido, los objetos se activan tocándolos y manteniéndolos seleccionados en la pantalla durante un periodo mínimo determinado o, cuando se utiliza un mouse, haciendo clic y manteniendo seleccionado el objeto durante un periodo mínimo determinado. El usuario configura el tiempo que el objeto debe mantenerse seleccionado. Este método de acceso es práctico para aquellos usuarios que pueden tocar o hacer clic sobre objetos no deseados de manera accidental.



### Tiempo de duración de la selección

El tiempo de duración de la selección es el tiempo mínimo necesario para seleccionar y mantener seleccionado un objeto con el fin de activarlo.

### Conectar selecciones múltiples

Esta configuración detecta selecciones múltiples que ocurren dentro de un intervalo determinado y las conecta para que se registren como una sola selección prolongada y se mantengan presionadas. Esta configuración es útil si el usuario tiene dificultades para mantener una selección constante.

Cuando la opción Conectar selecciones múltiples está activada, puede elegir el intervalo de tiempo en el que se conectan las selecciones. Por ejemplo, si la configuración es Medio, todas las selecciones que ocurran dentro de un intervalo de 0,3 segundos (comenzando con la primera selección) se registrarán como una única selección prolongada y se mantendrán presionadas.

### Retraso entre selecciones

Esta configuración le permite establecer un período en el que Snap ignora los intentos de selección después de que se haya realizado una selección. La activación de la opción Retraso entre selecciones puede ayudar a evitar que se repitan selecciones involuntarias en el software.

Si la opción Retraso entre selecciones está activada, puede elegir el intervalo en el que se ignorarán los intentos de selección después de que se haya realizado una selección. Por ejemplo, si se configura en Medio, Snap ignorará todos los intentos de selección que ocurran dentro de los 2 segundos posteriores a una selección.

### Resaltar

Elija el tipo y color de resaltado que prefiera. El resaltado es una indicación visual que muestra cuando se selecciona un objeto. El resaltado se detiene cuando se activa el objeto.



1. No resaltar
2. Dar contorno  
Opciones: Color, grosor de resaltado
3. Superponer  
Opción: Color
4. Invertir

### Selección de sonido de retroalimentación

Reproduce un sonido cuando se selecciona un botón de no habla.

## 11.12.4 Opciones del método Soltar para seleccionar

Al utilizar el método Soltar para seleccionar, se activa un objeto seleccionado cuando se suelta la selección. Este método permite al usuario mantener contacto con la pantalla táctil sin realizar una selección de manera accidental. Esto significa que el usuario puede deslizar un dedo o un puntero por la pantalla táctil o apretar un botón de un mouse mientras mueve el cursor. A medida que el cursor se desplaza por los botones, se resalta el botón actualmente seleccionado. Ningún botón se activa hasta que el dedo o el puntero se levantan de la pantalla táctil o hasta que se suelta el botón del mouse. Esto convierte al método de selección Soltar para seleccionar en el ideal para una persona a la que le puede resultar más sencillo arrastrar un dedo o un puntero por la pantalla táctil mientras se mueve de una selección a otra. También es útil para las personas que se benefician de la retroalimentación visual para hacer selecciones precisas.



### Tiempo de duración de la selección

El tiempo de duración de la selección es el tiempo mínimo necesario para seleccionar y mantener seleccionado un objeto con el fin de activarlo al soltarlo.

### Conectar selecciones múltiples

Esta configuración detecta selecciones múltiples que ocurren dentro de un intervalo determinado y las conecta para que se registren como una sola selección prolongada y se mantengan presionadas. Esta configuración es útil si el usuario tiene dificultades para mantener una selección constante.

Cuando la opción Conectar selecciones múltiples está activada, puede elegir el intervalo de tiempo en el que se conectan las selecciones. Por ejemplo, si la configuración es Medio, todas y cada una de las selecciones que ocurran dentro de un intervalo de 0.3 segundos (comenzando con la primera selección) se registrarán como una única selección prolongada y se mantendrán presionadas.

### Retraso entre selecciones

Esta configuración le permite establecer un período en el que Snap ignora los intentos de selección después de que se haya realizado una selección. La activación de la opción Retraso entre selecciones puede ayudar a evitar que se repitan selecciones involuntarias en el software.

Si la opción Retraso entre selecciones está activada, puede elegir el intervalo en el que se ignorarán los intentos de selección después de que se haya realizado una selección. Por ejemplo, si se configura en Medio, Snap ignorará todos los intentos de selección que ocurran dentro de los 2 segundos posteriores a una selección.

### Resaltar

Elija el tipo y color de resaltado que prefiera. El resaltado es una indicación visual que muestra cuando se selecciona un objeto. El resaltado se detiene cuando se activa el objeto.



1. No resaltar
2. Dar contorno  
Opciones: Color, grosor de resaltado
3. Superponer  
Opción: Color
4. Invertir

### Retroalimentación de audio


Si la retroalimentación acústica está activada, el usuario escuchará la señal de audio de un objeto cuando esté resaltado. Una señal acústica es una palabra o mensaje corto que ayuda a identificar un objeto. Puede seleccionar una voz diferente para la retroalimentación de audio, así como una velocidad de voz personalizada y excepciones de pronunciación.

### Selección de sonido de retroalimentación

Reproduce un sonido cuando se selecciona un botón de no habla.

## 11.12.5 Opciones del método Tiempo de permanencia del mouse

(Solo Windows) El método de acceso Tiempo de permanencia del mouse requiere que un mouse de ordenador, una bola de seguimiento o un mouse de cabeza controlen el cursor en pantalla. Se selecciona un objeto cuando el cursor se detiene en un objeto durante un período determinado o cuando se activa un pulsador.

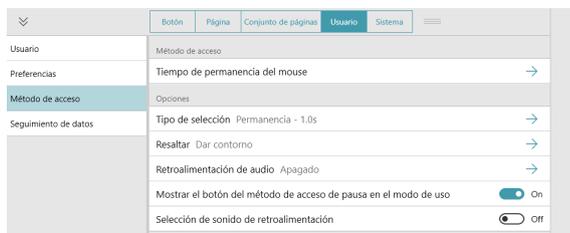

### Tipo de selección

#### Permanencia

- Las selecciones se realizan manteniendo pulsado el cursor sobre un objeto durante un periodo determinado (tiempo de permanencia).
  - Tiempo de permanencia: determine el tiempo que el cursor debe permanecer en un objeto para seleccionarlo.

#### Pulsador

- Las selecciones se realizan activando un pulsador mientras el cursor está en el objeto deseado.
  - Entrada del pulsador: determine la tecla del teclado que actúa como entrada del pulsador.

### Resaltar

Elija el tipo y color de resaltado que prefiera. El resaltado es una indicación visual que muestra cuando se selecciona un objeto. El resaltado se detiene cuando se activa el objeto.



Para este método de acceso, "No resaltar" no es una opción.



1. No resaltar
2. Dar contorno  
Opciones: Color, grosor de resaltado
3. Superponer  
Opción: Color
4. Invertir

### Retroalimentación de audio

Si la retroalimentación acústica está activada, el usuario escuchará la señal de audio de un objeto cuando esté resaltado. Una señal acústica es una palabra o mensaje corto que ayuda a identificar un objeto. Puede seleccionar una voz diferente para la retroalimentación de audio, voces de retroalimentación específicas de diferentes idiomas, así como una velocidad de voz personalizada y excepciones de pronunciación.

### Mostrar botón Pausar el método de acceso en el modo de uso

Cuando está habilitado, aparece el botón Pausar/reanudar el método de acceso en la barra superior en el modo de uso. Cuando está desactivado, el botón está oculto.

### Selección de sonido de retroalimentación

Reproduce un sonido cuando se selecciona un botón de no habla.

## 11.12.6 Opciones del método Gaze Interaction

(Solo Windows) Este método permite al usuario controlar Snap + Core First solo con los ojos. Las selecciones se realizan fijando la mirada en un objeto durante un periodo determinado (permanencia), activando un pulsador o parpadeando. Gaze Selection requiere un dispositivo Tobii Dynavox que se controla con la mirada.

### Tipo de selección

#### Permanencia

- Le permite al usuario hacer selecciones fijando la mirada en un objeto durante un tiempo determinado (tiempo de permanencia).
  - Tiempo de permanencia: determine el tiempo que la mirada debe permanecer en un objeto para seleccionarlo.

#### Pulsador

- El usuario dirige el resaltado en la pantalla con la mirada, luego hace selecciones con un pulsador.
  - Entrada del pulsador: determine la tecla del teclado que actúa como entrada del pulsador.



Es posible que la selección del pulsador con una tecla del teclado o con un pulsador Bluetooth no funcione fuera del software Snap.

- Duración de la pulsación del pulsador: la cantidad de tiempo que el pulsador debe estar activado para seleccionar el objeto actualmente resaltado.
- Duración de la repetición del pulsador: la cantidad de tiempo que el usuario debe esperar entre las activaciones del pulsador. Antes de que se cumpla este tiempo, se ignora cualquier activación adicional del pulsador.

#### Parpadeo

- Le permite al usuario hacer selecciones parpadeando durante un tiempo determinado.
  - Duración mínima de parpadeo: configure el tiempo mínimo que los ojos del usuario deben permanecer cerrados para realizar una selección.

- Duración máxima de parpadeo: configure el tiempo máximo que los ojos del usuario pueden permanecer cerrados para realizar una selección. Si los ojos del usuario permanecen cerrados durante más tiempo que el tiempo máximo de parpadeo, no se realiza ninguna selección.

### Retroalimentación de mirada

La retroalimentación de mirada es una señal visual que muestra al usuario dónde se está registrando su mirada en la pantalla, con qué constancia y durante cuánto tiempo.

Configure el estilo, el color y el tamaño de la retroalimentación de mirada.

### Retraso después del cambio de página

Después de ir a una página nueva, no puede realizarse una selección durante el período de tiempo establecido. Esta configuración ayuda a evitar selecciones imprevistas cuando se abre una página por primera vez.

### Tipo de Windows Control

Configure el modo de acceso al escritorio para la navegación fuera del software Snap.

- Gaze Selection: este es un método de selección de dos pasos que reduce el riesgo de clics no deseados.
- Emulación de mouse: emula y controla un puntero de mouse de equipo estándar en la pantalla.

### Retroalimentación de audio

Si la retroalimentación acústica está activada, el usuario escuchará la señal de audio de un objeto cuando esté resaltado. Una señal acústica es una palabra o mensaje corto que ayuda a identificar un objeto. Puede seleccionar una voz diferente para la retroalimentación de audio, así como una velocidad de voz personalizada y excepciones de pronunciación.

### Mostrar botón Pausar el método de acceso en el modo de uso


Cuando está habilitado, aparece el botón Pausar/reanudar el método de acceso en la barra superior en el modo de uso. Cuando está desactivado, el botón está oculto.

### Selección de sonido de retroalimentación

Reproduce un sonido cuando se selecciona un botón de no habla.

## 11.12.7 Opciones de escaneo

Cuando el método de selección activo es Escaneo, los objetos de la pantalla se resaltan en un patrón específico. El usuario utilizará un pulsador o una tecla para realizar una selección cuando se resalte el elemento deseado. Este método de acceso está pensado para aquellas personas cuyas habilidades motrices pueden impedir que utilicen de manera efectiva los métodos de selección directos.

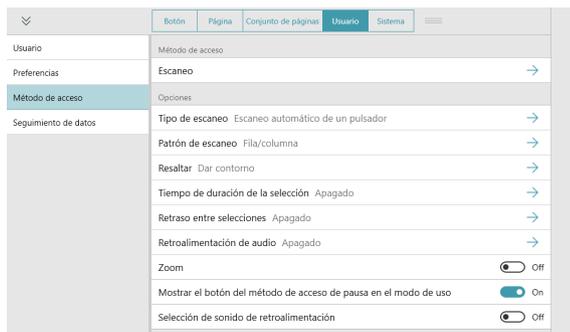

### Tipo de escaneo

La configuración de Tipo de escaneo determina cómo avanza el resaltado de escaneo (automáticamente o mediante el uso de un pulsador) y cómo se realizan las selecciones.

#### Escaneo automático de un pulsador

- Al usar el escaneo automático con un pulsador, el software escanea los elementos de la página con el patrón de escaneo designado. El usuario realiza las selecciones mediante un pulsador.
  - Entrada alternativa de pulsador: seleccione una tecla de la pantalla o del teclado.

- Velocidad: establezca la velocidad con la que se realiza el escaneo automático.
- Tiempo de transición: establezca el tiempo que transcurre entre la selección y la continuación del escaneo automático.
- Escanear después: seleccione cuándo debe reiniciarse el escaneo automático: selección, cambio de página, hablar.
- Reproducir audio acústico completo antes de avanzar: cuando está activada, las señales de audio largas retrasan el avance del resaltado del escaneo hasta que se pronuncie la señal de audio completa.

### Escaneo por pasos de dos pulsadores

- Al usar el escaneo por pasos con dos pulsadores, el usuario activa un pulsador para iniciar el resaltado de escaneo y un segundo pulsador para realizar selecciones.
  - Entrada alternativa de pulsador 1: seleccione una tecla de la pantalla o del teclado para iniciar el resaltado de escaneo.
  - Entrada alternativa de pulsador 2: seleccione una tecla de la pantalla o del teclado para realizar las selecciones.



La entrada alternativa de pulsador 1 y la entrada alternativa de pulsador 2 deben ser diferentes.

### Escaneo con 1 pulsador

- Cuando la opción de escaneo con el pulsador 1 está activa, el usuario activará el pulsador para avanzar el resaltado (cada selección avanza el resaltado en un intervalo). Para seleccionar el objeto resaltado, el usuario seleccionará el pulsador y mantendrá la selección para el tiempo de pausa especificado.
  - Entrada alternativa de pulsador 1: seleccione una tecla de la pantalla o del teclado para iniciar el resaltado de escaneo.
  - Tiempo de pausa: el tiempo mínimo necesario para seleccionar y mantener seleccionado un objeto con el fin de activarlo.

### Escaneo de tiempo de permanencia con el pulsador 1

- Cuando la opción de escaneo de permanencia del pulsador 1 está activa, el usuario activará el pulsador para avanzar el resaltado (cada selección avanza el resaltado en un intervalo). Para seleccionar el objeto resaltado, el usuario hará una pausa (no hará nada) durante el tiempo de pausa especificado.
  - Entrada alternativa de pulsador 1: seleccione una tecla de la pantalla o del teclado para iniciar el resaltado de escaneo.
  - Tiempo de pausa: el tiempo mínimo necesario de permanencia en un objeto con el fin de activarlo.

### Escaneo inverso

- Una persona que utilice el escaneo inverso mantendrá presionado el pulsador para avanzar el resaltado del escaneo (el resaltado continuará avanzando mientras se mantenga presionado el pulsador). Cuando el individuo suelte el pulsador, se seleccionará el objeto resaltado.
  - Entrada alternativa de pulsador 1: seleccione una tecla de la pantalla o del teclado para iniciar el resaltado de escaneo.
  - Velocidad: qué tan rápido avanza el resaltado de escaneo (mientras se mantenga presionado el pulsador).
  - Reproducir audio acústico completo antes de avanzar: cuando está activada, las señales de audio largas retrasan el avance del resaltado del escaneo hasta que se pronuncie la señal de audio completa.

### Patrón de escaneo

El patrón de escaneo es la secuencia en la que se resaltan los objetos de la pantalla para su selección. Esta sección también contiene configuraciones relacionadas con los tipos de objetos que se escanean.

#### Patrón

- Fila/Columna: escanea filas desde arriba hacia abajo. Cuando se selecciona una fila, los elementos de la fila se escanean de izquierda a derecha.
- Columna/Fila: escanea columnas de izquierda a derecha. Cuando se selecciona una columna, los elementos de la columna se escanean de arriba hacia abajo.
- Lineal: los objetos se escanean individualmente de izquierda a derecha, de arriba abajo.

### Número de pases

- Pases: establezca cuántas veces se escaneará una fila o columna sin que se realice una selección.
- Después del pase final: elija lo que sucederá cuando el escaneo automático haya completado el número designado de pases (no disponible para pases infinitos).

### Escanear desde la última selección

- Si se activa, el escaneo se reanuda en la página en la que se realizó la última selección. Si se desactiva, después de realizar una selección, el escaneo se reanuda en la parte superior de la página.

### Escanear barra superior

- Si se activa, se escanean los elementos accesibles al escaneo de la barra superior (Atrás, Inicio y Cuadro de mandos). Si se desactiva, los elementos de la barra superior no se escanean.



Los botones Buscar, Sincronizar, Pausar método de acceso y Editar en la barra superior no se escanean. Son accesibles por contacto en cualquier momento.

### Escanear botones en blanco

- Si se activa, se escanean los botones que no tienen contenido. Si se desactiva, los botones en blanco no se escanean.

### Resaltar

Elija el tipo y color de resaltado que prefiera. El resaltado es una indicación visual que muestra cuándo se escanea un objeto. El resaltado se detiene cuando se activa el objeto.



Para este método de acceso, "No resaltar" no es una opción.



1. No resaltar
2. Dar contorno  
Opciones: Color, grosor de resaltado
3. Superponer  
Opción: Color
4. Invertir

### Tiempo de duración de la selección

El tiempo de duración de la selección es el tiempo mínimo necesario para seleccionar y mantener seleccionado un objeto con el fin de activarlo.

### Retraso entre selecciones

El retraso entre selecciones ayuda a evitar la repetición accidental de selecciones de pulsador. Cuando se realiza una selección de pulsador, la siguiente selección de pulsador no puede ocurrir hasta que haya pasado el tiempo establecido en Retraso entre selecciones. Si el pulsador se activa mientras el tiempo de demora está activo, la cuenta regresiva se reinicia.

### Retroalimentación de audio

Si la retroalimentación acústica está activada, el usuario escuchará la señal de audio de un objeto cuando esté resaltado. Una señal acústica es una palabra o mensaje corto que ayuda a identificar un objeto. Puede seleccionar una voz diferente para la retroalimentación de audio, voces de retroalimentación específicas de diferentes idiomas, así como una velocidad de voz personalizada y excepciones de pronunciación.

### Acercamiento

Cuando está habilitado, los objetos de la pantalla se amplían a medida que se escanean. Al escanear varios objetos (filas o columnas), el objeto que está primero en el patrón se amplía y los otros objetos se resaltan según lo especificado por la configuración del estilo de resaltado.

### Mostrar botón Pausar el método de acceso en el modo de uso

Cuando está habilitado, aparece el botón Pausar/reanudar el método de acceso en la barra superior en el modo de uso. Cuando está desactivado, el botón está oculto.

### Selección de sonido de retroalimentación

Reproduce un sonido cuando se selecciona un botón de no habla.

## 11.13 Datos de seguimiento

### 11.13.1 Seguimiento del uso del botón

Cuando el seguimiento del uso del botón está habilitado, se registra la información sobre el uso del botón en Snap Core First. Esta información incluye la hora del evento de uso del botón, el mensaje, el idioma, el conjunto de páginas, la página, la posición de la cuadrícula, el método de acceso (por ejemplo, gaze interaction), el modo de modelado y si el botón habló o insertó contenido en la Ventana de mensajes.



La información de uso del botón no se registra cuando está en el Modo de edición.



### Habilitar Seguimiento del uso del botón

1. Seleccione el botón **Editar** .
2. Seleccione la pestaña **Usuario**.
3. Seleccione la categoría de **Datos de seguimiento**.
4. Configure **Seguimiento del uso del botón** en Activado.
5. Lea la advertencia de privacidad de datos y seleccione **Sí** para habilitar el seguimiento del uso del botón. Seleccione No si no desea habilitar el Seguimiento del uso del botón.



Puede visualizar el contador de usos del botón en el software Snap Core First al habilitar **Mostrar contador de uso del botón** o **Mostrar contador de modelado**. Para más información, vea las secciones **11.13.3 Mostrar contador de usos del botón** y **11.13.4 Mostrar contador de modelado**. Otras visualizaciones de datos están disponibles en la sección **Informes de uso** de su cuenta myTobiiDynamox.com.

El seguimiento del uso del botón, si está habilitado, ocurre cada vez que se usa el software Snap Core First. Para obtener datos de uso precisos, es importante diferenciar entre las selecciones de botones realizadas por el usuario y las selecciones de modelado realizadas por un cuidador o interlocutor. Si el usuario interactúa con Snap Core First mediante un método de acceso no táctil (Tiempo de permanencia del mouse, Gaze Interaction o Escaneo), cualquier selección de botón realizada mediante el tacto se registra automáticamente como modelado. Si el usuario interactúa con Snap Core First mediante un método de acceso táctil, el cuidador debe habilitar el modo de modelado antes de realizar cualquier selección de modelado y luego deshabilitarlo nuevamente antes de que el usuario realice su próxima selección.



Si el seguimiento del uso del botón está habilitado y el usuario tiene un método de acceso táctil, asegúrese de que el botón **Mostrar barra superior** también esté habilitado. Consulte la sección **11.13.2 Mostrar botón en la barra superior**.

 Cuando comparta un conjunto de páginas que tiene datos de uso, tendrá la opción de incluir o no la información de uso.

### Habilitar el modo de modelado (solo es necesario si el método de acceso está configurado como Pulsar, Pulsar para seleccionar, Soltar para seleccionar, o cuando se usa la pantalla como pulsador)


 Si su método de acceso actual incluye el botón Pausar método de acceso en la barra superior, pause el método de acceso  antes de comenzar con los siguientes pasos. Reanude el método de acceso  cuando salga del Modo de modelado.

1. Seleccione el botón  **Datos de seguimiento** en la barra superior. Para habilitar el botón de datos de seguimiento en la barra superior, consulte la sección 11.13.2 *Mostrar botón en la barra superior*
2. Habilitar el **Modo de modelado**. Cuando haya terminado de modelar, recuerde desactivar el Modo de modelado.

 También puede activar y desactivar el Modo de modelado al hacer un toque largo (tocar y mantener presionado) en el botón Datos de seguimiento en la barra superior. Cuando el Modo de modelado está habilitado, el botón Datos de seguimiento tiene este aspecto . Cuando el Modo de modelado está deshabilitado, el botón Datos de seguimiento tiene este aspecto .

## 11.13.2 Mostrar botón en la barra superior

Si está habilitado, el botón Datos de seguimiento  aparece en la barra superior. El botón Datos de seguimiento de la barra superior permite acceder rápidamente a las siguientes configuraciones: Modo de modelado, muestra el contador de usos del botón, muestra el contador de modelados y administra datos.

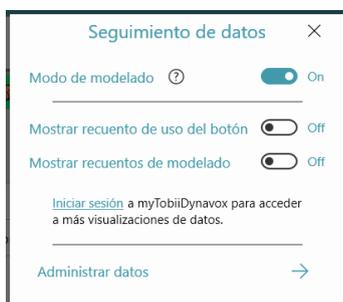

## 11.13.3 Mostrar contador de usos del botón

Cuando están habilitados, los botones muestran una credencial blanca con el número de veces que el usuario seleccionó el botón (mientras estaba habilitado el Seguimiento del uso del botón) en el marco de tiempo especificado. El rango de tiempo predeterminado es Todos.

### Habilitar Mostrar contador de usos del botón (mediante Configuración de usuario)

1. Seleccione el botón **Editar** .
2. Seleccione la pestaña **Usuario**.
3. Seleccione la categoría de **Datos de seguimiento**.
4. Configure **Mostrar contador de usos del botón** como Activado.



Para cambiar el rango de hora del conteo de uso, seleccione **Rango de hora**, luego use el menú desplegable o los campos de fecha/hora de inicio y finalización.

### Habilitar Mostrar contador de usos del botón (mediante el botón Datos de seguimiento en la barra superior)




Para habilitar el botón de datos de seguimiento en la barra superior, consulte la sección *11.13.2 Mostrar botón en la barra superior*

1. Seleccione el botón  **Datos de seguimiento** en la barra superior.
2. Habilite **Mostrar contador de usos del botón**.



Para cambiar el rango de hora del conteo de uso, seleccione **Rango de hora**, luego use el menú desplegable o los campos de fecha/hora de inicio y finalización.

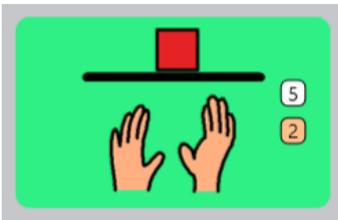

**Figura 11.3** Botón que muestra el contador de usos (blanco) y el contador de modelado (naranja).

### 11.13.4 Mostrar contador de modelado

Si está habilitado, los botones muestran una credencial naranja con la cantidad de veces que se seleccionó el botón en el modo de modelado (mientras estaba habilitado el Seguimiento del uso del botón) en el marco de tiempo especificado. El rango de tiempo predeterminado es Todos.

#### Habilitar Mostrar contador de modelado (mediante Configuración de usuario)

1. Seleccione el botón **Editar** .
2. Seleccione la pestaña **Usuario**.
3. Seleccione la categoría de **Datos de seguimiento**.
4. Configure **Mostrar contador de modelado** como activado.



Para cambiar el rango de tiempo del contador de modelado, seleccione **Rango de tiempo**, luego use el menú desplegable o los campos de fecha/hora de inicio y finalización.

#### Habilitar Mostrar contador de modelado (mediante el botón Datos de seguimiento en la barra superior)



Para habilitar el botón de datos de seguimiento en la barra superior, consulte la sección *11.13.2 Mostrar botón en la barra superior*

1. Seleccione el botón  **Datos de seguimiento** en la barra superior.
2. Habilite **Mostrar contador de modelado**.



Para cambiar el rango de tiempo del contador de modelado, seleccione **Rango de tiempo**, luego use el menú desplegable o los campos de fecha/hora de inicio y finalización.

## 11.13.5 Administración de datos

Restablezca a cero el contador de usos del botón y el contador de modelado para la página actual, los botones de la barra de mensajes, los botones de la barra de herramientas o el conjunto de páginas completo.



Restablecer el contador de uso del botón no elimina los datos de uso anteriores. Si desea eliminar de forma permanente todos los datos de uso que se han almacenado en su cuenta mytobiidynavox, use un navegador web para ir a [mytobiidynavox.com](https://mytobiidynavox.com) > *Snap* > *Datos de uso*.

### Restablecer contador de uso (mediante Configuración de usuario)



1. Seleccione el botón **Editar**.
2. Seleccione la pestaña **Usuario**.
3. Seleccione la categoría de **Datos de seguimiento**.
4. Seleccione **Administrar datos**.
5. Seleccione el área en la que desea restablecer los contadores de uso del botón y de modelado a cero.
6. Seleccione **Restablecer** para restablecer los contadores de uso y modelado para el área elegida. Para cancelar la operación de restablecer, seleccione Cancelar.

### Reestablecer contador de uso (mediante el botón Datos de seguimiento en la barra superior)



Para habilitar el botón de datos de seguimiento en la barra superior, consulte la sección [11.13.2 Mostrar botón en la barra superior](#)



1. Seleccione el botón **Datos de seguimiento** en la barra superior.
2. Seleccione **Administrar datos**.
3. Seleccione el área en la que desea restablecer los contadores de uso del botón y de modelado a cero.
4. Seleccione **Restablecer** para restablecer los contadores de uso y modelado para el área elegida. Para cancelar la operación de restablecer, seleccione Cancelar.

# 12 Configuración del sistema


## 12.1 Preferencias

### 12.1.1 Código de acceso

Si se activa, se requiere un código de acceso de cuatro dígitos para acceder al Modo de edición, al Modo de búsqueda y a la Sincronización. La activación del código de acceso puede ayudar a evitar cambios no autorizados en el conjunto de páginas y la configuración.

#### Activar código de acceso

1. Seleccione el botón **Editar** .
2. Seleccione la pestaña **Sistema**.
3. Configure el botón Usar código de acceso en **Activado**.
4. Ingrese un código de acceso de cuatro dígitos que solo usted conozca y no sea fácil de adivinar.

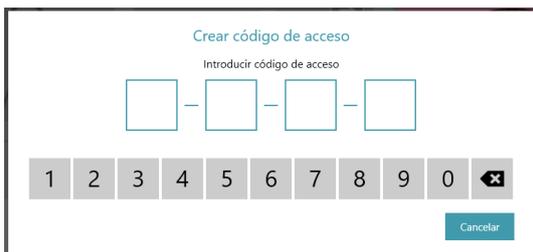

Crear código de acceso

Introducir código de acceso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Cancelar

5. Introduzca el código de acceso de nuevo para verificarlo.
6. Al activar el botón Usar código de acceso, el código de acceso se activa para el Modo de edición, Sincronización y Modo de búsqueda de forma predeterminada. Cambie la configuración a Desactivado para cualquiera de estas funciones si desea acceder sin código de acceso.



Si el código de acceso está activado y el código de acceso de la función Sincronización está desactivado, la sincronización funcionará en el Modo de solo extracción. Cuando sincronice en Modo de solo extracción, recibirá cambios en el conjunto de páginas (realizados en otros dispositivos) pero no enviará ningún cambio en el conjunto de páginas realizado en el dispositivo actual.

7. Al salir del Modo de edición, se le solicitará el código de acceso para acceder a la compra en la aplicación y, si lo activa, podrá acceder al Modo de edición, Sincronización y Modo de búsqueda.



Si ya ha activado el código de acceso, puede restablecerlo al seleccionar el botón **Editar** .

Si olvida su código de acceso, utilice el código de acceso maestro (0520) para acceder al Modo de edición y restablecer su código de acceso de inmediato.

### 12.1.2 Configuración de pantalla (solo Windows)

Si el modo de pantalla completa está activado, el software Snap ocupará toda la pantalla del dispositivo. Si el modo de pantalla completa está desactivado, el software Snap se ejecutará dentro de una ventana de tamaño ajustable.

### 12.1.3 Idioma del Modo de edición

Seleccione un idioma para la interfaz del Modo de edición.

## 12.2 Dispositivo



La sección Dispositivo está presente solo en los dispositivos I-13 e I-16 de Tobii Dynavox.

### 12.2.1 Configuración de la ventana del interlocutor

La ventana del interlocutor es una pantalla en la parte posterior de los dispositivos I-13 e I-16 de Tobii Dynavox. La ventana del interlocutor informa al interlocutor que el usuario se está preparando para hablar y muestra el texto para que el interlocutor lo lea.



1. Seleccione el botón **Editar**.
2. Seleccione la pestaña **Sistema**.
3. Seleccione **Dispositivo**.
4. Seleccione en Opciones de ventana del interlocutor:
  - **Mostrar texto de la ventana de mensajes:** muestra el texto de la ventana de mensajes en la ventana del interlocutor en tiempo real.
  - **Mostrar texto hablado:** muestra el texto en la ventana del interlocutor solo cuando se habla. Mientras redacta en la ventana de mensajes, la ventana del interlocutor mostrará una serie de puntos para indicar que el usuario está preparando su mensaje. Cuando se habla en la ventana de mensajes, la ventana del interlocutor desplaza el texto a medida que se habla.



La ventana del interlocutor muestra solo texto. No muestra símbolos.

5. Seleccione en Estilo del indicador en la ventana del interlocutor:
  - **Espejo:** muestra una versión en miniatura de la ventana del interlocutor en la barra superior.
  - **Ícono:** muestra un ícono cuando la ventana del interlocutor está encendida. Oculta el ícono cuando la ventana del interlocutor está apagada.
6. Establezca la opción Activar/desactivar la ventana del interlocutor en **Activada** o **Desactivada**. Cuando la ventana del interlocutor está desactivada, no muestra ningún texto.



También puede usar el botón Acciones para controlar el brillo de la pantalla de la ventana del interlocutor, y para activarla y desactivarla. Consulte las secciones [8.6.2 Contenido activo](#) y [8.7 Acciones de botón](#).

## 12.3 Tienda

Aquí se muestran los elementos adicionales de Snap + Core First que están disponibles para la compra en la aplicación. Los artículos que ya ha comprado no aparecen en la lista.

## 12.4 Conjuntos de símbolos

### 12.4.1 Configuración de búsqueda

Si la búsqueda segura de símbolos está activada, los símbolos explícitos no aparecen en las búsquedas de símbolos, en la ventana de mensajes (con símbolos) ni en el Modo de búsqueda. Si la búsqueda segura de símbolos está desactivada, en las búsquedas de símbolos, los símbolos de la ventana de mensajes y el Modo de búsqueda aparecerán todos los símbolos disponibles.

### 12.4.2 Símbolos instalados y descargables

Los conjuntos de símbolos que aparecen en la sección Símbolos instalados son los conjuntos de símbolos actualmente instalados y disponibles en el dispositivo.

Para eliminar un conjunto de símbolos instalado, seleccione el botón **Eliminar**  y, a continuación, seleccione **Eliminar** para confirmar.

 No se puede eliminar los símbolos de Snap Core.

Los conjuntos de símbolos que aparecen en la sección Símbolos descargables son los conjuntos de símbolos gratuitos que no están instalados actualmente en el dispositivo. Para descargar e instalar un conjunto de símbolos gratuito, seleccione **Descargar** junto al conjunto de símbolos que desea descargar.

 Debe tener una conexión a Internet activa para descargar conjuntos de símbolos.

 Algunos conjuntos de símbolos de terceros solo están disponibles para su compra a través de la Tienda. Consulte la sección **12.3 Tienda**.

### 12.4.3 Cambiar el orden de los conjuntos de símbolos

El orden de los resultados de búsqueda de símbolo está determinado por el orden de los conjuntos de símbolos en la lista Símbolos instalados. Si, por ejemplo, usa principalmente símbolos de alto contraste en el conjunto de páginas, puede mover el conjunto de símbolos de alto contraste a la parte superior de la lista Símbolos instalados para priorizar los símbolos de alto contraste (cuando estén disponibles) en las búsquedas de símbolos.

1. Seleccione el botón **Editar** .
2. Seleccione la pestaña **Sistema**.
3. Seleccione la categoría **Conjuntos de símbolos**.
4. Seleccione y mantenga presionado el control  de un conjunto de símbolos en la lista Símbolos instalados.
5. Arrastre el conjunto de símbolos a una nueva posición en la lista.



## 12.5 Ayuda y tutoriales

### 12.5.1 Videos

Vea los videos para obtener más información acerca del uso de Snap + Core First.

### 12.5.2 Pathways para Core First

 Pathways para Core First es la aplicación gratuita que le enseña los métodos más efectivos para usar Snap + Core First para promover la comunicación, la alfabetización, los apoyos de comportamiento y mucho más. Si- ga los enlaces de esta sección para obtener más información.

### 12.5.3 Recorrido rápido

Reinicie el recorrido rápido para familiarizarse con el software Snap.

### 12.5.4 Ayuda externa

Acceda a la guía de inicio rápido, el manual del usuario, guías de conjuntos de páginas, videos adicionales, la base de conocimiento en línea y el Acuerdo de licencia del usuario final.

## 12.6 Acerca de

Información de la versión de Snap + Core First.

### 12.6.1 Actualizaciones de software

El software Snap se actualiza automáticamente a través de la conexión a Internet.

Copyright ©Tobii AB (publ). No todos los productos y servicios que se ofrecen en cada mercado local. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

## Soporte técnico para su dispositivo Tobii DynaVox

### Obtener ayuda en línea

Consulte la página de Soporte de su dispositivo Tobii DynaVox. Contiene información actualizada sobre problemas y sugerencias y trucos relacionados con el producto. Consulte nuestras páginas de Soporte en línea en: [www.TobiiDynavox.com/support-training](http://www.TobiiDynavox.com/support-training)

### Póngase en contacto con su consultor de soluciones o su distribuidor.

Si tiene alguna pregunta o experimenta problemas con su producto, póngase en contacto con su consultor de soluciones autorizado de Tobii Dynavox para recibir ayuda. Conocen su configuración personal y podrán ayudarlo con sugerencias y formación específica. Para consultar la información de contacto, visite [www.TobiiDynavox.com/contact](http://www.TobiiDynavox.com/contact)