

Tobii Dynavox Virtual Remote

دليل المستخدم



دليل المستخدم Tobii Dynavox Virtual Remote

الإصدار 1.1

06/2017

جميع الحقوق محفوظة.

(Copyright © Tobii AB (publ

لا يجوز نسخ أي جزء من هذه الوثيقة أو تخزينه في نظام استرجاع أو إرساله بأي شكل أو بأي طريقة (إلكترونية، أو النسخ الضوئي، أو التسجيل، أو غير ذلك) دون إذن كتابي مسبق من الناشر.

تتضمن حماية حقوق الطبع والنشر المزعومة جميع الأشكال والمسائل المتعلقة بالمواد المحمية بموجب حقوق الطبع والنشر والمعلومات التي يسمح بها القانون التشريعي أو القضائي أو التي يتم منحها فيما بعد، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، المواد الناتجة عن البرامج التي تُعرض على الشاشة مثل عروض الشاشة والقوائم وما شابه.

إن المعلومات الواردة في هذه الوثيقة ملك لشركة Tobii Dynavox. لذا يحظر نسخ أي جزء منها أو كلها من دون تصريح كتابي مسبق من شركة Tobii Dynavox.

قد تكون المنتجات المشار إليها في هذه الوثيقة إما علامات تجارية و/أو علامات تجارية مسجلة لأصحابها المعنيين. لم يدع أي من الناشر أو المؤلف ملكيته لهذه العلامات التجارية.

برغم اتخاذ كل الاحتياطات الواجبة عند إعداد هذه الوثيقة، لكن ينفي كل من الناشر والمؤلف أي مسؤولية عن أي خطأ أو سهو أو تلف ينتج عن استخدام المعلومات الواردة في هذه الوثيقة أو عن استخدام البرامج أو الشفرة المصدرية المصاحبة لها. لن يتحمل الناشر أو المؤلف بأي حال من الأحوال المسؤولية عن أي خسارة في الأرباح أو أي ضرر تجاري آخر نتج أو يُزعم أنه نتج عن هذه الوثيقة سواء على نحو مباشر أو غير مباشر.

محتوى الوثيقة يخضع للتغيير دون إخطار.

يُرجى الرجوع إلى الموقع الإلكتروني لشركة Tobii Dynavox www.TobiiDynavox.com للحصول على النسخ المعدلة من هذه الوثيقة.

جدول المحتويات

1	نُبذة عن Tobii Dynavox Virtual Remote	4
1.1	الغرض من الاستخدام	4
1.2	متطلبات النظام	4
2	التثبيت والبدء	5
2.1	التثبيت Tobii Dynavox Virtual Remote	5
2.2	البدء Tobii Dynavox Virtual Remote	5
3	نظرة عامة على Virtual Remote	6
3.1	قائمة Virtual Remote	6
3.2	جهاز التحكم عن بُعد النشط	7
3.3	الأزرار	7
4	استخدام Tobii Dynavox Virtual Remote	9
4.1	عند التشغيل لأول مرة	9
4.2	تغيير جهاز التحكم عن بُعد النشط	9
4.3	استخدم الأزرار الموجودة على جهاز تحكم عن بُعد	9
4.4	إضافة جهاز تحكم عن بُعد	10
4.4.1	إضافة جهاز تحكم عن بُعد مُبرمج	10
4.4.2	إضافة جهاز تحكم عن بُعد غير مُبرمج	14
4.5	وضع التعديل	17
4.5.1	تغيير اسم جهاز التحكم عن بُعد	17
4.5.2	حذف جهاز تحكم عن بُعد	18
4.5.3	إجراء تغييرات على زر نشط موجود	19
4.5.4	إجراء تغييرات على زر موجود غير مُبرمج	22
4.5.5	إضافة زر جديد في مساحة فارغة	24
4.6	المعلومات	25

1 نُبذة عن Tobii Dynavox Virtual Remote

1.1 الغرض من الاستخدام

Tobii Dynavox Virtual Remote سيُتيح لك التحكم ببيئتك بدون تحكم يدوي! تحكم في أي شيء بداية من التلفزيونات و Apple TVs والألعاب واستيريو بالأشعة تحت الحمراء حتى النوافذ والستائر والأبواب!

Tobii Dynavox Virtual Remote يتطلب مكونات صلبة متوافقة مع الأشعة تحت الحمراء. لمزيد من المعلومات، انظر 1.2 متطلبات النظام.

مع Tobii Dynavox Virtual Remote يمكنك:

- استخدم إشارات التحكم عن بُعد المُبرمجة
- أو برمجة جهاز التحكم عن بُعد الخاص بك يدويًا

1.2 متطلبات النظام

المكون	المتطلبات
كمبيوتر ومعالج	معالج ثنائي النواة 2.0 جيجا هرتز أو أسرع (أدنى حد موصى به).
الذاكرة (ذاكرة عشوائية)	ذاكرة عشوائية سعة 4 جيجابايت (أدنى حد موصى به).
قرص صلب	إتاحة سعة 450 ميجابايت
الناقل التسلسلي العالمي USB	USB 2.0
نظام التشغيل	Virtual Remote يعمل على كلتا النواتين 32-بت و 64-بت لأنظمة تشغيل مايكروسوفت ويندوز. عند تشغيلك نواة Virtual Remote بت على نسخة نواة 64-بت من أنظمة تشغيل مايكروسوفت ويندوز، سيعمل البرنامج على طبقة نواة 32-بت من أنظمة تشغيل مايكروسوفت ويندوز. • ويندوز 7 (64-بت) • ويندوز 8 (32-بت أو 64-بت) • ويندوز 10 (32-بت أو 64-بت)
إصدار NET	4.5
جهاز تتبع العين	أي جهاز لتتبع العين من Tobii Dynavox أو Tobii Tech يُدعم برنامج Tobii Eye Tracking Core.
جهاز التحكم عن بُعد بالأشعة تحت الحمراء	أي جهاز مُجهز بترقاقة HBR IR مثل: Tobii Dynavox EyeR أو Indi أو I-110 Series أو EyeMobile Plus.

2 التثبيت والبدء

2.1 التثبيت Tobii Dynavox Virtual Remote

إذا كان Windows Control مثبتًا على الجهاز، Virtual Remote جزءًا من برنامج Windows Control ومُثبت تلقائيًا خلال تثبيت Windows Control. إذا كنت بحاجة إلى تثبيت Virtual Remote، Virtual Remote يمكن تنزيلهما من www.TobiiDynavox.com.

سيقوم معالج التثبيت بتثبيت التطبيقات التالية:

- Tobii Dynavox Virtual Remote

لتثبيت Virtual Remote اتبع الخطوات الظاهرة على الشاشة.

2.2 البدء Tobii Dynavox Virtual Remote

للبدء Virtual Remote:

- حدد الرمز  Virtual Remote في ويندوز.
- أو حدد  Virtual Remote من الاختصارات في Windows Control.

3 نظرة عامة على Virtual Remote



الشكل 3.1 نظرة عامة على Virtual Remote

ينقسم Virtual Remote إلى قسمين:

- قائمة Virtual Remote، لمزيد من المعلومات انظر 3.1 قائمة Virtual Remote، الصفحة 6.
- جهاز التحكم عن بُعد النشط، لمزيد من المعلومات انظر 3.2 جهاز التحكم عن بُعد النشط، الصفحة 7.

3.1 قائمة Virtual Remote



الشكل 3.2 قائمة Virtual Remote

الرموز المدرجة في قائمة Virtual Remote هي:

زر المهمة	الإجراء	الوصف
+	إضافة جهاز تحكم عن بُعد	حدد هذا الإجراء لإضافة جهاز تحكم عن بُعد جديدة، انظر 4.4 إضافة جهاز تحكم عن بُعد ، الصفحة 10.
i	المعلومات	حدد هذا الإجراء لفتح صفحة المعلومات، انظر 4.6 المعلومات ، الصفحة 25.
<	الأيسر	حدد هذا الإجراء لتنشيط جهاز التحكم عن بُعد الموجود على يسار جهاز التحكم عن بُعد النشط.
>	الأيمن	حدد هذا الإجراء لتنشيط جهاز التحكم عن بُعد الموجود على يمين جهاز التحكم عن بُعد النشط.
✎	وضع التعديل	حدد هذا الإجراء للذهاب إلى وضع التعديل بجهاز التحكم عن بُعد النشط، انظر 4.5 وضع التعديل ، الصفحة 17.
✕	إغلاق/تصغير	حدد هذا الإجراء لتصغير تطبيق Virtual Remote.

3.2 جهاز التحكم عن بُعد النشط

جهاز التحكم عن بُعد النشط هو دائمًا جهاز للتحكم عن بُعد موجود في وسط قائمة Virtual Remote، انظر الشكل 3.3 جهاز التحكم عن بُعد النشط.




الشكل 3.3 جهاز التحكم عن بُعد النشط

كل الأزرار الظاهرة على الشاشة تخص جهاز التحكم عن بُعد النشط.



سيكون بإمكانك أن ترى أسماء ما يزيد عن اثنين (2) أو أكثر من أجهزة التحكم عن بُعد المتاحة، واحد في كل جانب من جوانب جهاز التحكم عن بُعد النشط. ستري فقط الاسم وليس الأزرار الخاصة بأجهزة التحكم عن بُعد المتاحة حتى تتحكم في الزر النشط.

3.3 الأزرار

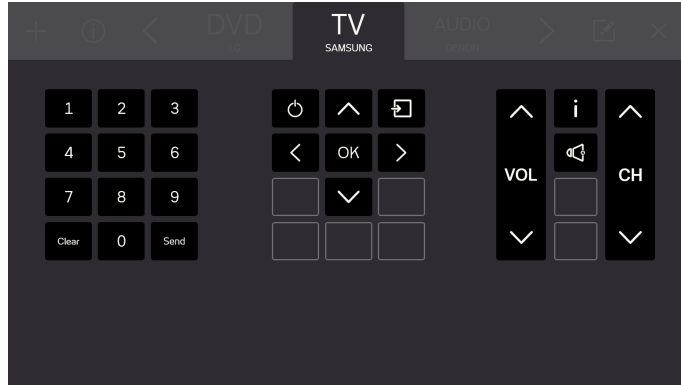


الشكل 3.4 الأزرار


كل الأزرار الظاهرة على الشاشة تخص جهاز التحكم عن بُعد النشط. يوجد نوعان (2) من الأزرار في جهاز التحكم عن بُعد.

- الزر النشط ، انظر الشكل 3.5 الأزرار النشطة، الصفحة 8
- الزر غير النشط ، انظر الشكل 3.6 الأزرار غير النشطة، الصفحة 8

عدد الأزرار ووظائفها ستختلف بناءً على نوع النظام الذي يريد المستخدم أن يتحكم فيه.

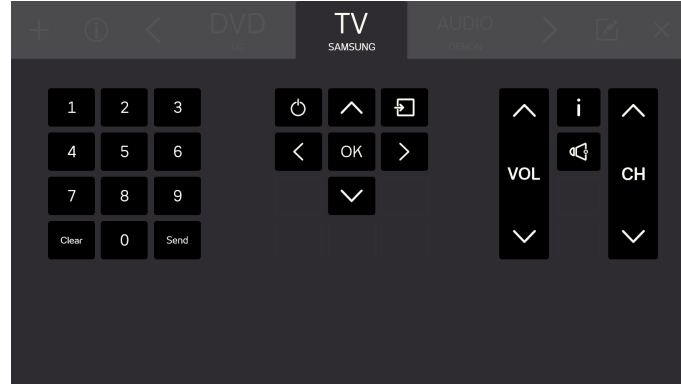

الشكل 3.5 الأزرار النشطة

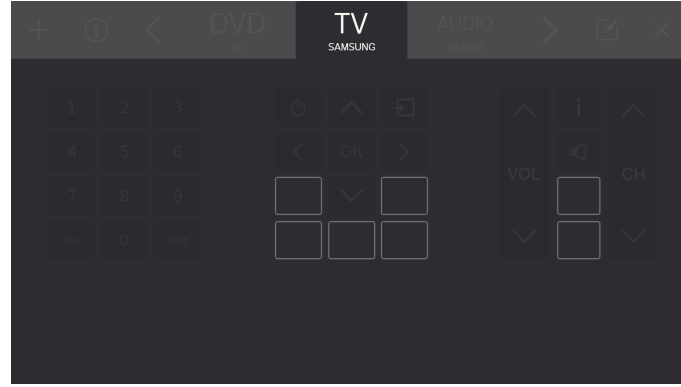


الشكل 3.6 الأزرار غير النشطة

4 استخدام Tobii Dynavox Virtual Remote

يمكن Tobii Dynavox Virtual Remote المستخدم من التحكم في جهاز تلفزيون، أو دي في دي، أو نظام صوتي، وما إلى ذلك من الجهاز. يتم تمكين كل الوظائف في Virtual Remote باللمس والماوس، مما يسهل على أي مقدم رعاية أو مساعد أن يقدم المساعدة للمستخدم عند الحاجة. 

4.1 عند التشغيل لأول مرة

هناك دليل مختصر لتعريف المستخدم بمخطط برنامج Virtual Remote. اتبع فقط التعليمات الظاهرة على الشاشة

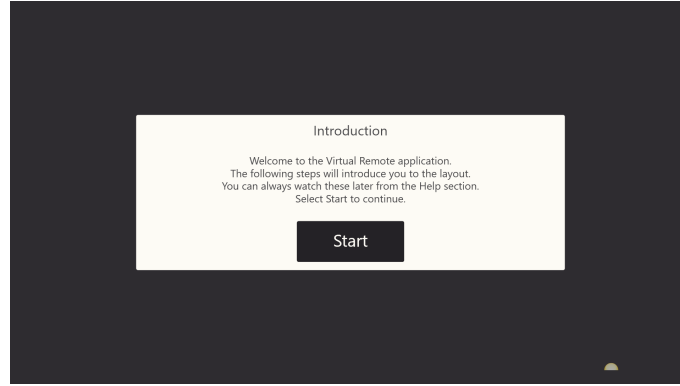

الشكل 4.1 شاشة مقدمة Virtual Remote.

4.2 تغيير جهاز التحكم عن بُعد النشط

لتغيير جهاز التحكم عن بُعد النشط:

- حدد أحد الأسماء الموجودة على يمين أو يسار جهاز التحكم عن بُعد النشط.
 - أو استخدم الزرين < و > للتمرير عبر أجهزة التحكم عن بُعد المتاحة.
- جهاز التحكم عن بُعد النشط هو دائمًا جهاز التحكم عن بُعد الموجود في وسط قائمة Virtual Remote. 


4.3 استخدام الأزرار الموجودة على جهاز تحكم عن بُعد

حدد فقط الزر الذي تريد استخدامه لإرسال إشارة للجهاز. أزرار الصوت غالبًا ما تكون مهيئة لإرسال إشارة مستمرة طالما كان الزر مُحددًا. لمزيد من المعلومات، انظر 4.5.3.1 طول الإشارة، الصفحة 20.

لإدخال عدد أكبر من 9 (مثال؛ أرقام متعددة)، اتبع هذا الإجراء.

قائمة خطوات الأعداد الأكبر من 9

1. حدد كل الأعداد لإرسالها بالتسلسل الواجب إرسالها به. ستكون كل الأعداد المحددة ظاهرة في مربع أبيض اللون أسفل القسم المخصص للأرقام بجهاز التحكم عن بُعد.

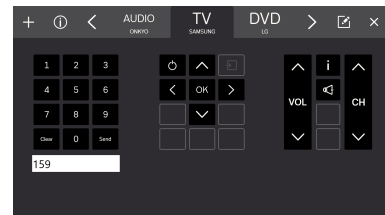

2. حدد الزر إرسال لإرسال إشارة إلى الجهاز أو مسح لحذف جميع الأعداد المحددة.

4.4 + إضافة جهاز تحكم عن بُعد

توجد طريقتان (2) لإضافة جهاز تحكم عن بُعد جديد.


4.4.1 إضافة جهاز تحكم عن بُعد مُبرمج.

لإضافة جهاز تحكم عن بُعد مُبرمج، اتبع هذا الإجراء:

قائمة خطوات إضافة جهاز تحكم عن بُعد مُبرمج


1. حدد + من القائمة.

2. حدد الزر مبرمج مسبقًا

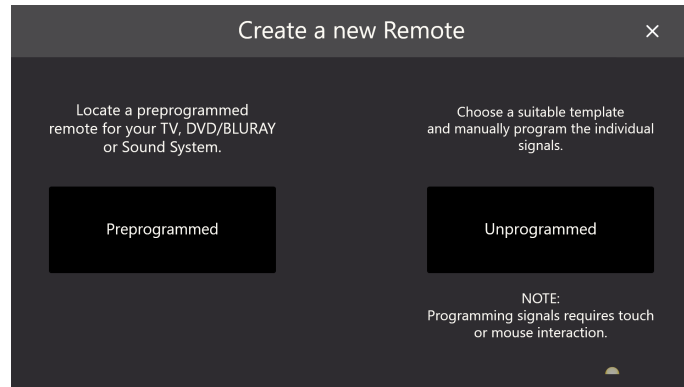

3. حدد نوع جهاز التحكم عن بُعد المُبرمج

- تليفزيون
- دي في دي / بلوراي
- الصوت

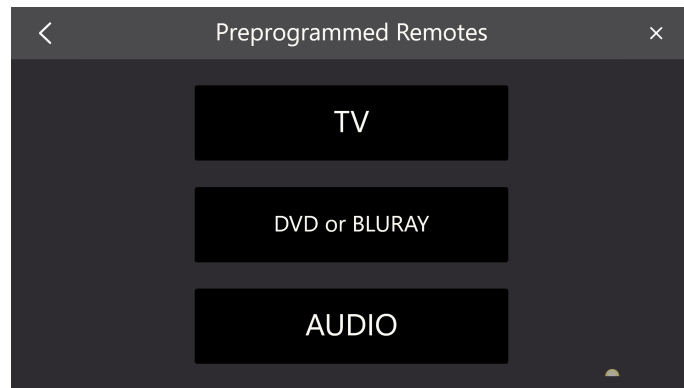


4. حدد العلامة التجارية من القائمة

إذا لم تتمكن من إيجاد العلامة التجارية، حدد غير ذلك، لمزيد من المعلومات انظر 4.4.1.1 أجهزة تحكم عن بُعد أخرى، الصفحة 12




5. عند تحديد العلامة التجارية، ستظهر قائمة منبثقة تعرض معلومات حول عدد أجهزة التحكم عن بُعد المبرمجة مسبقًا المتاحة.

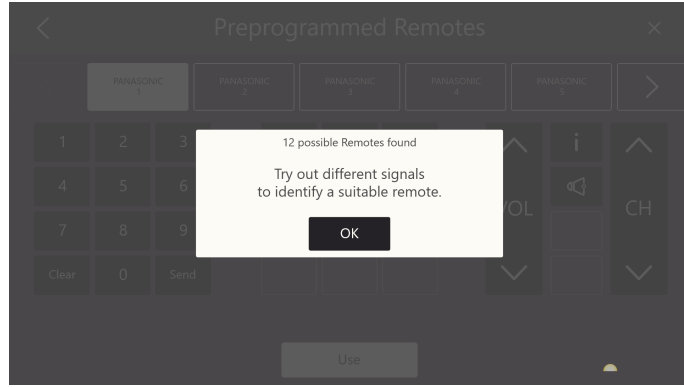

حدد زر موافق.

6. حدد جهاز تحكم عن بُعد

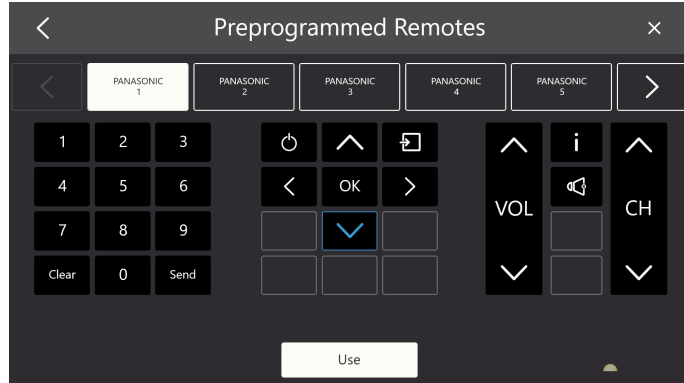

7. جَرِّب إشاراتنا المختلفة على جهاز التحكم عن بُعد المحدد لتحديد جهاز مناسب للتحكم عن بُعد.


8. كرر الخطوات 6 و 7 حتى يتم العثور على أكثر جهاز مناسب للتحكم عن بُعد.




استخدم الزرين < و > للتمرير عبر أجهزة التحكم عن بُعد المتاحة.

9. حدد أكثر جهاز مناسب للتحكم عن بُعد.

10. حدد زر استخدم.

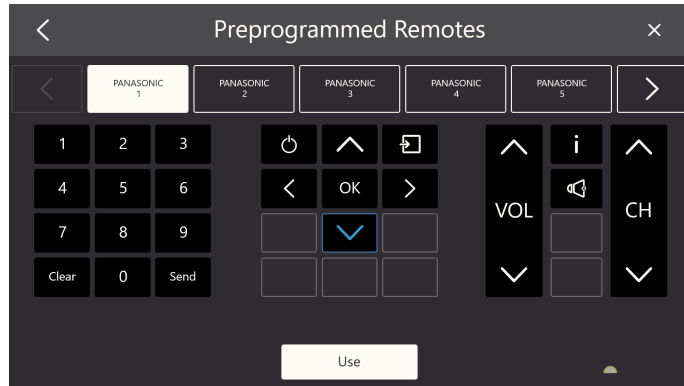

11. سيتم نسخ جهاز التحكم عن بُعد المحدد إلى أجهزة التحكم عن بُعد المتاحة.

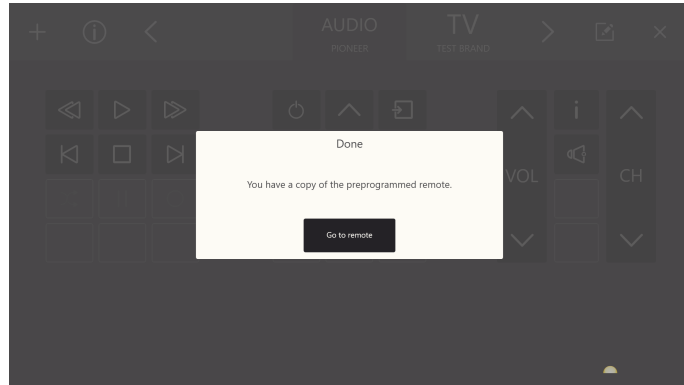


حدد زر انتقل إلى جهاز التحكم عن بُعد للإنتهاء.

4.4.1.1 أجهزة تحكم عن بُعد أخرى


لإضافة أجهزة تحكم عن بُعد أخرى، اتبع هذا الإجراء:

قائمة خطوات إضافة أجهزة تحكم عن بُعد أخرى


1. اتبع الخطوة من 1 إلى 3 في قائمة الخطوات: قائمة خطوات إضافة جهاز تحكم عن بُعد مُبرمج، الصفحة 10.
2. حدد زر غير ذلك.
3. اكتب اسم العلامة التجارية في مربع النص.

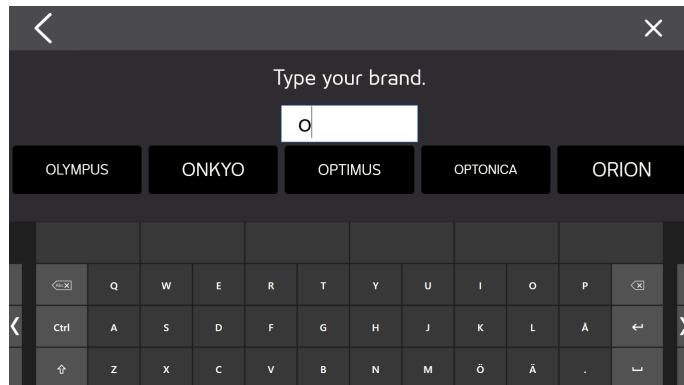


لتضييق نتائج البحث، اكتب المزيد من الأحرف.

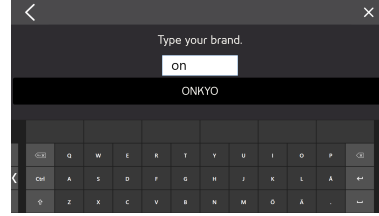

4. حدد العلامة التجارية.

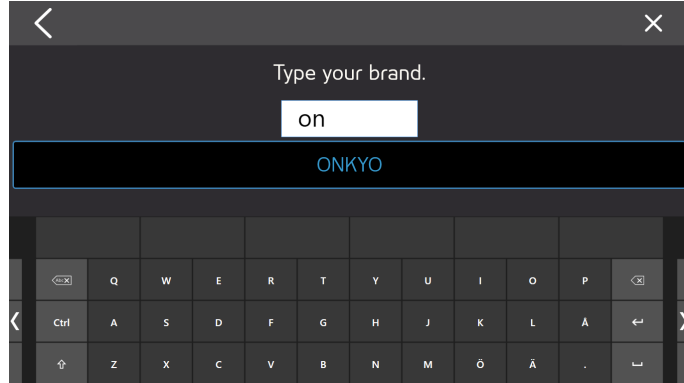


5. عند تحديد العلامة التجارية، ستظهر قائمة منبثقة تعرض معلومات حول عدد أجهزة التحكم عن بُعد المبرمجة مسبقًا المتاحة.

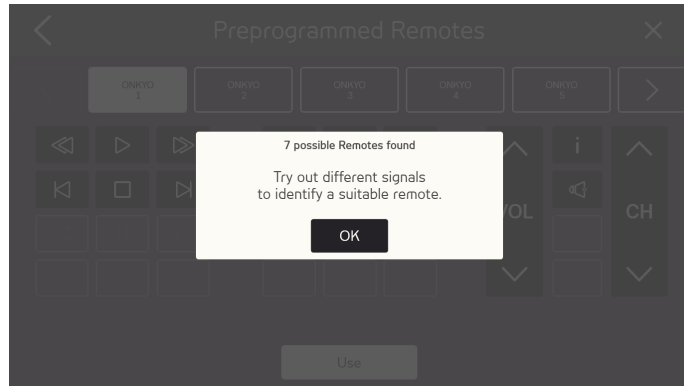

حدد زر موافق.

6. حدد جهاز تحكم عن بُعد

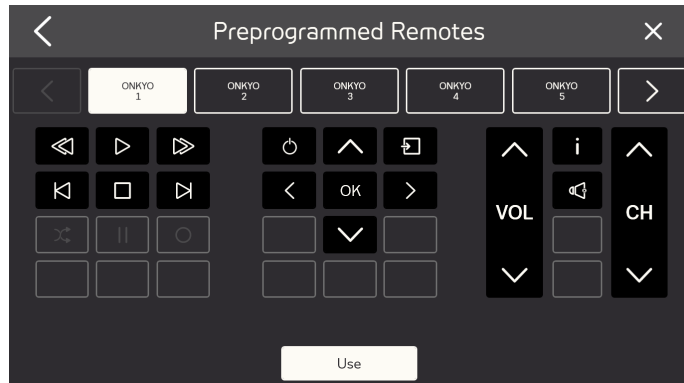


7. جَرِّب إشارات مختلفة على جهاز التحكم عن بُعد المحدد لتحديد جهاز مناسب للتحكم عن بُعد.

8. أعد الخطوتين 6 و 7 حتى يتم العثور على أفضل جهاز محتمل للتحكم عن بُعد.


استخدم الزرين < و > للتمرير عبر أجهزة التحكم عن بُعد المتاحة. 

9. حدد أكثر جهاز مناسب للتحكم عن بُعد.

10. حدد زر استخدم.

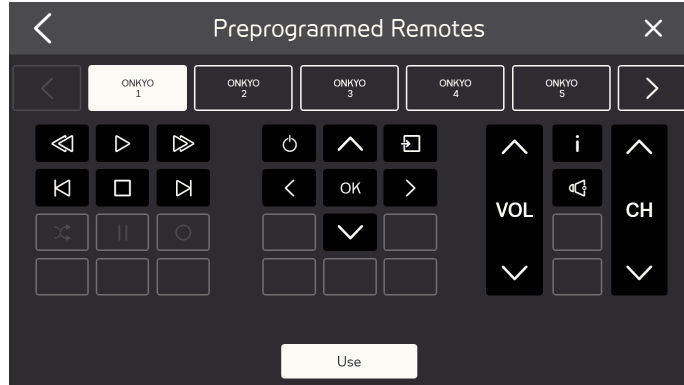

11. سيتم نسخ جهاز التحكم عن بُعد المحدد إلى أجهزة التحكم عن بُعد المتاحة.

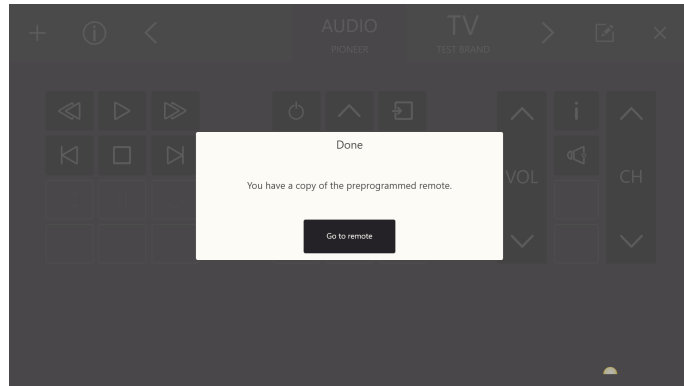

حدد زر انتقل إلى جهاز التحكم عن بُعد للإبقاء.


4.4.2 إضافة جهاز تحكم عن بُعد غير مُبرمج

لإضافة جهاز تحكم عن بُعد غير مُبرمج، اتبع هذا الإجراء:

قائمة خطوات إضافة جهاز تحكم عن بُعد غير مُبرمج


1. حدد + من القائمة.

2. حدد زر غير مُبرمج

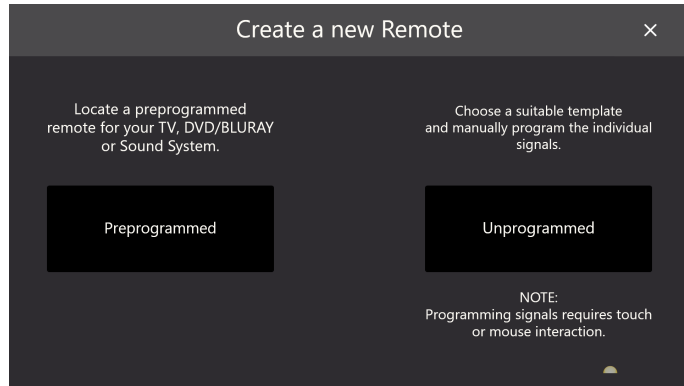


3. حدد نوع جهاز التحكم عن بُعد غير المُبرمج

- تليفزيون
- الصوت
- كابل بوكس
- دي في دي أو بلوراي
- قالب فارغ

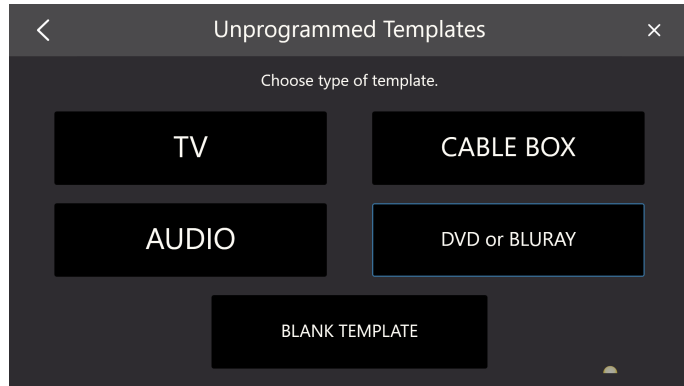

4. حدد زر لبرمجته.

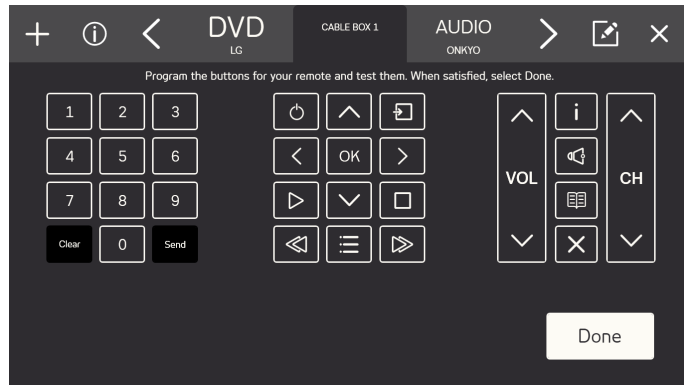


ستختلف الرموز المتاحة بناء على نوع جهاز التحكم عن بُعد المحدد في الخطوة رقم 3.




5. حدد زر لبرمجته.

6. وجه جهاز التحكم عن بُعد نحو جهاز الاستقبال بالأشعة تحت الحمراء Tobii Dynavox ثم اضغط على الزر المطلوب في جهاز التحكم عن بُعد الذي تريد Remote أن يكتشفه.

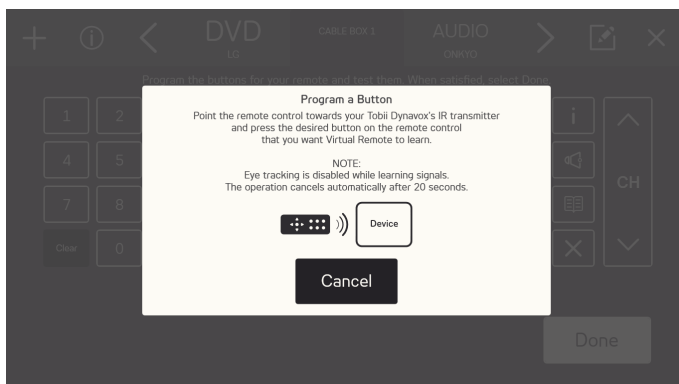

7. عند حفظ الإشارة في Virtual Remote، ستنطبق رسالة بعنوان تم

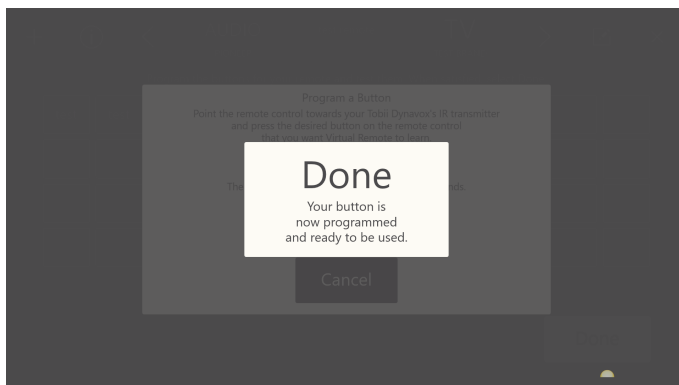

سَتُغْلَقُ هذه الرسالة المنبثقة تلقائياً بعد عدة ثوانٍ.




8. كرر الخطوات من 5 إلى 7 حتى تنتهي من برمجة كل الأضرار المطلوبة جهاز التحكم عن بُعد.

التغيير أو حذف الأزرار على جهاز التحكم عن بعد، يجب تنتهي من البرمجة وتنتهي إلى وضع التعديل. لمزيد من المعلومات حول وضع التعديل، انظر 4.5 وضع التعديل، الصفحة 17.



9. حدد تم للإنهاء.

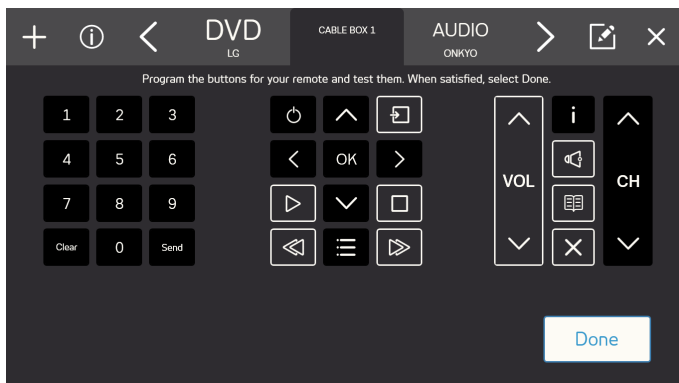



4.5 وضع التعديل

باستخدام وضع التعديل، يمكنك إجراء تغييرات على أجهزة التحكم عن بُعد الموجودة. تأكد من أن جهاز التحكم عن بُعد الذي تريد تعديله هو جهاز التحكم عن بُعد النشط. للدخول إلى وضع التعديل، اتبع هذا الإجراء:

قائمة خطوات وضع التعديل



1. حدد الزر (وضع التعديل).



2. حدد الجزء المراد إجراء تعديل عليه في جهاز التحكم عن بُعد. يمكن إجراء التعديلات التالية:

- تغيير اسم جهاز التحكم عن بُعد، انظر 4.5.1 تغيير اسم جهاز التحكم عن بُعد، الصفحة 17.
- حذف جهاز تحكم عن بُعد، انظر 4.5.2 حذف جهاز تحكم عن بُعد، الصفحة 18.
- إجراء تغييرات على زر نشط موجود، انظر 4.5.3 إجراء تغييرات على زر نشط موجود.
- إجراء تغييرات على زر غير مُبرمج موجود، انظر 4.5.4 إجراء تغييرات على زر موجود غير مُبرمج، الصفحة 22.
- إضافة زر جديد في مساحة فارغة، انظر 4.5.5 إضافة زر جديد في مساحة فارغة، الصفحة 24.

4.5.1 تغيير اسم جهاز التحكم عن بُعد

لتغيير اسم جهاز تحكم عن بُعد، اتبع هذا الإجراء:

تغيير اسم جهاز التحكم عن بُعد




1. حدد الزر (وضع التعديل).




2. حدد مربع التحديد هنا للتعديل حول اسم جهاز التحكم عن بُعد.

3. حدد الزر إعادة تسمية.

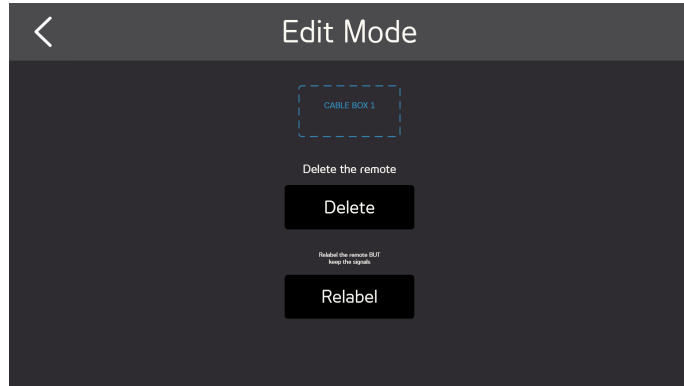

4. اكتب الاسم الجديد.

تأكد من استخدام اسم قصير.

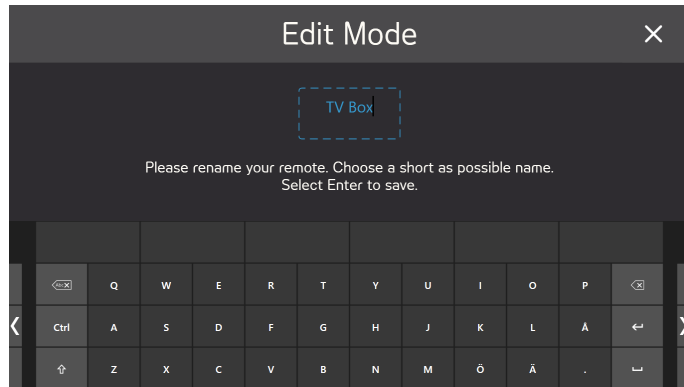

5. حدد مفتاح **Enter** على لوحة المفاتيح لإنهاء إعادة التسمية.

6. حدد الرمز  للخروج من وضع التعديل.

4.5.2 حذف جهاز تحكم عن بُعد

لحذف جهاز تحكم عن بُعد، اتبع هذا الإجراء:


قائمة خطوات حذف جهاز تحكم عن بُعد

1. حدد الزر  (وضع التعديل).




2. حدد مربع التحديد هنا للتعديل حول اسم جهاز التحكم عن بُعد.

3. حدد زر حذف.

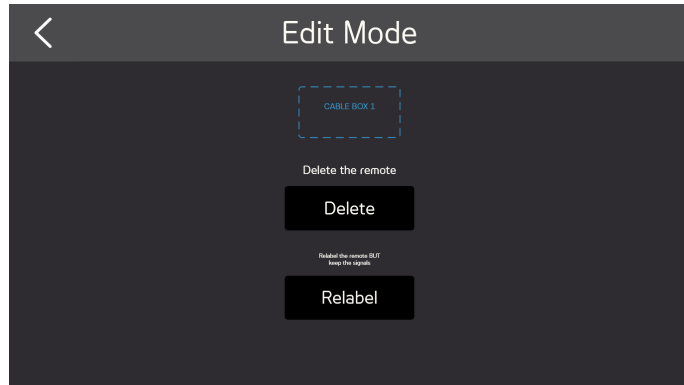

4. حدد:

- نعم للحذف
- لا للإلغاء

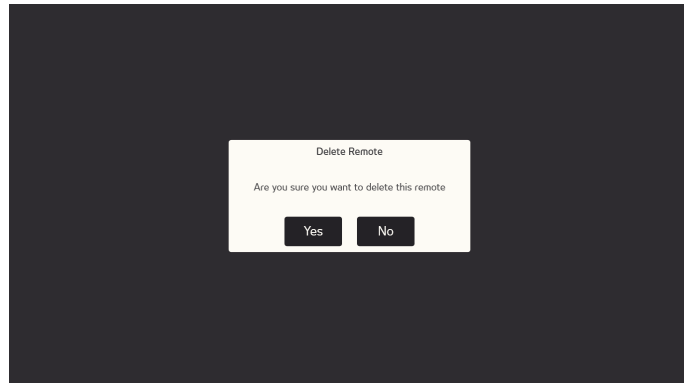

5. حدد الرمز  للخروج من وضع التعديل.

4.5.3 إجراء تغييرات على زر نشط موجود

لإجراء تغييرات على زر نشط موجود، اتبع هذا الإجراء:

قائمة خطوات إجراء تغييرات على زر نشط موجود


1. حدد الزر  (وضع التعديل).



2. حدد زرًا ذي خلفية سوداء ورمز أو نص، مثل , في مربع "تحديد زر لتعديله" حول أزرار جهاز التحكم عن بُعد.

3. حدد أحد الإجراءات التالية:

- طول الإشارة، انظر 4.5.3.1 طول الإشارة.
- إشارة جديدة، انظر 4.5.3.2 إشارة جديدة، الصفحة 21
- تغيير النص، انظر 4.5.3.3 تغيير النص، الصفحة 22
- تغيير الرمز، انظر 4.5.3.4 تغيير الرمز، الصفحة 22
- سيقوم الزر مسح بمحو جميع المعلومات المخزنة على الزر.

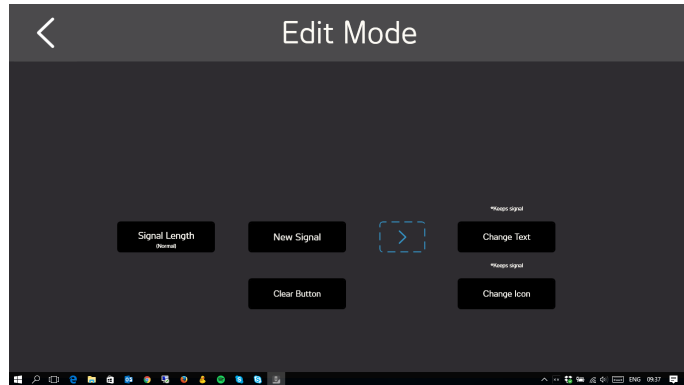

4. حدد الرمز  للخروج من وضع التعديل.


4.5.3.1 طول الإشارة

من أجل تعرّف وحدة الاستقبال على الإشارة المُرسلة من Virtual Remote، قد تحتاج إلى تغيير قوة الإشارة. يجب أيضًا تعيين قوة الإشارة إذا كنت تريد أن يستمر أحد الأزرار في إرسال الإشارة طوال المدة التي تحدد فيها الزر.

حدد واحد (1) من الإجراءات البديلة التالية:

- عادية - سيتم إرسال الإشارة تحت الحمراء بتدفق قصير.
- طويلة - سيتم إرسال الإشارة تحت الحمراء خلال ثانية واحدة (1).
- طويلة جدًا - سيتم إرسال الإشارة تحت الحمراء خلال ثانيتين (2).
- مستمرة - سيتم إرسال الإشارة طوال المدة التي يتم فيها تحديد الزر.

هذا هو الإعداد النموذجي لزر الصوت على سبيل المثال

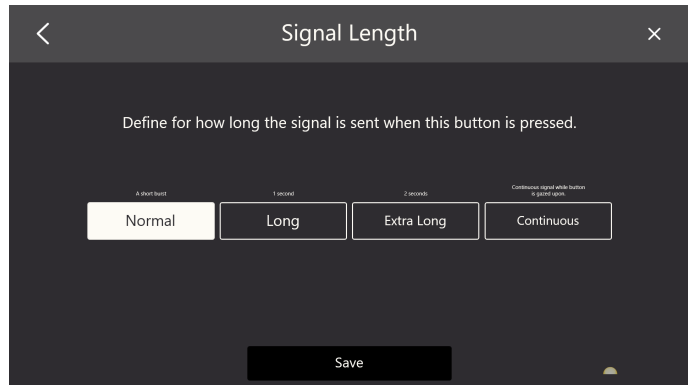


4.5.3.2 إشارة جديدة


لبرمجة إشارة جديدة لزر ماء، اتبع هذا الإجراء:

قائمة خطوات الإشارة الجديد

1. وجه جهاز التحكم عن بُعد نحو جهاز الاستقبال Tobii Dynavox بالأشعة تحت الحمراء ثم اضغط على الزر المطلوب في جهاز التحكم عن بُعد والذي تريد لجهاز Virtual Remote أن يتعرف عليه.

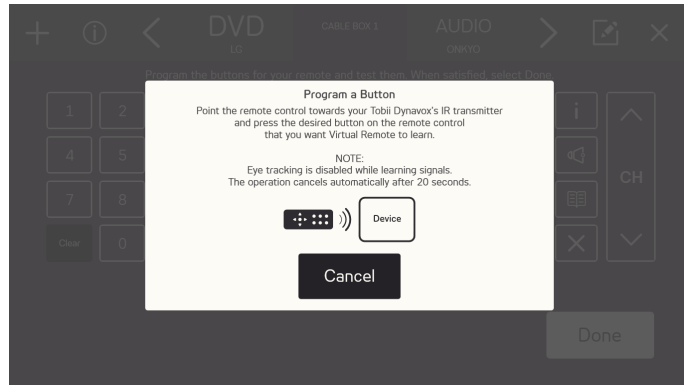

2. عند حفظ الإشارة في Virtual Remote، ستنبثق رسالة بعنوان تم

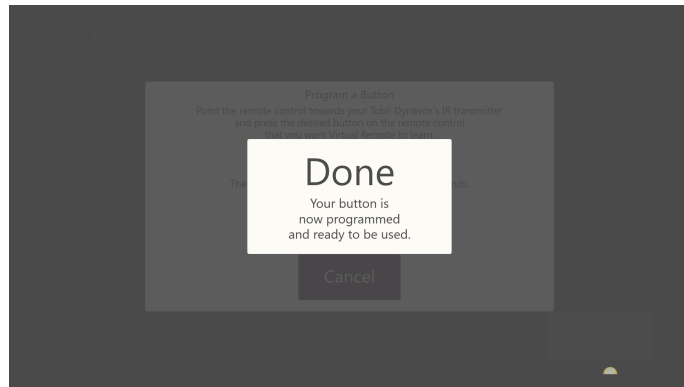

ستُغلق هذه الرسالة المنبثقة تلقائيًا بعد عدة ثوانٍ.




4.5.3.3 تغيير النص

لتغيير النص، اتبع هذا الإجراء:

قائمة خطوات تغيير النص

1. اكتب النص الذي يجب أن يظهر على الزر.

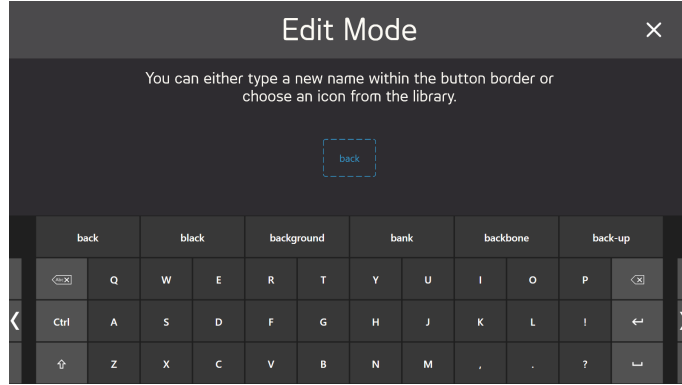


2. حدد المفتاح Enter/Return على لوحة المفاتيح لقبول النص.

4.5.3.4 تغيير الرمز

لتغيير الرمز، اتبع هذا الإجراء:

1. حدد رمز متاح.

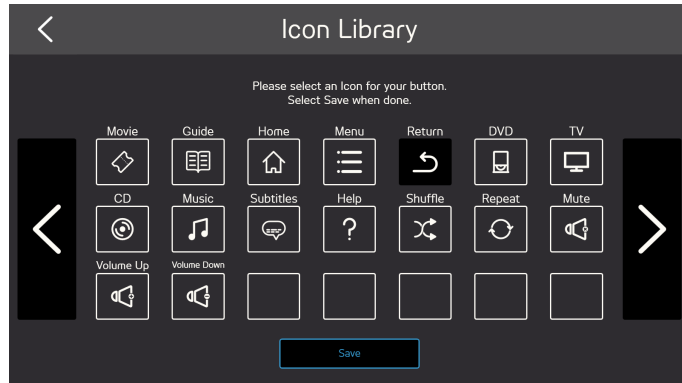

2. حدد زر حفظ لقبول الرمز.

4.5.4 إجراء تغييرات على زر موجود غير مُبرمج

لإجراء تغييرات على زر موجود غير مُبرمج، اتبع هذا الإجراء:

قائمة خطوات إجراء تغييرات على زر موجود غير مُبرمج


1. حدد الزر  (وضع التعديل).



2. حدد زرًا ذي خلفية رمادية ورمز أو نص، مثل ، في مربع تحديد زر لتعديله حول أزرار جهاز التحكم عن بُعد.

3. حدد أحد الإجراءات التالية:

- البرمجة، انظر 4.5.4.1 البرمجة، الصفحة 23.
- تغيير النص، انظر 4.5.3.3 تغيير النص، الصفحة 22
- تغيير الرمز، انظر 4.5.3.4 تغيير الرمز، الصفحة 22
- سيقوم الزر مسح بمحو جميع المعلومات المخزنة على الزر.

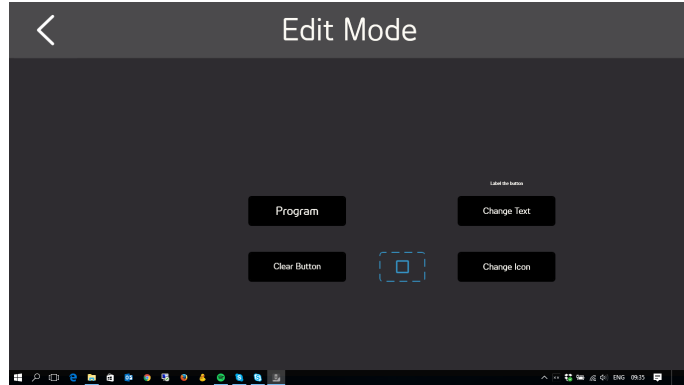


4. حدد الرمز  للخروج من وضع التعديل.

4.5.4.1 البرمجة


لبرمجة إشارة لزر ما، اتبع هذا الإجراء:

قائمة خطوات البرمجة

1. وجه جهاز التحكم عن بُعد نحو جهاز الاستقبال Tobii Dynavox بالأشعة تحت الحمراء ثم اضغط على الزر المطلوب في جهاز التحكم عن بُعد والذي تريد لجهاز Virtual Remote أن يتعرف عليه.

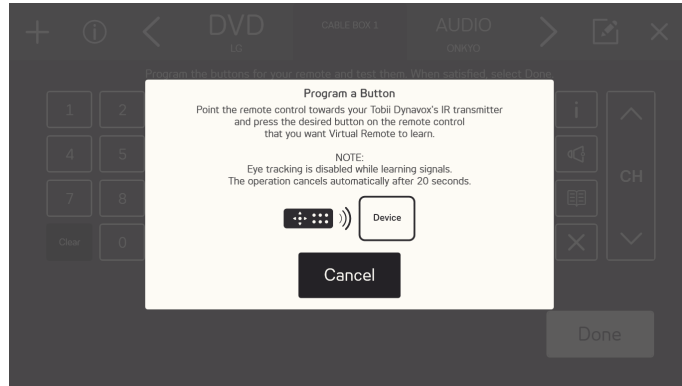

2. عند حفظ الإشارة في Virtual Remote، ستنبثق رسالة بعنوان تم

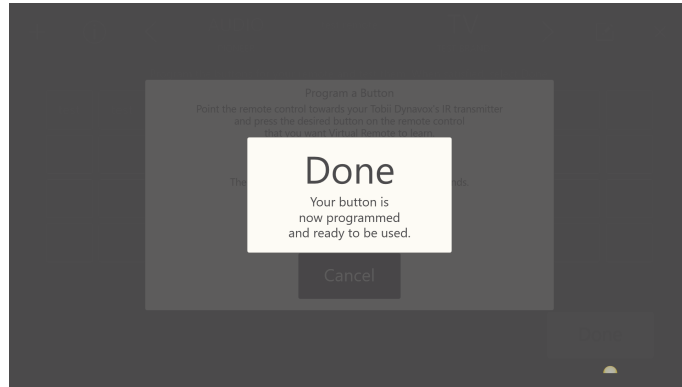

سُغِّقَت هذه الرسالة المنبثقة تلقائيًا بعد عدة ثوانٍ.




4.5.5 إضافة زر جديد في مساحة فارغة

لإضافة زر جديد في مساحة فارغة، اتبع هذا الإجراء:

قائمة خطوات إضافة زر جديد في مساحة فارغة


1. حدد الزر (وضع التعديل).

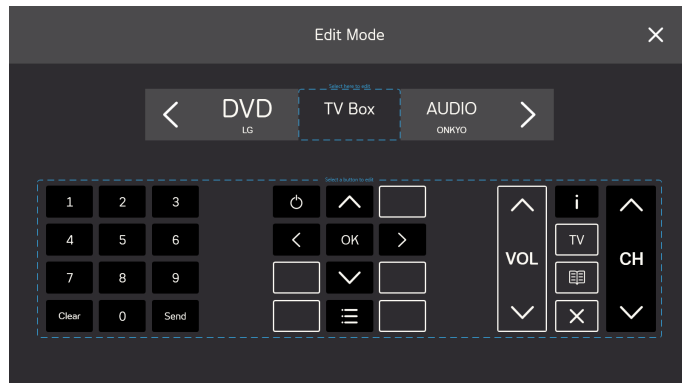

2. حدد زرًا ذي خلفية رمادية ويكون فارغًا، مثل ، في مربع تحديد زر لتعديله حول أزرار حول أزرار جهاز التحكم عن بُعد.

3. حدد أحد الإجراءات التالية:


- تغيير النص، انظر 4.5.3.3 تغيير النص، الصفحة 22
- تغيير الرمز، انظر 4.5.3.4 تغيير الرمز، الصفحة 22

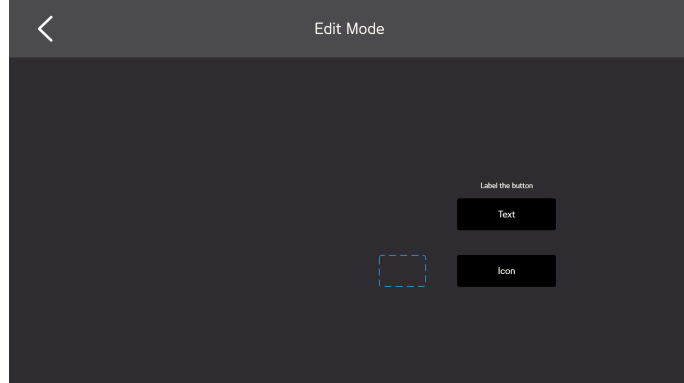


4. حدد الرمز  للخروج من وضع التعديل.

4.6 المعلومات

ستجد في صفحة المعلومات كل المعلومات الخاصة بالإصدار لكل من الأجزاء الصلبة والأجزاء المختلفة من البرامج.

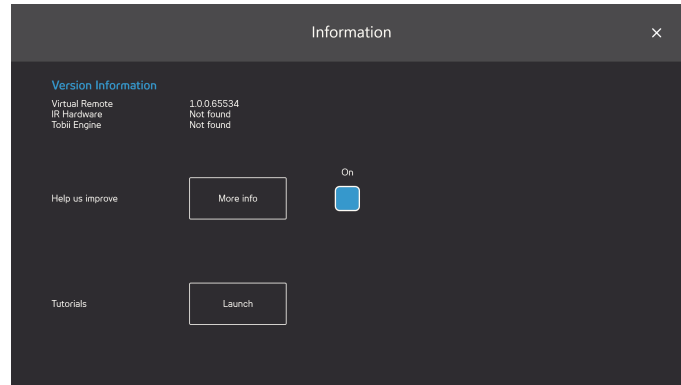

ساعدنا كي نتحسن: لمساعدة Tobii Dynavox في تحسين البرامج، قم بتبديل خانة الاختيار تشغيل/إيقاف إلى الوضع تشغيل. حدد زر المزيد من المعلومات لفتح صفحة بها معلومات حول هذا الأمر. لمزيد من المعلومات، انظر الشكل 4.2 جمع البيانات، الصفحة 26.

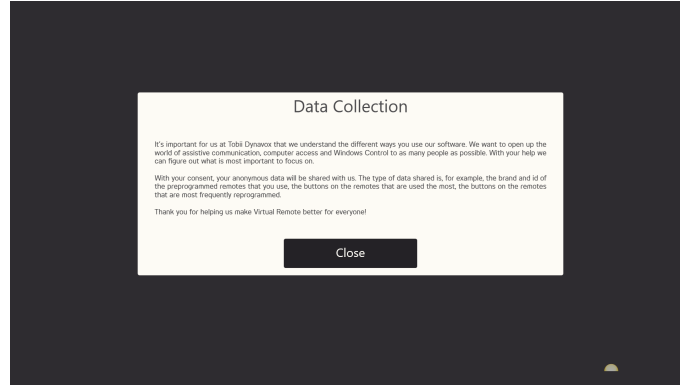

الشكل 4.2 جمع البيانات

البرامج التعليمية: سنتمكن أيضًا من تشغيل البرامج التعليمية لجهاز Virtual Remote عن طريق تحديد زر تشغيل.

حقوق الطبع والنشر لشركة Tobii AB (publ). لا تنطبق الرسوم التوضيحية والمواصفات بالضرورة على المنتجات والخدمات المطروحة في كل سوق محلية. تخضع المواصفات الفنية للتغيير دون إخطار مسبق. تُعد جميع العلامات التجارية الأخرى ملكية خاصة بأصحابها المعنيين.

دعم جهاز Tobii Dynavox

احصل على المساعدة عبر الإنترنت
يرجى الرجوع إلى صفحة الدعم المخصصة لكل منتج للحصول على دعم لجهاز Tobii Dynavox. تحتوي هذه الصفحة على أحدث المعلومات المتعلقة بالمشاكل والنصائح والحيل المرتبطة بهذا المنتج. ابحث عن صفحات الدعم على الإنترنت عبر موقع: www.tobiidynavox.com أو www.myTobiiDynavox.com.

اتصل بمندوب المبيعات أو الموزع
في حالة وجود أي استفسارات أو مشاكل تواجهك مع المنتج، يمكنك الاتصال بمندوب مبيعات Tobii Dynavox أو الموزع المعتمد للحصول على المساعدة. فهم على دراية أكثر بالإعداد الشخصي ويمكنهم تقديم أفضل مساعدة لك من خلال إعطاء النصائح والتدريب على استخدام المنتج. للاطلاع على تفاصيل الاتصال، يمكنك زيارة الموقع الإلكتروني www.TobiiDynavox.com/contact.