

Tobii Dynavox Virtual Remote

Käyttäjän opas



Käyttäjän opas Tobii Dynavox Virtual Remote

Versio 1.1

06/2017

Kaikki oikeudet pidätetään.

Copyright © Tobii AB (publ)

Mitään tämän asiakirjan osaa ei saa jäljentää, tallentaa hakujärjestelmään tai siirtää missään muodossa tai millään tavalla (sähköisesti, valokopioimalla, äänittämällä tai muuten) ilman julkaisijan ennalta antamaa kirjallista suostumusta.

Tekijänoikeuden suoja koskee tekijänoikeudella suojatun materiaalin ja tiedon kaikkia muotoja ja sisältöjä lain sallimissa tai jäljempänä sallituissa rajoissa mukaan luettuna rajoituksetta näytössä näkyvien ohjelmistojen tuottama materiaali, kuten näytöt ja valikot.

Tämän asiakirjan tiedot ovat Tobii Dynavox -yhtiön omaisuutta. Osittainen tai täydellinen kopiointi ilman Tobii Dynavox -yhtiön kirjallista lupaa on kielletty.

Tuotteet, joihin tässä asiakirjassa viitataan, voivat olla niiden omistajien tuotemerkkejä ja/tai rekisteröityjä tuotemerkkejä. Asiakirjan julkaisija ja laatija eivät väitä omistavansa tuotemerkkejä.

Asiakirja on laadittu huolella, mutta julkaisija ja laatija eivät ole vastuussa virheistä tai puutteista eivätkä asiakirjan tietojen tai sen mukana tulevien ohjelmien tai lähdekoodien käyttämisestä koituvista vahingoista. Julkaisija ja laatija eivät ole korvausvastuussa tämän asiakirjan käyttämisestä aiheutuneista tai aiheutuneiksi väitetyistä voittojen menetyksistä tai muista kaupallisista vahingoista.

Sisältöä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Tarkista tämän asiakirjan päivitetty versiot Tobii Dynavoxin verkkosivustosta osoitteesta www.TobiiDynavox.com.

Sisällysluettelo

1	Tietoja Tobii Dynavox Virtual Remote	4
1.1	Käyttötarkoitus	4
1.2	Järjestelmävaatimukset	4
2	Asennus ja aloittaminen	5
2.1	Tobii Dynavox -ohjelmiston asentaminen Virtual Remote	5
2.2	Tobii Dynavox -ohjelmiston käynnistäminen Virtual Remote	5
3	Virtual Remote Yleiskatsaus	6
3.1	Virtual Remote -valikko	6
3.2	Aktiivinen kaukosäädin	7
3.3	Painikkeet	7
4	Käyttö Tobii Dynavox Virtual Remote	9
4.1	Ensimmäinen käynnistys	9
4.2	Vaihda aktiivinen kaukosäädin	9
4.3	Kaukosäätimen painikkeiden käyttäminen	9
4.4	Lisää kaukosäädin	10
4.4.1	Lisää esiohjelmoitu kaukosäädin	10
4.4.2	Lisää ohjelmoimaton kaukosäädin	14
4.5	Muokkaustila	17
4.5.1	Vaihda kaukosäätimen nimi	17
4.5.2	Poista kaukosäädin	18
4.5.3	Tee muutoksia olemassa olevaan aktiiviseen painikkeeseen	19
4.5.4	Tee muutoksia olemassa olevaan ohjelmoituun painikkeeseen	22
4.5.5	Lisää uusi painike tyhjään tilaan	24
4.6	Tiedot	25

1 Tietoja Tobii Dynavox Virtual Remote

1.1 Käyttötarkoitus

Tobii Dynavox Virtual Remote avaa ympäristösi ohjauksen ilman näppäilyä! Ohjaa kaikkea, kuten TV:t, Apple TV:t, IR-lelut ja stereot, ikkunat, kaihtimet ja ovet!

Tobii Dynavox Virtual Remote vaatii tuetun IR-laitteiston. Lisätietoja on kohdassa *1.2 Järjestelmävaatimukset*.

Tobii Dynavox Virtual Remote -sovelluksella voit:

- Käyttää esiohjelmoituja kauko-ohjaimen signaaleja
- Tai ohjelmoida manuaalisesti omat kauko-ohjaimet

1.2 Järjestelmävaatimukset

Osa	Vaatimukset
Tietokone ja suoritin	2.0 gigahertsia (GHz) tai nopeampi, kaksiytiminen suoritin (vähimmäissuositus).
Muisti (RAM)	4 Gt RAM (vähimmäissuositus)
Kiintolevy	450 megatavua (Mt) vapaata levytilaa
USB	USB 2.0
Käyttöjärjestelmä	Virtual Remote -ohjelmisto toimii Microsoft Windows -käyttöjärjestelmän 32- tai 64-bittisillä versioilla. Kun käytät Virtual Remote -ohjelmiston 32-bittistä versiota Windows-käyttöjärjestelmän 64-bittisellä versiolla, ohjelma käyttää Windows-käyttöjärjestelmän 32-bittistä tasoa. • Windows 7 (64-bittinen) • Windows 8.1 (32- tai 64-bittinen) • Windows 10 (32- tai 64-bittinen)
.NET-versio	4.5
Eye Tracker -katseenseuranta	Tobii Dynavox tai Tobii Tech Eye tracker, joka tukee Tobii Eye Tracking Core -ohjelmistoa.
IR-kaukosäädin	Mikä tahansa HBR IR -sirulla varustettu laite, kuten: Tobii Dynavox EyeR, Indi, I-Series I-110 tai EyeMobile Plus

2 Asennus ja aloittaminen

2.1 Tobii Dynavox -ohjelmiston asentaminen Virtual Remote

If Windows Control asennetaan laitteeseen, Virtual Remote on osa Windows Control -ohjelmistoa ja se asennetaan automaattisesti Windows Control -asennuksen yhteydessä.

Jos sinun tarvitsee asentaa Virtual Remote, Virtual Remote voidaan ladata osoitteesta www.TobiiDynavox.com.

Asennusohjelma asentaa seuraavat sovellukset:

- Tobii Dynavox Virtual Remote

Asenna Virtual Remote -ohjelmisto noudattamalla ruudulla näkyviä ohjeita.

2.2 Tobii Dynavox -ohjelmiston käynnistäminen Virtual Remote

Virtual Remote-käynnistys:

- Valitse  Virtual Remote -kuvake Windowsissa.
- tai valitse  Virtual Remote pikavalinnoista kohdassa Windows Control.

3 Virtual Remote Yleiskatsaus



Kuva 3.1 Virtual Remote-yleiskatsaus

Virtual Remote jaetaan kahteen alueeseen:

- Virtual Remote -valikko, lisätietoja kohdasta 3.1 *Virtual Remote -valikko*, sivu 6.
- Aktiivinen kaukosäädin, lisätietoja kohdasta 3.2 *Aktiivinen kaukosäädin*, sivu 7.

3.1 Virtual Remote -valikko




Kuva 3.2 Virtual Remote -valikko

Virtual Remote -valikon kuvakkeet ovat:

Tehtäväpainike	Toiminto	Kuvaus
+	Lisää kaukosäädin	Valitse tämä lisätäksesi uuden kaukosäätimen, katso 4.4 <i>Lisää kaukosäädin</i> , sivu 10.
i	Tiedot	Valitse tämä avataksesi tietosivun, katso 4.6 <i>Tiedot</i> , sivu 25.
<	Vasen	Valitse tämä aktivoiaksesi kaukosäätimen, joka on vasemmalla aktiivisesta kaukosäätimestä.
>	Oikea	Valitse tämä aktivoiaksesi kaukosäätimen, joka on oikealla aktiivisesta kaukosäätimestä.
✎	Muokkaustila	Valitse tämä siirtyäksesi aktiivisen kaukosäätimen muokkaustilaan, katso 4.5 <i>Muokkaustila</i> , sivu 17.
×	Sulje/pienennä	Pienennä tästä Virtual Remote -sovellus.

3.2 Aktiivinen kaukosäädin

Aktiivinen kaukosäädin on aina keskellä Virtual Remote -valikossa, katso *Kuva 3.3 Aktiivinen kaukosäädin*.

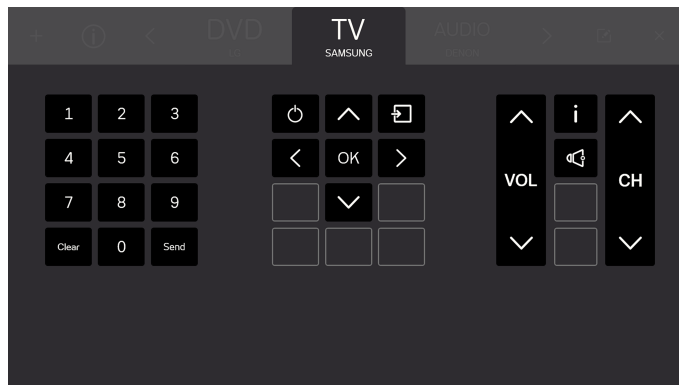


Kuva 3.3 Aktiivinen kaukosäädin



Kaikki näytöllä näkyvät painikkeet kuuluvat aktiiviseen kaukosäätimeen.

Näet myös kahden (2) käytettävissä olevan kaukosäätimen nimet, yksi aktiivisen kaukosäätimen molemmin puolin. Näet käytettävissä olevista kaukosäätimistä vain nimet, ei näppäimiä, kunnes valitse ne aktiivisiksi.

3.3 Painikkeet

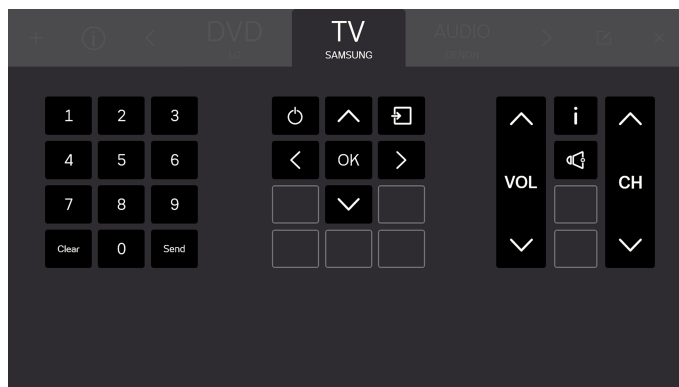


Kuva 3.4 Painikkeet

Kaikki näytöllä näkyvät painikkeet kuuluvat aktiiviseen kaukosäätimeen. Kaukosäätimessä on kahden (2) tyyppisiä painikkeita.


- Aktiivinen painike , katso *Kuva 3.5 Aktiiviset painikkeet, sivu 8*
- Inaktiiviset painikkeet , katso *Kuva 3.6 Inaktiiviset painikkeet, sivu 8*



Painikkeiden ja toimintojen määrä vaihtelee riippuen, minkä tyyppistä järjestelmää käyttäjä haluaa ohjata.

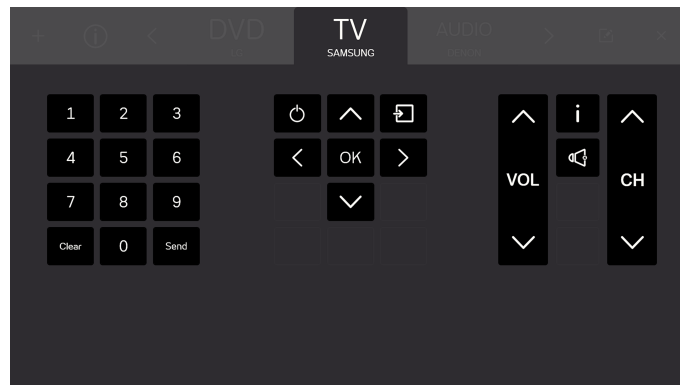

Kuva 3.5 Aktiiviset painikkeet

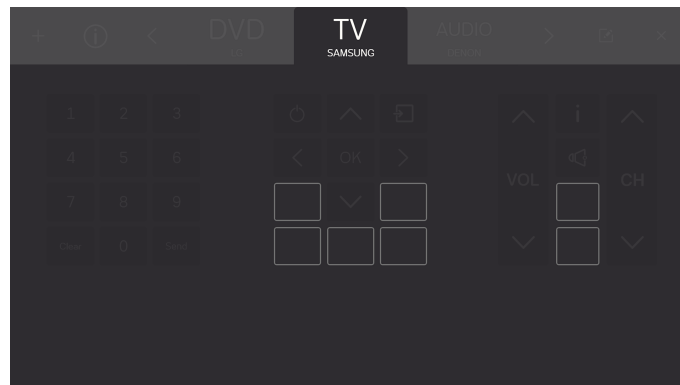

Kuva 3.6 Inaktiiviset painikkeet

4 Käyttö Tobii Dynavox Virtual Remote

Tobii Dynavox Virtual Remote -sovelluksen avulla käyttäjä voi ohjata TV:tä, DVD:tä, audiojärjestelmiä yms. laitteelta.



Kaikki Virtual Remote -tilan toiminnot ovat käytettävissä myös koskettamalla ja hiirellä, minkä ansiosta hoitajan tai avustajan on helppo auttaa käyttäjää tarvittaessa.

4.1 Ensimmäinen käynnistys

Käyttäjä voi tutustua Virtual Remote -ohjelmiston asetteluun pikaoppaassa. Noudata ruudulla näkyviä ohjeita.



Kuva 4.1 Virtual Remote -esittelynäyttö.

4.2 Vaihda aktiivinen kaukosäädin

Vaihda aktiivinen kaukosäädin:

- Valitse aktiivisen kaukosäätimen vasemmalla tai oikealla puolella oleva nimi.
- tai käytä < ja > -painiketta selataksesi käytettävissä olevia kaukosäätimiä.



Aktiivinen kaukosäädin on aina keskellä Virtual Remote -valikossa.


4.3 Kaukosäätimen painikkeiden käyttäminen

Valitse vain painike, jota haluat käyttää lähettääksesi signaalille laitteen. Äänenvoimakkuuspainikkeita käytetään yleensä jatkuvan signaalin lähettämiseen sen ajan, jonka painike on painettuna. Lisätietoja on kohdassa 4.5.3.1 *Signaalin pituus, sivu 20*.

Jos haluat syöttää numeron isomman kuin 9 (esim. useamman numeron), seuraa näitä ohjeita.

Numeroa 9 isomman numeron asettaminen

1. Valitse kaikki numerot siinä järjestyksessä, jossa haluat ne lähettää. Kaikki valitut numerot näkyvät valkoisessa ruudussa kaukosäätimen numero-osan alla.

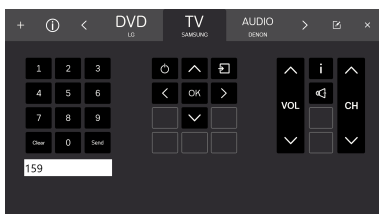

2. Valitse **Lähetä** lähettääksesi signaalit laitteeseen tai **Tyhjennä** poistaaksesi valitut numerot.

4.4 Lisää kaukosäädin +


Uuden kaukosäätimen voi lisätä kahdella (2) tavalla.

4.4.1 Lisää esiohjelmoitu kaukosäädin

Lisää uusi esiohjelmoitu kaukosäädin seuraavasti:

Lisää esiohjelmoitu kaukosäädin seuraavasti

1. Valitse + valikosta.
2. Valitse esiohjelmoitu painike.

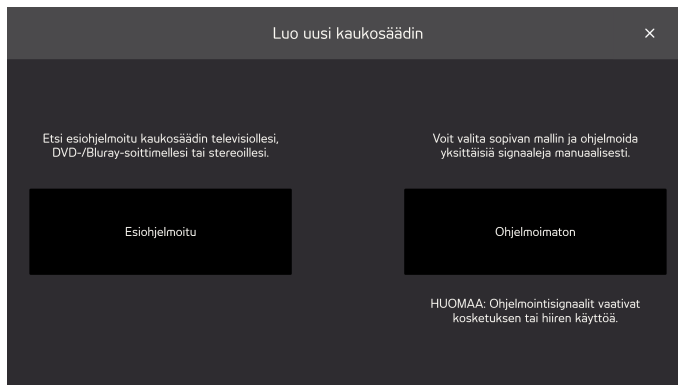

3. Valitse esiohjelmoitun kaukosäätimen tyyppi
 - TV
 - DVD/BLURAY
 - ÄÄNI




4. Valitse merkki valikosta.



Jos et löydä merkkiäsi, valitse **Muu**, lisätietoja 4.4.1.1 Muut kaukosäätimet, sivu 12



5. Kun merkki on valittu, ponnahdusikkunassa näkyy käytettävissä olevista kaukosäätimistä.

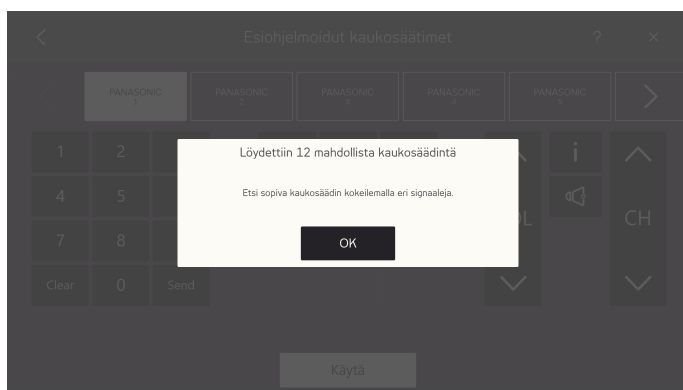

Valitse **OK**.

6. Valitse kaukosäädin.




7. Valitse valitun kaukosäätimen eri signaaleja valitaksesi sopivan kaukosäätimen.
8. Toista vaiheita 6 ja 7, kunnes sopivin kaukosäädin löytyy.




Käytä < ja > -painiketta selataksesi käytettävissä olevia kaukosäätimiä.

9. Valitse sopivin kaukosäädin.

10. Valitse **Käytä**.

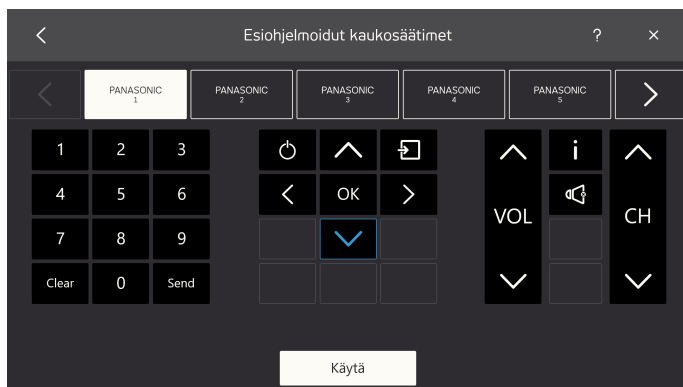

11. Valittu kaukosäädin kopioidaan käytettävissä oleviin kaukosäätimiin.

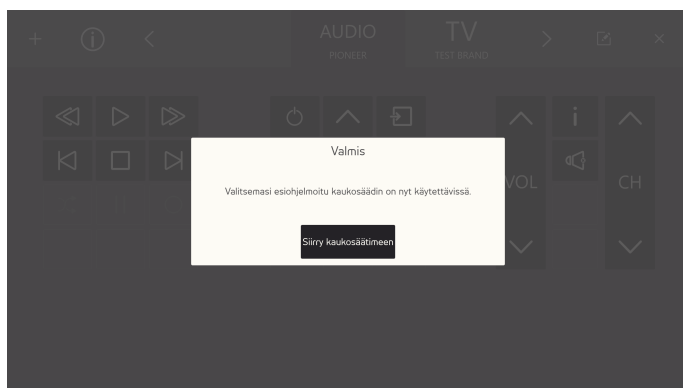


Lopeta valitsemalla **Siirry kaukosäätimeen**.

4.4.1.1 Muut kaukosäätimet

Lisää muut kaukosäätimet seuraavasti:


Lisää muut kaukosäätimet seuraavasti

1. Seuraa vaiheita 1 — 3: *Lisää esiohjelmoitu kaukosäädin seuraavasti, sivu 10.*
2. Valitse **Muu**-painike.
3. Kirjoita merkki tekstiruutuun.

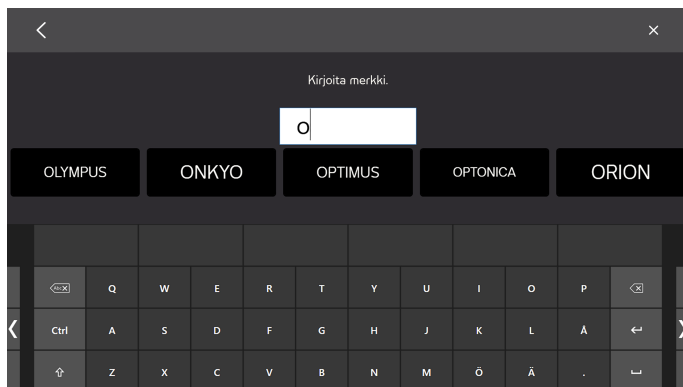





Rajaa hakutuloksia jatkamalla kirjoittamista.

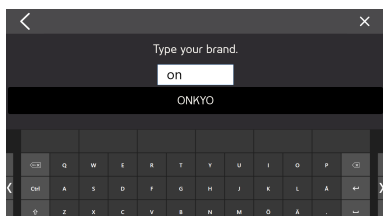

4. Valitse merkki.

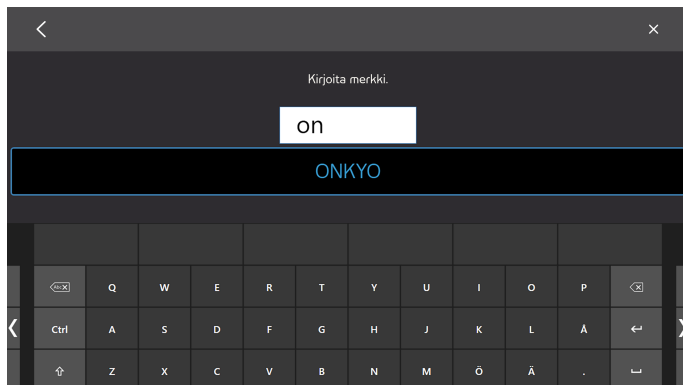

5. Kun merkki on valittu, ponnahdusikkunassa näkyy käytettävissä olevista kaukosäätimistä.

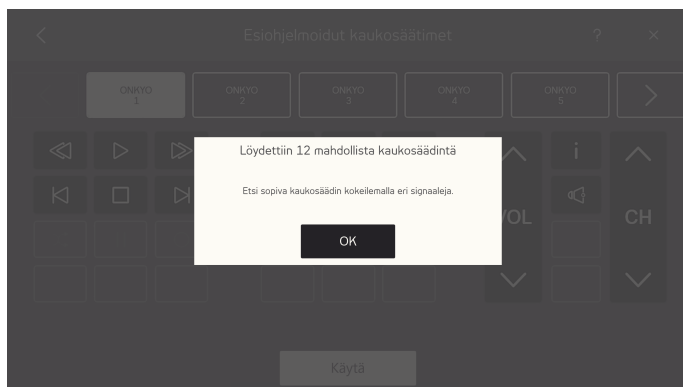

Valitse **OK**.

6. Valitse kaukosäädin.



7. Kokeile valitun kaukosäätimen eri signaaleja valitaksesi sopivan kaukosäätimen.

8. Toista vaiheita 6 ja 7, kunnes paras mahdollinen kaukosäädin löytyy.




Käytä < ja > -painiketta selataksesi käytettävissä olevia kaukosäätimiä.

9. Valitse sopivin kaukosäädin.

10. Valitse **Käytä**.



11. Valittu kaukosäädin kopioidaan käytettävissä oleviin kaukosäätimiin.

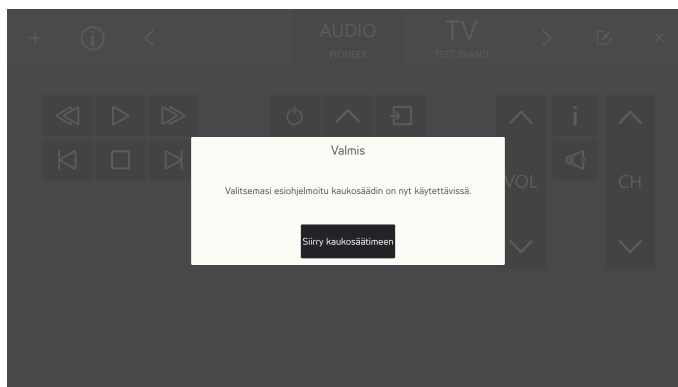

Lopeta valitsemalla **Siirry kaukosäätimeen**.


4.4.2 Lisää ohjelmoimaton kaukosäädin

Lisää uusi ohjelmoimaton kaukosäädin seuraavasti:

Lisää ohjelmoimaton kaukosäädin seuraavasti


1. Valitse + valikosta.

2. Valitse ohjelmoimaton painike.

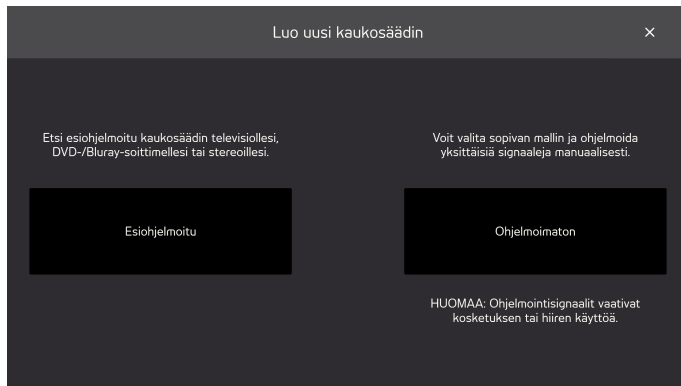


3. Valitse ohjelmoimattoman kaukosäätimen tyyppi

- TV
- ÄÄNI
- KAAPELIBOKSI
- DVD tai BLURAY
- TYHJÄ MALLI

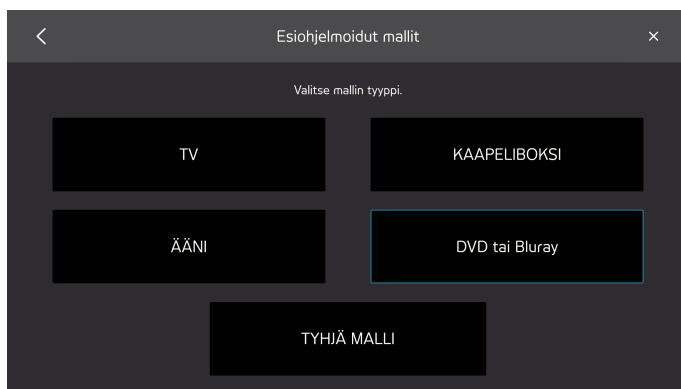

4. Valitse ohjelmoitava painike.

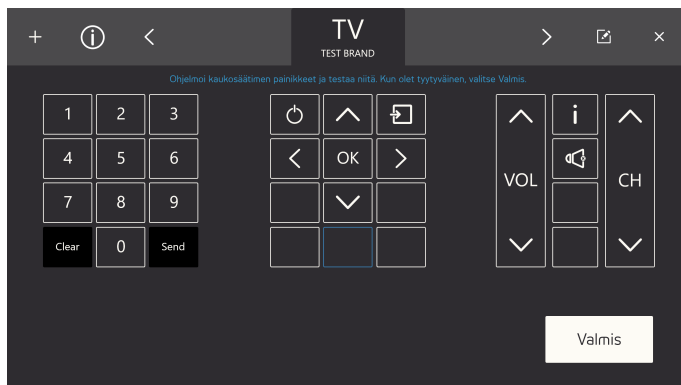


Saatavilla olevat kuvakkeet riippuvat vaiheessa 3 valitun kaukosäätimen tyyppin mukaan.

5. Valitse ohjelmoitava painike.

6. Osoita kaukosäätimellä Tobii Dynavox IR vastaanottimeen ja paina haluamaasi painiketta kaukosäätimestä, jonka haluat virtuaalisen kaukosäätimen oppivan.



7. Kun signaali tallennetaan virtuaaliseen kaukosäätimeen **Valmis** -ponnahdusikkuna tulee näkyviin.

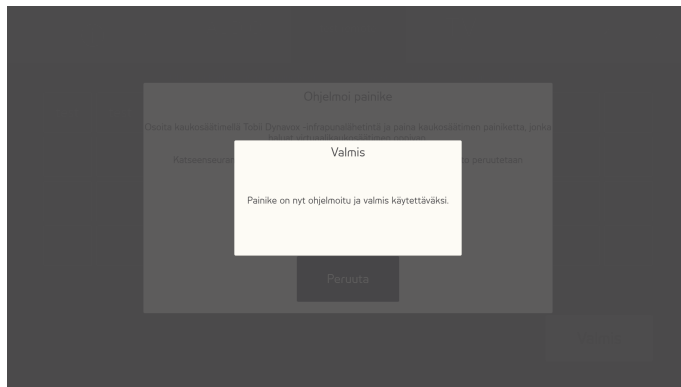

 Ponnahdusikkuna sulkeutuu automaattisesti muutaman sekunnin jälkeen.

8. Toista vaiheet 5–7, kunnes olet ohjelmoinut kaikki tarvittavat painikkeet kaukosäätimeen.

 Jos haluat muuttaa tai poistaa kaukosäätimen painikkeita, sinun on lopettava ohjelmointi ja siirtyä muokkaustilaan. Lisätietoa muokkaustilasta, katso [4.5 Muokkaustila](#), sivu 17.

9. Valitse **Valmis** lopettaaksesi.




4.5 Muokkaustila



Muokkaustilassa voit vaihtaa olemassa olevia kaukosäätimiä. Varmista, että kaukosäädin, jota haluat muokata on aktiivinen. Siirry muokkaustilaan seuraavasti:

Muokkaustilan vaiheet

1. Valitse -painike (muokkaus).

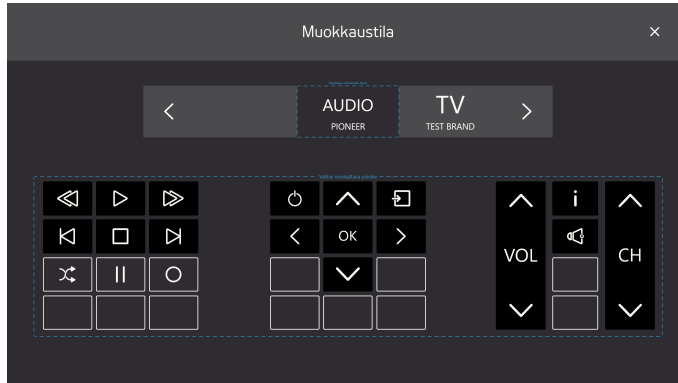


2. Valitse, mihin kaukosäätimen osaan haluat tehdä muutoksia. Voit tehdä seuraavat muutokset:
 - Vaihda kaukosäätimen nimi, katso 4.5.1 *Vaihda kaukosäätimen nimi, sivu 17*
 - Poista kaukosäädin, valitse 4.5.2 *Poista kaukosäädin, sivu 18*
 - Tee muutoksia olemassa olevaan aktiiviseen painikkeeseen, katso 4.5.3 *Tee muutoksia olemassa olevaan aktiiviseen painikkeeseen.*
 - Tee muutoksia olemassa olevaan ohjelmoimattomaan painikkeeseen, katso 4.5.4 *Tee muutoksia olemassa olevaan ohjelmoituun painikkeeseen, sivu 22.*
 - Lisää uusi painike tyhjään tilaan, katso 4.5.5 *Lisää uusi painike tyhjään tilaan, sivu 24*

4.5.1 Vaihda kaukosäätimen nimi

Vaihda kaukosäätimen nimi seuraavasti:


Vaihda kaukosäätimen nimi

1. Valitse -painike (muokkaus).

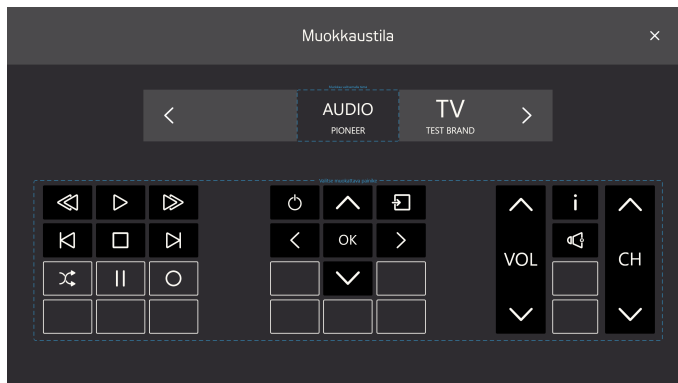

2. Valitse "Muokkaa valitsemalla tämä" -ruutu kaukosäätimen nimen ympärillä.


3. Valitse **Nimeä uudelleen**-painike.

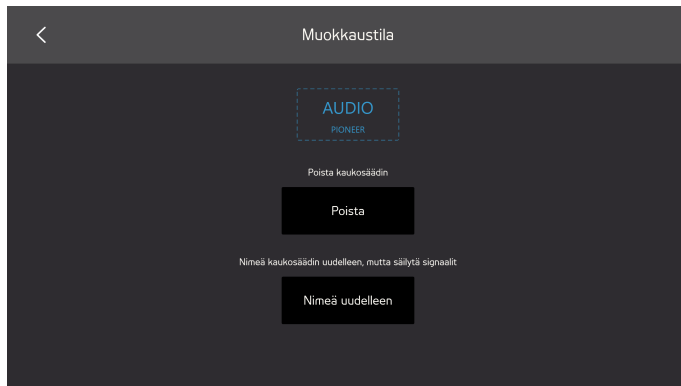

4. Kirjoita uusi nimi.



Käytä lyhyttä nimeä.

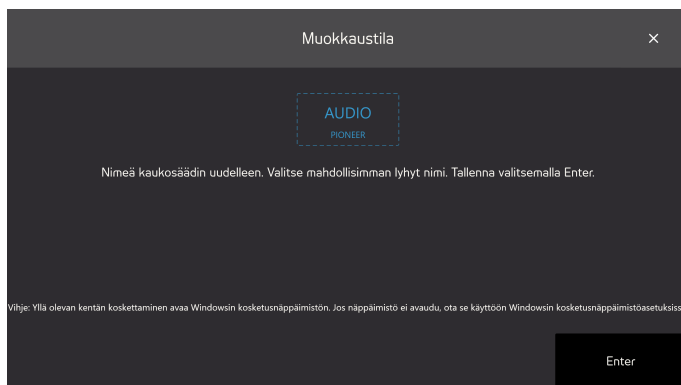

5. Valitse **Syötä** näppäimistöstä nimeämisen päättämiseksi.


6. Valitse  -kuvake poistuaksesi muokkaustilasta.

4.5.2 Poista kaukosäädin


Poista kaukosäädin seuraavasti:

Kaukosäätimen poistamisvaiheet


1. Valitse  -painike (muokkaus).

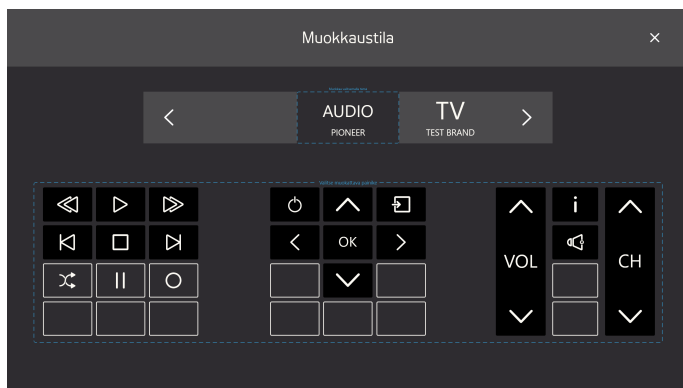

2. Valitse "Muokkaa valitsemalla tämä" -ruutu kaukosäätimen nimen ympärillä.
3. Valitse **Poista**.

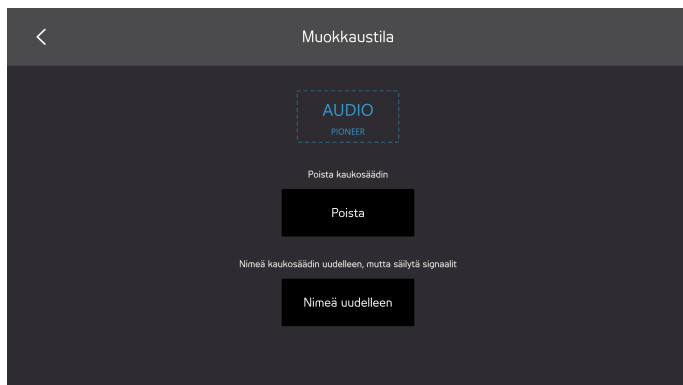

4. Valitse:
 - **Kyllä** poistaaksesi
 - **Ei** peruuttaaksesi

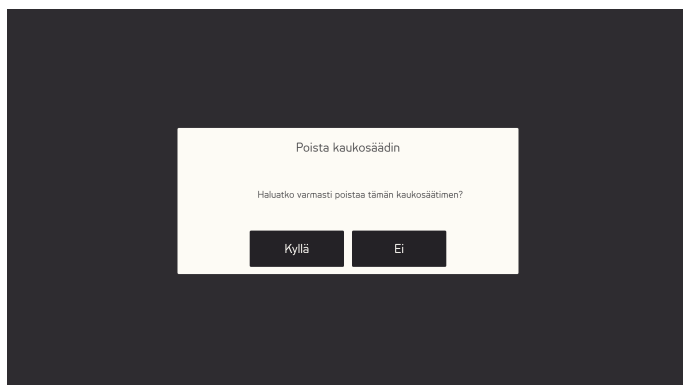


5. Valitse  -kuvake poistuaaksesi muokkaustilasta.

4.5.3 Tee muutoksia olemassa olevaan aktiiviseen painikkeeseen


Tee muutoksia olemassa olevaan aktiiviseen painikkeeseen seuraavasti:

Tee muutoksia olemassa olevaan aktiiviseen painikkeeseen seuraavasti

1. Valitse  -painike (muokkaus).

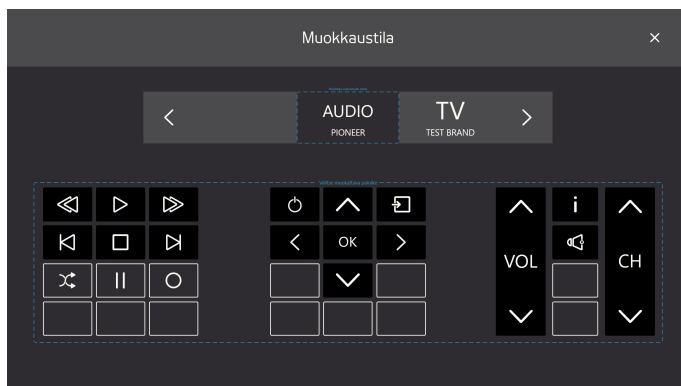

2. Valitse painike, mustalla taustalla ja kuvalla tai tekstillä esim. , "Valitse muokattava painike" -ruudussa kaukosäätimen painikkeiden ympärillä.
3. Valitse yksi seuraavista toimista:
 - Signaalin pituus, katso 4.5.3.1 *Signaalin pituus*.
 - Uusi signaali, katso 4.5.3.2 *Uusi signaali*, sivu 21
 - Vaihda teksti, katso 4.5.3.3 *Vaihda teksti*, sivu 22
 - Vaihda kuvake, katso 4.5.3.4 *Vaihda kuvake*, sivu 22
 - Tyhjennä-painike poistaa kaikki painikkeeseen tallennetut tiedot.

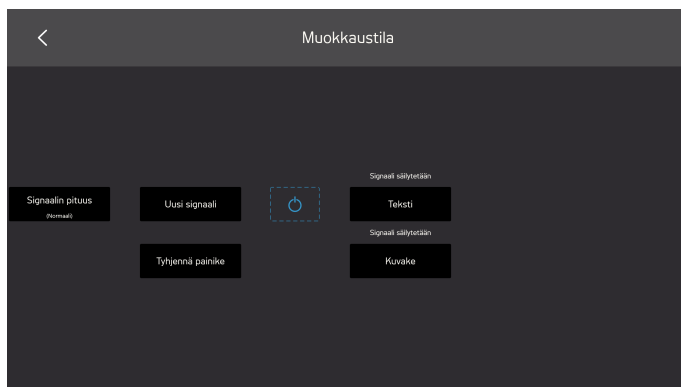

4. Valitse  -kuvake poistuaaksesi muokkaustilasta.

4.5.3.1 Signaalin pituus

Jotta vastaotin ymmärtäisi signaalin, joka on lähetetty Virtual Remote-ohjelmistosta, on signaalin pituutta ehkä vaihdettava. Signaalin pituus on asetettava myös, jos haluat painikkeen lähettävän jatkuvan signaalin painiketta painettaessa.

Valitse yksi (1) seuraavista vaihtoehdoista.

- Normaali - lähettää lyhyen IR-signaalin.
- Pitkä - lähettää yhden (1) sekunnin IR-signaalin.
- Erityispitkä - lähettää kahden (2) sekunnin IR-signaalin.
- Jatkuva - lähettää signaalin, joka jatkuu painikkeen painamisen ajan.



Tämä on tyypillinen asetus esimerkiksi äänenvoimakkuuspainikkeille




4.5.3.2 Uusi signaali


Ohjelmoi painikkeelle uusi signaali seuraavasti:

Uuden signaalin vaiheet

1. Osoita kaukosäätimellä Tobii Dynavox IR vastaanottimeen ja paina haluamaasi painiketta kaukosäätimestä, jonka haluat virtuaalisen kaukosäätimen oppivan.

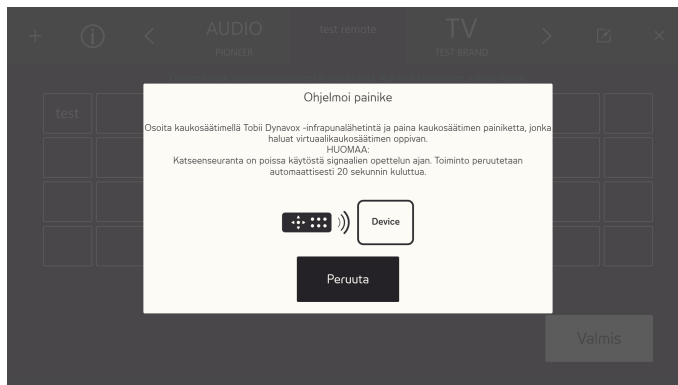

2. Kun signaali tallennetaan virtuaaliseen kaukosäätimeen **Valmis** -ponnahdusikkuna tulee näkyviin.

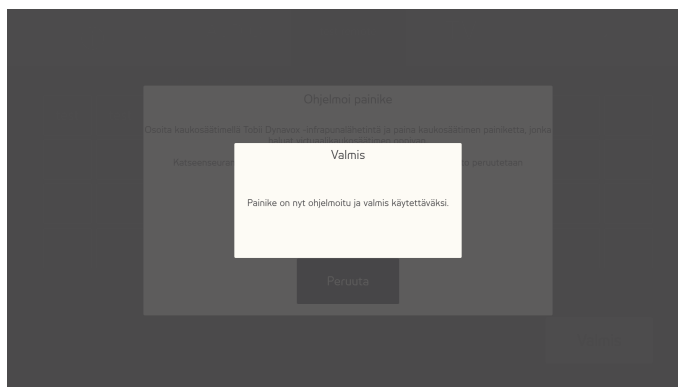


Ponnahdusikkuna sulkeutuu automaattisesti muutaman sekunnin jälkeen.

4.5.3.3 Vaihda teksti

Vaihda teksti seuraavasti:

Tekstin vaihtamisen vaiheet

1. Kirjoita teksti, jonka haluat painikkeelle.

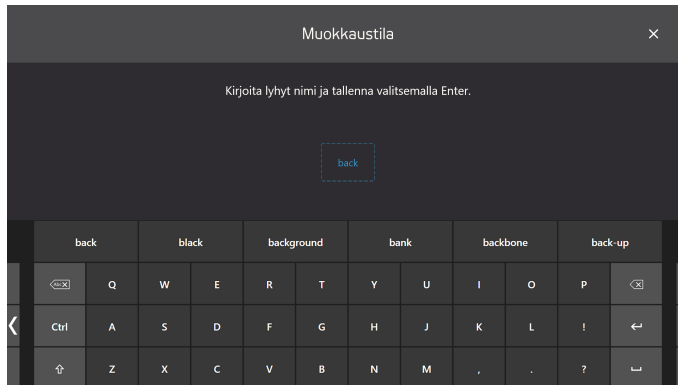


2. Valitse Syötä/Palaa näppäimistöstä nimeämisen hyväksymiseksi.

4.5.3.4 Vaihda kuvake

Vaihda kuvake seuraavasti:

1. Valitse käytössä oleva kuvake.

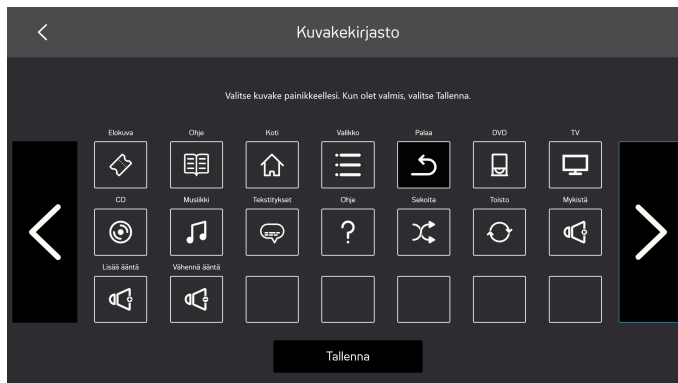


2. Valitse **Tallenna** hyväksyäksesi kuvakkeen.

4.5.4 Tee muutoksia olemassa olevaan ohjelmoituun painikkeeseen


Tee muutoksia olemassa olevaan ohjelmoituun painikkeeseen seuraavasti:

Tee muutoksia olemassa olevaan ohjelmoituun painikkeeseen seuraavasti

1. Valitse  -painike (muokkaus).

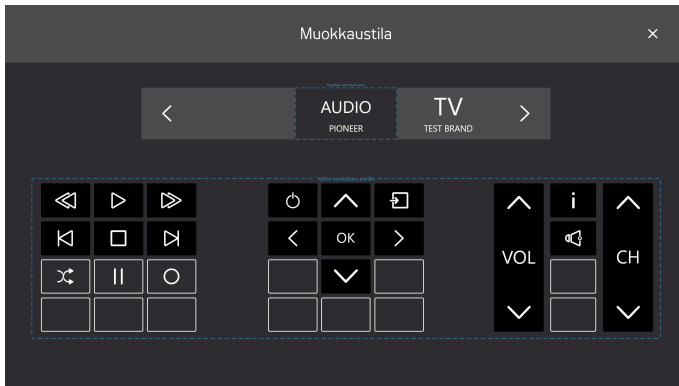

2. Valitse painike, mustalla taustalla ja kuvalla tai tekstillä esim. , "Valitse muokattava painike" -ruudussa kaukosäätimen painikkeiden ympärillä.
3. Valitse yksi seuraavista toimista:
 - Ohjelmointi, katso 4.5.4.1 Ohjelma, sivu 23
 - Vaihda teksti, katso 4.5.3.3 Vaihda teksti, sivu 22
 - Vaihda kuvake, katso 4.5.3.4 Vaihda kuvake, sivu 22
 - Tyhjennä-painike poistaa kaikki painikkeeseen tallennetut tiedot.

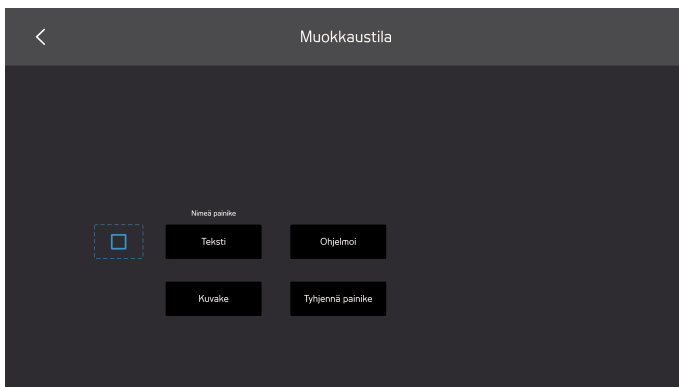

4. Valitse  -kuvake poistuaaksesi muokkaustilasta.

4.5.4.1 Ohjelma


Ohjelmoi painikkeelle signaali seuraavasti:

Ohjelmoinnin vaiheet

1. Osoita kaukosäätimellä Tobii Dynavox IR vastaanottimeen ja paina haluamaasi painiketta kaukosäätimestä, jonka haluat virtuaalisen kaukosäätimen oppivan.



2. Kun signaali tallennetaan virtuaaliseen kaukosäätimeen **Valmis** -ponnahdusikkuna tulee näkyviin.

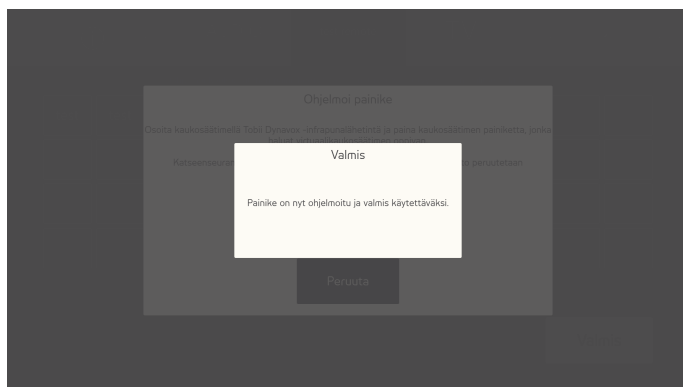


Ponnahdusikkuna sulkeutuu automaattisesti muutaman sekunnin jälkeen.

4.5.5 Lisää uusi painike tyhjään tilaan


Lisää uusi painike tyhjään tilaan seuraavasti:

Lisää uusi painike tyhjään tilaan seuraavasti

1. Valitse  -painike (muokkaus).

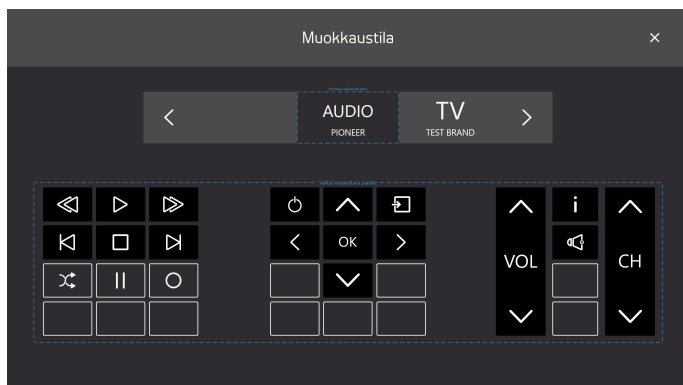


2. Valitse painike, mustalla taustalla ja kuvalla tai tekstillä esim. , "Valitse muokattava painike" -ruudussa kaukosäätimen painikkeiden ympärillä.
3. Valitse yksi seuraavista toimista:
 - Vaihda teksti, katso 4.5.3.3 *Vaihda teksti, sivu 22*
 - Vaihda kuvake, katso 4.5.3.4 *Vaihda kuvake, sivu 22*

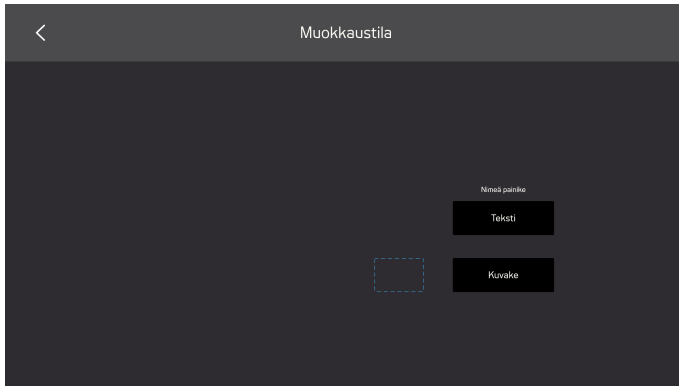


4. Valitse  -kuvake poistuaksesi muokkaustilasta.

4.6 Tiedot

Tietosivulta löydät kaikki versiotiedot laitteistolle ja eri ohjelmistoille.

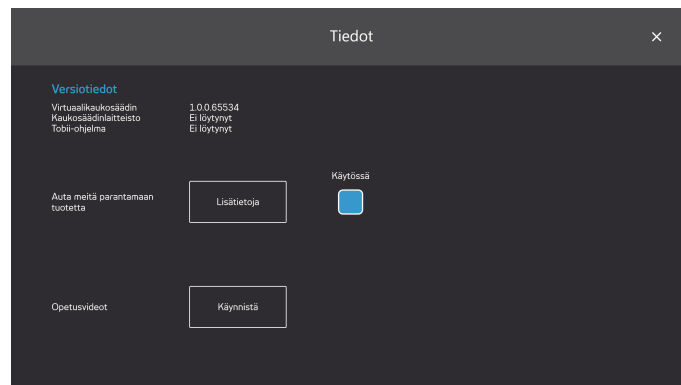

Auta meitä parantamaan: Auttaaksesi Tobii Dynavox parantamaan ohjelmistoa, käynnä On/Off-valintaruutu asentoon **On** . Valitse Lisätietoja-painike avataksesi tietosivun tiedot. Lisätietoja on kohdassa *Kuva 4.2 Tietojen kerääminen, sivu 26*.

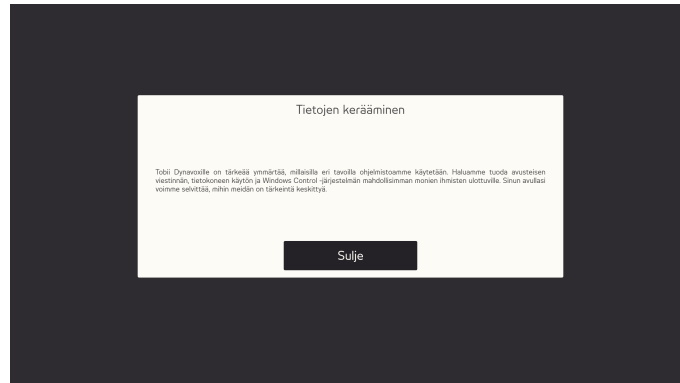

Kuva 4.2 Tietojen kerääminen

Koulutus: Voit käynnistää Virtual Remote -koulutuksen valitsemalla **Käynnistä**-painikkeen.

Copyright © Tobii AB (publ). Kuvaukset ja tiedot eivät välttämättä koske kaikilla paikallisilla myyntialueilla saatavilla olevia tuotteita ja palveluita. Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä huomautusta. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Tukea Tobii Dynavox -laitteellesi

Online-tuki

Lue Tobii Dynavox -laitettasi koskeva tuotekohtainen tukisivu. Se sisältää ajantasaista tietoa ongelmista sekä tuotteeseen liittyviä neuvoja ja vinkkejä. Online-tukisivut sijaitsevat osoitteessa www.TobiiDynavox.com tai www.myTobiiDynavox.com.

Ota yhteyttä myyntiedustajaan tai jälleenmyyjään

Jos sinulla on tuotteeseen liittyviä kysymyksiä tai ongelmia, ota yhteyttä Tobii Dynavox -myyntiedustajan tai valtuutetun jälleenmyyjän asiakastukeen. He tuntevat yksilölliset määrityksesi parhaiten ja voivat antaa neuvoja ja tuotekoulutusta. Lisätietoja on osoitteessa www.TobiiDynavox.com/contact