

Tobii Dynavox Windows Control Kasutusjuhend

Koos Virtual Remote'iga 



Kasutusjuhend Tobii Dynavox Windows Control

Versioon 1.2

06/2018

Kõik õigused kaitstud.

Copyright © Tobii AB (publ)

Ühtegi selle dokumendi osa ei tohi mis tahes viisil ega vormis reprodutseerida, säilitada ega edastada (elektrooniliselt, kopeerides, ümbersalvestades vms) ilma väljastaja eelneva kirjaliku loata.

Kirjeldatud autoriõiguste kaitse hõlmab igasugust materjali ja teavet, mida on võimalik seadustest tulenevalt kaitsta autoriõigustega, sealhulgas, kuid mitte ainult, tarkvararakenduste poolt loodud ekraanil kuvatavat materjali, näiteks kuvaaknaid, menüüsid jtk.

Selles dokumendis sisalduv teave kuulub ettevõttele Tobii Dynavox. Dokumendi mis tahes viisil osaline või täielik reprodutseerimine ilma Tobii Dynavoxi eelneva kirjaliku loata on keelatud.

Selles dokumendis nimetatud tooted võivad olla nende omanike kaubamärgid ja/või registreeritud kaubamärgid. Selle dokumendi väljastaja ja autor ei taotle õigusi nende kaubamärkide suhtes.

Kuigi see dokument on koostatud mõistliku hoolsusega, ei võta selle väljastaja ja autor vastutust selles leiduda võivate vigade ja puuduste eest. Samuti ei vastuta väljastaja ja autor käesolevas dokumendis sisalduva teabe ning sellega kaasneva võivate rakenduste ja algkoodi kasutamisega kaasnevate kahjude eest. Väljastaja ja autor ei vastuta mingil juhul saamata jäänud tulu või mis tahes muude majanduslike kahjude eest, mille otsene või kaudne tegelik või väidetav põhjus on käesolev dokument.

Dokumendi sisu võib muutuda etteteatamata.

Selle dokumendi kõige ajakohasema versiooni leiate Tobii Dynavox'i veebilehelt
www.TobiiDynavox.com.

Kontaktteave:

Tobii Dynavox	Tobii Dynavox LLC
Karlsrovsågen 2D	2100 Wharton Street Suite 400
182 53 Danderyd	Pittsburgh, PA 15203
Rootsi	USA
+46 8 663 69 90	+1-800-344-1778

Sisukord

1	Lähemalt mudelist Tobii Dynavox Windows Control	5
1.1	Sihtotstarve	5
1.2	Nõuded süsteemile.....	5
2	Installimine, käivitamine ja litsentsi haldamine.....	6
2.1	Tobii Dynavox Windows Control installimine	6
2.2	Litsentsi haldamine	6
2.2.1	Litsentsi aktiveerimine	6
2.2.1.1	Veebi teel aktiveerimine	6
2.2.1.2	Veebiühenduseta aktiveerimine	7
2.2.2	Litsentsi deaktiveerimine	8
2.3	Esmakordne käivitamine	9
3	Tobii Dynavox Windows Control kasutamine	10
3.1	Windows Control kontrolleri	10
3.2	Jälgimise olek.....	11
3.3	Tegumiriba Windows Control	12
3.3.1	Windows Controli tegumiriba režiimid	12
3.4	Tavaülesanded.....	13
3.4.1	Tavaülesannete käitumine erinevatel režiimidel	14
3.5	Kleepsülesanded.....	15
3.5.1	Kleepsülesannete käitumine erinevatel režiimidel	15
3.6	Turvaklõps	16
3.7	Otseteed.....	17
3.8	Valikumeetod – pilk või lüliti	19
3.8.1	Pilgu ja lüliti režiimis vaikimisi aktiivne	19
3.8.2	Ülesande teostamine klaviatuuriklahviga lüliti asemel	19
3.9	Pilguklaviatuur.....	19
3.9.1	Klaviatuuri tegumiriba.....	21
3.9.2	Klaviatuuri tegumiriba ülesandenupud	21
3.9.3	Sõnaennustus (Word Prediction)	21
3.10	Windows Control koos regioonipõhiste rakendustega	22
3.11	Eye Detection Indicator	22
4	Rakenduse Windows Control seaded	24
4.1	Silmajälgija	25
4.1.1	Häälestamise vahesakk	25
4.1.1.1	Profiilide haldamine.....	25
4.1.1.2	Loo uus profiil	26
4.1.1.3	Häälestuse tulemused.....	26
4.1.1.4	Testi häälestust	27
4.1.1.5	Uuesti häälestamine.....	27
4.1.1.6	Häälestuse tüüp	27
4.1.2	Edasijõudnud seadete vahesakk.....	29
4.1.2.1	Ekraani häälestamine	29
4.2	Üldseaded	30
4.2.1	Üldseadete vahesakk.....	30
4.2.2	Lisateabe vahesakk	30
4.2.2.1	Litsentsivõti	31

4.3	Abi ja kasutamine	31
4.3.1	Abi vahesakk	31
4.3.2	Kasutamise vahesakk.....	32
4.4	Aktiveerimine ja tagasiside	32
4.4.1	Aktiveerimise vahesakk	32
4.4.1.1	Pilgu sätted	32
4.4.1.2	Pilgu ja lüliti sätted.....	33
4.4.2	Vastuste vahesakk.....	34
4.5	Tegumiriba	35
4.5.1	Tegumiriba vahesakk	35
4.5.1.1	Ülesanded.....	35
4.5.1.2	Maksimeeri vasakklõps.....	35
4.5.1.3	Tegumiriba suurus.....	36
4.5.1.4	Automaatne peitmine	36
4.5.2	Valikusakk	36
4.5.2.1	Primaarne valik.....	36
4.5.2.2	Teisene valik.....	37
4.5.2.3	Kolmas valik.....	37
4.5.3	Suumimise vahesakk.....	37
4.6	Klaviatuur	37
5	Virtual Remote.....	39
5.1	Virtual Remote ülevaade.....	39
5.1.1	Virtual Remote menüü.....	39
5.1.2	Aktiivne pult.....	40
5.1.3	Nupud	40
5.2	Tobii Dynavox Virtual Remote kasutamine	41
5.2.1	Esmakordsel käivitamisel.....	42
5.2.2	Aktiivse puldi muutmine.....	42
5.2.3	Puldi nuppude kasutamine.....	42
5.2.4	Lisa pult	42
5.2.4.1	Lisa eelprogrammeeritud pult.....	42
5.2.4.2	Lisa programmeerimata pult.....	47
5.2.5	Redigeerimisrežiim	49
5.2.5.1	Puldi nime muutmine.....	50
5.2.5.2	Puldi kustutamine	51
5.2.5.3	Olemasoleva aktiivse nupu muutmine.....	52
5.2.5.4	Olemasoleva programmeerimata nupu muutmine.....	55
5.2.5.5	Lisage tühjale väljale uus nupp	57
5.2.6	Teave	58

1 Lähemalt mudelist Tobii Dynavox Windows Control

1.1 Sihtotstarve

Saavutage täielik kontroll oma arvuti üle silmade või silmade ja lüliti abil. Meie auhinnatud tarkvara abil saate emuleerida igat tüüpi hiire- ja puutetoiminguid ning sisestada teksti. Me oleme lisanud ka nutikad otseteed, mis muudavad kõigi Windowsi osade kasutamise veelgi mugavamaks!

1.2 Nõuded süsteemile

Komponent	Nõuded
Arvuti ja protsessor	2,0 gigaherti (GHz) või kiirem, kahetuumaline protsessor (soovituslik miinimum).
Mälu (RAM)	4 gigabaiti (GB) RAM-i (soovituslik miinimum).
Kõvaketas	450 megabaiti (MB) vaba ruumi.
USB	USB 2.0
Operatsioonisüsteem	64bitised versioonid järgmisest: • Windows 7 • Windows 8.1 • Windows 10
.NET versioon	4.5
Silmajälgija	Mis tahes Tobii Dynavoxi või Tobii Tech'i silmajälgija, mis ühildub Tobii silmajälgimise põhitarkvaraga.
Täiendavad nõuded ja vajadused	Litsentsi aktiveerimiseks on vaja internetiühendust.
Tobii silmajälgimise põhitarkvara	Versioon 2.8 või uuem.
Infrapuna kaugjuhtimine	Mis tahes HBR infrapunakiibiga varustatud seade, näiteks: Tobii Dynavox EyeR, Indi, I-Series I-110 või EyeMobile Plus.

2 Installimine, käivitamine ja litsentsi haldamine

2.1 Tobii Dynavox Windows Control installimine



Kui süsteemile on paigaldatud tarkvara Tobii Gaze, siis tuleb see Windows Control installimise eel eemaldada.

Windows Control saab alla laadida saidilt www.TobiiDynavox.com.

Installimisviisard paigaldab järgmised rakendused:

- Tobii Dynavox Windows Control
- Tobii Dynavox Virtual Remote

Rakenduse Windows Control installimiseks järgige ekraanil toodavaid juhiseid.

2.2 Litsentsi haldamine


2.2.1 Litsentsi aktiveerimine



Windows Control võimaldab rakendust kasutada ühe litsentsiga samaaegselt kuni kolmel (3) arvutil/seadmel. Kui soovite kasutada litsentsi Windows Control üle kolme (3) arvuti/seadme peal, siis tuleb Windows Control eelnevalt ühel (1) varasemal arvutil/seadmel deaktiveerida.

Kui te ostate litsentsi Windows Control, siis saate Licence Activation Key e-posti teel saadetud tellimuse kinnituses nimetatud tarkvarale.

Kui Windows Control käivitatakse esmakordselt, siis käivitub **License Manager**.

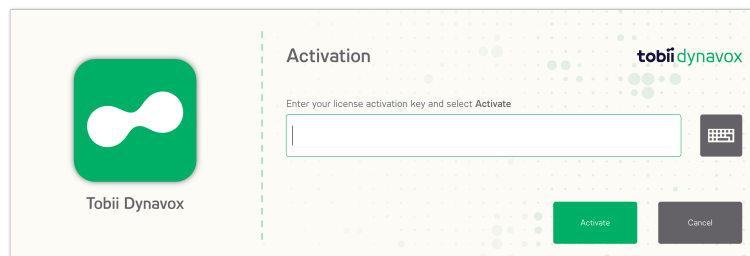

Litsentsi dialoogiaknas kuvatakse hallatava litsentsiga tegelikult seotud tarkvara ikoon.


Oma **License Activation Key** leiате e-posti teel saadetud tellimuse kinnituses.

2.2.1.1 Veebi teel aktiveerimine

Internetiga ühendatud arvuti/seadme puhul.

1. Veenduge, et arvuti/seade on internetiga ühendatud.
2. Sisestage **License activation key**.

3. Valige nupp **Activate**.

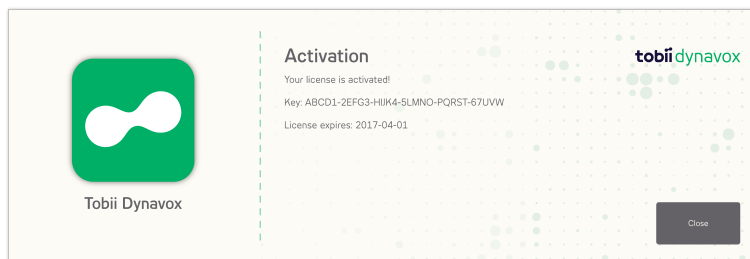


Litsentsi dialoogiaknas kuvatakse hallatava litsentsiga tegelikult seotud tarkvara ikoon.

4. Valige nupp **Close**.


2.2.1.2 Veebiühenduseta aktiveerimine


Arvuti/seadme puhul, mis ei ole internetiga ühendatud.


1. Sisestage **License activation key**.
2. Valige nupp **Activate**.

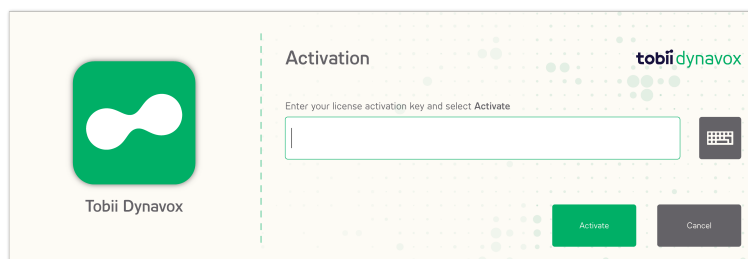

3. Valige ikoon  (info).

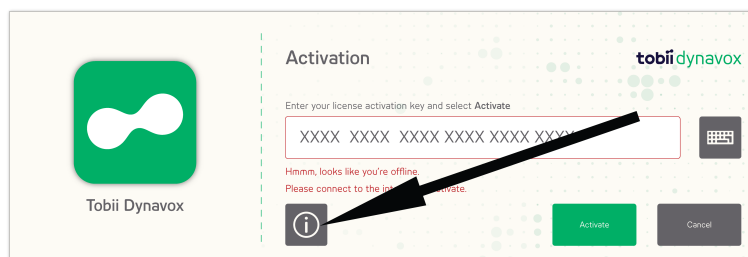

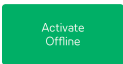
4. Valige nupp  (aktiveeri veebiühenduseta).

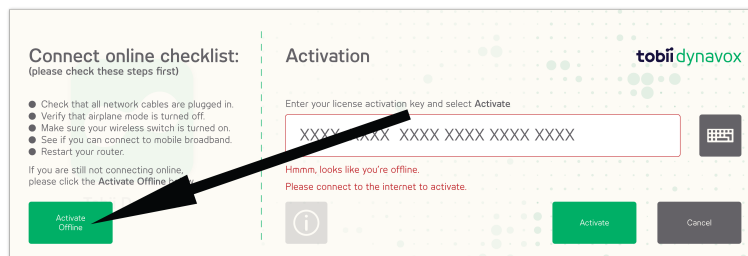


5. Tehke üht järgnevat:

- Avage internetiga ühendatud seadmel aadress <https://www.tobiidynavox.com/activation-key/> ja järgige veebis toodud juhiseid.
- Võtke ühendust Tobii Dynavox klienditoe ja kohaliku edasimüüjaga.


Te vajate järgnevas dialoogis näidatud arvuti nime:

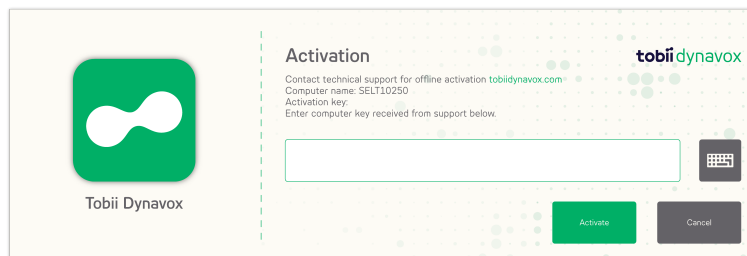

6. Sisestage ühel eelkirjeldatud viisidest saadud **aktiveerimisvõti**.

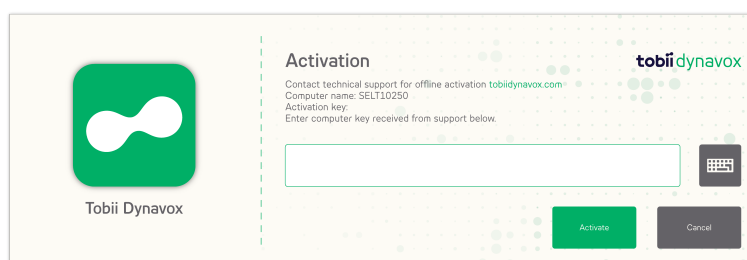

7. Valige nupp **Activate**.

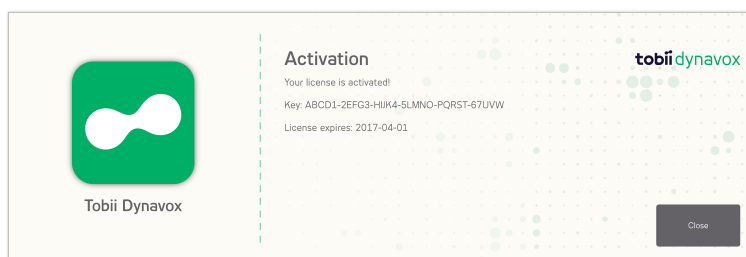

8. Valige nupp **Close**.

2.2.2 Litsentsi deaktiveerimine

Litsentsi Windows Control deaktiveerimiseks järgige alltoodud samme.

1. Veenduge, et arvuti/seade on internetiga ühendatud.
2. Käivitage Windows Control.
3. Valige nupp  (SETTINGS).
4. Valige nupp  (General Settings).
5. Valige vahekaart **About**.
6. Valige nupp **Licence Key**.

7. Valige nupp **Deactivate**.



Litsentsi dialoogiaknas kuvatakse hallatava litsentsiga tegelikult seotud tarkvara ikoon.

8. Valige:

- **Yes**, kui soovite litsentsi sel seadmel deaktiveerida.
- **No**, kui soovite toimingu katkestada.

2.3 Esmakordne käivitamine

Kui Windows Control esmakordselt käivitatakse, siis aitab häälestusviisard kasutajal läbi viia Windows Control esmase häälestamise. Viisardi etapid on:

- Kuva häälestamine. Täpsema teabe jaoks vaadake *4.1.2.1 Ekraani häälestamine, lehekülg 29*.
- Looge uus profiil. Täpsema teabe jaoks vaadake *4.1.1.2 Loo uus profiil*.
- Täpsema teabe leiate lk *4.1.1.4 Testi häälestust*.

3 Tobii Dynavox Windows Control kasutamine


Tobii Dynavox Windows Control võimaldab kasutajal juhtida standardset Windowsi operatsioonisüsteemi kaheastmelise valikumeetodiga, mis vähendab soovimatute klõpsude ohtu. See väldib ka hiirekursori liikumist teie pilguga, kui te ei soovi seda juhtida (süsteemi Windows Control puhul ei rakendata tavapäraselt hiirekursorit).

1. Esmane samm on valida tegumiribalt vaatamise teel meelepärane ülesanne.
2. Teine samm on vaadata meelepärasele osale ekraanist (või ekraaniikoonile), kus soovite ülesande rakendada. Automaatne suumimisfunktsioon on aktiveeritud ja lõppeb ikooni valimise või toimingu rakendamisel.



Kõik Windows Control funktsioonid on puutetundlikud ja hiirega juhitavad, mis võimaldab hooldajal või abilisel vajadusel kasutajat aidata. Hooldaja või abistaja saab kasutaja eest mugavalt valida funktsiooni/ülesande või muuta seadistusi.

3.1 Windows Control kontrolleri

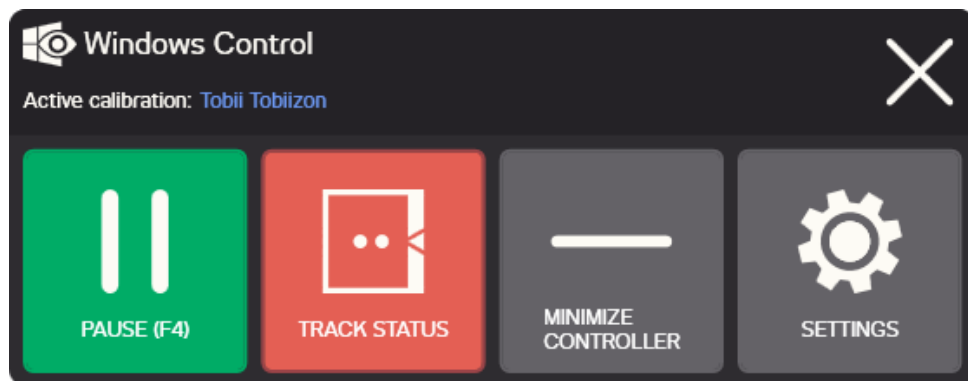


Joonis 3.1 Windows Control kontrolleri

Nupp	Toiming	Kirjeldus
	PAUS (F4)	Käsklus, mis paneb Windows Controli ootele. Pausifunktsiooni kasutamisel muutub pausinupp stardinupuks. Ülesande aktiveerimiseks saab kasutada klaviatuuri klahvi F4.
	KÄIVITA (F4)	Käsklus, mis käivitab Windows Controli. Stardifunktsiooni kasutamisel muutub stardinupp pausinupuks. Ülesande aktiveerimiseks saab kasutada klaviatuuri klahvi F4.
	JÄLGIMISE OLEK	Käsklus, mis kuvab jälgimise oleku akna. Kasutage seda akent, et veenduda kasutaja õiges asendis ekraani suhtes. Täpsema teabe leiate lk 3.2 <i>Jälgimise olek, lehekülg 11</i>
	MINIMEERI KONTROLLER	Käsklus, mis minimeerib kontrolleri akna.

Nupp	Toiming	Kirjeldus
	SEADED	Käsklus, mis avab Windows Controli seaded. Täpsema teabe jaoks vaadake 4 Rakenduse Windows Control seaded, lehekülg 24.
	Sulge	Käsklus, mis seiskab Windows Controli.

3.2 Jälgimise olek

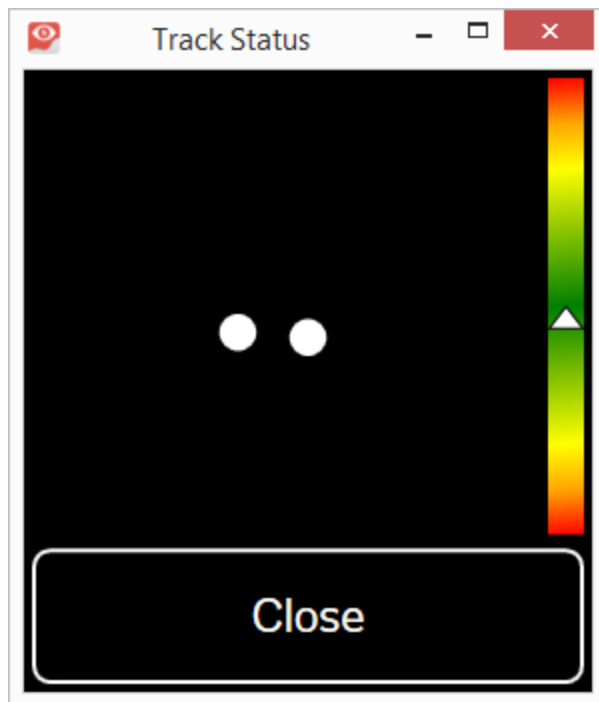

Funktsiooni **Jälgimise olek (Track Status)** kasutatakse, et veenduda süsteemi kasutaja õiges asendis silmajälgija suhtes.

- Kaks (2) valget täppi – kasutaja silmad ja nende paiknemine ekraani suhtes. Optimaalse asendi saavutamiseks peaksid valged täpid paiknema musta ala keskel.
- Valge noolega värviline riba vasakul – kasutaja kaugus ekraanist.
 - Kui valge nool on riba roheline ala keskel, siis paikneb kasutaja ekraanist optimaalses kauguses.
 - Kui nool on riba alumisel osal – liigutage kasutaja lähemale.
 - Kui nool on riba ülemisel osal – liigutage kasutaja kaugemale.

1. Avage Windows Controli kontrollerr.

2. Valige nupp  (Jälgimise olek).

3. Paigutage kasutaja oma kohale.

4. Lõpetamise järel valige nupp **Sulge**.



See nupp töötab silmapiiirkonna alusel, seega piisab nupu kasutamiseks sellele vaatamisest.

3.3 Tegumiriba Windows Control

Windows Controli tegumiriba ülaosas paikneb jälgimise oleku vaatur. See võimaldab teil veenduda, et silmajälgija tunneb teie silmad ära ja olete seadme ees õiges asendis.

Windows Control tegumiriba ülesandenupud võivad olla kolmel eri režiimil, nagu kujutatud lk *Joonis 3.2 Windows Controli tegumiriba režiimid, lehekülg 13*.



Tegumiriba saab tavalisel klaviatuuril (mitte Windows Controli klaviatuuril) peita/nähtavaks muuta klahviga F2 .

3.3.1 Windows Controli tegumiriba režiimid



Kolm eri režiimi kehtivad nii tavaülesannetele (vt 3.4 *Tavaülesanded*) kui kleepsülesannete puhul (vt 3.5 *Kleepsülesanded*).



Turvaklõpsülesannete jaoks teisest valikurežiimi ei ole.

- **Tavaline (valimata) (Normal)** – ühtegi Windows Controli ülesandenuppu ei ole valitud.
- **Primaarne valik (valge) (Primary Selection)** - tähistatud ülesandenupp on valitud ja ülesanne teostatakse pärast automaatset suumi, kui kasutaja vaatab meelepärasele osale ekraanist või mõnele ikoonile. Kui Windows Controli seadistuse dialoogiaknas määratakse valimisviisiks lüliti, siis jääb valitud ülesandenupp pärast ülesande teostamist aktiivseks.
- **Teisene valik (sinine/valge)** - sama kui **Primaarne valik**, kuid suurema täpsusega. **Teisene valik** tähendab, et suum liigub ülesande teostamise eel sügavamale, et muuta vajalik osa ekraanist suuremaks ja valiku tegemine mugavamaks. Aktiveerige see režiim hoides pilku ülesandenupul kuni värv muutub vastavalt allpool paiknevale kujutisele.



Ei kehti otseteedele ja sätete ülesannetele.


- **Kolmas valik (hüpikmenüü)** – teatavate ülesannete puhul on saadaval hüpikmenüü vastava kleepsülesandega (vt 3.5 *Kleepsülesanded, lehekülg 15*) ja turvaklõpsülesandega (vt 3.6 *Turvaklõps, lehekülg 16*). Avage kleepsülesanne või turvaklõpsülesanne, hoides pilku ülesandenupul kuni aktiveeritakse *Joonis 3.2 Windows Controli tegumiriba režiimid, lehekülg 13* vastav hüpikmenüü ja valige kleepsülesanne või turvaklõpsülesanne, mis asendab tavaülesande tegumiribal kleepsülesande või turvaklõpsülesandega. Kleepsülesanne või turvaklõpsülesanne jääb tegumiribale ja tavaülesanne on saadaval kolmanda valikuna.

Korrake protseduuri, et asendada kleepsülesanne või turvaklõpsülesanne tegumiribal tavaülesandega.



Ei kehti otseteedele ja sätete ülesannetele.

Kui soovite konfigurida, milliseid režiime peaks kasutaja kasutama, minge: 4.5.2 *Valikusakk, lehekülg 36*. Vaikimisi on lubatud ainult primaarne režiim.

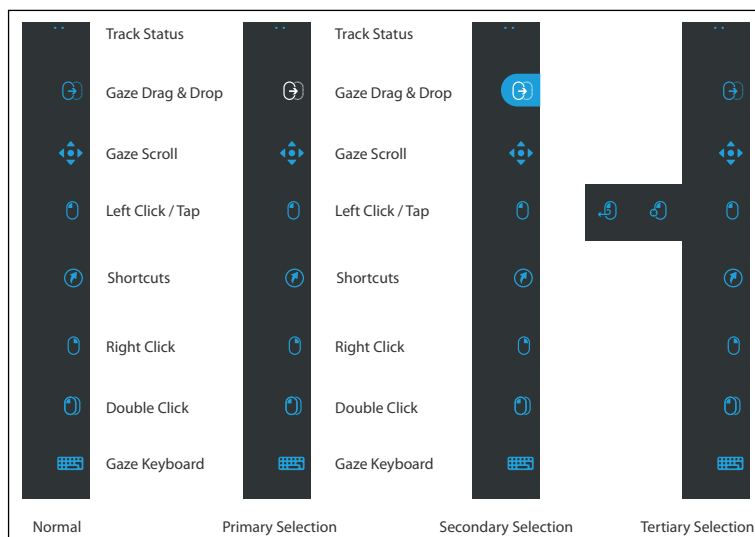

Joonis 3.2 Windows Controli tegumiriba režiimid

3.4 Tavaülesanded

Ikoon	Toiming/tegevus	Kirjeldus
	Kursori liigutamine	Käsklus, mis võimaldab teil kursorit pilguga liigutada. Rakendamisel viib läbi suumimistoimingu.
	Pilguga lohistamine	Ülesanne, mis teostab kaks "klõpsu", mille puhul esimene vastab lohistamise algpunktile ja teine lohistamise lõpp-punktile (objektide liigutamiseks või alade valimiseks). - Valige ülesanne. - Vaadake objekti, mida soovite liigutada, või regiooni valimise algpunkti. - Teostage Windows Control (esimene "klõps") pilgu või lülitaga. - Vaadake kohe objekti lohistamise sihtkohta või regiooni valimise lõpp-punkti. - Teostage teine "klõps" pilgu või lülitaga. Rakendamisel viib läbi suumimistoimingu.
	Pilguga kerimine	Ülesanne, mis aktiveerib keritava akna puhul pilguga kerimise. - Valige ülesanne. - Hoidke oma pilku keritaval piirkonnal. Punkti, kuhu vaatasite, ilmub pilguga kerimise ikoon. - Üles kerimiseks vaadake ikooni kohale. - Alla kerimiseks vaadake ikooni alla. - Vasakule kerimiseks vaadake ikoonist vasakule. - Paremale kerimiseks vaadake ikoonist paremale. - Vaadake kerimise ajal uuesti ikoonile (ekraanil, mitte tegumiriba ikoonile), et lülitada üles/alla ja vasakule/paremale kerimise vahel. - Kerimise lõpetamiseks vaadake uuesti Windows Controli tegumiriba (või ekraanilt välja). Kasutage pilguga kerimise ülesannet, et kerida vertikaalselt ja horisontaalselt Modern UI rakendusi ja Windowsi stardiakent.

Ikoon	Toiming/tegevus	Kirjeldus
	Vasakklõps/puude	Käsklus, millega kaasneb ühekordne vasakklõps või, puutetundliku seadmete puhul, ühekordne sõrme puude. Lülitrežiimil olles on vasakklõps / puude vaikimisi sisselülitatud ja "kleepiv" (vt 3.8.1 Pilgu ja lüliti režiimis vaikimisi aktiivne, lehekülj 19). Rakendamisel viib läbi suumimistoimingu.
	Otseteed	Käsklus, mis avab 3 veeruge eelmääratletud otseteid. - Windows 7, 8.1 ja 10 puhul on saadaval veidi erinevad. Täpsema teabe jaoks vaadake 3.7 Otseteed, lehekülj 17.
	Paremklõps	Ülesanne, millega kaasneb üks paremklõps. Rakendamisel viib läbi suumimistoimingu.
	Topeltklõps	Ülesanne, millega kaasneb topeltvasakklõps. Kui aktiveermisviisiks on valitud lüliti, siis toimib "topeltklõps" kleepsülesandena (vt 3.8.1 Pilgu ja lüliti režiimis vaikimisi aktiivne, lehekülj 19). Rakendamisel viib läbi suumimistoimingu.
	Pilguklaviatuur	Käsklus, mis avab pilgu abil juhitava ekraaniklaviatuuri. Täpsema teabe jaoks vaadake 3.9 Pilguklaviatuur, lehekülj 19.
	Seaded	Käsklus, mis avab Windows Controli seaded. Täpsema teabe jaoks vaadake 4 Rakenduse Windows Control seaded, lehekülj 24.

3.4.1 Tavaülesannete käitumine erinevatel režiimidel

Ülesanne	Primaarne	Teine	Kolmas ^a
Kursori liigutamine	Tavasuum	Süvasuum	Lülita kursori kleepsliigutamisele
Lohistamine	Tavasuum	Süvasuum	Lülitage ümber kleepslohistamiseks või turvalohistamiseks
Pilguga kerimine	Tavasuum	Süvasuum	Ei ole rakendatav
Vasakklõps/puude	Tavasuum	Süvasuum	Lülitage ümber kleepsvasakklõpsamiseks/-koputamiseks või turvasakklõpsamiseks/-koputamiseks
Otseteed	Ilma suumita	Ei ole rakendatav	Ei ole rakendatav
Paremklõps	Tavasuum	Süvasuum	Lülitage ümber kleepsparemkõpsamiseks või turvaparemkõpsamiseks
Topeltklõps	Tavasuum	Süvasuum	Lülitage ümber kleepsstopeltkõpsamiseks või turvatopeltkõpsamiseks
Pilguklaviatuur	Täpsema teabe jaoks vaadake 3.9 Pilguklaviatuur, lehekülj 19.		
Sätted	Ilma suumita	Ei ole rakendatav	Ei ole rakendatav
a. Täpsema teabe erinevate kleepsülesannete kohta leiate lk 3.5 Kleepsülesanded, lehekülj 15.			

3.5 Kleepsülesanded

Ikoon	Toiming/tegevus	Kirjeldus
	Kleepsvasakklõps/-puude	Kleepsülesanded võimaldavad ülesannet korduvalt rakendada ilma vajaduseta ülesannet tegumirealt korduvalt valida. Valige kleepsülesanne korra tegumirealt ja kursor järgib teie pilku. Pilgu paigale jätmise ekraniil teostab selles punktis valitud toiming. Ülesanne jääb aktiivseks ka toiminguteostamise järel, mis tähendab, et seda ei pea uuesti tegumiribalt aktiveerima. Kleepsülesande peatamiseks lihtsalt vaadake uuesti sama ülesannet tegumiribal kuni see ei ole enam esile tõstetud.  Kursori kleepsliigutamise puhul ei ole teisene valik saadaval, sest see ülesanne lihtsalt liigutab kursorit ekraanil.
	Kleepstopeltklõps	
	Kleepslohistamine	
	Kursori kleepsliigutamine	
	Kleepsparemklõps	


3.5.1 Kleepsülesannete käitumine erinevatel režiimidel

Toiming/tegevus	Peamine	Teine	Kolmas ^a
Kleepsvasakklõps/-puude	Tavasuum	Süvasuum	Lülituge ümber vasakklõpsamiseks/-koputamiseks või turvasakklõpsamiseks/-koputamiseks
Kleepstopeltklõps	Tavasuum	Süvasuum	Lülituge ümber topeltklõpsamiseks või turvatopeltklõpsamiseks
Kleepslohistamine	Tavasuum	Süvasuum	Lülituge ümber lohistamiseks või turvalohistamiseks
Kursori kleepsliigutamine	Ilma suumita	Ei ole rakendatav	Kursori liigutamise lüliti
Kleepsparemklõps	Tavasuum	Süvasuum	Lülituge ümber paremklõpsamiseks või turvaliselt paremal klõpsamiseks

a. Täpsema teabe erinevate kleepsülesannete kohta leiate lk 3.4 Tavaülesanded, lehekülj 13.

3.6 Turvasklõps

Ikoon	Toiming/tegevus	Kirjeldus
	Turvavasakklõps/-puude	Turvasõlpsõlesanded võimaldavad teil turvaliselt teha pangatoiminguid jms ilma kaheastmelise toimingu põhjustatud vigadeta. Kõigepealt suumige ja siis tehke teostamiseks valik. Valige kolmanda valiku tegumiribast turvasõlpsõlesanne. Pilgu paigale jätmine ekraanil teostab selles punktis valitud toimingut. Käsklusega suumitakse uues aknas, kus pilgu paigale jätmist näitab  ikoon aknas, vt Joonis 3.3 
	Turvapõlpsõlpsõ	
	Turvapõlpsõlpsõ	
	Turvalõhistamine	<i>Turvasõlpsõ teostamine, lehekõlg 16.</i> Turvasõlpsõ tegemiseks keskel, valige  ikoon.  Turvasõlpsõlesanded on saadaval vasaklõpsõmiseks, paõlpsõlpsõmiseks, tõlpsõlpsõmiseks ja lõhistamiseks.

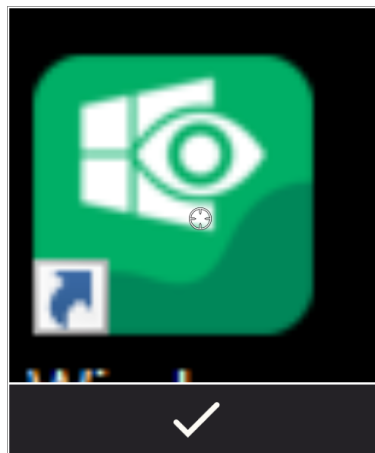

Joonis 3.3 Turvasõlpsõ teostamine

3.7 Otseteed

Windows 8.1	Windows 10



Kui otsetee funktsioon on tähistatud ikooniga , siis jääb otseteede aken pärast funktsiooni aktiveerimist avatuks, võimaldades mitmekordset aktiveerimist.

Otsetee	Toiming	Win 8.1	Win 10	Kirjeldus
	Maksimeerige aken	x	x	Otsetee, mis maksimeerib aktiivse akna/rakenduse/tarkvara.
	Tagasi	x	x	Otsetee, mis viib kasutaja veebibrauseris või muus sarnase funktsionaalsusega rakenduses ühe lehe võrra tagasi.
	Võta tagasi	x	x	Otsetee, mis võtab viimase käskluse tagasi.
	Kopeeri	x	x	Otsetee, mis kopeerib aktiivse valikuga.
	Kleebi	x	x	Otsetee, mis kleebib varem kopeeritud valiku.
	Käivita	x	x	Otsetee, mis avab Windowsi stardimenüü
	Peida tegumiriba	x	x	Otsetee, mis peidab tegumirea täisekraanivaates. Tegumirea uuesti avamiseks valige  või  sõltuvalt sellest kummal pool tegumirida paikneb.

Otsetee	Toiming	Win 8.1	Win 10	Kirjeldus
	Minimeerige aken	x	x	Otsetee, mis minimeerib aktiivse akna/rakenduse/tarkvara.
	Brauser	x	x	Otsetee, mis käivitab veebibrauseri.
	Helivaljus üles	x	x	Otsetee, mis suurendab helivaljust.
	Tummaks	x	x	Otsetee, mis lülitab kõlarid tummaks.
	Helivaljus alla	x	x	Otsetee, mis vähendab helivaljust.
	Otsi	x		Otsetee, mis avab Windowsi otsingufunktsiooni.
	Cortana		x	Otsetee, mis avab Cortana. Cortana on teie nutikas assistent, kes oskab veebist ja teie arvutist otsida, jälgida teie kalendrit jpm.
	Vaheta poolt	x	x	Otsetee, mis liigutab tegumiriba paremalt/vasakult.
	Sulge aken	x	x	Otsetee, mis sulgeb aktiivse akna/rakenduse/tarkvara.
	Kõnetuvastus	x	x	Otsetee, mis käivitab Windowsi kõnetuvastuse või Dragoni kõnetuvastuse, kui viimane on installitud.
	Virtual Remote	x	x	Otsetee, mis avab Virtual Remote'i rakenduse. Täpsema teabe jaoks vaadake 5 <i>Virtual Remote</i> , lehekülj 39.
	Töölaud	x	x	Otsetee, mis avab töölauda.
	Charms	x		Otsetee, mis avab Charmsi menüü.
	Toimingukeskus		x	Otsetee, mis avab aktiveerimiskeskuse.
	Rakenduste valits	x		Otsetee, mis võimaldab valida kõigi Modern UI rakenduste ja töölauda vahel.
	Ülesande vaade		x	Kõiki töölaual töötavaid rakendusi siin ei kuvata. Kõiki saab näha ainult töölaual. Otsetee, mis avab protsessivaate, kus kuvatakse kõik Modern User Interface'i (UI) rakendused. Ülesande vaadet ei kuvata, kui avatud on üks rakendus või mitte ühtegi.
	Sulge otseteed	x	x	Otsetee, mis sulgeb otseteede menüü.

3.8 Valikumeetod – pilk või lüliti

Valitud toimingu teostamiseks on kaks võimalust.

- Pilguga – kasutades silmi nii valitud ülesande juhtimiseks kui käivitamiseks.
- Pilgu ja lülitiga – kasutades valitud ülesande juhtimiseks silmi ja vajutades selle käivitamiseks süsteemiga ühendatud mehaanilist lüliti.

Valikuviisi saab määrata Windows Control seadistuse dialoogiaknas (vt 4 Rakenduse Windows Control seaded, lehekülg 24).

Enne valiku rakendamist tuleb tegumirealt valida teostatav ülesanne. Vaadake valitud ülesannet kuni see tõstetakse esile "primaarse" või "teisese valikuna".

- **Pilk** – valitud ülesande teostamiseks tuleb vaadata meelepärasele osale ekraanist (või ekraaniikoonile), kus soovite ülesande rakendada. Automaatne suumimisfunktsioon on aktiveeritud ja lõppeb ikooni valimise või toimingu rakendamisel.
- **Pilk ja lüliti** – kaks erinevat teostusviisi.
 - **Ühekordne lüliti vajutus** - suumimisfunktsioon käivitub nagu pilgurežiimi korral ja vastavalt Windows Control seadistuse dialoogiaknas määratud seadetele (vt 4 Rakenduse Windows Control seaded, lehekülg 24).
 - **Aktiveerige ja hoidke lüliti** - suumimisfunktsioon suumib kuni lüliti vabastamiseni / deaktiveerimiseni.



Pilgumeetodi puhul tuleb **enne** iga ülesande teostamist vaadata uuesti tegumiribale ja valida uus ülesanne.



Kui suumi sügavuseks on määratud madal Windows Control sätetes – suumimist ei toimu. Täpsema teabe jaoks vaadake 4 Rakenduse Windows Control seaded, lehekülg 24.

3.8.1 Pilgu ja lüliti režiimis vaikimisi aktiivne

Pilgu ja lüliti meetodi puhul kasutatakse "vaikigimi aktiivseks" nimetatavat funktsiooni.

Kui ülesanne on "vaikimisi aktiivne", siis ei pea te uuesti tegumiribale vaatama, kui soovite valitud ülesannet korrata. Uuesti tuleb vaadata alles siis, kui soovite ülesannet vahetada.

Pilgu ja lüliti meetodi kasutamisel on vasakklõpsu / puute ülesanne alati vaikimisi aktiivne. See tähendab, et vasakklõps / puude on alati aktiveeritud ja, kui te ei ole valinud muud, siis on see lüliti vaiketoiming. Muude ülesannete valimisel on need aktiivsed ühe korra (ühiks valikuks) ja seejärel taastab Windows Control järgmisteks valikuteks automaatselt vasakklõpsu / puute funktsiooni.

Erand on topeltklõpsuülesanne; selle valimisel pilgu ja lüliti režiimis muutub ka see funktsioon vaikimisi aktiivseks.

See on eriti kasulik juhtudel nagu lüliti abil kiiresti internetis surfamine, kui kasutate vasakklõpsu / puudet korra ja saate seejärel korduvalt valida muud meelepärast ilma vajaduseta valida vasakklõps / puude korduvalt uuesti.

3.8.2 Ülesande teostamine klaviatuuriklahviga lüliti asemel



Klaviatuuriklahvi F12 valimine aktiveerib ülesannete valiku. Seda saab kasutada täpselt samamoodi kui ühendatud lüliti. Täpsema teabe lülite kohta leiate lk 3.8 Valikumeetod – pilk või lüliti, lehekülg 19.

3.9 Pilguklaviatuur

Valides tegumiribalt pilguklaviatuuri nupu kuvatakse ekraanile pilguga juhitud klaviatuur. Pilguklaviatuur asub ekraani avamisel

alati selle allosas. Liigutamiseks võib kasutada klaviatuuri tegumiriba  (klaviatuur üles/alla) nuppu.

Pilguklaviatuuriga koos käivitatakse ka klaviatuuri tegumiriba. Täpsema teabe jaoks vaadake 3.9.1 Klaviatuuri tegumiriba, lehekülg 21.

Pilguklaviatuur koosneb neljast tsükliliselt vahetatavast klaviatuurilehest. Kasutaja saab kerge vaevaga liikuda erinevate klaviatuurilehtede vahel, valides kõigi pilguklaviatuuri lehtede all vasakul ja paremal nurgas paiknevaid järgmise lehe nuppe.

Klahv, millele kasutaja klaviatuuril vaatab, tõstetakse esile raamiga klahvi tähemärgi/funktsiooni ümber



Neli klaviatuurilehte on:

		Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P		
	Ctrl	A	S	D	F	G	H	J	K	L	!		
		Z	X	C	V	B	N	M	,	.	?		

Joonis 3.4 Vaikimisi esileht

	⌫	/	*	7	8	9	+	(	)	"	#	⌫
<	Ctrl	\	.	4	5	6	-	<	>	&	'	↵
	↑	%	0	1	2	3	=	;	:	_	@	⌵

Joonis 3.5 Esimene leht paremal

		F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	
	Ctrl	Esc	→I	Home	End	Web	Search	↑	Prt Scr	Pg Up	F11	
	⬆	⬜	Alt	Alt Gr	Del	Mail	←	⬇	→	Pg Dn	F12	⬇

Joonis 3.6 Teine leht paremal või vasakul

	⌫	\$	€	£	¥	¤		°	§	ı	¿	⌭
<	Ctrl	:~)	:~)	:~(	:~(	:~D	:~/	:~S	:~P	<3	.COM	↵
	⇧	[	]	{	}	^	`	~	~	Ç	⌵	

Joonis 3.7 Esimene leht vasakul

Kui soovite muuta klaviatuuri keelt või muid klaviatuuri seadistusi, siis vt *4 Rakenduse Windows Control seaded, lehekülj 24*.



Klahvid Shift, Ctrl, Alt, Win ja Alt Gr jäävad valimisel lukku ehk "kleepuvad". See tähendab, et nad jäävad valituks kuni kasutaja valib klaviatuuril järgmise klahvi. Need jäävad lukku, kui järgmiseks valitakse samuti "kleepuv" klahv.



Rõhumärgiga tähe kirjutamiseks:


1. Valige rõhumärk
2. Valige tähemärk
3. Tähemärk kuvatakse valitud rõhumärgiga.

3.9.1 Klaviatuuri tegumiriba

Sarnaselt Windows Controli tegumiribale paikneb ka klaviatuuri tegumiriba ülaosas jälgimise oleku vaatur. See võimaldab teil veenduda, et silmajälgija tunneb teie silmad ära ja olete seadme ees õiges asendis.

Klaviatuuri tegumiriba ülesandenuvad võivad olla kolmel eri režiimil, nagu kujutatud lk *Joonis 3.8 Klaviatuuri tegumiriba režiimid, lehekülg 21*.

Täpsema teabe erinevate režiimide kohta leiate lk 3.3.1 *Windows Controli tegumiriba režiimid, lehekülg 12*

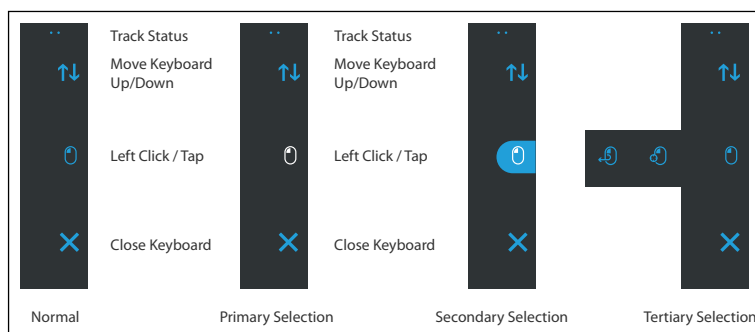

Joonis 3.8 Klaviatuuri tegumiriba režiimid



Kolmas valikuviis on klaviatuuri tegumiribal saadaval ainult vasakklõpsu ülesande puhul.



Windows 8.1 ja Windows 10 puhul muutuvad klaviatuuri tegumiriba värvid vastavalt Windowsi seadistustele.

3.9.2 Klaviatuuri tegumiriba ülesandenuvad

Ikoon	Toiming/tegevus	Kirjeldus
↑↓	Liiguta klaviatuuri üles/alla	Käsklus, mis liigutab klaviatuuri ekraani üla- või alla.  Selle funktsiooni aktiveerimiseks hoidke nuppu all.
🖱️	Vasakklõps/puude	Käsklus, millega kaasneb ühekordne vasakklõps või, puuetundliku seadmete puhul, ühekordne sõrme puude.
✖	Sulge	Käsklus, mis sulgeb klaviatuuri.

3.9.3 Sõnaennustus (Word Prediction)

Rakenduse Windows Control puhul kasutatav sõnaennustussüsteem pärineb SwiftKey'lt ja sarnaneb tavaliselt tahvelarvutitel ja nutitelefonides kasutatavale. SwiftKey rakendab erinevaid tehisintellekti tehnoloogiaid, et ennustada järgmist kasutaja poolt sisestavat sõna. SwiftKey õpib kasutaja poolt varem sisestatud tekstist ja esitab selle alusel trükkimise käigus sõnade ennustusi. Ennustuskeel muutub vastavalt klaviatuuri keelseadistusele.


	he		her		hey		here		help		health	
		Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P	
<	Ctrl	A	S	D	F	G	H	J	K	L	!	
		Z	X	C	V	B	N	M	,	.	?	

Joonis 3.9 Aktiveeritud sõnaennustusega klaviatuur

Kui sõnaennustus on kasutusel, siis vt 4 *Rakenduse Windows Control seaded, lehekülj 24*, et lugeda lähemalt sõnaennustuse aktiveerimise/deaktiveerimise kohta. Klaviatuuri kohal kuvatakse kuus (6) kastikest. Kõige vasakpoolsemas kastis kuvatakse kõige tõenäolisem ennustussõna ning ülejäänud viies (5) kastis on alternatiivsed ennustussõnad. Ennustatava sõna valimiseks tuleb lihtsalt valida sobiva sõnaga kast. Kui te ei leia otsitavat sõna, siis jätkake trükkimist ja loodetavasti õnnestub ennustada õige sõna tähemärkide lisandudes.



Kui te kasutate sõnaennustust ja soovite sisestada rõhumärgiga sõna, nt café, siis on sageli mugavam lasta sõnaennustusel pakkuda rõhumärgiga sõna. Lihtsalt sisestage "cafe" ja teile pakutakse "café".

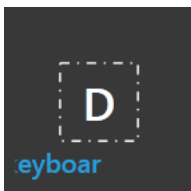


Trükkimise ajal tähistatakse viimased 5-10 tähemärki kuvatud/esile tõstetud klahvil sinisega. Täpsema teabe jaoks vaadake 4 *Rakenduse Windows Control seaded, lehekülj 24*. See funktsioon võimaldab kasutajal kerge vaevaga märgata kirjavigu ja vähendab konkreetse vea otsimiseks kuluvat aega, tõstes seeläbi trükkimiskiirust.

3.10 Windows Control koos regioonipõhiste rakendustega

Windows Controli saab kasutada koos muude silmaga juhitud rakendustega. Muude rakenduste "pilguga juhitud" regioonid on aktiivsed kuni Windows Controli tegumiribal ei ole muud aktiivset ülesannet. Kui te kasutate pilgu ja lüliti režiimis Windows Control, siis on ülesandenupud alati "vaikimisi aktiivsed". Kui soovite ülesande valiku tühistada, siis vaadake korra tagasi tegumiribal valitud ülesandele.

3.11 Eye Detection Indicator

The **Eye Detection Indicator**, , on diskreetne indikaator Windowsi süsteemisalves.

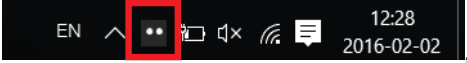 mis näitab, et Windows Control on tuvastanud kasutaja silmad.

Eye Detection Indicatoril võib olla erinevaid olekuid:

- Silmad tuvastatud ()




Toimib ka kasutaja asendijuhikuna.

- Silmi ei ole tuvastatud, ()

- Silmajälgija ei ole ühendatud või ei ole aktiveeritud ().

4 Rakenduse Windows Control seaded

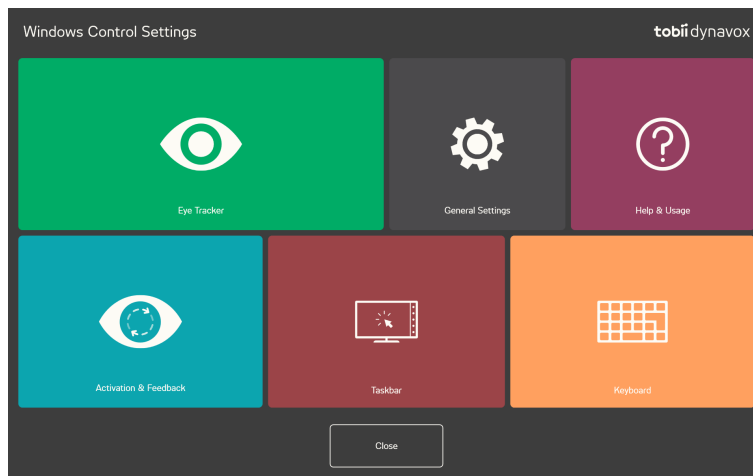


Ikoonid	Toiming	Kirjeldus
	Silmajälgija	Avab Eye Trackeri seaded. Täpsema teabe jaoks vaadake 4.1 <i>Silmajälgija</i> , lehekülg 25.
	Üldseaded	Avab üldseaded . Täpsema teabe jaoks vaadake 4.2 <i>Üldseaded</i> , lehekülg 30.
	Abi ja kasutamine	Avab Abi ja kasutamise seaded. Täpsema teabe jaoks vaadake 4.3 <i>Abi ja kasutamine</i> , lehekülg 31.
	Aktiveerimine ja tagasiside	Avab Aktiveerimise ja tagasiside seaded. Täpsema teabe jaoks vaadake 4.4 <i>Aktiveerimine ja tagasiside</i> , lehekülg 32.
	Tegumiriba	Avab tegumiriba sätteid. Täpsema teabe jaoks vaadake 4.5 <i>Tegumiriba</i> , lehekülg 35.
	Klaviatuur	Avab klaviatuuri sätteid. Täpsema teabe jaoks vaadake 4.5 <i>Tegumiriba</i> , lehekülg 35.

4.1 Silmajälgija



4.1.1 Häälestamise vaheakk

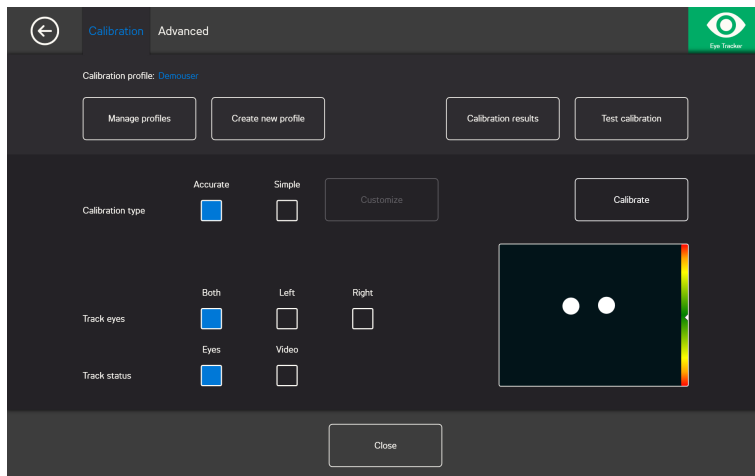

Häälestusprofiil (Calibration profile): Siin kuvatakse aktiivse profiili nimi.

Halda profiile (Manage profiles): Valige see nupp olemasoleva profiili muutmiseks. Täpsema teabe jaoks vaadake 4.1.1.1 *Profiilide haldamine, lehekülg 25*.

Loo uus profiil (Create new profile): Valige see nupp uue profiili loomiseks. Täpsema teabe jaoks vaadake 4.1.1.2 *Loo uus profiil, lehekülg 26*.

Häälestuse tulemused: valige see nupp häälestuse tulemuste vaatamiseks. Täpsema teabe jaoks vaadake 4.1.1.3 *Häälestuse tulemused, lehekülg 26*.

Testi häälestust (Test calibration): valige see nupp, et avada häälestuse testimise leht. Täpsema teabe jaoks vaadake 4.1.1.4 *Testi häälestust, lehekülg 27*.

Häälestuse tüüp (Calibration type): Saadaval on kahte (2) tüüpi häälestamine: **täpne (Accurate)** ja **lihtsustatud (Simple)**. Täpsema teabe jaoks vaadake 4.1.1.6 *Häälestuse tüüp, lehekülg 27*.

Silmade jälgimine: Valige, kuidas seade kasutaja silmi jälgib: **mõlemat, vasakut** või **paremat**.

4.1.1.1 Profiilide haldamine

Profiilide haldamise lehel saate olemasolevaid profiile aktiveerida ja kustutada.

Ekraani keskosas alajaotuses Aktiivne profiil näete aktiivse profiili nime.

Kõik saadaolevad nupud loetletakse lehel nuppudena. Kasutage nuppe  ja , et kerida saadaolevate profiilide vahel.

4.1.1.1.1 Profiili aktiveerimine

1. Valige aktiveeritava profiili nime kandev nupp.
2. Valige ekraani parempoolses ülanurgas paiknev nupp **Aktiveeri**.
3. Valige **Jah** valitud profiili aktiveerimiseks või **Ei** tühistamiseks.
4. Valige **Sulge**, et lehelt lahkuda.

4.1.1.1.2 Profiili kustutamine

1. Valige kustutava profiili nime kandev nupp.
2. Valige ekraani vasakus ülanurgas paiknev nupp **Kustuta**.

3. Valige **Jah** valitud profiili kustutamiseks või **Ei** tühistamiseks.
4. Valige **Sulge**, et lehelt lahkuda.

4.1.1.2 Loo uus profiil

1. Valige kasutatav **Häälestuse tüüp**.
Täpsema teabe jaoks vaadake 4.1.1.6 *Häälestuse tüüp, lehekülg 27*.
2. Valige nupp **Loo uus profiil**.
3. Jätkamiseks valige **Jah** ning tühistamiseks **Ei**.
4. Sisestage uuele profiilile nimi.



Kasutada tuleb klaviatuuri ja hiirt.


Kasutada võib ainult tähti ja numbreid.

5. Valige nupp **Järgmine**.
6. Paigutage kasutaja nii, et kasutaja silmadele vastavad kaks täppi paiknevad ekraanil kujutatud kasti kestel.
Häälestusprotsess käivitub, kui parem täpp vilgub.
7. Häälestamise läbiviimiseks järgige ekraanil toodavaid juhiseid.
8. Kontrollige häälestuse tulemusi.
Täpsema teabe jaoks vaadake 4.1.1.3 *Häälestuse tulemused, lehekülg 26*.
9. Valige **Sulge**, et häälestuse tulemused aktsepteerida.

4.1.1.3 Häälestuse tulemused



See toimib üksnes IS-4 silmajälgijatega ehk IS-20 ja IS-3 silmajälgijatega see ei toimi. Rohkem teavet kasutatava silmajälgija platvormi kohta leiab silmajälgija tehnilistest andmetest.

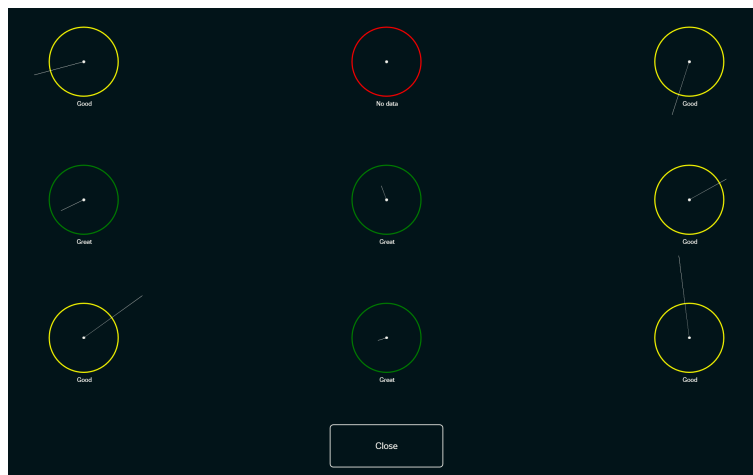

Häälestuse tulemuste lehelt näete iga häälestuspunkti häälestuse tulemust. See kui palju häälestuspunkte lehel kuvatakse, sõltub valitud häälestustüübist ja häälestuse kohandustest.


Häälestuspunktil võib olla kolm (3) erinevat olekut:

- suurepärase (roheline)
- hea (kollane)
- andmed puuduvad (punane)



Täpse häälestustüübi kasutamisel käivitub häälestus automaatselt uuesti, kui silmajälgija ei saa häälestuspunkti andmeid.

4.1.1.4 Testi häälestust

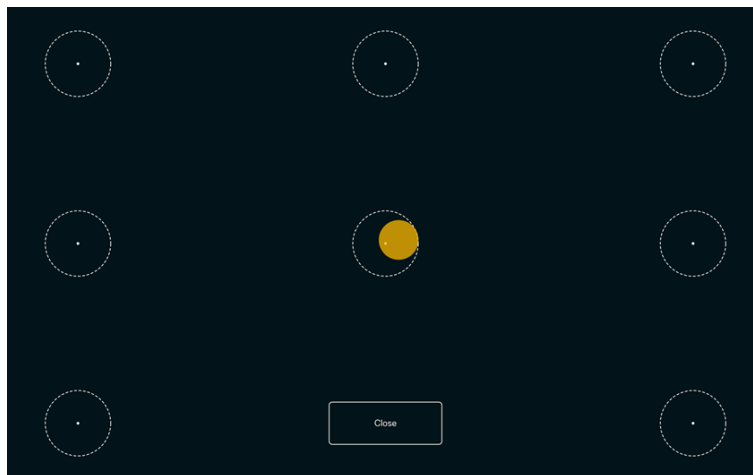

Häälestuse testimise lehel saab tehtud seadistusi katsetada, kasutades ekraanil eelmääratletud sihtmärke. See aitab selgust saada, kas kasutaja peab silmajälgija uuesti häälestama.

1. Vaadake iga ekraanil kujutatud ringi sees olevat täppi, et näha, kui täpne on silma jälgimine selles piirkonnas.
2. Lõpetamisel valige **Sulge**.

4.1.1.5 Uuesti häälestamine

1. Valige kasutatav **Häälestuse tüüp**.
Täpsema teabe jaoks vaadake 4.1.1.6 *Häälestuse tüüp, lehekülg 27*.
2. Valige nupp **Häälesta uuesti**, et käivitada aktiivse profiili puhul uuesti kalibreerimisprotsess.
3. Häälestamise läbiviimiseks järgige ekraanil toodavaid juhiseid.
4. Kontrollige häälestuse tulemusi.
Täpsema teabe jaoks vaadake 4.1.1.3 *Häälestuse tulemused, lehekülg 26*.
5. Valige **Sulge**, et häälestuse tulemused aktsepteerida.

4.1.1.6 Häälestuse tüüp

Saadaval on kahte (2) tüüpi häälestamine: **täpne** ja **lihtsustatud**.

4.1.1.6.1 Täpne

Valige kast **Täpne**, et aktiveerida kõige täpsem häälestusviis.

Kui täpne häälestustüüp on aktiveeritud, siis on häälestamisprotsess seitsme (7) häälestuspunktiga. Täpne häälestus on vaikimisi valitud häälestustüüp.

4.1.1.6.2 Lihtne

Häälestusprotsessi kohandamiseks valige nupp **Lihtne**.

Häälestusprotsessi kohandamiseks valige nupu Lihtne kõrval olev nupp **Kohanda**.



Häälestuspunktid: valige, kui kasutada tuleks **1, 2, 5** või **9** häälestuspunkti.



PCEye Go puhul ei ole saadaval 1-punktiline häälestamine.

Samm-sammuline läbimine Lülitage samm-sammulise läbimise sisse/välja lüliti Sisse, et aktiveerida funktsioon, mille puhul klaviatuuri S-klahv või ekraaniklõps /-puude liigub häälestamise järgmisele sammule.

Stiimul:

Valige nupp **Sirvi**, et muuta **Stiimul** vaikumisi valgest täpist järgmiseks:

- Üks lisatud stiimulist, pildist või videost
- Pilt kasutaja lemmikelust
- Lemmikvideo
- Või midagi muud.

Valige nupp **Taust**, et muuta häälestusprotsessi tausta värvi.

Stiimuli kiirus: valige kolme tasandi seast, kui kiiresti stiimul ekraanil liigub:


- aeglane
- keskmine
- kiire

Stiimuli suurus: valige kolme tasandi seast, kui suurena stiimulit ekraanil kuvatakse:

- Väike
- Keskmine
- Suur

Sulge: Lehelt lahkumiseks valige nupp **Sulge**.

4.1.2 Edasijõudnud seadete vahesakk

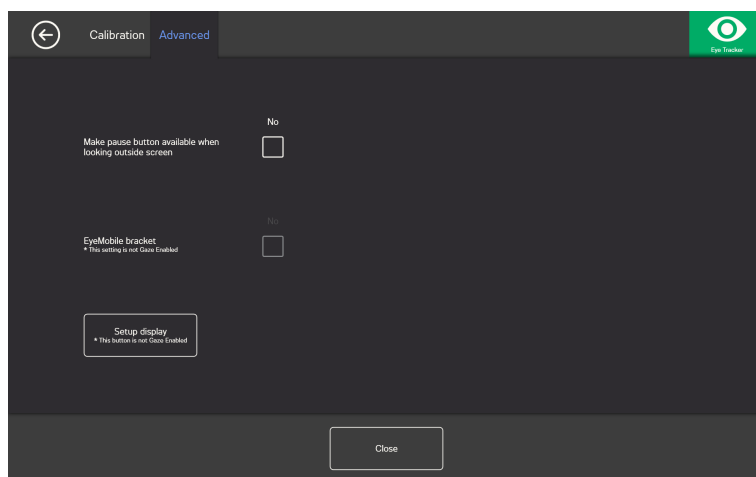

Pausi rakendamine ekraanilt välja vaatamisel: Valige Sees/väljas märkeruudu sätteks **Sees**, kui soovite, et ekraanilt eemale vaatamisel ilmuks ekraanile pausinupp, mille abil kasutaja saab mugavalt silmade jälgimist pausida ja uuesti käivitada.


EyeMobile'i klamber: Valige EyeMobile'i klambri Sees/väljas märkeruudu sätteks **Sees**, kui kasutate EyeMobile'i või EyeMobile Minit. EyeMobile'i klambri seadistus ei vaja muutmist EyeMobile Plusi puhul ja on seetõttu deaktiveeritud.

4.1.2.1 Ekraani häälestamine


Kui kasutate üle ühe (1) ekraani, siis peate täpsustama millise kuvaga on silmajälgija seotud. Süsteem küsib teilt ka millise suurusga ekraani te kasutate.



Toimib ainult laiendatud töölaual ja mitte topelttöölaual.

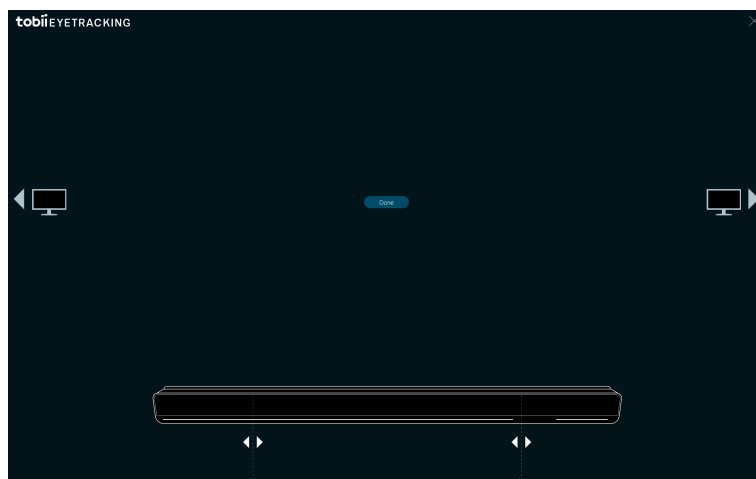

1. Kasutage nuppe  või , et valida millise kuvaga on silmajälgija seotud.
2. Joondage ekraanil toodud silmajälgija visualisatsiooni all paiknev vasak ja parem vertikaaljoon kasutatava silmajälgija kohal paiknevate märgistega.

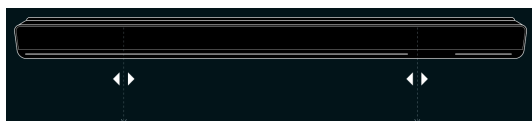


See määrab Windows Control puhul kasutatava ekraanisuuruse.

3. Lõpetamiseks valige **Done**.

4.2 Üldseaded




4.2.1 Üldseadete vahekaart

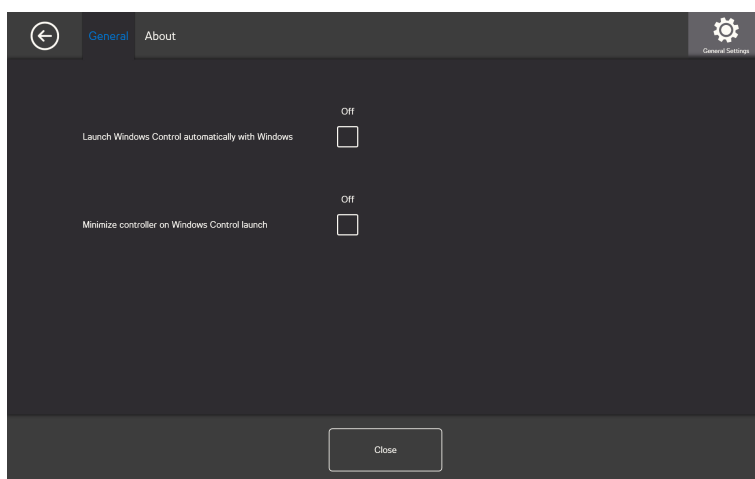

Windows Controli automaatne käivitamine Windowsiga: Valige Sees/väljas märkeruudu sätteks **Sees**, kui Windows Control tuleks käivitada automaatselt koos Windowsiga.

Kontrolleri minimeerimine Windowsi käivitamisel: Valige Sees/väljas märkeruudu sätteks **Sees**, kui Windows Controli kontrolleri tuleks Windowsi käivitamisel minimeerida.

4.2.2 Lisateabe vahekaart

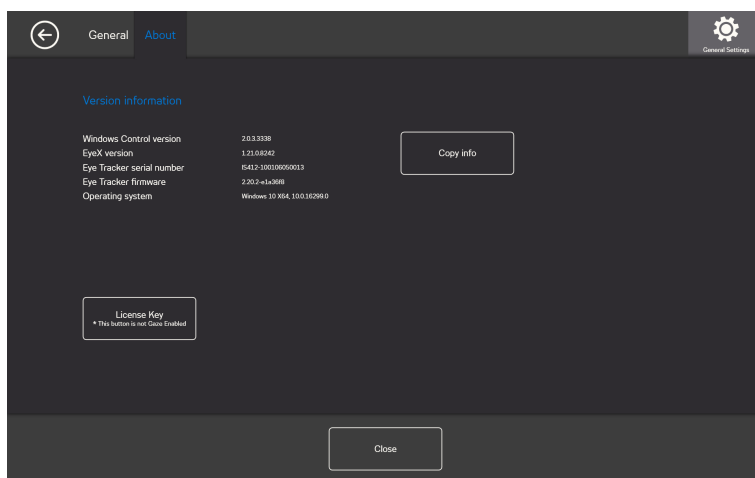

Lisateabe lehelt leiate kõik tarkvara ja silmajälgija riistvara puudutavad andmed. Seda teavet on võimalik kerge vaevaga kopeerida kasutades nuppu **Kopeeri teave (Copy info)** ja kleepides andmed seejärel e-kirja või muusse tarkvarra.

4.2.2.1 Litsentsivõti



Litsentsi nupp ei ole pilguga kasutatav. Kui peate litsentsi vahetama, siis paluge kellelgi end aidata.


Litsentsi aktiveerimiseks vt 2.2.1 *Litsentsi aktiveerimine, lehekülg 6*.

Litsentsi deaktiveerimiseks vt 2.2.2 *Litsentsi deaktiveerimine, lehekülg 8*.

4.3 Abi ja kasutamine



4.3.1 Abi vahesakk

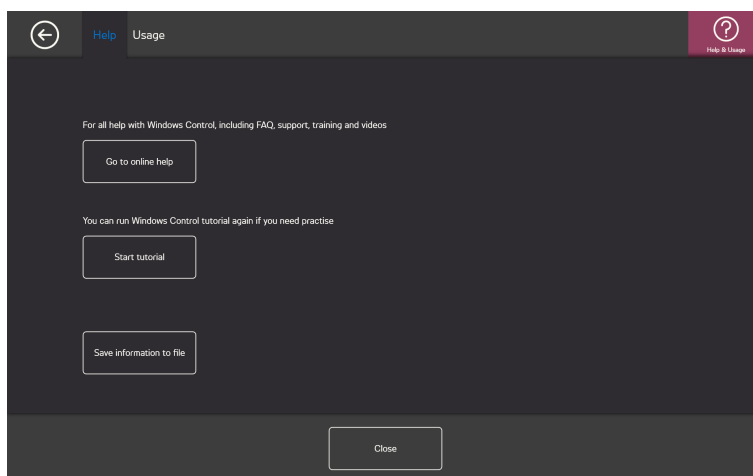

Valige nupp **Go to online help**, et avada Tobii Dynavox toodete klienditoe leheküljed internetibrauseris. Klienditoe veebilehelt leiab kasutaja korduma kippuvad küsimused, klienditoe, koolitused ning Windows Controli ja teisi Tobii Dynavox tooteid puudutavaid videoid ja dokumentatsiooni.




Veenduge, et arvuti/seade on internetiga ühendatud.

Kui kasutaja peab veel harjutama, siis valige nupp **Start tutorial**, et käivitada süsteemi juurde kuuluv juhend. Juhendi saab käivitada nii palju kordi, kui kasutaja soovib.

Kui te vajate kliendituge, siis valige nupp **Save information** faili, et kopeerida kõik olulised logifailid. Faili saab kerge vaevaga lisada e-kirjale ja saata klienditoe meeskonnale.

4.3.2 Kasutamise vahesakk

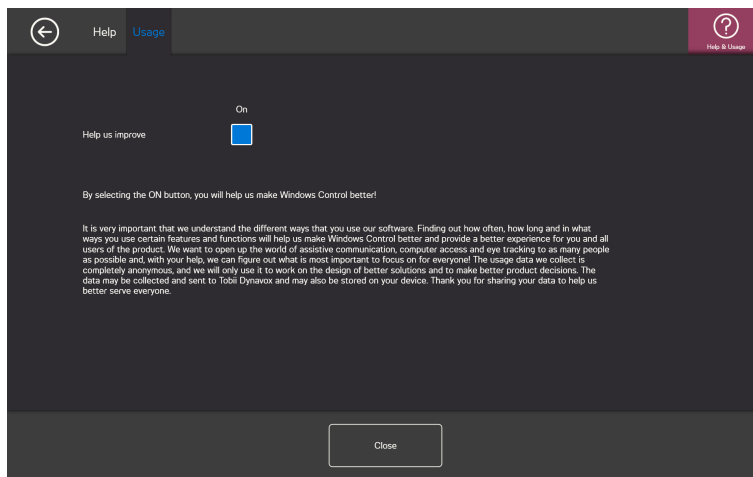


Aidake meil teenuse kvaliteeti tõsta: Kui soovite aidata ettevõttel Tobii Dynavox täiendada oma tarkvara, siis valige Sees/ väljas märkeruudu seadeks **Sees**.

4.4 Aktiveerimine ja tagasiside



4.4.1 Aktiveerimise vahesakk

4.4.1.1 Pilgu sätted

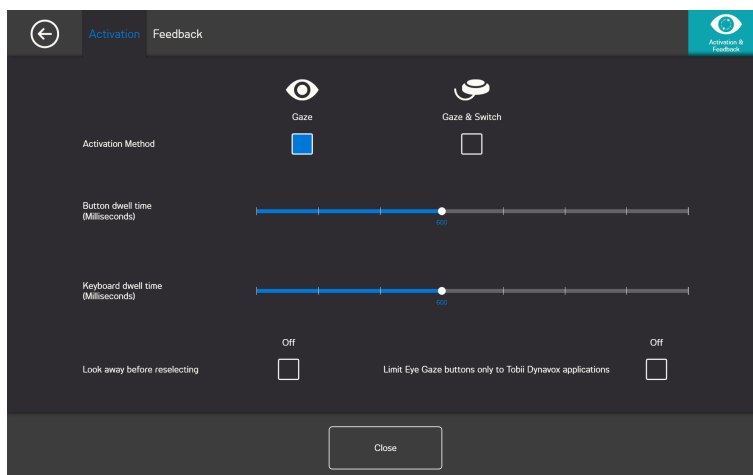

Aktiveerimise vahesakil saab muuta kõiki seadistusi, mis on seotud kasutaja ja Windows Controli suhtlusega. Siit saab valida, kas käsklusi antakse pilgu või pilgu ja lülitiga ning määrata, kuidas süsteem käitub.

Aktiveerimisviis (Activation method):

- **Pilk (Gaze)** - valige Pilk, kui soovite meelepärase ülesandega lõppeva suumimise aktiveerimiseks kasutada oma pilgu asendit.
- **Pilk ja lüliti** – valige Pilk ja lüliti, kui soovite meelepärase ülesandega lõppeva suumimise aktiveerimiseks kasutada lülitit.

Nupu rakendumisaeg (millisekundites)

Nupu rakendumisaega saab seadistada 8 erineval tasemel. Seadistuse vaatamiseks vaadake lihtsalt sobivale punktile. Nupu rakendumisaaja muutmine määrab, kui kaua kasutaja peab pilku nupul hoidma enne, kui sellega seotud toiming teostatakse. Skaalal on vasakul lühem rakendumisaeg ja paremal pikem.

Klaviatuuri rakendumisaeg (millisekundites)

Klaviatuuri rakendumisaega saab seadistada 8 erineval tasemel. Seadistuse vaatamiseks vaadake lihtsalt sobivale punktile. Klaviatuuri rakendumisaaja muutmine määrab, kui kaua kasutaja peab pilku nupul hoidma enne, kui sellega seotud toiming teostatakse. Skaalal on vasakul lühem rakendumisaeg ja paremal pikem.


Uuesti valimise eel pöörake pilk eemale

- **Sees** – valige **Sees**, et aktiveerida **Uuesti valimise eel pöörake pilk eemale**. Kui **Sees**, siis peab kasutaja aktiivsest pilguregioonist esmalt kõrvale vaatama, et sama pilguregioon uuesti aktiveerida.
- **Väljas** – valige, et **Vaata eemale enne uuesti valimist** deaktiveerida. Kui **Väljas**, siis aktiveeritakse valitud aktiivset regiooni uuesti ja uuesti kuni kasutaja pilk püsib regioonil. (vaikimisi)

Luba pilguga juhtimine ainult Tobii Dynavoxi rakendustele

- **Sees** – valige **Sees**, et aktiveerida **pilguga juhtimine ainult Tobii Dynavoxi rakenduste nuppude puhul**. Kui **Sees**, siis on aktiivne pilguala aktiveeritud, piirkonnaga seotud käsklus teostatakse ja Tobii Dynavox vastust näidatakse ainult Tobii Dynavox tarkvaras ja rakendustes.
- **Väljas** – valige **Väljas**, et **lubada pilguga juhtimine kõigi rakenduste nuppude puhul**. Kui **Väljas**, siis on aktiivne pilguala aktiveeritud, piirkonnaga seotud käsklus teostatakse ja Tobii Dynavox vastust näidatakse nii Tobii Dynavox kui kõigi kolmandate osapoolte tarkvaras ja rakendustes. (vaikimisi)

4.4.1.2 Pilgu ja lüliti sätted

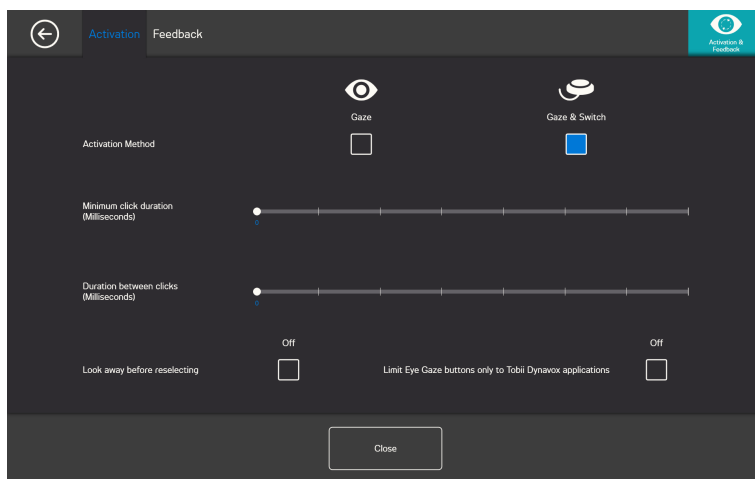

Klõpsu minimaalne kestus: aeg, mille jooksul peab kasutaja lüliti valiku tegemiseks vajutama.

Aeg kahe klõpsu vahel: n-ö surnud aeg, mille jooksul Windows Control ootab enne, kui lubab uuesti lüliti vajutada.


Uuesti valimise eel pöörake pilk eemale

- **Sees** – valige **Sees**, et aktiveerida **Uuesti valimise eel pöörake pilk eemale**. Kui **Sees**, siis peab kasutaja aktiivsest pilguregioonist esmalt kõrvale vaatama, et sama pilguregioon uuesti aktiveerida.
- **Väljas** – valige, et **Vaata eemale enne uuesti valimist** deaktiveerida. Kui **Väljas**, siis aktiveeritakse valitud aktiivset regiooni uuesti ja uuesti kuni kasutaja pilk püsib regioonil. (vaikimisi)

Luba pilguga juhtimine ainult Tobii Dynavoxi rakendustele

- **Sees** – valige **Sees**, et aktiveerida **pilguga juhtimine ainult Tobii Dynavoxi rakenduste nuppude puhul**. Kui **Sees**, siis on aktiivne pilguala aktiveeritud, piirkonnaga seotud käsklus teostatakse ja Tobii Dynavox vastust näidatakse ainult Tobii Dynavox tarkvaras ja rakendustes.
- **Väljas** – valige **Väljas**, et **lubada pilguga juhtimine kõigi rakenduste nuppude puhul**. Kui **Väljas**, siis on aktiivne pilguala aktiveeritud, piirkonnaga seotud käsklus teostatakse ja Tobii Dynavox vastust näidatakse nii Tobii Dynavox kui kõigi kolmandate osapoolte tarkvaras ja rakendustes. (vaikimisi)


4.4.2 Vastuste vaheosak

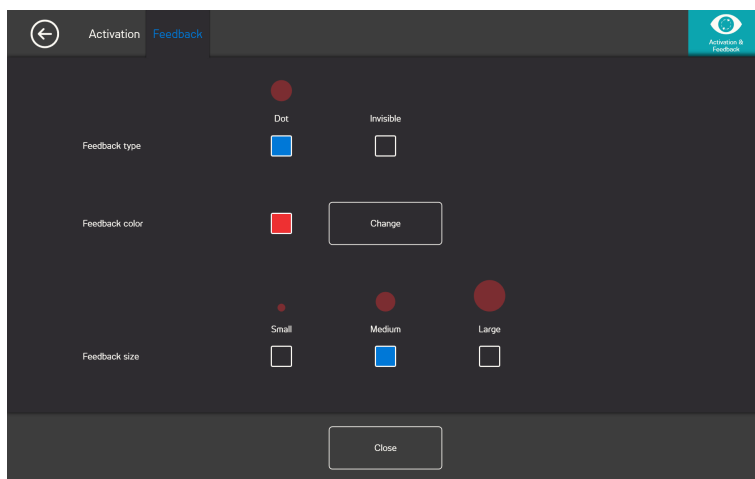

Vastuse tüüp:

- **Kell (Clock)** - visuaalne vastus on kell, millel loetud aeg saab täis määratud nupu rakendumisajaga. Aja täissaamisel teostatakse valitud ülesanne.
- **Täpp (Dot)** - ülesande teostamisel on visuaalne vastus pilgu kasutajatele kahanev punkt ning lüliti kasutajatele staatiline punkt.
- **Nähtamatu (Invisible)** - ülesande teostamisel ei kuvata ekraanil mingit vastust.

Vastuse värv: Valige nupp **Muuda**, et valida vastustäpi värv. Saadaolevad värvid leiate lk *Joonis 4.1 Saadaolevad värvid*, lehekülg 34.

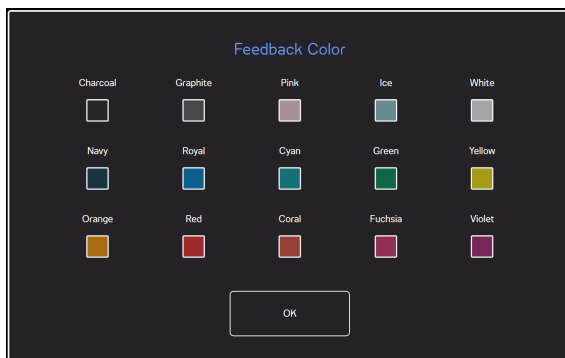

Joonis 4.1 Saadaolevad värvid


Vastuse suurus: Valitud tüüpi vastusele saab määrata kolm (3) erinevat väärtust.

- **Väike**
- **Keskmine**
- **Suur**

4.5 Tegumiriba




4.5.1 Tegumiriba vahesakk

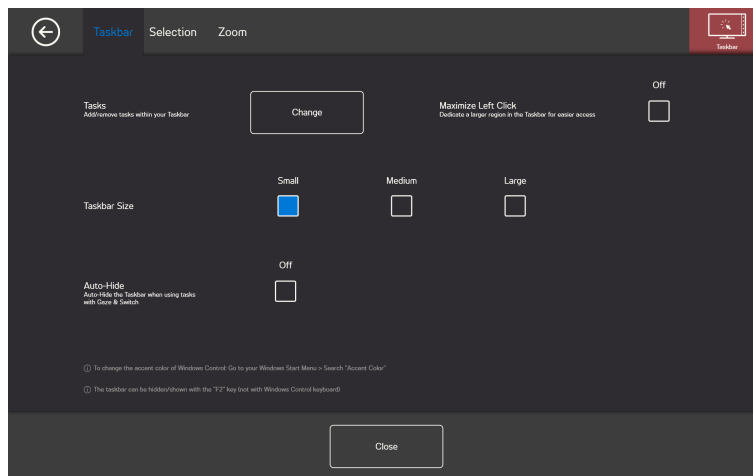

4.5.1.1 Ülesanded

Valige nupp **Muuda**, et saada juurdepääs hüpikaknale, kus saab tegumiribal ülesandeid lisada või eemaldada.

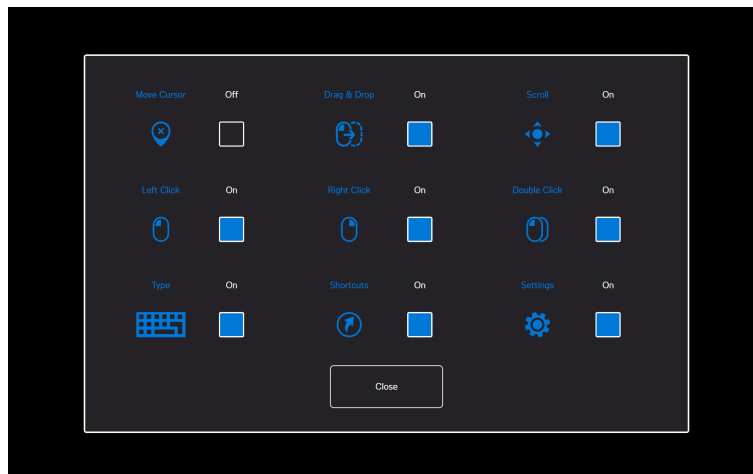

Võimaldab valida, milliseid ülesandeid tegumiribal kasutada. Täpsema teabe ülesannete kohta leiate lk 3.4 *Tavaülesanded, lehekülg 13*.



Arvestage, et mida rohkem on ülesandeid tegumireal, seda keerulisem on neid väikestel ekraanidel valida.

Ülesande lisamiseks tegumireale valige vastava ülesande märkeruudu Sees/väljas seadistuseks **Sees**.

Ülesande eemaldamiseks tegumirealt valige vastava ülesande märkeruudu Sees/väljas seadistuseks **Väljas**.



4.5.1.2 Maksimeeri vasakklõps

Vasaku klõpsu maksimeerimise aktiveerimine suurendab oluliselt vasaku hiireklõpsu aktiivset regiooni tegumireal, muutes vasaku klõpsu tegemise oluliselt mugavamaks.

Kasutage funktsiooni **Maksimeeri vasakklõps** ja tõstke vasakklõpsu ülesanne tegumiribal esile. Kui funktsioon on **Väljas**, siis on kõik valitud ülesanded tegumireale võrdselt jaotatud. Kui funktsioon on **Sees**, siis säilitavad kõik ülesanded peale vasakklõpsu oma algse/väikse suuruse ning vasakklõpsu ülesanne täidab tegumirea ülejäänud ruumi.

4.5.1.3 Tegumiriba suurus

On võimalik valida kolme (3) erineva tegumiriba suuruse vahel:

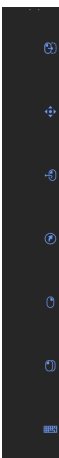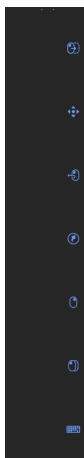Väike	Keskmine	Suur
		

Suurem tegumiriba laiendab ülesannet ümbritsevat aktiivset regioonit, et lihtsustada ülesande valimist kasutaja poolt. Tegelik aktiivne regioon laieneb ekraani piiridest välja ning ülesannete ikoonide keskmed paiknevad alati aktiivse regiooni keskel.


4.5.1.4 Automaatne peitmine

Peidab tegumiriba automaatselt. Saadaval kõigi kleepsülesannete jaoks ja kõigi ülesannete jaoks kleepsu aktiveerimise režiimis.

Valige sisse-väljalülituslahtris **Sees**, et automaatset peitmist lubada.

Valige sisse-väljalülituslahtris **Väljas**, et automaatne peitmine keelata.

4.5.2 Valikusakk

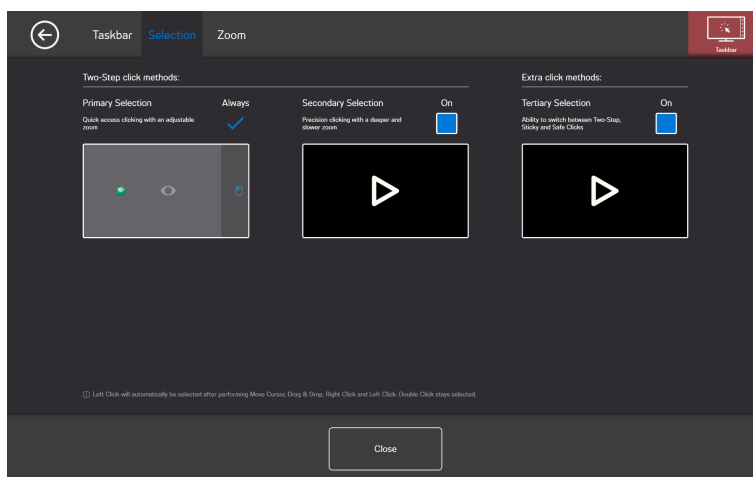

4.5.2.1 Primaarne valik

Primaarne valik on alati aktiivne ja seda ei saa desaktiveerida.


4.5.2.2 Teisene valik

Teisene valik on vaikimisi alati **Väljas**. Kui säte on **Sees**, siis on teisene valik saadaval.

4.5.2.3 Kolmas valik

Kolmas valik on vaikimisi alati **Väljas**. Kui säte on **Sees**, siis on kolmas valik saadaval. Kolmandas valikus on saadaval kleeps- ja turvaklõpsülesanded. Täpsema teabe jaoks vaadake 3.5 *Kleepsülesanded, lehekülg 15* ja 3.6 *Turvaklõps, lehekülg 16*.

4.5.3 Suumimise vahesakk

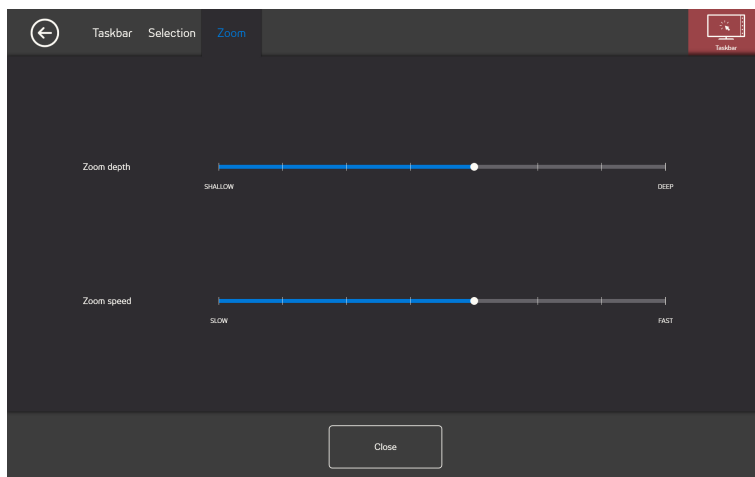

Suumimise sügavus

Suumimise sügavust saab seadistada 8 erineval tasemel. Seadistuse vaatamiseks vaadake lihtsalt sobivale asendile. Sügavuse muutmine määrab, kui kaugelt suum läheb enne ülesande teostamist. Skaala parem pool vastab sügavamale suumile.




Kui sügavusseadistus on null, siis suumimist ei toimu. Siis toimub primaarse valiku korral kohene klõps. Teisese valiku korral on jätkuvalt tegu suumimisega.

Suumimise kiirus (Zoom speed)

Suumimise kiirust saab seadistada 8 erineval tasemel. Seadistuse vaatamiseks vaadake lihtsalt sobivale asendile. Kiiruse muutmine määrab, kui kiiresti suum liigub enne ülesande teostamist. Skaala parem pool vastab kiiremale suumile.



4.6 Klaviatuur

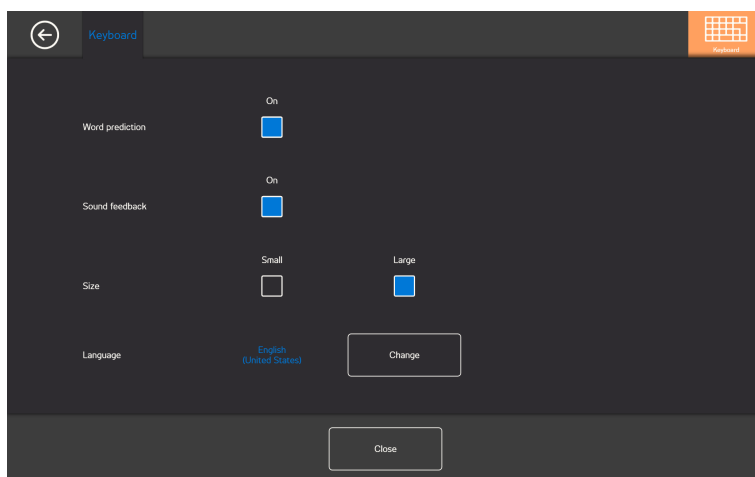

Sõnaennustus (Word Prediction)

- **Sees** – valige **Sees**, et aktiveerida sõnaennustus pilguklaviatuuri kasutamisel. (vaikimisi)
- **Väljas** – valige **Väljas**, et desaktiveerida sõnaennustus pilguklaviatuuri kasutamisel.

Helimärguanne (Sound Feedback)

- **Sees** – valige **Sees**, et aktiveerida helimärguanne pilguklaviatuuri klahvide kasutamisel.
- **Väljas** – valige **Väljas**, et desaktiveerida helimärguanne pilguklaviatuuri klahvide kasutamisel.

Suurus (Size)

- **Väike (Small)** - valige, et kasutada väiksema suurusega pilguklaviatuuri, mis katab alla poole ekraanist (vt *Joonis 4.2 Väike klaviatuur (vaikimisi), lehekülg 38*).
- **Suur (Large)** - valige, et kasutada suuremat pilguklaviatuuri, mis katab poole ekraanist (vt *Joonis 4.3 Suur klaviatuur, lehekülg 38*).



Joonis 4.2 Väike klaviatuur (vaikimisi)



Joonis 4.3 Suur klaviatuur

Keel

Kujutatud on valitud keeleseadistusega klaviatuur. Valige nupp **Change**, et muuta klaviatuuri keeleseadistust. Saadaval on mitme erineva keeleseadistuga klaviatuure.

5 Virtual Remote

5.1 Virtual Remote ülevaade



Joonis 5.1 Ülevaade Virtual Remote tarkvarast

Virtual Remote on jagatud kaheks osaks:

- Virtual Remote menüü, täpsem info lk 5.1.1 *Virtual Remote menüü, lehekülg 39.*
- Aktiivne pult, täpsem info lk 5.1.2 *Aktiivne pult, lehekülg 40.*

5.1.1 Virtual Remote menüü




Joonis 5.2 Virtual Remote menüü

Menüüs Virtual Remote on ikoonid:

Ülesande nupp	Toiming	Kirjeldus
+	Lisa pult	Valige see toiming uue puldi lisamiseks. Vt 5.2.4 <i>Lisa pult , lehekülg 42.</i>
i	Teave	Valige see toiming teabelehe avamiseks. Vt 5.2.6 <i>Teave , lehekülg 58.</i>
<	Vasak	Valige see toiming, et aktiveerida aktiivsest puldist vasakpoolne pult.
>	Parem	Valige see toiming, et aktiveerida aktiivsest puldist parempoolne pult.
✎	Redigeerimisrežiim	Valige see toiming, et lülituda aktiivse puldi puhul redigeerimisrežiimile (vt 5.2.5 <i>Redigeerimisrežiim , lehekülg 49).</i>
×	Sulge/minimeeri	Valige see toiming Virtual Remote'i rakenduse minimeerimiseks.

5.1.2 Aktiivne pult

Aktiivne pult on see, mis paikneb menüüs Virtual Remote keskel. Vt *Joonis 5.3 Aktiivne pult*.

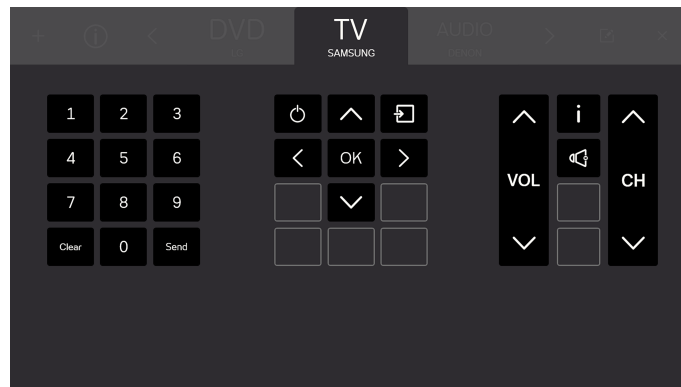


Joonis 5.3 Aktiivne pult



Kõik ekraanil nähtaval olevad nupud kuuluvad aktiivsele puldile.

Lisaks näete mõlemal pool aktiivset pulti veel kuni kahe (2) saadaoleva puldi nimesid. Kuni te ei ole täiendavat pulti aktiveerinud, siis kuvatakse ainult selle nime, mitte nuppe.

5.1.3 Nupud

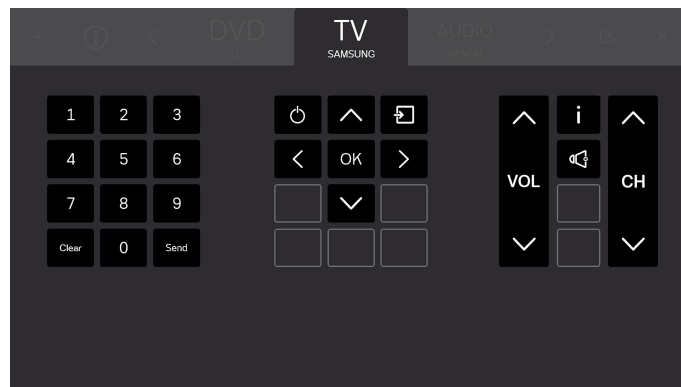


Joonis 5.4 Nupud

Kõik ekraanil nähtaval olevad nupud kuuluvad aktiivsele puldile. Kaugjuhtimispuldil on kahte (2) tüüpi nuppe.


- Aktiivne nupp , vt *Joonis 5.5 Aktiivsed nupud, lehekülg 41*
- Mitteaktiivsed nupud , vt *Joonis 5.6 Mitteaktiivsed nupud, lehekülg 41*



Nuppude arv ja nuppude funktsioonid erinevad sõltuvalt kasutaja poolt juhitava süsteemi tüübist.

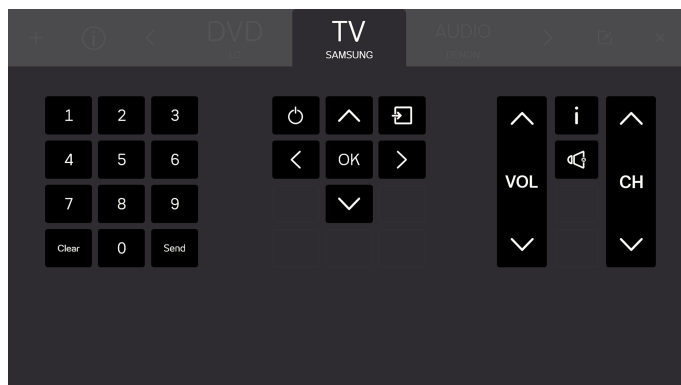

Joonis 5.5 Aktiivsed nupud

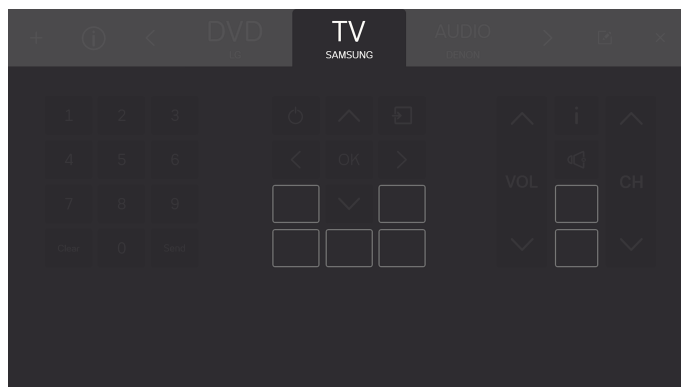

Joonis 5.6 Mitteaktiivsed nupud

5.2 Tobii Dynavox Virtual Remote kasutamine


Tobii Dynavox Virtual Remote võimaldab kasutajal seadme kaudu juhtida telerit, DVD- või plaadimängijat.



Kõik Virtual Remote funktsioonid on puutetundlikud ja hiirega juhitavad, mis võimaldab hooldajal või abilisel vajadusel kasutajat aidata.

5.2.1 Esmakordsel käivitamisel

Lühike sissejuhatus tutvustab kasutajale Virtual Remote tarkvara ülesehitust. Lihtsalt järgige ekraanil toodavaid juhiseid.

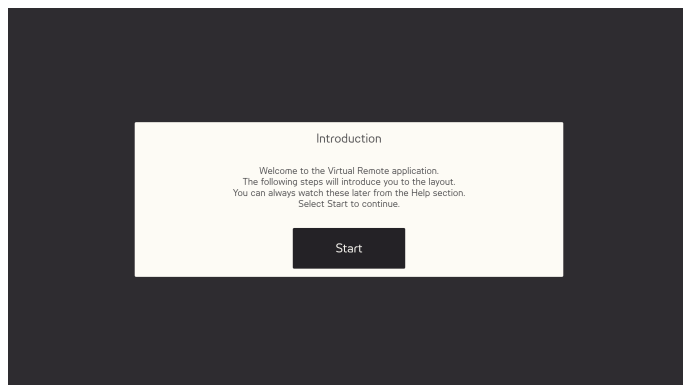

Joonis 5.7 Virtual Remote sissejuhatusaken.

5.2.2 Aktiivse puldi muutmine

Aktiivse puldi muutmiseks:

- Valige aktiivsest puldist vasakul või paremal paiknev nimi.
- või kasutage nuppe  ja , et sirvida saadaolevaid pulte.



Aktiivne pult on alati see, mis paikneb menüüs Virtual Remote keskel.

5.2.3 Puldi nuppude kasutamine

Valige nupp, mida soovite kasutada signaali saatmiseks seadmele. Helinupud on üldjuhul häälestatud saatma järjepidevat signaali kuni nupp on valitud. Täpsema teabe leiate lk 5.2.5.3.1 *Signaali pikkus, lehekülg 53*.

Kui soovite sisestada arvu, mis on suurem kui 9 (mitmekohaline), siis järgige alltoodud protseduuri.

Üheksast suuremate arvude kasutamine

1. Valige kõik edastatavad arvud saatmise järjekorras.
Kõik valitud numbrid on nähtaval puldi numbrite sektsiooni all paiknevas valges kastis.



2. Valige nupp **Saada**, et saata seadmele signaale või **Puhasta**, et kustutada kõik valitud numbrid.

5.2.4 Lisa pult




Uue puldi lisamiseks on kaks (2) võimalust.

5.2.4.1 Lisa eelprogrammeeritud pult


Uue eelprogrammeeritud puldi lisamiseks toimige järgmiselt:

Eelprogrammeeritud puldi lisamine

1. Valige menüüst .
2. Valige eelprogrammeeritud nupp

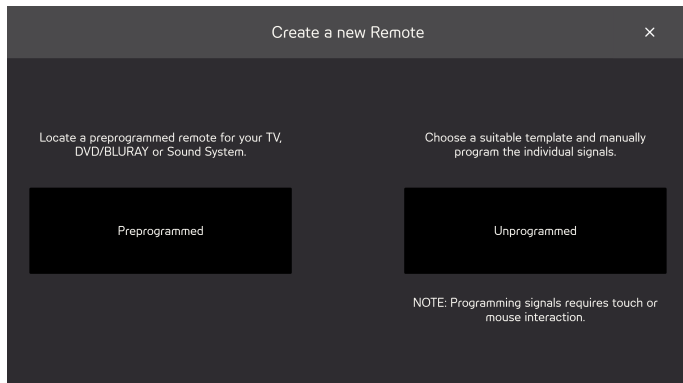


3. Valige eelprogrammeeritud puldi tüüp.
 - TV
 - DVD/BLURAY
 - AUDIO

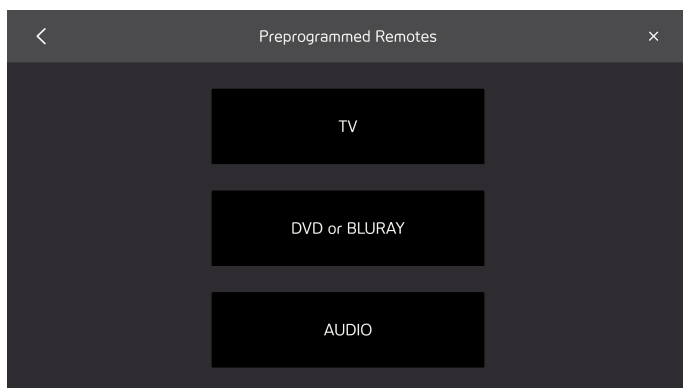


4. Valige nimekirjast kaubamärk



Kui te ei leia kaubamärki, siis valige **Other** (täpsem teave 5.2.4.1.1 *Muud puldid, lehekülg 45*)

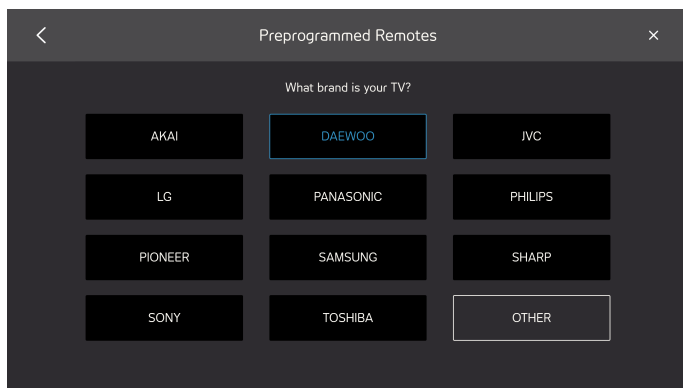


5. Kaubamärgi valimisel kuvatakse hüpikaken saadaolevate eelprogrammeeritud pultide arvu puudutava teabega.

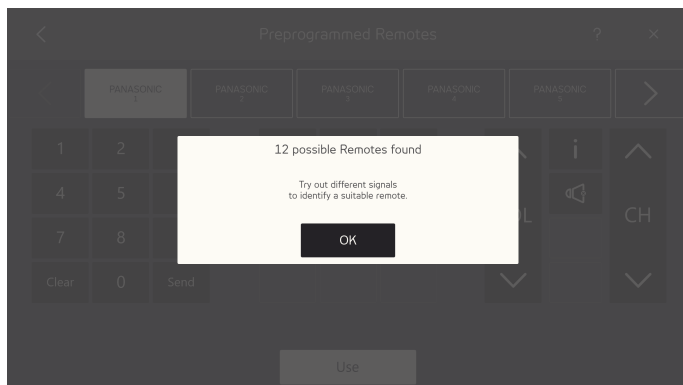

Valige nupp **OK**.

6. Valige pult.

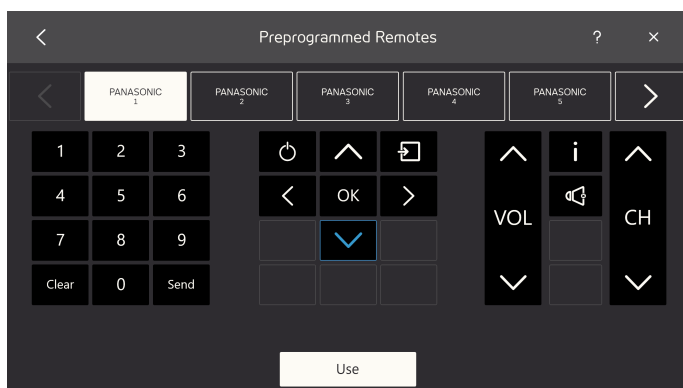


7. Sobiva puldi tuvastamiseks katsetage valitud puldil erinevaid signaale.
8. Korrake samme 6 ja 7 kuni olete leidnud sobivaima puldi.




Kasutage nuppe < ja > , et sirvida saadaolevaid pulte.

9. Valige sobivaim pult.
10. Valige nupp **Kasuta**.

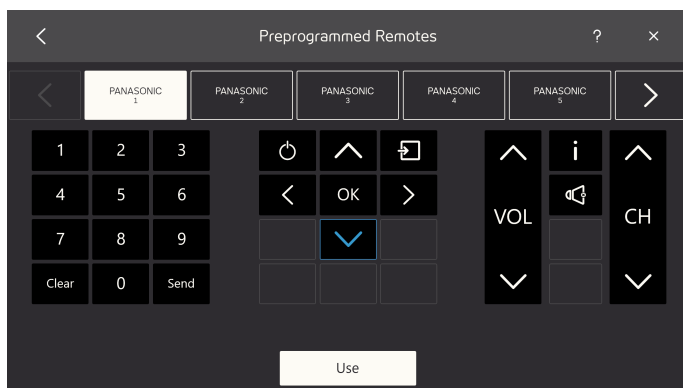

11. Valitud pult kopeeritakse saadaolevatele pultidele.

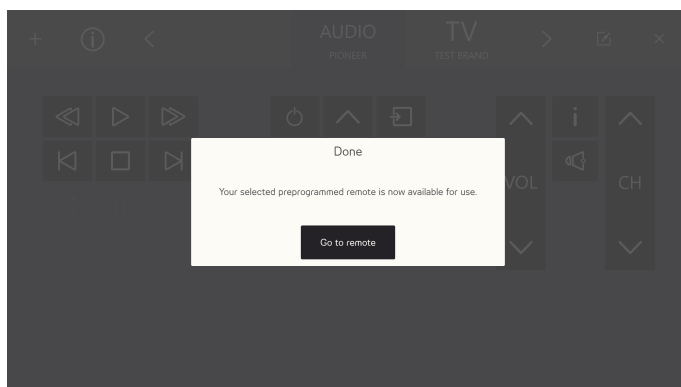


Lõpetamiseks valige nupp **Go to Remote**.

5.2.4.1.1 Muud puldid


Täiendavate pultide lisamiseks toimige järgmiselt:

Täiendavate puldi lisamine


1. Järgige samme 1 kuni 3: *Eelprogrammeeritud puldi lisamine, lehekülg 43.*
2. Valige nupp **Täiendavad**.
3. Sisestage tekstikasti kaubamärk.

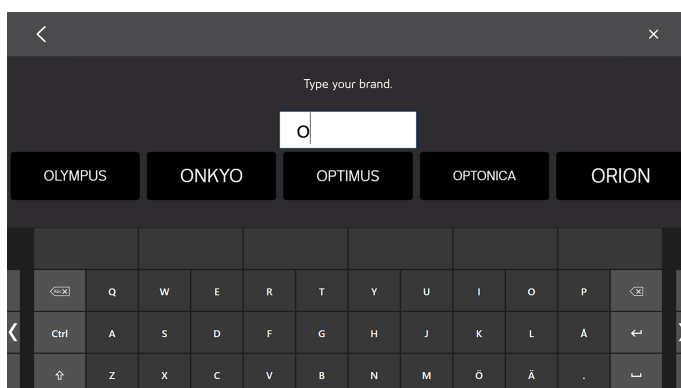


Otsingutulemuste piiramiseks sisestage veel tähemärke.

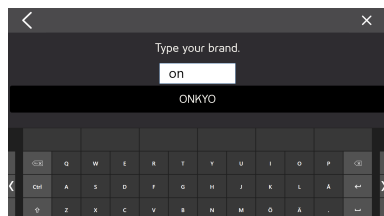

4. Valige kaubamärk.

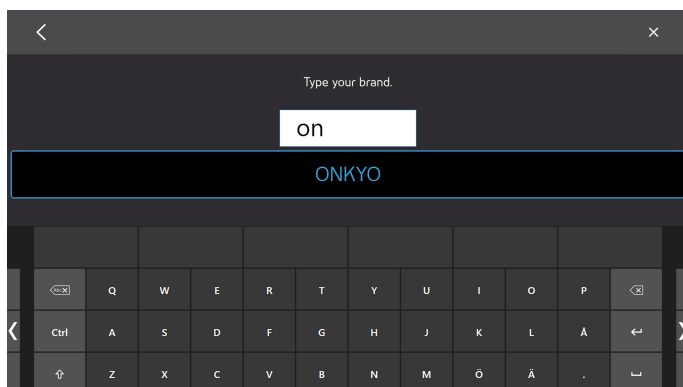


5. Kaubamärgi valimisel kuvatakse hüpikaken saadaolevate eelprogrammeeritud pultide arvu puudutava teabega.

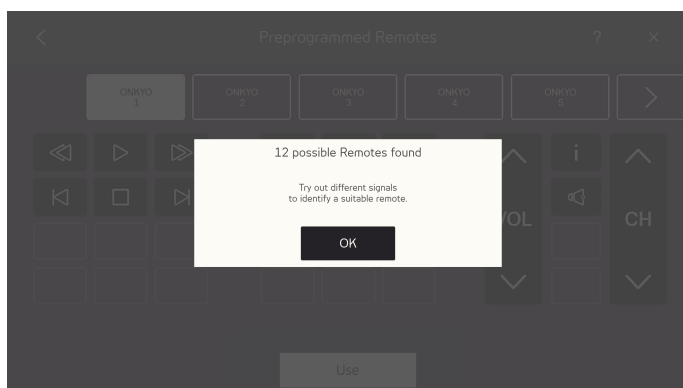

Valige nupp **OK**.

6. Valige pult.

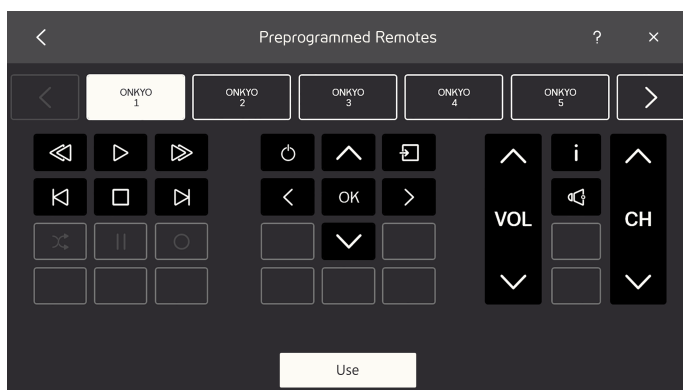


7. Sobiva puldi tuvastamiseks katsetage valitud puldil erinevaid signaale.
8. Korrake samme 6 ja 7 kuni olete leidnud parima võimaliku puldi.




Kasutage nuppe  ja , et sirvida saadaolevaid pulte.

9. Valige sobivaim pult.

10. Valige nupp **Kasuta**.

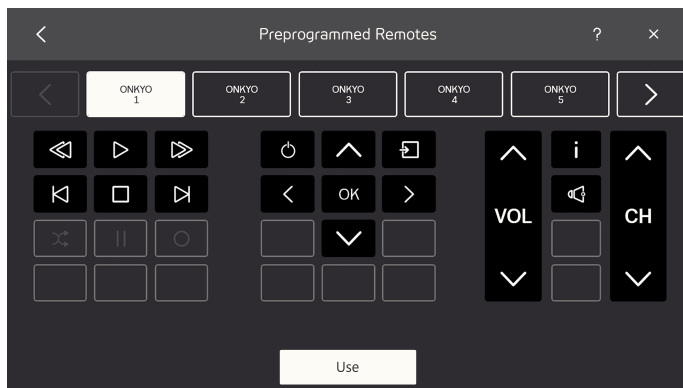

11. Valitud pult kopeeritakse saadaolevatele pultidele.

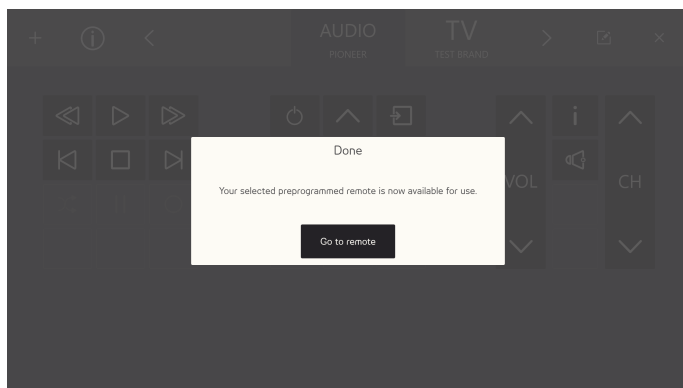


Lõpetamiseks valige nupp **Liigu puldile**.

5.2.4.2 Lisa programmeerimata pult

Uue programmeerimata puldi lisamiseks toimige järgmiselt:


Programmeerimata puldi lisamine

1. Valige menüüst **+**.
2. Valige programmeerimata nupp

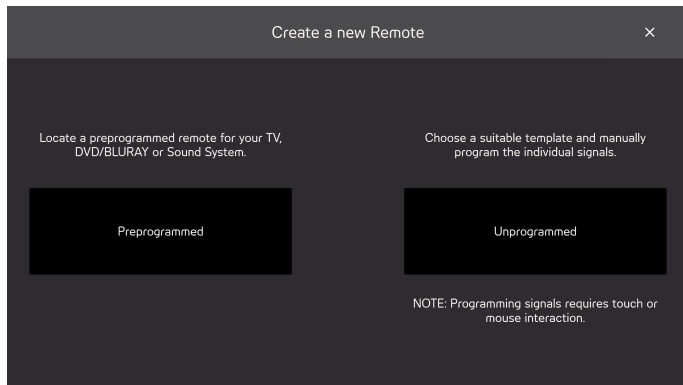


3. Valige programmeerimata pult
 - TV
 - AUDIO

- KAABEL-TV
- DVD või BLURAY
- TÜHI MALL

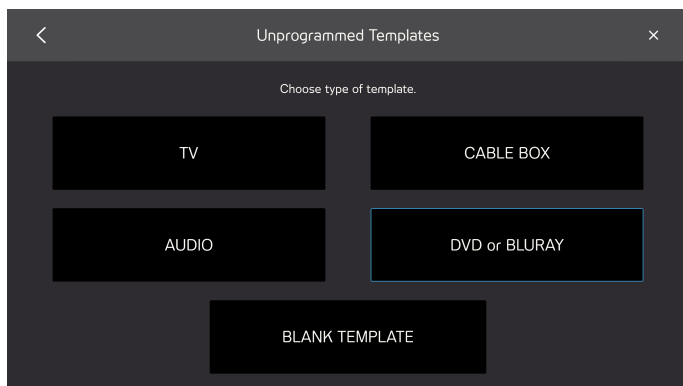


4. Valige programmeeritav nupp.

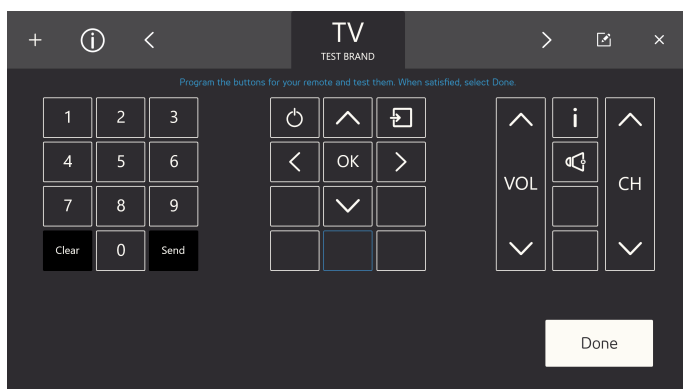


Saadaolevad ikoonid erinevad sõltuvalt sammus 3 valitud kaugjuhtimisseadme tüübist.

5. Valige programmeeritav nupp.

6. Suunake pult Tobii Dynavox IR-vastuvõtjale ja vajutage puldil meelepärast nuppu, mille soovite Virtual Remote'ile ära õpetada.

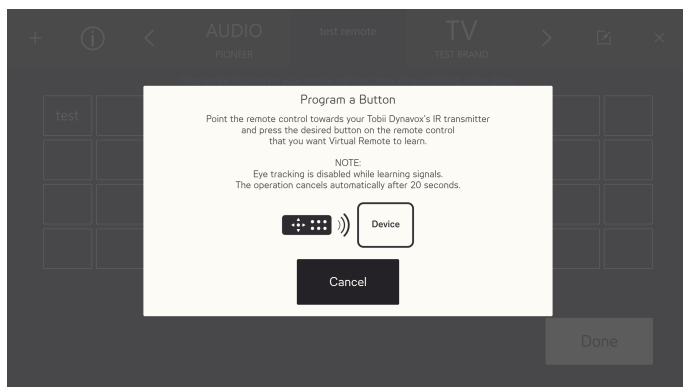

7. Kui signaal on Virtual Remote'is salvestatud, siis kuvatakse hüpikaken teatega **Valmis**.

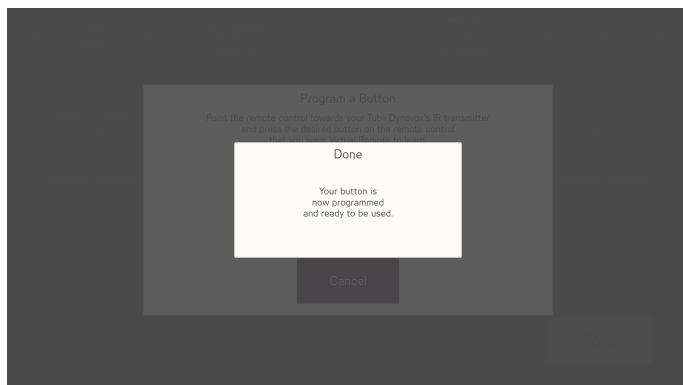

Hüpikaken suletakse automaatselt mõne sekundi möödudes.

8. Korrake samme 5–7, kuni olete programmeerinud kõik puldi vajalikud nupud.



Kaugjuhtimispuldi nuppude muutmiseks või kustutamiseks peate programmeerimise lõpetama ja liikuma redigeerimisrežiimi. Täpsema teabe redigeerimisrežiimi kohta leiate lk 5.2.5 Redigeerimisrežiim, lehekülg 49.

9. Lõpetamiseks valige **Done**.




5.2.5 Redigeerimisrežiim



Redigeerimisrežiimil olles saate muuta olemasolevaid pulte. Veenduge, et pult, mida soovite muuta on aktiivne pult. Redigeerimisrežiimile lülitumiseks toimige järgmiselt:

Redigeerimisrežiimile lülitumine

1. Valige nupp  (redigeerimisrežiim).

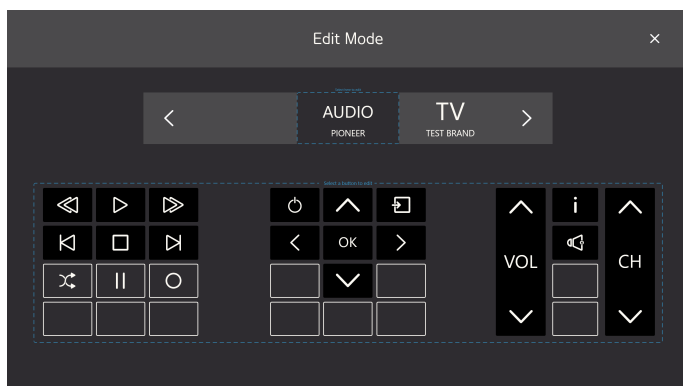


2. Valige, millist puldi osa te soovite muuta. Teha saab järgmisi muudatusi:
 - muuta puldi nime (vt 5.2.5.1 *Puldi nime muutmine, lehekülg 50*);
 - puldi kustutada (vt 5.2.5.2 *Puldi kustutamine, lehekülg 51*);
 - muuta olemasolevat aktiivset nuppu (vt 5.2.5.3 *Olemasoleva aktiivse nupu muutmine*);
 - muuta olemasolevat programmeerimata nuppu (vt 5.2.5.4 *Olemasoleva programmeerimata nupu muutmine, lehekülg 55*);
 - lisada tühjale väljale uue nupu (vt 5.2.5.5 *Lisage tühjale väljale uus nupp, lehekülg 57*).

5.2.5.1 Puldi nime muutmine

Puldi nime muutmiseks toimige järgmiselt:


Puldi nime muutmine

1. Valige nupp  (redigeerimisrežiim).

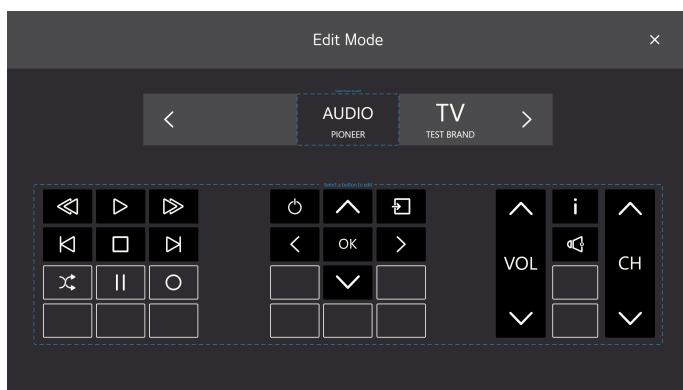

2. Valige puldi nime ümbritsev kast nimega "Valige muutmiseks".


3. Valige nupp **Nimeta ümber**.

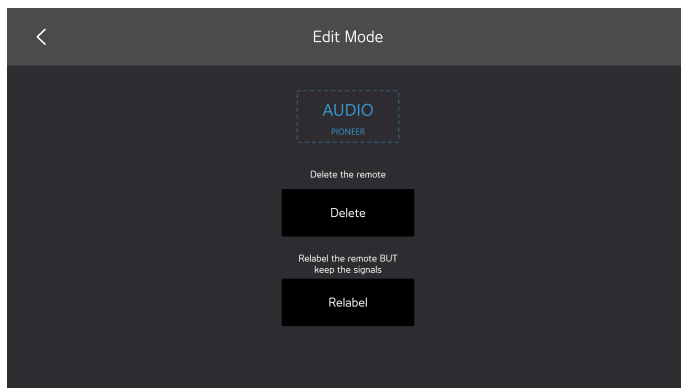

4. Sisestage uus silt.



Veenduge, et kasutate lühikest nime.

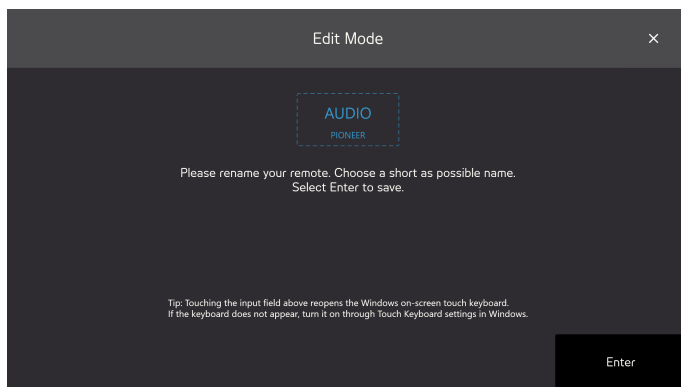

5. Ümbernimetamise lõpetamiseks klaviatuuril valige klahv **Enter**.


6. Redigeerimisrežiimist väljumiseks valige ikoon .

5.2.5.2 Puldi kustutamine


Pultide kustutamiseks toimige järgmiselt:

Puldi kustutamine


1. Valige nupp  (redigeerimisrežiim).

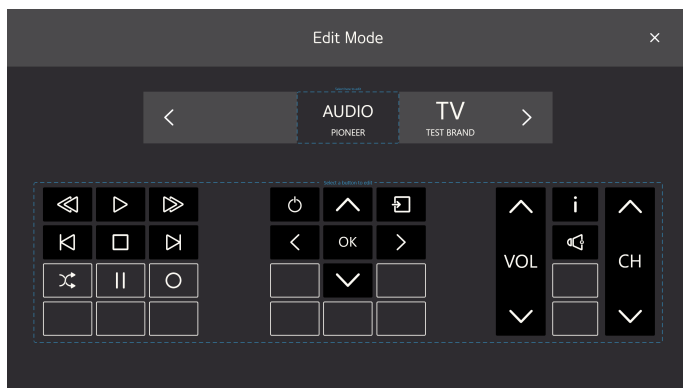

2. Valige puldi nime ümbritsev kast nimega "Valige muutmiseks".
3. Valige nupp **Kustuta**.

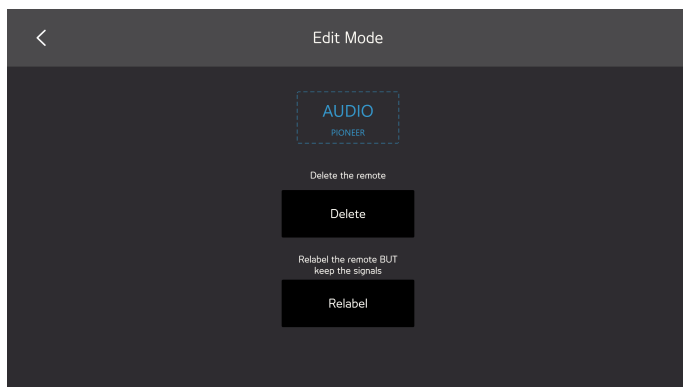

4. Valige:
 - **Jah**, et kustutada
 - **Ei**, et kustutamine tühistada.

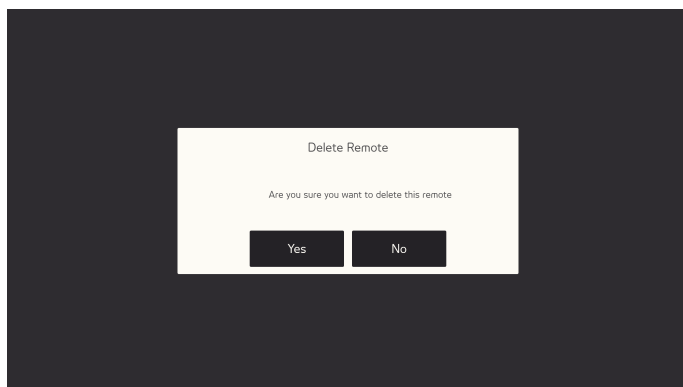


5. Redigeerimisrežiimist väljumiseks valige ikoon .

5.2.5.3 Olemasoleva aktiivse nupu muutmine


Olemasoleva aktiivse nupu muutmiseks toimige järgmiselt:

Olemasoleva aktiivse nupu muutmine

1. Valige nupp  (redigeerimisrežiim).

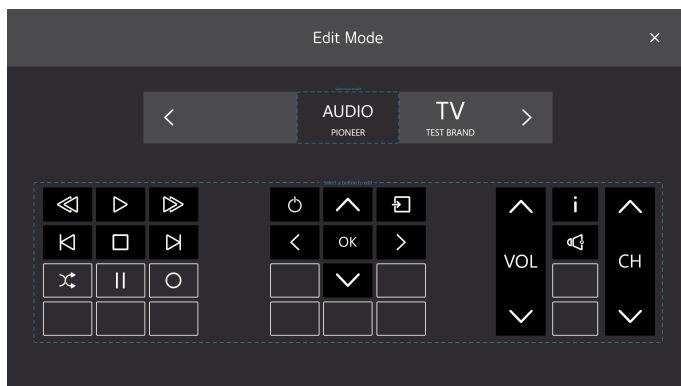

2. Valige kaugjuhtimispuldi nuppe ümbritsevast kastist "Vali muudetav nupp" mõni musta taustaga ja ikooni või tekstiga nupp, näiteks .
3. Valige üks järgmistest toimingutest:
 - Signaali pikkus, vt 5.2.5.3.1 *Signaali pikkus*.
 - Uus signaal, vt 5.2.5.3.2 *Uus signaal, lehekülg 54*
 - Muuda tekst, vt 5.2.5.3.3 *Muuda teksti, lehekülg 54*
 - Muuda ikoon, vt 5.2.5.3.4 *Muuda ikooni, lehekülg 55*
 - Vabasta nupp kustutab kogu selle nupuga seotud teabe.

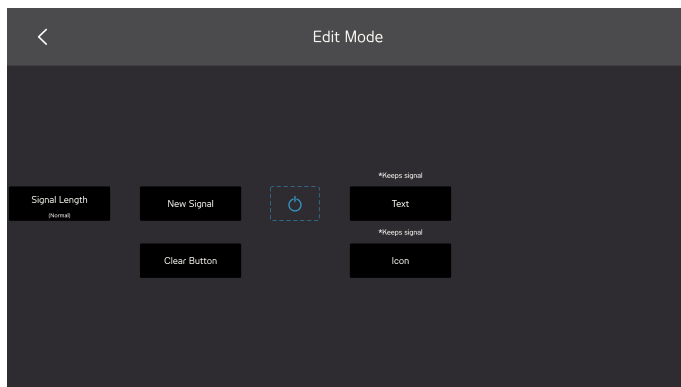

4. Redigeerimisrežiimist väljumiseks valige ikoon .

5.2.5.3.1 Signaali pikkus


Et vastuvõttev seade mõistaks Virtual Remote poolt saadetud signaali, siis võib juhtuda, et peate signaali pikkust muutma. Signaali pikkust tuleb seadistada ka juhul, kui soovite, et nupp edastaks signaali nii kaua, kui hoiate seda valituna.

Valige üks (1) järgmistest võimalustest:

- Tavaline – saadab infrapunasisignaali välja lühikese sööstuna.
- Pikk – saadab infrapunasisignaali välja ühe (1) sekundi vältel.
- Eriti pikk – saadab infrapunasisignaali välja kahe (2) sekundi vältel.
- Järjepidev – saadab järjepidevat signaali kuni nupp on valitud.



See on näiteks helinupu tavapärase seadistus

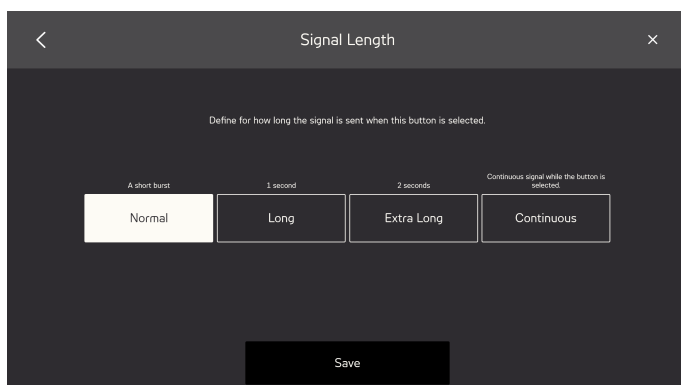


5.2.5.3.2 Uus signaal


Nupule uue signaali programmeerimiseks toimige järgmiselt:

Uue signaali lisamine

1. Suunake pult Tobii Dynavox IR-vastuvõtjale ja vajutage puldil meelepärast nuppu, mille soovite Virtual Remote'ile ära õpetada.

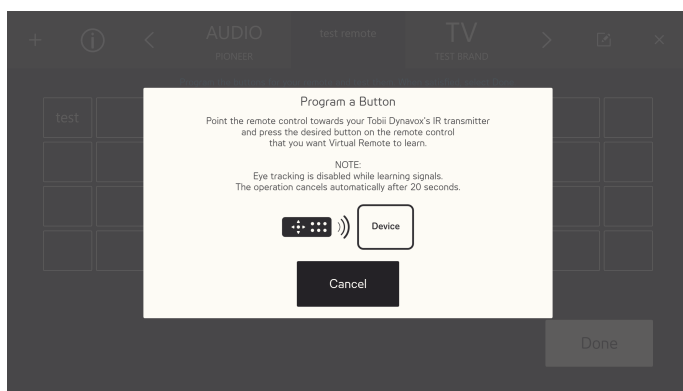

2. Kui signaal on Virtual Remote'is salvestatud, siis kuvatakse hüpikaken teatega **Valmis**.

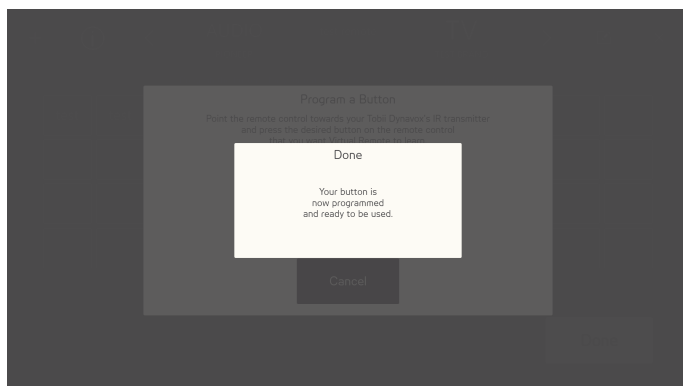


Hüpikaken suletakse automaatselt mõne sekundi möödudes.

5.2.5.3.3 Muuda teksti

Teksti muutmiseks toimige järgmiselt:

Teksti muutmine

1. Sisestage tekst, mida peaks nupul kujutama.

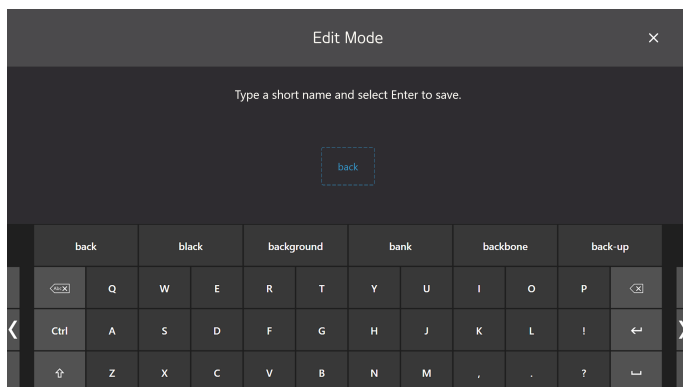


2. Valige klaviatuuril klahv Enter, et sisestatud tekst kinnitada.

5.2.5.3.4 Muuda ikooni

Ikooni muutmiseks toimige järgmiselt:

1. Valige saadaolev ikoon.

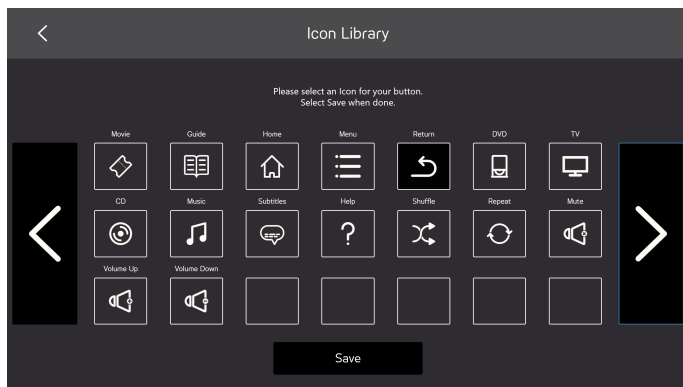


2. Ikooni kinnitamiseks valige nupp **Salvesta**.

5.2.5.4 Olemasoleva programmeerimata nupu muutmine


Olemasoleva programmeerimata nupu muutmiseks toimige järgmiselt:

Olemasoleva programmeerimata nupu muutmine

1. Valige nupp  (redigeerimisrežiim).

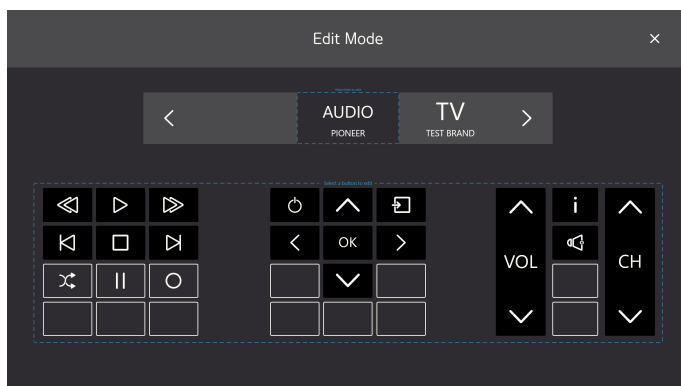

2. Valige kaugjuhtimispuldi nuppe ümbritsevast kastist "Vali muudetav nupp" mõni halli tausta ning ikooni või tekstiga nupp, näiteks .
3. Valige üks järgmistest toimingutest:
 - Programmeeri, vt 5.2.5.4.1 Programmeerimine, lehekülg 56
 - Muuda tekst, vt 5.2.5.3.3 Muuda teksti, lehekülg 54
 - Muuda ikoon, vt 5.2.5.3.4 Muuda ikooni, lehekülg 55
 - Vabasta nupp kustutab kogu selle nupuga seotud teabe.

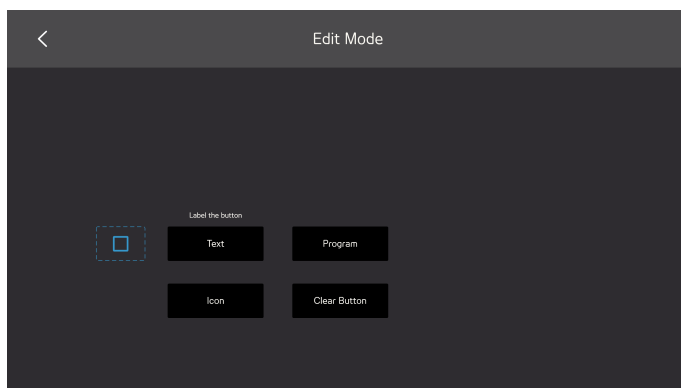


4. Redigeerimisrežiimist väljumiseks valige ikoon .

5.2.5.4.1 Programmeerimine


Nupule signaali programmeerimiseks toimige järgmiselt:

Programmeerimine

1. Suunake pult Tobii Dynavox IR-vastuvõtjale ja vajutage puldil meelepärast nuppu, mille soovite Virtual Remote'ile ära õpetada.

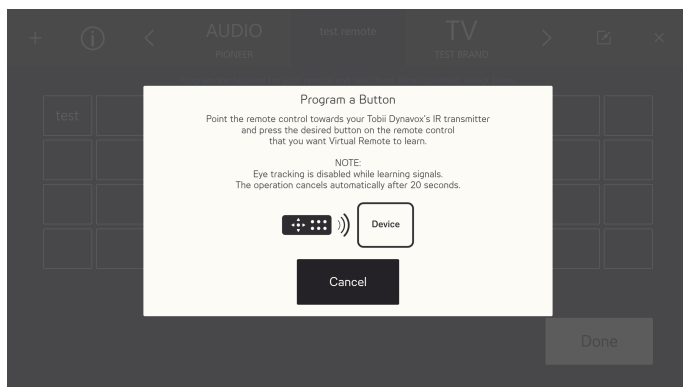

2. Kui signaal on Virtual Remote'is salvestatud, siis kuvatakse hüpikaken teatega **Valmis**.

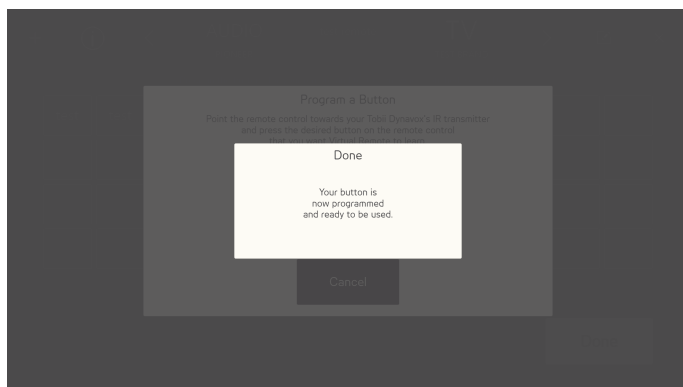


Hüpikaken suletakse automaatselt mõne sekundi möödudes.

5.2.5.5 Lisage tühjale väljale uus nupp


Uue nupu lisamiseks tühjale väljale toimige järgmiselt:

Tühjale väljale uue nupu lisamine

1. Valige nupp  (redigeerimisrežiim).

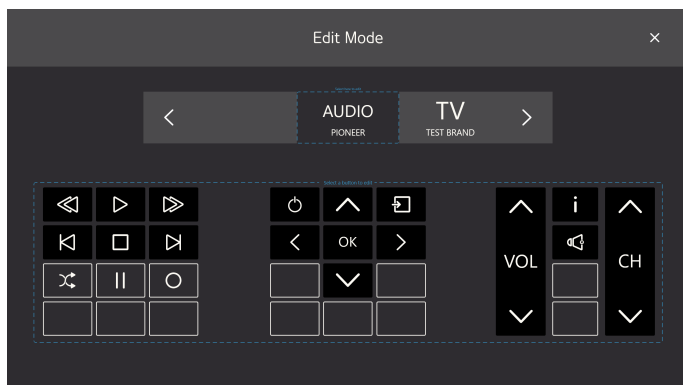

2. Valige kaugjuhtimispuldi nuppe ümbritsevast kastist "Vali muudetav nupp" mõni halli taustaga tühi nupp, näiteks .
3. Valige üks järgmistest toimingutest:
 - Muuda tekst, vt 5.2.5.3.3 *Muuda teksti, lehekülg 54*
 - Muuda ikoon, vt 5.2.5.3.4 *Muuda ikooni, lehekülg 55*

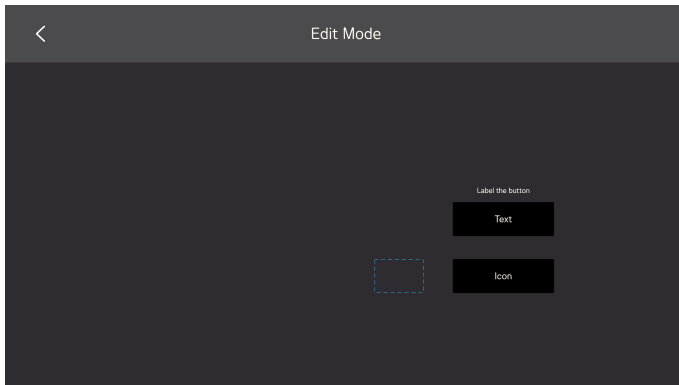


4. Redigeerimisrežiimist väljumiseks valige ikoon .

5.2.6 Teave




Teabe lehelt leiate kõik nii riistvara kui erinevate tarkvarakomponentide versioone puudutava informatsiooni.

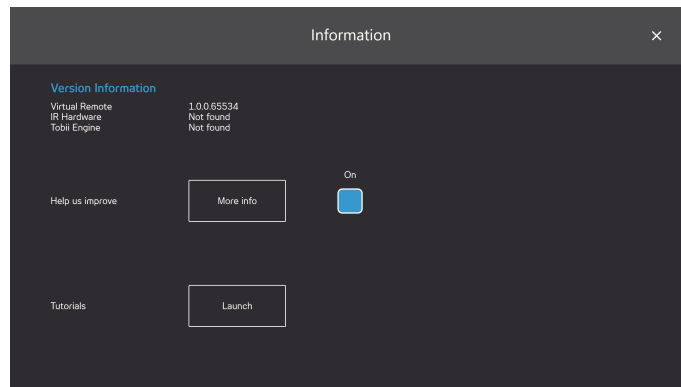

Aidake meil teenuse kvaliteeti tõsta: Kui soovite aidata ettevõttel Tobii Dynavox täiendada oma tarkvara, siis valige Sees/

väljas märkeruudu seadeks **Sees**. Valige nupp Täpsem teave, et avada lehekülg, mis sisaldab üksikasjalikumat informatsiooni. Täpsema teabe leiate lk *Joonis 5.8 Andmete kogumine, lehekülg 59*.

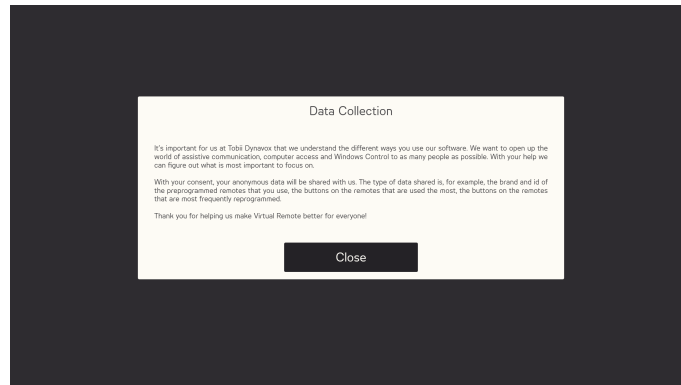

Joonis 5.8 Andmete kogumine

Juhendad: Virtual Remote juhendi saate käivitada ka valides nupu **Käivita**.

Autoriõigus ©Tobii AB (publ). Illustratsioonid ja tehnilised andmed ei pruugi vastata konkreetset kohalikul turul saadaolevatele toodetele ja teenustele. Tehnilised andmed võivad muutuda ette teatamata. Kõik kaubamärgid kuuluvad nende omanikele.

Teie Tobii Dynavoxi seadme tugi

Saage abi veebi teel

Tutvuge oma Tobii Dynavoxi seadme tootepõhise klienditoe leheküljega. See sisaldab ajakohast teavet probleemide kohta ning tootega seotud nõuandeid ja nippe. Meie klienditoe lehed leiате aadressidelt: www.TobiiDynavox.com/support-training

Võtke ühendust kohaliku müügiesindaja või edasimüüjaga

Kui teil tekib toote kasutamisel küsimusi või probleeme, siis võtke abi saamiseks ühendust Tobii Dynavoxi müügiesindaja või volitatud edasimüüjaga. Nad on tuttavad teie personaalse seadistusega ja saavad teile pakkuda nõu ja tootega seotud koolitusi. Kontaktandmed leiате aadressilt www.TobiiDynavox.com/contact