

Tobii Dynavox gluggastjórnntæki Notandahandbók

P.m.t. Virtual Remote 



tobiidynavox

Notandahandbók Tobii Dynavox gluggastjórnæki

Útgáfa 1.2

06/2018

Allur réttur áskilinn.

Copyright © Tobii AB (publ)

Ekki má afrita nokkurn hluta af þessu skjali, geyma það í endurheimtakerfi, eða senda í nokkru formi, með nokkrum leiðum (rafrænum, ljósrítun, upptöku eða á annan hátt) án þess að vera með skriflegt leyfi frá útgefanda.

Höfundarréttarvernd nær yfir öll form og efni höfundarréttarvarinna efna og upplýsinga sem gildandi lög leyfa eða eiga eftir að leyfa, þ.m.t. án takmarka, efni sem kemur frá hugbúnaðinum sem sést á skjánum svo sem skjámyndir, valmyndir o.s.frv.

Upplýsingarnar í þessu skjali eru í eigu Tobii Dynavox. Hverskonar endurgerð að hluta eða í heilu lagi án fyrra skriflegs samþykkis Tobii Dynavox er óleyfileg.

Vörur sem er vísað til í þessu skjali geta verið annað hvort vörumerki og/eða skráð vörumerki viðkomandi eigenda. Útgefandi og höfundur gera ekki tilkall til þessara vörumerkja.

Þó að allrar varfærni hafi verið gætt við undirbúning þessa skjals, taka útgefandi og höfundur enga ábyrgð á villum eða yfirsjónum, eða á tjóni sem verður til af notkun upplýsinga í þessu skjali eða af notkun forrita eða forritunarkóða sem gæti fylgt með því. Útgefandi og höfundur bera enga skaðabótaskyldu vegna tapaðs hagnaðar, eða nokkurs annars viðskiptalegs taps sem orsakast af eða er talið hafa orsakast beint eða óbeint af þessu skjali.

Efni getur breyst án fyrirvara.

Athugaðu vefsíðu Tobii Dynavox

www.TobiiDynavox.com fyrir dagréttu útgáfur af þessu skjali.

Tengiliðaupplýsingar:

Tobii Dynavox	Tobii Dynavox LLC
Karlsrovägen 2D	2100 Wharton Street Suite 400
182 53 Danderyd	Pittsburgh, PA 15203
Sweden	USA
+46 8 663 69 90	+1-800-344-1778

Efnisyfirlit

1	Um Tobii Dynavox Windows Control	5
1.1	Ætluð notkun	5
1.2	Kerfiskröfur	5
2	Uppsetning, ræsing og meðferð hugbúnaðarleyfis	6
2.1	Uppsetning Tobii Dynavox Windows Control	6
2.2	Meðferð hugbúnaðarleyfis	6
2.2.1	Virkjun leyfis	6
2.2.1.1	Virkjun á netinu	6
2.2.1.2	Ónettengd virkjun	7
2.2.2	Afvirkjun leyfis	8
2.3	Ræstu fyrst	9
3	Notkun Tobii Dynavox Windows Control	10
3.1	Windows Control Stjórtækið	10
3.2	Staða rakningar	11
3.3	Windows Control Verkefnaslá	12
3.3.1	Stillingar fyrir Windows Control verkefnaslá	12
3.4	Venjuleg verkefni	13
3.4.1	Hegðun venjulegra verkefna í mismunandi stillingum	14
3.5	Festiverkefni	15
3.5.1	Hegðun festiverkefna í mismunandi stillingum	15
3.6	Öruggur smellur	16
3.7	Flýtleiðir	17
3.8	Valaðferð - augntillit eða rofi	19
3.8.1	Virkja sjálfvalið með augntilliti og rofa	19
3.8.2	Verkefni virkjað með lyklaborðs hnappi í stað rofa	19
3.9	Augntillits lyklaborð	20
3.9.1	Lyklaborðs verkefnaslá	21
3.9.2	Verkefnahnappar fyrir lyklaborðs verkefnaslá	22
3.9.3	Orðaspá	22
3.10	Windows Control ásamt staðbundnum forritum	22
3.11	Eye Detection Indicator	23
4	Windows Control Stillingar	24
4.1	Augnstýring	25
4.1.1	Finstillingar flipi	25
4.1.1.1	Skoða notandauppsetningar:	25
4.1.1.2	Búa til nýja notandauppsetningu	26
4.1.1.3	Niðurstöður finstillingar	26
4.1.1.4	Prófa finstillingu	27
4.1.1.5	Endurfinstilling	27
4.1.1.6	Gerð finstillingar	27
4.1.2	Ítarlegt flipinn	29
4.1.2.1	Setja upp skjá	29
4.2	Almennar stillingar	30
4.2.1	Almennur flipi	30
4.2.2	Um flipinn	30
4.2.2.1	Lykill hugbúnaðarleyfis	31

4.3	Hjálp og notkun	31
4.3.1	Hjálparflipinn	31
4.3.2	Notkunarflipinn.....	32
4.4	Virkjun og svörun	32
4.4.1	Virkjunarflipi.....	32
4.4.1.1	Augntillits stillingar.....	32
4.4.1.2	Stillingar augntillits og rofa.....	33
4.4.2	Svörunarflipinn.....	34
4.5	verkefnaslánna	35
4.5.1	Verkefnaslán	35
4.5.1.1	Verkefni.....	35
4.5.1.2	hámarka vinstri smell	35
4.5.1.3	Stærð verkefnaslár.....	36
4.5.1.4	Fela sjálfkrafa	36
4.5.2	Valflipinn	36
4.5.2.1	Aðalval.....	36
4.5.2.2	Annað val	36
4.5.2.3	Þriðja val	37
4.5.3	Þysjunar flipinn.....	37
4.6	Lyklaborð	37
5	Virtual Remote.....	39
5.1	Virtual Remote Yfirlit	39
5.1.1	Virtual Remote Valmyndin.....	39
5.1.2	Virk fjarstýring	40
5.1.3	Hnapparnir	40
5.2	Notkun Tobii Dynavox Virtual Remote	41
5.2.1	Fyrsta ræsing.....	42
5.2.2	Breyta virkri fjarstýringu	42
5.2.3	Hnappar á fjarstýringu notaðir	42
5.2.4	Bæta við fjarstýringu	42
5.2.4.1	Bættu við fyrirframforritaðri fjarstýringu	42
5.2.4.2	Bæta við óforritaðri fjarstýringu	47
5.2.5	Breytingarstilling	49
5.2.5.1	Breyta nafni fjarstýringar	50
5.2.5.2	Eyða fjarstýringu.....	51
5.2.5.3	Gera breytingar á fyrirbyggjandi virkum hnappi	52
5.2.5.4	Gera breytingar á fyrirbyggjandi óforrituðum hnappi	55
5.2.5.5	Bæta við nýjum hnappi á tómt svæði	57
5.2.6	Upplýsingar	58

1 Um Tobii Dynavox Windows Control

1.1 Ætluð notkun

Stjórnaðu tölvunni þinni með augunum eða augum og rofa. Þú getur líkt eftir hverskonar mýsa-aðgerðum, renni-aðgerðum og slegið inn texta með verðlaunahugbúnaðinum okkar. Við höfum einnig bætt við snjall-flýtleiðum til að gera það enn auðveldara að fá aðgang að öllum hlutum Windows!

1.2 Kerfiskröfur

Hlutar	Kröfur
Tölva og örgjörvi	2.0 gígarið (GHz) eða hraðari, tvíkjarna örgjörvi (að lágmarki).
Minni (RAM)	4 gígabæti (GB) RAM (að lágmarki).
Harður diskur	450 megabæti (MB) tiltæk.
USB	USB 2.0
Stjórnkerfi	64-bita útgáfa af: • Windows 7 • Windows 8.1 • Windows 10
.NET útgáfa	4.5
Augnstýring	Hverskonar augnstýringu frá Tobii Dynavox eða Tobii Tech sem styður Tobii augnrakningar kjarna hugbúnað.
Frekari kröfur	Nettenging er nauðsynleg til að virkja hugbúnaðarleyfið.
Tobii augnrakningar kjarna hugbúnaður.	Útgáfa 2.8 eða nýrri.
IR fjarstýring	Hverskonar tæki sem er útbúið HBR IR kubbi eins og: Tobii Dynavox EyeR, Indi, I-Series I-110, eða EyeMobile Plus.

2 Uppsetning, ræsing og meðferð hugbúnaðarleyfis

2.1 Uppsetning Tobii Dynavox Windows Control



Ef Tobii Gaze Interaction hugbúnaður er uppsettur, þarf að taka hann út fyrir uppsetningu Windows Control.

Windows Control má ná í frá www.TobiiDynavox.com.

Uppsetningarleiðbeiningaforritið mun setja upp eftirfarandi forrit:

- Tobii Dynavox Windows Control
- Tobii Dynavox Virtual Remote

Til að setja upp Windows Control, fylgirðu einfaldlega leiðbeiningunum á skjánum.

2.2 Meðferð hugbúnaðarleyfis


2.2.1 Virkjun leyfis



Windows Control getur keyrt á allt að þremur (3) tölvum/tækjum á sama tíma með sama leyfi. Til að geta notað Windows Control á meira en þremur (3) tölvum/tækjum þarf fyrst að afvirkja Windows Control á einni (1) annarri tölvu/tæki.

Þegar þú kaupir Windows Control færðu Licence Activation Key fyrir hugbúnaðinn í staðfesting á pöntun tölvupóstinum.

Þegar Windows Control er keyrt í fyrsta skipti mun **License Manager** ræsast.

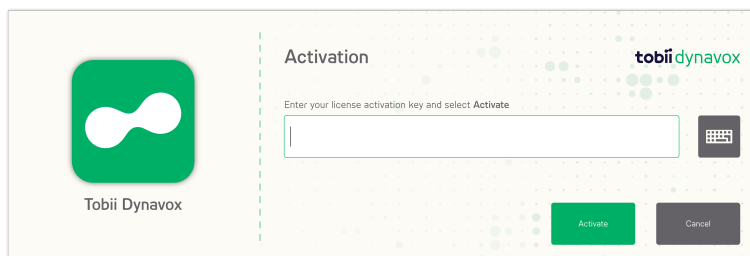

Leyfisgluggi sýnir hugbúnaðartákn fyrir leyfið sem um ræðir.


Þinn **License Activation Key** má finna í staðfesting á pöntun tölvupóstinum.

2.2.1.1 Virkjun á netinu

Fyrir tölvu/tæki sem er nettengt.

1. Passaðu að tölvu/tækið sé nettengt.
2. Settu inn **License activation key**.

3. Veldu **virkja** hnappinn.

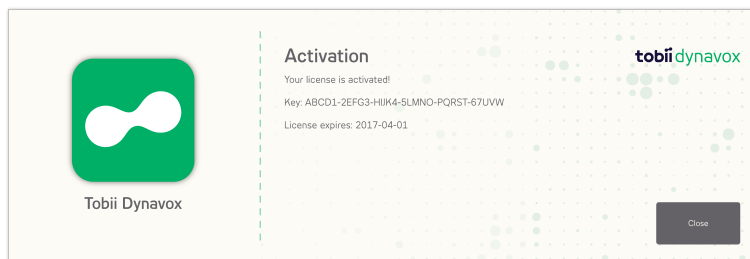


 Leyfisgluggi sýnir hugbúnaðartákn fyrir leyfið sem um ræðir.

4. Veldu **loka** hnappinn.


2.2.1.2 Ónettengd virkjun


Fyrir tölvu/tæki sem er ekki nettengt.


1. Settu inn **License activation key**.
2. Veldu **virkja** hnappinn.

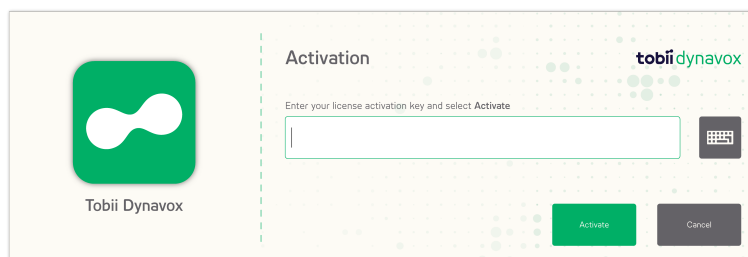

3. Veldu  (upplýsingar) táknid.

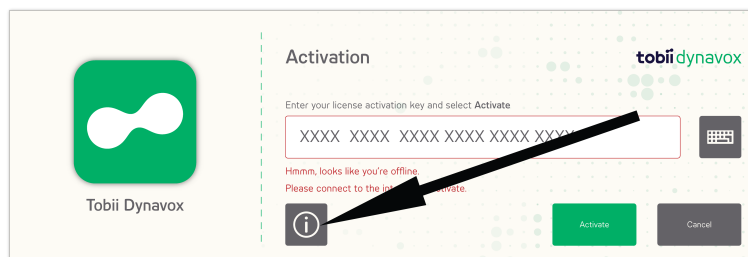

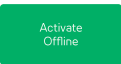
4. Veldu  (virkja ónettengt) hnappinn.

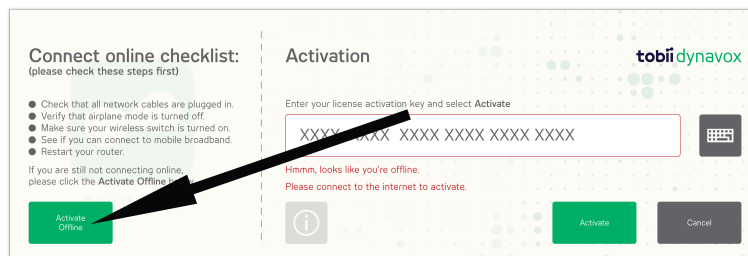


5. Gerðu eitt eftirfarandi:
 - Á nettengdu tæki, ferðu á: <https://www.tobiidynavox.com/activation-key/> og ferð eftir leiðbeiningunum.

- Hafðu samband við Tobii Dynavoxnotendapjónustu eða endursöluaðila á staðnum.


Þú þarft nafn tölvunnar sem sést í þessu svari:

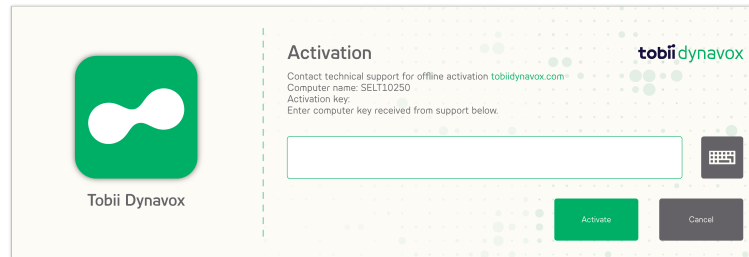

- Settu inn **virkjunarlykilinn** frá einum af möguleikunum hér að ofan.

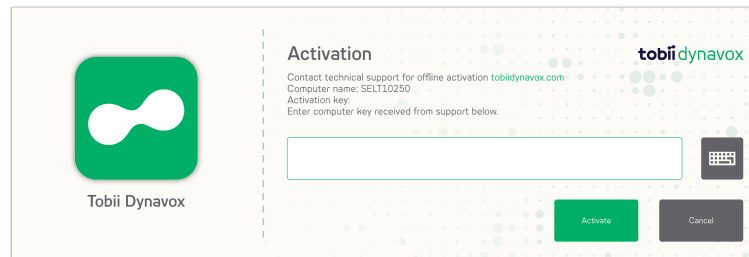

- Veldu **virkja** hnappinn.

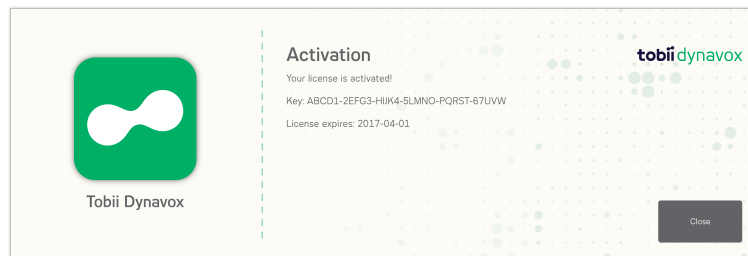

- Veldu **loka** hnappinn.

2.2.2 Afvirkjun leyfis

Til að afvirkja Windows Control, skaltu fylgja þessum skrefum.

1. Passaðu að tölvun/tækið sé nettengt.
2. Byrja Windows Control.
3. Veldu  (STILLINGAR) hnappinn.
4. Veldu  (Almennar stillingar) hnappinn.
5. Veldu **um** flipann.
6. Veldu **lykil hugbúnaðarleyfis** hnappinn.

7. Veldu **afvirkja** hnappinn.



Leyfisgluggi sýnir hugbúnaðartákn fyrir leyfið sem um ræðir.

8. Veldu:
- **Já**— til að afvirkja leyfið á þessu tæki.
 - **Nei**— til að hætta við.

2.3 Ræstu fyrst

Pegar Windows Control er ræst í fyrsta skipti mun stillingarleiðarvísir leiðbeina notanda í gegnum upphafs stillingar á Windows Control. Skrefin í leiðarvísinum eru:

- Uppsetning skjás. Fyrir frekari upplýsingar, sjá *4.1.2.1 Setja upp skjá, síða 29*.
- Búið til nýja notandauppsetningu. Fyrir frekari upplýsingar, sjá *4.1.1.2 Búa til nýja notandauppsetningu*.
- Prufustillingar, fyrir frekari upplýsingar, sjá *4.1.1.4 Prófa fínstillingu*

3 Notkun Tobii Dynavox Windows Control


Tobii Dynavox Windows Control gerir það mögulegt fyrir notandann að stjórna venjulegu Windows stýrikerfi með tveggja skrefa valaðferð sem dregur úr hættunni á óumbeðnum smellum. Kemur líka í veg fyrir að þú eltir músabendillinn með augunum í stað þess að stjórna honum (það er enginn fljótandi músabendill í Windows Control).

1. Fyrsta skrefið er að velja óskað verkefni úr festri verkefnastiku með því að horfa á það.
2. Annað skrefið er að horfa á óskaðan hluta skjásins (eða á tákn á skjánum) þar sem þú vilt framkvæma verkefnið. Sjálfvirkur þysjunareiginleiki er virkjaður, sem lýkur við val á táknu eða framkvæmd verkefnisins.



Allir eiginleikar í Windows Control eru snerti- og músar-virkjaðir sem gerir umönnunaraðila eða aðstoðarmanni auðveldara um vik að aðstoða ef þess þarf. Umönnunaraðilinn eða aðstoðarmaðurinn getur valið virkni/verkefni eða breytt stillingum fyrir notanda á auðveldari hátt.

3.1 Windows Control Stjórnþækið

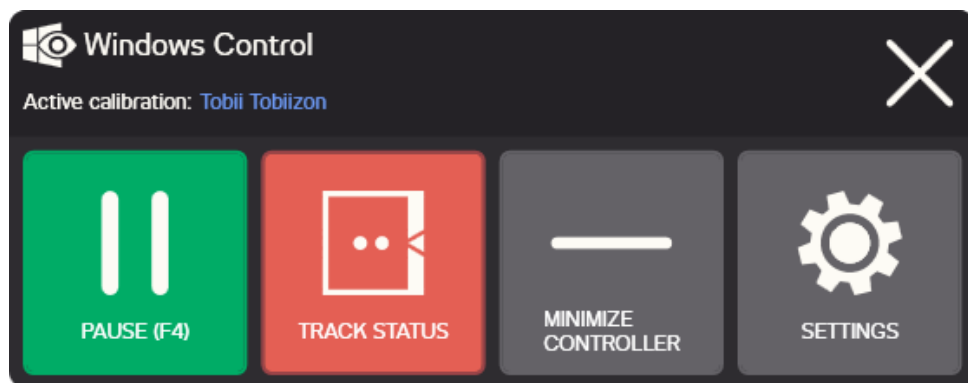


Skýringarmynd 3.1 Windows Control Stjórnþækið

Hnappur	Aðgerð	Lýsing
	HLÉ (F4)	Aðgerð sem gerir hlé á Windows Control. Ef hlé aðgerðin er virkjuð breytist hnappurinn í byrja hnappinn í staðinn. Hægt er að nota F4 hnappinn á lyklaborðinu til að virkja aðgerðina.
	BYRJA (F4)	Aðgerð sem ræsir Windows Control. Ef byrja aðgerðin er virkjuð breytist hnappurinn í hlé hnappinn í staðinn. Hægt er að nota F4 hnappinn á lyklaborðinu til að virkja aðgerðina.
	STADA RAKNINGAR	Aðgerð sem sýnir stöðu rakningar gluggann. Notaðu hann til að athuga hvort að notandi sé rétt staðsettur fyrir framan skjáinn. Fyrir frekari upplýsingar, sjá 3.2 Staða rakningar, síða 11.
	FELA STJÓRNÞÆKI	Aðgerð sem felur stjórnþækis gluggann.

Hnappur	Aðgerð	Lýsing
	STILLINGAR	Aðgerð sem opnar Windows Control stillingar. Fyrir frekari upplýsingar, sjá 4 <i>Windows Control Stillingar</i> , síða 24.
	loka	Aðgerð sem lýkur Windows Control.

3.2 Staða rakningar

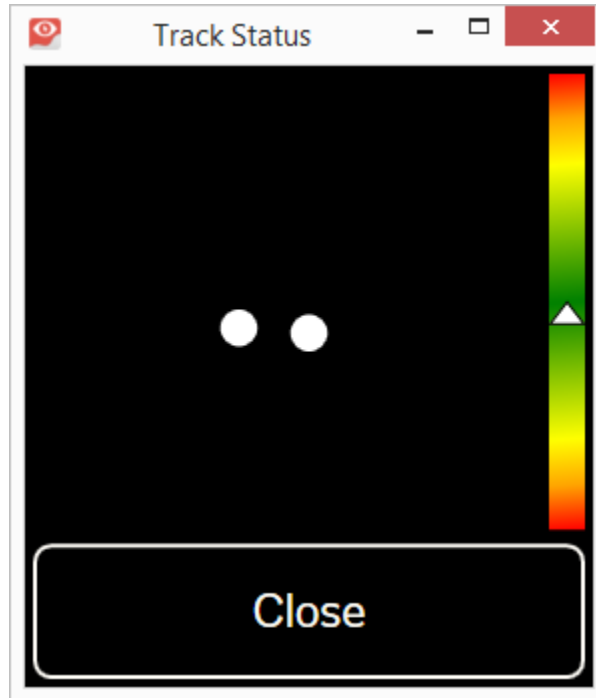

Staða rakningar aðgerð er notuð til að athuga hvort að notandi sé rétt staðsettur fyrir framan augnstýringuna.

- Hvítu punktarnir tveir (2) — augu notanda og hvernig þau eru staðsett í átt að skjánum. Fyrir sem ákjósanlega stöðu, ættu hvítu punktarnir að vera í miðju svarta svæðinu.
- Litríka sláin vinstra megin við hvítu örina — hversu langt eða nálægt notandinn er staðsettur frá skjánum.
 - Ef hvíta örin er í miðju græna svæðinu á slánni, er notandinn í kjörfjarlægð frá skjánum.
 - Ef örin er á lægri hluta slárinnar — skaltu færa notandann nær.
 - Ef örin er á hærri hluta slárinnar — skaltu færa notandann fjær.

1. Opnaðu Windows Control stjórnþækið.

2. Veldu  (staða rakningar) hnappinn.

3. Staðsettu notanda.

4. Veldu **loka** hnappinn þegar það er búið.



Þessi hnappur er í augnhæð þannig að aðeins þarf að horfa á hnappinn til að virkja hann.

3.3 Windows Control Verkefnaslá

Efst á Windows Control verkefnaslánni er staða rakningar skoðari Hann leyfir þér að sannreyna að augnstýringin þekki augun í þér og að þú sért vel staðsettur fyrir framan tækið.

Verkefnahnapparnir á Windows Control verkefnaslánni geta verið í þremur mismunandi stillingum eins og sést á *Skýringarmynd 3.2 Stillingar fyrir Windows Control verkefnaslá, síða 13*.



Hægt er að fela/sýna verkefnaslánna með „F2“ lyklinum  á venjulegu lyklaborði (ekki með Windows Control lyklaborði).

3.3.1 Stillingar fyrir Windows Control verkefnaslá



Stillingarnar þrjár gilda bæði fyrir venjuleg verkefni, sjá *3.4 Venjuleg verkefni*, og fyrir festiverkefni, sjá *3.5 Festiverkefni*.



Örugg smell verkefni eru ekki með neina aukavals stillingu.

- **Venjulegur (óvalinn)** - Enginn verkefni hnappur fyrir Windows Control er valinn.
- **Aðalval (hvítur)** - Merkti verkefnahnappurinn er valinn og verkefnið verður framkvæmt eftir sjálfvirka þysjun þegar notandi horfir á óskaða stöðu á skjánum eða tákn á honum. Ef valaðferð er stillt á rofa í Windows Control stillingasvarinu, verður valinn verkefnahnappur enn virkur eftir að framkvæmd verkefnis líkur.
- **Annað val (blátt/hvítt)** - Sama og **aðalval** en með meiri nákvæmni. **Annað val** þýðir að þysjunin fer lengra áður en lokaframkvæmd verkefnisins fer fram, sem gerir óskaðan hluta af skjánum stærri og auðveldara að velja innan hans. Virkjaðu þessa stillingu með því að hafa augun á verkefnahnappnum þar til liturinn breytist í samræmi við myndina hér að neðan.




Gildir ekki fyrir flýtleiðir og stillingar verkefni.

- **Þriðja val (uppskots valmynd)** — Fyrir sum verkefni á verkefnaslánni er uppskots valmynd tiltæk með samsvarandi festiverkefnum, sjá *3.6 Öruggur smellur, síða 16* og örugg smell verkefni, sjá *3.5 Festiverkefni, síða 15*. Fáðu aðgang að festi- eða öruggum smell verkefnunum með því að hafa augun á verkefnahnappinum þar til uppskots valmyndin virkjust í samræmi við *Skýringarmynd 3.2 Stillingar fyrir Windows Control verkefnaslá, síða 13* og veldu festi- eða örugg smell verkefnin sem koma í stað venjulegra verkefna á verkefnaslánni. Festi- eða örugg smell verkefnin verða áfram á verkefnaslánni og venjuleg verkefni munu finnast í þriðja vali. Endurtaktu ferlið til að skipta festi- eða örugg smell verkefninu út fyrir venjulega verkefnið á verkefnaslánni.



Gildir ekki fyrir flýtleiðir og stillingar verkefni.


Til að stilla hvaða hami eigi að nota fyrir notanda skaltu fara í: *4.5.2 Valflippinn, síða 36*. Aðeins aðalstilling er virkjuð sjálfvalið.

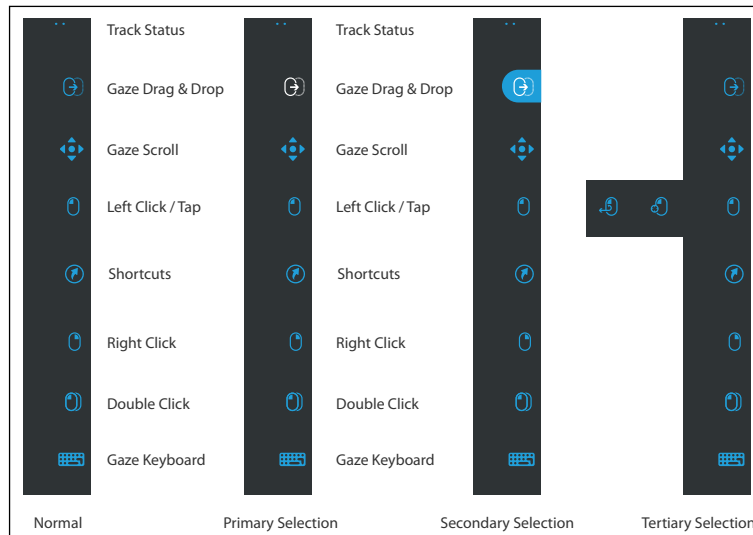

Skýringarmynd 3.2 Stillingar fyrir Windows Control verkefnaslá

3.4 Venjuleg verkefni

Tákn	Verkefni/aðgerð	Lýsing
	Færa bendil	Verkefni sem gerir þér kleift að setja bendilinn þar sem þú horfir. Framkvæmir þysjun þegar það er framkvæmt.
	Augntillit draga og sleppa	Verkefni sem framkvæmir tvo „smelli“, þar sem sá fyrri er upphafsstaða fyrir draga og seinni staða fyrir sleppa (til að færa hluti eða velja svæði). • Veldu verkefnið. • Horfðu á hlutinn sem þú vilt færa eða upphafspunkturinn fyrir svæðisval. • Framkvæmdu Windows Control (fyrri „smellinn“) með augntilliti eða rofa. • Horfðu strax á sleppa-staðsetninguna fyrir hlutinn eða endapunkturinn fyrir svæðisval. • Framkvæmdu seinni „smellinn“ með augntilliti eða rofa. Framkvæmir þysjun þegar það er framkvæmt.
	Augntillits skruna	Verkefni sem, ef það er framkvæmt á skrunanlegum glugga, virkjar augntillits-stjórnaða leið til að skruna á síðunni. • Veldu verkefnið. • Horfðu á skrunanlegt svæði og haltu augunum kyrrum, augntillit skruna táknið birtist þar sem þú horfðir. • Líttu upp fyrir táknið til að skruna upp. • Líttu niður fyrir táknið til að skruna upp. • Líttu til vinstri við táknið til að skruna til vinstri. • Líttu til hægri við táknið til að skruna til hægri. • Á meðan á skruni stendur skaltu líta aftur á táknið (á skjánum, ekki verkefnaslá táknið) til að skipta á milli upp/niður eða hægri/vinstri. • Líttu aftur á Windows Controlverkefnaslánna (eða út fyrir skjáinn) til að hætta að skruna Notaðu augntillit skruna verkefnið til að skruna lóðrétt og lárétt í Modern UI öppum og Modern UI upphafsskjá Windows.

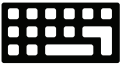Tákn	Verkefni/aðgerð	Lýsing
	Vinstri smellur / pikka	Verkefni sem framkvæmir einn vinstri smell, eða fyrir snertiskjái, pikkar einu sinni með fingri. Í rofastillingu er vinstri smellur / pikka sjálfvalið á og fest“ (sjá 3.8.1 <i>Virkja sjálfvalið með augntilliti og rofa, síða 19</i>). Framkvæmir þysjun þegar það er framkvæmt.
	Flýtleiðir	Verkefni sem opnar: • 3 dálka fyrirframskilgreindra flýtleiða. • Örlitið öðruvísi tiltækar fyrir Windows 7, 8.1 og 10. Fyrir frekari upplýsingar, sjá 3.7 <i>Flýtleiðir, síða 17</i> .
	Hægri smellur	Verkefni sem framkvæmir einn hægri smell. Framkvæmir þysjun þegar það er framkvæmt.
	Tvismellur	Verkefni sem framkvæmir tvöfaldan vinstri smell. Þegar virkjunaraðferð er stillt á rofa, er tvismellur „festiverkefni“ (sjá 3.8.1 <i>Virkja sjálfvalið með augntilliti og rofa, síða 19</i>). Framkvæmir þysjun þegar það er framkvæmt.
	Augntillits lyklaborð	Verkefni sem opnar augntillits virkjað lyklaborð á skjánum fyrir augntillits innslátt. Fyrir frekari upplýsingar, sjá 3.9 <i>Augntillits lyklaborð, síða 20</i> .
	Stillingar	Verkefni sem opnar Windows Control stillingar. Fyrir frekari upplýsingar, sjá 4 <i>Windows Control Stillingar, síða 24</i> .

3.4.1 Hegðun venjulegra verkefna í mismunandi stillingum

Verkefni	aðal	auka	Þriðja
Færa bendil	Venjuleg þysjun	Djúp þysjun	Skipta í festifæra bendil
Draga og sleppa	Venjuleg þysjun	Djúp þysjun	Skipta í festi draga og sleppa eða örugga draga og sleppa
Augntillits skruna	Venjuleg þysjun	Djúp þysjun	Á ekki við
Vinstri smellur / pikka	Venjuleg þysjun	Djúp þysjun	Skipta í festi vinstri smellur / pikka eða öruggan vinstri smellur / pikka
Flýtleiðir	Engin þysjun	Á ekki við	Á ekki við
Hægri smellur	Venjuleg þysjun	Djúp þysjun	Skipta í festi hægri smellur / pikka eða öruggan hægri smellur / pikka
Tvismellur	Venjuleg þysjun	Djúp þysjun	Skipta í festi tvismellur / pikka eða öruggur tvismellur / pikka
Augntillits lyklaborð	Fyrir frekari upplýsingar, sjá 3.9 <i>Augntillits lyklaborð, síða 20</i> .		
Stillingar	Engin þysjun	Á ekki við	Á ekki við
a. Fyrir frekari upplýsingar um mismunandi festiverkefni, sjá 3.5 <i>Festiverkefni, síða 15</i> .			

3.5 Festiverkefni


Tákn	Verkefni/aðgerð	Lýsing
	Festi vinstri smellur / pikka	Festiverkefni leyfa samfellda virkjun verkefna án þess að þurfa að velja verkefnið aftur og aftur úr verkefnaslánni. Veldu festiverkefni úr verkefnaslánni einu sinni og bendillinn fylgir augntilliti þínu. Ef þú festir augun á skjánum framkvæmdir það viðkomandi aðgerð á þeim stað. Verkefnið verður áfram virkt eftir að aðgerðin er framkvæmd, sem þýðir að ekki þarf að virkja það aftur úr vinnuslánni. Til að stoppa festiverkefnið, líturðu einfaldlega aftur á verkefnið á verkefnaslánni þar til það er ekki lengur uppljómað.  Fyrir festifæra bendil, er annað val ekki tiltækt, þar sem þetta verkefni færir bendilinn bara um skjáinn.
	Festi tvismellur	
	Festi draga og sleppa	
	Festi færa bendil	
	Festi hægri smellur	

3.5.1 Hegðun festiverkefna í mismunandi stillingum

Verkefni/aðgerð	aðal	auka	Þriðja
Festi vinstri smellur / pikka	Venjuleg þysjun	Djúp þysjun	Skipta í vinstri smellur / pikka eða öruggur vinstri smellur / pikka
Festi tvismellur	Venjuleg þysjun	Djúp þysjun	Skipta í tvismellur / pikka eða öruggur tvismellur / pikka
Festi draga og sleppa	Venjuleg þysjun	Djúp þysjun	Skipta í draga og sleppa eða öruggt draga og sleppa
Festi færa bendil	Engin þysjun	Á ekki við	Skipta í færa bendil
Festi hægri smellur	Venjuleg þysjun	Djúp þysjun	Skipta í hægri smellur / pikka eða öruggur hægri smellur / pikka
a. Fyrir frekari upplýsingar um mismunandi festiverkefni, sjá 3.4 Venjuleg verkefni, síða 13.			

3.6 Öruggur smellur

Tákn	Verkefni/aðgerð	Lýsing
	Öruggur vinstri smellur / pikka	Örugg smelli verkefni gera þér kleift að stunda bankaviðskipti o.s.frv. án þess að eiga á hættu að smella vitlaust vegna tveggja skrefa aðgerð. Þysjaðu fyrst og veldu síðan framkvæma. Veldu örugg smelli verkefni frá þriðja vals verkefnaslánni. Ef þú festir augun á skjánum framkvæmdir það viðkomandi aðgerð á þeim stað. Verkefnið mun framkvæma þysjun í nýjum glugga, þar sem festing augntillits verður sýnt með  tákni í glugganum, sjá <i>Skýringarmynd 3.3 Framkvæma öruggan smell</i> , síða 16. Til að framkvæma öruggan smella á  miðju, skaltu velja  tákn.
	Öruggur tvismellur	
	Öruggur hægri smellur	
	Öruggt draga og sleppa	
		 Örugg smell verkefni eru tiltæk fyrir vinstri smell, hægri smell, tvismell og draga og sleppa.

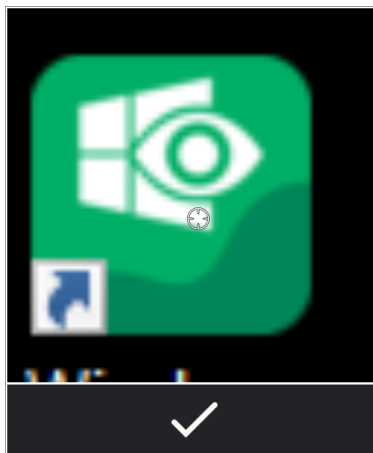

Skýringarmynd 3.3 Framkvæma öruggan smell

3.7 Flýtleiðir

Windows 8.1	Windows 10



Ef flýtleiðarvirkni er merkt með



tákni, verður flýtleiðaglugginn áfram opin eftir að virkinn er virkjuð, sem leyfir nokkrar virkjanir.

Flýtleið	Aðgerð	Win 8.1	Win 10	Lýsing
	Fylla skjá	x	x	Flýtleið sem mun láta virkan glugga/app/hugbúnað fylla skjá.
	Til baka	x	x	Flýtleið sem færir notanda aftur um síðu í vefvafranum eða öðrum hugbúnaði með sama eiginleika innbyggðan.
	Afturkalla	x	x	Flýtleið sem tekur til baka síðustu skipun.
	Afrita	x	x	Flýtleið sem mun afrita virkt val.
	Líma	x	x	Flýtleið sem mun líma valið sem var áður afritað.
	Byrja	x	x	Flýtleið sem opnar upphafsvalmynd Windows.

Flýtleið	Aðgerð	Win 8.1	Win 10	Lýsing
	Fela verkefnaslá	x	x	Flýtleið sem felur verkefnaslá fyrir yfirlit á heilum skjá. Til að fá aftur upp verkefnaslánna, skaltu velja  eða  eftir því hvoru megin verkefnasláin er staðsett.
	Fela glugga	x	x	Flýtleið sem felur virkan glugga/app/hugbúnað..
	Vafri	x	x	Flýtleið sem ræsir sjálfvalin vefvafra.
	Hækka hljóðstyrk	x	x	Flýtleið sem hækkar hljóðstyrk.
	Hljóð af	x	x	Flýtleið sem tekur hljóð af hátölurum.
	Lækka hljóðstyrk	x	x	Flýtleið sem lækkar hljóðstyrk.
 	Leita Cortana	x	x	Flýtleið sem opnar leitareiginleikann í Windows. Flýtleið sem opnar Cortana. Cortana er snjalli einkaðstoðarmaðurinn þinn, og Cortana getur leitað á vefnum, fundið hluti á tölvunni þinni, haldið utan um dagatalið þitt o.s.frv.
	Skipta um hlið	x	x	Flýtleið sem færir verkefnaslá frá hægri/vinstri.
	Loka glugga	x	x	Flýtleið sem lokar virkum glugga/appi/hugbúnaði.
	Raddkennsl	x	x	Flýtleið sem ræsir raddkennsl Windows, eða Dragon raddkennsl ef þau eru uppsett.
	Virtual Remote	x	x	Flýtleið sem opnar Virtual Remote appið. Fyrir frekari upplýsingar, sjá 5 <i>Virtual Remote</i> , síða 39.
	Skjáborð	x	x	Flýtleið sem nær í skjáborðið.
 	Charms Aðgerðamiðstöð	x	x	Flýtleið sem opnar Charms valmyndina. Flýtleið sem opnar aðgerðamiðstöðina.
	Appa-skiptir	x		Flýtleið sem rennur í gegnum öll Modern UI öpp í keyrslu og skjáborðið.  Ekki verður allur hugbúnaður sem er í keyrslu á skjáborðinu sýnilegur hérna. Hann er aðeins sýnilegur frá skjáborðinu.

Flýtleið	Aðgerð	Win 8.1	Win 10	Lýsing
	Verkefnaskjár		x	Flýtleið sem opnar verkefnaskjá þar sem öll Modern User Interface (UI) öpp í keyrslu eru sjáanleg.  Verkefnaskjárninn kemur ekki upp ef það er aðeins eitt eða færri öpp opin.
	Loka flýtleiðum	x	x	Flýtleið sem lokar flýtleiða valmyndinni.

3.8 Valaðferð - augntillit eða rofi

Það eru tvær aðferðir til að framkvæma valið verkefni.

- Augntillit — augun eru notuð til að bæði stjórna og framkvæma valin verkefni.
- Augntillit og rofi — augun eru notuð til að stjórna og vélrænn hnappur sem tengdur er við tækið er notaður til að framkvæma valið verkefni.

Valaðferð er stillt innan frá Windows Control stillingasvarinu, sjá 4 *Windows Control Stillingar*, síða 24.

Áður en þú framkvæmir val, velur þú verkefni úr verkefnaslánni til að framkvæma. Horðu á valin verkefni þar til það er uppljómað sem „Aðal“, „Annað val“ eða .

- **Augntillit** - Til að framkvæma valið verkefni, skaltu láta augun hvíla á óskuðum hluta skjásins (eða á tákni á skjánum) þar sem þú vilt framkvæma verkefnið. Sjálfvirkur þysjunareiginleiki er virkjaður, sem lýkur við val á táknuinu eða framkvæmd verkefnisins.
- **Augntillit og Rofi** - Tvær mismunandi framkvæmdar stillingar.
 - **Ein virkjun rofa** - þysjunareiginleikinn verður framkvæmdur á sama hátt og með augntillits aðferð og í samræmi við stillingar sem gerðar eru í Windows Control stillingasvarinu, sjá 4 *Windows Control Stillingar*, síða 24.
 - **Virkja og halda rofa** - þysjunareiginleikinn mun þysja samfelld og ekki hætta þar til rofanum er sleppt eða hann er afvirkjaður.



Þegar augntillits aðferðin er notuð þarftu að líta aftur á verkefnaslánna til að velja nýtt verkefni **fyrir** framkvæmd hvers verkefnis.



Þegar þysjunardýpt er stillt á grunnt í Windows Control stillingum - er engin þysjun framkvæmd. Fyrir frekari upplýsingar, sjá 4 *Windows Control Stillingar*, síða 24.

3.8.1 Virkja sjálfvalið með augntilliti og rofa

Þegar augntillits og rofa aðferðin er notuð, er notaður eiginleiki sem heitir „virkja sjálfvalið“.

Ef verkefni verður „virkjt sjálfvalið“ þýðir það að þú þarft ekki að horfa aftur á verkefnaslánna ef þú vilt endurtaka framkvæmd valins verkefnis, heldur bara ef þú vilt breyta úr einu verkefni í annað.

Þegar augntillits og rofa aðferðin er notuð, er vinstri smellur / pikka verkefnið sjálfvalið alltaf virk. Það þýðir að vinstri smellur / pikka er alltaf á og verður alltaf virkjað af virkjun rofans, ef ekkert annað er valið. Ef annað verkefni er valið verður það aðeins virkt einu sinni (fyrir eitt val) og síðan Windows Control fer það sjálfvirktt aftur til baka í vinstri smellur / pikka fyrir eftirfarandi vö. Undantekningin frá þessu er tvísmelli verkefnið; þegar það er valið í augntillits og rofa ham verður það líka sjálfvalið virkt.

Það er mjög hagkvæmt í tilfellum eins og hraðri/stöðugri vöfrun á netinu með því að virkja rofa og þannig vinstri smellur / pikka verkefnið einu sinni og velja síðan aftur og aftur hvað sem er óskað, án þess að þurfa að velja vinstri smellur / pikka verkefnið oft.

3.8.2 Verkefni virkjað með lykaborðs hnappi í stað rofa.



Ef „F12“ lykaborðshnappur á viðfestu lykaborði er valinn þess í stað virkjar það valið verkefni. Hann má nota á nákvæmlega sama hátt og tengdan rofa. Fyrir frekari upplýsingar um rofa, sjá 3.8 *Valaðferð - augntillit eða rofi*, síða 19.

3.9 Augntillits lyklaborð

Með því að velja augntillit lyklaborðs hnappinn á verkefnaslánni, ræstist augntillit lyklaborð sem lyklaborð á skjánum. Augntillits lyklaborð verður alltaf staðsett neðst á skjánum þegar það opnast. Það er mögulegt að færa það með  (lyklaborð upp/niður) hnappnum á lyklaborðs verkefnaslánni.

Ásamt augntillits lyklaborði verður lyklaborðs verkefnaslá ræst. Fyrir frekari upplýsingar, sjá 3.9.1 *Lyklaborðs verkefnaslá, síða 21*.

Augntillits lyklaborðið samanstendur af fjórum lyklaborðssiðum í hringsnúandi lúppu. Notandi getur auðveldlega skipt á milli mismunandi lyklaborðssiða með því að velja næstu síðu hnappinn sem er staðsettur lengst til vinstri og hægri á öllum síðum augntillits lyklaborðsins.

Lykillinn á lyklaborðinu þar sem notandinn horfir verður gefinn til kynna með ljósum ramma utan um táknið/virknina  á lyklinum.

Lyklaborðssiðurnar fjórar eru:

		Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P	
	Ctrl	A	S	D	F	G	H	J	K	L	!	
		Z	X	C	V	B	N	M	,	.	?	

Skýringarmynd 3.4 Sjálfvalin upphafssíða

		/	*	7	8	9	+	(	)	"	#	
	Ctrl	\	.	4	5	6	-	<	>	&	'	
		%	0	1	2	3	=	;	:	_	@	

Skýringarmynd 3.5 Fyrsta síða til hægri

		F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	
	Ctrl	Esc	→I	Home	End	Web	Search	↑	Prt Scr	Pg Up	F11	
		Windows	Alt	Alt Gr	Del	Mail	←	↓	→	Pg Dn	F12	

Skýringarmynd 3.6 Önnur síða til hægri eða vinstri



Skýringarmynd 3.7 Fyrsta síða til vinstri

Til að breyta tungumáli lyklaborðs og öðrum stillingum fyrir lyklaborðið, sjá 4 *Windows Control Stillingar*, síða 24.



Shift, Ctrl, Alt, Win og Alt Gr lykklarnir verða „festir“ þegar búið er að velja þá. Þetta þýðir að þeir verða valdir þar til notandi velur nýjan lykil af lykklaborðinu. Þeir verða fastir ef næsti lykill er annar fastur lykill.



Til að skrifa bréf með áherslumerki:


1. Veldu áherslumerkið
2. Veldu stafinn
3. Stafurinn birtist með völdu áherslumerki.

3.9.1 Lyklaborðs verkefnaslá

Efst á lykklaborðs verkefnaslánni er staða rakningar skoðari eins og á Windows Control verkefnaslánni. Hann leyfir þér að sannreyna að augnstýringin þekki augun í þér og að þú sért vel staðsettur fyrir framan tækið.

Verkefnahnapparnir á lykklaborðs verkefnaslánni geta verið í þremur mismunandi stillingum eins og sést á *Skýringarmynd 3.8 Stillingar fyrir lykklaborðs verkefnaslá*, síða 21.

Fyrir frekari upplýsingar um mismunandi stillingar, sjá 3.3.1 *Stillingar fyrir Windows Control verkefnaslá*, síða 12

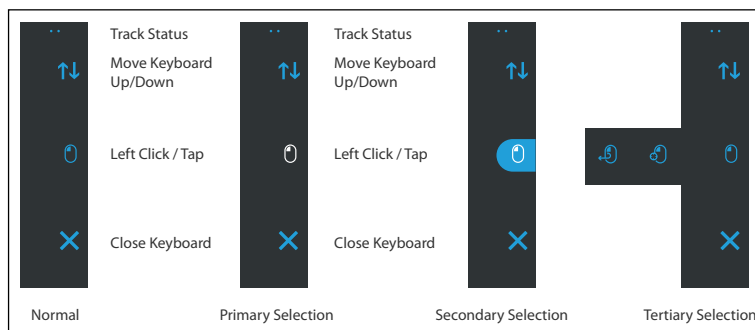

Skýringarmynd 3.8 Stillingar fyrir lykklaborðs verkefnaslá



Þriðja val er aðeins tiltækt fyrir vinstri smellur verkefnið á lykklaborðs verkefnaslánni.




Í Windows 8.1 og Windows 10 aðlaga litirnir á lykklaborðs verkefnaslánni sig að Windows stillingum.

3.9.2 Verkefnahnappar fyrir lyklaborðs verkefnaslá

Tákn	Verkefni/aðgerð	Lýsing
↑↓	Færa lyklaborð upp/niður	Verkefni sem færir lyklaborðið efst eða neðst á skjáinn.  Til að virkja eiginleikann skaltu dvelja á hnappnum.
	Vinstri smellur / pikka	Verkefni sem framkvæmir einn vinstri smell, eða fyrir snertiskjái, pikkar einu sinni með fingri.
✕	loka	Verkefni sem lokar lyklaborðinu.

3.9.3 Orðaspá

Orðaspárvélin sem er notuð í Windows Control er frá SwiftKey og er oft notuð í spjaldtölvum og snjallsímum. SwiftKey notar blöndu af gervigreindartækni sem gerir henni kleift að spá fyrir um næsta orð sem notandi ætlar að slá inn. SwiftKey lærir frá fyrri texta sem notandi hefur skrifað og úttaksspám sem byggðar eru á núverandi innslegnum texta og því sem hún hefur lært. Orðaspártungumálið mun breytast eftir tungumálalyklaborðs stillingum.

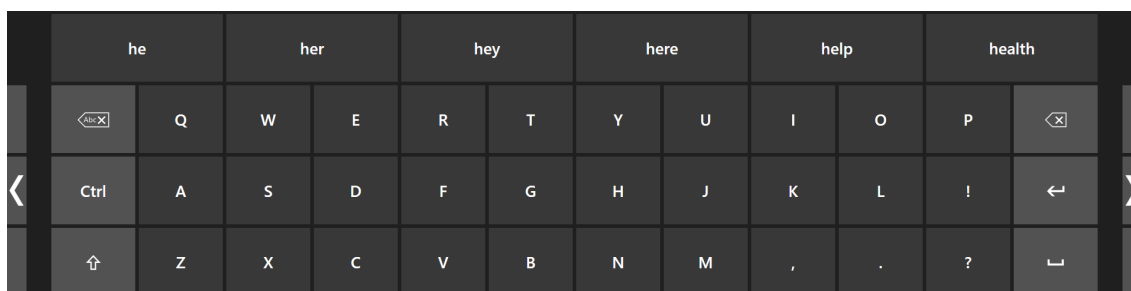


Skýringarmynd 3.9 Lyklaborð með orðaspá virkjaða

Þegar orðaspá er í notkun, sjá 4 *Windows Control Stillingar, síða 24* fyrir frekari upplýsingar um virkjun/afvirkjun orðaspár, birtast sex (6) kassar fyrir ofan lyklaborðið. Kassinn lengst til vinstri sýnir líklegasta fyrirspáða orðið og hinir fimm (5) kassarnir innihalda eitt fyrirspáð orð hver. Til að velja fyrirspáð orð, skaltu velja kassann með rétta orðinu í. Ef þú finnur ekki orðið sem þú leitar að, skaltu halda áfram að slá inn og vonandi kemur orðið sem þú leitar að eftir næsta staf.



Ef þú notar orðaspá og vilt slá inn orð sem er með áherslumerki, eins og hús er oft auðveldara að láta orðaspánn sjá um áherslumerkið. Settu einfaldlega inn „hus“ og þú færð uppástungu fyrir „hús“.

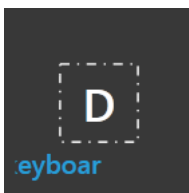


Á meðan notandi slær inn, eru síðustu 5-10 stafir sýndir í bláu á gefið til kynna/uppljómað lyklinum. Fyrir frekari upplýsingar, sjá 4 *Windows Control Stillingar, síða 24*. Þessi eiginleiki aðstoðar notanda við að sjá stafsetningarvillur og dregur úr þörfinni á að horfa á staðinn þar sem textinn er settur inn sem eykur innsáttarhraða.

3.10 Windows Control ásamt staðbundnum forritum

Windows Control má nota ásamt öðrum augnstýrðum forritum. „Augntillits virkjuð“ svæði í öðrum forritum eru virk eins lengi og ekki er virkt verkefni á Windows Control verkefnaslánni. Ef þú notar Windows Control í augntillits og rofa stillingu verður einn verkefnahnappar alltaf „sjálfvalið virkur“, ef þú þarft að afvelja verkefni lítur þú bara aftur á valið verkefni í stutta stund.

3.11 Eye Detection Indicator


Eye Detection Indicator, , er sérstakur vísir, á aðgerðareitnum í Windows.

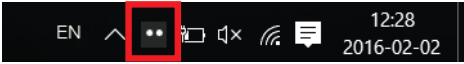 12:28
2016-02-02, sést ef Windows Control hefur numið augu notanda.

Augnnemavísirinn getur haft mismunandi stöður:

- Augu numin ()
 Virkar líka sem staðsetningarnemi fyrir notanda.
- Engin augu numin, ()
- Engin augnstýring tengd eða hún er óvirk, ()

4 Windows Control Stillingar

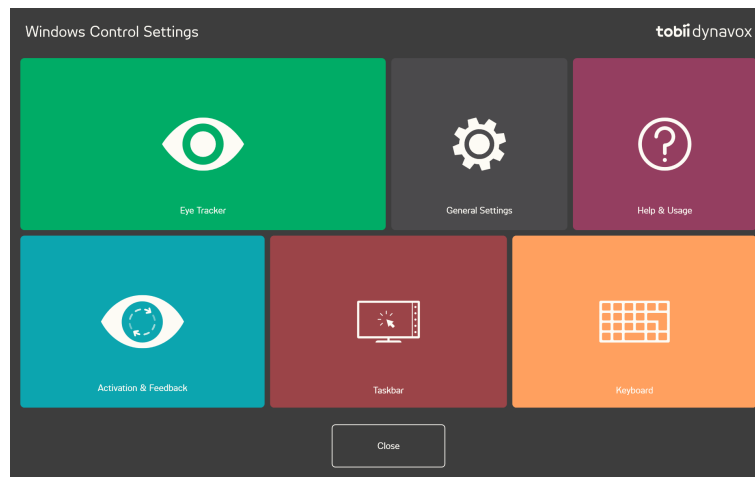


tákn	Aðgerð	Lýsing
	Augnstýring	Opnar augnstýringar stillingar. Fyrir frekari upplýsingar, sjá 4.1 Augnstýring , síða 25.
	Almennar stillingar	Opnar almennar stillingar. Fyrir frekari upplýsingar, sjá 4.2 Almennar stillingar , síða 30.
	Hjálp og notkun	Opnar Hjálp og notkun stillingar. Fyrir frekari upplýsingar, sjá 4.3 Hjálp og notkun , síða 31.
	Virkjun og svörun	Opnar virksjun og svörun stillingar. Fyrir frekari upplýsingar, sjá 4.4 Virksjun og svörun , síða 32.
	verkefnaslánna	Opnar verkefnaslár stillingar. Fyrir frekari upplýsingar, sjá 4.5 verkefnaslánna , síða 35.
	Lyklaborð	Opnar lyklaborðs stillingar. Fyrir frekari upplýsingar sjá 4.6 Lyklaborð , síða 37.

4.1 Augnstýring



4.1.1 Fínstillingar flipi

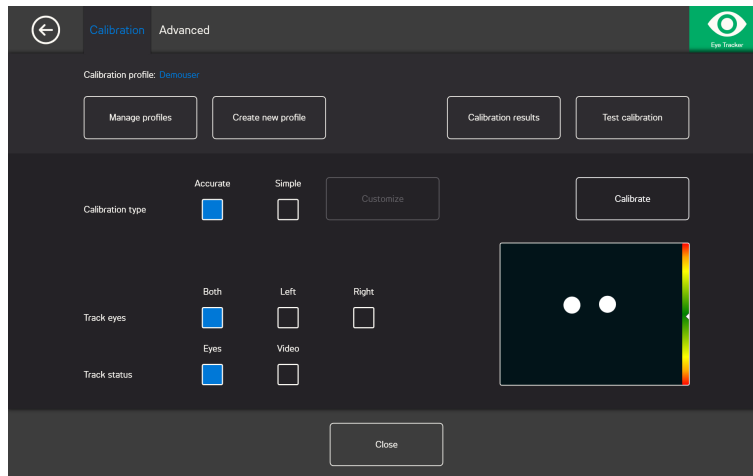

Fínstillingar notendauppsetningar: Sýnir nafn notendauppsetningar sem er virk.

Skoða notendauppsetningar: Veldu þennan hnapp fyrir notendauppsetningar sem þegar eru til. Fyrir frekari upplýsingar, sjá 4.1.1.1 *Skoða notendauppsetningar*, síða 25.

Búa til nýja notendauppsetningu: Veldu þennan hnapp til að búa til nýja notendauppsetningu. Fyrir frekari upplýsingar, sjá 4.1.1.2 *Búa til nýja notendauppsetningu*, síða 26.

Niðurstöður fínstillinga: Veldu þennan hnapp til að sjá niðurstöður fínstillingar. Fyrir frekari upplýsingar, sjá 4.1.1.3 *Niðurstöður fínstillingar*, síða 26.

Prófunarfínstillingu: Veldu þennan hnapp til að opna prófunarfínstillingar síðuna. Fyrir frekari upplýsingar, sjá 4.1.1.4 *Prófa fínstillingu*, síða 27.

Gerð fínstillingar: Það eru tvær (2) gerðir fínstillingar: **Nákvæmar** eða **einfaldar**. Fyrir frekari upplýsingar, sjá 4.1.1.6 *Gerð fínstillingar*, síða 27.

Rekja augu: Veldu hvernig tækið á að rekja augu notanda á milli: **Bæði**, **vinstra** eða **hægra**.

4.1.1.1 Skoða notendauppsetningar:

Á skoða notendauppsetningar síðunni getur þú virkjað eða eytt fyrirbyggjandi notendauppsetningu.

Á miðjum skjánum, undir virkri notendauppsetningu, getur þú séð nafn virkrar notendauppsetningar.

Allar tiltækar notendauppsetningar verða listaðar upp sem hnappar á síðunni, notaðu  og  hnappana til að skruna í gegnum tiltækar notendauppsetningar.

4.1.1.1.1 Notendauppsetning virkjuð

1. Veldu hnapp með nafni notendauppsetningar til að virkja.
2. Veldu **virkja** hnappinn sem staðsettur er efst til hægri á skjánum.
3. Veldu **Já** til að virkja valda notendauppsetningu eða **Nei** til að hætta við.
4. Veldu **Loka** til að fara af síðunni.

4.1.1.1.2 Notendauppsetningu eytt

1. Veldu hnappinn með nafni notendauppsetningar til að eyða.
2. Veldu **eyða** hnappinn sem staðsettur er efst til vinstri á skjánum.

3. Veldu **Já** til að eyða valdri notandauppsetningu eða **Nei** til að hætta við.
4. Veldu **Loka** til að fara af síðunni.

4.1.1.2 Búa til nýja notandauppsetningu

1. Veldu **gerð fínstillingar** til að nota.
Fyrir frekari upplýsingar, sjá 4.1.1.6 Gerð fínstillingar, síða 27.
2. Veldu **búa til nýja notandauppsetningu** hnappinn.
3. Veldu **já** til að halda áfram eða **Nei** til að hætta við.
4. Gefðu nýrri notandauppsetningu nafn.




Nota verður lyklaborð og mús.
Aðeins má nota staftölur.

5. Veldu **næst** hnappinn.
6. Staðsettu notanda þannig að punktarnir tveir sem standa fyrir augu notanda séu í miðjum kassanum á skjánum.
Fínstillingarferlið mun hefjast þegar hægri punkturinn blikkar á notanda.
7. Fylgdu leiðbeiningum á skjánum til að framkvæma fínstillingu.
8. Sjáðu niðurstöður fínstillinga.
Fyrir frekari upplýsingar, sjá 4.1.1.3 Niðurstöður fínstillingar., síða 26.
9. Veldu **Loka** til að samþykkja fínstillinguna.

4.1.1.3 Niðurstöður fínstillingar.



Þetta virkar bara á IS-4 augnstýringu, en ekki á IS-20 og IS-3 augnstýringar. Fyrir frekari upplýsingar um augnstýringar vettvanginn sem þú notar, sjáðu tæknilysingar fyrir augnstýringu þína.

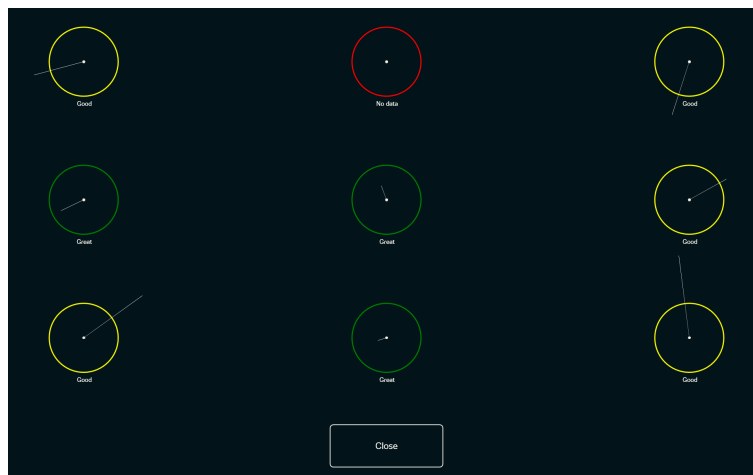

Á niðurstöðusiðu fínstillingar, getur þú séð niðurstöður fínstillingar fyrir hvern fínstillingar punkt. Hversu margir fínstillingar punktar eru sýndir á síðunni fer eftir því hvaða gerð fínstillingar þú valdir og hvernig þú hefur sérsníðið fínstillinguna.


Fínstillingar punktur getur haft þrjár (3) mismunandi stöður:

- Frábær (græn)
- Góð (gul)
- Engin gögn (rauð)



Þegar þú notar „nákvæma“ gerð fínstillingar, endurræstir fínstillingin sjálfkrafa ef augnstýringin fær ekki nein gögn frá fínstillingar punkti.

4.1.1.4 Prófa fínstillingu

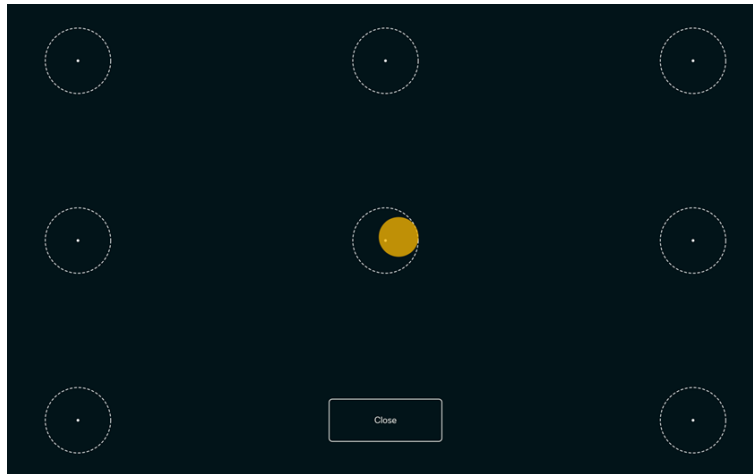

Á prófa fínstillingu síðunni er hægt að prófa fínstillingu, með fyrirframákveðnum mörkum á síðunni, til að sjá hvort notandi þurfi að endurfínstilla augnstýringu.

1. Líttu á hvorn punkt í hvorum hring á skjánum til að sjá hversu nákvæm augnrakning er á því svæði.
2. Veldu **Loka** þegar þetta er búið.

4.1.1.5 Endurfínstilling

1. Veldu **gerð fínstillingar** til að nota.
Fyrir frekari upplýsingar, sjá 4.1.1.6 *Gerð fínstillingar*, síða 27.
2. Veldu **endurfínstilla** hnappinn til að hefja nýtt fínstillingarferli fyrir virka notandauppsetningu.
3. Fylgdu leiðbeiningum á skjánum til að framkvæma fínstillingu.
4. Sjáðu niðurstöður fínstillinga.
Fyrir frekari upplýsingar, sjá 4.1.1.3 *Niðurstöður fínstillingar*., síða 26.
5. Veldu **Loka** til að samþykkja fínstillinguna.

4.1.1.6 Gerð fínstillingar

Það eru tvær (2) gerðir fínstillingar tiltækar: **Nákvæmar** og **einfaldar**.

4.1.1.6.1 nákvæm

Veldu **nákvæm** reitinn til að virkja nákvæmustu fínstillingargerðina.

Með nákvæmu fínstillingargerðinni virkri verður fínstillingarferlið sjö (7) punkta „sprengdu punktana“ fínstilling. Nákvæma fínstillingargerðin er sjálfvalin fínstillingargerð.

4.1.1.6.2 einföld

Veldu **einföld** reitinn ef þú vilt sérsníða fínstillingarferlið.

Veldu **sér sníða** hnappinn við hlið einfalt hnappsins til að sér sníða fínstillingarferlið.



Fínstillingar punktar: Veldu hvort nota eigi **1**, **2**, **5**, eða **9** fínstillingar punkta.



1-punkta fínstilling er ekki tiltæk á PCEye Go.

Skrefa-aðgerðir: Veldu kveikt í kveikja/slökkva á skrefa-aðgerðir til að virkja eiginleikann þannig að þú notar „S“ lykilinn á lyk-laborðinu eða pikkar/smellir á skjáinn til að fara í gegnum fínstillinguna skref fyrir skref.

Hvati:

Veldu **vafra** hnappinn til að breyta **hvata** úr sjálfvöldum hvítum punkt í:

- Einn af inniföldum hvötum, mynd eða myndband
- Mynd af uppáhaldsleikfangi notanda
- Uppáhalds myndband
- Eða eitthvað annað.

Veldu **bakgrunn** hnappinn til að breyta lit á bakgrunni fyrir fínstillingarferlið.

Hraði hvata: Veldu á milli þriggja hraðastiga fyrir ferð hvatans um skjáinn.


- Hægt
- Meðal
- Hratt

Stærð hvata: Veldu á milli þriggja stærða sem hvatinn er sýndur í á skjánum:

- Lítil
- Meðal
- Stór

Loka: Veldu **Loka** hnappinn til að fara af síðunni.

4.1.2 Ítarlegt flipinn

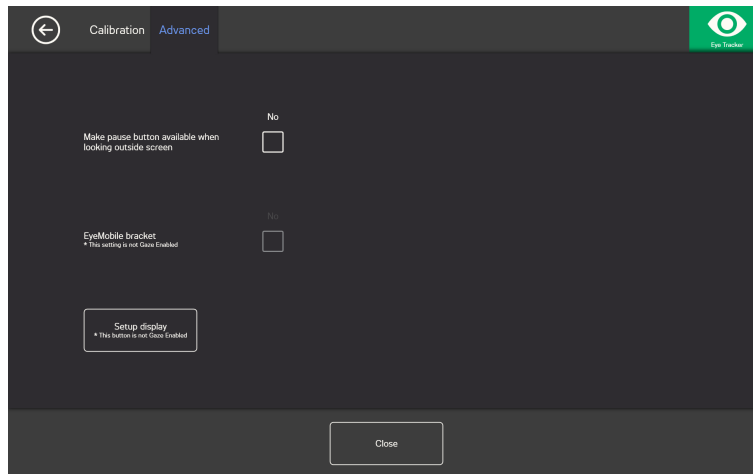

Gera hlé hnappinn tiltækan þegar horft er út fyrir skjáinn: Stílltu kveikt/slökkt gátreitinn á **kveikt** ef hlé hnappurinn á að birtast á skjánum þegar notandi lítur út fyrir skjáinn svo að notandi geti auðveldlega gert hlé á og endurræst augnstýringuna.


EyeMobile kappi: Stílltu EyeMobile kveikt/slökkt gátreitinn á **kveikt** ef þú notar EyeMobile eða EyeMobile Mini. EyeMobile kappa stillingin á ekki við um EyeMobile Plus og er því óvirk.

4.1.2.1 Setja upp skjá


Ef meira en einn (1) skjár er notaður þarftu að tiltaka hvaða skjá augnstýringin er fest við. Kerfið þarf líka að vita stærð skjásins sem notaður er.



Virkar aðeins á útvíkkuðu skjáborði en ekki á skjáborði í tvíriti.

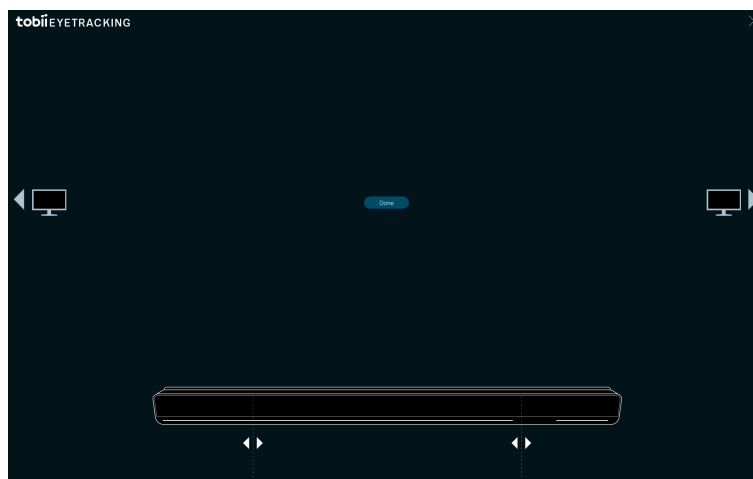

1. Notaðu  eða  til að velja hvaða skjá augnstýringin er fest við.
2. Samstilltu vinstri og hægri lóðréttu línu, sem eru undir sjónsköpuninni á augnstýringunni á skjánum, við merkingarnar sem eru ofan á augnstýringunni sem er í notkun.

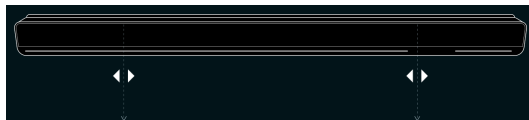


Þetta stillir inn skjástærðina sem er notuð fyrir Windows Control.

3. Veldu **lokið** til að ljúka.

4.2 Almennar stillingar




4.2.1 Almennur flipi

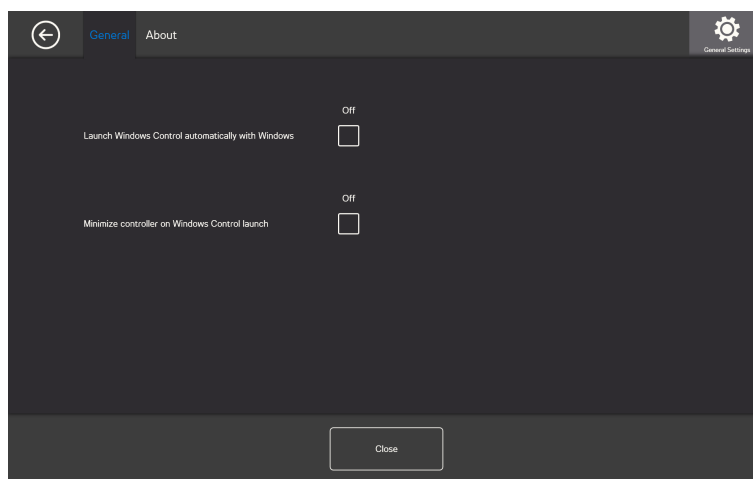

Ræsa Windows stjórnækjum sjálfvirk með Windows: Stilltu kveikt/slökkt gátreitinn á **kveikt** ef Windows stjórnækki eiga að ræsast sjálfkrafa þegar Windows ræsist.

Fela stjórnækki við ræsingu Windows: Stilltu kveikt/slökkt gátreitinn á **kveikt** ef fela á Windows Control stjórnækki þegar Windows ræsist.

4.2.2 Um flippinn

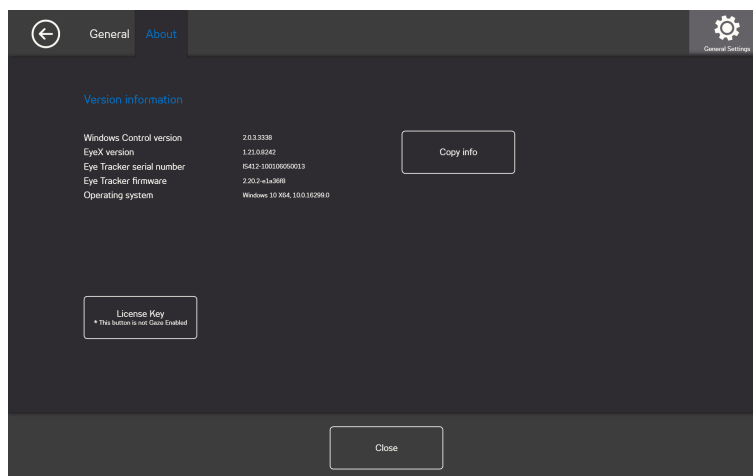

Á um síðunni, er að finna allar upplýsingar um útgáfu hugbúnaðar og vélbúnaðar augnstýringar. Þessar upplýsingar má afrita auðveldlega með því að velja **afrita upplýsingar** hnappinn og síðan má líma þær inn í tölvupóst eða hvers konar annan hugbúnað ef þess þarf.

4.2.2.1 Lykill hugbúnaðarleyfis



Lykillhnappurinn er ekki augntillits virkjaður þannig að þú þarft að fá einhvern til að aðstoða þig ef þú þarft að skipta um leyfi.


Til að virkja leyfi, sjá 2.2.1 *Virkjun leyfis, síða 6*.

Til að afvirkja leyfi, sjá 2.2.2 *Afvirkjun leyfis, síða 8*.

4.3 Hjálp og notkun



4.3.1 Hjálparflipinn

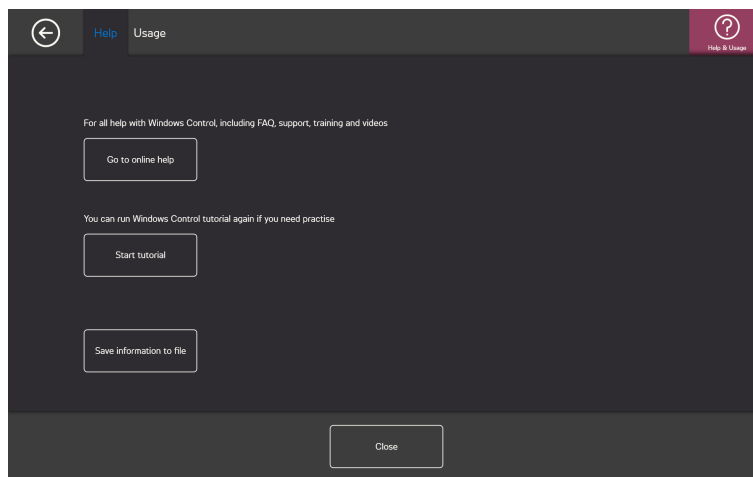

Veldu fara í **hjálp á netinu** hnappinn til að opna Tobii Dynavox stuðningssíður fyrir vöruna á netinu í sjálfvöldum netvafra, á stuðningsvefsíðunum getur notandi fundið algengar spurningar og svör, stuðning, þjálfun, myndbönd og skjöl um Windows Control og allar aðrar vörur frá Tobii Dynavox.




Passaðu að tölvan/tækið sé nettengt.

Veldu **ræsa kennsluefni** hnappinn til að keyra innifalið kennsluefni ef notandinn þarf að æfa sig meira. Kennsluefnið má ræsa jafn oft og notandi vill.

Veldu **vista upplýsingar** í skrá hnappinn til að afrita alla annála sem eru mikilvægir ef þú þarft aðstoð. Þessa skrá má auðveldlega festa við tölvupóst og senda til stuðningsliðsins.

4.3.2 Notkunarflipinn

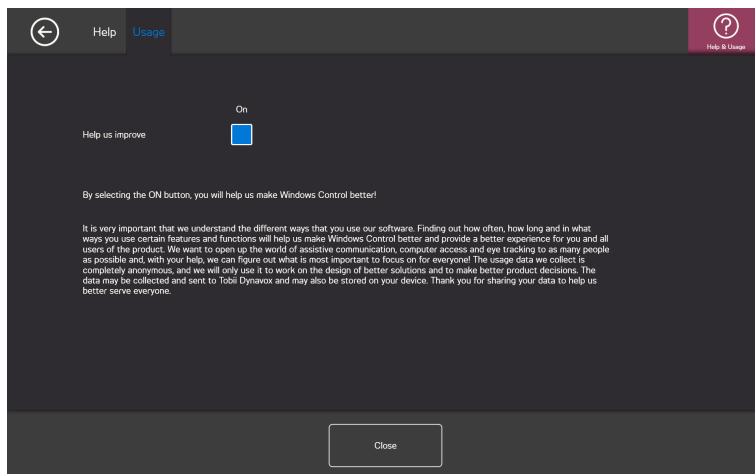


Hjálpðu okkur að bæta: Til að hjálpa Tobii Dynavox að bæta hugbúnaðinn stillirðu á **kveikt**.

4.4 Virkjun og svörun



4.4.1 Virkjunarflipi

4.4.1.1 Augntillits stillingar

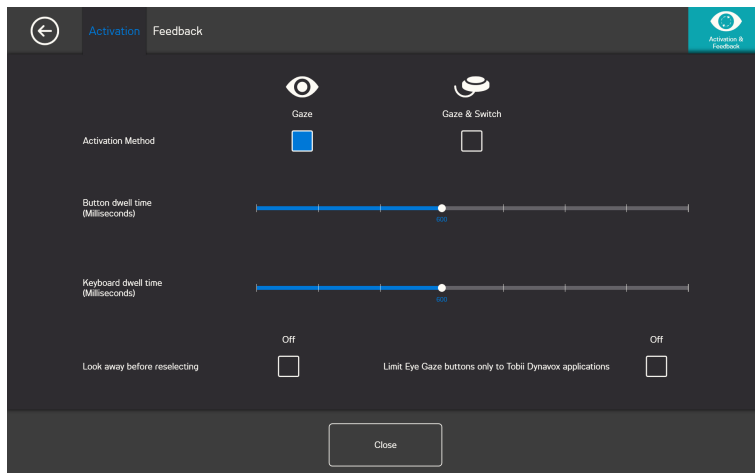

Í virkjunarflipa, eru allar stillingar fyrir hvernig notandi hefur samskipti við Windows Control. Hvort notandi muni nota augntillit og rofa til að framkvæma skipanirnar og hvernig samskiptin eiga að fara fram.

Virkjunaraðferð:

- **Augntillit** - veldu augntillit til að nota augntillits stöðu til að virkja þysjunaraðgerðina sem endar með framkvæmd óskaðs verkefnis.
- **Augntillit og rofi** - veldu rofa til að nota augntillits stöðu til að virkja þysjunaraðgerðina sem endar með framkvæmd óskaðs verkefnis.

Hnappadvaltimi (millisekúndur)

Hnappadvaltima má stilla á 8 mismunandi stig, horfðu bara á óskaða stöðu til að breyta stillingunni. Ef hnappadvaltima er breytt, breytir það hversu lengi notandi þarf að hafa augun á hnappnum áður en verkefni er framkvæmt. Skalinn sýnir lægri hnappadvaltima til vinstri og hærri til hægri.

Lyklaborðsdváltími (millisekúndur)

Lyklaborðsdváltíma má stilla á 8 mismunandi stig, horfðu bara á óskaða stöðu til að breyta stillingunni. Ef lyklaborðsdváltíma er breytt, breytir það hversu lengi notandi þarf að hafa augun á lykli á lyklaborði áður en hann er framkvæmdur. Skalinn sýnir lægri lyklaborðsdváltíma til vinstri og hærri til hægri.


Líttu af áður en þú velur aftur

- **Kveikja** - Veldu **kveikja** til að virkja **Líttu af áður en þú velur aftur**. Þegar **kveikt** er á þessu þarf notandi að líta frá virku augntillitssvæði til að geta virkjað sama augntillitssvæði aftur.
- **Slökkva** - Veldu **slökkva** til að afvirkja **Líttu af áður en þú velur aftur**. Þegar **slökkt** er á þessu, verður virkt augntillitssvæði virkjað aftur og aftur eins lengi og notandi heldur áfram að horfa á augntillitssvæðið. (Sjálfvalið)

takmarka augntillits hnappa við Tobii Dynavox öpp

- **Kveikja** - Veldu **kveikja** til að virkja **takmarka augntillits hnappa við Tobii Dynavox öpp**. Þegar **kveikt** er á þessu, verður virkt augntillits svæði virkjað, skipunin sem tengist svæðinu framkvæmd, og Tobii Dynavox svörunarvxlverkunin verður **aðeins** sýnd í Tobii Dynavox hugbúnaði og öppum.
- **Slökkva** - Veldu **slökkva** til að afvirkja **takmarka augntillits hnappa við Tobii Dynavox öpp**. Þegar **slökkt** er á þessu, verður virkt augntillits svæði virkjað, skipunin sem tengist svæðinu framkvæmd, og Tobii Dynavox svörunarvxlverkunin verður **aðeins** sýnd í Tobii Dynavox og öllum hugbúnaði og öppum þriðja aðila. (Sjálfvalið)

4.4.1.2 Stillingar augntillits og rofa

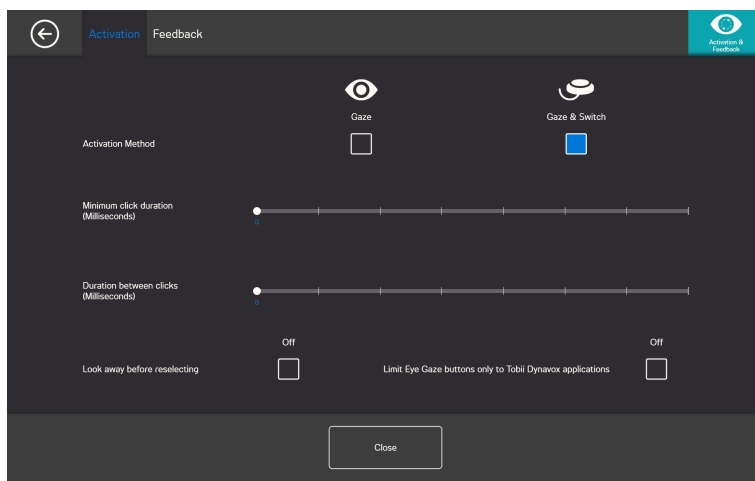

Lágmarks smellitími: Lengd tíma sem notandi þarf að ýta á rofann í áður en valið er.

Tímalengd á milli smella: Lengd „dauðs tíma“ sem Windows Control biður áður en frekari inntak frá rofa er leyft.


Líttu af áður en þú velur aftur

- **Kveikja** - Veldu **kveikja** til að virkja **Líttu af áður en þú velur aftur**. Þegar **kveikt** er á þessu þarf notandi að líta frá virku augntillitssvæði til að geta virkjað sama augntillitssvæði aftur.
- **Slökkva** - Veldu **slökkva** til að afvirkja **Líttu af áður en þú velur aftur**. Þegar **slökkt** er á þessu, verður virkt augntillitssvæði virkjað aftur og aftur eins lengi og notandi heldur áfram að horfa á augntillitssvæðið. (Sjálfvalið)

takmarka augntillits hnappa við Tobii Dynavox öpp

- **Kveikja** - Veldu **kveikja** til að virkja **takmarka augntillits hnappa við Tobii Dynavox öpp**. Þegar **kveikt** er á þessu, verður virkt augntillits svæði virkjað, skipunin sem tengist svæðinu framkvæmd, og Tobii Dynavox svörunarvxlverkunin verður **aðeins** sýnd í Tobii Dynavox hugbúnaði og öppum.
- **Slökkva** - Veldu **slökkva** til að afvirkja **takmarka augntillits hnappa við Tobii Dynavox öpp**. Þegar **slökkt** er á þessu, verður virkt augntillits svæði virkjað, skipunin sem tengist svæðinu framkvæmd, og Tobii Dynavox svörunarvxlverkunin verður **aðeins** sýnd í Tobii Dynavox og öllum hugbúnaði og öppum þriðja aðila. (Sjálfvalið)


4.4.2 Svörunarflipinn

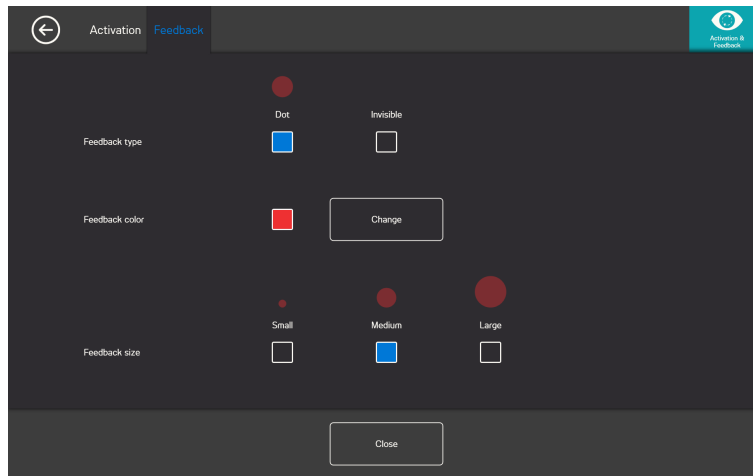

Gerð svörunar:

- **Klukka** - sjónræn svörun er klukka sem fyllist á meðan á tilteknum hnappadvaltíma stendur. Þegar klukkan hefur fyllst, er verkefnið framkvæmt.
- **Punktur** - sjónræn svörun er punktur sem dregst saman fyrir augntillits notendur eða stöðugur punktur fyrir rofa notendur þegar verkefni er framkvæmt.
- **Ósýnilegur** - engin sjónræn svörun verður sýnd á skjánum þegar verkefni er framkvæmt.

Litur svörunar: Veldu **breyta** hnappinn til að velja lit svörunar. Fyrir tiltæka liti, sjá *Skýringarmynd 4.1 Tiltækir litir*, síða 34.

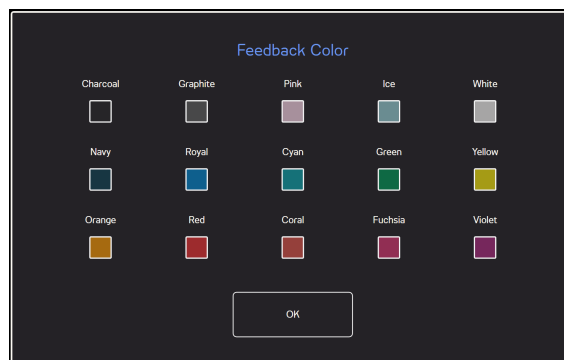

Skýringarmynd 4.1 Tiltækir litir


Stærð svörunar: Hægt er að stilla inn þrjú (3) mismunandi gildi fyrir stærð svörunar valinnar gerðar svörunar.

- **Lítið**
- **Meðal**
- **Stór**

4.5 verkefnaslánna




4.5.1 Verkefnasláin

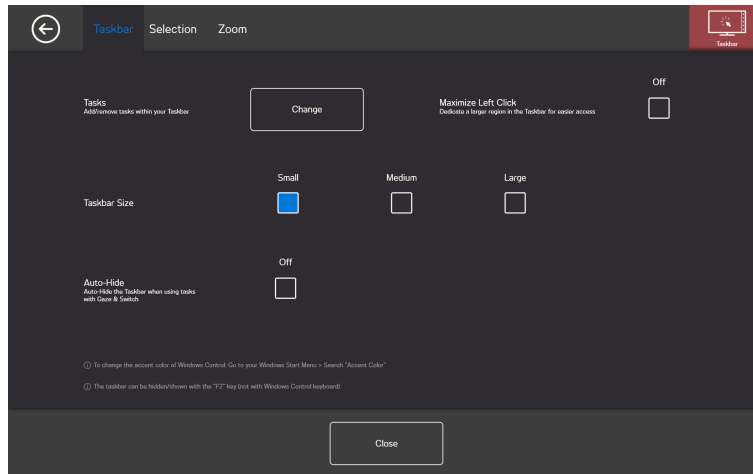

4.5.1.1 Verkefni

Veldu **breyta** hnappinn til að fá aðgang að sprettiglugga þar sem hægt er að bæta við eða fjarlægja verkefni úr verkefnaslá.

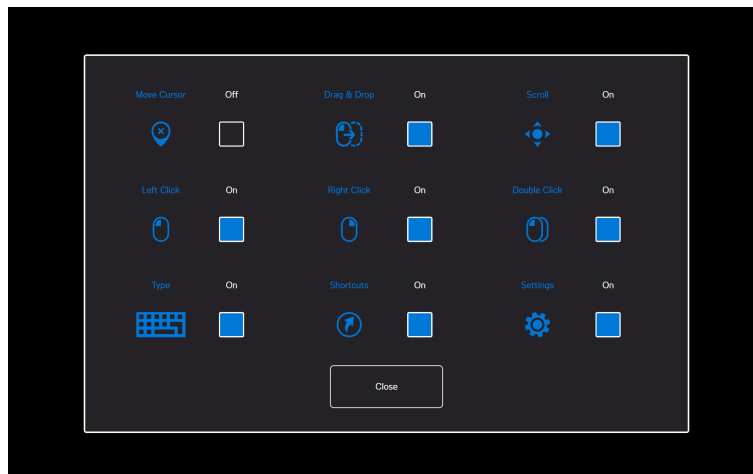

Veldu hvaða verkefni eiga að vera á verkefnaslánni. Fyrir frekari upplýsingar um verkefnin, sjá 3.4 *Venjuleg verkefni*, síða 13.



Athugaðu að því fleiri verkefni sem eru á verkefnaslánni því erfiðara getur verið að velja þau á minni skjáum.

Veldu **kveikt** í gátreitum við hlið hvers verkefnis til að virkja notkun þess á verkefnaslánni.

Veldu **slökkt** í gátreitum við hlið hvers verkefnis til að afvirkja notkun þess og sýnileika á verkefnaslánni.




4.5.1.2 hámarka vinstri smell

Ef hámarka vinstri smell er valið getur það vikkað virkt svæði vinstri smells verkefnisins á verkefnaslánni mikið, sem gerir mun auðveldara að velja vinstri smell verkefnið.

Notaðu **Hámarka vinstri smell** eiginleikann til að vikka og leggja áherslu á vinstri smell verkefnið á verkefnaslánni. Ef **slökkt** er valið, verða öll valin verkefni með jafnmikið pláss á verkefnaslánni. Ef **kveikt** er valið, verða öll verkefni önnur en vinstri smellur áfram með upphaflega/minni stærð og vinstri smellur verkefni fyllir upp í svæðið sem eftir er á verkefnaslánni.

4.5.1.3 Stærð verkefnaslár

Með stærð verkefnaslár er hægt að breyta stærð verkefnaslárinnar á milli þriggja (3) stærða:

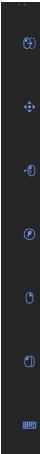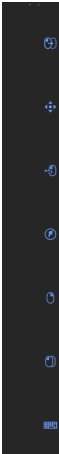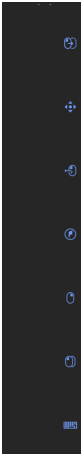Lítið	Meðal	Stór
		

Ef valin er stærri stærð fyrir verkefnaslánna mun það stækka virkt svæði umhverfis slánna svo auðveldara verður fyrir notanda að velja verkefni. Raunverulegt virkt svæði fer út fyrir skjáinn og tákinn fyrir verkefnin eru alltaf í miðju virks svæðis.


4.5.1.4 Fela sjálfkrafa

Felur verkefnaslánna sjálfkrafa Tiltækt fyrir öll festiverkefni og fyrir öll verkefni í rofavirkjunarstillingu.

Veldu **kveikt** til að fela sjálfkrafa.

Veldu **slökkt** til að hætta að fela sjálfkrafa.

4.5.2 Valflipinn

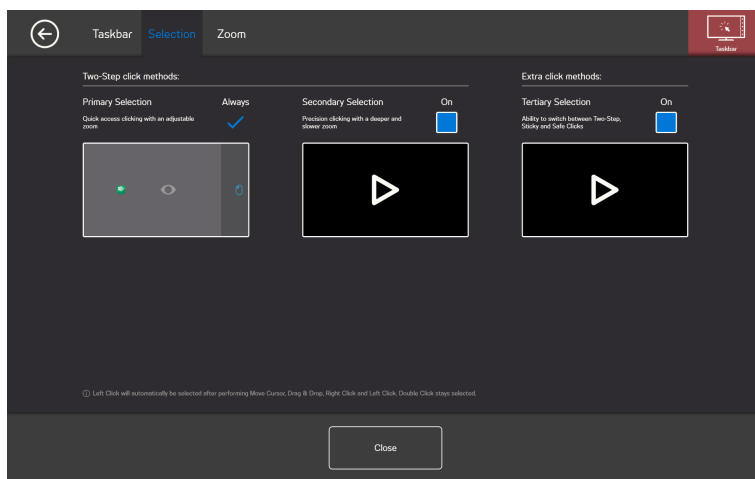

4.5.2.1 Aðalval

Aðalval er alltaf virkt og ekki er hægt að afvirkja það.


4.5.2.2 Annað val

Sjálfvalið er að alltaf er **slökkt** á öðru vali. Ef **kveikt** er valið verður annað val tiltækt.

4.5.2.3 Þriðja val

Sjálfvalið er að alltaf er **slökkt** á þriðja vali. Ef **kveikt** er valið verður þriðja val tiltækt. Með þriðja vali verða festi- og örugg smell verkefni tiltæk. Fyrir frekari upplýsingar, sjá 3.5 *Festiverkefni*, síða 15 og 3.6 *Öruggur smellur*, síða 16.

4.5.3 Pysjunar flipinn

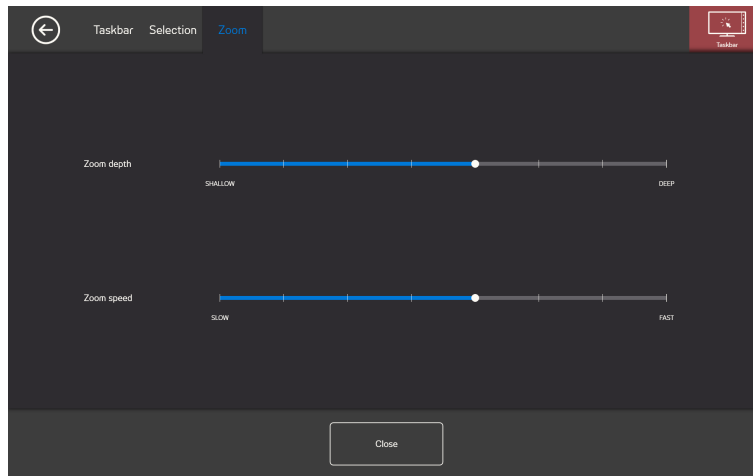

Pysjunardýpt

Pysjunardýpt má stilla á 8 mismunandi stig, horfðu bara á óskaða stöðu til að breyta stillingunni. Ef dýptinni er breytt, breytir það hversu djúpt pysjunin fer áður en verkefnið er framkvæmt. Því lengra til hægri á skalanum því dýpri verður pysjunin.





Ef dýptin er stillt á núll verður ekkert pysjað. Það verður samstundis smellur með aðalvali. Með aukavali verður enn pysjað.

Hraði pysjunar

Pysjunarhraði má stilla á 8 mismunandi stig, horfðu bara á óskaða stöðu til að breyta stillingunni. Ef hraðanum er breytt, hefur það áhrif á hversu hröð pysjunin er áður en verkefnið er framkvæmt. Því lengra til hægri á skalanum því hraðari verður pysjunin.

4.6 Lyklaborð

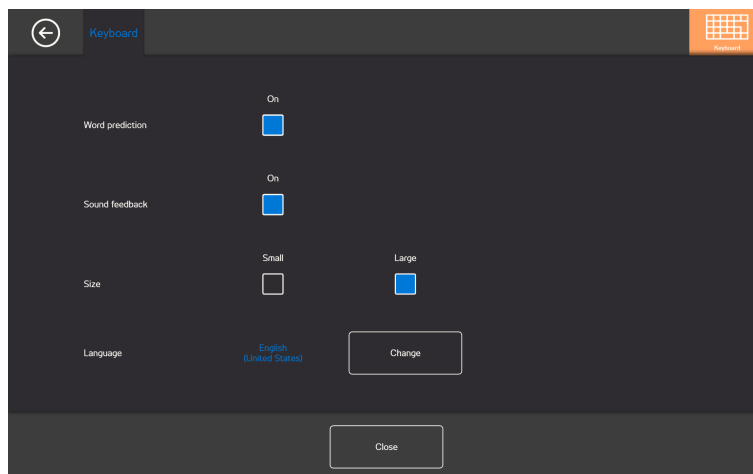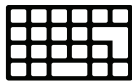

Orðaspá

- **Kveikja** - veldu **kveikja** til að virkja orðaspá þegar þú notar augntillits lyklaborð. (Sjálfvalið)

- **Slökkva** - veldu **slökkva** til að afvirkja orðaspá þegar þú notar augntillits lyklaborð.

Hljóðsvörun

- **Kveikja** - veldu **kveikja** til að virkja hljóðsvörun þegar þú velur hnapp á augntillits lyklaborðinu.
- **Slökkva** - veldu **slökkva** til að afvirkja hljóðsvörun þegar þú velur hnapp á augntillits lyklaborðinu.

Stærð

- **Lítið** - veldu lítið til að nota minna augntillits lyklaborð, sem nær yfir minna en hálfan skjáinn, sjá *Skýringarmynd 4.2 Lítil uppsetning lyklaborðs (sjálfvalið)*, síða 38.
- **Stórt** - veldu stórt til að nota stærra augntillits lyklaborð, sem nær yfir hálfan skjáinn, sjá *Skýringarmynd 4.3 Stór uppsetning lyklaborðs*, síða 38.



Skýringarmynd 4.2 Lítil uppsetning lyklaborðs (sjálfvalið)



Skýringarmynd 4.3 Stór uppsetning lyklaborðs

Tungumál

Valin tungumálauppsetning lyklaborðs er sýnt. Veldu **breyta** hnappinn til að breyta uppsetningu lyklaborðs í annað tungumál. Það eru þó nokkrar mismunandi tungumálauppsetningar lyklaborðs tiltækar.

5 Virtual Remote

5.1 Virtual Remote Yfirlit



Skýringarmynd 5.1 Yfirlit yfir Virtual Remote

Virtual Remote er skipt í tvö svæði:

- Virtual Remote Valmynd, fyrir frekari upplýsingar sjá 5.1.1 Virtual Remote Valmyndin, síða 39.
- Virk fjarstýring, fyrir frekari upplýsingar sjá 5.1.2 Virk fjarstýring, síða 40.

5.1.1 Virtual Remote Valmyndin




Skýringarmynd 5.2 Virtual Remote valmyndin

Táknin í Virtual Remote leiðarvisinum eru:

Verkefnahnappur	Aðgerð	Lýsing
+	Bæta við fjarstýringu	Veldu þessa aðgerð til að bæta við nýrri fjarstýringu, sjá 5.2.4 Bæta við fjarstýringu , síða 42.
i	Upplýsingar	Veldu þessa aðgerð til að opna upplýsingasíðu, sjá 5.2.6 Upplýsingar , síða 58.
<	Vinstri	Veldu þessa aðgerð til að virkja fjarstýringuna sem er til vinstri við virka fjarstýringu.
>	Hægri	Veldu þessa aðgerð til að virkja fjarstýringuna sem er til hægri við virka fjarstýringu.
✎	Breytingarstilling	Veldu þessa aðgerð til að fara í breytingarstillingu á virkri fjarstýringu, sjá 5.2.5 Breytingarstilling , síða 49.
✕	Loka/fela	Veldu þess aðgerð til að fela Virtual Remote appið.

5.1.2 Virk fjarstýring

Virk fjarstýring er alltaf fjarstýringin sem er í miðjunni á Virtual Remote valmyndinni, sjá *Skýringarmynd 5.3 Virk fjarstýring*.

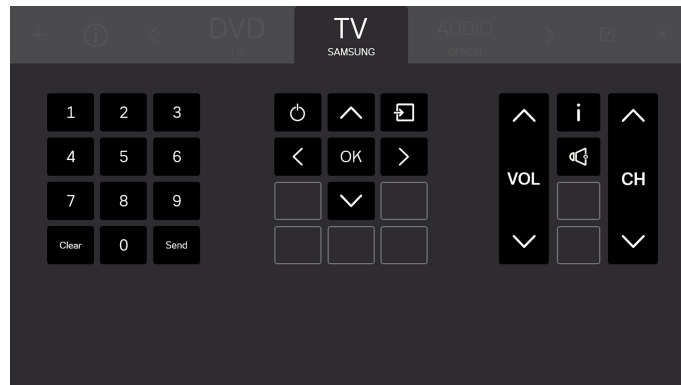


Skýringarmynd 5.3 Virk fjarstýring



Allir hnappar sem eru sýnilegir á skjánum tilheyra virkri fjarstýringu.

Þú getur líka séð nöfnin á allt að tveimur (2) tiltækum fjarstýringum, ein hvoru megin við virku fjarstýringuna. Þú sérð aðeins nafn en ekki hnappa fyrir tiltækar fjarstýringar þar til þú virkjar þær.

5.1.3 Hnapparnir

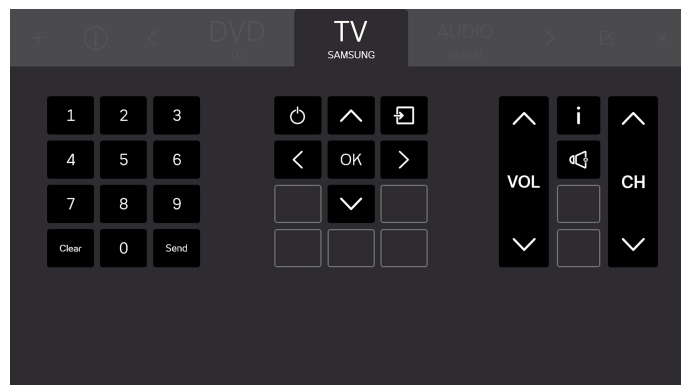


Skýringarmynd 5.4 Hnapparnir

Allir hnappar sem eru sýnilegir á skjánum tilheyra virkri fjarstýringu. Það eru tvær (2) gerðir hnappa á fjarstýringunni.


- Virkir hnappar , sjá *Skýringarmynd 5.5 Virkir hnappar, síða 41*
- Óvirkir hnappar , sjá *Skýringarmynd 5.6 Óvirkir hnappar, síða 41*



Magn hnappa og eiginleika hnappanna er mismunandi eftir því hverskonar kerfi notandi vill stjórna.

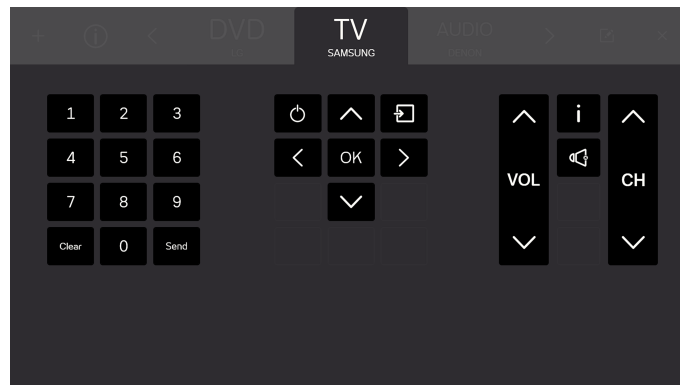

Skýringarmynd 5.5 Virkir hnappar

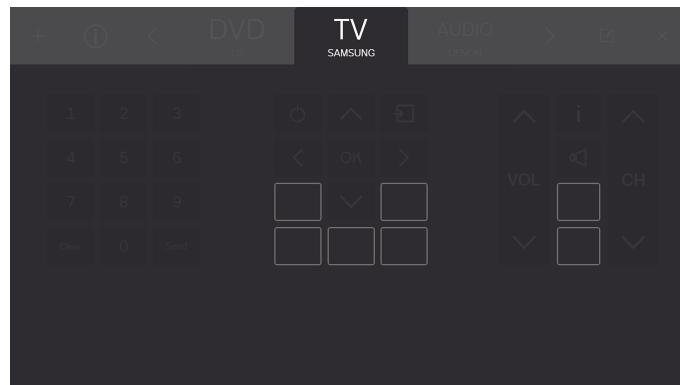

Skýringarmynd 5.6 Óvirkir hnappar

5.2 Notkun Tobii Dynavox Virtual Remote


Tobii Dynavox Virtual Remote gerir það mögulegt fyrir notanda að stjórna sjónvarpi, DVD-spilara, hljómflutningstæki o.s.frv. frá tækinu.



Allir eiginleikar í Virtual Remote eru snerti- og músar-virkjaðir sem gerir umönnunaraðila eða aðstoðarmanni auðveldara um vik að aðstoða ef þess þarf.

5.2.1 Fyrsta ræsing

Stuttur leiðarvisir kynnir notandann fyrir uppsetningu á Virtual Remote hugbúnaðinum. Fylgdu bara leiðbeiningunum á skjánum.

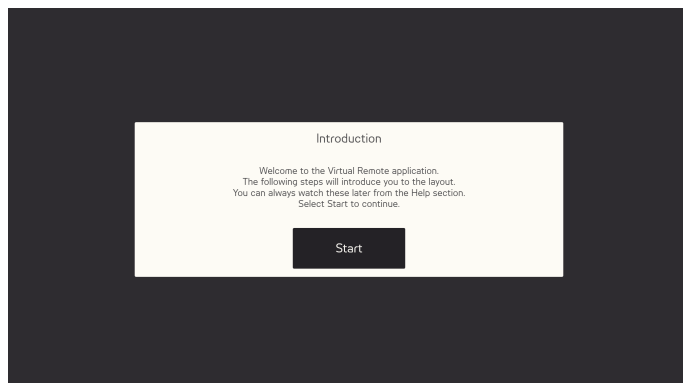

Skýringarmynd 5.7 Virtual Remote kynningarskjáinn.

5.2.2 Breyta virkri fjarstýringu

Til að breyta virkri fjarstýringu:

- Veldu annað nafnið hægra eða vinstra megin við virka fjarstýringu.
- Eða notaðu  og  hnappinn til að skruna í gegnum tiltækar fjarstýringar.



Virk fjarstýring er alltaf fjarstýringin sem er í miðjunni á Virtual Remote valmyndinni.


5.2.3 Hnappar á fjarstýringu notaðir

Veldu bara hnappinn sem þú vilt nota til að senda merki til tækisins. Hljóðstyrkshnappar eru venjulega stilltir þannig að þeir sendi út samfellt merki eins lengi og hnappurinn er valinn. Fyrir frekari upplýsingar, sjá 5.2.5.3.1 *Lengd merkis, síða 53*.

Til að setja inn númer sem er stærra en 9 (þ.e. margir stafir), fylgdu þessu ferli.

Númer stærri en 9 skrefalisti

1. Veldu öll númer til að senda inn röðina sem á að senda. Öll valin númer verða sýnileg í hvítum kassa undir númerahluta fjarstýringarinnar.

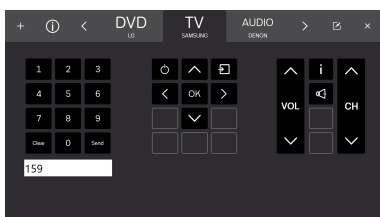

2. Veldu **senda** hnappinn til að senda merkið til tækisins eða **hreinsa** til að eyða öllum völdum númerum.

5.2.4 Bæta við fjarstýringu




Það eru tvær (2) leiðir til að bæta við nýrri fjarstýringu.

5.2.4.1 Bættu við fyrirframforritaðri fjarstýringu


Til að bæta við nýrri fyrirframforritaðri fjarstýringu, skaltu fylgja þessu ferli:

Bæta við fyrirframforritaðri fjarstýringu skrefalisti

1. Veldu  úr valmyndinni.
2. Veldu fyrirframforrituð hnappinn

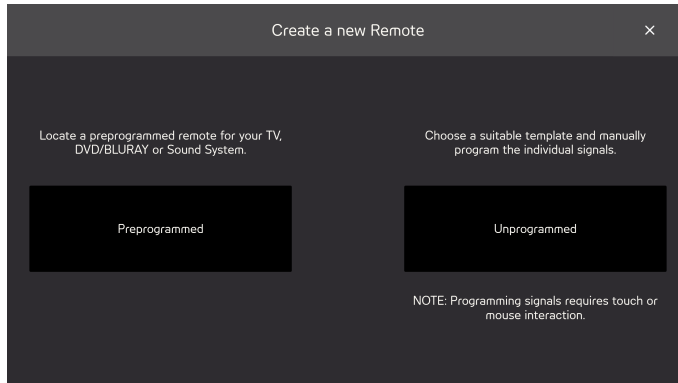


3. Veldu gerð fyrirframforritaðrar fjarstýringar
 - SJÓNVARP
 - DVD/BLURAY
 - HLJÓÐ

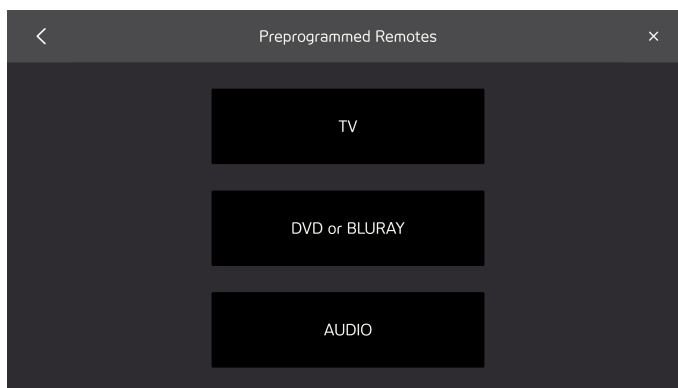


4. Veldu tegundina úr listanum



Ef þú finnur ekki vörumerkið skaltu velja **annað**, fyrir frekari upplýsingar sjá 5.2.4.1.1 *Aðrar fjarstýringar, síða 45*

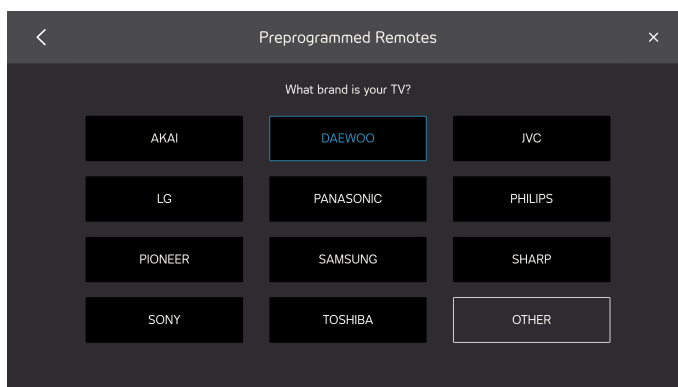


5. Þegar vörumerki er valið, mun sprettigluggi sýna upplýsingar um hversu margar fyrirframforritaðar fjarstýringar eru tiltækar.

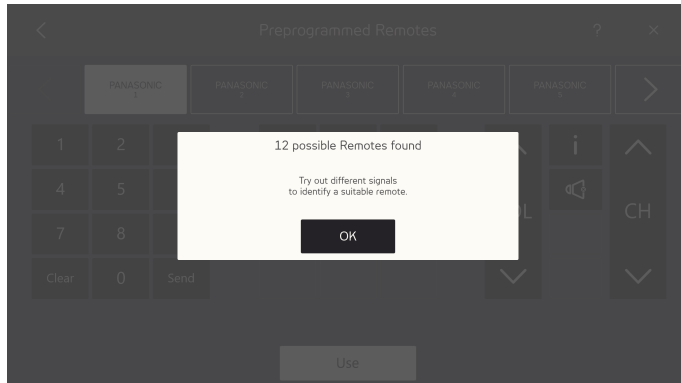

Veldu **OK** hnappinn.


6. Veldu fjarstýringu.

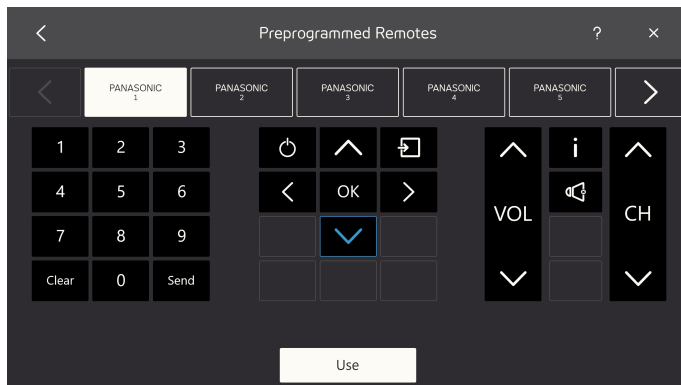

7. Veldu mismunandi merki á valinni fjarstýringu til að bera kennsl á hentuga fjarstýringu.
8. Endurtaktu skref 6 og 7 þar til sú fjarstýring sem hentar best er fundin.



Notaðu

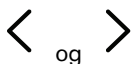


og




hnappana til að skruna í gegnum tiltækar fjarstýringar.

9. Veldu hentugustu fjarstýringuna.
10. Veldu **nota** hnappinn.

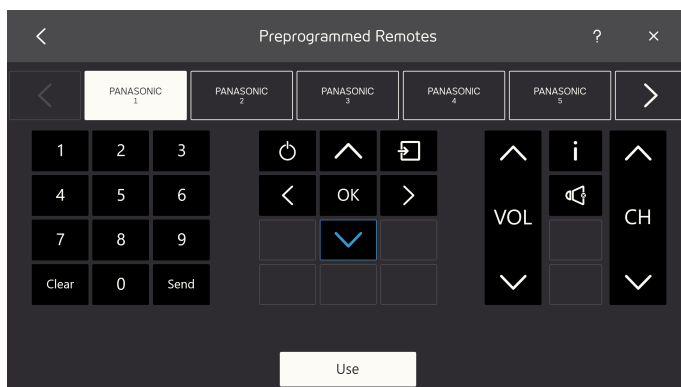

11. Valin fjarstýring verður afrituð yfir á tiltæka fjarstýringu.

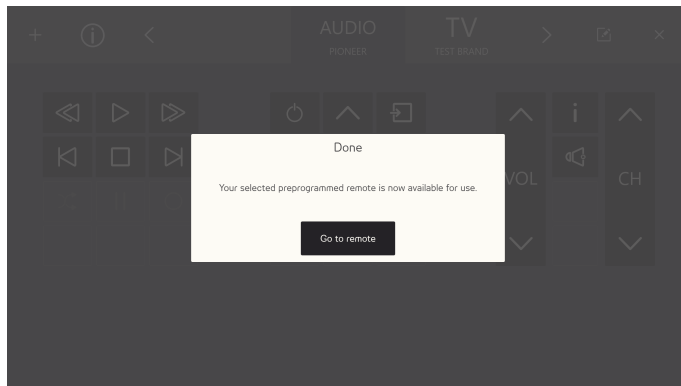


Veldu **fara í fjarstýringu** hnappinn til að ljúka.

5.2.4.1.1 Aðrar fjarstýringar


Til að bæta við öðrum fjarstýringum, skaltu fylgja þessu ferli:

Bæta við öðrum fjarstýringum skrefalisti


1. Fylgdu skrefum 1 — 3 í skrefalistanum: *Bæta við fyrirframforritaðri fjarstýringu skrefalisti, síða 43.*
2. Veldu **Annað** hnappinn.
3. Settu heiti vörumerkisins inn í textareitinn.

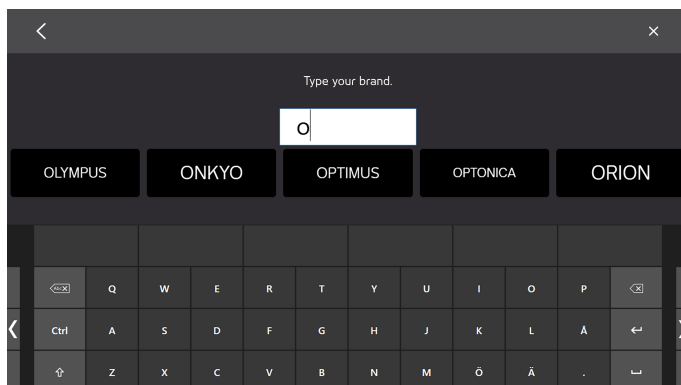


Til að þrengja leitarniðurstöðurnar, skaltu slá inn fleiri stafi.

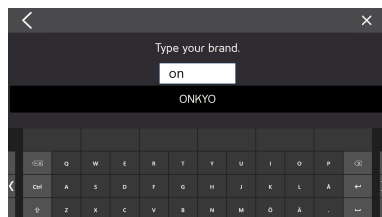

4. Veldu vörumerkið.

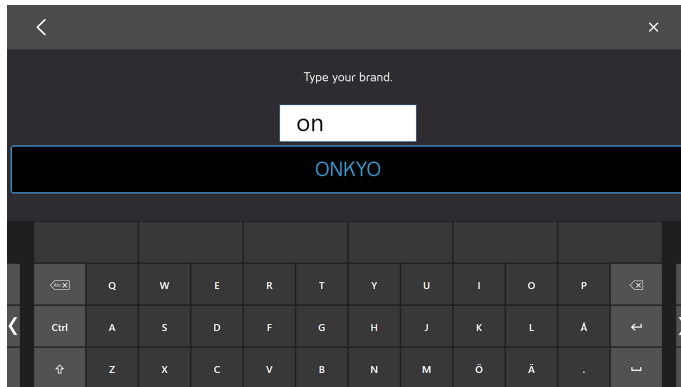


5. Þegar vörumerki er valið, mun sprettluggi sýna upplýsingar um hversu margar fyrirframforritaðar fjarstýringar eru tiltækar.

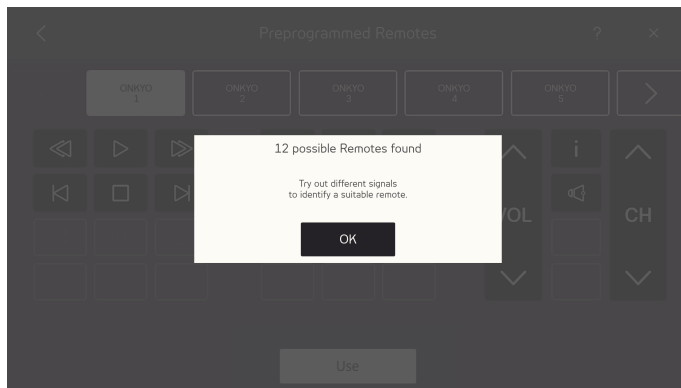

Veldu **OK** hnappinn.


6. Veldu fjarstýringu.

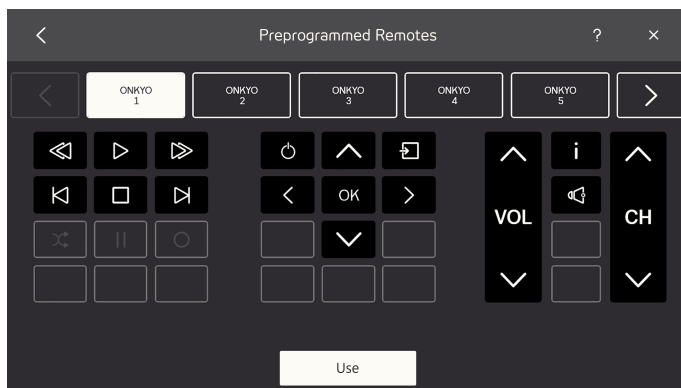

7. Prufaðu mismunandi merki á valinni fjarstýringu til að bera kennsl á hentuga fjarstýringu.
8. Endurtaktu skref 6 og 7 þar til hentugasta fjarstýringin er fundin.



Notaðu

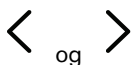


og




hnappana til að skruna í gegnum tiltækar fjarstýringar.

9. Veldu hentugustu fjarstýringuna.

10. Veldu **nota** hnappinn.

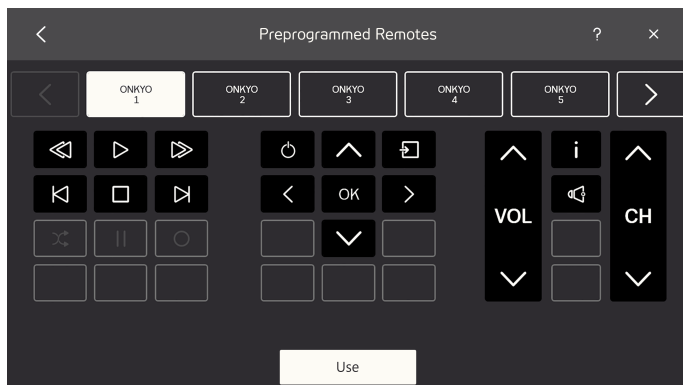

11. Valin fjarstýring verður afrituð yfir á tiltæka fjarstýringu.

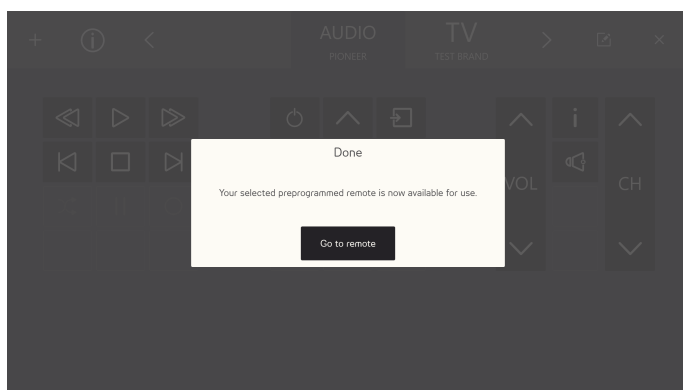


Veldu **fara í fjarstýringu** hnappinn til að ljúka.

5.2.4.2 Bæta við óforritaðri fjarstýringu

Til að bæta við nýrri óforritaðri fjarstýringu, skaltu fylgja þessu ferli:


Bæta við óforritaðri fjarstýringu skrefalisti

1. Veldu  úr valmyndinni.
2. Veldu óforrituð hnappinn

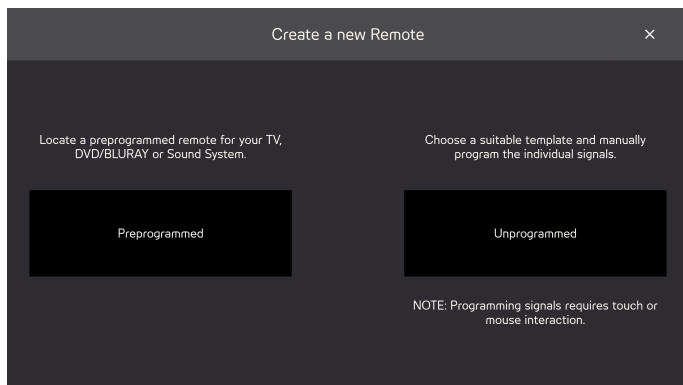


3. Veldu gerð óforritaðrar fjarstýringar
 - SJÓNVARP
 - HLJÓÐ

- MYNDLYKILL
- DVD eða BLURAY
- TÓMT SNIÐMÁT

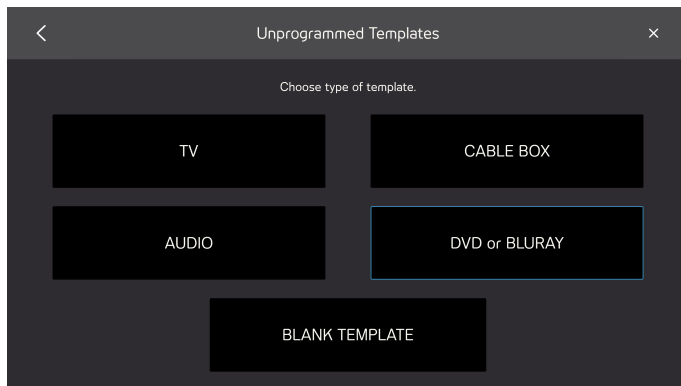


4. Veldu hnapp til að forrita.

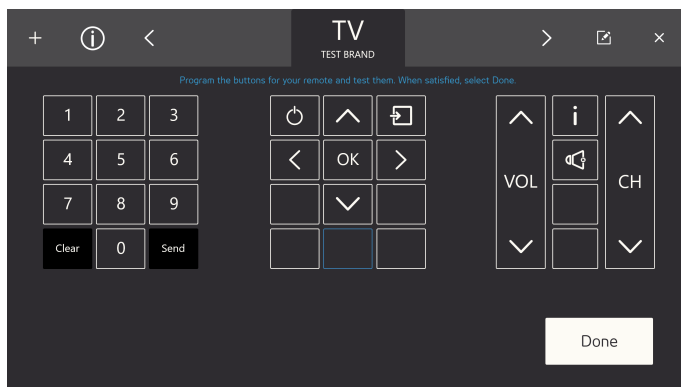


Tiltæk tákn verða mismunandi eftir því hverskonar gerð af fjarstýringu var falin í skrefi 3.

5. Veldu hnapp til að forrita.
6. Beindu fjarstýringunni að Tobii Dynavox IR móttakara og ýttu á óskaðan hnapp á fjarstýringunni sem þú vilt að Virtual Remote læri.

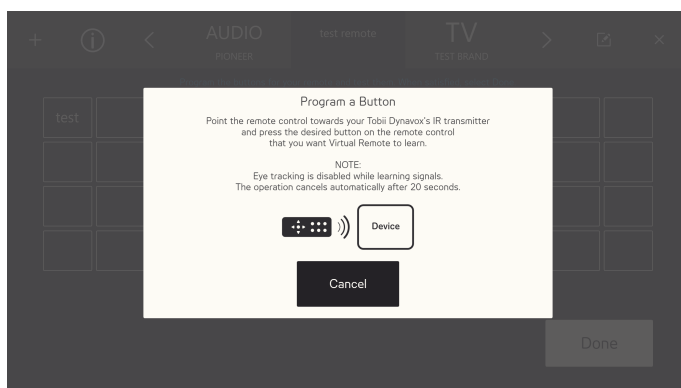

7. Þegar merkið er vistað í Virtual Remote birtist **lokið** sprettiglugginn.

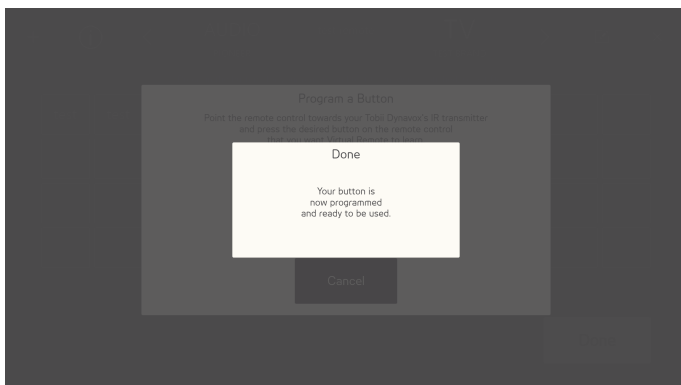

 Sprettiglugginn lokast sjálfkrafa eftir nokkrar sekúndur.

8. Endurtaktu skref 5 — 7 þar til þú hefur forritað alla hnappa sem þú þarft á fjarstýringunni.

 Til að breyta eða eyða hnöppum á fjarstýringunni þarft þú að ljúka forrituninni og fara í breytingarstillingu. Fyrir frekari upplýsingar um breytingarstillingu, sjá 5.2.5 *Breytingarstilling*, síða 49.

9. Veldu **lokið** til að ljúka.



5.2.5


Breytingarstilling



Með breytingarstillingu getur þú breytt fyrirliggjandi fjarstýringum. Passaðu að fjarstýringin sem þú vilt breyta sé virka fjarstýringin. Til að fara í breytingarstillingu skaltu fylgja þessu ferli:

Breytingarstilling skrefalisti

1. Veldu  (breytingarstilling) hnappinn.

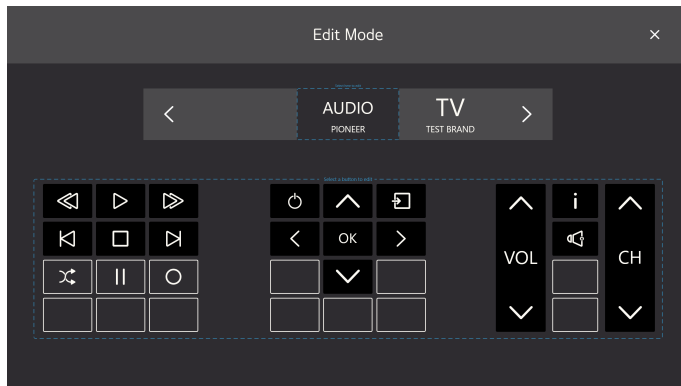


2. Veldu hvaða hluta fjarstýringarinnar þú vilt gera breytingar á. Eftirfarandi breytingar er hægt að gera:
 - Breyta nafni fjarstýringar, sjá 5.2.5.1 *Breyta nafni fjarstýringar, síða 50*
 - Eyða fjarstýringu, sjá 5.2.5.2 *Eyða fjarstýringu, síða 51*
 - Gera breytingar á fyrirliggjandi virkum hnappi, sjá 5.2.5.3 *Gera breytingar á fyrirliggjandi virkum hnappi*
 - Gera breytingar á fyrirliggjandi óforrituðum hnappi, sjá 5.2.5.4 *Gera breytingar á fyrirliggjandi óforrituðum hnappi, síða 55*
 - Bæta við nýjum hnappi á tomt svæði, sjá 5.2.5.5 *Bæta við nýjum hnappi á tomt svæði, síða 57*

5.2.5.1 Breyta nafni fjarstýringar

Til að breyta nafni fjarstýringar, skaltu fylgja þessu ferli:


Breyta nafni fjarstýringar

1. Veldu  (breytingarstilling) hnappinn.

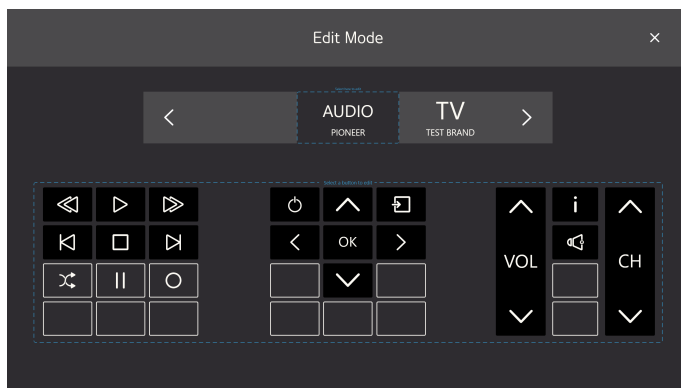

2. Veldu „Velja hér til að breyta“ kassann utan um nafn fjarstýringarinnar.


3. Veldu **endurmerkja** hnappinn.

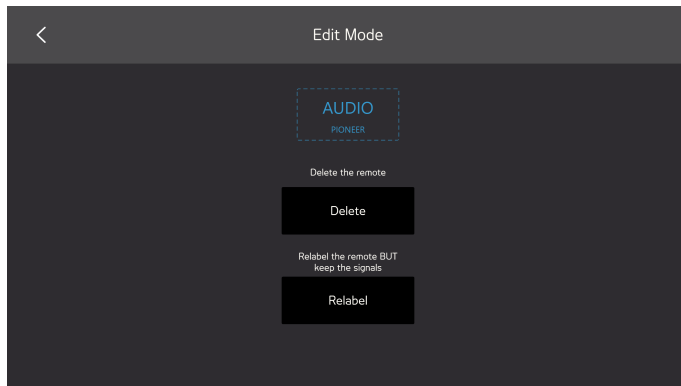

4. Sláðu inn nýjan merkimiða.



Passaðu að nafnið sé stutt.

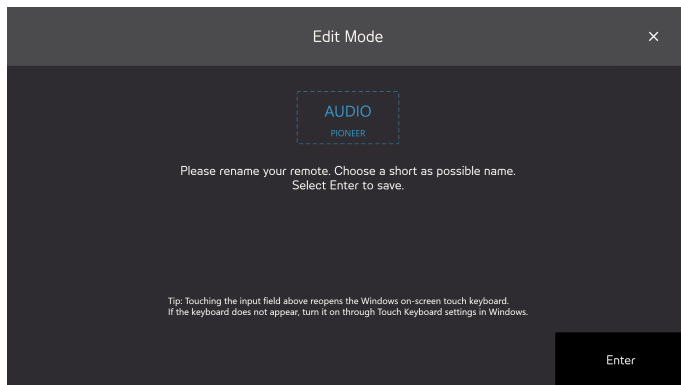

5. Veldu **Enter/færslulykil** á lyklaborðinu til að samþykkja textann.




6. Veldu táknid til að fara úr breytingarstillingu.

5.2.5.2 Eyða fjarstýringu


Til að eyða fjarstýringu, skaltu fylgja þessu ferli:

Eyða fjarstýringu skrefalisti


1. Veldu  (breytingarstilling) hnappinn.

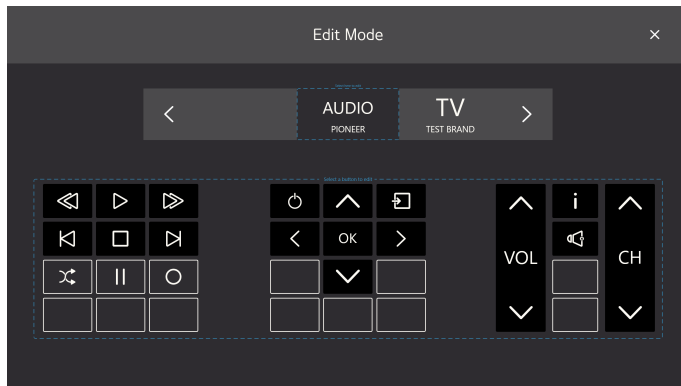

2. Veldu „Velja hér til að breyta“ kassann utan um nafn fjarstýringarinnar.
3. Veldu **eyða** hnappinn.

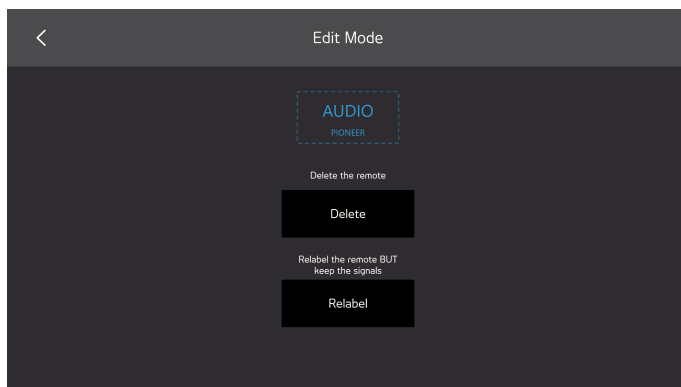

4. Veldu:
 - **Já** til að eyða
 - **Nei** til að hætta við

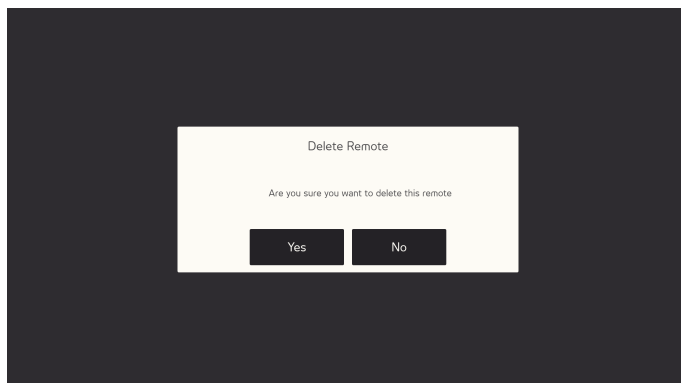


5. Veldu  táknið til að fara úr breytingarstillingu.

5.2.5.3 Gera breytingar á fyrirliggjandi virkum hnappi


Til að gera breytingar á fyrirliggjandi virkum hnappi, skaltu fylgja þessu ferli:

Gera breytingar á fyrirbyggjandi virkum hnappi skrefalisti

1. Veldu  (breytingarstilling) hnappinn.

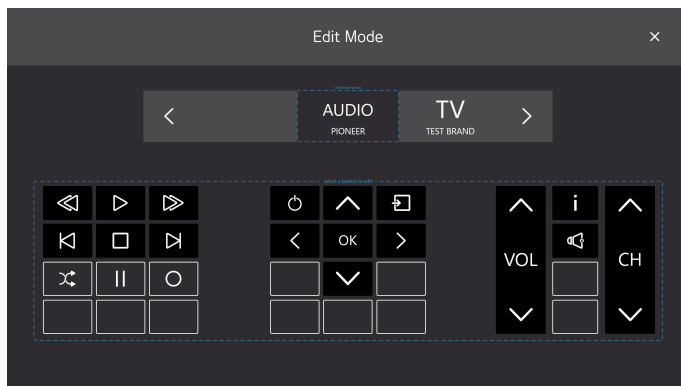

2. Veldu hnapp, með svörtum bakgrunni og tákni eða texta, t.d. , í „veldu hnapp til að breyta“ kassanum í kringum fjarstýringarhnappana.
3. Veldu eina eftirfarandi aðgerða
 - Lengd merkis, sjá 5.2.5.3.1 *Lengd merkis*
 - Nýtt merki, sjá 5.2.5.3.2 *Nýtt merki, síða 54*
 - Breyta texta, sjá 5.2.5.3.3 *Breyta texta, síða 54*
 - Breyta tákni, sjá 5.2.5.3.4 *Breyta tákni, síða 55*
 - Hreinsa hnapp, eyðir öllum upplýsingum sem geymdar eru á hnappinum.

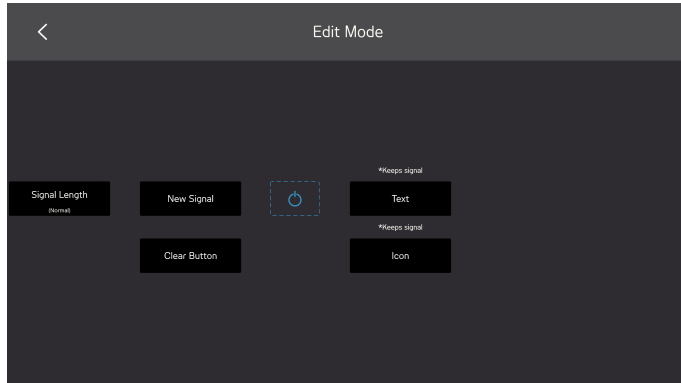

4. Veldu  táknið til að fara úr breytingarstillingu.

5.2.5.3.1 Lengd merkis


Til þess að móttökueiningin skilji merkið sem sent er frá Virtual Remote, gætir þú þurft að breyta lengd merkis. Eins þarf að stilla lengd merkis ef þú vilt að hnappurinn sendi samfellt merki á meðan þú ert með hnappinn valinn.

Veldu einn (1) eftirfarandi valkosta:

- Venjulegt — sendir IR merkið í stuttri lotu.
- Langt — sendir IR merkið í eina (1) sekúndu.
- Sérstaklega langt — sendir IR merkið í tvær (2) sekúndur.
- Samfellt — sendir merkið jafn lengi og hnappurinn er valinn.



Þetta er dæmigerð stilling fyrir hljóðstyrkshnapp til dæmis

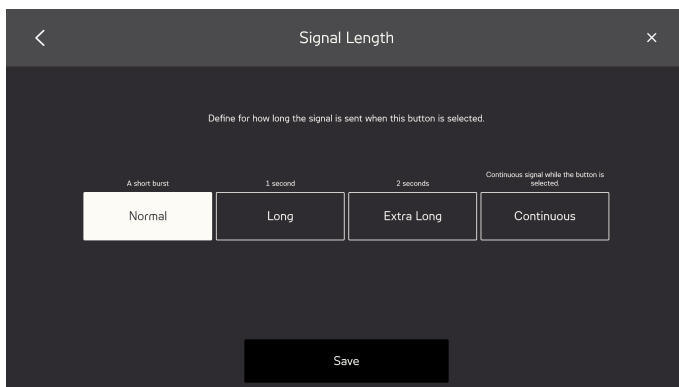


5.2.5.3.2 Nýtt merki


Til að forrita nýtt merki fyrir hnapp, skaltu fylgja þessu ferli:

Nýtt merki skrefalisti

1. Beindu fjarstýringunni að Tobii Dynavox IR móttakara og ýttu á óskaðan hnapp á fjarstýringunni sem þú vilt að Virtual Remote læri.

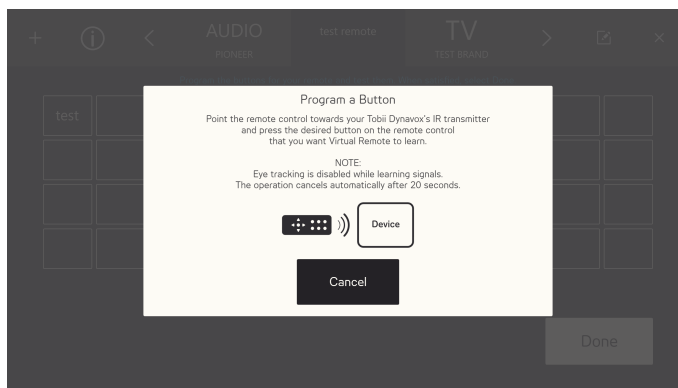

2. Þegar merkið er vistað í Virtual Remote birtist **lokið** sprettiglugginn.

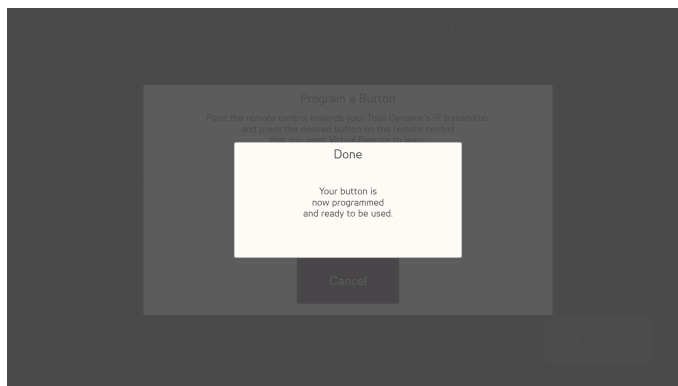


Sprettiglugginn lokast sjálfkrafa eftir nokkrar sekúndur.

5.2.5.3.3 Breyta texta

Til að breyta texta, skaltu fylgja þessu ferli:

Breyta texta skrefalisti

1. Sláðu inn textann sem ætti að vera á hnappinum.

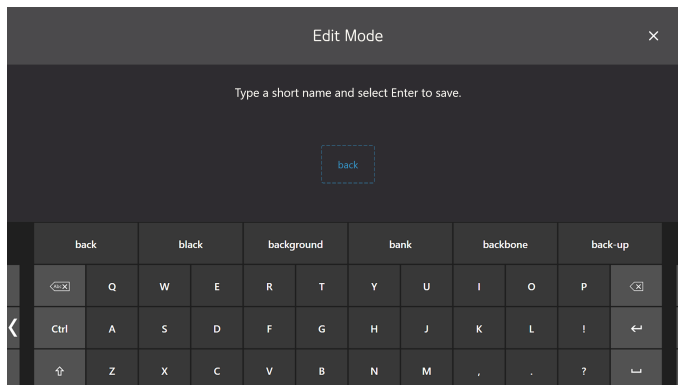


2. Veldu Enter/færslulykil á lyklaborðinu til að samþykkja textann.

5.2.5.3.4 Breyta tákni

Til að breyta tákni, skaltu fylgja þessu ferli:

1. Veldu tiltækt tákni.

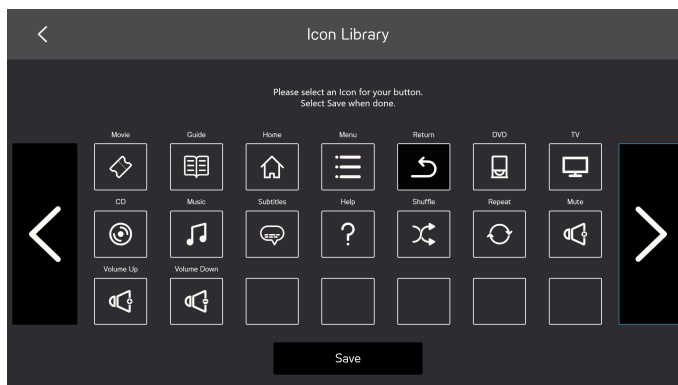


2. Veldu **vista** hnappinn til að samþykkja táknið.

5.2.5.4 Gera breytingar á fyrirliggjandi óforrituðum hnappi


Til að gera breytingar á fyrirliggjandi óforrituðum hnappi, skaltu fylgja þessu ferli:

Gera breytingar á fyrirbyggjandi óforrituðum hnappi skrefalisti

1. Veldu  (breytingarstilling) hnappinn.

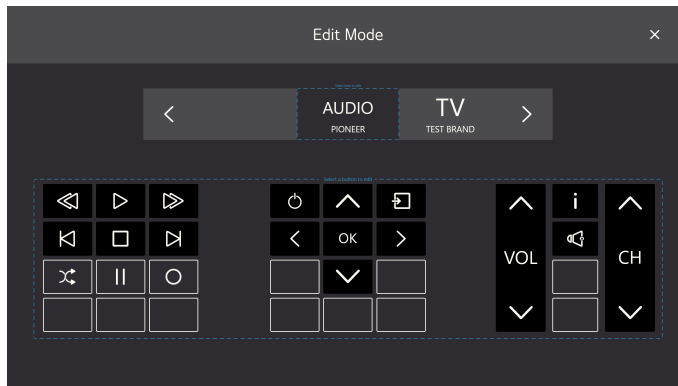

2. Veldu hnapp, með gráum bakgrunni og tákni eða texta, t.d. , í „veldu hnapp til að breyta“ kassanum í kringum fjarstýringarhnappana.
3. Veldu eina eftirfarandi aðgerða
 - Forrita, sjá 5.2.5.4.1 Forrita, síða 56
 - Breyta texta, sjá 5.2.5.3.3 Breyta texta, síða 54
 - Breyta tákni, sjá 5.2.5.3.4 Breyta tákni, síða 55
 - Hreinsa hnapp, eyðir öllum upplýsingum sem geymdar eru á hnappinum.

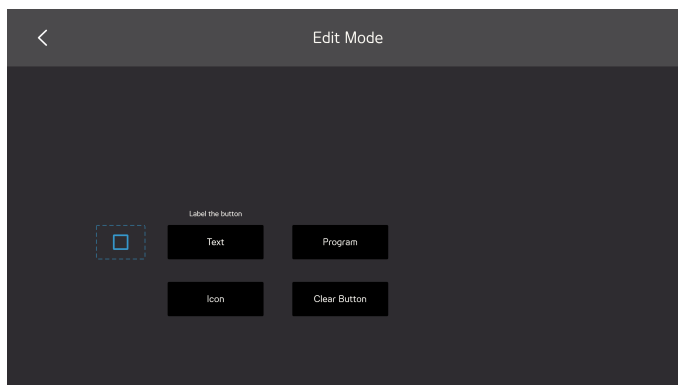


4. Veldu  táknid til að fara úr breytingarstillingu.

5.2.5.4.1 Forrita


Til að forrita merki fyrir hnapp, skaltu fylgja þessu ferli:

Forrita skrefalisti

1. Beindu fjarstýringunni að Tobii Dynavox IR móttakara og ýttu á óskaðan hnapp á fjarstýringunni sem þú vilt að Virtual Remote læri.

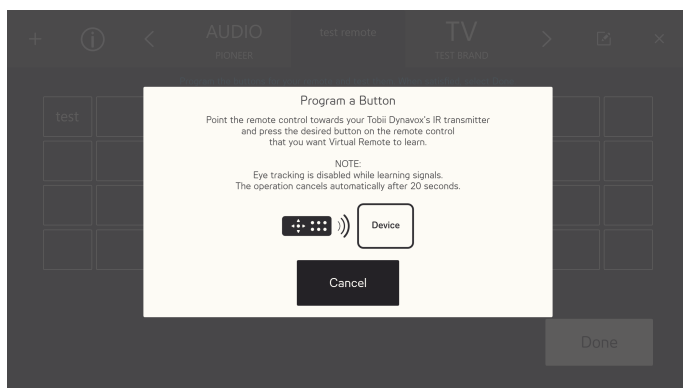

2. Þegar merkið er vistað í Virtual Remote birtist **lokið** sprettiglugginn.

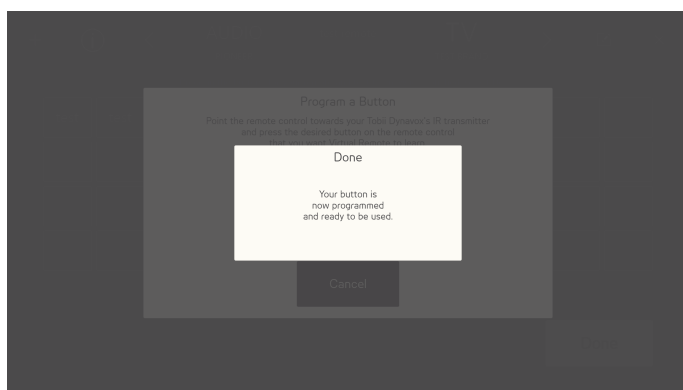


Sprettiglugginn lokast sjálfkrafa eftir nokkrar sekúndur.

5.2.5.5 Bæta við nýjum hnappi á tómt svæði


Til að bæta við nýjum hnappi á tómt svæði, skaltu fylgja þessu ferli:

Bæta við nýjum hnappi á tómt svæði skrefalisti

1. Veldu  (breytingarstilling) hnappinn.

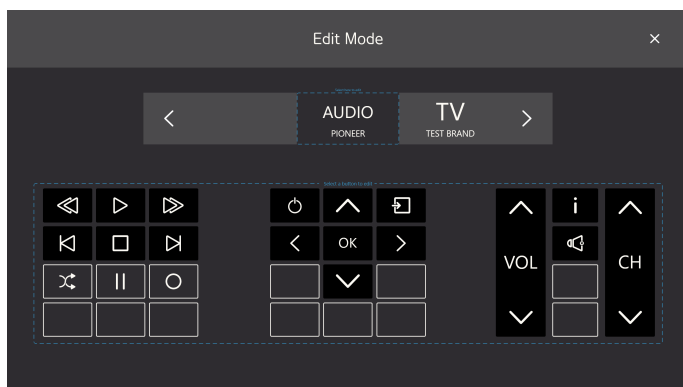


2. Veldu hnapp, með gráum bakgrunni og sem er tómur, t.d. , í „veldu hnapp til að breyta“ kassanum í kringum fjarstýringarhnappana.
3. Veldu eina eftirfarandi aðgerða
 - Breyta texta, sjá 5.2.5.3.3 *Breyta texta, síða 54*
 - Breyta tákni, sjá 5.2.5.3.4 *Breyta tákni, síða 55*

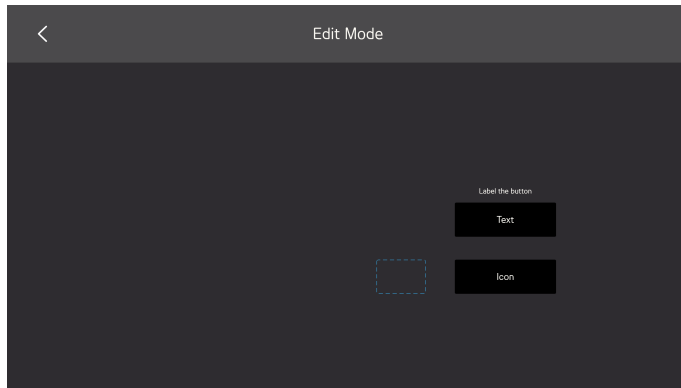

4. Veldu  táknið til að fara úr breytingarstillingu.


5.2.6 Upplýsingar

Á upplýsingasiðunni getur þú fundið upplýsingar um allar útgáfur vélbúnaðarins og mismunandi hugbúnaði.

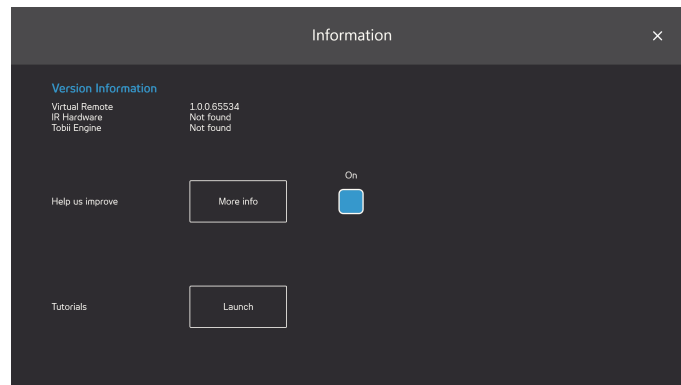

Hjálpaðu okkur að bæta: Til að hjálpa Tobii Dynavox að bæta hugbúnaðinn stillirðu á **kveikt**. Veldu frekari upplýsingar

hnappinn til að opna síðu með upplýsingum um hvað þetta snýst allt um. Fyrir frekari upplýsingar, sjá *Skýringarmynd 5.8 Gagnasöfnun*, síða 59.

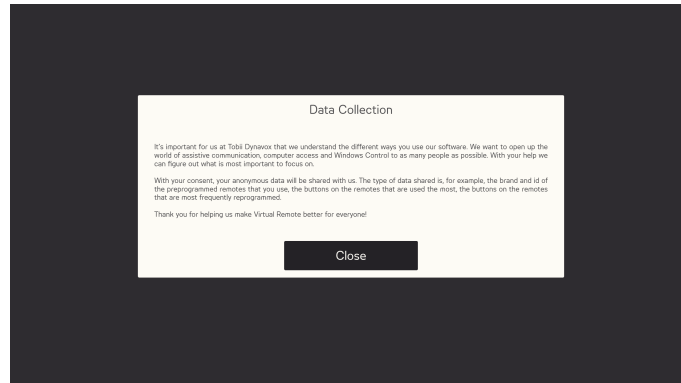

Skýringarmynd 5.8 Gagnasöfnun

Kennsluefni: Þú getur líka kveikt á Virtual Remotekennsluefninu með því að velja **ræsa** hnappinn.

Höfundaréttur ©Tobii AB (publ). Skýringarmundir og tæknilysingar eiga ekki endilega við vörur og þjónustu sem eru til boðs á hverjum staðbundnum markaði. Tæknilysingar geta breyst án fyrirvara. Öll önnur vörumerki eru í eigu hlutaðeigandi eiganda.

Stuðningur fyrir Tobii Dynavox tækið þitt

Fáðu hjálp á netinu

Sjáðu vörusértækar stuðningssíður fyrir Tobii Dynavox tæki þitt. Hún inniheldur dagréttar upplýsingar um vandamál og ábendingar og ráð sem tengjast vörinni. Finndu stuðningssíður okkar á netinu á: www.TobiiDynavox.com/support-training

Hafðu samband við sölufulltrúa þinn eða endursöluaðila

Sérðu með spurningar eða vandamál varðandi vöruna, skaltu hafa samband við sölufulltrúa Tobii Dynavox eða heimilaðan endursöluaðila. Þeir hafa mesta þekkingu á persónulegri uppsetningu þinni og eiga þess vegna best með að hjálpa þér með ábendingum og þjálfun í notkun vörunnar. Tengiliðaupplýsingar færðu hjá: www.TobiiDynavox.com/contact