

# Communicator 5 Accessible Apps - Accessible YouTube: Kurzanleitung

Dieses Dokument enthält Anweisungen zur Nutzung des YouTube-Seitensets innerhalb der Communicator 5 Accessible Apps zum Streamen von Videoinhalten auf YouTube.

**Anforderungen:** Der Anwender braucht kein YouTube/Google Konto, um Accessible YouTube zu nutzen. Der Anwender kann sich jedoch mit dem Google Konto anmelden, um einen Verlauf und persönliche Empfehlungen zu bekommen sowie sich mit anderen Geräten zu synchronisieren. Zudem ist ein Internetzugang erforderlich.

**Hinweis:** Schauen Sie für Anweisungen zum Einrichten der Communicator 5 Startseite mit den Accessible Apps Seitensets in das Dokument **Quick Guide - Getting Started with Communicator 5 Accessible Apps**

## Accessible YouTube starten



Communicator 5 starten



Wählen Sie auf der Communicator 5 Startseite Accessible YouTube aus.



Das Accessible YouTube Seitenset erscheint am linken Bildschirmrand.

YouTube Startseite öffnen.

- Wenn Sie sich bereits zuvor angemeldet haben, wird die persönliche YouTube Startseite geöffnet.
- Besitzt der Anwender ein Google Konto und möchte sich mit diesem anmelden, erfolgt dieses unter **Anmelden und Info** unterhalb.

Melden Sie sich hier bei YouTube an, wenn Sie sich zuvor abgemeldet haben oder es zum ersten Mal nutzen.


*Schauen Sie in den Abschnitt **Bei Accessible YouTube anmelden für weitere Informationen.***

Führt auf die Communicator 5 Startseite zurück.

## Bei Accessible YouTube anmelden

Nachdem Sie **Anmelden und Info** ausgewählt haben, bietet die Seite am linken Bildschirmrand Felder zum Anmelden, Abmelden und weitere Funktionen. **Hinweis:** Das Anmelden ist bei YouTube optional.

	<p>Öffnet die Hauptseite (links) und die YouTube Startseite (rechts).</p>
	<p>Öffnet die Accessible YouTube Trainingskarten (Englisch)</p>
	<p>Öffnet die Google Kontoseite</p>
	<p>Von Google/YouTube abmelden</p>
	<p>Führt auf die Communicator 5 Startseite zurück.</p>

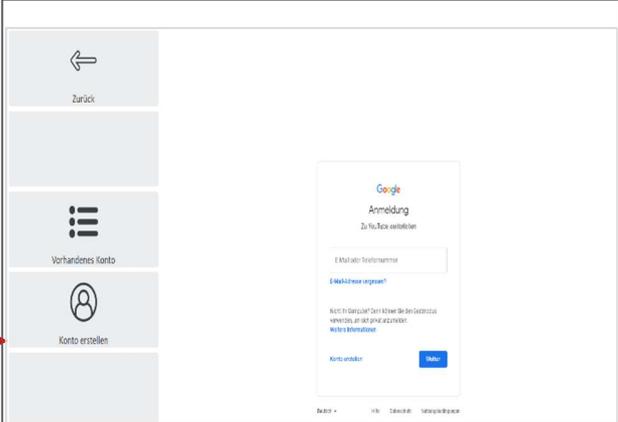

- **Vorhandenes Konto** – ermöglicht Anwender, ein vorhandenes Konto auf der rechten Seite auszuwählen
- **Konto erstellen** – ein anderes Konto benutzen und Hinweise zum Anmelden befolgen.

## Navigieren und schauen von YouTube Videos

Nach dem Starten von Accessible YouTube bietet die Seite Felder für sämtliche Funktionen in YouTube auf eine einfache Weise an.

 <p>Menü</p>	 <p>Legendary Ball Controls Sportal ID</p>	 <p>BAUERNWITZE - Die besten Tractorsprüche Vario vs John Deere Einfach Bauer</p>	 <p>Feast Your Eyes on The New Microsoft iPad Fighter Unbox Therapy</p>
 <p>Auswählen</p>	 <p>Die spektakulärsten Häuser der Welt Interessante Fakten</p>	 <p>AMAZING MOMENT guy JOINS singing Perfect by Ed Sheeran in Italian   Allie Sherlock Allie Sherlock</p>	 <p>More</p>
 <p>Liste nochmal laden</p>			

## Haupt-Bedienseite

The diagram shows a vertical menu on the left with four items: 'Menü' (three horizontal lines), 'Auswählen' (a red starburst icon), and 'Liste nochmal laden' (a red circular arrow icon). Callout boxes describe their functions. To the right, a video grid is shown with a red arrow pointing to the 'Auswählen' button. The video grid contains several video thumbnails, including one with a 'PAUSE' button and another with a 'PLAY' button.

**Menü**  
Wechselt zur Menüseite  
*Schauen Sie in den Abschnitt Menüseite für weitere Informationen*

**Auswählen**  
Öffnet die Seite **Video auswählen**

**Liste nochmal laden**  
Lädt das Videoraster erneut.

- Alle Videos können mit Verweilen ausgewählt werden
- Bestimmtes Video auswählen und öffnen
- **Pause** – deaktiviert Verweilen auf Videos, um mehr Zeit bei der Auswahl zu bieten und kehrt auf die Haupt-Bedienseite zurück
- **Gehe zur Video Seite** – wechselt beim geöffneten Video in die Vollbildansicht und öffnet die **Video Seite** (*Schauen Sie in den Abschnitt Videoseite für weitere Information*)

## Menüseite

The diagram shows a vertical menu with six items: 'Zurück' (left arrow), 'Startseite' (house icon), 'Suche' (magnifying glass), 'Verlauf' (clock with arrow), 'Werkzeuge' (gears), 'Einstellungen' (gear), and 'Ausgang' (house with window icon). Callout boxes describe their functions. A text box on the left explains the search history feature.

**Zurück**  
Zurück zur vorherigen Seite.

**Startseite**  
Öffnet die Startseite von YouTube

**Suche**  
Öffnet die Communicator 5 Tastatur zum Eingeben des Suchbegriffs.

**Verlauf**  
Wenn der Anwender angemeldet ist, wird hier der Nutzungsverlauf in einem Raster angezeigt zum Suchen und Auswählen.  
Ist der Anwender nicht angemeldet, wird hier die YouTube Startseite angezeigt.

**Werkzeuge**  
Lautstärke anpassen, automatisches Vorlesen an/aus und mehr  
(Schauen Sie in das Dokument **Quick Guide - Communicator 5 Accessible Apps - Utilities and Options für weitere Informationen**)

**Einstellungen**  
Lautstärke anpassen, automatisches Vorlesen an/aus und mehr  
(Schauen Sie in das Dokument **Quick Guide - Communicator 5 Accessible Apps - Utilities and Options für weitere Informationen**)

**Ausgang (zur Communicator Startseite)**  
Führt auf die Communicator 5 Startseite zurück.

Wiederherstellen von YouTube, schließen von weiteren Fenstern und mehr  
(Schauen Sie in das Dokument **Quick Guide - Communicator 5 Accessible Apps - Utilities and Options für weitere Informationen**)

## Videoseite

