


## Skapa från en tom sida i Boardmaker 7: Snabbguide

Att skapa från en tom sida gör det möjligt att skräddarsy aktiviteter. Denna snabbguide ger dig instruktioner för hur du skapar en Boardmaker-aktivitet från en tom sida.

1. Klicka på **Ny** från instrumentpanelen.

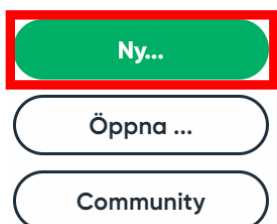


2. Välj **Tomma**.

3. Välj vilken av de tomma mallarna du vill ha för att få önskat format.




Interaktiv är för aktiviteter som är tänkta att spela upp på en dator.

4. Välj **Skapa**.

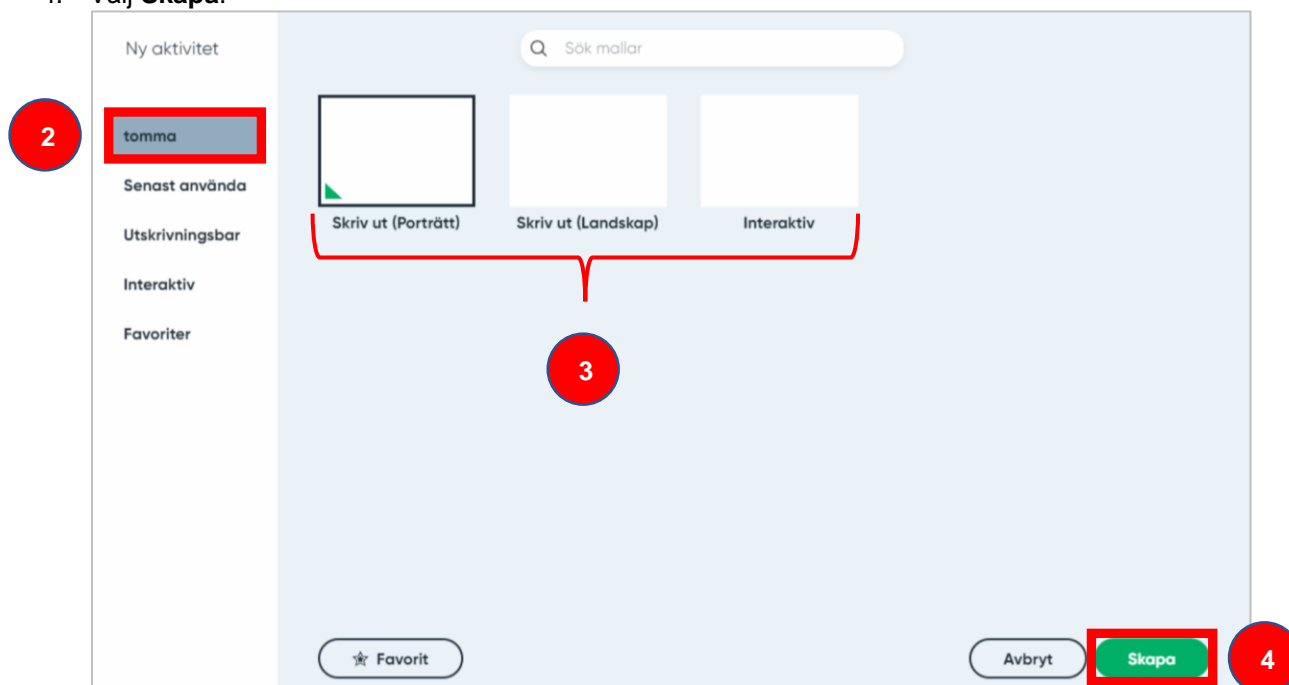


## Skapa knappar på en tom sida

1. Välj verktyget **Formor** och klicka på en specifik knappform om du önskar att använda en sådan.

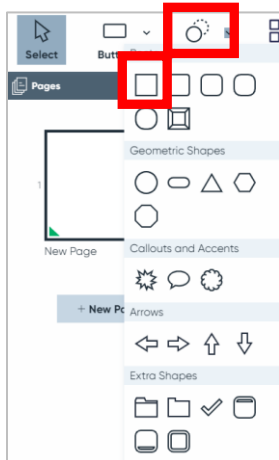


💡 Du kan också ändra knappformen senare under egenskaper.

2. Klicka annars på verktyget **Knapp** och välj knapptyp.

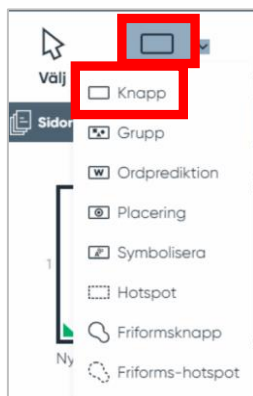


💡 Se Boardmaker 7-manualen för mer information om de olika knapptyperna.

3. Klicka i det vita området för att skapa en knapp.
4. Dra i knappens kanter för att ändra storleken på knappen.
5. Klicka och dra i knappen till önskad plats på sidan.

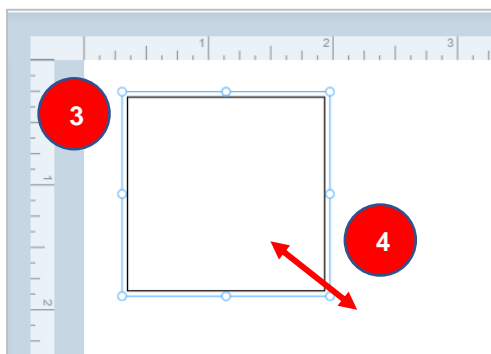


6. För att duplicera knappen, välj verktyget **Spreja**.
7. Placera din muspekare på den knapp du har skapat. Klicka och dra musen över sidan för att spreja ett rutnät med knappar.

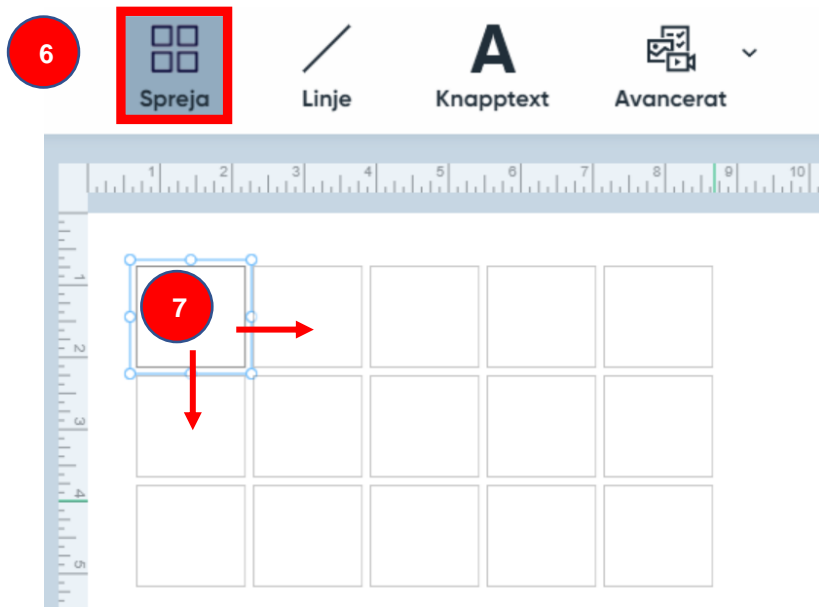


💡 Markerade knappar har en blå ram runt sig. En knapp måste vara markerad för att kunna redigeras.

## Lägg till innehåll på knappen


1. Klicka på en **knapp** och skriv en knapptext med ditt tangentbord. Klicka på **Enter** på tangentbordet.

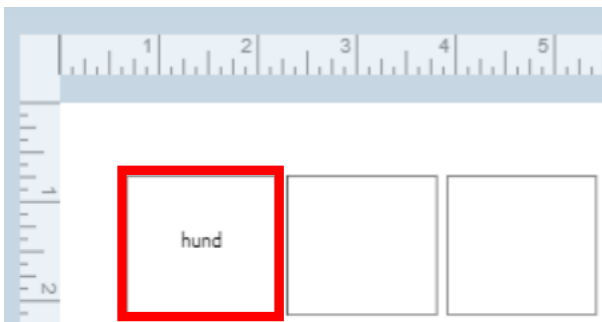


2. Välj en bild att lägga till på knappen.
  - a. För att lägga till en symbol, välj **önskad symbol** under fliken **Symboler**.
  - b. För att lägga till en digital bild från internet, klicka på fliken **Webb** och välj en **internetbild**.
  - c. För att lägga till en bild från din dator, klicka på **Från fil** och välj en digital bild från din dator.
3. Klicka på **Välj**. Det här tillvägagångssättet för att lägga till en bild kallas "Redigera på stället".

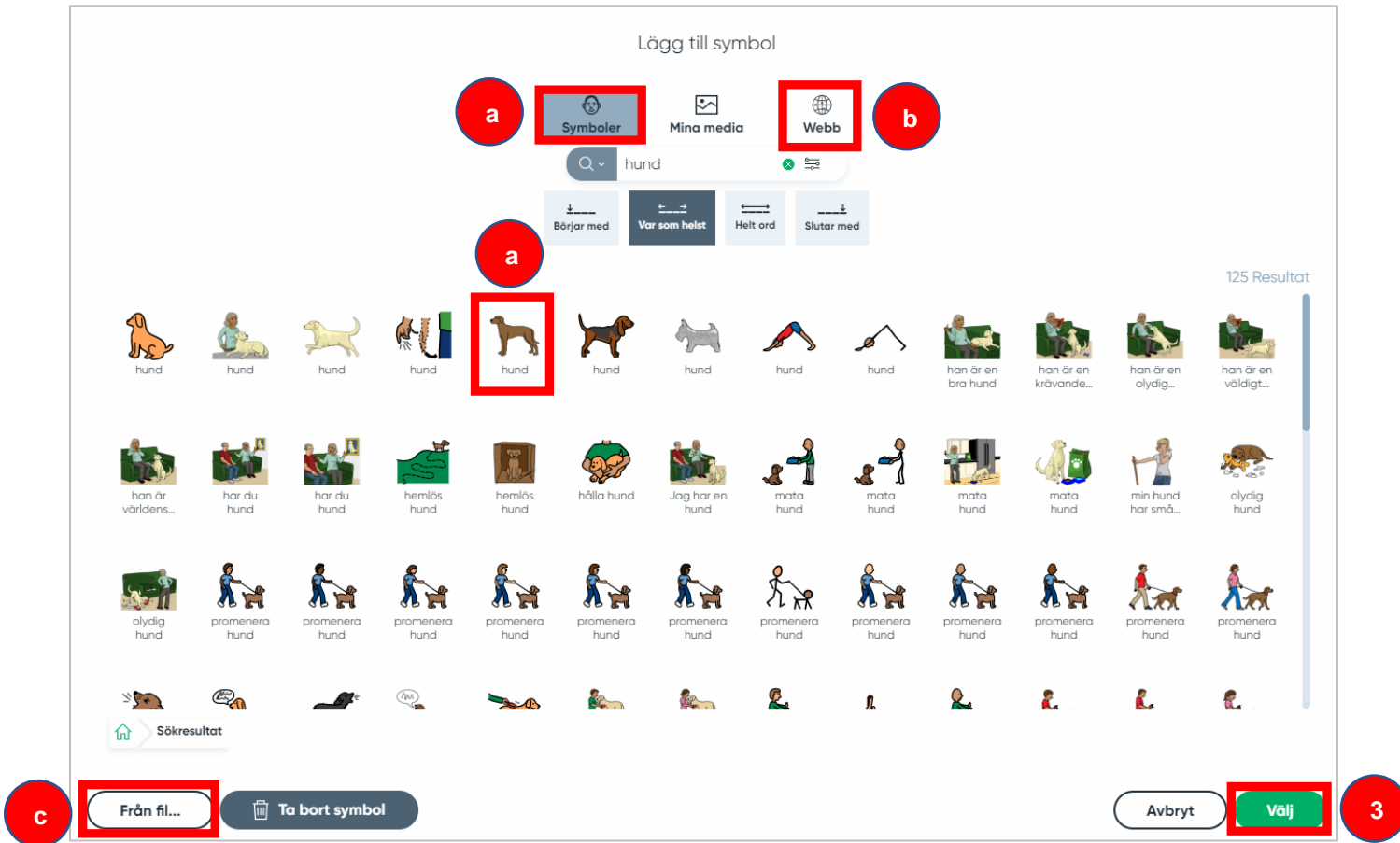

4. Upprepa steg 1-3 för att fylla i alla knappar på sidan.
5. För att spara din aktivitet, klicka på de **tre linjerna** högst upp i det vänstra hörnet. Välj **Spara som...**

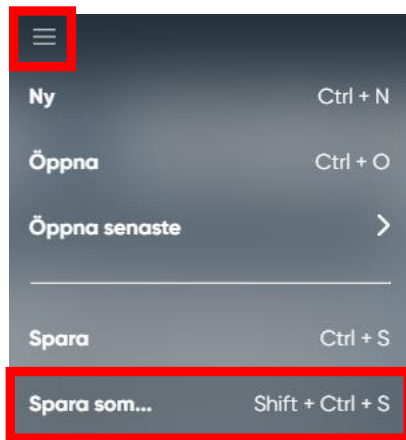

 Se andra snabbguider för mer information om knappegenskaper, åtgärder och inställningar.